



**bucher**  
*Coaching Systems*

## **Manuel BCS**

**Manuel d'utilisation des  
systèmes de coaching Bucher**

Version du logiciel : 6.25.5

Version du manuel : V029 · Révision française : 17 septembre 2026

### **Public cible :**

Utilisateurs, coaches, thérapeutes

### **Éditeur :**

**Bucher GmbH,**

Schloßstraße 30, 73572 Heuchlingen, Allemagne

### **Contact et assistance :**

**Questions relatives au contenu de l'application :**

Veillez contacter votre partenaire de service BCS.

**Pour toute question technique ou en cas de dysfonctionnement :**

Veillez contacter Bucher GmbH.

**Courriel : [support@buchergmbh.de](mailto:support@buchergmbh.de)**

### **SITE WEB :**

[www.buchergmbh.de](http://www.buchergmbh.de)

[www.bucher-vita-coach.de](http://www.bucher-vita-coach.de)

Discutez sur BCS

## Table des matières

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Informations sur Bucher GmbH et BCS.....</b>                                       | <b>7</b> |
| 1.1 Préface .....                                                                        | 7        |
| 1.2 Historique .....                                                                     | 7        |
| 1.3 Philosophie et groupes cibles .....                                                  | 7        |
| 1.4 Modèle de licence et concept d'installation.....                                     | 7        |
| <b>2 Fonctions communes de BCS .....</b>                                                 | <b>8</b> |
| 2.1 Installation et configuration.....                                                   | 9        |
| 2.1.1 Exigences d'installation : .....                                                   | 9        |
| 2.1.2 Le téléchargement (Téléchargement du logiciel) .....                               | 9        |
| 2.1.3 L'installation .....                                                               | 11       |
| 2.1.4 Activation du logiciel .....                                                       | 13       |
| 2.1.5 En cas de problème.....                                                            | 15       |
| 2.1.6 Fonctionnalités spéciales lors de l'utilisation du navigateur Microsoft Edge ..... | 15       |
| 2.1.7 Démarrage du programme et connexion .....                                          | 16       |
| 2.1.8 Aperçu de la fenêtre d'accueil.....                                                | 17       |
| 2.2 Gestion de la clientèle .....                                                        | 20       |
| 2.2.1 Objectif .....                                                                     | 20       |
| 2.2.2 Prérequis.....                                                                     | 20       |
| 2.2.3 Ouvrir la gestion des clients.....                                                 | 20       |
| 2.2.4 Création d'un nouveau client .....                                                 | 21       |
| 2.2.5 Modification des clients existants .....                                           | 21       |
| 2.2.6 Suppression des clients .....                                                      | 22       |
| 2.2.7 Recherche, tri et exportation .....                                                | 22       |
| 2.2.8 Utilisation des fonctions de protection des données .....                          | 23       |
| 2.2.9 Notes .....                                                                        | 23       |
| 2.3 Navigation générale et logique de fonctionnement.....                                | 24       |
| 2.3.1 Objectif .....                                                                     | 24       |
| 2.3.2 Prérequis.....                                                                     | 24       |
| 2.3.3 Passage de la fenêtre d'accueil aux zones principales .....                        | 24       |
| 2.3.4 Navigation dans les fenêtres principales .....                                     | 24       |
| 2.3.5 Utilisation des menus contextuels et des boutons d'accès rapide .....              | 25       |
| 2.3.6 Symboles et boutons uniformes.....                                                 | 25       |
| 2.3.7 Passage d'un produit à un autre .....                                              | 25       |
| 2.3.8 Utiliser plusieurs langues d'interface.....                                        | 26       |
| 2.3.9 Notes .....                                                                        | 26       |
| 2.4 Sauvegarde et récupération des données .....                                         | 27       |
| 2.4.1 Objectif .....                                                                     | 27       |
| 2.4.2 Prérequis.....                                                                     | 27       |
| 2.4.3 Sauvegarde automatique des données à la sortie .....                               | 27       |
| 2.4.4 Déclenchement manuel d'une sauvegarde complète .....                               | 28       |
| 2.4.5 Vérifier la sauvegarde automatique .....                                           | 28       |
| 2.4.6 Choisir un emplacement adapté pour les sauvegardes.....                            | 28       |
| 2.4.7 Créer une sauvegarde complète .....                                                | 28       |
| 2.4.8 Reprise d'urgence .....                                                            | 29       |
| 2.4.9 FAQ .....                                                                          | 29       |
| 2.4.10 Protection par mot de passe des fichiers PDF .....                                | 29       |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.11 Transfert de données depuis la version 5 précédente du BCS .....                 | 30        |
| 2.5 Discussions, séminaires et assistance .....                                         | 31        |
| 2.5.1 Objectif .....                                                                    | 31        |
| 2.5.2 Prérequis .....                                                                   | 31        |
| 2.5.3 Ouvrez une conversation et choisissez un nom .....                                | 31        |
| 2.5.4 Envoi de messages .....                                                           | 31        |
| 2.5.5 Accès aux séminaires et aux séminaires en ligne .....                             | 31        |
| 2.5.6 Utilisez la section « Actualités » .....                                          | 32        |
| 2.5.7 Contacter l'assistance .....                                                      | 32        |
| 2.5.8 Notes .....                                                                       | 32        |
| 2.6 Maintenance à distance .....                                                        | 33        |
| 2.6.1 Objectif .....                                                                    | 33        |
| 2.6.2 Prérequis .....                                                                   | 33        |
| 2.6.3 Instructions étape par étape .....                                                | 33        |
| 2.7 Distinguer la durée de transmission de la vitesse de transmission .....             | 34        |
| 2.7.1 Deux références temporelles indépendantes .....                                   | 34        |
| 2.7.2 Sélectionnez la vitesse de transmission appropriée .....                          | 34        |
| 2.7.3 Réglage de la durée de transmission .....                                         | 34        |
| 2.7.4 Règle abrégée et exemple .....                                                    | 35        |
| <b>3 Chapitres spécifiques aux produits .....</b>                                       | <b>36</b> |
| 3.1 Bucher Vita Coach .....                                                             | 36        |
| 3.1.1 Introduction et fonctionnalités spéciales .....                                   | 36        |
| 3.1.2 Premiers pas (connexion, interface et création de clients) .....                  | 42        |
| 3.1.3 Effectuer une analyse de résonance (scan) .....                                   | 52        |
| 3.1.4 Évaluer et hiérarchiser les résultats .....                                       | 58        |
| 3.1.5 Planifier les paquets de coaching et le déroulement des séances .....             | 63        |
| 3.1.6 Imprimer le paquet ou les résultats, ou les enregistrer en PDF .....              | 67        |
| 3.1.7 Transfert des paquets vers le champ d'information .....                           | 68        |
| 3.1.8 Diffusion collective .....                                                        | 72        |
| 3.1.9 Exportation des paquets .....                                                     | 75        |
| 3.1.10 Évaluation des résultats d'analyse à l'aide de l'intelligence artificielle ..... | 77        |
| 3.1.11 Suppression des paquets .....                                                    | 77        |
| 3.2 Bucher Aura Coach .....                                                             | 78        |
| 3.2.1 Vue d'ensemble .....                                                              | 78        |
| 3.2.2 Prérequis .....                                                                   | 79        |
| 3.2.3 Sélection des clients .....                                                       | 80        |
| 3.2.4 Paramètres de catégorie pour le client .....                                      | 80        |
| 3.2.5 Effectuer un scan d'aura .....                                                    | 81        |
| 3.2.6 Affichage et compréhension des résultats .....                                    | 83        |
| 3.2.7 Harmonisation et transmission .....                                               | 87        |
| 3.2.8 Utilisation du mode automatique .....                                             | 88        |
| 3.3 Corpus Analyser .....                                                               | 96        |
| 3.3.1 Aperçu et utilisation prévue .....                                                | 96        |
| 3.3.2 Prérequis, installation et configuration .....                                    | 96        |
| 3.3.3 Paramètres de base du Corpus Analyser .....                                       | 98        |
| 3.3.4 Fondements techniques .....                                                       | 99        |
| 3.3.5 Préparation des clients .....                                                     | 100       |
| 3.3.6 Préparer l'analyse .....                                                          | 102       |
| 3.3.7 Utiliser la technique des scans d'évolution .....                                 | 104       |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3.8 Effectuer une analyse .....                                                    | 106 |
| 3.3.9 Évaluation des scans d'évolution .....                                         | 107 |
| 3.3.10 Afficher et sélectionner les résultats de l'analyse .....                     | 108 |
| 3.3.11 Classer et analyser les résultats d'un point de vue professionnel .....       | 111 |
| 3.3.12 Harmonisation et transmission .....                                           | 112 |
| 3.3.13 Création de rapports et évaluation de l'IA dans Corpus Analyser .....         | 115 |
| 3.3.14 Création, échange et utilisation des filtres de focus .....                   | 118 |
| 3.3.15 Gestion des analyses et des résultats .....                                   | 119 |
| 3.3.16 Erreurs courantes et solutions .....                                          | 120 |
| 3.3.17 FAQ concernant Corpus Analyser .....                                          | 121 |
| 3.4 Bucher TAO Medical .....                                                         | 123 |
| 3.4.1 Aperçu et utilisation prévue .....                                             | 123 |
| 3.4.2 Modèle technique de fonctionnement .....                                       | 124 |
| 3.4.3 Prérequis et paramètres de base .....                                          | 125 |
| 3.4.4 Préparer les données du client et le focus .....                               | 126 |
| 3.4.5 Effectuer un scan TAO .....                                                    | 127 |
| 3.4.6 Comprendre le résultat du Yi Jing .....                                        | 128 |
| 3.4.7 Utilisation de la liste des points d'acupuncture .....                         | 129 |
| 3.4.8 Significations et zones d'information complémentaires .....                    | 130 |
| 3.4.9 Utilisation d'images et de vidéos fractales .....                              | 131 |
| 3.4.10 Envoi et application énergétique .....                                        | 131 |
| 3.4.11 Rapports et évaluations de l'IA .....                                         | 133 |
| 3.4.12 Utilisation du mode automatique TAO optionnel .....                           | 134 |
| 3.4.13 Gestion, exportation et sauvegarde des analyses .....                         | 135 |
| 3.4.14 Foire aux questions et dépannage .....                                        | 135 |
| 3.5 Bucher Bioresonanz Triselect FE .....                                            | 137 |
| 3.5.1 Aperçu et utilisation prévue .....                                             | 137 |
| 3.5.2 Modèle de travail énergétique .....                                            | 138 |
| 3.5.3 Prérequis et paramètres de base .....                                          | 138 |
| 3.5.4 Préparer le client et le focus .....                                           | 140 |
| 3.5.5 Effectuer une analyse Triselect .....                                          | 141 |
| 3.5.6 Comprendre les résultats et les utiliser dans le dialogue avec le client ..... | 142 |
| 3.5.7 Utilisation des programmes d'indication .....                                  | 144 |
| 3.5.8 Transmission et régulation énergétique .....                                   | 145 |
| 3.5.9 Rapports et évaluations de l'IA .....                                          | 147 |
| 3.5.10 Utilisation du mode automatique Triselect en option .....                     | 148 |
| 3.5.11 Gestion et sauvegarde des analyses .....                                      | 148 |
| 3.5.12 Erreurs courantes et solutions .....                                          | 149 |
| 3.5.13 FAQ sur Bucher Bioresonanz Triselect FE .....                                 | 150 |
| 3.6 Bucher Stress Balance .....                                                      | 151 |
| 3.6.1 Aperçu et utilisation prévue .....                                             | 151 |
| 3.6.2 Principe de fonctionnement et symbolisme .....                                 | 151 |
| 3.6.3 Prérequis et préparation .....                                                 | 152 |
| 3.6.4 Réglage des paramètres de Stress Balance .....                                 | 153 |
| 3.6.5 Effectuer une séance manuelle avec Stress Balance .....                        | 154 |
| 3.6.6 Classification des indicateurs de stress et retour d'information .....         | 156 |
| 3.6.7 Utilisation du mode automatique .....                                          | 157 |
| 3.6.8 Création et exportation d'un rapport .....                                     | 158 |
| 3.6.9 Stress Balance dans les autres processus BCS .....                             | 159 |
| 3.6.10 Utilisation responsable .....                                                 | 159 |
| 3.6.11 Erreurs courantes et solutions .....                                          | 160 |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.6.12 FAQ sur Bucher Stress Balance .....                                                        | 160        |
| <b>4 Modules complémentaires communs à plusieurs produits .....</b>                               | <b>162</b> |
| 4.1 Évaluation de l'IA : Utilisation de l'intelligence artificielle dans le BCS .....             | 162        |
| 4.1.1 Vue d'ensemble .....                                                                        | 162        |
| 4.1.2 Objectif de l'évaluation de l'IA .....                                                      | 162        |
| 4.1.3 Protection des données et principes fondamentaux .....                                      | 162        |
| 4.1.4 Prérequis .....                                                                             | 163        |
| 4.1.5 Consigner de manière significative les diagnostics et les symptômes .....                   | 163        |
| 4.1.6 Recréer l'évaluation de l'IA à partir d'informations supplémentaires .....                  | 164        |
| 4.1.7 Messages d'invite standard dans BCS .....                                                   | 164        |
| 4.1.8 Quelles invites conviennent à quel usage .....                                              | 165        |
| 4.1.9 Processus d'évaluation de l'IA .....                                                        | 165        |
| 4.1.10 Vérification et modification des réponses de l'IA .....                                    | 167        |
| 4.1.11 Utilisation d'invites personnalisées .....                                                 | 168        |
| 4.1.12 Activer et nommer l'invite individuelle .....                                              | 168        |
| 4.1.13 Espaces réservés dans les invites individuelles .....                                      | 171        |
| 4.1.14 Utilisation des invites individuelles dans la zone « Envoyer/Rapports » .....              | 171        |
| 4.1.15 Enregistrement et chargement d'ensembles d'invites individuels sur le serveur Bucher ..... | 172        |
| 4.1.16 Enregistrer un jeu de prompts sur le serveur Bucher .....                                  | 173        |
| 4.1.17 Rendre l'ensemble d'invites accessible aux autres utilisateurs .....                       | 175        |
| 4.1.18 Charger un jeu de prompts .....                                                            | 175        |
| 4.1.19 Visibilité des ensembles d'invites .....                                                   | 176        |
| 4.1.20 Protection des données dans les jeux de prompts .....                                      | 176        |
| 4.1.21 Erreurs courantes et solutions pour les ensembles d'invites .....                          | 177        |
| 4.1.22 FAQ sur les jeux de prompts .....                                                          | 178        |
| 4.1.23 Impression et sortie PDF .....                                                             | 178        |
| 4.1.24 Directives pour une utilisation responsable .....                                          | 180        |
| 4.1.25 Erreurs courantes et solutions .....                                                       | 180        |
| 4.1.26 FAQ .....                                                                                  | 181        |
| 4.2 Fonction fractale de Bucher .....                                                             | 182        |
| 4.2.1 Vue d'ensemble .....                                                                        | 182        |
| 4.2.2 Objectif de la fonction fractale .....                                                      | 182        |
| 4.2.3 Différence entre une image fractale et une vidéo fractale .....                             | 182        |
| 4.2.4 Prérequis .....                                                                             | 182        |
| 4.2.5 Création d'une image fractale .....                                                         | 183        |
| 4.2.6 Utilisation de l'image fractale avec le client .....                                        | 183        |
| 4.2.7 Création d'une vidéo fractale .....                                                         | 184        |
| 4.2.8 Utilisation de la vidéo fractale avec le client .....                                       | 188        |
| 4.2.9 Interprétation par IA d'une image fractale .....                                            | 189        |
| 4.2.10 FAQ .....                                                                                  | 189        |
| 4.3 Bucher Interblend .....                                                                       | 190        |
| 4.3.1 Vue d'ensemble .....                                                                        | 190        |
| 4.3.2 Objectif d'Interblend .....                                                                 | 190        |
| 4.3.3 Point d'entrée .....                                                                        | 190        |
| 4.3.4 Prérequis .....                                                                             | 190        |
| 4.3.5 Ouvrir la fenêtre Interblend .....                                                          | 191        |
| 4.3.6 Structure de la fenêtre Interblend .....                                                    | 191        |
| 4.3.7 Écoute et sélection de morceaux de musique .....                                            | 192        |
| 4.3.8 Création de fichiers Interblend .....                                                       | 193        |
| 4.3.9 Utiliser la musique Interblend créée .....                                                  | 193        |

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3.10 Utiliser la musique Interblend dans une vidéo fractale .....                            | 193        |
| 4.3.11 Instructions à transmettre aux clients.....                                             | 194        |
| 4.3.12 Directives pour une utilisation responsable .....                                       | 194        |
| 4.3.13 Erreurs courantes et solutions .....                                                    | 194        |
| 4.3.14 FAQ .....                                                                               | 195        |
| 4.4 Numérisation de sélection des couleurs en ligne .....                                      | 197        |
| 4.4.1 Vue d'ensemble .....                                                                     | 197        |
| 4.4.2 Prérequis .....                                                                          | 197        |
| 4.4.3 Aperçu du processus.....                                                                 | 197        |
| 4.4.4 Création d'une commande dans la gestion des clients .....                                | 198        |
| 4.4.5 Mise en œuvre par le client .....                                                        | 199        |
| 4.4.6 Récupération des sélections terminées dans BCS .....                                     | 200        |
| 4.4.7 Utilisation de la sélection de couleurs en ligne pour la numérisation d'un produit ..... | 201        |
| 4.4.8 Classification responsable des informations de sélection .....                           | 201        |
| 4.4.9 Protection des données et répartition judicieuse .....                                   | 202        |
| 4.4.10 Erreurs courantes et solutions .....                                                    | 202        |
| 4.4.11 FAQ .....                                                                               | 203        |
| <b>5 Glossaire des termes importants .....</b>                                                 | <b>204</b> |
| 5.1 Vue d'ensemble .....                                                                       | 204        |
| 5.1.1 Termes de A à Z .....                                                                    | 204        |
| <b>6 Contact et assistance .....</b>                                                           | <b>211</b> |

# 1. Informations sur Bucher GmbH et BCS

## 1.1 Préface

La plateforme Bucher Coaching Systems (BCS) est le fruit de plus de 30 ans d'expérience dans le développement de solutions logicielles pour les médecines complémentaires et le coaching. Notre objectif est de fournir aux thérapeutes, coachs et consultants un outil performant, flexible et intuitif qui les accompagne au mieux dans leur pratique quotidienne.

Toutes les désignations personnelles figurant dans ce manuel s'appliquent à tous les genres.

## 1.2 Historique

Depuis la création de Bucher GmbH en 1994, nous n'avons cessé d'améliorer nos produits. La plateforme BCS réunit aujourd'hui une large gamme de produits spécialisés autour d'une base technique commune. Grâce à une étroite collaboration avec nos utilisateurs et à la prise en compte de leurs retours, nous avons pu constamment perfectionner le logiciel et l'adapter à leurs besoins concrets.

## 1.3 Philosophie et groupes cibles

Notre philosophie consiste à regrouper tous les produits sur une plateforme unique et centralisée. Un modèle de licence flexible permet d'activer les modules nécessaires et les fonctionnalités supplémentaires. Nos clients bénéficient ainsi d'une interface utilisateur uniforme, de structures de données partagées (par exemple, la gestion des clients) et d'une évolutivité maximale.

La gamme de produits BCS est destinée à :

- Coachs et consultants
- Praticiens et thérapeutes alternatifs
- Cabinets, instituts et entreprises qui utilisent des méthodes holistiques

## 1.4 Modèle de licence et concept d'installation

Le logiciel BCS est toujours installé sous forme de package complet (version 32 bits ou 64 bits). Le système de gestion des licences active les produits et modules complémentaires achetés. De nouveaux produits ou modules peuvent être activés à tout moment par importation d'un fichier de licence, sans réinstallation. Cette approche facilite la maintenance, permet une extension rapide et garantit une documentation cohérente.

## 2 Fonctions communes de BCS

Ce chapitre décrit l'ensemble des fonctions et des domaines communs à tous les produits de la plateforme Bucher Coaching Systems (BCS). Ces principes fondamentaux constituent la base de l'utilisation de tous les produits et sont gérés de manière centralisée.



### Produktstruktur und enthaltene Module

BCS Core · Focus Editions · BCS Premium

#### PROFESSIONELLES EINSTIEGSPAKET

##### BCS Core

Breite Analysegrundlage mit integrierten Auswertungswerkzeugen.

###### ZENTRALES MODUL



Vollversion

###### INTEGRIERTE ZUSATZFUNKTIONEN

- Bucher Fraktal
- Interblend
- KI-Auswertung
- CA Sensor

###### EINORDNUNG

Empfohlen für Anwender, die ein breites, erweiterbares System für unterschiedliche Kliententhemen benötigen.

#### SPEZIALISIERTE PRODUKTPAKETE

##### BCS Focus Editions

Wählen Sie einen klar definierten Anwendungsbereich.



###### Aura Coach Focus Edition

- Aura Coach Grundprogramm
- Aura-Automatik-Modus
- Eine frei wählbare Start-Kategorie
- CA Sensor

Human · Fauna · Horse · Business · Place



###### TAO Medical Focus Edition

- Bucher TAO Medical
- TAO-Automatik-Modus
- HETU and Luoshu
- CA Sensor

Meridiane · TCM · I Ging



###### Bioresonance Triselect FE

- Bioresonance Triselect
- Bioresonanz-Automatik-Modus
- Zusatzprogramme
- CA Sensor

Testung · Frequenzen · Harmonisierung



###### Corpus Analyser Focus Edition

- Corpus Analyser
- KI-gestützte Auswertung
- CA Sensor

Körperbezogene energetische Analyse

#### KOMPLETTES PROFESSIONELLES SYSTEM

##### BCS Premium

Die wichtigsten BCS-Systeme und zentralen Optionen in einem Komplettpaket.

###### ENTHALTENE SYSTEME

-  Vollversion
-  Alle Kategorien + Automatik-Modus
-  Alle Optionen
-  Automatik-Modus + Zusatzprogramme
-  Corpus Analyser
- Bucher Stress Balance

###### INTEGRIERTE OPTIONEN UND LEISTUNGEN

Fraktal · Interblend · KI-Auswertung  
CA-Sensor · 10 Jahre Software-Pflege

Focus Editions sind Spezialpakete. Fraktal, Interblend und KI werden als integrierte Funktionen dargestellt, nicht als eigene Produktgruppen.

Quelle: BCS-Strategie-Arbeitsmappe

## 2.1 Installation et configuration

### 2.1.1 Exigences d'installation :

- Vous avez besoin d'un ordinateur Windows exécutant Windows 11. Les autres systèmes d'exploitation, tels que macOS ou Linux, ne sont pas compatibles. Un ordinateur Windows 10 peut être utilisé en dernier recours ; toutefois, le support Microsoft pour ce système d'exploitation prend fin.
- L'ordinateur ne devrait idéalement pas avoir plus de 3 ans, sinon sa vitesse de fonctionnement risque d'être lente.
- La résolution de l'écran doit être HD ou mieux encore Full HD (plus la résolution est basse, plus vous devrez faire défiler pour tout voir).
- Le processeur doit au moins avoir des performances équivalentes à celles d'un « Intel i3 », idéalement un i5 ou un i7.
- La RAM devrait être de 8 Go, ou idéalement de 16 Go.
- Le disque dur doit avoir une capacité de stockage d'au moins 512 Go et être un SSD. Une capacité de 256 Go est également possible, mais vous risquez alors de rencontrer des problèmes d'espace de stockage après quelques années.
- L'ordinateur doit être connecté à Internet de manière stable (câble Ethernet ou Wi-Fi) lors de l'installation et de l'activation. Le programme fonctionnera ensuite hors ligne. Il est possible de travailler localement avec les données existantes sans connexion Internet. Une connexion Internet est toutefois requise pour les fonctionnalités en ligne et l'envoi de courriels.

### 2.1.2 Le téléchargement (Téléchargement du logiciel)

Pour télécharger le logiciel, veuillez cliquer sur le lien suivant :


[https://buchergmbh.de/public/bcs\\_setup.exe](https://buchergmbh.de/public/bcs_setup.exe)

(Vous pouvez également vous rendre sur le site web de Bucher GmbH, [www.buchergmbh.de](http://www.buchergmbh.de) , et vous connecter à votre compte client. Utilisez l'identifiant et le mot de passe figurant dans les données de licence que Bucher GmbH vous a envoyées. Vous pourrez ensuite cliquer sur « Bucher Coaching Systems » dans la section « Téléchargements » et télécharger la dernière version.)

Si cliquer sur le lien ci-dessus n'ouvre pas de fenêtre de navigateur, veuillez copier ce lien dans votre fenêtre de navigateur (tout en haut, dans la barre d'adresse URL).

Lorsque Google Chrome s'ouvre, procédez comme suit :


Vous trouverez une petite icône en haut à droite de votre navigateur indiquant la progression du téléchargement. Lorsque le cercle bleu est plein, le téléchargement est terminé. Si vous utilisez Firefox, la procédure est identique à celle de Google Chrome. Les icônes peuvent paraître différentes, mais elles restent similaires. Si vous utilisez Microsoft Edge, une étape supplémentaire est nécessaire ; elle est décrite à la fin de ce texte.

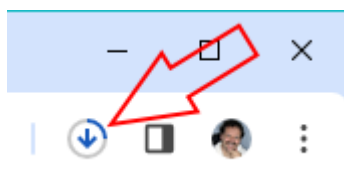

Ce symbole change une fois le téléchargement terminé et ressemble alors à ceci :




Cliquez sur cette icône pour afficher les téléchargements. Le fichier d'installation du programme devrait apparaître en haut de la liste.

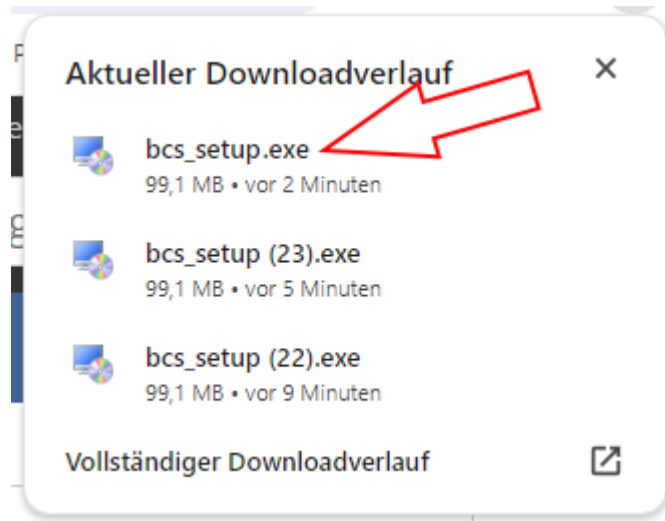

Cliquez sur cette entrée.

Un message d'avertissement de Windows apparaîtra, dans lequel vous devrez cliquer sur « Plus d'informations ».

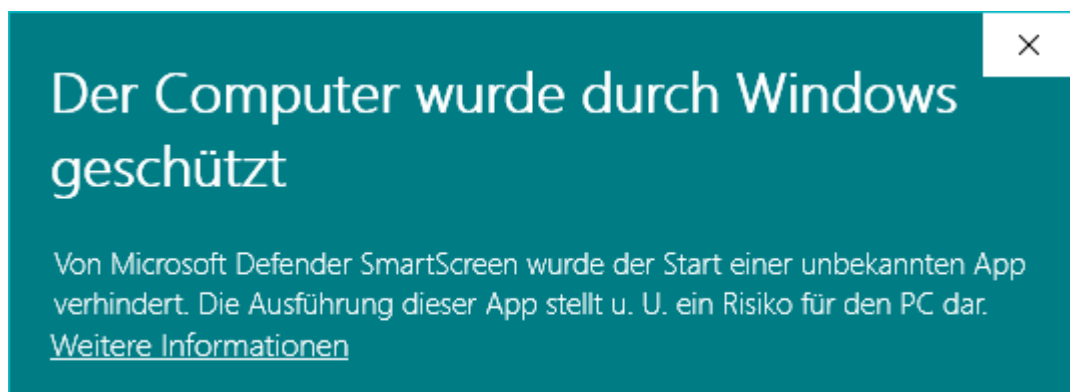

Ensuite, vous devez cliquer sur « Exécuter quand même » :




(Ce message apparaît toujours lorsqu'un programme nouvellement téléchargé est lancé.)

Un message d'avertissement concernant l'installation du fichier d'installation s'affichera alors. Vous devez cliquer sur « Oui » lorsque le message « Voulez-vous autoriser... » s'affiche.


## 2.1.3 L'installation

Le programme d'installation va maintenant apparaître et vous demander la langue d'installation (ceci n'a rien à voir avec la langue qui sera définie ultérieurement dans le programme).

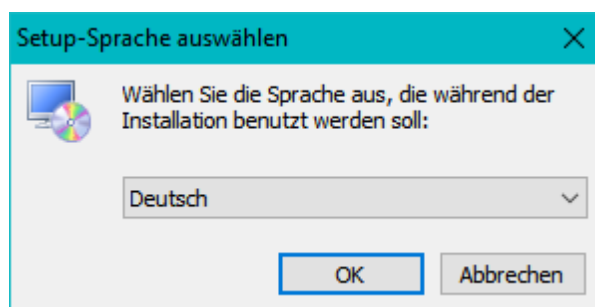


Confirmez la langue avec « OK ».

L'affichage de la fenêtre suivante prend un instant :

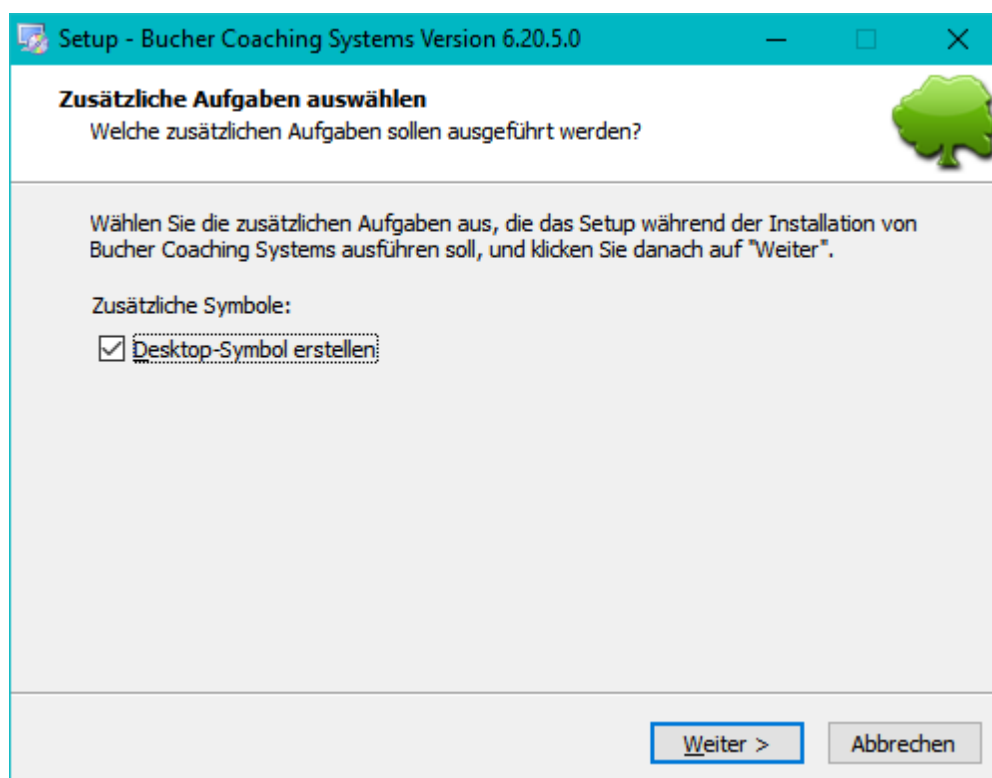


Cliquez ici et, si nécessaire, cliquez également sur « Suivant » dans les fenêtres suivantes jusqu'à ce que le bouton « Installer » apparaisse.

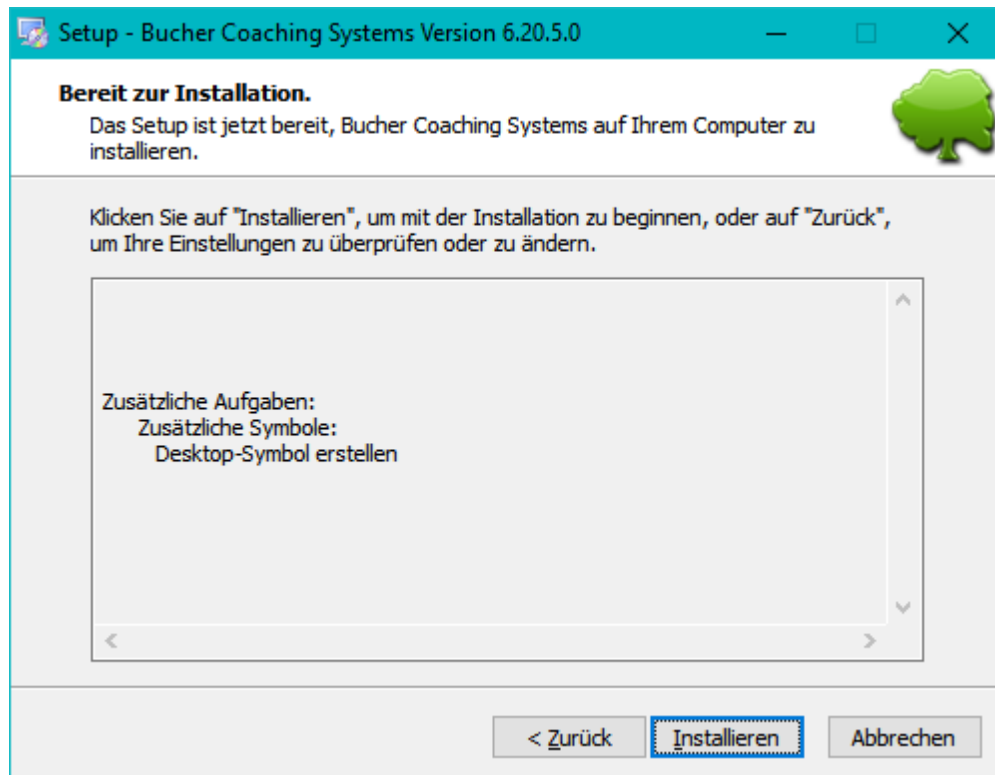


Cliquez sur « Installer » maintenant.

Le programme a besoin de quelques instants pour installer tous les fichiers sur votre ordinateur :

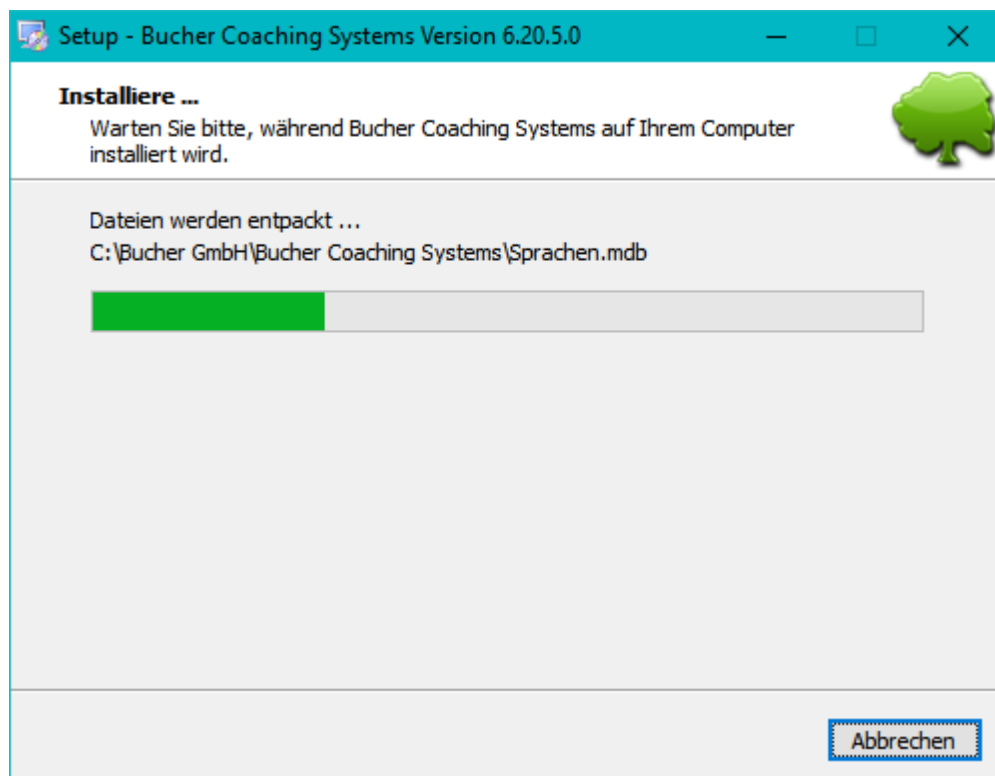

Une fois l'installation terminée, l'image suivante apparaîtra :

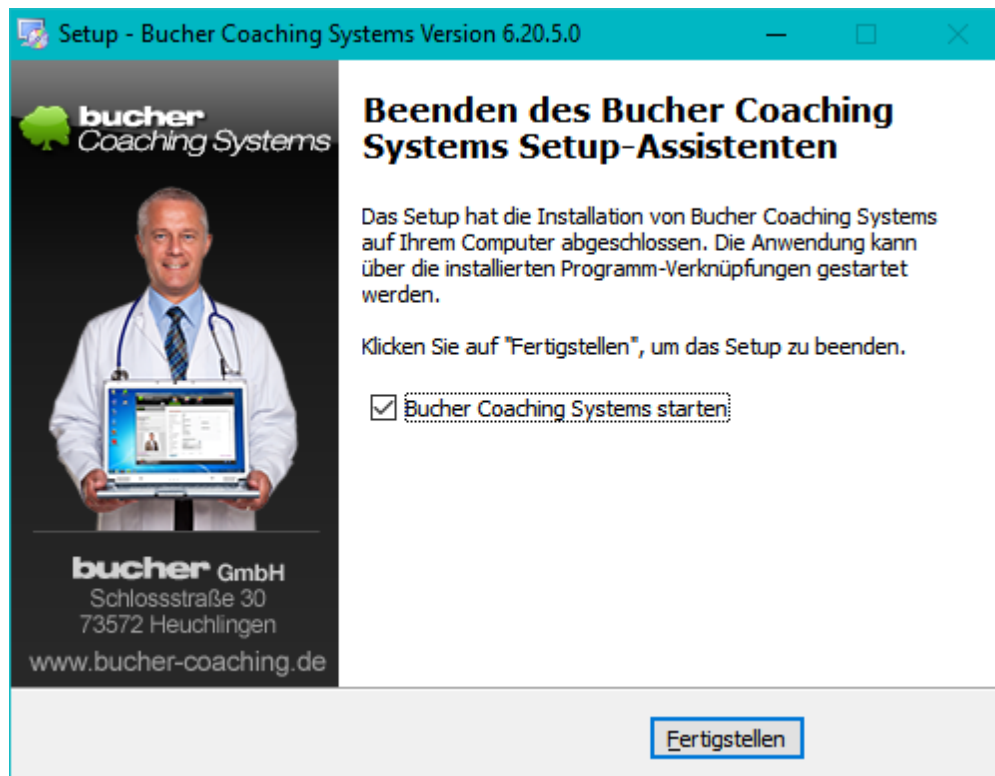


Cliquez ici sur « Terminer » pour achever l'installation. Le programme démarrera ensuite automatiquement, sauf si vous avez décoché la case.

Le programme commence toujours par un autotest.

## 2.1.4 Activation du logiciel

(Transfert de la licence sur votre ordinateur)

La fenêtre « Activer le produit » s'affiche au premier démarrage du programme.

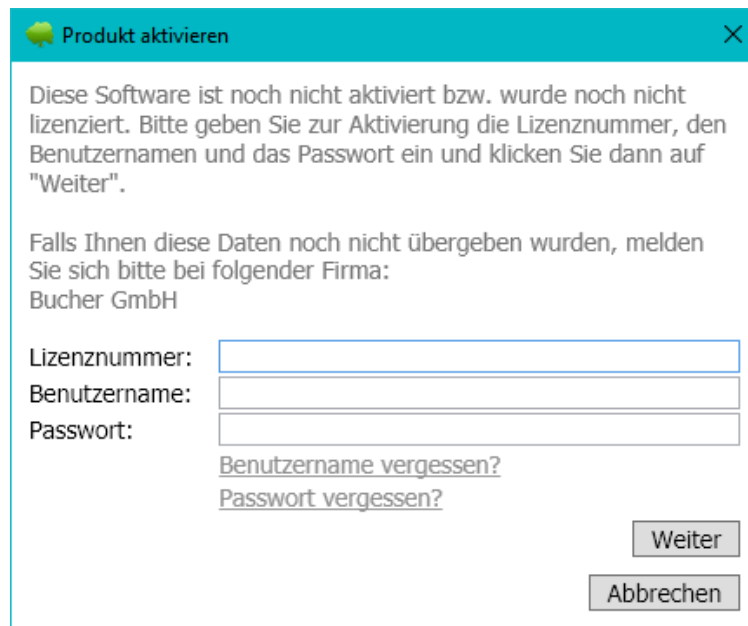

Produkt aktivieren

Diese Software ist noch nicht aktiviert bzw. wurde noch nicht lizenziert. Bitte geben Sie zur Aktivierung die Lizenznummer, den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie dann auf "Weiter".

Falls Ihnen diese Daten noch nicht übergeben wurden, melden Sie sich bitte bei folgender Firma:  
Bucher GmbH

Lizenznummer:

Benutzername:

Passwort:

[Benutzername vergessen?](#)

[Passwort vergessen?](#)

Weiter

Abbrechen

Les trois informations suivantes doivent y être saisies :


Le **numéro de licence**

Le **nom d'utilisateur** de la licence

Le **mot de passe** de la licence

Après avoir saisi ces données, cliquez sur « Suivant ».

La fenêtre suivante s'ouvrira.

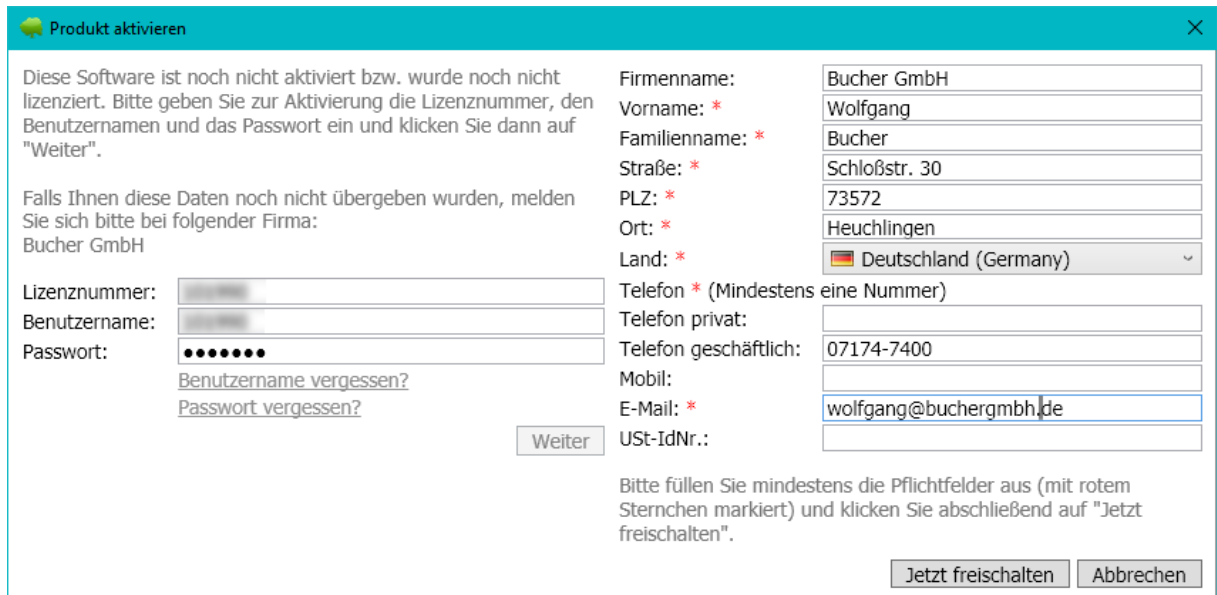

Produkt aktivieren

Diese Software ist noch nicht aktiviert bzw. wurde noch nicht lizenziert. Bitte geben Sie zur Aktivierung die Lizenznummer, den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie dann auf "Weiter".

Falls Ihnen diese Daten noch nicht übergeben wurden, melden Sie sich bitte bei folgender Firma:  
Bucher GmbH

Lizenznummer:

Benutzername:

Passwort:

[Benutzername vergessen?](#)

[Passwort vergessen?](#)

Weiter

Firmenname:

Vorname: \*

Familiennamen: \*

Straße: \*

PLZ: \*

Ort: \*

Land: \*

Telefon \* (Mindestens eine Nummer)

Telefon privat:

Telefon geschäftlich:

Mobil:

E-Mail: \*

USt-IdNr.:


Bitte füllen Sie mindestens die Pflichtfelder aus (mit rotem Sternchen markiert) und klicken Sie abschließend auf "Jetzt freischalten".

Jetzt freischalten

Abbrechen

Veuillez remplir tous les champs marqués d'un astérisque rouge. Un numéro de téléphone est obligatoire (nous ne vous appelons généralement pas, sauf en cas d'urgence).

Après avoir rempli tous les champs obligatoires, cliquez sur « Activer maintenant ». La licence sera alors activée. Le message suivant s'affichera :

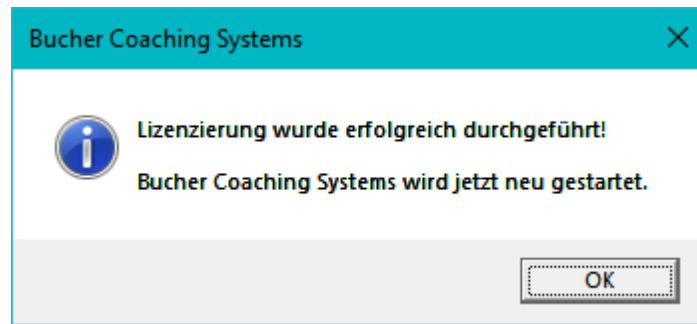

Après avoir cliqué sur « OK », le programme démarre avec toutes ses fonctions.

À l'avenir, vous pourrez cliquer sur l'icône en forme d'arbre sur le bureau pour démarrer le programme.



### 2.1.5 En cas de problème


En cas de problème de licence ou autre, veuillez contacter Bucher GmbH au +49 7174 7400. La hotline est disponible en semaine de 11h à 16h.

Vous pouvez également envoyer un courriel à [wolfgang@buchergmbh.de](mailto:wolfgang@buchergmbh.de)


### 2.1.6 Fonctionnalités spéciales lors de l'utilisation du navigateur Microsoft Edge

Si vous utilisez le navigateur Edge, vous devrez effectuer une étape supplémentaire lors du processus de téléchargement.

Ici aussi, le fichier apparaît dans le coin supérieur droit, à côté de l'icône de téléchargement.

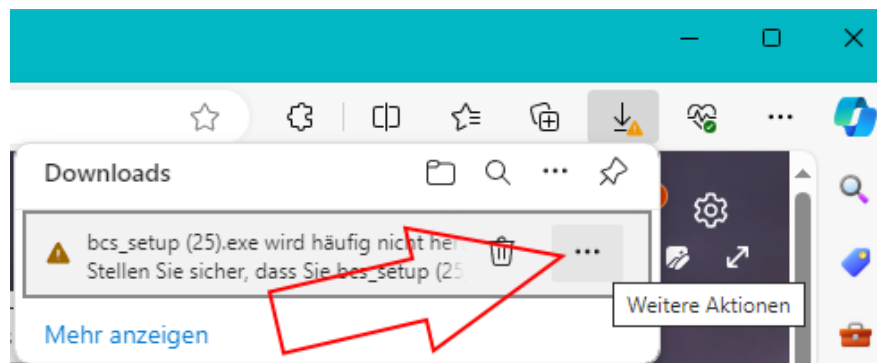


Vous devez cliquer sur les trois points. Cependant, ils n'apparaissent que lorsque vous déplacez votre souris à cet endroit. Cliquez ensuite sur ces trois points.

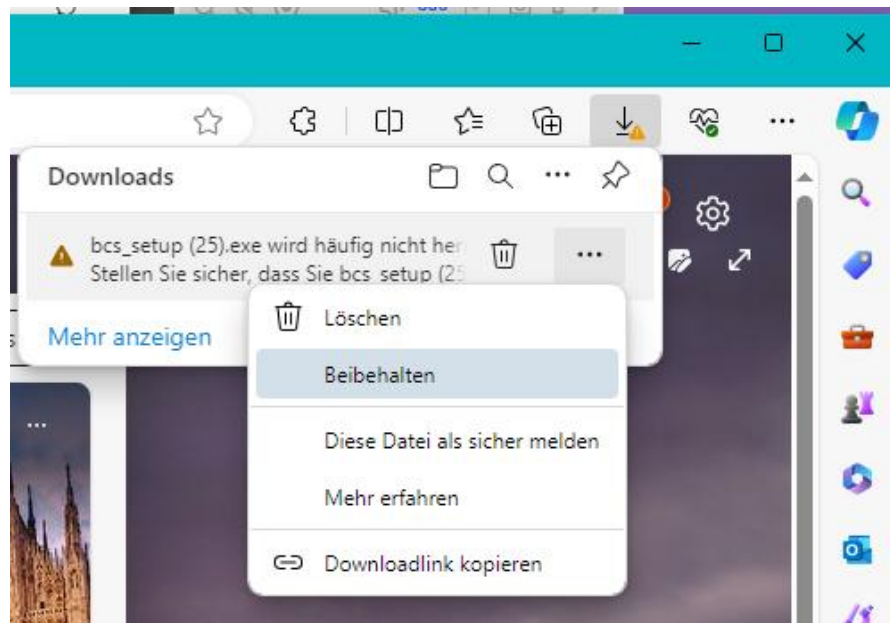

Dans le menu contextuel, cliquez sur « Conserver ». Une petite fenêtre s'ouvre. Cliquez sur « Afficher plus », puis sur « Conserver quand même ». Le fichier bcs\_setup.exe sera alors entièrement téléchargé et vous pourrez l'ouvrir après quelques instants.

Voici à quoi cela ressemble :

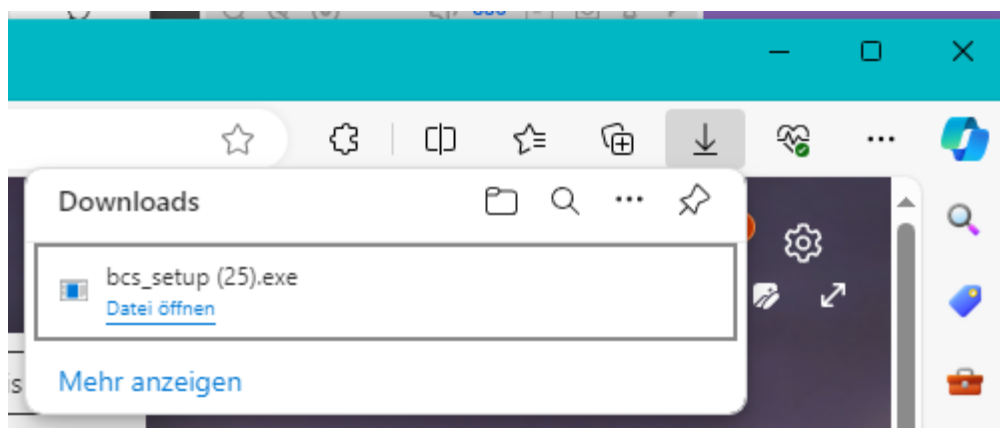

Cliquez ici sur « Ouvrir le fichier ».

Vous pouvez maintenant poursuivre l'installation comme décrit ci-dessus.

## 2.1.7 Démarrage du programme et connexion

Après l'installation, vous trouverez l'icône Bucher Coaching Systems sur votre bureau, entre autres emplacements.



Double-cliquez sur l'icône pour démarrer le programme.

- Lors du premier lancement, il vous sera peut-être demandé de saisir les détails de votre licence (voir la section 2.1 « Installation et configuration »).
- **fenêtre de bienvenue** s'ouvre comme point d'entrée principal.

L'icône BCS-Broadcast permet de consulter les diffusions en cours.

L'icône Bucher Repair Tool permet de réparer les bases de données si le programme affiche des messages d'erreur au démarrage.

## 2.1.8 Aperçu de la fenêtre d'accueil



La fenêtre d'accueil est le centre de contrôle du logiciel. Vous y trouverez :

- **Informations système** (en haut du cadre de la fenêtre) :
  - Numéro de version
  - Version 32 bits ou 64 bits
  - Numéro de licence et numéro de service
  - Nom du produit et nom de la fenêtre
- Bouton « Fonctions supplémentaires » arrondi :
  - Le bouton rond « Fonctionnalités supplémentaires », situé en haut à gauche de la fenêtre, donne accès aux paramètres, aux options de confidentialité et à d'autres fonctionnalités. Son texte indique « Fonctionnalités supplémentaires et d'aide ».
- Boutons principaux (ci-dessus) :
  - **Clients** : Créer, sélectionner, modifier et supprimer des clients
  - **Bases de données** : Importer, gérer et créer des bases de données de radionique (*visibles uniquement dans le livre Vita Coach*)
  - **Numérisation** : Effectuer des numérisations
  - **Envoi/Rapports** : Afficher, envoyer et exporter les résultats d'analyse

Aperçu du programme (côté gauche de la fenêtre) :

- Affiche les informations les plus importantes concernant le logiciel, la licence et les données.

Fonction de chat (au milieu, en bas) :

- Communiquez avec d'autres utilisateurs ou directement avec Bucher GmbH.
- Vous pouvez choisir votre propre nom de chat et envoyer des messages à tout le monde ou spécifiquement à « Bucher direct ».

Séminaires/Séminaires en ligne :

- Les séminaires actuellement proposés sont affichés à droite de l'écran, et vous pouvez vous inscrire directement.

Nouvelles:

- Vous trouverez ci-dessous les actualités et les mises à jour de Bucher GmbH concernant les séminaires.

Maintenance à distance :

- Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez démarrer une session de maintenance à distance sécurisée via le bouton « UltraViewer » (en bas à gauche).

Changement de produit :

- Si vous avez acquis des licences pour plusieurs produits, vous pouvez passer de l'un à l'autre à l'aide du bouton rond situé dans le coin inférieur gauche.

Taille de l'utilisateur et de la fenêtre :

- Affichage de l'utilisateur actuel, réglage de la taille de la fenêtre, accès aux informations produit et contrôle du matériel supplémentaire (par exemple, lumière colorée).

logique de navigation et de fonctionnement

- Le fonctionnement s'effectue via des boutons et des symboles clairement identifiés.
- Les menus contextuels et les infobulles vous aident à vous orienter.
- Les boutons principaux (correspondant aux zones principales : données client, numérisation, envoi/rapports, bases de données le cas échéant) sont toujours accessibles en haut des fenêtres principales du logiciel. Cela vous permet de passer directement d'un espace de travail à l'autre.
- Dans certaines fenêtres de détails (par exemple, dans les paramètres spéciaux ou les boîtes de dialogue d'édition), ces boutons principaux ne sont pas visibles. Dans ce cas, vous pouvez revenir à la fenêtre principale à l'aide du bouton « Retour ».


#### **Avis :**

L'interface utilisateur est conçue de manière uniforme pour tous les produits de la plateforme BCS. Les fonctionnalités spécifiques à chaque produit sont décrites dans les chapitres correspondants.

Les données clients et le traitement quotidien des données existantes sont généralement effectués localement sur votre ordinateur. Après activation et configuration, les fonctions locales restent accessibles sans connexion Internet. Les fonctions en ligne, telles que le téléchargement de bases

de données, l'envoi de mailings groupés, la création de modèles de messages, la sélection de couleurs en ligne et l'envoi d'e-mails, nécessitent une connexion Internet ; les données nécessaires sont transférées dans chaque cas.

## 2.2 Gestion de la clientèle

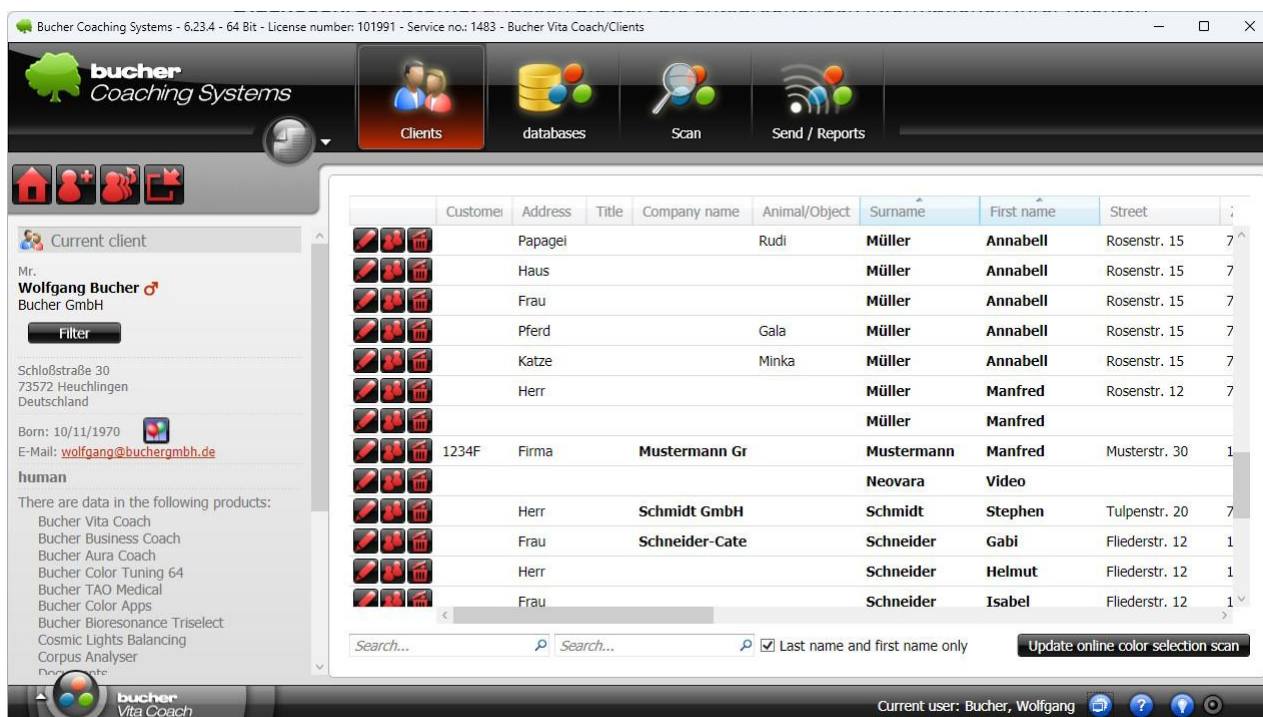

### 2.2.1 Objectif

La gestion des clients est disponible dans tous les produits BCS et permet d'enregistrer et de conserver de manière centralisée toutes les données clients pertinentes, afin de les rendre accessibles pour les analyses. Elle constitue la base commune de tous les produits de la plateforme Bucher Coaching Systems et vous accompagne dans votre travail, quel que soit l'outil utilisé.

### 2.2.2 Prérequis

- BCS est installé et sous licence (voir chapitre 1.4).
- Vous êtes connecté au système et disposez des droits nécessaires pour traiter les données client.
- Au moins un produit sous licence fonctionne avec les données des clients (par exemple, Bucher Vita Coach, Corpus Analyser, Bucher Aura Coach, etc.).


### 2.2.3 Ouvrir la gestion des clients

Vous pouvez accéder à la gestion des clients soit directement via la fenêtre d'accueil (bouton « Clients »), soit depuis l'une des fenêtres principales via le bouton principal correspondant.



## 2.2.4 Création d'un nouveau client

Cliquez sur le bouton pour créer un nouveau client (à gauche dans la fenêtre client, la deuxième icône, un « petit homme » avec un signe plus).

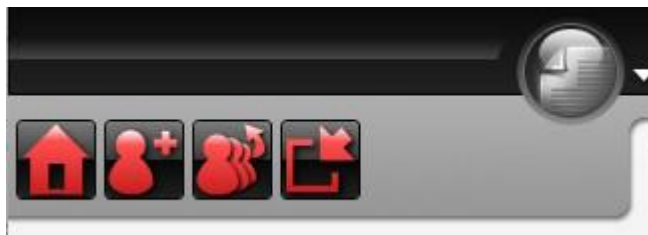

Ils enregistrent les données dans plusieurs registres :

- **Données personnelles** : Veuillez saisir ici toutes les informations de base, telles que votre nom, votre adresse, vos coordonnées et votre date de naissance.
- **Paramètres client** : Options de configuration dépendant du produit utilisé pour le client sélectionné.
- **Photo du client** : Ajoutez une photo du client, soit en prenant une nouvelle photo, soit en important un fichier, soit en la copiant depuis le presse-papiers. Une photo récente facilite l'identification et la reconnaissance du client.
- **Pyramide des remèdes** : requise uniquement si vous utilisez les pyramides des remèdes.
- **Remarques** : Utilisez ce registre pour consigner des notes, instructions ou accords individuels à des fins de documentation.
- **Documents** : Stockez ici des données telles que des rapports de laboratoire, des photos, des fichiers Office ou tout autre type de fichier (utilisable uniquement si la licence « Documents » est activée).
- **Diagnostics/Symptômes** : Consignez-y les informations pertinentes concernant vos clients pour une évaluation ultérieure par intelligence artificielle.

## 2.2.5 Modification des clients existants

Pour mettre à jour des données telles que l'adresse, les coordonnées, l'espèce ou d'autres informations, ouvrez une fiche client existante à l'aide du bouton suivant dans la fenêtre « Clients », situé sur la ligne d'adresse souhaitée en haut à gauche.



Bucher Coaching Systems - 6.23.4 - 64 Bit - License number: 101991 - Service no.: 1483 - Bucher Vita Coach/Clients

**bucher Coaching Systems**

Clients databases Scan Send / Reports

Current client

Mr. **Wolfgang Bucher**  
Bucher GmbH

Filter

Schloßstraße 30  
73572 Heuchlingen  
Deutschland

Born: 10/11/1970

E-Mail: [wolfgang@buchergmbh.de](mailto:wolfgang@buchergmbh.de)

**human**

There are data in the following products:

- Bucher Vita Coach
- Bucher Business Coach
- Bucher Aura Coach
- Bucher Color Tuning 64
- Bucher TAO Medical
- Bucher Color Apps
- Bucher Bioresonance Triselect
- Cosmic Lights Balancing
- Corpus Analyser
- Documents



Edit client

**Edit client**

Personal data Client settings clients' image Remedy Pyramid Notes Documents Diagnoses/Symptoms

Customer number: Client123

Address/Title: Mr.

Company name: Bucher GmbH

Surname/First name: Bucher Wolfgang

Street: Schloßstraße 30

Zip code/Place: 73572 Heuchlingen

Country: Deutschland

Phone (privat/business): +49 7174 7400

Mobile/Fax:

E-Mail: [wolfgang@buchergmbh.de](mailto:wolfgang@buchergmbh.de)

Date of birth/Time: 10/11/1970 5:50:13 PM species: human

55 years old, born on a Sunday

Zodiac sign: Libra

Chinese astrological sign: Dog (Metal) 狗金

Gender/Account holder: Male

Language/IBAN: Select a language

Marital status/BIC: No information

Occupation:

Height/Weight: 182 cm 92.0 kg BMI: 27.8

Bank details

Save Close

Current user: Bucher, Wolfgang

Gérer l'espèce pour chaque client (par exemple, humain, chien, chat, cheval, plante, objet) – cela facilite l'organisation et les évaluations ultérieures.

Les modifications seront appliquées lorsque vous cliquerez sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite.

## 2.2.6 Suppression des clients

Les données client inutiles peuvent être supprimées de la liste des clients. Attention : les données client supprimées ne peuvent pas être facilement récupérées.



## 2.2.7 Recherche, tri et exportation

Utilisez les champs de recherche dans la fenêtre client en bas à gauche pour trouver des clients par nom de famille (et éventuellement par prénom).

Search... Search... ☒ Last name and first name only

Trier la liste selon différents critères (par exemple, lieu, nom de famille).

| Surname | First name |
|---------|------------|
| Müller  | Annabell   |

Exporter les données client sous forme de fichier Excel à des fins de documentation ou de sauvegarde.



## 2.2.8 Utilisation des fonctions de protection des données

La fonction de filtrage permet de limiter l'affichage à un seul client afin de protéger les données des autres personnes – ce qui est particulièrement important lorsque des clients regardent l'écran.



Le filtre n'est pas réinitialisé par le redémarrage du programme ; il reste actif jusqu'à sa désactivation. Un filtre activé est entouré d'une aura rouge autour de son bouton.



## 2.2.9 Notes

- Le système de gestion des clients n'est pas un système de gestion des patients au sens juridique du terme. Il sert uniquement à organiser votre activité de radionique et de coaching.
- Nous vous recommandons de créer un ou plusieurs clients de démonstration à des fins de test. Cela vous permettra d'essayer les fonctionnalités et les processus sans risque.
- Vous pouvez exporter les données client à tout moment (par exemple, vers Excel) et les sauvegarder régulièrement pour éviter toute perte de données.
- Le choix des espèces appropriées est particulièrement important pour les évaluations ultérieures et l'organisation des données clients.
- Utilisez judicieusement les onglets supplémentaires : une photo récente facilite la reconnaissance, et l'onglet « Remarques » est idéal pour les notes de réunion ou les instructions individuelles.
- Le système vous informe des anniversaires à venir ou actuels de vos clients. Dans ce cas, le bouton correspondant sera mis en évidence en jaune ou en rouge.



## 2.3 Navigation générale et logique de fonctionnement

### 2.3.1 Objectif

Cette section décrit le fonctionnement de base de BCS, identique pour tous les produits. L'objectif est de vous permettre de vous familiariser rapidement avec l'interface, que vous utilisiez Vita Coach ou un autre produit. Vous apprendrez à naviguer entre les fenêtres, à accéder aux zones principales et à trouver les fonctions courantes.

### 2.3.2 Prérequis

- BCS est installé, sous licence et démarré (voir section 2.1.4 ).
- Vous vous êtes connecté avec succès et vous voyez maintenant la fenêtre de bienvenue ou une fenêtre principale.

### 2.3.3 Passage de la fenêtre d'accueil aux zones principales

Utilisez les gros boutons principaux (par exemple « **Clients** » , « **Numériser** » , « **Envoyer/Rapports** » et, le cas échéant, « **Bases de données** » ) pour passer à l'espace de travail souhaité.




Le bouton de sélection du produit (en bas à gauche) vous permet de voir à tout moment quel produit vous utilisez et quelle licence est active.




### 2.3.4 Navigation dans les fenêtres principales

- De nombreuses fenêtres principales comportent une barre en haut avec **des boutons principaux** qui permettent d'accéder directement à d'autres zones centrales sans avoir à revenir à la fenêtre d'accueil.
- Dans les fenêtres détaillées (paramètres, boîtes de dialogue spéciales, etc.), cette barre n'est pas toujours visible. Utilisez le bouton « **Retour** » pour revenir à la fenêtre principale.

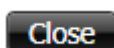


### 2.3.5 Utilisation des menus contextuels et des boutons d'accès rapide

- Un clic droit sur les listes, les tableaux ou les entrées ouvre souvent un menu contextuel (par exemple, « Modifier », « Supprimer », « Exporter »).

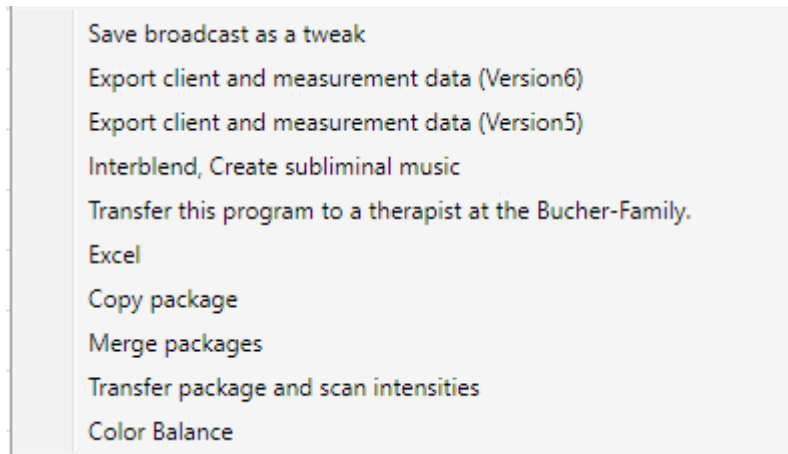

- Les infobulles (petites indications qui s'affichent au survol de la souris) expliquent les symboles et les boutons.

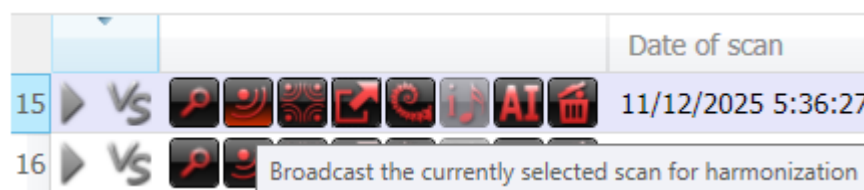

### 2.3.6 Symboles et boutons uniformes

- BCS utilise les symboles les plus cohérents possibles pour les actions récurrentes :
  - le symbole Plus ou « Nouveau » pour créer de nouveaux enregistrements de données.
  - Utilisez l'icône en forme de crayon ou « Modifier » pour modifier les entrées.
  - Icône de la corbeille ou « Supprimer » pour supprimer.
  - Icône de disquette ou « Enregistrer » pour enregistrer les modifications.
- Le nom exact peut varier légèrement selon la fenêtre, mais la signification reste la même.

### 2.3.7 Passage d'un produit à un autre

- Ouvrez la fenêtre d'accueil ou une autre fenêtre principale si elle n'est pas déjà visible.
- Utilisez le bouton « Changer de produit » (un bouton rond en bas à gauche).
- Sélectionnez le produit souhaité dans la liste affichée (par exemple, « Bucher Vita Coach », « Bucher Aura Coach », « Analyseur de corps », etc.). L'interface et les fonctions disponibles s'adapteront alors au produit sélectionné.
- Changer de produit ne modifie pas vos informations de licence, mais seulement le produit exécuté au premier plan. Tous les produits fonctionnent sur la même installation BCS partagée.
- Si le produit souhaité ne figure pas dans la liste, il se peut qu'il ne soit pas encore homologué. Dans ce cas, veuillez contacter Bucher GmbH.


## 2.3.8 Utiliser plusieurs langues d'interface

Lors de l'acquisition d'une licence BCS, vous pouvez activer plusieurs langues d'interface requis. Veuillez indiquer au support les langages dont vous avez besoin. Vous pourrez ensuite changer de langage directement dans le programme ; d'autres langages pourront être ajoutés ultérieurement. Si la langue souhaitée n'est pas proposée, vérifiez votre licence et les paramètres de votre compte ou contactez l'assistance.

## 2.3.9 Notes

- L'interface utilisateur est volontairement **uniforme sur tous les produits** . Si vous connaissez déjà un produit, vous trouverez les autres plus faciles à utiliser.
- Utilisez les infobulles et les menus contextuels pour découvrir les fonctionnalités sans avoir à lire chaque élément de menu en détail.
- Lors de la formation de nouveaux employés, il est judicieux de faire une brève introduction en utilisant la fenêtre de bienvenue et les boutons principaux avant d'aborder les détails spécifiques au produit.

## 2.4 Sauvegarde et récupération des données

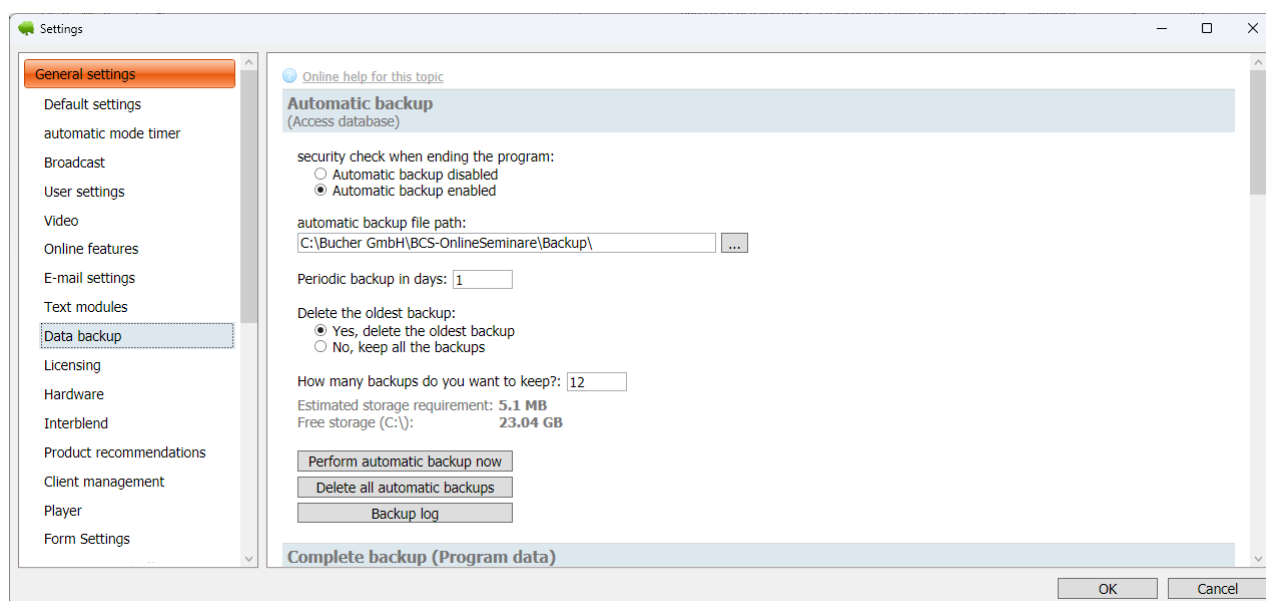

### 2.4.1 Objectif

Grâce aux fonctions de sauvegarde et de restauration des données, vous protégez les données de vos clients et de vos programmes contre toute perte (due par exemple à des pannes matérielles ou à des erreurs d'utilisation). Vous pouvez créer des copies de sauvegarde, les stocker sur un support externe et les restaurer en cas de besoin.

### 2.4.2 Prérequis

- BCS est installé et sous licence.
- Vous disposez d'un accès en écriture au lecteur où les fichiers de sauvegarde doivent être stockés (par exemple, disque dur externe, clé USB, lecteur réseau).
- Idéalement, vous devriez disposer de droits d'administrateur dans BCS ou sur le système Windows.
- Vous trouverez tous les paramètres permettant d'organiser la sauvegarde des données dans « Paramètres » / « Sauvegarde des données ».

### 2.4.3 Sauvegarde automatique des données à la sortie

BCS est configuré pour sauvegarder automatiquement les bases de données à la fermeture.

- Champ d'application : Bases de données (images liées exclues).
- Rythme : automatique à la sortie du BCS.
- Stockage : 12 sauvegardes sont conservés en archives.
- Principe de rotation : la sauvegarde la plus ancienne est supprimée dès qu'une nouvelle sauvegarde est ajoutée.

Remarque : Cette sauvegarde automatique constitue une protection de base au quotidien. Elle ne remplace pas les sauvegardes complètes régulières.

## 2.4.4 Déclenchement manuel d'une sauvegarde complète

La sauvegarde complète doit être lancée manuellement dans « Paramètres » / « Sauvegarde des données ». Elle sauvegarde également toutes les images liées au programme.

- Contenu : Bases de données et images associées.
- Utilisation : avant les mises à jour, avant les changements majeurs, avant les nettoyages, pour les fichiers clients importants.

Important : Si vous travaillez avec des images de clients et d'autres images liées, une sauvegarde complète est l'étape cruciale pour sauvegarder ces fichiers de manière fiable.

## 2.4.5 Vérifier la sauvegarde automatique

1. Ouvrez les paramètres dans BCS.  
Résultat : les zones de paramètres sont désormais visibles.
2. Passez à la section Sauvegarde des données.  
Résultat : les options de sauvegarde et de restauration sont désormais visibles.
3. Vérifiez si la sauvegarde automatique à l'arrêt est activée.  
Résultat : Les bases de données sont bien sauvegardées à l'arrêt du système.
4. Vérifiez le nombre de sauvegardes à conserver.  
Résultat : 12 sauvegardes sont configurées ; la plus ancienne est remplacée automatiquement.

[Capture d'écran : Paramètres > Sauvegarde des données. Objectif : Afficher l'emplacement et les options de base.]

## 2.4.6 Choisir un emplacement adapté pour les sauvegardes

Si possible, spécifiez un disque externe ou un lecteur réseau comme destination de sauvegarde.

Résultat : les sauvegardes restent disponibles même en cas de panne du disque dur système.

Attention : si les sauvegardes sont stockées sur le même disque dur que les données actuelles, elles sont souvent également affectées en cas de panne de disque dur.

## 2.4.7 Créer une sauvegarde complète

1. Ouvrez Paramètres > Sauvegarde des données.  
Résultat : Vous êtes dans la section Sauvegarde.
2. Lancez une sauvegarde complète (exécution manuelle).  
Résultat : BCS crée une sauvegarde complète incluant les images liées.
3. Vérifiez ensuite si le fichier de sauvegarde existe à l'emplacement de destination.  
Résultat : La sauvegarde complète a été créée avec succès.

### Conseil pratique

Effectuez une sauvegarde complète avant chaque mise à jour de BCS et avant chaque mise à jour majeure de Windows. Il est également recommandé d'effectuer une sauvegarde complète régulière une fois par mois.

Cette sauvegarde complète est également compatible avec un changement d'ordinateur. Toutes vos données, y compris vos photos, seront alors contenues dans un seul fichier ZIP. Vous pourrez copier ce fichier sur votre nouvel ordinateur et le restaurer à l'aide de la fonction de restauration. Si vous prévoyez de changer d'ordinateur, veuillez contacter votre partenaire de service BCS.

## 2.4.8 Reprise d'urgence

Contactez votre partenaire de service BCS si vous devez restaurer des données à partir d'une sauvegarde. De nombreux problèmes peuvent survenir lors de ces opérations, et le risque de perte de données est élevé.

## 2.4.9 FAQ

### **Dois-je lancer la sauvegarde automatique séparément ?**

Non. Elle s'exécute automatiquement par défaut à la fermeture de BCS et conserve 12 sauvegardes.

### **Quand dois-je effectuer une sauvegarde complète ?**

Mensuellement (un message de confirmation apparaît tous les 30 jours), avant les mises à jour et avant les modifications importantes.

### **Que se passe-t-il si plus de 12 sauvegardes automatiques sont créées ?**

BCS supprime automatiquement la sauvegarde la plus ancienne et conserve les 12 plus récentes.

## 2.4.10 Protection par mot de passe des fichiers PDF

La protection par mot de passe est une option. Cette fonctionnalité est disponible uniquement après activation. Elle protège les fichiers PDF contenant des données client lors de leur enregistrement et de leur envoi par e-mail.

### 2.4.10.1 Configuration de la protection par mot de passe

Ouvrez Réglages > Général > Protection par mot de passe des PDF. Si nécessaire, activez le chiffrement des fichiers PDF enregistrés et/ou des pièces jointes PDF lors de l'envoi d'e-mails.

### 2.4.10.2 Choix du mot de passe : Recommandation pour une utilisation quotidienne

Pour la plupart des cabinets, l'option « Mot de passe unique pour tous » est recommandée. Vous définissez un mot de passe partagé, qui peut être généré automatiquement par le logiciel si nécessaire, ou vous pouvez utiliser un mot de passe très simple comme « soleil du matin », « fleur du cabinet » ou « mon centre ». Cela évite que chaque client reçoive un mot de passe différent et réduit ainsi les demandes fréquentes de mots de passe oubliés, qui nécessitent ensuite une recherche fastidieuse dans les dossiers clients.

Les mots de passe individuels générés par le programme ne sont utiles que si une sécurité renforcée est nécessaire dans un cas précis et si vous êtes disposé à gérer consciemment ces mots de passe supplémentaires. Ne communiquez jamais les mots de passe avec le PDF dans le même courriel, mais plutôt par une méthode distincte et convenue.

### 2.4.10.3 Mot de passe utilisateur et modifications de mot de passe

Dans la même fenêtre, un mot de passe utilisateur supplémentaire (mot de passe principal) peut être défini ou généré spécifiquement pour l'utilisateur BCS. Ainsi, les fichiers PDF peuvent être ouverts non seulement avec **un seul** mot de passe, mais aussi avec celui du client et celui de l'utilisateur. Cette fonction est particulièrement utile lorsque chaque patient possède son propre mot de passe. Souvent, il suffit de consulter rapidement un PDF généré, puis d'utiliser son mot de passe principal au lieu de rechercher celui du client. De cette façon, l'utilisateur peut toujours ouvrir tous les documents avec son mot de passe principal, tandis que les clients ne peuvent ouvrir le même document qu'avec leur propre mot de passe.

Ne modifiez un mot de passe partagé que si cela est prévu et informez les clients concernés sans délai. Les fichiers PDF déjà envoyés conserveront leur ancien mot de passe ; par conséquent, documentez clairement la modification.

## **2.4.11 Transfert de données depuis la version 5 précédente du BCS**

Le processus central de migration des données est utilisé pour déplacer les données d'une ancienne installation BCS de version 5. Il est distinct des exportations individuelles CSV, de paquet ou de base de données : il importe directement les données de programme sélectionnées à partir du chemin de données de la version précédente 5.

### **2.4.11.1 Avant le transfert de données avec la sauvegarde complète**

Créez une sauvegarde complète des données (également appelée « sauvegarde complète des données du programme ») sur l'ancien système. Enregistrez le fichier ZIP créé sur un périphérique de stockage. Installez BCS sur un nouvel ordinateur. Utilisez le fichier ZIP pour effectuer une « restauration complète des données du programme ». Attention : cette opération écrasera toutes les données présentes sur le nouvel ordinateur. Par conséquent, n'effectuez cette restauration que si le système est parfaitement propre.

Pour des raisons de sécurité, un mot de passe est nécessaire pour restaurer vos données, car une restauration accidentelle pourrait effacer tous les clients et toutes les analyses. Vous pouvez obtenir ce mot de passe auprès de Bucher GmbH ou de votre partenaire commercial.

## 2.5 Discussions, séminaires et assistance

### 2.5.1 Objectif


Vous pouvez rester en contact avec les autres utilisateurs et Bucher GmbH via le chat, l'espace séminaire et les fonctions d'assistance. Vous pouvez poser des questions, partager vos expériences, vous inscrire à des séminaires en ligne et accéder aux dernières informations. Ces fonctions et informations sont disponibles dans la fenêtre d'accueil.

### 2.5.2 Prérequis

- BCS est installé et démarré.
- **connexion internet active** est généralement requise pour le chat, l'inscription aux séminaires et l'assistance à distance.
- Vous vous êtes inscrit avec un nom de chat approprié (pseudonyme facultatif).

### 2.5.3 Ouvrez une conversation et choisissez un nom

- section « **Chat** ».
- Choisissez un **nom de conversation** sous lequel vos messages seront affichés.

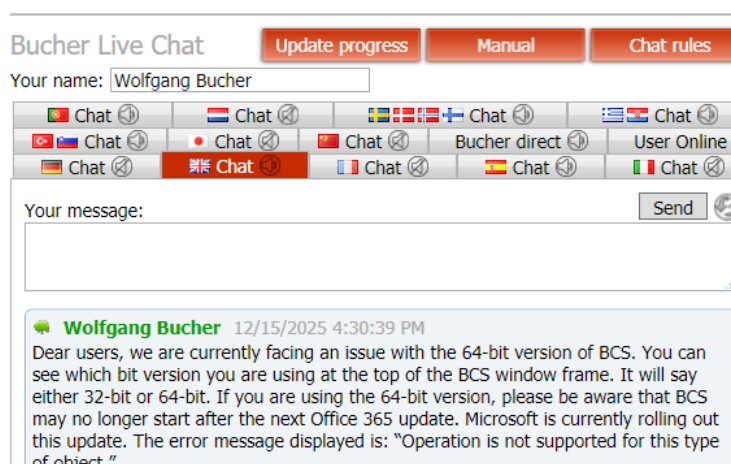

### 2.5.4 Envoi de messages

- Choisissez si votre message doit être envoyé à **tous les utilisateurs** ou spécifiquement à «**Bucher direct**» (**Support**).
- Saisissez votre message dans le champ de saisie de la langue appropriée et envoyez-le.
- Les réponses apparaissent dans l'historique des messages. Vous pouvez remonter dans la conversation pour consulter les messages plus anciens si nécessaire.

### 2.5.5 Accès aux séminaires et aux séminaires en ligne

- Dans la fenêtre d'accueil, ouvrez la section « **Séminaires/Séminaires en ligne** ».
- Parcourez les offres affichées.
- Sélectionnez un séminaire pour en voir les détails (date, contenu, conditions de participation).
- Suivez les étapes indiquées pour **vous inscrire** (par exemple, en cliquant ou via un lien vers le site web).

## 2.5.6 Utilisez la section « Actualités »

- Ouvrez la section « **Actualités** » dans la fenêtre d'accueil.
- Lire les notes sur :
  - nouvelles versions logicielles,
  - améliorations fonctionnelles,
  - annonces organisationnelles importantes (par exemple, changement des heures de soutien).

## 2.5.7 Contacter l'assistance

- Utilisez les éléments suivants en fonction de vos besoins :
  - **Conversation** (questions courtes)
  - **Mail** [support@buchergmbh.de](mailto:support@buchergmbh.de) (pour toute demande détaillée, veuillez joindre des captures d'écran)
  - **Téléphone** (en cas de questions urgentes, veuillez contacter le support téléphonique de votre partenaire système).
- Veuillez préparer les éléments suivants lorsque vous demandez de l'aide :
  - Votre numéro de permis,
  - la variante de produit utilisée
  - une brève description du problème (y compris les messages d'erreur)
  - Connectez-vous à UltraViewer à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Vous trouverez des informations sur la maintenance à distance d'UltraViewer dans la section 2.6 .

## 2.5.8 Notes

- La fonction de chat est particulièrement adaptée aux **questions brèves ou aux échanges avec d'autres utilisateurs** . Les sujets de formation approfondis sont mieux adaptés aux séminaires.
- Consultez régulièrement la section « **Actualités** » pour rester informé des nouvelles versions et des mises à jour.
- **Ne transmettez pas de données sensibles de clients** (par exemple, les noms complets et les informations de santé) par chat ou par e-mail, sauf accord explicite.

## 2.6 Maintenance à distance

### 2.6.1 Objectif

La fonction de maintenance à distance vous permet de bénéficier rapidement de l'assistance de Bucher GmbH en cas de problèmes techniques, sans nécessiter de présence sur site. La fonction de basculement de produit vous permet de passer facilement d'un produit sous licence à un autre sans avoir à réinstaller le logiciel.

### 2.6.2 Prérequis

- Une connexion internet active est requise pour la maintenance à distance.
- Veuillez contacter le service d'assistance par téléphone ou par écrit afin qu'un membre du personnel soit prêt à traiter votre demande de maintenance à distance.

### 2.6.3 Instructions étape par étape

Démarrer la maintenance à distance

- Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur le bouton « **Maintenance à distance** » (par exemple, « UltraViewer »).
- Lancez le programme de maintenance à distance fourni. S'il n'est pas déjà installé, vous pouvez le télécharger et l'installer depuis [www.ultraviewer.net](http://www.ultraviewer.net).
- Lisez l'identifiant affiché et le mot de passe temporaire.

Soumettre les données d'accès au support

- Contactez le support ou utilisez le canal de communication convenu au préalable.
- Veuillez fournir l'identifiant et le mot de passe temporaire du logiciel de maintenance à distance.
- Veuillez rester devant votre ordinateur pendant toute la durée de la séance afin de pouvoir répondre à toutes les questions.

Maintenance à distance terminée

- Une fois l'assistance terminée, fermez le logiciel de maintenance à distance.
- Le mot de passe temporaire deviendra alors invalide ; l'accès non autorisé ne sera plus possible.

Installation à distance en plusieurs langues

- Si les utilisateurs et le service d'assistance ne parlent pas la même langue, les instructions peuvent être fournies par écrit, par exemple via WhatsApp ou Telegram. Des instructions courtes et précises sont plus faciles à traduire correctement qu'un long appel téléphonique.
- Ne transmettez l'identifiant de maintenance à distance et le mot de passe temporaire que par le canal de communication convenu et uniquement après avoir vérifié l'identité de la personne de l'assistance. Ne transmettez aucune donnée client ni information médicale.
- Restez joignable pendant la session, prévoyez des pauses pour la traduction et fermez le logiciel de maintenance à distance immédiatement après la fin de celle-ci.

### Notes

- N'autorisez l'accès à distance que si vous êtes certain que la personne accédant au système est bien un employé de Bucher GmbH ou une personne autorisée par vous.
- Lors de l'assistance à distance, tout le contenu de votre écran peut être visible. Avant de commencer, veuillez fermer tous les autres programmes contenant des informations sensibles.

## **2.7 Distinguer la durée de transmission de la vitesse de transmission**

### **2.7.1 Deux références temporelles indépendantes**

BCS utilise deux durées indépendantes. La vitesse de transfert détermine la durée de l'envoi immédiatement visible sur l'ordinateur. La durée d'émission désigne, quant à elle, la période d'action énergétique qui suit la fin de cet envoi.

Les niveaux de sélection Rapid Transfer, Rapide/Court, Moyen et Lent/Long font donc partie de la vitesse de transmission. Dans certains programmes ou fenêtres de paramètres, ces valeurs en secondes peuvent encore apparaître sous l'ancien terme « durée de transmission ». Techniquement, elles contrôlent la durée du processus de transmission en cours.

La durée d'émission proprement dite commence à la fin du transfert. Sauf réglage différent dans les options d'envoi, cette période d'action énergétique est de quatre semaines. Elle reste identique, que le transfert ait été effectué avec Rapid Transfer, Rapide, Moyen ou Lent.

### **2.7.2 Sélectionnez la vitesse de transmission appropriée**

#### **2.7.2.1 Rapid Transfer**

Utilisez le Rapid Transfer lorsque le client est absent ou lors du transfert de données vers un support de stockage. Le Rapid Transfer exploite la vitesse maximale de l'ordinateur et réduit au maximum la durée de la transmission. En présence d'un client, cette étape est généralement trop courte pour une utilisation contrôlée.

#### **2.7.2.2 Rapide ou court**

Utilisez les options Rapide ou Courte pour une transmission brève et immédiate, par exemple si le client n'est pas sur site et que le Rapid Transfer n'est pas souhaité ou disponible. Lors d'interventions sur site, ce niveau peut être sélectionné si seule une courte session d'assistance est prévue.

#### **2.7.2.3 Moyen**

Moyen convient comme réglage habituel lorsque le client est présent et accompagne consciemment l'envoi. Le temps d'affichage ou d'application plus long lui permet de s'impliquer dans le processus.

#### **2.7.2.4 Lent ou long**

Utilisez les modes Lent ou Long si le client présent demande expressément une séance plus longue et guidée avec calme. Une transmission plus longue n'est ni plus forte ni de meilleure qualité ; elle prolonge simplement le processus de transmission directement perceptible.

#### **2.7.2.5 Temps réel**

Le produit Bucher Bioresonanz Triselect offre également une fonctionnalité en temps réel. Cette étape utilise la séquence temporelle spécifiée pour chaque modèle de produit et est particulièrement adaptée à une utilisation supervisée en présence du client.

### **2.7.3 Réglage de la durée de transmission**

En règle générale, conservez la durée de transmission prédéfinie de quatre semaines. Toute durée plus courte ou plus longue doit être choisie délibérément et documentée uniquement pour correspondre à la période de surveillance prévue. Les autres options de transmission, telles que

l'intensité, l'intervalle, le cycle de transmission ou le matériel utilisé, doivent être examinées séparément.

#### **2.7.4 Règle abrégée et exemple**

Règle abrégée : la vitesse de transmission se réfère aux secondes ou aux minutes sur l'ordinateur ; la durée de transmission se réfère à la durée énergétique après la fin de la transmission et est généralement définie en jours ou en semaines.

Exemple : pour un client absent, Rapid Transfer peut terminer le transfert en peu de temps. Selon le modèle de travail de BCS, les informations configurées continuent ensuite d'agir pendant quatre semaines par défaut. Si Moyen ou Lent est choisi pour un client présent, seul l'envoi immédiat dure plus longtemps ; la durée d'émission qui suit reste de quatre semaines.

## 3 Chapitres spécifiques aux produits

### 3.1 Bucher Vita Coach



#### 3.1.1 Introduction et fonctionnalités spéciales

##### 3.1.1.1 Vue d'ensemble

Le Bucher Vita Coach est un produit phare de Bucher Coaching Systems (BCS). Cette section explique la finalité du Vita Coach, le principe de base de « numérisation » et d'« envoi », ainsi que les fonctionnalités spécifiques du système (travail à distance, numérisations en ligne, supports d'information, etc.). Les instructions d'utilisation pratiques sont détaillées dans les sections 3.1.2 à 3.1.11.

##### 3.1.1.2 Objectif

Le Bucher Vita Coach aide les thérapeutes, les coachs et les consultants à identifier et à prioriser systématiquement les problématiques énergétiques et émotionnelles, et à définir des pistes d'action claires. Il vise à soutenir les processus et à orienter le déroulement de la thérapie (par exemple : thèmes abordés, liens entre les différents éléments, priorités, déroulement des séances). Important : L'utilisation de ce logiciel ne remplace pas un diagnostic ou un traitement médical. Utilisez les résultats comme un guide complémentaire et adaptez toujours votre approche et vos responsabilités à votre rôle professionnel et au contexte spécifique.

##### 3.1.1.3 Principe de base : Bases de données, numérisation et envoi

Le Vita Coach intervient essentiellement dans quatre domaines :

1. « clients »
  - La mise en place et la sélection des nouveaux clients ont déjà été abordées au chapitre 2.2.
2. « Bases de données »
  - Les bases de données de radionique fournies par Bucher GmbH peuvent être importées depuis Internet. (Vita-Databases)
  - Dans un espace de base de données distinct, les utilisateurs peuvent créer et gérer leurs propres bases de données (Mes bases de données).
3. "Balayage"
  - Un scan est une requête énergétique basée sur des bases de données radioniques sélectionnées.
  - Avant la numérisation, vous sélectionnez les bases de données appropriées (par exemple, domaines thématiques, systèmes, domaines émotionnels).
  - Les résultats sont affichés sous forme d'entrées avec des valeurs de pertinence. Ces valeurs servent à la priorisation. Les résultats analysés sont stockés dans un « paquet radionique ».
4. "Envoyer/Rapports"

- Dans la section « Envoyer/Rapports », où sont stockés les « Packages Radionics », vous pouvez évaluer les résultats d'analyse, créer des rapports et transmettre des informations de régulation (en fonction de la licence et du mode de fonctionnement).
- Vita Coach sépare délibérément l'analyse (scan) de la mise en œuvre (envoi/rapport) afin que vous puissiez travailler de manière structurée et documenter les résultats de façon compréhensible.

### Avis :

Les boutons « Bases de données », « Analyse » et « Envoyer/Rapports » sont des points d'entrée essentiels. Le bouton « Bases de données » n'est généralement visible que dans Vita Coach, car c'est là que sont gérées les bases de données de radionique.

### 3.1.1.4 Intégration BCS : des fonctions communes à tous les produits

Le Vita Coach utilise les principes communs de la BCS. Cela signifie :

- Les clients sont créés de manière centralisée et sont également disponibles dans d'autres produits (en fonction de la licence) (voir chapitre 2.2 ).
- La sauvegarde et la récupération des données sont effectuées de manière centralisée (voir chapitre 2.4 ).
- La logique de fonctionnement, la navigation et la commutation des produits sont aussi uniformes que possible dans BCS (voir chapitre 2.3 ).

### Conseil pratique :

Centralisez systématiquement les données clients et l'historique des sessions dans BCS. Cela évite la saisie de données en double et garantit la cohérence des rapports dans les analyses ultérieures.

### 3.1.1.5 Utilisation des bases de données

La base de données de radionique comporte deux structures principales :

#### 1. « Bases de données Vita »

Cette section présente toutes les bases de données que Bucher GmbH propose en téléchargement gratuit. Ces bases de données sont en lecture seule et ne peuvent être modifiées par les utilisateurs.

## 2. « Mes bases de données »

C'est dans cet espace que les utilisateurs peuvent créer et gérer leurs propres bases de données.




### Avis :

Bien que les bases de données de Bucher GmbH soient en lecture seule sur **Vita Databases**, les utilisateurs peuvent les modifier ou les compléter en copiant simplement la base de données souhaitée dans Vita Databases, puis en la collant dans **Mes bases de données**. Toute modification peut ensuite être apportée à cette copie.


Le programme est actuellement disponible en 20 langues. Par conséquent, les bases de données comportent des drapeaux de pays, sous lesquels on trouve les entrées correspondantes dans la langue appropriée.



Nos utilisateurs n'activent généralement qu'une seule langue pour des raisons d'organisation. Si d'autres langues sont souhaitées, nous pouvons les activer gratuitement.

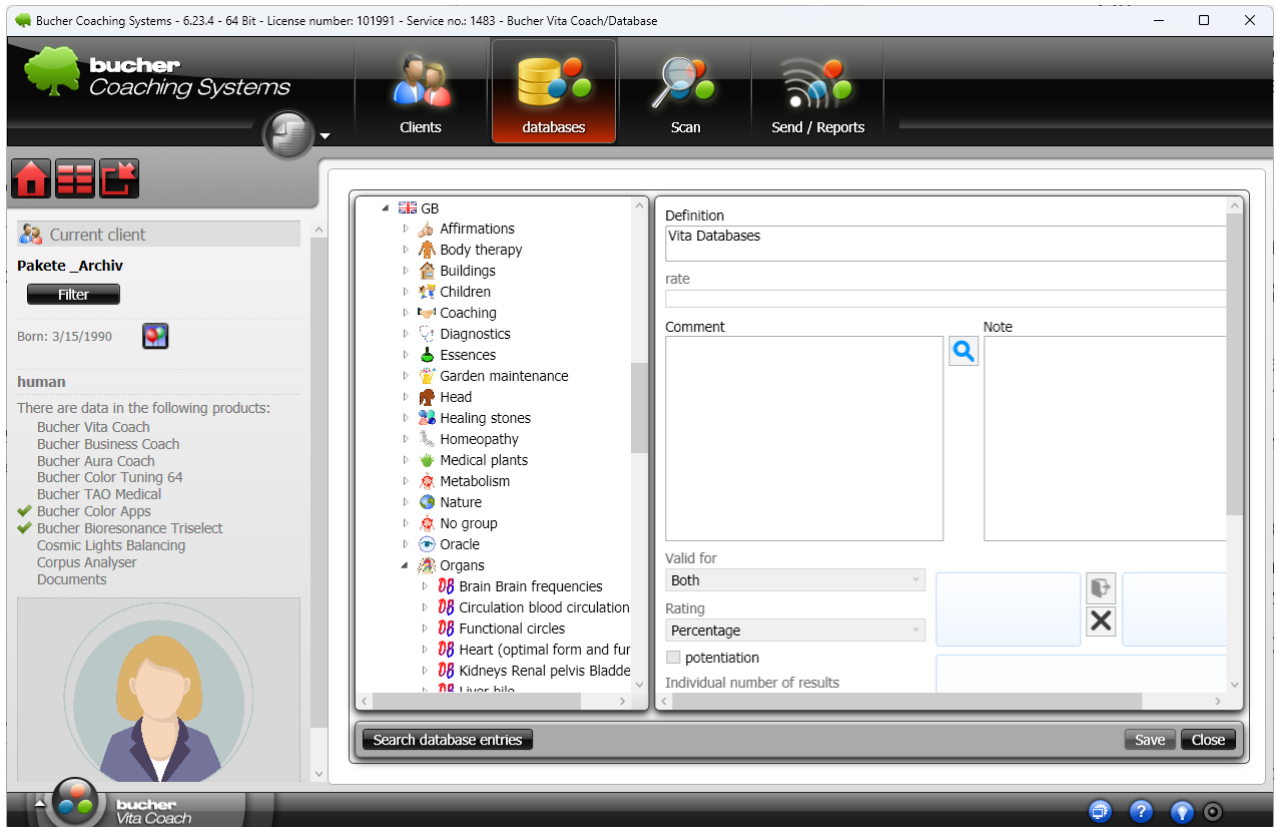


La plupart des fonctions d'édition de la base de données peuvent être affichées et exécutées en cliquant avec le bouton droit sur une entrée de la base de données.

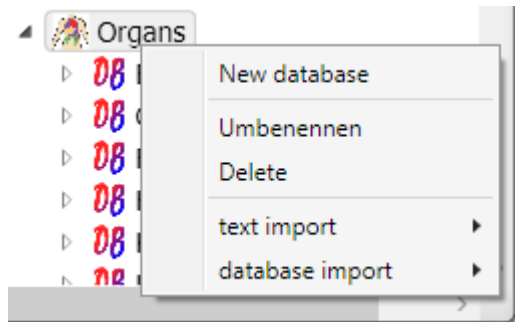

### 3.1.1.6 Logique et priorisation des paquets

Les résultats de l'analyse sont souvent organisés en « paquets ». Les paquets permettent de regrouper les entrées (par exemple, par sujet, session ou phase de traitement) et de les traiter par ordre de priorité. Un paquet peut contenir, par exemple, des entrées analysées ou sélectionnées provenant de différentes bases de données.

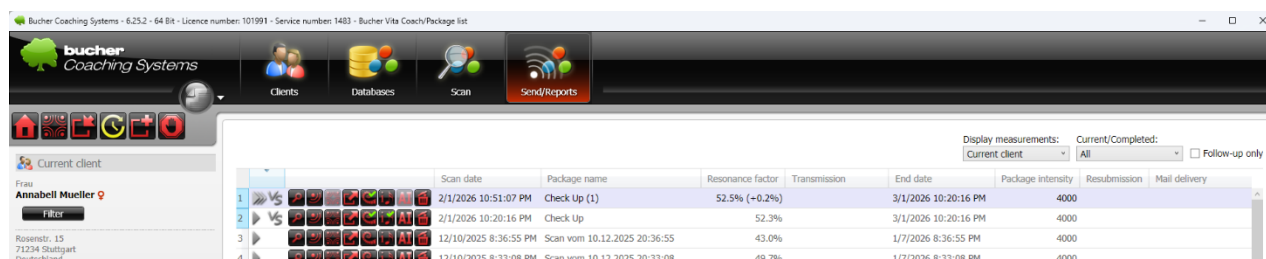

The screenshot shows the Bucher Coaching Systems software interface. On the left, there's a sidebar with a 'Current client' section for 'Frau Annabell Mueller' and a 'Filter' button. The main area displays a table of packages. The table has columns for Scan date, Package name, Resonance factor, Transmission, End date, Package intensity, Resubmission, and Mail delivery. The data is as follows:

|   | Scan date             | Package name                 | Resonance factor | Transmission | End date             | Package intensity | Resubmission | Mail delivery |
|---|-----------------------|------------------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2/1/2026 10:51:07 PM  | Check Up (1)                 | 52.5% (+0.2%)    |              | 3/1/2026 10:20:16 PM | 4000              |              |               |
| 2 | 2/1/2026 10:20:16 PM  | Check Up                     | 52.3%            |              | 3/1/2026 10:20:16 PM | 4000              |              |               |
| 3 | 12/10/2025 8:36:55 PM | Scan vom 10.12.2025 20:36:55 | 43.0%            |              | 1/7/2026 8:36:55 PM  | 4000              |              |               |
| 4 | 12/10/2025 8:33:08 PM | Scan vom 10.12.2025 20:33:08 | 49.7%            |              | 1/7/2026 8:33:08 PM  | 4000              |              |               |

### Termes typiques de Vita Coach :

- Nom du paquet : nom librement sélectionnable pour la reconnaissance (par exemple « Session 1 », « Sommeil », « Restauration intestinale »).
- Type de forfait : Traitement de la cause / Traitement des symptômes
- Facteur de résonance : Valeur moyenne de toutes les valeurs d'intensité du paquet.
- Intensité du paquet : force ou intensité de transmission pour la mise en œuvre, en fonction du mode de fonctionnement et du contenu.

### Avis

Une structure de paquets claire facilite le suivi des progrès et la documentation. Déterminez si les paquets doivent être gérés par thème (par exemple, Sommeil) ou par session (par exemple, Session 1). Attribuez à chaque paquet un nom reflétant son thème.

### 3.1.1.7 Télétravail (télésomatique) et applications en ligne

L'un des principaux atouts de cette application réside dans le travail à distance. Selon la procédure, des échantillons (cheveux, salive, etc.) peuvent servir de base. De plus, il est possible d'effectuer des analyses en ligne et de transmettre les données, ce qui permet aux clients de participer à distance et en temps réel.

### Avis

Avant tout travail à distance ou candidature en ligne, clarifiez systématiquement les modalités de protection des données, de consentement et d'organisation. Évitez de transmettre des données sensibles de clients par des canaux non sécurisés.

### 3.1.1.8 Échantillons animaux pour le scan et la transmission qui suit

Pour les animaux, un échantillon peut être prélevé pour le scan, par exemple des poils ou de la salive à l'aide d'un écouvillon. Placez l'échantillon dans le bocal fourni. Évitez tout contact direct avec le matériel potentiellement contaminé et, si nécessaire, utilisez un récipient propre, fermé et jetable, ou enveloppez l'échantillon dans du papier ou un sachet plastique refermable avant de le placer dans le bocal.

Le capteur CA connecté repose dans son support pendant la numérisation. Positionnez-le de manière à ce que la lumière éclaire la vitre.

Retirez l'échantillon après la numérisation. Si vous devez ensuite préparer un support d'information, placez l'objet à transmettre dans le récipient en verre et lancez la transmission.

Hygiène : Nettoyez ou remplacez tous les instruments utilisés après usage et respectez les règles d'hygiène applicables à votre pratique.

### 3.1.1.9 « Moduler » des supports d'information

Selon la méthode utilisée, des supports d'information (par exemple, des globules, des compléments alimentaires ou des cartes magnétiques) peuvent être imprimés avec des informations de régulation. Ces supports peuvent être intégrés au processus comme élément supplémentaire. Important : Utilisez les supports d'information uniquement dans votre contexte professionnel. Documentez ce que vous avez utilisé, sous quelle forme et dans quel but.



### 3.1.1.10 Flux de travail abrégé (classification, et non instructions)

1. Sélectionnez ou créez un client. Résultat : Le client correct est actif.
2. Sélectionnez les bases de données appropriées (ou chargez l'ensemble). Résultat : L'analyse est maintenant prête pour le contenu.
3. Effectuez une analyse. Résultat : une liste de résultats priorisés est disponible sous forme de paquet dans « Envoyer/Rapports ».
4. Examinez et nommez les résultats sous « Envoyer/Rapports ». Résultat : Les sujets sont organisés et compréhensibles.
5. Dans « Envoyer/Rapports », évaluez, documentez et envoyez ou transférez les informations selon les besoins. Résultat : le rapport, l'avancement et les prochaines étapes sont enregistrés.

### 3.1.1.11 FAQ / Dépannage (3.1.1)

#### Pourquoi Bucher Vita Coach n'affiche-t-il que « Bases de données » ?

Parce que la gestion des bases de données est une fonctionnalité essentielle et spécifique à Vita Coach. Les autres produits utilisent des sources de données différentes et n'affichent généralement pas cette section.

#### Le Vita Coach est-il un dispositif médical ?

Le Vita Coach est conçu comme un outil de coaching complémentaire et non comme un dispositif médical. Il ne remplace ni un diagnostic ni un traitement médical.

#### Puis-je travailler à distance avec Vita Coach ?

Oui, le travail à distance (télésomatique) est une pratique courante. Veuillez toujours à clarifier au

préalable les modalités de consentement, de protection des données et les procédures organisationnelles.

### À quoi servent les « paquets » ?

Les paquets regroupent toutes les informations (par numérisation ou saisie manuelle) nécessaires à la résolution d'un problème spécifique. Ils permettent de structurer les résultats, d'établir des priorités et de documenter clairement la progression de la séance. Les paquets peuvent être transférés directement sur le champ du client ou adaptés sur des supports d'information utilisables par les clients pendant la thérapie. Ces supports peuvent être, par exemple :

- cartes magnétiques
- Globules vides
- Pierres de guérison (cristal de roche / quartz rose...)
- etc.

### Quelle est la différence entre « Scanner » et « Envoyer/Rapport » ?

- « Scan » est utilisé pour l'analyse et la priorisation.
- La fonction « Envoyer/Rapports » sert à l'évaluation, à la documentation et à la transmission aux clients.

## 3.1.2 Premiers pas (connexion, interface et création de clients)

### 3.1.2.1 Vue d'ensemble

Dans cette section, vous configurerez votre **Bucher Vita Coach** pour une utilisation quotidienne. Vous apprendrez comment...

1. choisir le bon produit
2. Importer ou mettre à jour les bases de données de radionique,
3. Créez des clients et définissez-les en toute sécurité comme « clients actuels ».

### 3.1.2.2 Prérequis

- BCS est installé et activé.
- Vous voyez la fenêtre de bienvenue.
- pour l'importation **initiale** des bases de données depuis le serveur Bucher.

### Avis

Le travail (numérisations, évaluations, données clients) est généralement effectué localement sur votre ordinateur. Un accès Internet peut être nécessaire pour l'importation de bases de données. Aucune base de données n'est disponible après l'installation de BCS. Il faut d'abord les importer.

### 3.1.2.3 Instructions étape par étape pour l'importation de bases de données


#### Étape 1 : Sélectionnez Bucher Vita Coach comme produit

1. Ouvrez la **fenêtre de bienvenue** (si elle n'est pas visible) à l'aide de l'icône en forme d'arbre sur le bureau.
2. Cliquez sur « Changer de produit » (bouton rond en bas à gauche) si « Bucher Vita Coach » n'y figure pas déjà.



3. Sélectionnez « Bucher Vita Coach ».

**Résultat :** Vita Coach est actif dans la fenêtre d'accueil. Le bouton « Bases de données » est visible.

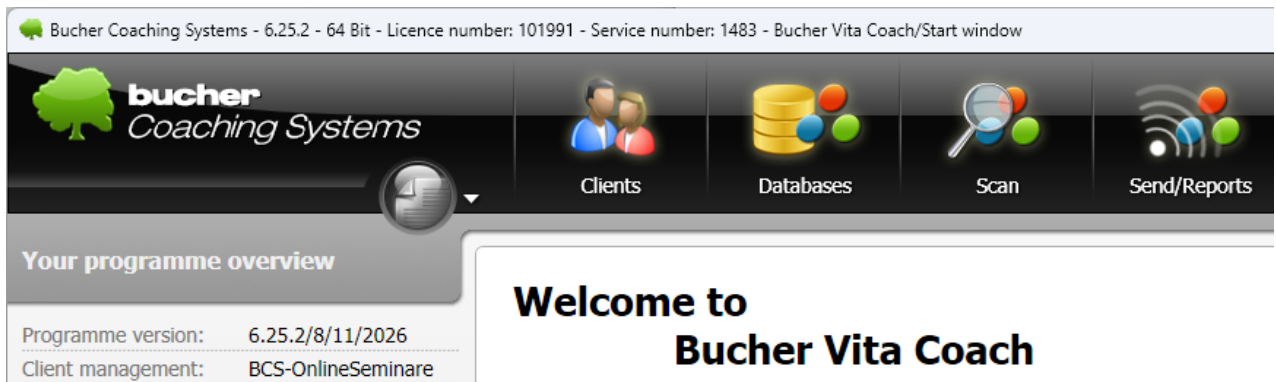

## Étape 2 : Importer les bases de données (premier démarrage)


1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur « Bases de données ».
2. Cliquez sur l'icône d'importation en haut à gauche et sélectionnez « Importer des bases de données depuis Internet » dans le menu contextuel.



La fenêtre « Gestionnaire de bases de données » s'ouvre. Les bases de données non encore disponibles dans Bucher Vita Coach apparaissent en rouge. Cochez la case de la première colonne pour indiquer si vous souhaitez importer une base de données.

3. Cliquez sur « Importer » en bas à droite pour importer les bases de données sélectionnées.  
L'importation peut prendre un certain temps. Importez d'abord toutes les bases de données.  
Vous pourrez supprimer ultérieurement celles qui ne sont plus nécessaires dans l'arborescence.

**Résultat :** Les bases de données apparaissent dans la structure arborescente de gauche (par exemple, par langue et par groupes).

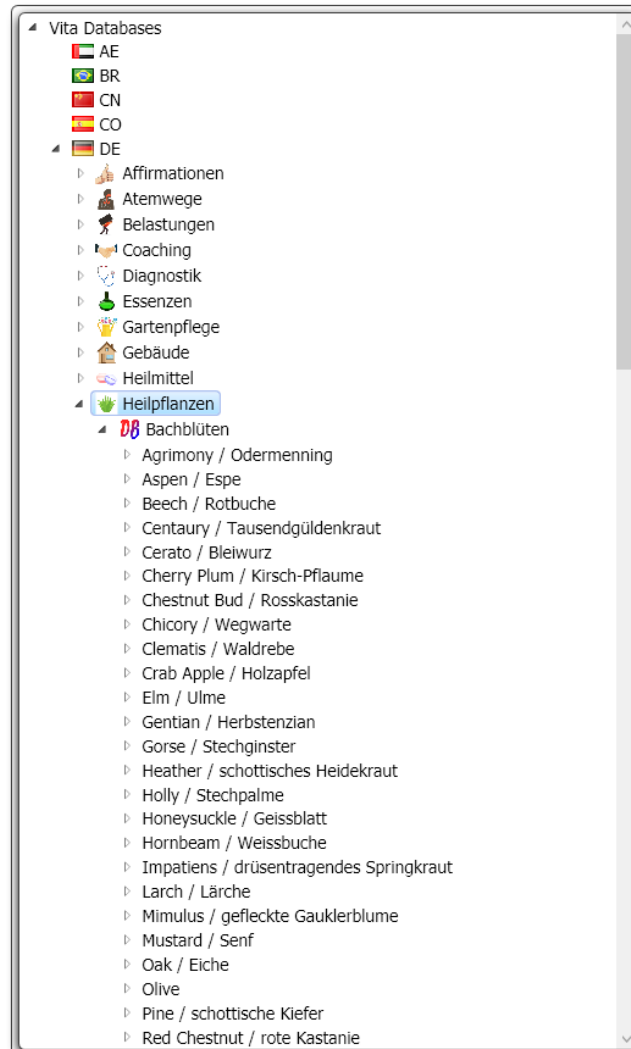

## Avis

Après une nouvelle installation de BCS, aucune base de données n'est initialement présente. Les analyses sont impossibles sans bases de données importées.

## Étape 3 : Mettre à jour les bases de données (si elles existent déjà)

1. Ouvrez « Bases de données ».
2. Ouvrez le « Gestionnaire de base de données » comme décrit ci-dessus à l'étape 2, point 2.
3. Faites attention au code couleur dans la liste d'importation :
  - **Rouge** : pas encore importé
  - **Vert** : déjà importé
  - **Vert foncé** : importé, mais une version plus ancienne est présente (mise à jour disponible)

- Importez les bases de données marquées en vert foncé si vous souhaitez les mettre à jour, et celles marquées en rouge si vous souhaitez les ajouter à Bucher Vita Coach pour la première fois.

**Résultat :** Les anciennes versions des bases de données sont remplacées et les bases de données manquantes sont téléchargées. Cela garantit que les bases de données sont à jour.

Database Manager

Language: English (English)

|                                     | Group        | Title<br>Description                      | Height | Images | Entries | Uploaded on | Creator         |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Affirmation cards for children            | 108 KB | 3      | 48      | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Affirmations for Children and Adolescents | 122 KB | 3      | 743     | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Buddhist Wisdom                           | 283 KB | 3      | 206     | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Dahlke Health Cards                       | 212 KB | 0      | 49      | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Financial freedom                         | 95 KB  | 3      | 21      | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Heart Cards by Kurt Tepperwein            | 264 KB | 0      | 76      | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Help from the Bible                       | 291 KB | 0      | 31      | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Louise Hay                                | 139 KB | 0      | 193     | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Louise Hay - new version                  | 53 KB  | 0      | 417     | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Magic words                               | 117 KB | 0      | 446     | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Magic Words of Happiness (Dalai Lama)     | 341 KB | 0      | 60      | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Magic Words of Healing (Rüdiger Dahlke)   | 277 KB | 0      | 31      | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Quantum healing                           | 176 KB | 0      | 8       | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input type="checkbox"/>            | Affirmations | Subliminals                               | 110 KB | 0      | 405     | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affirmations | Tepperwein                                | 101 KB | 0      | 421     | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Body therapy | Acupressure                               | 63 KB  | 0      | 45      | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Body therapy | Acupuncture                               | 142 KB | 0      | 1328    | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input type="checkbox"/>            | Body therapy | Chakra mudra                              | 94 KB  | 0      | 56      | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Body therapy | Cranio Sacral Therapy                     | 175 KB | 0      | 624     | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Body therapy | Finger Yoga (Mudras)                      | 94 KB  | 0      | 68      | 5/4/2024    | englisch anonym |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Body therapy | Foot reflexology massage                  | 132 KB | 0      | 138     | 5/4/2024    | englisch anonym |

Search...

Import


Close

Gestionnaire de bases de données : Sélectionner et importer des bases de données


### 3.1.2.4 Instructions étape par étape pour la sélection d'un client

#### Étape 1 : Ouvrir la gestion des clients

1. Cliquez sur « Clients ».

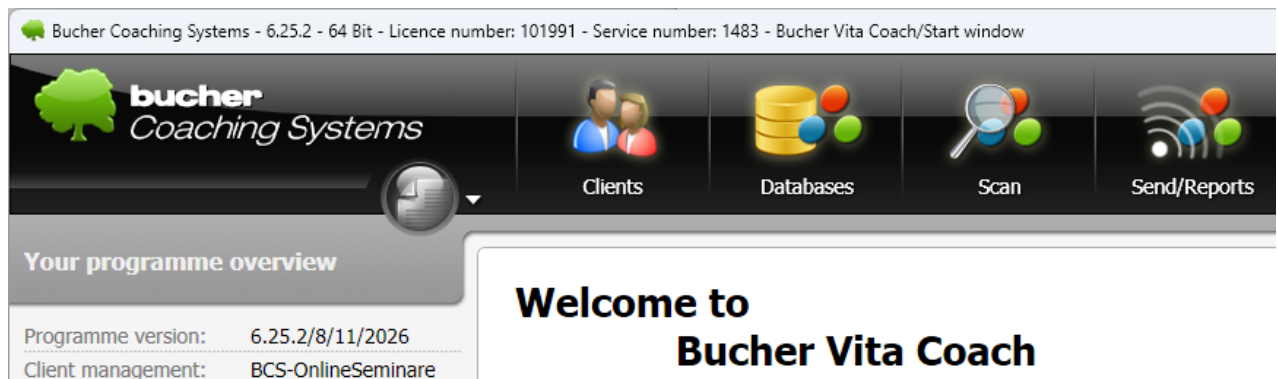

**Résultat :** La fenêtre « Clients » s'ouvre avec votre liste de clients.

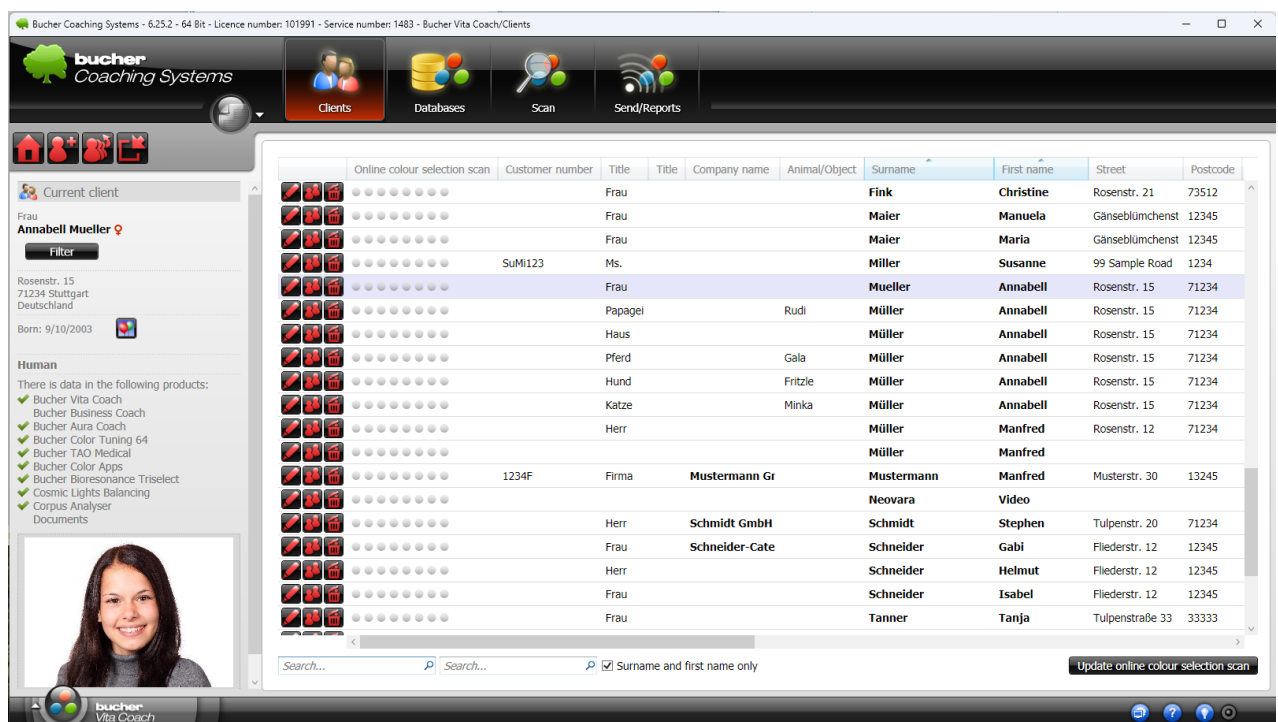

#### Étape 2 : Créer un nouveau client

1. Cliquez sur le bouton pour **créer/modifier** (saisissez les données client).



2. Vous êtes maintenant dans le registre des données personnelles. Veuillez saisir les informations requises (généralement : nom, adresse, date de naissance, sexe et éventuellement d'autres champs).

 Edit client

|          |                     |                 |              |                |          |           |                    |
|----------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|-----------|--------------------|
| Personal | Password protection | Client settings | Client image | Remedy Pyramid | Comments | Documents | Diagnoses/Symptoms |
|----------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|-----------|--------------------|

Customer number:

Title/Title:

Company name:

Surname/First name:

Street:

Postcode/Town:

Country:

Tel. (private/business):

Mobile/Fax:

Email:

Date of birth/Time:   Species:

22 years old, born on a Wednesday  
 Star sign: Virgo   
 Chinese zodiac sign: Goat (Water) 羊 水

Gender/Account holder:

Language/IBAN:

Marital status/BIC:

Bank details

3. Sélectionnez l'espèce appropriée, par exemple : « Humain », « Cheval », « Chien », « Chat », « Autre animal », « Plante » ou « Autre ». S'il ne s'agit pas d'un humain, veuillez indiquer le nom de l'animal ou de l'objet dans le champ « Nom de l'animal/de l'objet ». Les champs d'adresse, y compris le nom et le prénom du propriétaire, contiendront alors ces informations.
4. Si possible, téléchargez une **image du client** dans l'onglet « Image du client ».

 Edit client

|          |                     |                 |              |                |          |           |                    |
|----------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|-----------|--------------------|
| Personal | Password protection | Client settings | Client image | Remedy Pyramid | Comments | Documents | Diagnoses/Symptoms |
|----------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|-----------|--------------------|



5. Ajoutez des « Remarques » si nécessaire (par exemple, préoccupations, conditions-cadres, accords).
6. Pour une évaluation ultérieure de l'IA, il est également utile de remplir les champs de saisie « Diagnostics/Symptômes ».

7. Cliquez sur « Enregistrer » en bas à droite.

**Résultat :** Le client est créé, ajouté à la liste des clients et devient automatiquement le « client actuel » (visible en haut à gauche de l'écran).


### Conseil pratique :

Une photo récente du client facilite sa reconnaissance au quotidien. Utilisez la section « Remarques » pour les informations que vous souhaitez retrouver rapidement lors de vos prochains rendez-vous.

### Étape 3 : S'assurer que le bon client est actif

1. Vérifiez à gauche, sous « Client actuel », si le client correct est affiché.

**Résultat :** Ce client est **actuellement sélectionné**. Toutes les étapes suivantes (numérisation, évaluation, envoi/rapports) concernent ce client.

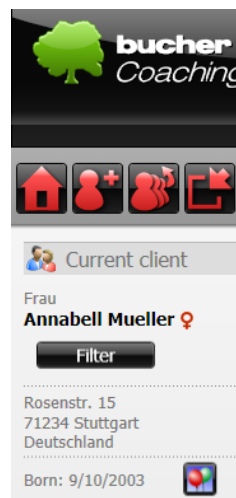

### Étape 4 : Utiliser des filtres de confidentialité (facultatif, mais recommandé si le client peut voir l'écran)

1. Sélectionnez le client.
2. Cliquez sur « Filtrer ».

**Résultat :** Seul ce client est affiché. Le bouton « Filtrer » indique clairement (par un effet rouge) que le filtre est actif.



### Danger:

Si le filtre reste actif, tous les autres clients sembleront avoir « disparu ». Il ne s'agit pas d'une perte de données. Cliquer à nouveau sur le bouton du filtre affichera de nouveau tous les clients.

### Avis

N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Si vous fermez la fenêtre sans enregistrer, un message vous demandera si vous souhaitez sauvegarder les données modifiées. Si vous répondez « Non », vos modifications seront perdues.

### 3.1.2.5 Autres fonctions de gestion de la clientèle

Outre la création et la modification d'enregistrements, la fenêtre client propose d'autres fonctions permettant de gagner du temps et d'éviter les erreurs lors du traitement de grands volumes de données. Les fonctions disponibles peuvent varier selon la licence et la version du programme.

#### Vérification des clients actifs et protection des données

Cliquer sur une ligne désigne la personne comme client actuel. Avant chaque analyse, exportation et transmission, vérifiez le nom dans la section « Client actuel ». Toutes les étapes suivantes se réfèrent à cette sélection.

Si un client peut voir l'écran, activez le filtre. Seul le client sélectionné sera alors visible. Un bouton de filtre rouge indique que le filtre est actif ; cliquer à nouveau dessus affiche tous les enregistrements.

#### Modifier, copier et supprimer des enregistrements de données

Ouvrez l'enregistrement de données à l'aide de l'icône de modification située sur la ligne correspondante (l'icône la plus à gauche). Enregistrez explicitement vos modifications avant de fermer la fenêtre.



La fonction de copie (icône centrale) permet d'utiliser une fiche existante comme base pour un nouveau client, par exemple pour les familles ou plusieurs animaux appartenant au même propriétaire. Ensuite, vérifiez et modifiez tous les champs personnels afin d'éviter toute copie accidentelle de données de la personne d'origine.

Vous pouvez supprimer un client à l'aide de l'icône située le plus à droite. Ne supprimez un client qu'après avoir soigneusement vérifié sa présence. La suppression d'un client peut également entraîner la suppression des paquets associés et des résultats d'analyse de tous les autres produits sous licence. Il est conseillé de créer une sauvegarde de vos données au préalable si vous pensez en avoir besoin ultérieurement.

#### Trier et rechercher

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier la liste selon ce champ. Un petit triangle indique le sens du tri. Lors d'un tri par nom de famille, le prénom est également pris en compte comme critère supplémentaire.

|  | Online colour selection scan | Customer number | Title | Title | Company name | Animal/Object | Surname | First name |
|--|------------------------------|-----------------|-------|-------|--------------|---------------|---------|------------|
|  | ● ● ● ● ● ● ● ●              |                 | Haus  |       |              |               | Müller  | Annabell   |

Saisissez d'abord les premières lettres du nom de famille dans le champ de recherche. La liste affichera le premier résultat correspondant. Si nécessaire, vous pouvez affiner votre recherche en incluant le prénom.

|                                        |                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="Search..."/> | <input type="text" value="Search..."/> | <input checked="" type="checkbox"/> Surname and first name only |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

#### Photo du client, notes et coordonnées

Dans l'onglet « Image du client », vous pouvez, selon vos paramètres, prendre une photo avec votre webcam, l'importer depuis un fichier ou la coller depuis le presse-papiers. L'image peut être

recadrée, pivotée ou supprimée. N'utilisez que des images ayant reçu le consentement explicite du client et n'utilisez pas de photos provenant des réseaux sociaux sans autorisation.


Dans la section « Remarques », vous pouvez consigner des notes organisationnelles et des résumés de conversations. N'y inscrivez que les informations nécessaires à la prestation des soins.

La fonction de copie des données d'adresse transfère les informations de contact dans le presse-papiers Windows. Avant de les coller dans d'autres programmes, vérifiez que ce transfert est autorisé par la loi sur la protection des données et que le document cible est protégé.

### 3.1.2.6 Fenêtre de base de données (détails)

Le système de gestion de bases de données est structuré de manière hiérarchique : Domaine → Langue → Groupe → Base de données → Entrée de base de données. Vous pouvez ouvrir ou fermer les niveaux inférieurs à l'aide du petit triangle situé à côté d'un élément.

« Bases de données Vita » contient les bases de données en lecture seule fournies par Bucher GmbH. « Mes bases de données » contient vos propres bases de données modifiables. Les informations relatives à l'élément sélectionné s'affichent à droite.

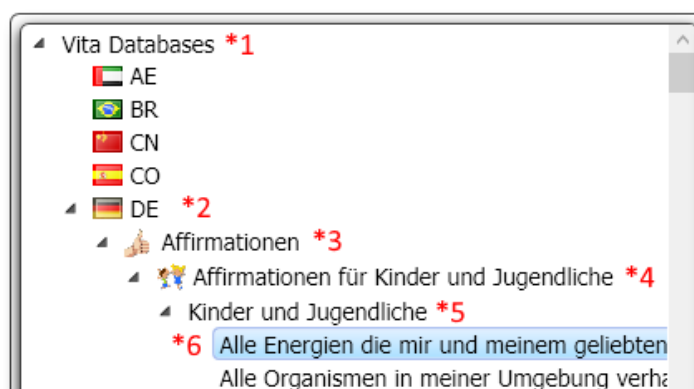

\*1 = Zone (Bases de données Vita ou Mes bases de données)

\*2 = Langue

\*3 = Nom du groupe de bases de données


\*4 = Nom de la base de données

\*5 = Entrée dans la base de données

\*6 = Sous-entrée d'une entrée de base de données

### Options d'importation


Selon la version et l'activation, le menu d'importation peut importer des bases de données à partir d'un périphérique de stockage local, du serveur Bucher ou d'un échange avec d'autres utilisateurs BCS.

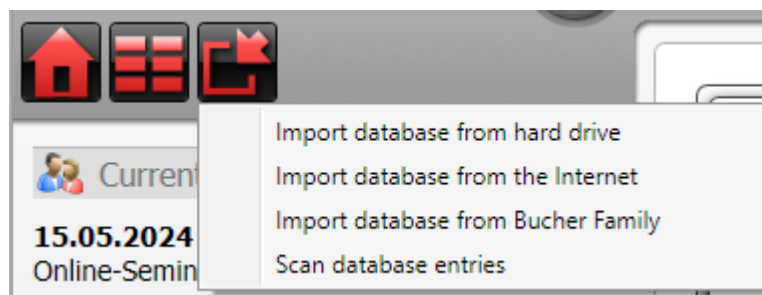

Si vous possédez plusieurs versions de votre propre base de données, vous pouvez utiliser la fonction de comparaison pour identifier les différences avant de remplacer ou de modifier davantage une version.

## Recherche dans la base de données

Ouvrez la recherche dans la base de données et saisissez un terme aussi précis que possible. Selon votre choix, la recherche peut porter uniquement sur le terme ou également sur les commentaires et notes. Les termes généraux génèrent souvent de nombreux résultats ; des termes plus précis facilitent la sélection. Plusieurs résultats identiques peuvent s'afficher, car certains termes apparaissent dans plusieurs bases de données.

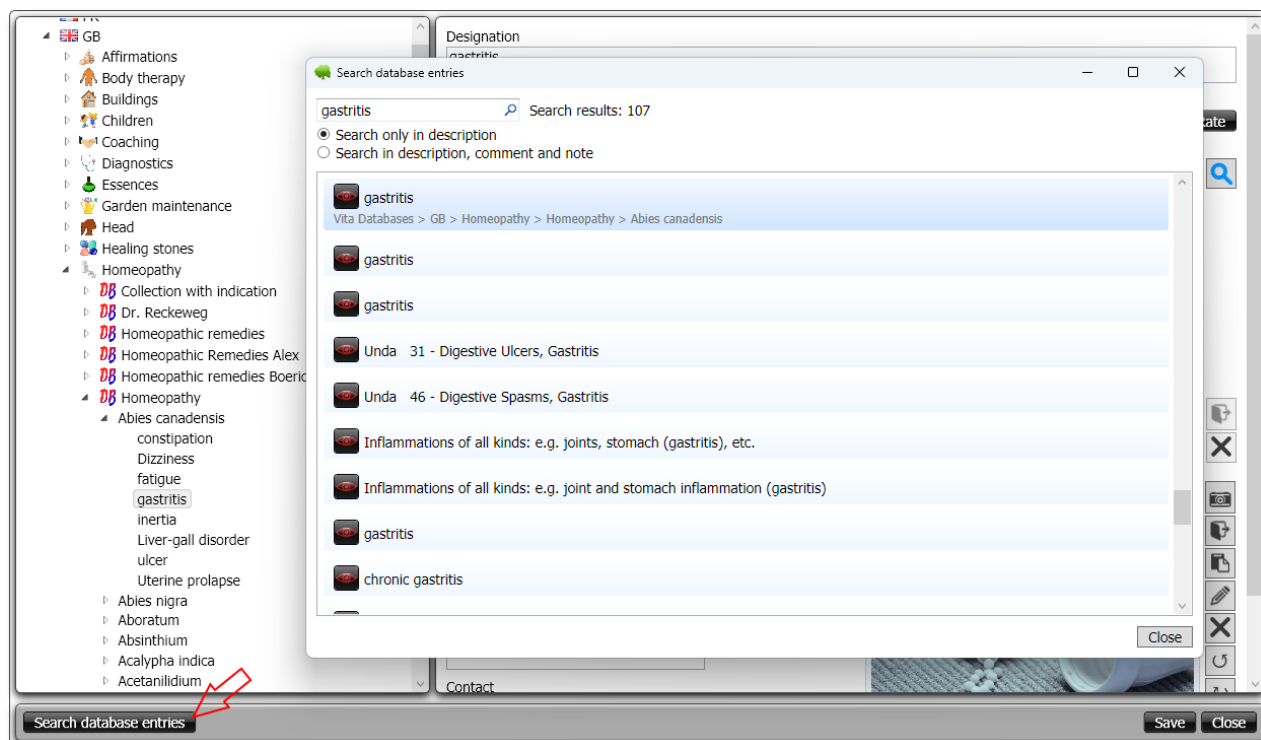

### 3.1.2.7 Création de votre propre base de données

Les bases de données personnalisées sont créées exclusivement dans « Mes bases de données ». Les libellés de menu suivants peuvent apparaître dans l'interface en anglais :

1. Faites un clic droit sur le drapeau de la langue souhaitée et sélectionnez « Nouveau groupe ». Saisissez un nom de groupe unique.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau groupe et sélectionnez « Nouvelle base de données ». Saisissez un nom de base de données unique.
3. Cliquez avec le bouton droit sur la base de données et sélectionnez « Nouvelle sous-entrée » ou « Nouvelle entrée ». Saisissez le nom de la première entrée.
4. À droite, ajoutez une description, un commentaire, une note et, le cas échéant, une image. Enregistrez l'entrée avant de passer à la suivante.

#### Conseil pratique :

Avant toute modification importante, effectuez une sauvegarde de vos données. Utilisez des noms de groupes et de bases de données cohérents et vérifiez si une entrée existe déjà avant de la recréer.

### 3.1.2.8 Erreurs courantes et solutions

**« Je ne vois aucune base de données. »**

Cause : Aucune base de données n'est importée initialement après l'installation.

Solution : Ouvrez « Bases de données » → Cliquez sur l'icône d'importation en haut à gauche et sélectionnez « Importer des bases de données depuis Internet » dans le menu contextuel.

**« Tous les clients sont partis, il n'en reste qu'un. »**

Cause : Le filtre est activé. Solution : Cliquez à nouveau sur « Filtre » dans la fenêtre du client pour faire disparaître le marqueur rouge.

**Les modifications apportées au client n'ont pas été enregistrées.**

Cause : le bouton « Enregistrer » n'a pas été cliqué et l'option d'enregistrement a été refusée.

Solution : modifiez à nouveau le client, effectuez les modifications, puis cliquez sur « Enregistrer ».

**« Je travaillais pour le mauvais client. »**

Cause : Le mauvais client a été sélectionné. Solution : Vérifiez toujours brièvement le client sélectionné avant de procéder à l'analyse ou à l'évaluation. Il est également possible de déplacer les paquet vers d'autres clients.

### 3.1.2.9 FAQ

**Dois-je télécharger une photo du client ?**

Non. Cependant, c'est recommandé car cela facilite l'identification. Si aucune photo n'est disponible, vous pouvez vous en passer.

Puis-je également ajouter des animaux, des plantes ou des objets comme clients ?

Oui. Sélectionnez l'espèce appropriée :

- Personne
- Cheval
- Chien
- Chat
- Autre animal
- usine
- Autres éléments (par exemple, bâtiments, jardin, véhicules, etc.)

**Ai-je besoin d'une connexion internet permanente ?**

Une connexion internet peut être nécessaire pour importer ou mettre à jour des bases de données.

Le traitement des données existantes (clients, analyses, rapports, envoi) s'effectue en local et fonctionne même sans connexion internet.

### 3.1.3 Effectuer une analyse de résonance (scan)

#### 3.1.3.1 Vue d'ensemble

L'analyse de résonance (scan) permet de trouver, dans les bases de données radioniques sélectionnées, les entrées présentant la plus forte résonance avec le client actuellement sélectionné. Il en résulte un ensemble d'entrées de scan qui peuvent ensuite être traitées dans « Envoyer/Rapports » (visualiser, modifier, ajouter, imprimer, envoyer, exporter).

Pour effectuer une analyse, cliquez sur le « Bouton d'analyse principal ».

Important : Un examen d'imagerie ne remplace pas un diagnostic médical. Les résultats de l'examen fournissent des informations et des orientations pour la suite des investigations, et non le diagnostic lui-même.


### 3.1.3.2 Prérequis

1. Le client est créé et sélectionné dans le système de gestion des clients.  
Résultat : le client actuellement sélectionné s'affiche dans le coin supérieur droit de la fenêtre de numérisation.
2. Au moins une base de données compatible a été importée et est visible dans la fenêtre d'analyse.  
Résultat : les cases à cocher sont sélectionnables dans la zone de sélection de la base de données.
3. Optionnel : Le matériel Radionics est connecté et sélectionné dans la fenêtre de balayage.  
Résultat : Le matériel utilisé est identifiable dans la zone matérielle (icône d'engrenage).


### 3.1.3.3 Instructions étape par étape pour la « numérisation »

#### A) Examen standard (recommandation pour le premier contact) : « Examen des signes vitaux » → « Bilan de santé »

1. Ouvrez la fenêtre « Analyser ».  
Résultat : La fenêtre d'analyse, affichant la sélection de la base de données et les options d'analyse, est visible.

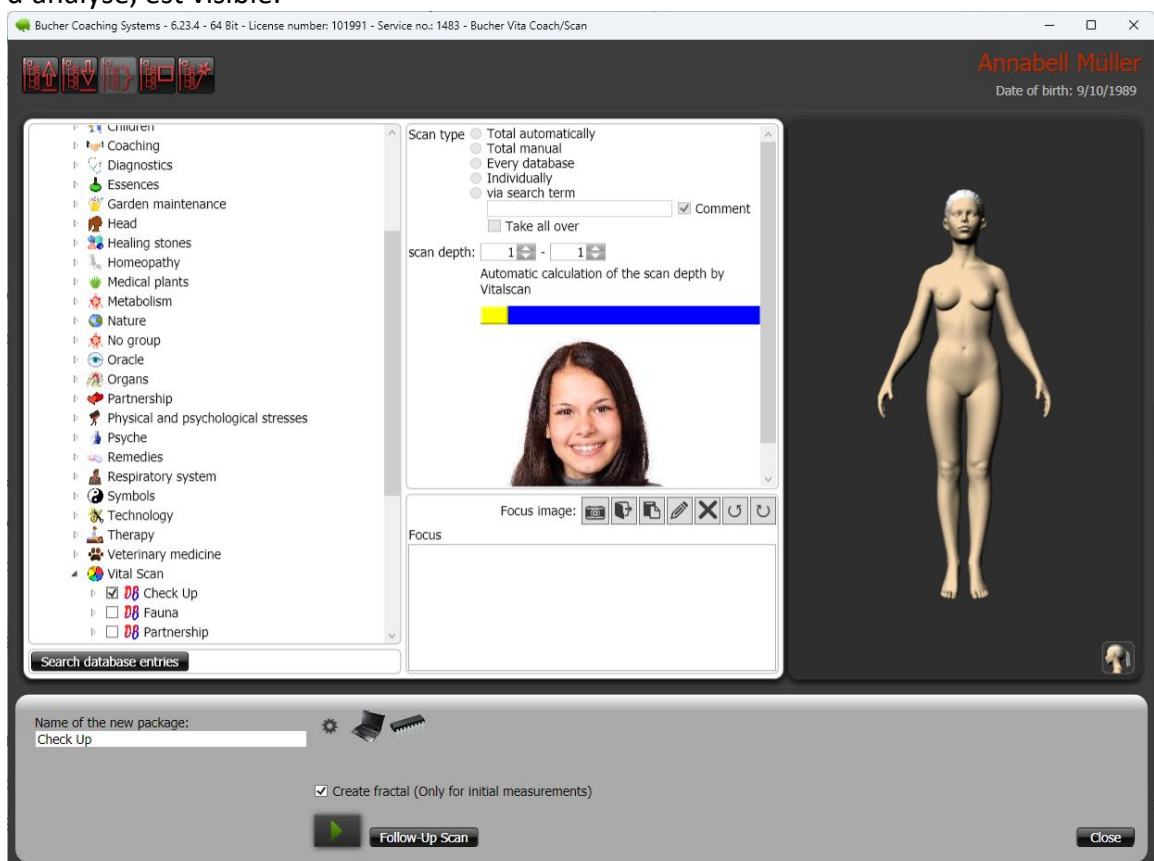


2. Vérifiez le client actuellement sélectionné (y compris sa date de naissance) dans le coin supérieur droit.
3. Ouvrez le groupe « Analyse des signes vitaux » dans la liste de la base de données.  
Résultat : les entrées du groupe deviennent visibles.

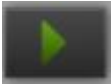4. Cochez **une seule** case pour « Vérification » (base de données de personnes).  
Résultat : Seule l'option « Vérification » est sélectionnée. Attention : Les bases de données critiques ne peuvent être analysées qu'une seule fois. Aucune autre case ne peut être cochée pour cette analyse.
5. Si nécessaire, modifiez le nom du paquet de numérisation avant de lancer la numérisation (en bas à gauche de la fenêtre).  
Résultat : vous pourrez facilement identifier la numérisation ultérieurement, même s'il s'agit de plusieurs numérisations.
6. Facultatif : Indiquez votre préoccupation dans le champ « Objet » (par exemple : « Résolution des crises de migraine »).  
Résultat : L'analyse se concentrera sur ce problème. Si ce champ est laissé vide, la situation actuelle sera automatiquement sélectionnée.
7. Lancez l'analyse à l'aide du bouton « Démarrer l'analyse » (triangle vert).  
Résultat : L'analyse est en cours.  

8. Attendez que « Annuler » en bas à droite soit remplacé par « Fermer ».  
Résultat : L'analyse est terminée et peut être enregistrée. Important : Si vous cliquez sur « Annuler » pendant l'analyse, celle-ci sera interrompue et les résultats ne seront pas enregistrés.
9. Confirmez le message de fin d'analyse en cliquant sur « OK », puis fermez l'analyse en cliquant sur « Fermer ».  
Résultat : le résultat de l'analyse est enregistré sous forme de paquet et disponible dans « Envoyer/Rapports ».

## **B) Analyse individuelle (travail sur un sujet ou sur une solution)**

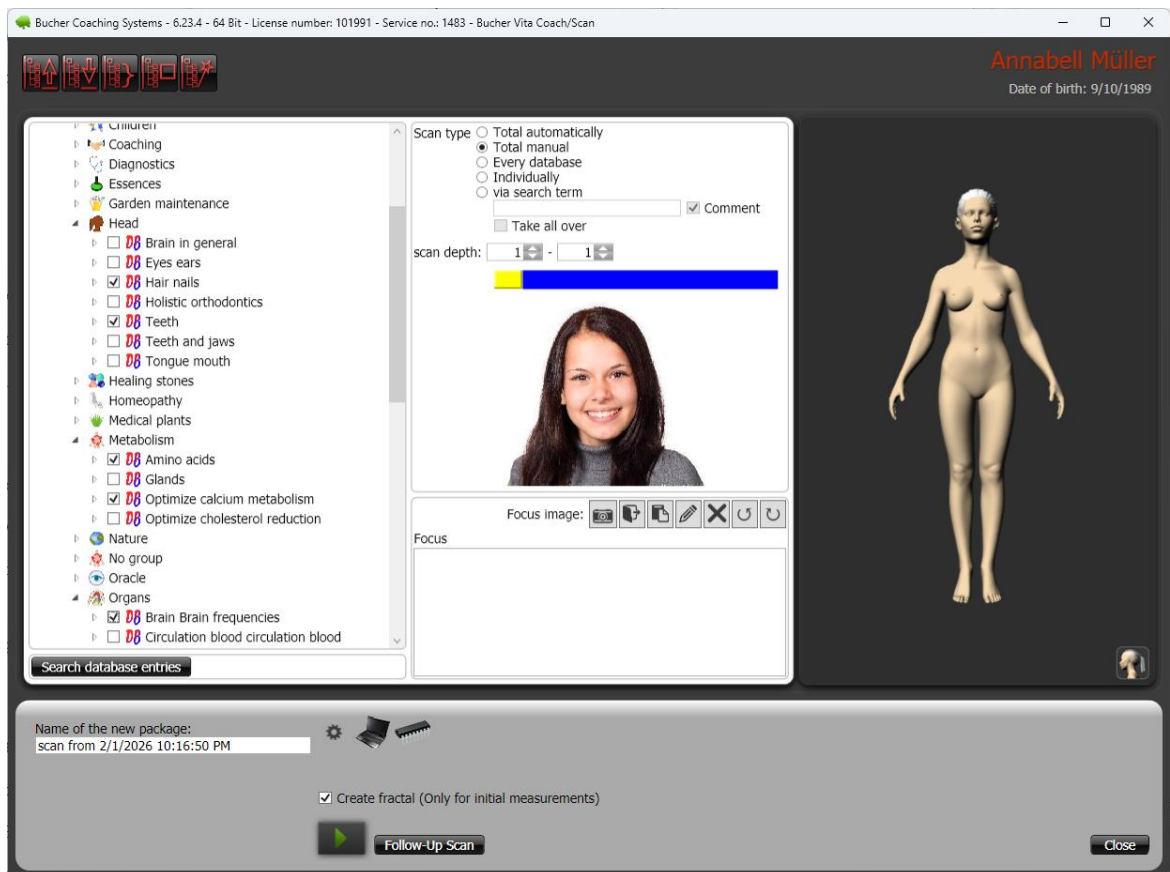1. Ouvrez la fenêtre « Scanner ».  
Résultat : La fenêtre de numérisation est visible.
2. Vérifiez le client actuellement sélectionné dans le coin supérieur droit.  
Résultat : Le client correct a été confirmé.
3. Sélectionnez les bases de données pertinentes pour les sujets du client en cochant les cases correspondantes.  
Résultat : seules les bases de données correspondant à la requête sont sélectionnées.



Astuce pratique : pour les requêtes récurrentes, utilisez un « ensemble d'analyse ». Cela vous permet d'enregistrer une sélection de cases cochées et de la réutiliser ultérieurement.



4. Facultatif : Utilisez la fonction « requête de champ morphique » pour obtenir des suggestions de bases de données supplémentaires.



Résultat : Environ 10 bases de données supplémentaires seront activées en plus de celles que vous avez déjà sélectionnées.

5. Sélectionnez un type de scan.

Résultat : cela détermine le nombre de résultats générés. Recommandation : pour une utilisation quotidienne, l'option « Total automatique » est recommandée.

Résultat : le système détermine le nombre de résultats en fonction de la sélection et réduit les résultats erronés.

### Options (aperçu succinct) :

1. "Automatique global" : Le système détermine le nombre de résultats.
2. « Entièrement manuel » : Vous déterminez la profondeur de balayage à l'aide d'un curseur.
3. « Chaque base de données » : Un nombre fixe de résultats est récupéré pour chaque base de données sélectionnée.
4. « Individuel » : Un nombre de résultats distinct est défini pour chaque base de données.
5. "Avec mot-clé" : Tout d'abord, les entrées contenant un mot-clé sont filtrées, puis la recherche est effectuée.
6. Facultatif : Saisissez une description claire dans le champ « Objectif » (par exemple : « Résolution des douleurs dorsales »).  
Résultat : L'analyse ciblera précisément le problème. Si ce champ est laissé vide, la « Situation actuelle » sera utilisée.
7. Donnez un nom significatif à l'analyse.  
Résultat : vous conserverez une vue d'ensemble lorsque vous traiterez plusieurs analyses (par exemple, « Problèmes de dos », « Sommeil », « Stress au travail »).
8. Vérifiez les paramètres matériels à l'aide de l'icône d'engrenage (en bas de la fenêtre).  
Résultat : vous saurez si la numérisation est effectuée avec ou sans matériel.
9. Lancez l'analyse en cliquant sur « Démarrer l'analyse » (triangle vert).  
Résultat : L'analyse est en cours.
10. Attendez que « Annuler » soit remplacé par « Fermer ».  
Résultat : L'analyse est terminée.
11. Confirmez le message de fin d'analyse en cliquant sur « OK », puis fermez en cliquant sur « Fermer ».  
Résultat : Le résultat de l'analyse est enregistré et peut être ouvert dans « Envoyer/Rapports ».

### 3.1.3.4 Utilisation des ensembles de numérisation et de la sélection rapide

Un ensemble de scan enregistre la position des cases à cocher des bases de données sélectionnées. Il ne contient ni les résultats du scan ni les données client. Les ensembles de scan sont adaptés aux questions récurrentes où les mêmes bases de données sont régulièrement sélectionnées.

**Charger l'ensemble d'analyse :** Charge une sélection de bases de données précédemment enregistrée.

**Enregistrer la configuration de scan :** Enregistre les cases à cocher actuellement sélectionnées sous un nom explicite.

**Sélectionner le groupe entier :** Mettez un groupe en surbrillance et utilisez la fonction de groupe pour vérifier toutes les bases de données associées.

**Réinitialiser la sélection :** Supprime toutes les cases cochées et crée un point de départ vierge.

**Suggérer des bases de données supplémentaires :** cette fonction ajoute des bases de données supplémentaires à la sélection existante, si elles sont disponibles dans votre version.

**Étape de contrôle :** Après le chargement d'un ensemble d'analyse, vérifiez toujours le client actuel, les bases de données sélectionnées et le focus. Un ensemble enregistré ne remplace pas la sélection professionnelle requise pour chaque cas spécifique.

### Avis importants, avertissements

Important : Une profondeur de numérisation manuelle trop élevée peut générer de nombreux problèmes parasites, rendant l'analyse plus difficile. Il est préférable d'utiliser le mode « Automatique global » et d'augmenter la profondeur de manière sélective.

### Avis

Les bases de données d'analyse essentielles (par exemple, « Bilan de santé ») sont analysées exclusivement. Ne les mélangez pas avec d'autres bases de données.

### Important

N'annulez pas l'analyse en cliquant sur « Annuler » si vous souhaitez conserver les résultats. Cliquez ensuite sur « Fermer » une fois l'analyse terminée.

### 3.1.3.5 Erreurs courantes et solutions

#### Client mal scanné.

Solution : Avant chaque scan, vérifiez le client (y compris sa date de naissance) en haut à droite. Vous pouvez également transférer le scan vers un autre client via la fenêtre « Envoyer/Rapports ».

#### Les résultats sont manquants après l'analyse.

Cause : L'analyse a été annulée à l'aide du bouton « Annuler ».

Solution : Relancez l'analyse et attendez que le bouton « Fermer » soit disponible.

#### Trop de résultats peu clairs.

Cause : profondeur d'analyse trop élevée ou trop de bases de données sélectionnées.

Solution : passez en mode « Automatique global » et réduisez le nombre de bases de données sélectionnées.

#### Impossible de lancer l'analyse des données critiques.

Cause : D'autres bases de données sont également sélectionnées.

Solution : Sélectionnez UNE SEULE base de données pour l'analyse des données critiques, par exemple « Vérification », et décochez toutes les autres cases. Relancez ensuite l'analyse.

Sinon, si vous n'utilisez pas de base de données Vital Scan, vous pouvez sélectionner autant de bases de données que vous le souhaitez pour l'analyse.

### 3.1.3.6 FAQ

#### Question : Dois-je toujours saisir un élément ?

Réponse : Non. Si le champ « Situation actuelle » reste vide, l'élément « Situation actuelle » est utilisé automatiquement.

#### Question : Quel est l'avantage d'un nom de numérisation ?

Réponse : Lors de numérisations multiples, vous pouvez identifier plus rapidement les données résultantes et les attribuer clairement. Par conséquent, décrivez brièvement la numérisation dans son nom.

**Question : Quel paramètre de type de numérisation est le plus sûr pour commencer ?**

Réponse : « Automatique global » car le système limite correctement le nombre de résultats.


**Question : Puis-je tester le programme sans le capteur CA ?**

Réponse : Pour vous familiariser avec son fonctionnement, vous pouvez temporairement configurer votre ordinateur comme matériel radionique. Ceci est uniquement destiné aux tests et à la pratique. Pour une utilisation normale, connectez le capteur CA et testez son fonctionnement.

## 3.1.4 Évaluer et hiérarchiser les résultats

### 3.1.4.1 Vue d'ensemble

Après l'analyse, les résultats sont disponibles sous forme de dossier. Ce dossier contient les résonances individuelles (thèmes). L'objectif de l'analyse est d'identifier les thèmes les plus importants, de les regrouper de manière pertinente et de définir les prochaines étapes avec le client. L'accent est mis sur les solutions et les approches concrètes, et non sur les diagnostics.

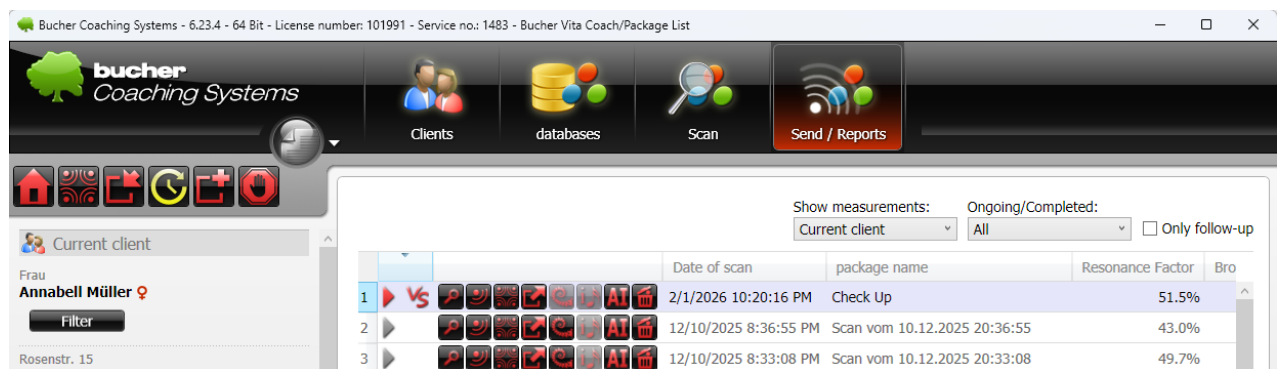

### 3.1.4.2 Prérequis

- Le client a été sélectionné.
- Un résultat d'analyse (paquet) est disponible.
- Ils connaissent le contexte de la demande (objet) ou le précisent peu de temps avant l'évaluation.

### 3.1.4.3 Instructions étape par étape

1. Ouvrez la liste des résultats via « Envoyer/Rapports ».  
Résultat : La liste des paquets d'analyse pour le client actuellement sélectionné est visible.
2. Dans la ligne des résultats souhaités, ouvrez la fenêtre « Envoyer ».



Résultat : le paquet peut être consulté en détail et utilisé pour la suite des opérations.


3. Vérifiez les informations figurant sur l'emballage (première orientation).

Portez une attention particulière à :

- « Facteur de résonance » (valeur moyenne des intensités dans le paquet).
- « Intensité du paquet » (force de transmission, valeur par défaut = 2 500 sur 10 000).
- « Heure de début », « Date de fin », « Intervalle » (contrôle du temps).

Résultat : Vous comprenez la structure du paquet avant d'en examiner les détails.

#### 4. Commencez par établir des priorités en fonction de l'intensité.

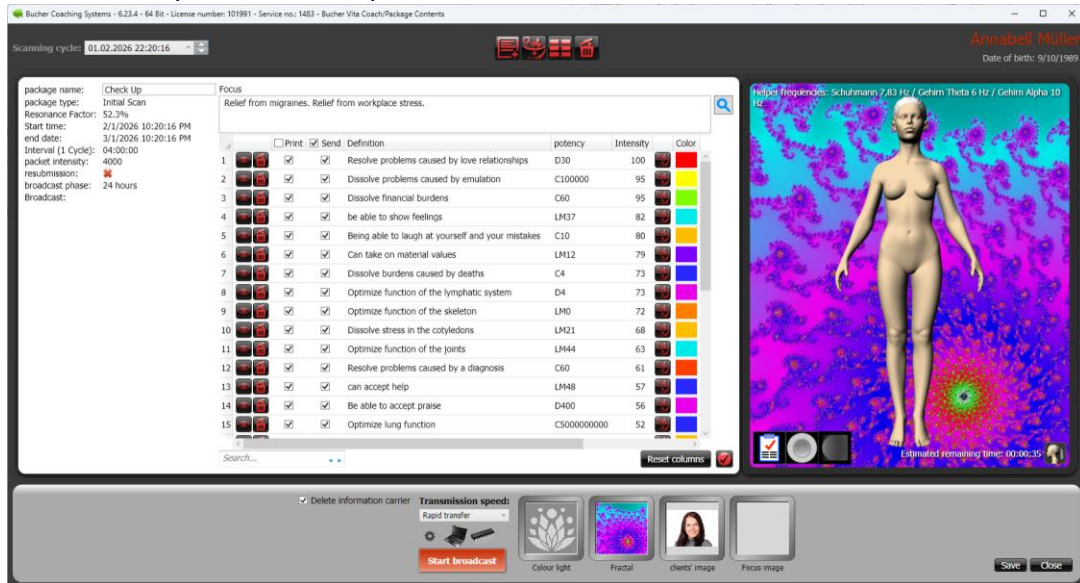

- Les réponses sont généralement classées par ordre d'intensité décroissante. Les sujets les plus importants figurent en tête de liste.
- Utilisez l'intensité comme premier critère de filtrage.  
Résultat : vous obtenez un classement initial des sujets. Les sujets importants apparaissent en haut, les moins importants en bas.

#### 5. Menez le processus de priorisation avec le client.

Passez en revue chaque élément, en commençant par le haut de la liste, et posez des questions courtes et ouvertes, par exemple :

- « À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le terme : relation amoureuse ? »
- « Y a-t-il une situation qui vous vient immédiatement à l'esprit ? »
- « Ressentez-vous une réaction à cela en ce moment ? »

Résultat : Vous identifiez les réactions réellement importantes pour le client à cet instant précis.

#### 6. Soyez attentif aux marqueurs émotionnels et au fil conducteur.

- Si une contribution est empreinte d'émotion (voix qui tremble, larmes, tension visible), c'est un signe de pertinence.
- Recherchez les thèmes récurrents dans plusieurs entrées (un fil conducteur).  
Résultat : un thème central cohérent se dégage de nombreux termes individuels.

#### 7. Utilisez la puissance comme indicateur temporel (facultatif).

Si le paquet contient des pouvoirs, ceux-ci peuvent indiquer approximativement une classification temporelle. Cela peut aider à attribuer des phases ou des événements de vie appropriés.

- Les puissances D indiquent un processus temporel s'étalant sur quelques semaines.
- Les valeurs C indiquent un événement survenant dans les quelques mois qui suivent.

- Les puissances LM indiquent un événement temporel survenant dans l'ordre de l'année.  
Résultat : Vous obtenez des indices sur le moment où une résonance a pu se produire.
8. Établissez une liste pragmatique de priorités.  
L'ordre suivant s'est avéré efficace :
1. Réponse émotionnelle intense et claire de la part du client.
  2. Éléments qui soutiennent le fil conducteur commun (nœuds).
  3. Les éléments qui suggèrent directement des solutions ou des étapes concrètes à suivre.  
Résultat : vous disposez d'une liste concise des points clés pour votre prochaine tâche.
9. Faites des choix conscients concernant ce qui est imprimé.
- Utilisez la colonne « Imprimer » pour inclure ou exclure sélectivement des entrées.
  - Il est préférable de ne pas imprimer les éléments susceptibles de susciter de l'anxiété ; il vaut mieux en discuter avec eux en toute discrétion.  
Ainsi, le document reste utile et n'accable pas le client.
10. Si nécessaire, vérifiez si des entrées individuelles doivent être envoyées.  
En général, les cases à cocher de la colonne « Envoyer » restent sélectionnées. Dans certains cas justifiés, vous pouvez exclure des entrées (par exemple, si le client ne souhaite pas inclure d'informations dans son champ). Résultat : le forfait est adapté au client et à ses contraintes.
11. Documentez la priorisation en dehors du paquet, par exemple dans la section « Diagnostics/Symptômes » de l'espace client.  
Notez brièvement :
- Sujets principaux (ex. : 3 à 7 points)
  - objectif ou thème convenu de la prochaine réunion
  - Instructions sur la manière d'aborder les sujets sensibles (par exemple, éviter certains termes).  
Résultat : Le processus est compréhensible et permet une reprise ultérieure.

## Avis

Les entrées représentent des résonances et des thèmes, et non automatiquement des diagnostics. Des termes tels que jalousie, irascibilité, calomnie, fraude, indications de maladies ou autres thèmes peuvent aussi concerner des personnes de l'entourage du client. Le client peut en être affecté lorsqu'il entre en contact avec ces personnes et que le thème concerné intervient dans leurs échanges.

Important : un grand nombre d'entrées peut aussi résulter d'une profondeur de scan élevée. Toutes les entrées n'ont alors pas la même pertinence.

## Danger

Évitez d'imposer votre interprétation au client. Travaillez avec des questions et vérifiez si elles lui parlent, par exemple par une réaction émotionnelle.

### 3.1.4.4 Utilisation sécurisée de la liste des paquets

La liste des offres affiche les résultats pour le client actuellement sélectionné. Ne définissez le filtre client sur « Tous » que si vous souhaitez effectuer une recherche chez tous les clients. Avec plusieurs milliers d'offres, la génération de la liste complète peut prendre plus de temps.

### Détecter l'état et le type de paquet

Les symboles permettent de distinguer les examens initiaux, les scans de suivi et, le cas échéant, les examens vitaux. Les symboles colorés ou rouges indiquent des examens en cours ; les symboles gris représentent des examens terminés.

### Fonctions dans une ligne de paquet

Selon la licence, chaque ligne de paquet propose des fonctions d'aperçu avant impression, d'envoi, de diffusion collective, d'exportation, de fractale, d'Interblend et de suppression. Des icônes grisées indiquent souvent que la fonction n'est pas disponible pour ce paquet ou n'a pas été exécutée. Utilisez la recherche de paquets pour trouver un nom dans la liste, en avant ou en arrière. Si des colonnes ont été déplacées ou redimensionnées, « Réinitialiser la largeur des colonnes » rétablit la disposition par défaut.

The screenshot displays the Bucher Coaching Systems software interface. The top menu bar includes 'Clients', 'Databases', 'Scan', and 'Send/Reports'. The left sidebar shows the 'Current client' section for 'Frau Annabell Mueller' with a 'Filter' button and a list of products: Bucher Vita Coach, Bucher Business Coach, Bucher Aura Coach, Bucher Color Tuning 64, Bucher TAO Medical, Bucher Color Apps, Bucher Bioresonance Triselect, Cosmic Lights Balancing, and Corpus Analyser Documents. The main area shows a table of packages with columns for 'Scan date', 'Package name', 'Resonance factor', and 'Transmission'. The table lists 18 packages, including 'relieve migraine symptoms' and 'Check Up (1)'. The bottom status bar indicates 'Current user: Administrator'.

|    | Scan date             | Package name                 | Resonance factor | Transmission          |
|----|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | 8/21/2026 8:43:48 PM  | relieve migraine symptoms    | 75.0%            |                       |
| 2  | 2/1/2026 10:51:07 PM  | Check Up (1)                 | 52.5% (+0.2%)    |                       |
| 3  | 2/1/2026 10:20:16 PM  | Check Up                     | 52.3%            |                       |
| 4  | 12/10/2025 8:36:55 PM | Scan vom 10.12.2025 20:36:55 | 43.0%            |                       |
| 5  | 12/10/2025 8:33:08 PM | Scan vom 10.12.2025 20:33:08 | 49.7%            |                       |
| 6  | 12/10/2025 7:49:34 PM | Check Up                     | 52.9%            | 12/10/2025 8:01:10 PM |
| 7  | 12/10/2025 7:46:03 PM | CD Einschlafhilfe            | 50.4%            | 12/10/2025 7:59:02 PM |
| 8  | 12/10/2025 7:31:12 PM | Check Up                     | 50.6%            |                       |
| 9  | 12/10/2025 4:06:33 PM | Check Up                     | 49.9%            |                       |
| 10 | 11/12/2025 5:36:27 PM | Check Up                     | 45.7%            | 11/12/2025 5:38:37 PM |
| 11 | 10/15/2025 7:09:00 PM | Check Up                     | 50.3%            | 10/15/2025 8:01:23 PM |
| 12 | 10/15/2025 5:37:20 PM | Check Up                     | 58.5%            |                       |
| 13 | 2/21/2025 3:40:27 PM  | CD Angstauflösung            | 50.4%            |                       |
| 14 | 2/21/2025 3:40:00 PM  | CD Angstauflösung            | 52.0%            |                       |
| 15 | 2/21/2025 3:38:42 PM  | CD Angstauflösung            | 47.9%            |                       |
| 16 | 2/21/2025 3:11:53 PM  | Scan vom 21.02.2025 15:11:53 | 48.4%            | 2/21/2025 3:27:45 PM  |
| 17 | 2/18/2025 6:40:16 PM  | Kopfschmerzen                | 40.7%            | 2/18/2025 6:48:53 PM  |
| 18 | 1/25/2025 1:00:55 PM  | Scan vom 25.01.2025 13:00:55 | 60.3%            | 1/28/2025 2:10:56 PM  |

### 3.1.4.5 Modifier sélectivement le contenu du paquet

Ouvrez le contenu du paquet à l'aide du bouton correspondant dans la ligne du paquet.



## Ajouter des entrées

Selon le type de paquet, vous pouvez utiliser « Ajouter des entrées » pour lancer une analyse complémentaire ou créer une entrée vide et la décrire manuellement. Ces fonctions ne sont généralement pleinement disponibles que pour une seule analyse initiale, sans analyse ultérieure.



## Recalculer les paramètres

Le menu des paramètres permet de redéfinir ou de paramétrer la puissance, l'intensité, la couleur, l'intensité du paquet ou l'intervalle selon des valeurs prédéfinies. Utilisez cette fonction principalement pour les paquets créés, copiés ou importés manuellement. Avant d'appliquer la modification, vérifiez si elle concerne toutes les entrées ou seulement celles qui possèdent déjà une valeur ou celles qui n'en possèdent pas.



## Texte, recherche et surlignage

Le champ « Objectif » décrit le problème ou le but du paquet. Les textes plus longs peuvent être modifiés dans une fenêtre de saisie plus grande à l'aide de l'icône en forme de loupe. La fonction de recherche vous aide à trouver des termes dans de vastes ensembles de données. La mise en surbrillance colore les entrées existantes, ce qui facilite l'identification des nouveaux résultats lors d'une recherche ultérieure. Pour supprimer la mise en surbrillance, cliquez à nouveau. Pour exclure un élément du paquet de l'impression, décochez la case « Imprimer ». Si cet élément doit également être exclu de l'expédition, décochez également la case « Expédition ».

Bucher Coaching Systems - 6.25.2 - 64 Bit - Licence number: 101991 - Service number: 1483 - Bucher Vita Coach/Package contents

Measurement cycle: 21.08.2026 20:43:48

Annabell Mueller  
Date of birth: 9/10/2003

Package name: relieve migraine symptoms  
Package type: Initial measurement  
Resonance factor: 63.9%  
Start time: 8/21/2026 8:43:48 PM  
End date: 9/18/2026 8:43:48 PM  
Interval (1 Cycle): 04:00:00  
Package intensity: 4000  
Resubmission: ✖  
Transmission phase: 24 hours  
Transmission:

Focus  
Support for the relief of migraine symptoms and associated tension.

|    | <input type="checkbox"/> Print      | <input checked="" type="checkbox"/> Send | Designation                 |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>      | Führung                     |
| 2  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>      | Johanniskraut Tinktur       |
| 3  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>      | Stress                      |
| 4  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>      | Lebensfreude                |
| 5  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>      | Überaktivität               |
| 6  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>      | PS869.0 - Muskelentspannung |
| 7  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>      | Migräne - Nosode            |
| 8  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>      | Ich genüge                  |
| 9  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>      | Sepia                       |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>      | Tiefenentspannung           |

Helper frequencies: Schumann 7.83 Hz / Gehirn Theta 6 Hz / Gehirn Alpha 10 Hz

Estimated remaining time: 00

☒ Delete information carrier  
Transmission speed: Rapid transfer  
Start transmission

Coloured light Fractal Client image Focus image

Save Close

### 3.1.4.6 Erreurs courantes et solutions

**Problème : Le client se sent en insécurité après avoir vu la publication.**

Solution : Exclure de la publication les messages sensibles, agressifs ou anxiogènes, mais pas de leur diffusion. Plutôt que d'affronter la situation, aborder ces sujets avec tact lors d'une conversation. Il se peut qu'une publication anxiogène ne l'affecte pas directement, mais indirectement par l'intermédiaire d'une autre personne.

**Problème : Le paquet contient de très nombreux thèmes et semble arbitraire.**

Solution : rechercher le fil conducteur, traiter d'abord les entrées présentant les intensités les plus élevées et choisir une profondeur de scan mieux adaptée lors des scans suivants. Activer la profondeur de scan automatique pour inclure un nombre approprié d'entrées dans le paquet, ni trop ni trop peu.

**Problème : Les entrées sont incompréhensibles pour le client.**

Solution : Vérifiez si ces entrées concernent plutôt son environnement que le client lui-même. Laissez de côté les entrées pour lesquelles aucun lien ne peut être établi pour le moment. Leur pertinence apparaîtra souvent plus tard. Concentrez-vous sur les points clés.

### 3.1.4.7 FAQ

**Quel est le critère le plus important pour établir les priorités ?**

L'intensité est un point de départ pragmatique. L'essentiel est que ce soit la combinaison de l'intensité, du dialogue et d'une orientation claire. En fin de compte, les réponses du client lors de l'entretien d'évaluation déterminent quels sujets peuvent déclencher des symptômes.

**Faut-il tout aborder dans le dossier ?**

Non. Commencez par les points pertinents (en particulier les intensités les plus élevées et tout lien possible avec les problèmes du client) et procédez étape par étape.

**Puis-je tout imprimer ?**

Techniquement, oui. Cependant, il est conseillé de sélectionner les informations les plus pertinentes afin que l'impression reste utile et n'engendre pas d'anxiété inutile. Si possible, veuillez exclure les éléments suivants de l'impression :

- Articles qui suscitent la peur (par exemple, une maladie grave)
- Les candidatures compromettantes (par exemple, en raison d'une perte potentielle de face)
- Des entrées qui vous mettent dans une situation difficile à expliquer (par exemple, des méthodes que vous devriez ensuite expliquer)

Cependant, ces 3 restrictions sont levées dès que le sujet devient partie intégrante de la thérapie, par exemple parce que le client a lui-même soulevé ce sujet.

## 3.1.5 Planifier les paquets de coaching et le déroulement des séances

### 3.1.5.1 Vue d'ensemble

Dans cette étape, vous planifiez l'utilisation d'un paquet sélectionné sur une période définie. Vous déterminez **la date** et **la durée** de la transmission, **la fréquence** de répétition des informations et l'**intensité de la transmission**. De plus, vous documentez l'objectif dans le **texte d'introduction** et suivez systématiquement la progression grâce à des analyses **initiales** et **ultérieures**.

### 3.1.5.2 Prérequis

- Un client a été sélectionné.
- Un résultat d'analyse, un paquet créé manuellement ou un paquet importé est disponible.

- Vous avez déjà évalué et hiérarchisé le contenu (voir les étapes précédentes).

### 3.1.5.3 Paramètres du paquet pour la planification

Les paramètres suivants contrôlent la « planification d'envoi » du paquet :

| paramètre                | Signification                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du paquet            | Étiquetage clair, idéal pour le suivi et la récupération.                         |
| Type d'paquet            | Scanner initial ou scanner de suivi                                               |
| Facteur de résonance     | Valeur indicative de l'ambiance générale du paquet                                |
| Heure de début           | À partir du moment où la diffusion est censée prendre effet                       |
| Date de fin              | Jusqu'à quand la diffusion est-elle censée prendre effet                          |
| intervalle               | Temps de répétition pour une course complète                                      |
| Intensité des paquets    | Force de transmission                                                             |
| Rappel de renouvellement | Indiquer que le paquet devrait être étendu ultérieurement                         |
| Phase de diffusion       | Par exemple, toute la journée, seulement pendant la journée ou seulement la nuit. |
| Diffuser                 | Heure à laquelle le paquet a été transféré                                        |

#### Remarque :

Dans les « Paramètres » sous « Diffusion », vous pouvez sélectionner des préréglages qui configurent automatiquement des paramètres tels que la durée de transmission, l'intensité des paquets, etc. La durée de transmission correspond à la période d'action énergétique après la transmission elle-même et est fixée par défaut à quatre semaines. Ne modifiez ces préréglages que dans des cas exceptionnels justifiés et documentez tout écart.

### 3.1.5.4 Instructions étape par étape

#### A) Nommez le paquet et établissez un calendrier

1. Ouvrez la section « Envoyer/Rapports ».  
Résultat : vous verrez la liste des paquets du client actuellement sélectionné.
2. Ouvrez la fenêtre « Envoyer » dans la ligne du paquet souhaité.



Résultat : Vous pouvez consulter les détails du paquet et définir les options d'expédition.

3. Attribuez un nom unique au forfait en utilisant « Nom du forfait » (en haut à gauche de la fenêtre).

Cela permettra de l'identifier facilement par la suite. Conseil pratique : utilisez le thème principal du client dans la description (par exemple : soulager les migraines, gagner en confiance en soi, trouver l'âme sœur, etc.).

## Avis

Les dates de début et de fin, l'intervalle et l'intensité des paquets sont automatiquement définis selon vos préférences. Ne modifiez ces paramètres que dans des cas exceptionnels et justifiés. Vous pouvez effectuer ces modifications pour le paquet sélectionné en utilisant l'icône d'engrenage en bas de la fenêtre (Options d'envoi). Vous pouvez également y prolonger la période de validité d'un paquet expiré.



## B) Documenter le texte cible (point focal)

1. Ouvrez la fenêtre « Contenu du paquet ».  
Résultat : vous verrez le contenu du paquet et les champs de texte.
2. Saisissez l'objectif dans le champ « Objectif ». Formulez-le clairement, précisément et de manière à ce que le client puisse le comprendre.  
Résultat : l'objectif est inclus dans le paquet et transmis au destinataire (votre client) lors de l'expédition.
3. Si le texte est long, ouvrez la fenêtre de saisie plus grande à l'aide de l'icône de loupe située à droite du champ de sélection.  
Résultat : vous pouvez saisir et vérifier clairement des textes cibles plus longs.

## Conseil pratique :

Rédigez le texte d'introduction de manière à ce que le client puisse l'utiliser au quotidien (court, concret et positif). Il pourra ainsi s'en servir comme fil conducteur pendant la thérapie.

## C) Structuration et contrôle du déroulement de la session (examen initial et scans de suivi)

1. Dans la fenêtre « Analyse », utilisez le bouton « Analyse de suivi » pour vérifier, pour les analyses initiales sélectionnées, si et dans quelle mesure les conditions et les problèmes sur le terrain du client se sont améliorés/modifiés.
2. Vous pouvez effectuer des analyses complémentaires à tout moment, même immédiatement après l'analyse initiale. Une analyse complémentaire ne recherche pas de nouveaux sujets. Le programme utilise plutôt toutes les données de l'analyse initiale pour recalculer l'intensité. Ces données, y compris la nouvelle intensité, sont ensuite enregistrées dans le fichier de suivi. Résultat : la progression est traçable et vous pouvez réagir aux évolutions en fonction des besoins.
3. Les scans initiaux sont identifiés par un seul triangle sur la ligne d'emballage. Les scans suivants sont identifiés par trois triangles sur cette même ligne.

|   |  | Date of scan         | package name |
|---|--|----------------------|--------------|
| 1 |  | 2/1/2026 10:51:07 PM | Check Up (1) |
| 2 |  | 2/1/2026 10:20:16 PM | Check Up     |

## D) Utiliser la rappel de renouvellement (étendre les paquets)

1. Pour les paquet à renouveler, activez l'option « Renouvellement ». Vous pouvez modifier ce paramètre dans les options d'envoi (icône d'engrenage).  
Résultat : le paquet est marqué comme nécessitant un renouvellement.
2. Dans la liste des forfaits, veuillez prêter attention à l'indicateur de renouvellement. Si un ou plusieurs paquets d'un client doivent être prolongés plutôt que de les laisser expirer, le symbole correspondant apparaîtra en jaune dès que la date d'échéance du forfait sera dépassée.



Résultat : Vous pouvez identifier les forfaits qui doivent être renouvelés ou prolongés.

3. Prolongez la durée de ces paquets (même plusieurs simultanément) à l'aide de la fonction dédiée dans la liste des paquets (indiquée par l'icône jaune dans le graphique ci-dessus). Tous les paquets seront prolongés de leur durée actuelle.

Résultat : l'exécution et la planification se poursuivent sans interruption.

## E) Facultatif : Personnaliser le paquet (après copie ou création manuelle)

1. Si vous avez créé un paquet manuellement ou l'avez importé d'une archive, vérifiez ses paramètres et les valeurs de chaque entrée. Pour les paquets provenant d'une archive ou du gestionnaire de paquets, l'intensité et la puissance de chaque entrée sont automatiquement analysées et mises à jour pour le client actuel.  
Cela évite l'utilisation de « valeurs par défaut » inadaptées au client.
2. Par exemple, avec les anciens paquets, vous pouvez utiliser cette fonction pour effectuer une nouvelle analyse ou définir des paramètres (par exemple, les intensités, l'intensité des paquets, l'intervalle).

Résultat : Le paquet est personnalisé.



## Avis

Cette personnalisation est particulièrement utile si un paquet ne provient pas d'une analyse récente. Utilisez la fonction de recherche dans la liste des paquets (en bas à gauche) pour trouver un paquet sur un sujet précis lorsqu'il y en a de nombreux. Un nom de paquet cohérent est essentiel pour un historique de session propre. Une heure de début incorrecte (par exemple, ultérieure) entraînera un démarrage plus tardif de l'effet prévu. Normalement, le système définit la date de début à l'heure immédiatement après l'analyse.

### 3.1.5.5 Erreurs courantes et solutions

#### **Problème : Le paquet ne fonctionne pas.**

Solution : Vérifiez l'heure de début, la date de fin et assurez-vous que l'envoi a bien été effectué. Des obstacles peuvent-ils entraver son efficacité ? Il peut s'agir d'un manque de confiance en votre travail, d'un manque de motivation du client à résoudre son problème, ou encore du fait que le client

tire profit de son problème ou de sa maladie. De tels facteurs peuvent nuire à l'auto-guérison et à la résolution du problème.

**Problème : Le paquet apparaît comme terminé alors que le problème du client n'est pas encore entièrement résolu.**

Solution : Vérifiez la date de fin. Si nécessaire, prolongez la durée du paquet (icône d'engrenage dans la fenêtre d'envoi).

### 3.1.5.6 FAQ

**Dois-je toujours rédiger un texte de synthèse ?**

C'est recommandé. Il formalise l'objectif. Nombreux sont ceux qui savent précisément ce qu'ils **ne** veulent pas, mais qui n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils veulent. C'est précisément ce que vous devez définir avec le client, consigner dans le texte de synthèse et lui donner les moyens d'atteindre cet objectif.


**Quand faut-il effectuer des scans de suivi ?**

Lorsque vous souhaitez évaluer les progrès et procéder à des ajustements de manière structurée.

**Quel est l'objectif de cette rappel de renouvellement ?**

Elle permet d'identifier et de prolonger les dossiers qui doivent être traités dans les délais impartis.

## 3.1.6 Imprimer le paquet ou les résultats, ou les enregistrer en PDF

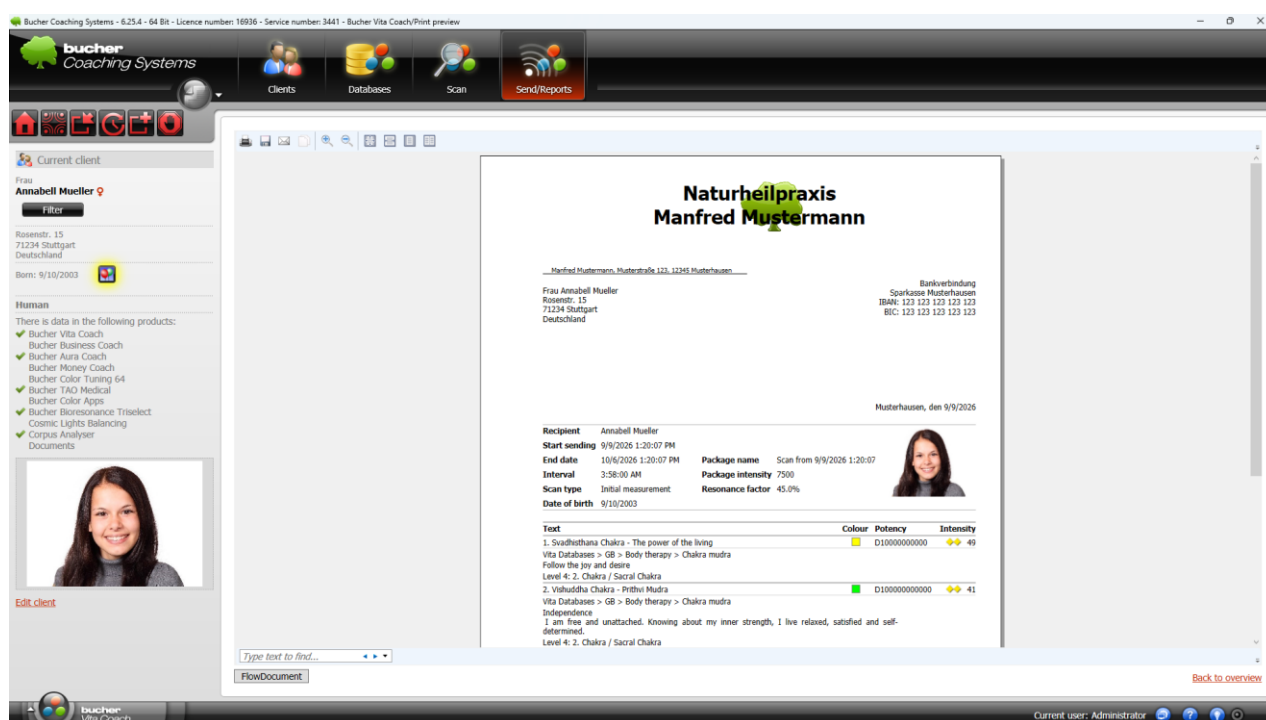

Aperçu avant impression d'un paquet

1. Ouvrez « Envoyer/Rapports » et repérez le paquet souhaité dans la liste. Lancez l'impression en cliquant sur l'icône de loupe dans la ligne du paquet.

Dans la fenêtre « Sélection d'impression », choisissez le profil de rapport « Impression patient » ou « Impression thérapeute ». Activez ensuite le contenu du rapport à inclure dans ce profil.

Cliquez sur le bouton « Enregistrer comme valeur par défaut » pour sauvegarder la sélection actuelle pour le profil choisi. Cette sélection sera utilisée lors de votre prochaine impression. Par conséquent, vérifiez quel profil est actif avant chaque impression.

Cliquez sur « Suivant » pour afficher l'aperçu avant impression. Résultat : L'aperçu avant impression s'affiche.

2. Sélectionnez l'un des symboles dans l'aperçu avant impression ci-dessus :



- Pour imprimer  
, sélectionnez une imprimante et allumez-la.
- Enregistrer au format PDF.  
Le rapport ne sera pas imprimé, mais enregistré au format PDF.
- Envoyer par e-mail.  
Cette fonction est disponible uniquement si vous avez configuré votre propre compte de messagerie pour l'envoi dans les paramètres.

## Avis

L'aperçu avant impression ne s'affiche pas si aucune imprimante n'est sélectionnée dans Windows. Dans ce cas, accédez à Paramètres Windows > Bluetooth et périphériques > Imprimantes et scanners. Sélectionnez votre imprimante comme périphérique par défaut. Si cela n'est pas possible, vous devrez peut-être désactiver l'option « Laisser Windows gérer mon imprimante par défaut ». Si vous n'avez pas d'imprimante installée, utilisez l'imprimante virtuelle « Microsoft Print to PDF ». L'aperçu avant impression est également disponible avec cette imprimante.

## 3.1.7 Transfert des paquets vers le champ d'information

### 3.1.7.1 Vue d'ensemble

Dans ce chapitre, vous transférerez un paquet complet vers le champ d'informations du client. Vous définirez les options de transmission, notamment la vitesse de transmission. Vous démarrerez et arrêterez les transmissions de manière contrôlée.

### 3.1.7.2 Objectif

Le lancement d'une transmission envoie les informations du paquet sélectionné ainsi que celles du destinataire. La transmission peut être programmée, par exemple, en fonction de sa durée, avec une heure de début, une date de fin, un intervalle et une phase de transmission.


### 3.1.7.3 Prérequis

- Le client souhaité a été sélectionné.
- Au moins un paquet est présent (résultat d'analyse ou paquet créé manuellement).
- Ils savent si le client est sur place ou non (important pour la vitesse de transmission).
- En option : un support d'information (par exemple, des globules, une carte magnétique, une pierre de guérison) est disponible si vous souhaitez créer un support d'information en parallèle.

### 3.1.7.4 Instructions étape par étape

1. Ouvrez la fenêtre « Envoyer/Rapports ».

Résultat : vous verrez la liste des paquets du client actuellement sélectionné.

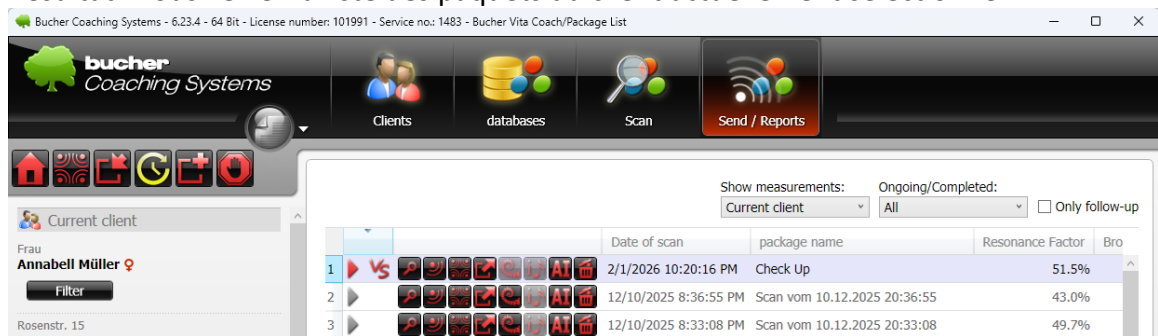

2. Sélectionnez le paquet à transférer dans la liste et cliquez sur l'icône « Envoyer » correspondante.



Résultat : La fenêtre d'envoi s'ouvre.

3. Ajustez la vitesse de transmission en fonction de la situation. Le temps affiché à droite de la fenêtre correspond à la durée estimée de la transmission en cours, et non à la durée totale des transmissions suivantes.
  - Le client est présent : en règle générale, choisissez **un réglage moyen ou lent**, ou un réglage où le processus de transmission dure au moins deux minutes. Cela permet au client de participer consciemment à l'application.
  - Si le client est absent ou si un support d'information est en cours de préparation, **le Rapid Transfer est l'option privilégiée**. Le transfert « **rapide** » est une alternative si le temps disponible pour la transmission est limité.
  - Quelle que soit la vitesse de transmission sélectionnée, la durée de transmission suivante est de quatre semaines par défaut. Les options Rapide, Vite, Moyenne et Lente modifient uniquement la durée de la transmission en cours, et non celle de l'effet énergétique ultérieur.
  - Une transmission plus lente n'est ni plus puissante ni de meilleure qualité. Choisissez la vitesse en fonction de la présence du client et de la procédure souhaitée ; vérifiez séparément la durée, l'intensité, l'intervalle et les autres options de transmission.
4. Vérifiez les paramètres de transmission (paramètres/matériel) si nécessaire.

Résultat : le calendrier de transmission est adapté aux procédures de votre cabinet. Les paramètres typiques sont : l'heure de début, la date de fin, l'intervalle, la phase de transmission et l'intensité.
5. Lancez la diffusion à l'aide du bouton « Démarrer la diffusion ».

Résultat : La transmission est lancée et s'exécute conformément aux paramètres définis.

## Avis

Si vous créez un support de données supplémentaire lors de l'envoi, le système utilise simultanément les ressources matérielles disponibles. Pour des raisons de sécurité, ce support est effacé avant la transmission, puis restauré après.

### 3.1.7.5 Affichage pendant la diffusion

Selon la version et la licence, différentes options d'affichage du contenu du paquet peuvent être sélectionnées :

**Liste des résultats :** Les réponses sélectionnées restent visibles. N'utilisez cette vue que si le client peut voir l'écran, doit voir les termes et si ces derniers ont été préalablement catégorisés.

**Éclairage couleur virtuel :** la liste des résultats est surchargée d'un affichage couleur. Cet affichage empêche le client de lire des termes sensibles pendant la diffusion.

**Image du client :** L'image enregistrée du client est combinée à l'affichage. N'utilisez cette option que si le consentement au traitement de l'image a été obtenu.



## Avis

Les modes d'affichage actifs sont mis en évidence par une couleur ; les icônes inactives apparaissent généralement en gris. Avant de commencer, vérifiez que le client peut voir l'écran et quel mode d'affichage est approprié.

### 3.1.7.6 Vérifier les options de transmission et les supports d'information

Ouvrez les options de transmission via l'icône d'engrenage dans la fenêtre de transmission. Les composants matériels et les méthodes de transmission disponibles s'affichent à gauche. À droite, selon la version, vous pouvez configurer la durée de transmission, l'intervalle, les pauses, les jours de la semaine, l'heure et l'intensité des paquets.

Il est uniquement possible de modifier les options d'envoi lors de l'analyse initiale. Envoyer des analyses suivantes est inutile. Effectuez toujours l'analyse initiale. Si le client revient plus tard, vous pouvez toujours envoyer l'analyse initiale même si d'autres analyses sont en attente. Par conséquent, avant de commencer, vérifiez que vous avez bien ouvert le bon paquet dans le cycle d'analyse, indiqué par **un** triangle.

Si un support de données est utilisé simultanément, cochez l'option permettant de l'effacer au préalable. Assurez-vous que le support approprié est inséré ou connecté et qu'aucune donnée n'est écrasée par erreur.

Le temps restant estimé, affiché en bas à droite de la fenêtre de transmission, facilite le choix de la vitesse de transmission. Adaptez la durée à votre processus d'organisation ; ce réglage ne remplace pas une analyse professionnelle des paramètres du paquet.

### 3.1.7.7 Capteur CA et support d'information en pratique

#### Sélection du matériel lors de l'envoi

Dans la version du programme décrite, aucune sélection supplémentaire de composants matériels individuels n'est requise. Le matériel radionique connecté est automatiquement pris en compte au démarrage de la transmission. Les termes tels que « résonance quantique » ou « transmission directe » font référence aux méthodes de transmission de l'ordinateur et non à des dispositifs supplémentaires.

#### Capteur d'alignement CA

Lors de la manipulation d'un échantillon ou d'un support d'information, le capteur CA reste connecté par USB et repose dans son emplacement prévu à cet effet. Le faisceau lumineux est dirigé vers le support en verre ou magnétique ; le câble est orienté dans la direction opposée.

#### Préparez les supports d'information avec Rapid Transfer

Selon la méthode, des cartes magnétiques, des pièces de monnaie, des remèdes homéopathiques ou des pierres de guérison peuvent servir de supports d'information. Placez les petits objets dans le verre ; insérez une carte magnétique dans le porte-carte magnétique. Orientez le verre ou le porte-carte de façon à ce que la lumière du capteur soit dirigée vers lui, puis lancez le « Rapid Transfer ». Aucune autre sélection de support n'est requise dans le programme.

Une seule carte magnétique suffit généralement pour une seule application. L'utilisation simultanée de plusieurs cartes n'est recommandée que si elles sont destinées à un même envoi.

#### Commande en présence du client

Si le client est présent, effectuez d'abord la transmission directe ; le client tient le capteur CA en main. Si un support d'information supplémentaire doit être préparé, placez-le ensuite devant le capteur et lancez une transmission séparée en utilisant « Rapid Transfer ». Si le client est absent, la transmission directe est ignorée.

#### Expliquez le processus de manière transparente.

Avant de commencer, expliquez les étapes à suivre et le rôle du verre, du capteur ou du porte-carte magnétique dans le modèle énergétique. Ne présentez pas le processus comme une procédure

médicalement validée et laissez au client le temps de poser des questions et de donner son consentement.

### 3.1.7.8 Erreurs courantes et solutions

#### **Client incorrect sélectionné.**

Solution : avant de démarrer la diffusion, vérifiez le nom du « client actuel » dans la fenêtre.

#### **La diffusion est trop rapide pendant le rendez-vous sur place.**

Solution : Ajustez la vitesse pour que la diffusion dure au moins 2 minutes , de préférence plus longtemps.

### 3.1.7.9 FAQ

#### **L'enregistrement d'une consultation en présentiel doit-il toujours durer plusieurs minutes ?**

Pas nécessairement. En pratique, c'est souvent bénéfique car les clients souhaitent assimiler consciemment l'enregistrement.

#### **Quand utiliser le « Rapid Transfer » ?**

Lorsque le client n'est pas physiquement présent et que la session n'est pas conçue comme une expérience à l'écran. Dans ce cas, il est préférable de laisser la session se dérouler le plus rapidement possible afin d'éviter un temps d'écran inutile.

#### **Puis-je annuler une diffusion ?**

Oui. Mettez fin aux diffusions en cours à l'aide du bouton « Terminer » prévu à cet effet dans la fenêtre « Envoyer/Rapports ».

## 3.1.8 Diffusion collective

### 3.1.8.1 Vue d'ensemble

L'envoi collectif est une fonction qui permet de rendre un paquet disponible afin qu'il puisse être envoyé par de nombreux utilisateurs du BCS dans le réseau Bucher.

Un principe fondamental de l'utilisation de ce système est l'intention délibérée du thérapeute d'aider le client à résoudre son problème, par exemple en activant l'autorégulation. Le problème et l'objectif visé ne se précisent souvent qu'au cours du travail. Ils sont consignés par écrit dans le système, par exemple dans le champ « Focus ».

Dans certaines situations, les thérapeutes ressentent une responsabilité particulièrement forte quant à l'atteinte de cet objectif, par exemple dans les cas les plus graves, avec les enfants ou lorsqu'ils interviennent auprès de connaissances ou de proches. Dans ces cas, la thérapie de groupe permet de répartir cette responsabilité entre plusieurs thérapeutes. Parallèlement, l'intention commune d'atteindre cet objectif s'en trouve renforcée. Chaque thérapeute participant apporte sa propre vision de la solution. La thérapie de groupe permet ainsi un soutien collaboratif sans partage de données personnelles avec les autres praticiens.

### 3.1.8.2 Objectif

- Renforcer la volonté commune de diffuser des messages par l'intermédiaire de nombreux utilisateurs qui partagent le même objectif.
- Diffusion conforme aux normes de protection des données : les données client, les objectifs, les entrées et les calendriers de diffusion sont intégrés sous forme de « bruit blanc » dans un fichier MP3 lisible. Le contenu est illisible pour les utilisateurs et ne peut être extrait du fichier MP3 sous forme de texte brut.
- Échange énergétique via un système de crédits : pour téléverser vos propres paquets, commencez par transmettre ceux créés par d'autres utilisateurs. Vous recevez un point de crédit pour chaque groupe de 50 transmissions effectuées pour d'autres thérapeutes. Ces

transmissions sont automatisées ; les manipulations nécessaires pour 50 transmissions ne prennent donc que 1 à 2 minutes.

### 3.1.8.3 Prérequis

- Ils utilisent un produit qui prend en charge la livraison groupée.
- connexion Internet (pour le chargement et le téléchargement automatique d'autres paquets depuis et vers le serveur Bucher).
- Un forfait entièrement planifié avec une date de fin définie.

Important : La brève description que vous rédigez pour un paquet dans un envoi groupé ne doit contenir aucune donnée personnelle.

### 3.1.8.4 Téléverser un paquet pour la diffusion collective

1. Repérez le paquet du client souhaité dans la liste des paquets et cliquez sur l'icône d'envoi groupé.



Résultat : La fenêtre d'envoi groupé s'ouvre.

2. Vérifiez si vous disposez d'au moins UN point de crédit pour ajouter ce forfait au collectif.
3. Créez une brève description qui expose le problème ou l'objectif à l'aide de mots-clés, sans mentionner les données du client, par exemple : « Soulager mes migraines », « Trouver l'âme sœur » ou « Trouver un emploi épanouissant ».

Résultat : les autres utilisateurs peuvent comprendre le contenu de manière générale sans avoir accès à leurs informations personnelles et, en envoyant ce document au format MP3, souhaitent contribuer à la réalisation de cet objectif.

4. Veuillez confirmer les deux options suivantes :
  - J'accepte la publication de la brève description ci-dessous.
  - Le texte descriptif court ne contient aucun contenu interdit.

Transfer your own information to the collective broadcast

Information for the collective broadcast  
The measurement of 2/1/2026 10:20:16 PM has not been uploaded for collective broadcast yet.  
Upload the measurement of 2/1/2026 10:20:16 PM for collective broadcast now.

Confirmation required before broadcasting  
☒ I agree with the publication of the short description below.  
☒ The summary text does not contain any unauthorized contents.

sender details  
☒ Publish my name as owner  
sender name: Wolfgang Bucher visible for everybody  
E-mail sender address: huch@huchilo.eu not visible  
☐ Provide personal information anonymously

Credit for uploading your own information  
22

Name of the client (will not be published):  
Annabell Müller  
Brief description of the information (visible to all):  
Relief from migraines. Relief from workplace stress.

Upload your own information for the collective beoadcast Cancel

5. Cliquez sur « Téléversez vos propres informations pour diffusion collective ».  
Résultat : le système génère un fichier MP3 (bruit blanc) et le téléverse, accompagné d'une brève description, sur le serveur BCS.

### 3.1.8.5 Accumuler des crédits pour téléverser ses propres paquets

1. Lancez le programme de distribution collective. (icône de distribution collective plus grande à gauche)  
Résultat : Le programme sélectionne des paquets d'autres utilisateurs et affiche leurs brèves descriptions dans un tableau.
2. Lisez une première fois les brèves descriptions. Cette étape, la plus longue, prend environ deux minutes. Pendant votre lecture, gardez à l'esprit que vous souhaitez également que l'objectif énoncé soit atteint.  
Résultat : vous intégrez consciemment votre intention au processus.
3. Tout en bas de la liste, cliquez délibérément sur le bouton rouge intitulé « Je souhaite envoyer toutes les informations et atteindre les objectifs fixés ».  
Résultat : le programme charge les documents et les envoie automatiquement. Vous pouvez vaquer à d'autres occupations pendant l'envoi.
4. Consultez votre solde.  
Résultat : après chaque tranche de 50 paquet envoyés, votre solde pour l'envoi de vos propres paquet augmentera de 1 point.

|    | therapist                     | group                 | Registered on       | Sent | Brief description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | Anonym                        | Bucher Vita Coach     | 2026-02-25 06:56:02 | 921  | NNNEVECES - 7778777812 Ich bin der Lic...<br>Ich bin das silberne Licht der Lebensfreud...<br>Ich bin das goldene Licht der Lebensfreu...<br>Ich bin das Licht meiner Selbst.<br>Ich bin der/die ich bin, aus der Quelle des...<br>Ich bin im manifestierten Körper der Lebe...<br>Ich lebe in einem glücklichen Menschenfl...<br>Danke zum Wohle aller Beteiligte<br><br>-Wir und Gilbert O.-R. Bäcksteiner, www.k...<br>Alles, was wir tun, wird auf die positivste... |
| 42 | Anonym                        | Bucher Business Coach | 2026-02-26 09:23:55 | 923  | Ich übernehme volle Verantwortung für al...<br>Danke zum wohle aller Beteiligten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43 | Anonym                        | Corpus Analyser       | 2026-02-25 08:40:25 | 950  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44 | Anonym                        | Bucher Vita Coach     | 2026-02-19 20:45:36 | 987  | Alles was mich glücklich macht, kommt i...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45 | Gerhard Hämmerle              | Bucher Business Coach | 2026-02-01 17:50:56 | 1009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 46 | Anonym                        | Bucher Vita Coach     | 2026-01-30 07:21:57 | 1045 | Ich bin im Mutkreis der Erde geboren – v...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47 | Helena Schmidiger             | Bucher Aura Coach     | 2026-01-18 19:04:06 | 1122 | Heilung auf allen Ebenen. Danke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48 | Spielmann                     | Bucher Vita Coach     | 2025-12-30 14:29:15 | 1187 | Perfekte Heilung aktivieren jetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49 | Anonym                        | Bucher Vita Coach     | 2025-12-14 10:18:25 | 1233 | GESUNDHEITSACHEK NACH bURN OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50 | POWER MIND COACHING Spielmann | Bucher Vita Coach     | 2025-03-31 12:28:37 | 2374 | Zahn- und Kieferheilung geschieht jetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

I would like to send all the information and I intend to make the desired goals become reality.

Progress of all broadcasts: 0%

Cancel

Expédition groupée avec liste des paquets et bouton de démarrage

### Avis

Pendant que le programme fonctionne pour les autres thérapeutes et leurs clients, vous n'êtes pas obligé de rester devant l'ordinateur. Vous pouvez faire autre chose.

Les fichiers MP3 précédemment téléchargés et lus provenant d'autres utilisateurs sont ensuite supprimés afin d'éviter un gaspillage inutile d'espace disque.

Pendant la lecture, le programme est audible sous forme d'un léger bruit blanc. Vous pouvez baisser le volume à zéro si vous le souhaitez. Il n'est pas nécessaire d'entendre ce bruit pour cela.

Un paquet téléchargé restera dans le système jusqu'à la date de fin que vous aurez indiquée. Passé ce délai, il sera supprimé et vous recevrez un courriel récapitulant le nombre d'envois.

L'intensité de l'effet recherché est également transmise. Cependant, dans cette approche, ce n'est pas l'intensité de l'effet qui est amplifiée, mais plutôt la volonté partagée de tous les thérapeutes participants d'atteindre l'objectif. Ainsi, le client ne subit pas de « surdose » de ce traitement, mais peut plus facilement lever ou contourner les blocages existants qui l'empêchent d'atteindre son objectif, car il bénéficie de l'énergie nécessaire de la part de plusieurs thérapeutes.

## Important

N'incluez jamais les noms, adresses, dates de naissance ou autres informations d'identification dans la brève description d'un envoi groupé.

[Capture d'écran : Programme de publipostage avec liste de paquet et bouton de démarrage rouge. Objectif : « lire de brèves descriptions » et commencer l'envoi.]

### 3.1.8.6 Erreurs courantes et solutions

**Problème : Vous n'avez pas assez de crédits pour envoyer vos propres paquet.**

Solution : Lancez le programme d'envoi groupé et envoyez au moins 50 paquet d'autres utilisateurs pour gagner des points.

### 3.1.8.7 FAQ

**Quelles données les autres utilisateurs voient-ils ?**

Ils voient uniquement votre brève description et, sauf si vous choisissez l'option « Publier anonymement », votre nom en tant que thérapeute/coach. Si vous sélectionnez l'option « Rendre les données disponibles anonymement », votre nom ne sera pas publié. Le contenu lui-même est fourni sous forme de fichier MP3 (bruit blanc) et est illisible et indéchiffrable par les utilisateurs.

**Combien de temps un paquet reste-t-il dans le système collectif ?**

Jusqu'à la date de fin que vous spécifiez. Après cela, le paquet est supprimé.

**Comment obtenir des points de crédit ?**


Pour chaque groupe de 50 paquets d'autres utilisateurs que vous transmettez, vous recevez un point de crédit permettant de téléverser vos propres paquets.

### 3.1.9 Exportation des paquets

1. Ouvrez « Envoyer/Rapports » et cliquez sur le bouton d'exportation du paquet souhaité.



Résultat : les fonctions d'exportation et d'envoi s'afficheront dans un menu contextuel.

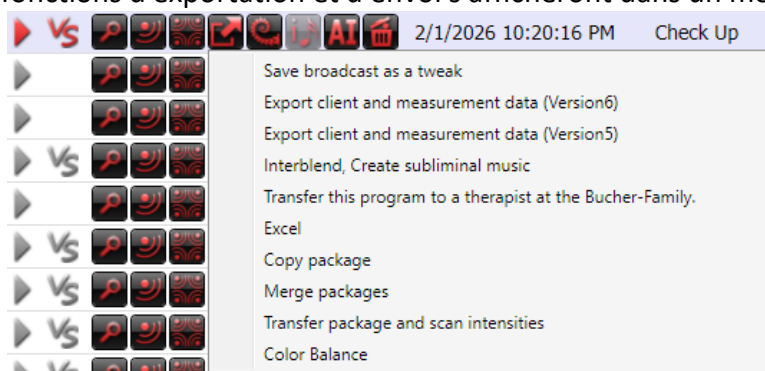

2. En fonction de votre objectif, utilisez l'option appropriée de ce menu contextuel :
- **Enregistrer l'envoi comme modification (disponible uniquement pour les analyses initiales).**  
Utile uniquement si vous utilisez le matériel d'éclairage couleur tweaklite.
  - **Exportation des données client et d'analyse (Version 6) :**  
Les données du paquet initial et de tous les paquets suivants (le cas échéant) sont exportées dans un fichier ZIP. Ce fichier peut ensuite être importé, par exemple, sur un autre ordinateur à l'aide de BCS. Les données client et l'intégralité du cycle de paquet (analyse initiale et analyses suivantes) sont transférées.
  - **Interblend, Créer de la musique subliminale (disponible uniquement pour les analyses initiales)**  
Cette fonctionnalité vous permet d'intégrer les informations du paquet dans une musique que le client peut ensuite écouter lui-même en déplacement ou à domicile.
  - **Transférez ce paquet à un thérapeute de la famille Bucher (disponible uniquement pour les examens initiaux).**  
La famille Bucher est une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager des forfaits avec d'autres utilisateurs ou avec eux-mêmes (si plusieurs licences sont disponibles). Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour rejoindre la famille Bucher, veuillez contacter Bucher GmbH. Nous activerons alors cette fonctionnalité gratuitement.
  - **Excel :**  
Cette fonction vous permet d'exporter les données d'un paquet vers un fichier Excel (fichier CSV).
  - **Copie du paquet (disponible uniquement pour les analyses initiales)**  
Cette fonction vous permet de copier un paquet puis, par exemple, de le développer ou de le modifier.
  - **Fusionner les paquets (disponible uniquement pour les analyses initiales) :**  
cette fonction permet de regrouper plusieurs paquets en un seul. C'est utile lorsque ces différents paquets traitent du même sujet. Vous pouvez ensuite supprimer les paquets d'origine pour obtenir une vue d'ensemble plus claire.
  - **Transfert des paquets et des intensités d'analyse (disponible uniquement pour les analyses initiales) :**  
cette fonction permet de transférer des paquets vers un autre client. Par exemple, si vous avez sélectionné le mauvais client par erreur et que vous ne souhaitez pas perdre le paquet. Autre cas de figure : vous avez créé un paquet « général », constaté son bon fonctionnement, puis souhaité l'utiliser avec un autre client pour le même

usage. Dans ce cas, tous les paramètres des entrées sont analysés à nouveau et comparés avec le nouveau client.

**Remarque :**

Le partage de rapports ou de fichiers exportés peut contenir des données personnelles. Avant tout envoi, vérifiez si l'anonymisation ou une méthode de transmission sécurisée est requise. Les envois collectifs font exception, car elles ne contiennent aucune information personnelle accessible à tous.

### **3.1.10 Évaluation des résultats d'analyse à l'aide de l'intelligence artificielle**

Les fonctions d'IA de ce module sont basées sur les paramètres généraux d'IA et les principes de fonctionnement de BCS. Une description détaillée des fonctions d'IA, des invites individuelles et du stockage des ensembles d'invites sur le serveur Bucher se trouve au chapitre 4.1 « Évaluation de l'IA : Utilisation de l'intelligence artificielle dans BCS ».

### **3.1.11 Suppression des paquets**

Si un paquet n'est plus nécessaire, vous pouvez le supprimer à l'aide de l'icône « Supprimer » (veuillez le faire uniquement après avoir bien vérifié).

Résultat : Le paquet sera supprimé.

**Remarque :**

Lorsqu'un client est supprimé, tous ses paquets associés le sont également. Si vous utilisez plusieurs produits Bucher GmbH, tels que Bucher Vita Coach et Bucher Aura Coach, et que vous supprimez un client dans Bucher Vita Coach, toutes les analyses effectuées avec Bucher Aura Coach seront également supprimées.

#### **3.1.11.1 Prérequis**

- Vous avez accès aux paramètres dans le BCS.
- Vous disposez d'un accès en écriture à la destination de la sauvegarde (dossier local, lecteur réseau ou périphérique de stockage externe).
- Pour une sécurité maximale, une destination de sauvegarde est disponible, située sur un disque dur différent de celui contenant les données BCS.

## 3.2 Bucher Aura Coach

### 3.2.1 Vue d'ensemble

Le Bucher Aura Coach est un produit de « Bucher Coaching Systems » (BCS). Il permet d'enregistrer, d'évaluer et de présenter systématiquement les informations énergétiques d'un client et de les utiliser pour un travail énergétique ultérieur.

L'accent est mis sur l'aura et les chakras du client. Le programme aide les utilisateurs à visualiser leurs états énergétiques, à identifier les blocages potentiels et à élaborer un processus structuré d'évaluation, d'harmonisation et de documentation.

Le Bucher Aura Coach est particulièrement adapté aux utilisateurs qui travaillent régulièrement avec les états énergétiques, les chakras, les niveaux d'aura et les applications d'harmonisation.

#### But

Bucher Aura Coach accompagne le travail sur les thèmes subtils et énergétiques. Il permet de :

- enregistrer les informations énergétiques d'un client de manière structurée,
- pour afficher clairement les zones d'aura et de chakra,
- rendre visibles les anomalies ou blocages énergétiques,
- préparer et mettre en œuvre des harmonisations,
- Documenter les résultats,
- Pour simplifier l'utilisation régulière grâce au mode automatique,
- Créer et envoyer des rapports aux clients selon les besoins.

L'objectif est de disposer d'une méthode de travail claire, compréhensible et permettant de gagner du temps dans le domaine du soutien énergétique.

#### Classification au sein du BCS

Le Bucher Aura Coach utilise les fondements communs de Bucher Coaching Systems. Cela inclut notamment :

- le système central de gestion des clients,
- les données client partagées,
- sauvegarde des données,
- l'interface utilisateur,
- le changement de produit au sein de BCS,
- les fonctions de support et de maintenance à distance.

Si un client est déjà enregistré dans BCS, il n'est pas nécessaire de le saisir à nouveau pour Bucher Aura Coach FE. Les données client existantes peuvent être utilisées pour tous les produits.

#### Principe de base

Travailler avec le coach d'aura Bucher FE suit essentiellement le processus suivant :

- Sélectionner le client.
- Résultat : Le bon client est actif.
- Effectuez un scan Aura Coach.
- Résultat : Le programme capture les informations énergétiques du client.
- Consultez et interprétez les résultats.
- Résultat : Les anomalies au niveau de l'aura et des chakras peuvent être identifiées et classées.

- Procéder à l'harmonisation ou à la transmission.
- Résultat : L'information sélectionnée est transmise énergétiquement.
- Examinez le rapport ou le procès-verbal.
- Résultat : L'application est documentée et peut être discutée avec le client ou envoyée si nécessaire.

## Domaines d'application typiques

Le Bucher Aura Coach FE est particulièrement adapté aux applications suivantes :

- évaluation énergétique régulière,
- Travailler avec les thèmes de l'aura et des chakras,
- Création d'une « image d'aura »,
- Identifier les blocages énergétiques,
- Accompagnement lors des processus de changement,
- Préparation d'une conversation avec le client,
- Suivi des progrès sur plusieurs applications,
- Maintenance régulière automatisée en mode automatique.

Le Bucher Aura Coach peut être utilisé pour des applications ponctuelles et récurrentes.



Représentation schématique des sept chakras

### 3.2.2 Prérequis

Les points suivants doivent être vérifiés avant le premier scan manuel de l'aura :


- Le Bucher Aura Coach est homologué et sélectionné comme produit actif au sein de BCS.
- L'enregistrement client ou objet correct a été créé et sélectionné.
- Le nom ou la désignation de l'objet, la date de naissance ou la date de référence, ainsi que les coordonnées requises pour la demande ont été vérifiés. Une photo pourra être ajoutée selon le flux de travail et la version du logiciel.
- Si un matériel connecté, un échantillon ou un support d'information doit être utilisé, le flux de travail BCS général correspondant est préparé. (Échantillon sous verre, verre devant le capteur CA, capteur CA inséré)
- Si les résultats de l'analyse doivent être envoyés par courriel, les paramètres de messagerie doivent être configurés et le consentement du client doit être obtenu.
- Les rapports sont traités de manière confidentielle et ne sont transmis que par un canal de transmission approprié et convenu.

### 3.2.3 Sélection des clients

Ouvrez le système de gestion des clients et sélectionnez l'enregistrement souhaité. Avant chaque numérisation, vérifiez attentivement le nom, la date de naissance ou la description de l'objet, ainsi que la catégorie. Cela évitera qu'une numérisation ne soit attribuée par erreur à un mauvais enregistrement.

### 3.2.4 Paramètres de catégorie pour le client


Dans la section Gestion des clients, cliquez sur l'onglet « Paramètres client ».

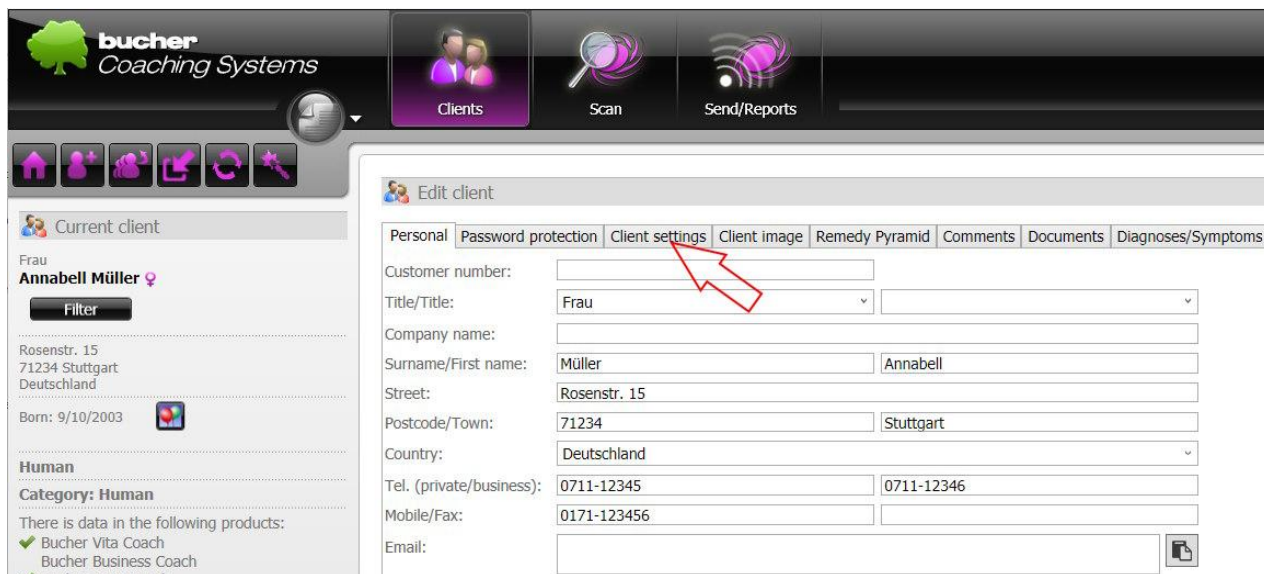

The screenshot shows the 'Edit client' interface. On the left, there's a sidebar with the client's name 'Frau Annabell Müller', address 'Rosenstr. 15, 71234 Stuttgart, Deutschland', and birth date 'Born: 9/10/2003'. The main area has tabs: 'Personal', 'Password protection', 'Client settings' (selected), 'Client image', 'Remedy Pyramid', 'Comments', 'Documents', and 'Diagnoses/Symptoms'. The 'Client settings' tab contains fields for 'Customer number', 'Title/Title' (set to 'Frau'), 'Company name', 'Surname/First name' (Müller/Annabell), 'Street' (Rosenstr. 15), 'Postcode/Town' (71234/Stuttgart), 'Country' (Deutschland), 'Tel. (private/business)', 'Mobile/Fax', and 'Email'. A red arrow points to the 'Client settings' tab.

Modification des données client (3-3-3A)

Vous pouvez y définir, entre autres, la catégorie de ce client.

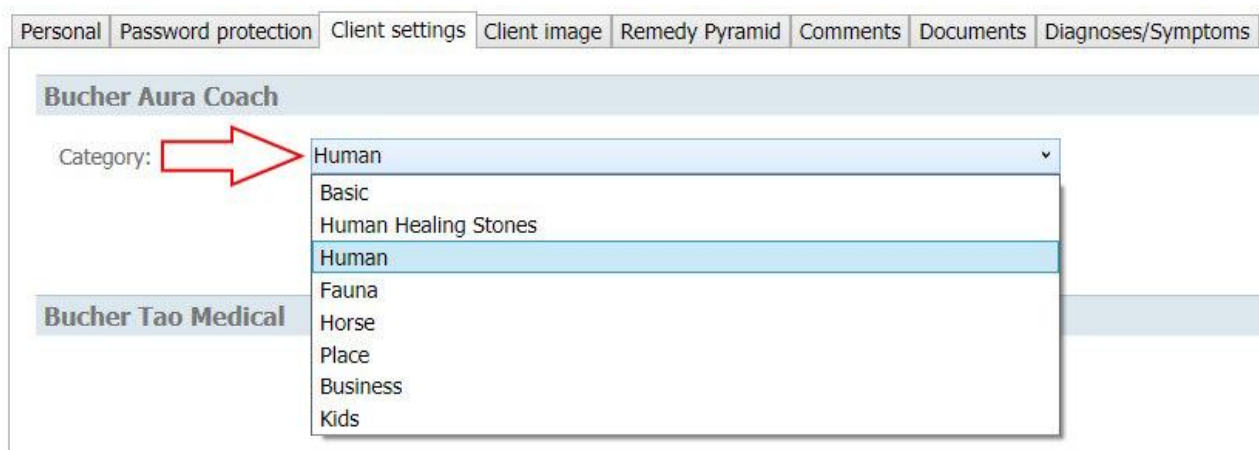

This screenshot shows the 'Category' dropdown menu. The 'Client settings' tab is still selected. The 'Category' field is expanded, showing a list of options: 'Human', 'Basic', 'Human Healing Stones', 'Human', 'Fauna', 'Horse', 'Place', 'Business', and 'Kids'. A red arrow points to the 'Human' category.

Sélectionner la catégorie qui convient le mieux au client (3-3-3B)

La catégorie détermine le contenu et les associations avec lesquels le programme fonctionne. Par conséquent, sélectionnez uniquement la catégorie qui correspond à votre cas d'utilisation et qui est disponible dans votre licence actuelle.

En fonction du client, choisissez les options suivantes :

#### Personnes

- Humain (recommandé)

- Human Healing Stones (si vous travaillez intensivement avec les pierres de guérison)
- Les enfants (s'il s'agit d'un enfant, c'est-à-dire que la personne n'a pas encore atteint la puberté)
- Basique (si vous n'avez pas acquis de licence pour l'une des trois catégories ci-dessus)

### Les animaux en général (toutes espèces confondues)

- Faune (recommandé, valable pour tous les animaux)
- Basique (si vous n'avez pas acquis la licence pour la catégorie « Faune »)

### chevaux

- Cheval (recommandé)
- Faune (si vous n'avez pas acquis la licence pour la catégorie « Horse »)
- Basic (si vous n'avez pas acquis les licences pour les catégories « Horse » et « Fauna »)

### Lieux, bâtiments ou appartements

- Lieu (recommandé)
- Basique (si vous n'avez pas acquis de licence pour la catégorie « Place »)

### Pour les entreprises ou les organisations

- Affaires (recommandé)
- Basique (si vous n'avez pas souscrit à la licence de la catégorie « Entreprise »)

### Pour tout le reste


- Basique (si « Basique » est utilisé, l'évaluation détaillée est omise, mais tous les autres résultats sont affichés)

## 3.2.5 Effectuer un scan d'aura

### 3.2.5.1 Lancer une analyse manuelle de l'aura

**Étape 1 :** Vérifiez si le coach Bucher Aura et le client concerné sont actifs.

**Étape 2 :** Ouvrez la section « Analyse ». Selon la version du programme, les chemins d'analyse disponibles ou les composants connectés s'y afficheront.

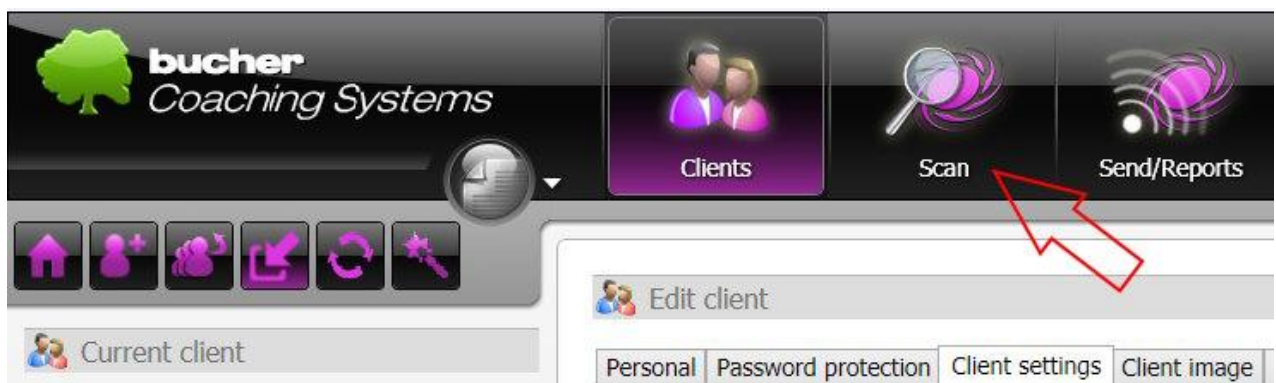

Ouvrir la fenêtre de numérisation

**Étape 3 :** Placez le capteur CA dans le plateau. Lancez ensuite l'analyse. Pour cela, cliquez généralement sur le bouton le plus à gauche, légèrement plus large que le précédent. Ce bouton contient la suggestion du système. Sur l'image ci-dessous, il permet d'effectuer une analyse initiale. Si vous souhaitez modifier ce paramètre, sélectionnez l'un des deux boutons situés à sa droite.



Lancer l'analyse


Le système affiche un message invitant le client à prendre le capteur en main. Il doit utiliser sa main dominante (la main droite pour les droitiers, la main gauche pour les gauchers, et les ambidextres peuvent utiliser l'une ou l'autre main).

Au cours de ce processus, les sept zones des chakras sont traitées une à une et les valeurs correspondantes sont affichées sur l'écran des résultats.

**Étape 4 :** Attendez que le bouton « Annuler » en bas à droite de la fenêtre se transforme en « Fermer ». Si vous souhaitez annuler l'analyse, cliquez sur « Annuler » avant la fin. Dans ce cas, aucune donnée ne sera enregistrée.

**Étape 5 :** Fermez la fenêtre de numérisation, puis ouvrez « Envoyer et rapports ».

**Résultat :** Un aperçu des sept zones des chakras est disponible pour évaluation, compte rendu et, si nécessaire, harmonisation.

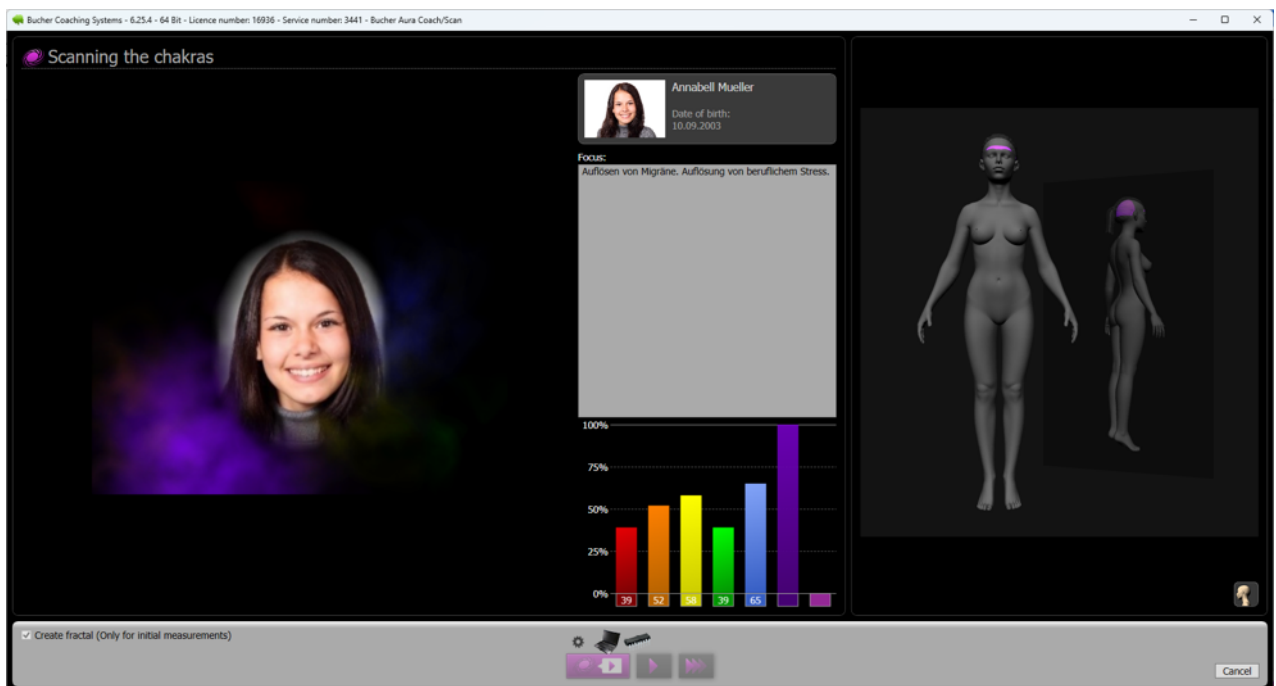

Scan de l'aura pendant la procédure

### 3.2.5.2 Examen initial, scan de suivi et informations complémentaires

En règle générale, un scan d'aura par client et par semaine est prévu.

Des examens complémentaires ne devraient être effectués que dans des cas exceptionnels justifiés.

Un examen initial supplémentaire le même jour peut être techniquement possible après un délai d'attente minimum et une confirmation, mais devrait également être limité aux cas exceptionnels justifiés.


Si seuls des diagnostics ou des symptômes sont ajoutés après l'analyse, celle-ci reste généralement inchangée. Il est alors préférable de supprimer l'évaluation IA existante et de la recréer en intégrant les informations supplémentaires.

## 3.2.6 Affichage et compréhension des résultats

### 3.2.6.1 Aperçu des résultats

La section des résultats affiche les chakras 1 à 7 avec leurs valeurs de scan respectives et une représentation colorée. Utilisez cet aperçu pour identifier les points focaux relatifs au sein du scan actuel. Les valeurs individuelles ne doivent pas être interprétées isolément ni comme des résultats de laboratoire médical.

Une valeur sensiblement différente peut être l'occasion d'approfondir le sujet lors d'une discussion. Il est essentiel de toujours vérifier que l'interprétation est compréhensible pour le client et qu'elle concorde avec les informations déjà fournies.

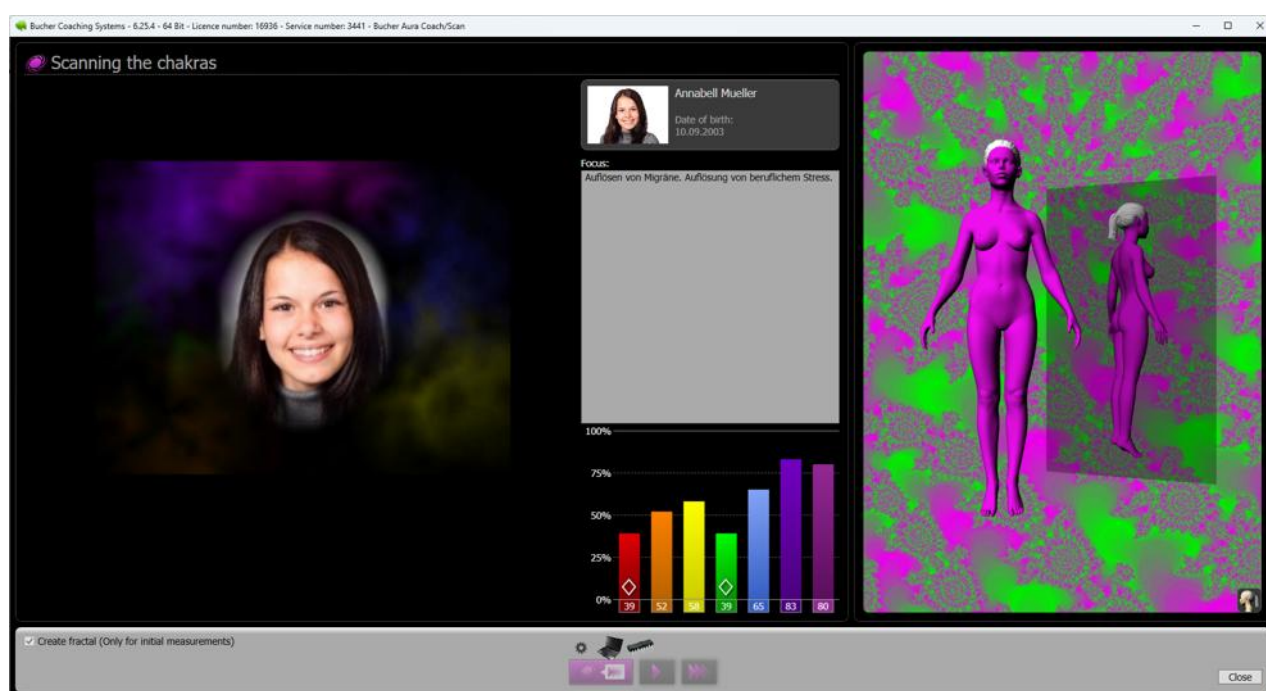

Aperçu des résultats d'un scan d'aura

### 3.2.6.2 Aperçu avant impression et rapport détaillé

Ouvrez l'aperçu avant impression et sélectionnez les sections de rapport souhaitées.


The screenshot shows the 'bucher Coaching Systems' software interface. The 'Send/Reports' button is highlighted with a red arrow. Below it, a table displays scan results for two clients. The table has columns for 'Scan date', 'Chakra 1', 'Chakra 2', 'Chakra 3', 'Chakra 4', 'Chakra 5', 'Chakra 6', and 'Chakra 7'. The first client, 'Frau Annabell Müller', has scan dates '12/10/2025 8:08:33 PM' and '12/10/2025 8:04:54 PM' with corresponding chakra values. The second client, 'Frau Annabell Müller', has scan dates '12/10/2025 8:08:33 PM' and '12/10/2025 8:04:54 PM' with corresponding chakra values.

|   | Scan date             | Chakra 1 | Chakra 2 | Chakra 3 | Chakra 4 | Chakra 5 | Chakra 6 | Chakra 7 |
|---|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 12/10/2025 8:08:33 PM | 14       | 85       | 79       | 68       | 64       | 100      | 75       |
| 2 | 12/10/2025 8:04:54 PM | 10       | 64       | 55       | 64       | 60       | 91       | 68       |

Afficher la liste des numérisations et ouvrir l'aperçu avant impression

Dans la section « Envoyer/Rapports », tous les scans de ce client sont listés. Pour prévisualiser les scans, cliquez sur la première icône (la loupe), puis sur l'élément de menu « Afficher dans la mise en page du paquet ». Toutes les informations relatives à ce scan, comme le score d'IA, ne peuvent être imprimées que lors du premier scan de ce cycle. Par conséquent, il est généralement conseillé de fournir au client une impression du premier scan (un triangle). Les scans suivants (trois triangles) montrent les évolutions au fil du temps par rapport au premier scan.

Dans la fenêtre « Sélection d'impression », sélectionnez d'abord « Impression patient » ou « Impression thérapeute », puis définissez le contenu du rapport souhaité. Cliquer sur « Enregistrer comme valeur par défaut » sauvegarde la sélection actuelle pour le profil choisi ; elle sera réutilisée lors de votre prochaine visite sur cette page.

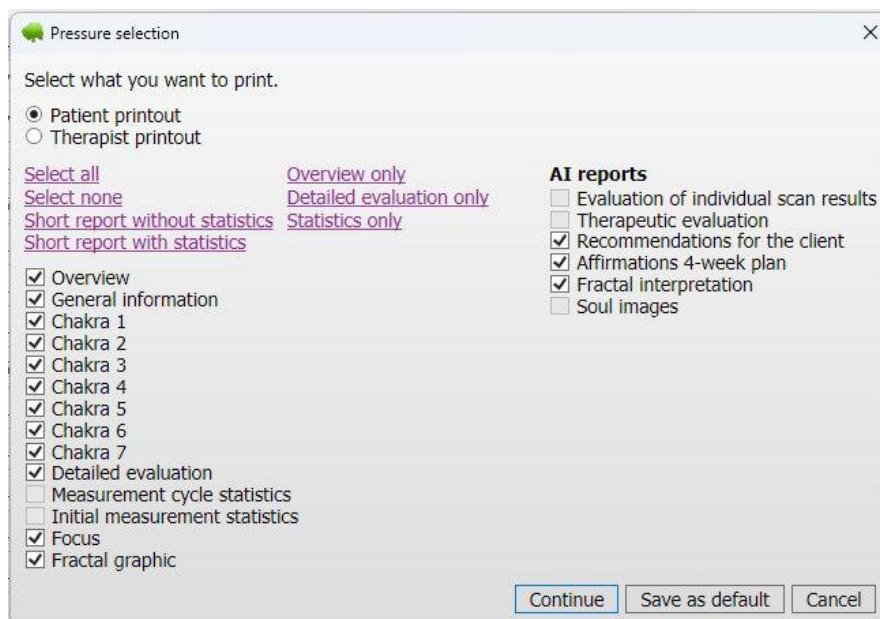

Fenêtre de sélection d'impression

Les textes détaillés peuvent aborder des thèmes énergétiques et des références symboliques à des parties du corps ou à des systèmes d'organes. Ils visent à susciter la discussion et la réflexion dans le cadre du modèle énergétique et ne sauraient se substituer à un diagnostic ou à un traitement médical.


Veuillez relire l'intégralité du rapport avant de l'enregistrer, de l'imprimer ou de l'envoyer. Masquez les sections inutiles ou linguistiquement inappropriées dans les options d'impression.



Aperçu avant impression d'un rapport Aura

### 3.2.6.3 Blocages et statistiques


L'analyse détaillée peut répertorier les zones identifiées comme des résonances ou des blocages lors de l'examen. Lors des examens suivants, les zones précédemment identifiées comme non pertinentes peuvent être marquées comme résolues.

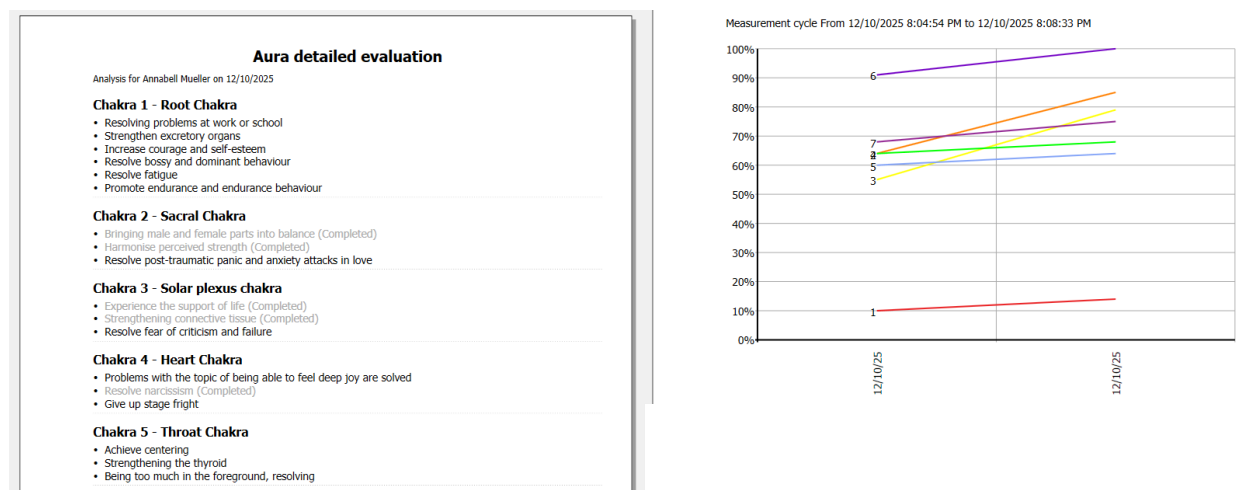

Blocages et statistiques dans le rapport sur l'aura

### 3.2.6.4 Progression des chakras lors des examens de suivi

L'évolution des chakras n'est disponible que pour un scan de suivi, car elle compare le scan initial et le scan de suivi. Ce dernier est repéré par trois triangles au début de sa ligne dans la liste.

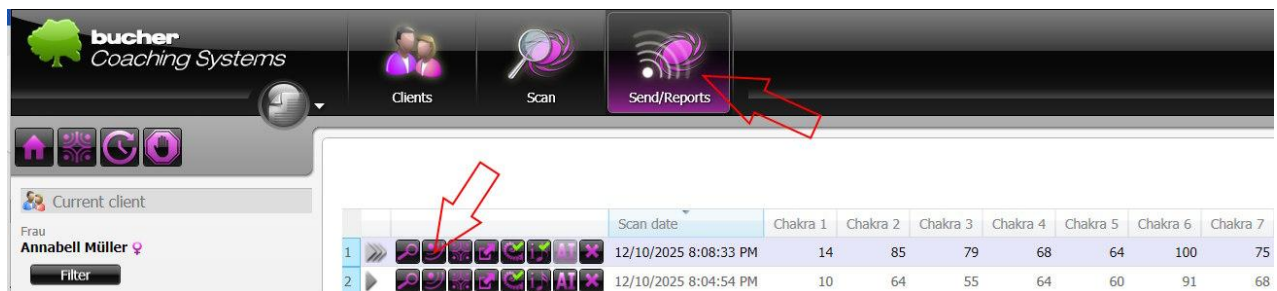


Affichage d'un scan de suivi

Ouvrez le scan de suivi avec la deuxième icône (envoi), puis sélectionnez « Évolution des chakras » en bas à droite.



Ouvrez la progression des chakras dans la fenêtre d'envoi pour visualiser les changements des chakras. Dans la vue « Évolution des chakras », vous pouvez également visionner une courte animation illustrant l'évolution des valeurs des chakras entre l'analyse initiale et l'analyse de suivi actuelle. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Lecture » situé sous les valeurs des chakras.

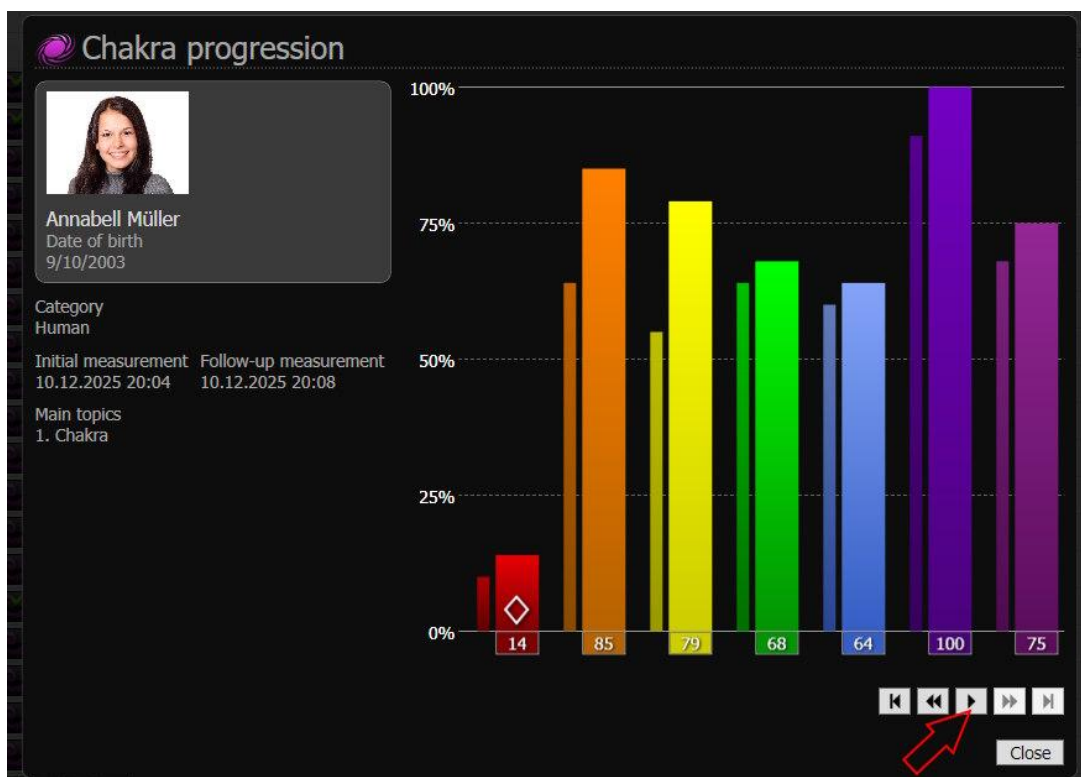


Progression des chakras

### 3.2.7 Harmonisation et transmission


Après évaluation et discussion avec le client, le scan actuel peut être envoyé dans son champ morphique afin d'harmoniser ses chakras et de lever les blocages. Il est généralement conseillé d'envoyer systématiquement le scan initial (un seul triangle), car il contient toutes les fréquences scannées dans leur forme originale. Bien que vous puissiez également envoyer les scans de suivi (trois triangles), ceux-ci sont principalement destinés au suivi des progrès au fil du temps, et non à la transmission. Par conséquent, si le client vous consulte à plusieurs reprises et que vous effectuez des scans de suivi, veuillez envoyer le scan initial après chaque scan. Ce rituel de répétition est plus efficace pour stimuler l'auto-guérison que l'envoi du seul scan de suivi. Recherchez dans la liste, de haut en bas, la première occurrence d'un scan initial (marquée d'un seul triangle).

**Étape 1 :** ouvrez « Envoi/Rapports » et cliquez sur l'icône d'envoi du scan initial placé en haut de la liste.

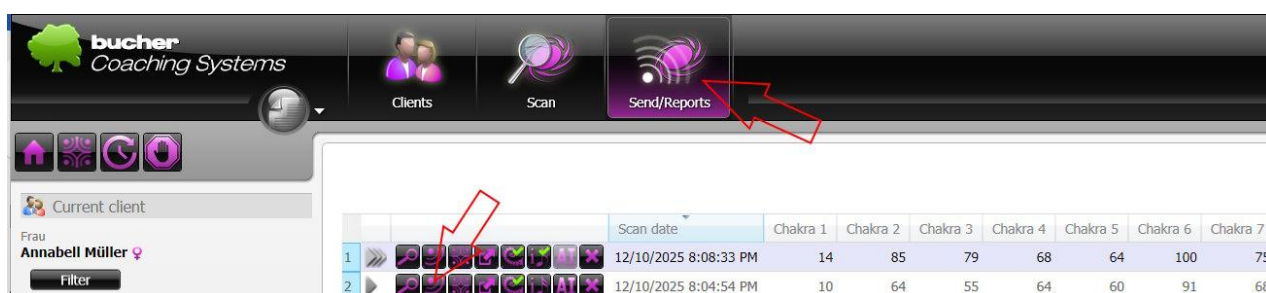

Ouvrir la fenêtre d'envoi

**Étape 2 :** Si le client est présent, il tient le capteur CA pendant la transmission et peut regarder le petit voyant situé à l'avant du capteur. Sélectionnez une vitesse moyenne ou lente, ou une durée de transmission suffisamment longue pour que le client puisse suivre consciemment le processus.

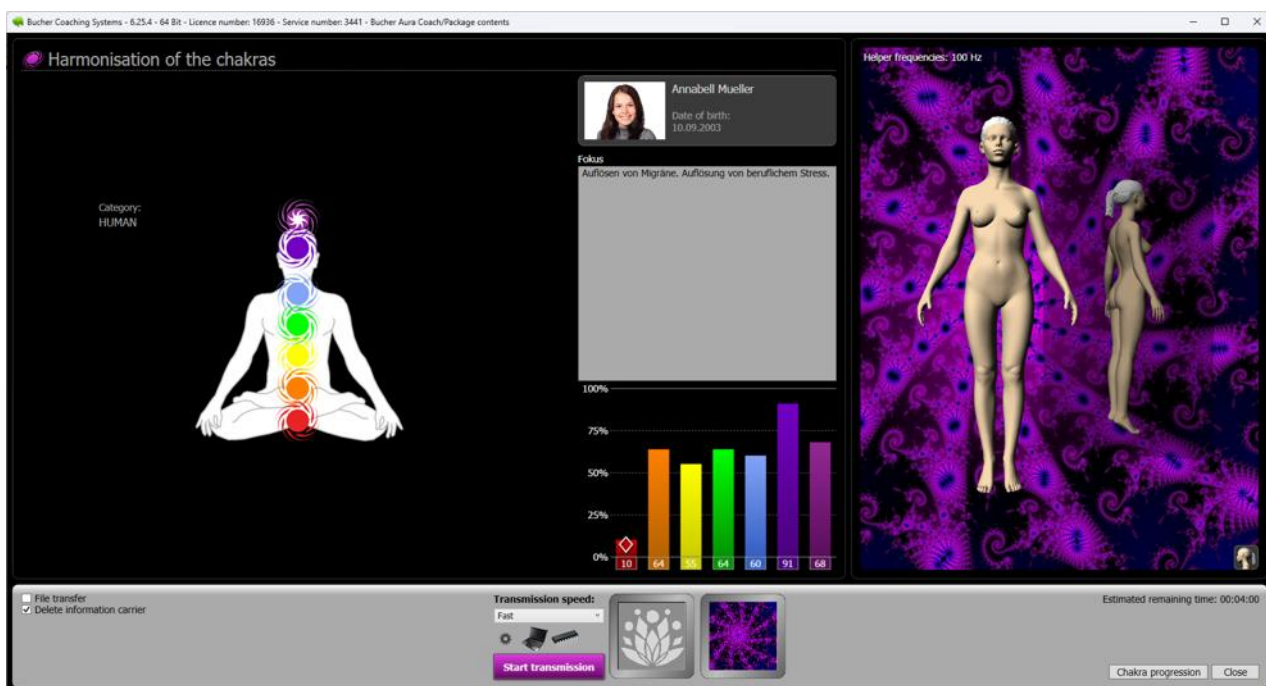

Harmonisation de l'aura pendant la diffusion

Si le client est absent ou si vous souhaitez transférer des informations de régulation sur un support de données, utilisez le Rapid Transfer. L'option « Rapide » ou « Court » peut être utilisée si le Rapid

Transfer n'est pas souhaité ou disponible. Lors de l'utilisation de supports de données, respectez l'orientation du capteur, du verre ou du porte-carte, comme indiqué dans le chapitre relatif à la transmission générale.

La vitesse de transmission n'affecte que la durée de la transmission en cours. La durée des transmissions suivantes est, par défaut, de quatre semaines, quelle que soit la vitesse choisie (Rapide, Moyenne ou Lente). Une transmission plus lente n'améliore pas la qualité. Voir également la section 2.7 , « Différence entre la durée et la vitesse de transmission ».



Début de la diffusion

Lancez la diffusion en cliquant sur le bouton « Démarrer la diffusion » et attendez que le processus soit complètement terminé.

### 3.2.8 Utilisation du mode automatique

Le mode automatique de Bucher Aura Coach permet d'exécuter automatiquement des séances Aura Coach pour plusieurs clients sélectionnés, successivement. Selon les paramètres, le programme peut analyser le corps, envoyer les informations recueillies et, en option, envoyer un rapport au client par courriel.

Le mode automatique est particulièrement utile lorsque les clients doivent bénéficier de séances régulières avec Aura Coach. Au lieu de sélectionner chaque client individuellement, de lancer manuellement le scan, de configurer la séance et d'envoyer un rapport, ce processus peut être automatisé grâce à ce mode.

#### 3.2.8.1 Objectif du mode automatique

Le mode automatique est conçu pour simplifier les flux de travail récurrents et faire gagner du temps. Il aide les utilisateurs à

- pour effectuer automatiquement des analyses régulières de l'aura du coach,
- travailler successivement pour plusieurs clients sélectionnés,
- pour exécuter automatiquement l'expédition suivante,
- Envoi automatique des rapports aux clients lorsque les paramètres de messagerie sont activés.
- pour réduire les interventions manuelles individuelles,
- afin de maintenir un processus clair et compréhensible, même avec de nombreux clients.

La sélection des clients inclus dans le mode automatique s'effectue dans les paramètres client. Il est possible d'y spécifier pour chaque client s'il doit participer ou non au mode automatique d'Aura.

#### 3.2.8.2 Avantages dans la pratique quotidienne

Le principal avantage du mode automatique réside dans le gain de temps. Avec un petit nombre de clients, la différence est minime. En revanche, pour une clientèle régulière et nombreuse, le mode automatique peut apporter un soulagement considérable.

Un processus manuel comprend généralement plusieurs étapes :

1. Sélectionnez le client.

Résultat : Le client correct est actif.

2. Effectuez le scan.

Résultat : Les résultats de l'Aura Coach sont déterminés.

3. Effectuer la transmission.

Résultat : Les informations collectées sont transmises.

4. Créer ou envoyer le rapport.

Résultat : Le client reçoit la documentation des résultats.

En mode automatique, ce processus s'exécute successivement pour tous les clients correctement configurés. L'utilisateur n'a pas besoin d'être devant son ordinateur pendant ce temps. Le programme BCS est bloqué et ne peut plus effectuer d'autres tâches lorsqu'il est en mode automatique. Cependant, les autres programmes installés sur l'ordinateur restent utilisables.

### **3.2.8.3 Processus plus rapide**

Le mode automatique est généralement plus rapide que le mode manuel, car il élimine le besoin de représentations graphiques et d'étapes intermédiaires manuelles. Le programme exécute les étapes nécessaires de la manière la plus directe possible.

Cela permet de réaliser un processus entièrement automatisé de numérisation, d'envoi et d'expédition par courriel beaucoup plus rapidement dans de nombreux cas qu'avec un traitement manuel.

### **3.2.8.4 Envoi d'e-mails en mode automatique**

Si les paramètres de messagerie sont configurés dans le programme, le mode automatique peut également envoyer des rapports par courriel. Pour ce faire, un compte de messagerie dédié doit être configuré dans le système pour l'envoi de ces rapports.

Lorsque cette fonction est activée, le mode automatique permet non seulement de numériser et d'envoyer, mais aussi d'envoyer automatiquement au client un rapport complet contenant les résultats.

Important : L'envoi automatique d'e-mails ne doit être utilisé que si les paramètres de messagerie sont correctement configurés et que le client accepte de recevoir des rapports par e-mail.

### **3.2.8.5 Signification de l'intention**

Bien que le processus technique soit automatisé, l'attention de l'utilisateur reste essentielle lors de l'utilisation de systèmes énergétiques. Il est donc conseillé de consulter le journal après l'exécution du mode automatique.

Il est recommandé de passer brièvement en revue chaque client en interne et de concentrer l'attention sur la nécessité de garantir que les analyses et les transmissions effectuées aient un effet optimal et harmonieux pour les clients.

### **Important**

Le mode automatique ne remplace pas la responsabilité professionnelle de l'utilisateur. Il automatise les tâches répétitives, mais n'évalue pas de manière indépendante la pertinence professionnelle d'une application dans un cas donné.

### **3.2.8.6 Activation du mode automatique pour un client**

Dans cette section, vous indiquez si un client particulier doit participer au mode automatique d'Aura. Ce paramètre n'est pas global pour tous les clients, mais propre à chaque client.

Cela vous permet de contrôler précisément quels clients doivent être régulièrement et automatiquement analysés, harmonisés et, éventuellement, informés par e-mail.

## Instructions étape par étape

1. Ouvrez la gestion des clients.

Résultat : La fenêtre « Clients » s'affiche.

2. Sélectionnez le client souhaité.


Résultat : Le client est mis en surbrillance et affiché comme client actuel.

3. Ouvrez les données du client pour les modifier.

Résultat : La vue détaillée du client s'ouvre.

4. Accédez à l'onglet « Paramètres client ».

Résultat : Les paramètres individuels de ce client s'affichent.

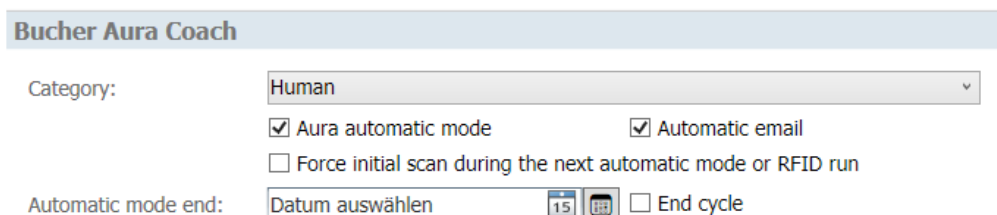

5. Activez l'option « Mode automatique Aura » si ce client doit participer au mode automatique.

Résultat : Le client sera inclus dans la prochaine exécution du mode automatique Aura.

6. Activez l'option d'envoi automatique d'e-mails si le client doit recevoir automatiquement un rapport après l'exécution du mode automatique.

Résultat : après l'analyse et l'harmonisation, un e-mail contenant le rapport sera automatiquement préparé et envoyé à ce client, à condition que les paramètres de messagerie soient correctement configurés.

7. Si nécessaire, activez l'option « Forcer l'analyse initiale lors de la prochaine exécution en mode automatique ».

Résultat : une analyse initiale sera systématiquement effectuée pour ce client lors de la prochaine exécution en mode automatique. Cette option est utile si vous souhaitez définir un nouveau point de départ, par exemple après une interruption prolongée ou une modification importante du support fourni.

8. Indiquez une date de fin si nécessaire.

Résultat : Le mode automatique ne fonctionnera pour ce client que jusqu'à cette date.

Exemple : Si le client ne doit être pris en charge que jusqu'à la fin de l'année, indiquez « 31.12. » comme date de fin. Les analyses automatiques, l'harmonisation et les notifications par courriel (facultatives) seront effectuées jusqu'à cette date. À compter du 1er janvier de l'année suivante, ce client ne sera plus inclus dans le mode automatique.

9. Laissez le champ « Date de fin » vide si le client doit rester en mode automatique indéfiniment.

Résultat : le client sera inclus en permanence dans les exécutions en mode automatique tant que cette option reste activée.

10. Enregistrez les données du client.

Résultat : Les paramètres du mode automatique de ce client sont enregistrés.



## Important

Ces paramètres s'appliquent uniquement au client en cours de traitement. Si plusieurs clients doivent être traités automatiquement, les paramètres du mode automatique doivent être cochés et activés individuellement pour chaque client.

## Avis

L'envoi automatique d'e-mails ne fonctionne que si un compte de messagerie dédié a été configuré dans le programme. Dans le cas contraire, le mode automatique peut analyser et harmoniser les données, mais il ne peut pas envoyer de rapports par e-mail.

## Erreurs courantes et solutions

Problème : Le client n'est pas considéré comme étant en mode automatique.

Cause possible : Le « Mode automatique Aura » n'est pas activé dans les paramètres du client.

Solution : Ouvrez les paramètres du client et activez l'option correspondante.

Problème : Le client ne reçoit pas d'e-mail.

Cause possible : L'envoi automatique d'e-mails n'est pas activé pour ce client ou les paramètres généraux de messagerie ne sont pas configurés. Solution : Vérifiez d'abord les paramètres du client, puis les paramètres généraux de messagerie du programme.

Problème : Le client a cessé d'être traité automatiquement après une certaine date.

Cause possible : Une date de fin a été définie et a été atteinte ou dépassée. Solution : Supprimez ou modifiez la date de fin si vous souhaitez que le client soit à nouveau traité automatiquement.

### 3.2.8.7 Démarrer le mode automatique et vérifier le processus

Dans cette section, vous lancez l'exécution du mode automatique d'Aura. Le programme traitera automatiquement tous les clients pour lesquels le mode automatique d'Aura a été activé dans les paramètres client.

Selon les paramètres, le mode automatique peut effectuer automatiquement les étapes suivantes :

- Analyse du client
- Harmonisation ou transmission
- Envoi d'un rapport par courriel

Le processus est exécuté séquentiellement pour tous les clients sélectionnés. À la fin, un journal est affiché, permettant de consulter la progression de l'exécution en mode automatique.

## Rythme de travail recommandé

Pour une utilisation quotidienne pratique, il est judicieux de programmer une durée fixe pour le mode automatique.

### Exemple:

- un jour précis de la semaine
- une heure fixe
- un rythme régulier, par exemple une fois par semaine
- Cela instaure un processus clair. Les dossiers clients sont traités régulièrement et l'utilisateur peut intégrer facilement le suivi du protocole à son flux de travail.

## Exigences

- Au moins un client est activé pour le mode automatique Aura.
- BCS a été lancé.

- Le coach Bucher Aura a été sélectionné.
- Si les rapports doivent être envoyés par courriel, les paramètres de messagerie sont configurés.
- BCS ne doit pas être utilisé pour d'autres tâches en mode automatique.

## Instructions étape par étape

1. Ouvrez la fenêtre client.  
Résultat : La gestion du client s'affiche.
2. Cliquez sur la cinquième icône dans la fenêtre du client pour ouvrir le mode automatique d'Aura.



Résultat : La fenêtre « Mode automatique Aura » s'ouvre.


3. Consultez la liste des tâches affichée dans la fenêtre « Mode automatique Aura ».  
Résultat : vous pouvez voir quelles tâches seront exécutées lors de la prochaine exécution en mode automatique.

## Exemple:

- « 6 clients au total en mode automatique »
- "Analyser 5 clients"
- « Harmoniser 5 clients »
- "Envoyer 3 e-mails actuels"

Dans cet exemple, 6 clients sont activés en mode automatique. Parmi eux, 1 a déjà été analysé aujourd'hui et ne sera donc pas pris en compte.  
Cinq clients sont scannés et harmonisés.

Seuls 3 de ces 5 clients ont activé l'envoi automatique d'e-mails.

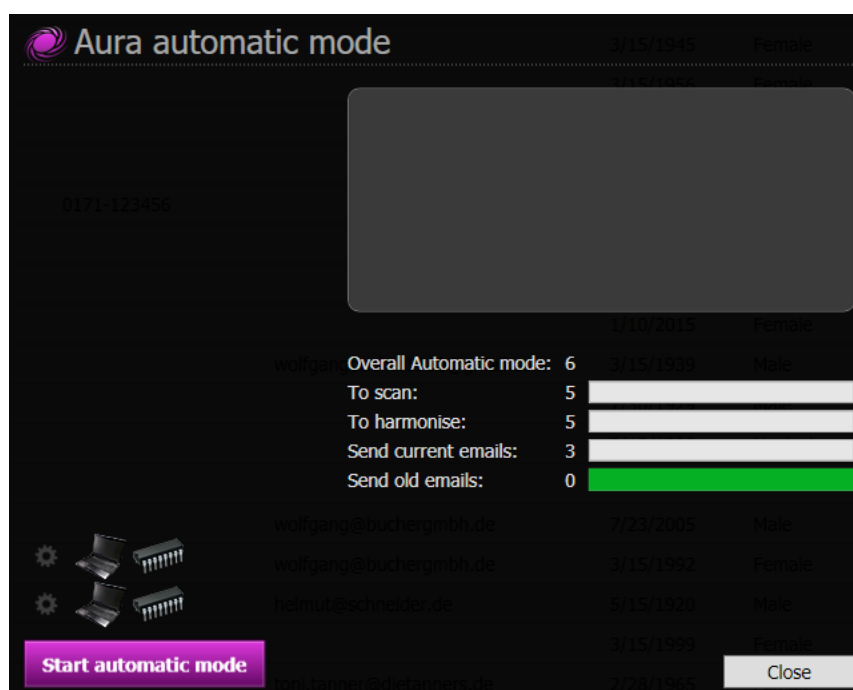

4. Lancement du mode automatique.  
Résultat : Le programme commence le traitement automatique des clients.
5. Si nécessaire, surveillez l'activité en cours dans la fenêtre du mode automatique.  
Résultat : le programme affiche l'étape en cours d'exécution.

Exemples :

- « Numérisation du client A »
  - « Harmoniser le client A »
  - « Numérisation du client B »
  - « Harmoniser le client B »
  - Etc.
6. Veuillez patienter jusqu'à la fin de toutes les analyses et harmonisations.  
Résultat : Tous les clients désignés pour le mode automatique ont été traités.
  7. Le programme envoie ensuite des courriels à tous les clients pour lesquels l'envoi automatique est activé.  
Résultat : les rapports sont envoyés par courriel, à condition que les paramètres de messagerie soient corrects et qu'une connexion Internet soit disponible.
  8. Une fois le traitement automatique terminé, consultez le journal.  
Vous y verrez les clients traités et si des problèmes sont survenus lors de l'analyse, de l'harmonisation ou de l'envoi des e-mails.

### Particularité : Le client a été scanné le jour même.

Si un scan d'aura a déjà été effectué pour un client le même jour, ce dernier ne sera pas scanné à nouveau lors du scan automatique.

Explication : le programme empêche qu'un client soit scanné deux fois par erreur le même jour.

Résultat : le client est ignoré lors de ce scan automatique si un scan du même jour existe déjà.

## Comment gérer les problèmes de messagerie électronique

Si l'envoi d'un e-mail échoue, par exemple en raison d'une absence de connexion Internet ou de paramètres de messagerie incorrects, cela est consigné dans le journal.

Les e-mails non envoyés ne seront pas perdus. Si vous repassez ultérieurement en mode automatique d'Aura, la ligne « Anciens e-mails à envoyer » indiquera si des e-mails d'une précédente exécution en mode automatique sont encore ouverts.

Si l'envoi des courriels est impossible en raison d'une absence de connexion Internet ou d'un problème similaire, vous pouvez les renvoyer. L'option « Rejeter » empêche l'envoi des courriels en attente plus anciens, par exemple s'ils sont désormais obsolètes.

### Procédure étape par étape : Comment renvoyer d'anciens e-mails

1. Ouvrez à nouveau le « Mode automatique Aura ».  
Résultat : La liste des tâches s'affiche.
2. Consultez la ligne « Anciens e-mails à envoyer ».  
Résultat : vous verrez s'il reste des e-mails non envoyés suite à une précédente exécution en mode automatique.
3. Cliquez sur le bouton pour renvoyer les anciens e-mails.  
Résultat : Le programme tente de renvoyer les e-mails en attente.
4. Consultez ensuite le journal.  
Résultat : vous verrez si l'envoi suivant a réussi.

### Important

Lorsque le mode automatique est actif, BCS est bloqué et ne peut plus effectuer d'autres tâches. Vous pouvez toutefois utiliser d'autres programmes sur l'ordinateur ou laisser ce dernier fonctionner sans surveillance pendant l'exécution.

### Post-traitement : Examiner attentivement le protocole

Après l'exécution en mode automatique, il convient de ne pas se limiter à une vérification technique du journal. Il est également recommandé d'examiner attentivement la liste des clients traités. L'utilisateur peut ainsi se remémorer brièvement chaque client en interne et concentrer son attention sur l'obtention d'un effet optimal et cohérent lors des analyses et harmonisations effectuées.

Remarque : L'intention consciente est essentielle au travail avec les systèmes énergétiques. Le mode automatique automatise le processus technique, mais ne remplace pas l'attention professionnelle et l'alignement intérieur de l'utilisateur.

### Erreurs courantes et solutions

Problème : Moins de clients s'affichent en mode automatique que prévu.

Cause possible : Le mode automatique Aura n'est pas activé dans les paramètres de tous les clients.

Solution : Vérifiez les paramètres des clients concernés.

Problème : Un client n'a pas pu être analysé en mode automatique.

Cause possible : Une analyse a déjà été effectuée pour ce client le même jour. Solution : Vérifiez si une analyse d'aura datant du même jour existe déjà.

Problème : Le nombre d'e-mails envoyés est inférieur au nombre de clients traités.

Cause possible : L'envoi automatique d'e-mails n'est pas activé pour tous les clients. Solution : Vérifiez dans l'onglet « Paramètres client » pour quels clients l'envoi d'e-mails est activé.

Problème : Les e-mails n'ont pas été envoyés.

Causes possibles : Absence de connexion Internet, paramètres de messagerie incorrects ou

problème d'envoi temporaire. Solution : Vérifiez vos paramètres de messagerie et votre connexion Internet. Ouvrez ensuite le « Mode automatique Aura » et utilisez la fonction de renvoi des anciens e-mails.

## 3.3 Corpus Analyser

### 3.3.1 Aperçu et utilisation prévue

#### 3.3.1.1 Objet et domaines d'application

Corpus Analyser (CA) est un module de Bucher Coaching Systems. Il aide l'utilisateur à examiner systématiquement les relations fonctionnelles et énergétiques, à documenter les changements à différents points d'analyse et à préparer les résultats pour discussion avec le client.

Le processus type comprend la sélection du client, la préparation, l'analyse initiale, les analyses de suivi, l'examen des résultats et la génération du rapport. Selon la licence, l'évaluation par IA, l'analyse fractale et l'harmonisation peuvent également être utilisées.

#### 3.3.1.2 Aperçu des fonctionnalités du Corpus Analyser

- Analyse initiale pour saisir la situation de départ actuelle.
- Analyses de progression qui utilisent les analyses précédentes comme base pour calculer la nouvelle situation.
- Affichage par groupes, paramètres, couleurs de notation et séries chronologiques.
- Informations détaillées, filtres de ciblage, recommandations de produits et d'actions.
- Rapports, sortie PDF, envoi par courriel et évaluations IA optionnelles.
- Fonctions d'harmonisation, de lumière colorée, de son et de fractales activables en option.

#### 3.3.1.3 Responsabilité de l'utilisateur et vérification de la plausibilité des résultats

Analysez chaque résultat en tenant compte du client, de l'objectif fixé et du calendrier. Les valeurs individuelles ne doivent pas être interprétées isolément. Ne documentez que les affirmations professionnellement justifiées et présentez les probabilités comme des indications plutôt que comme des assertions factuelles.

### 3.3.2 Prérequis, installation et configuration

#### 3.3.2.1 Configuration système et exigences de licence

Pour Corpus Analyser, vous devez disposer d'une version installée et activée de BCS, ainsi que de l'activation CA correspondante. Une connexion Internet est requise pour l'activation, les mises à jour, la sélection des couleurs en ligne, les fonctions d'IA, l'envoi d'e-mails et l'échange en ligne de filtres de focus. Les fonctions supplémentaires disponibles dépendent de votre licence et du matériel connecté.

#### 3.3.2.2 Installation, mise à jour et activation de Corpus Analyser sous Windows

L'installation et les mises à jour sont effectuées en collaboration avec Bucher Coaching Systems. Si Windows affiche une invite de sécurité au premier lancement, vérifiez l'éditeur et autorisez l'application fournie par Bucher. Fermez BCS avant la mise à jour, puis redémarrez le programme.

#### Avis

Si Corpus Analyser ne s'affiche pas après une mise à jour, vérifiez d'abord votre activation et votre licence. N'installez aucun pilote ni fichier programme tiers sans consulter l'assistance Bucher. Utilisez les programmes de sécurité intégrés à Windows autant que possible, plutôt qu'un logiciel antivirus tiers.

### 3.3.2.3 Identification des fonctions et modules complémentaires dépendants de la licence


BCS masque ou désactive généralement les boutons correspondant aux fonctions inactives. Cela concerne notamment l'harmonisation (fonction de diffusion ou de transmission), Fractal, certaines fonctions sonores et d'autres modules spécifiques. Par conséquent, l'absence d'affichage d'une fonction n'indique pas automatiquement un dysfonctionnement du programme.

### 3.3.2.4 Connexion et détection du capteur CA

Connectez le capteur CA directement à un port USB approprié. Attendez que Windows reconnaisse le périphérique, puis ouvrez les Paramètres via le bouton rond « Fonctionnalités supplémentaires » et enfin Paramètres matériels. Le capteur doit y apparaître comme périphérique actif.

#### Étape par étape : Vérifiez le capteur

1. Ouvrez les paramètres via le bouton rond « Fonctionnalités supplémentaires » et accédez à la section Matériel.
2. Repérez l'entrée « Corpus Analyser » et vérifiez si l'appareil est actif en maintenant le bouton « Test » enfoncé. Un voyant blanc s'allumera sur le capteur CA tant que vous maintiendrez le bouton « Test » enfoncé.
3. Placez le capteur CA dans la liste de priorité en position haute (première) à l'aide des deux boutons fléchés afin qu'il soit affiché immédiatement lors de la numérisation.

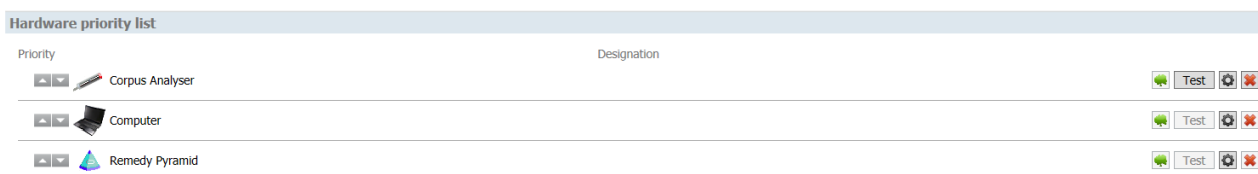

Capteur CA dans la gestion matérielle

### 3.3.2.5 Donner la priorité au capteur CA et l'afficher pour le scan et la transmission

Le matériel affiché en haut est considéré comme actif pendant la numérisation et la transmission. Cependant, si plusieurs appareils sont connectés, comme tweeklite, Philips Hue, Loxone, Artnet ou Shelly, tous les équipements sont utilisés simultanément. Ces systèmes de luminothérapie peuvent potentiellement baigner une salle de thérapie entière d'une lumière colorée thérapeutique. Par conséquent, tous ces équipements affichent la même couleur de lumière en même temps lorsqu'ils sont connectés simultanément au BCS.

### 3.3.2.6 Configuration de l'interface esprit-matière

Dans la configuration matérielle, l'interface utilisée pour le capteur peut être appelée interface esprit-matière. Utilisez ce terme neutre lorsque vous vous adressez aux clients. Ne modifiez les propriétés matérielles associées que si cela est autorisé par la configuration de votre appareil ou recommandé par le support technique.

### 3.3.2.7 Voyants indicateurs et manipulation correcte du capteur

Les voyants indiquent l'état du capteur. L'affichage peut varier selon la phase de balayage. Au départ, placez le capteur sur une surface stable ou dans son support et ne le manipulez que lorsque BCS vous y invite. Maintenez-le immobile pendant le balayage et évitez de tirer sur le câble.


### 3.3.2.8 Configuration de la langue, du formulaire, de l'imprimante et de l'adresse électronique

Dans les paramètres généraux, indiquez la langue du programme, le format souhaité et l'imprimante par défaut. Pour l'envoi par courriel, configurez le compte de messagerie et le modèle de rapport. Après avoir effectué les modifications, effectuez un test rapide en vous envoyant un exemple de rapport.

## 3.3.3 Paramètres de base du Corpus Analyser

### 3.3.3.1 Ouvrir les paramètres du CA

Ouvrez les paramètres via le bouton rond « Fonctionnalités supplémentaires » et sélectionnez la section « Corpus Analyser ». Les options affichées dépendent de votre licence. Confirmez les modifications en cliquant sur « OK » pour les appliquer définitivement.

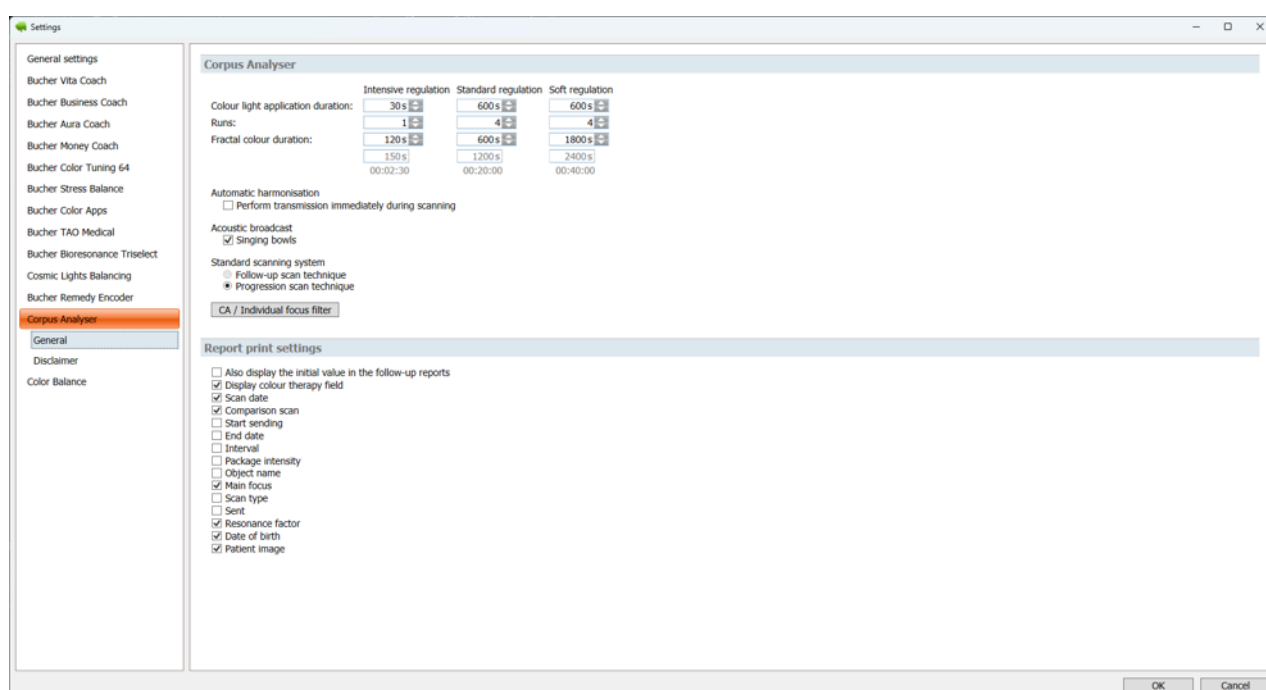

Paramètres de base du Corpus Analyser

### 3.3.3.2 Réglage de la durée et des cycles de lumière colorée

Pour les niveaux Court, Moyen et Long, vous pouvez définir la durée de la lumière colorée et le nombre de cycles de couleurs. BCS calcule la durée totale prévisible. Choisissez des valeurs adaptées à votre méthode de travail, au matériel utilisé et à l'accompagnement prévu.

### 3.3.3.3 Temps de transmission des couleurs fractales

Si la fonction fractale est activée, vous pouvez définir pendant combien de temps les couleurs de l'image fractale sont transférées au cours de l'envoi immédiat. Ce réglage concerne la durée du transfert et ne modifie pas la période d'émission qui suit, fixée par défaut à quatre semaines.

### 3.3.3.4 Activer ou désactiver l'harmonisation automatique

L'harmonisation automatique n'est disponible que si la fonction d'harmonisation CA est activée. Dans ce cas, la transmission est effectuée automatiquement lors de l'analyse. Sans activation, ce paramètre est indisponible et sans effet.

### 3.3.3.5 Configurer la valeur initiale, le champ de luminothérapie et les informations du rapport

Dans les paramètres de rapport du Corpus Analyser, vous pouvez choisir d'afficher ou non la valeur initiale en plus de celle affichée lors des scans d'évolution, et d'inclure ou non le champ de luminothérapie dans le rapport. D'autres informations peuvent être affichées ou masquées selon leur position. Testez le résultat avec les deux types de rapports avant d'appliquer définitivement le paramètre.

### 3.3.3.6 Gestion des filtres de focus

Les paramètres CA permettent d'accéder à la gestion des filtres de focus. Vous pouvez y créer, modifier, importer, exporter ou, si une fonction en ligne est disponible, partager vos propres filtres avec d'autres utilisateurs. Des instructions détaillées sont disponibles dans la section 3.3.14, « Création, partage et utilisation des filtres de focus ».

Les filtres de focus sont utilisés, par exemple, avec les animaux. Pour les chevaux, seule une fraction des paramètres disponibles dans CA est nécessaire. Grâce au filtre de focus, vous pouvez activer uniquement les paramètres souhaités et masquer tous les autres.

CA / Individual focus filter

Gestion des filtres Open Focus

## 3.3.4 Fondements techniques

### 3.3.4.1 Principe de base du Corpus Analyser

L'analyseur Corpus catégorise les données détectées en groupes et paramètres et affiche les écarts par rapport aux valeurs de référence personnelles. L'affichage permet une analyse fonctionnelle et énergétique. Il ne décrit pas les valeurs de laboratoire ni les quantités de substances.

### 3.3.4.2 Cellules, régulation et homéostasie

Le modèle sous-jacent conçoit la régulation comme un équilibre continu entre stress, adaptation et stabilisation. L'homéostasie désigne la capacité d'un système à maintenir un équilibre dynamique. Les résultats de l'analyse des correspondances (AC) peuvent indiquer les points du modèle où cet équilibre semble plus ou moins perturbé.

### 3.3.4.3 Considérations fonctionnelles et énergétiques

L'analyse des correspondances (AC) se concentre sur les relations, les orientations régulatrices et les priorités. Elle ne se substitue pas à un examen anatomique, pathologique ou médical de laboratoire. Utilisez des termes tels qu'indication, résonance, tendance ou relation fonctionnelle.

### 3.3.4.4 Valeurs de référence personnelles

Le calcul tient compte des informations recueillies sur le client et du contexte de chaque analyse. Par conséquent, les résultats de différentes personnes ne sont pas directement comparables. Ce qui importe, c'est la vision d'ensemble et l'évolution d'une même personne à travers plusieurs analyses.

### 3.3.4.5 Probabilités au lieu de valeurs quantitatives

Les pourcentages exprimés en CA indiquent une tendance ou une orientation au sein du modèle utilisé. Ils ne représentent pas la concentration d'une substance ni une valeur de laboratoire au sens

médical du terme. Même des écarts importants ne sont qu'indicatifs et doivent faire l'objet d'une analyse approfondie par un professionnel, suivie d'une discussion avec le client.

### 3.3.4.6 Différenciation entre Corpus Analyser et la biorésonance classique

Corpus Analyser utilise son propre modèle d'évaluation et d'affichage. Ne transposez pas automatiquement les termes ou les attentes des systèmes de biorésonance classiques au Corpus Analyser. Les groupes, paramètres, valeurs de tendance et explications affichés dans Corpus Analyser font foi.


### 3.3.4.7 Termes : Paramètres, groupes, analyse initiale et scan d'évolution

Les paramètres correspondent aux éléments individuels de l'évaluation. Les groupes regroupent les paramètres liés thématiquement. Une analyse initiale constitue le point de départ. un scan d'évolution utilise les analyses précédentes comme base de calcul et décrit la situation actuelle ainsi calculée.

## 3.3.5 Préparation des clients

### 3.3.5.1 Créer un nouveau client ou sélectionner un client existant


Ouvrez la section Gestion des clients et sélectionnez le client concerné. Avant chaque analyse, vérifiez le nom et la date de naissance afin d'éviter toute attribution accidentelle des résultats à une mauvaise personne. Ne créez une nouvelle fiche que si aucun client correspondant n'existe déjà.

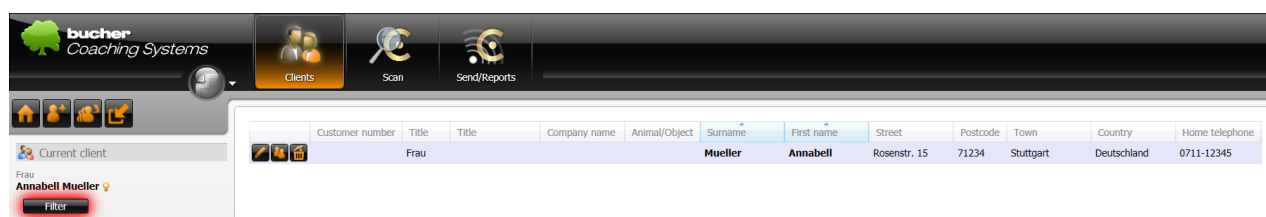

Exemple de client sélectionné : Mueller Annabell

### 3.3.5.2 Informations obligatoires complètes pour le calcul

Pour une attribution fiable, les champs obligatoires du formulaire client doivent être complétés. Il s'agit notamment du nom, de la date de naissance, du sexe, de la langue et, selon le calcul, de la taille et du poids. Une adresse électronique est requise pour la transmission directe du rapport par courriel.

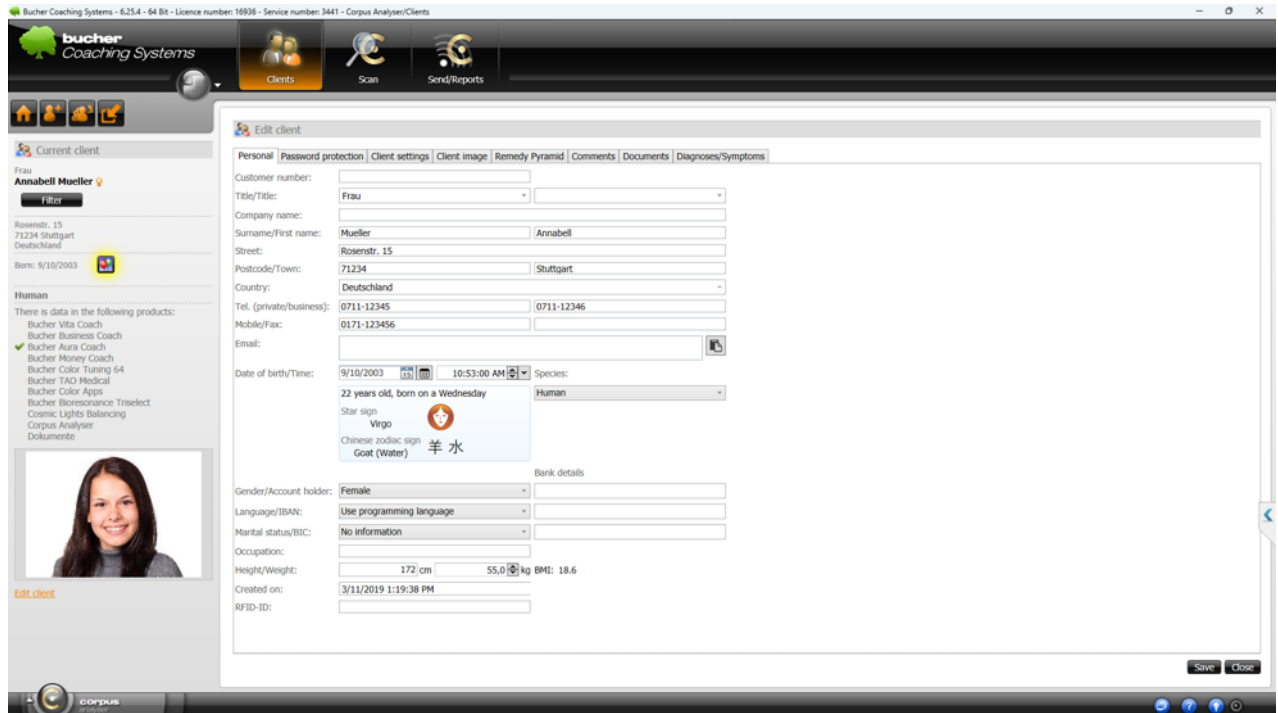

Préparer les données client pour le CA

### 3.3.5.3 Définir la langue du client et des rapports

La langue définie pour le client dans ses données personnelles détermine les textes fournis et peut influencer la langue du rapport. Vérifiez la sélection avant la numérisation afin de garantir que les explications et les documents de sortie soient générés dans la langue souhaitée. Si aucune langue n'est saisie pour le client et que l'option « Utiliser la langue du programme » est sélectionnée, le rapport sera généré dans la langue définie dans le BCS au moment de sa création.

### 3.3.5.4 Saisir des remarques

La section « Remarques » contient des informations organisationnelles, professionnelles et parfois personnelles concernant le client. Notez ici les informations qui pourraient vous être utiles, par exemple, lors de sa prochaine visite.

### 3.3.5.5 Prendre, sélectionner ou supprimer une photo


La photo du client peut être prise à l'aide d'une webcam existante ou sélectionnée dans un fichier. Elle peut également être copiée au préalable (par exemple, depuis une page Facebook) puis collée dans le profil du client. Assurez-vous d'avoir obtenu son consentement. Une photo devenue inutile peut être supprimée du formulaire client.

### 3.3.5.6 Exportation ou importation des données client et de numérisation

Les clients, ainsi que leurs données d'analyse associées pour un cycle donné, peuvent être exportés et importés dans un autre système BCS. Utilisez à cet effet la fonction centrale d'exportation et

d'importation du système de gestion des clients. Vous trouverez des instructions générales dans la section 2.2 « Gestion des clients » et la section 2.4 « Sauvegarde et restauration des données ».

### 3.3.6 Préparer l'analyse

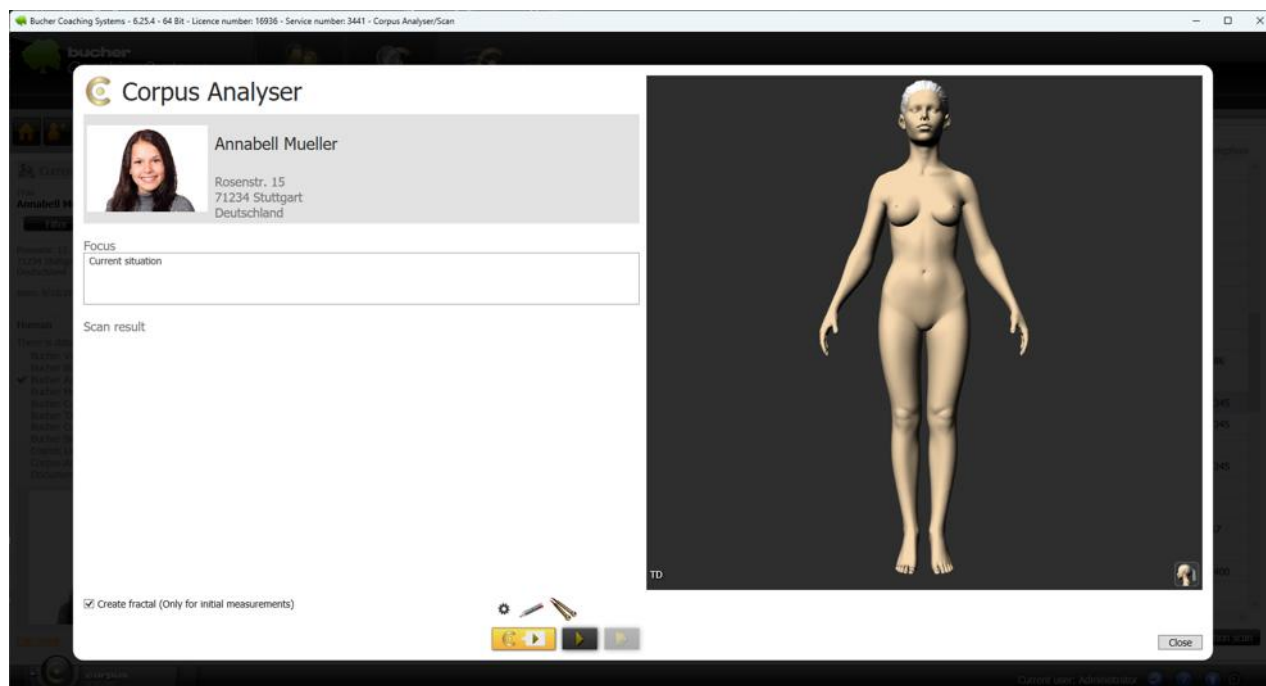

Préparation d'un examen CA avec mise au point et matériel

#### 3.3.6.1 Décrire la situation actuelle dans le champ Focus

L'objectif principal est de bien cerner la situation actuelle du client et, après l'évaluation initiale et l'identification de la cause profonde des problèmes, de définir un objectif à atteindre. Des formulations concises relatives à un problème actuel, un facteur de stress, un objectif ou une question sont appropriées. Il convient d'éviter tout langage jugeant, suggestif ou diagnostique.

#### 3.3.6.2 Prévoir un environnement calme pour le scan et éviter les conversations

Veillez à créer un environnement calme. Évitez de parler pendant l'examen. Les appels téléphoniques, les notifications et les mouvements inutiles peuvent perturber le processus. Le client doit être confortablement installé et comprendre que le capteur restera immobile pendant toute la durée de l'examen.

#### 3.3.6.3 Poser d'abord le capteur, puis le prendre lorsque le programme le demande

Avant de commencer, posez le capteur sur la table, de préférence sur un tissu doux ou dans le support du capteur CA, s'il est fourni. Lancez le scan et attendez l'indication dans BCS. Le client ne doit prendre le capteur en main que lorsque le programme le demande. Les doigts de la main dominante doivent entourer le capteur : la droite pour les droitiers, la gauche pour les gauchers et l'une ou l'autre pour les ambidextres. Le câble doit être orienté vers le bas et le voyant du capteur CA vers le haut. Pendant la transmission, le client devrait, si possible, regarder le voyant. Il doit tenir le capteur fermement, sans le serrer de manière crispée.

### **3.3.6.4 Vérifier le matériel de numérisation et les propriétés de numérisation**

Si le capteur CA est défini sur la priorité 1 dans les paramètres matériels, il apparaîtra dans la fenêtre de numérisation comme périphérique de numérisation principal, à l'écran au-dessus du bouton « Numériser ». Au besoin, ouvrez les propriétés de numérisation à l'aide de l'icône d'engrenage pour modifier les options.

### **3.3.6.5 Utiliser la fonction de sélection des couleurs en ligne pour les clients absents**


Le scan de sélection de couleurs en ligne est conçu pour les situations où le client ne peut pas être présent lors du scan, par exemple en raison de la distance ou de l'impossibilité d'une rencontre en personne. Le client reçoit une sélection de couleurs par internet. À son domicile, il choisit les couleurs, formes et nuances qu'il préfère et celles qu'il n'aime pas. La sélection est transmise à BCS et mise à la disposition du client sous forme de scan de sélection de couleurs en ligne finalisé. L'option permettant d'utiliser ces données comme base pour le scan apparaît ensuite dans la fenêtre de scan CA.

En présence d'un client, on utilise généralement le flux de travail CA habituel, y compris la numérisation avec le matériel de capteur CA.

#### **Étape par étape : utilisation de la sélection de couleurs en ligne existante**

1. Ouvrez la fenêtre de scan du CA pour ce client.
2. Activez l'option « Utiliser la numérisation de sélection de couleurs en ligne existante ».
3. Vérifiez le focus et l'affectation du client, puis lancez l'analyse.

4. Les données en ligne utilisées sont traitées en conséquence par BCS et ne sont plus disponibles pour d'autres examens après celui-ci.

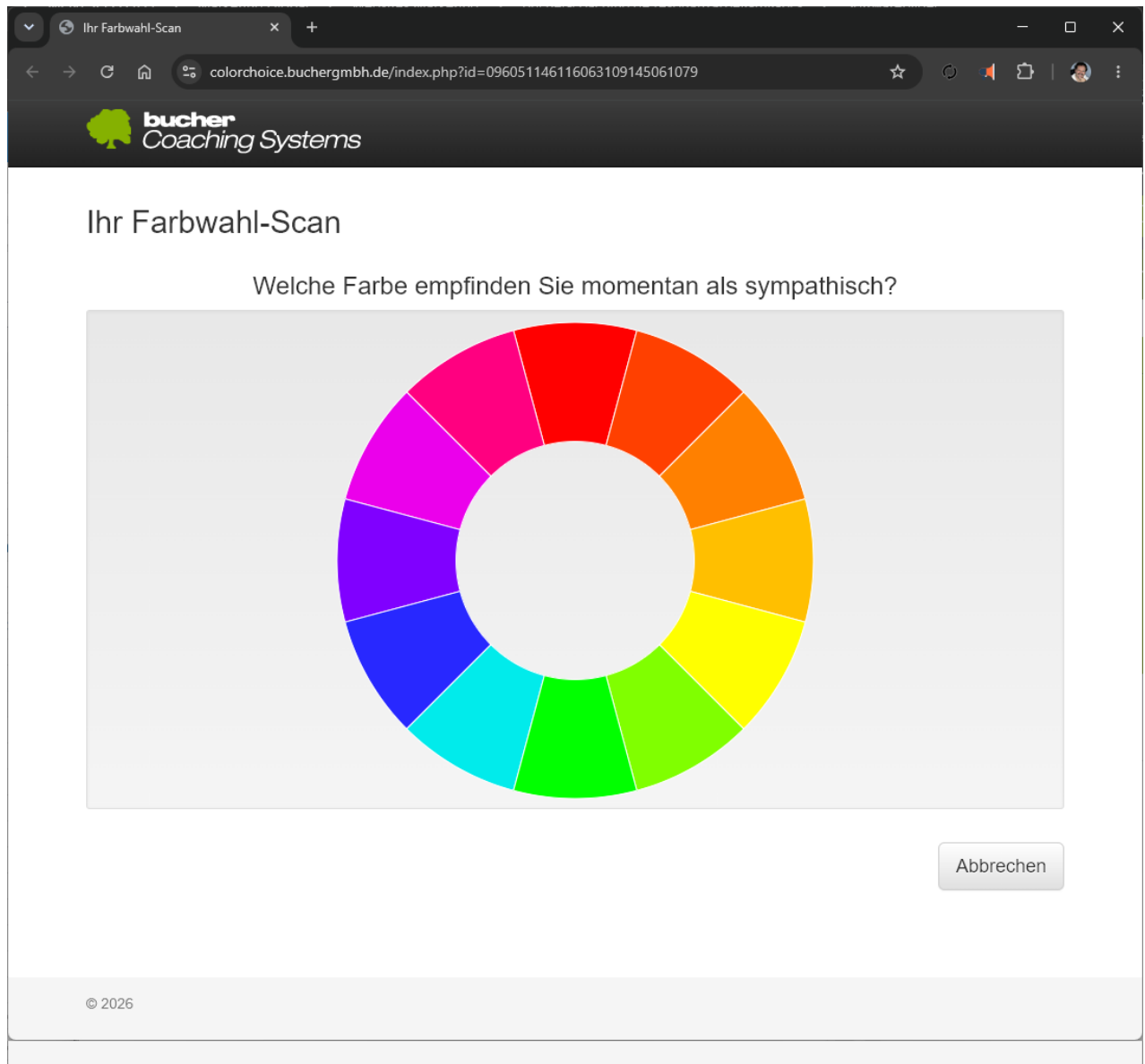

Le client effectue le scan de sélection des couleurs

### 3.3.6.6 Inclure éventuellement la fractale dans l'analyse

Si la fonction fractale est activée, une fractale peut être générée pendant la numérisation ou appliquée selon les paramètres sélectionnés. Cette option n'est visible que si le module correspondant est actif. Une fractale améliore la visualisation, mais ne remplace pas l'analyse d'un expert.

## 3.3.7 Utiliser la technique des scans d'évolution

### 3.3.7.1 Principe de base du scan d'évolution

Le scan d'évolution est la technique habituelle du Corpus Analyser. Il utilise les scans précédents comme base de calcul pour déterminer la nouvelle situation. Il permet ainsi d'observer les changements au sein d'une même série de scans, sans considérer chaque date de scan isolément.

### 3.3.7.2 Utiliser la suggestion d'analyse du programme

En fonction des examens déjà effectués, BCS propose soit un nouvel examen initial, soit l'examen suivant de votre historique. En général, utilisez le bouton de suggestion mis en évidence à gauche.



Suggestion de numérisation pour une numérisation initiale ou de suivi

### 3.3.7.3 Lancer l'analyse initiale pour un nouvel historique

Un scan initial constitue le point de départ d'un nouveau suivi. Utilisez-le pour le premier scan CA d'un client ou pour documenter une nouvelle situation initiale clairement distincte sur le plan professionnel. Vérifiez le client, le focus et le matériel avant de commencer. Le système propose automatiquement un scan initial, par exemple lors du premier scan ou après une très longue interruption. Vous pouvez donc généralement utiliser le bouton le plus à gauche des trois boutons de scan. Il affiche un triangle pour un scan initial ou deux triangles pour un scan d'évolution.

### 3.3.7.4 Lancer un scan d'évolution

Une analyse historique est disponible dès qu'une analyse précédente appropriée existe. Ouvrez l'analyse CA, vérifiez le point de focalisation actuel et lancez l'analyse historique suggérée. BCS intègre les analyses précédentes dans le calcul et enregistre la nouvelle analyse dans l'historique correspondant.

### 3.3.7.5 Comprendre les boutons de numérisation disponibles et désactivés

BCS active uniquement les boutons correspondant à l'historique d'analyse et à la licence. Si aucune analyse initiale appropriée n'est disponible, une analyse initiale est proposée ; une analyse d'historique ne peut être lancée qu'après cette première proposition. Par conséquent, il est impossible, par exemple, de lancer la première analyse d'un client en tant qu'analyse d'historique (deux triangles), car ce bouton est alors inactif.

### 3.3.7.6 Respecter un intervalle minimum de 24 heures entre les scans.

Un intervalle minimal de 24 heures doit être respecté entre deux examens coronaires. Un intervalle trop court complique l'interprétation par un professionnel et peut entraîner une surestimation des fluctuations à court terme. Si un examen est réalisé plus tôt dans des cas exceptionnels justifiés, il convient de documenter la raison de cet intervalle.


### 3.3.7.7 Quand un nouveau scan initial est conseillé

Lancez une nouvelle analyse si le sujet et la situation initiale ont fondamentalement changé, si l'analyse précédente est techniquement terminée ou si l'ancienne série d'analyses ne fournit plus une base de calcul pertinente. Pour les modifications courantes au sein d'un même sujet, utilisez une analyse d'historique. Le programme suggère généralement le type d'analyse approprié automatiquement ; il est donc généralement inutile de s'écarter de cette suggestion.

## 3.3.8 Effectuer une analyse

### 3.3.8.1 Lancement d'une analyse et interprétation des indicateurs d'état

Lancez l'analyse uniquement après avoir vérifié le focus, le client et le matériel. Pendant l'analyse, BCS affichera la progression et l'état actuel du périphérique. Suivez les instructions à l'écran et ne changez pas de zone dans BCS pendant l'analyse.

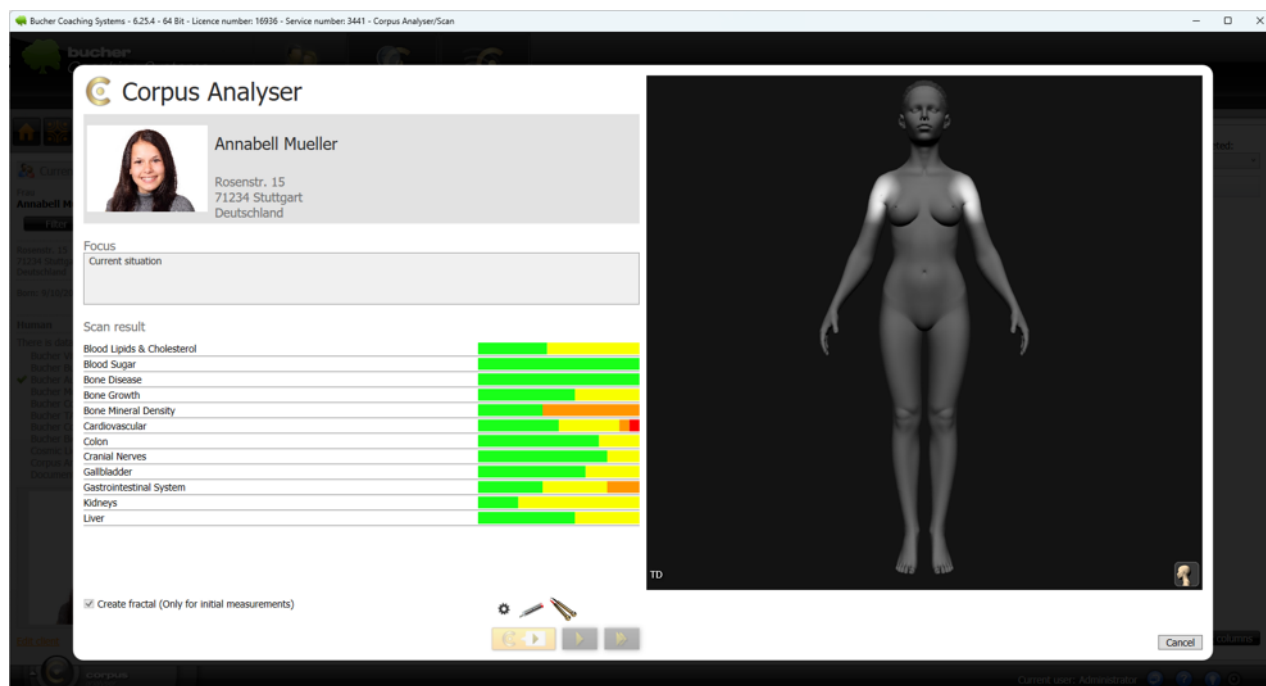

Scanner CA pendant l'intervention

### 3.3.8.2 Maintenez le capteur immobile pendant l'analyse

Veillez à ce que le client tienne le capteur sans serrer et en restant aussi immobile que possible. Évitez de parler, de changer de main, de serrer le capteur trop fort et de tirer sur le câble. Si le capteur est accidentellement posé ou déconnecté, la numérisation peut être reprise en le reprenant. Toutefois, si la connexion avec la main est interrompue trop longtemps, la numérisation sera annulée.

### 3.3.8.3 Annuler l'analyse ou terminer l'analyse

Utilisez le bouton « Annuler » (en bas à droite de la fenêtre) pour interrompre une analyse en cours. Une analyse annulée n'est pas enregistrée : toutes les données collectées jusqu'à l'annulation sont supprimées. Pour une analyse normale, laissez le processus se terminer et ne fermez la fenêtre qu'après l'affichage du message de fin. Une fois l'analyse terminée, le bouton « Annuler » devient « Fermer ». Par conséquent, attendez toujours que « Fermer » s'affiche en bas à droite pour éviter toute perte de données.


### 3.3.8.4 Enregistrement automatique d'une analyse terminée

Une fois l'analyse terminée, BCS enregistre automatiquement les résultats sur le client et les associe à l'historique correspondant. Aucune autre étape d'enregistrement n'est requise dans la fenêtre d'analyse. Ensuite, ouvrez Envoyer/Rapports pour consulter et interpréter les résultats.

## 3.3.9 Évaluation des scans d'évolution

### 3.3.9.1 Sélectionner l'analyse comparative

Dans un historique de scan, un scan précédent ou le scan initial du même cycle peuvent être affichés à des fins de comparaison.

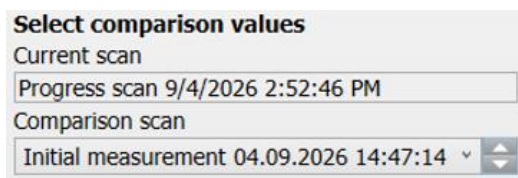

Select comparison values

Current scan

Progress scan 9/4/2026 2:52:46 PM

Comparison scan

Initial measurement 04.09.2026 14:47:14 ▼

Comparaison de la valeur initiale, de la valeur de l'analyse actuelle et de la tendance

### 3.3.9.2 Distinction entre valeur initiale, valeur actuelle et différence

La valeur initiale correspond au point de départ, la valeur actuelle à la situation nouvellement calculée, et la différence à sa variation. Selon les paramètres du rapport, la valeur initiale peut également être affichée.

### 3.3.9.3 Évaluation des changements, de la direction et de la tendance

Il convient de prendre en compte non seulement l'ampleur d'un écart, mais aussi sa direction, le contexte du groupe et son évolution temporelle. Une valeur ponctuelle, meilleure ou pire, ne constitue pas une tendance stable. Une évolution compréhensible ne peut se dégager qu'à la lumière de plusieurs observations pertinentes et d'une discussion avec le client.

### 3.3.9.4 Classification du scan d'évolution d'un point de vue professionnel

L'analyse des tendances, s'appuyant sur les analyses précédentes, décrit la situation actuelle par rapport aux évolutions passées. Elle ne constitue pas une répétition indépendante d'un test en laboratoire ni d'une vérification de dispositif. Par conséquent, toute variation doit être interprétée comme une observation relative au modèle.

## 3.3.10 Afficher et sélectionner les résultats de l'analyse

### 3.3.10.1 Sélectionner le cycle de numérisation et la numérisation enregistrée

Ouvrez le menu Envoyer/Rapports et sélectionnez Corpus Analyser. Utilisez Cycle de numérisation ou Sélection de numérisation pour basculer entre les numérisations enregistrées de l'historique sélectionné. Vérifiez la date, l'heure de numérisation et le focus avant de modifier ou d'exporter les résultats.

The screenshot shows the 'Corpus Analyser/Package list' window in the Bucher Coaching Systems software. The interface includes a sidebar on the left with client information and a main table displaying scan results.

**Client Information (Frau Annabell Mueller):**

- Address: Rosenstr. 15, 71234 Stuttgart, Deutschland
- Born: 9/10/2003
- Email: wolfgang@buechermbh.de
- Human
- There is data in the following products:
  - ✓ Bucher Vita Coach
  - ✓ Bucher Business Coach
  - ✓ Bucher Aura Coach
  - ✓ Bucher Color Tuning 64
  - ✓ Bucher TAO Medical
  - ✓ Bucher Color Apps
  - ✓ Bucher Bioresonance Triselect
  - ✓ Cosmic Lights Balancing
  - ✓ Corpus Analyser
  - Dokumente


**Scan Results Table:**

|   |  | Scan date            | Resonance factor | Transmission | End date              | Recommendations | Mail delivery       |
|---|--|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1 |  | 9/15/2026 4:06:59 PM | 16.9% (-0.8%)    |              | 10/13/2026 4:06:59 PM | ✓               |                     |
| 2 |  | 7/5/2026 11:54:31 PM | 17.7% (-0.2%)    |              | 8/2/2026 11:54:31 PM  | ✓               | 7/15/2026 1:30:05 I |
| 3 |  | 7/5/2026 11:21:20 PM | 17.9%            |              | 8/2/2026 11:21:20 PM  | ✓               |                     |

Sélectionnez l'analyse CA enregistrée

### 3.3.10.2 Afficher les groupes en entier, après sélection ou réduits

Les boutons situés au-dessus de la liste des résultats permettent d'afficher tous les groupes, d'afficher une sélection définie ou de réduire tous les groupes. Utilisez l'affichage complet pour la consultation et un affichage filtré pour les réunions ou les rapports.

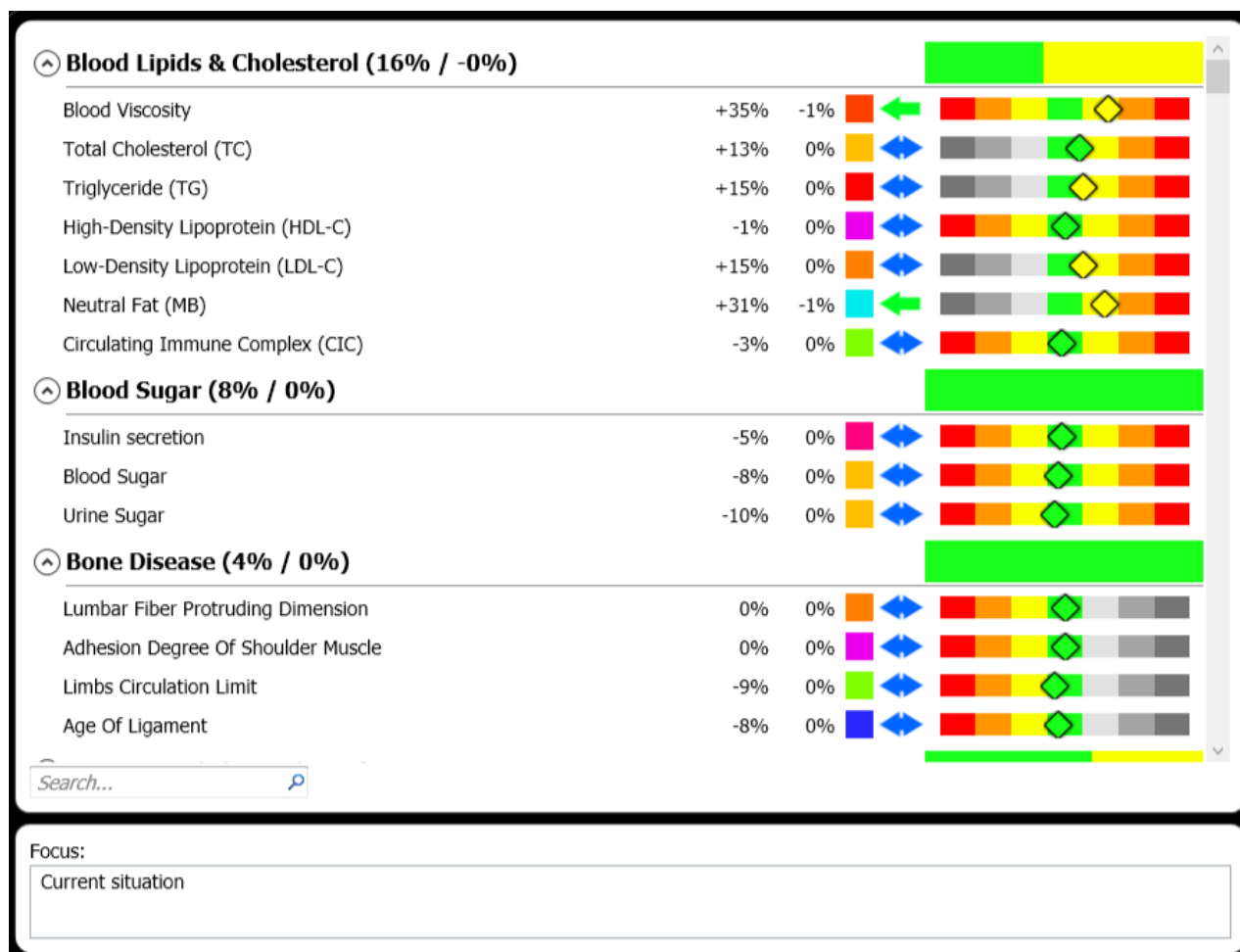

Résultats CA par groupes, couleurs et filtres

### 3.3.10.3 Comprendre la vue d'ensemble des résultats et la vue de groupe

Le récapitulatif des résultats attribue les paramètres à leurs groupes. Les groupes permettent de situer les valeurs individuelles dans un contexte plus large. Ouvrez un groupe pour afficher les paramètres associés, les valeurs, les couleurs d'évaluation et, le cas échéant, les données comparatives.

### 3.3.10.4 Interprétation des pourcentages et des signes

Le signe indique le sens de la régulation déterminé par le modèle, tandis que la valeur représente l'ampleur de l'écart. Les valeurs positives et négatives ne sont pas systématiquement bonnes ou mauvaises. Idéalement, la valeur est de 0, ce qui signifie qu'il n'y a ni déficit ni excès. Un déficit maximal serait de -100 et un excès maximal de +100. Le facteur déterminant est le sens visé pour le paramètre concerné et la façon dont sa valeur s'inscrit dans le contexte global.

### **3.3.10.5 Signification des couleurs vert, jaune, orange et rouge**

Les couleurs indiquent différents niveaux d'écart. Le vert représente une valeur normale ou proche de la valeur de référence ; le jaune, l'orange et le rouge indiquent des écarts croissants. La couleur sert de guide pour la sélection et la priorisation, et non de preuve de maladie.

### **3.3.10.6 Distinguer les directions de régulation positives, négatives et non disponibles**

Selon sa définition, un paramètre peut être évalué dans les deux sens ou dans un seul. Si aucun sens n'est défini, l'affichage peut être neutre ou gris. Prenons l'exemple de la pression artérielle : elle peut être trop basse (valeurs négatives) ou trop élevée (valeurs positives). De même, considérons les performances de la mémoire : la mémoire peut être faible (valeurs négatives), mais jamais excellente. Par conséquent, le paramètre « mémoire » ne peut pas afficher de valeurs positives.

### **3.3.10.7 Application du focus, de la sélection personnalisée et des filtres de focus**


Pour l'affichage et la génération de rapports, vous pouvez utiliser une zone de mise au point prédéfinie, une sélection de groupe personnalisée ou un filtre de focus. Cette sélection ne modifie pas l'analyse enregistrée elle-même, mais détermine les paramètres visibles ou pertinents pour la vue actuelle. Vous trouverez plus d'informations sur les filtres de focus dans la section 3.3.14 .

### **3.3.10.8 Filtrer les groupes de paramètres et les couleurs d'évaluation**

Sélectionnez les groupes et les couleurs d'évaluation correspondant à la question. Au moins une couleur d'évaluation doit être active. Avant de générer le rapport, vérifiez que le filtrage ne masque pas involontairement des liens importants.

### 3.3.10.9 Afficher et imprimer des informations détaillées sur les groupes et les paramètres

Cliquer sur un groupe ou un paramètre ouvre les informations détaillées associées. Le texte peut servir de fond de conversation et être imprimé grâce à la fonction d'impression prévue à cet effet. Veuillez vérifier que les informations correspondent à la version et à la langue actuelles.

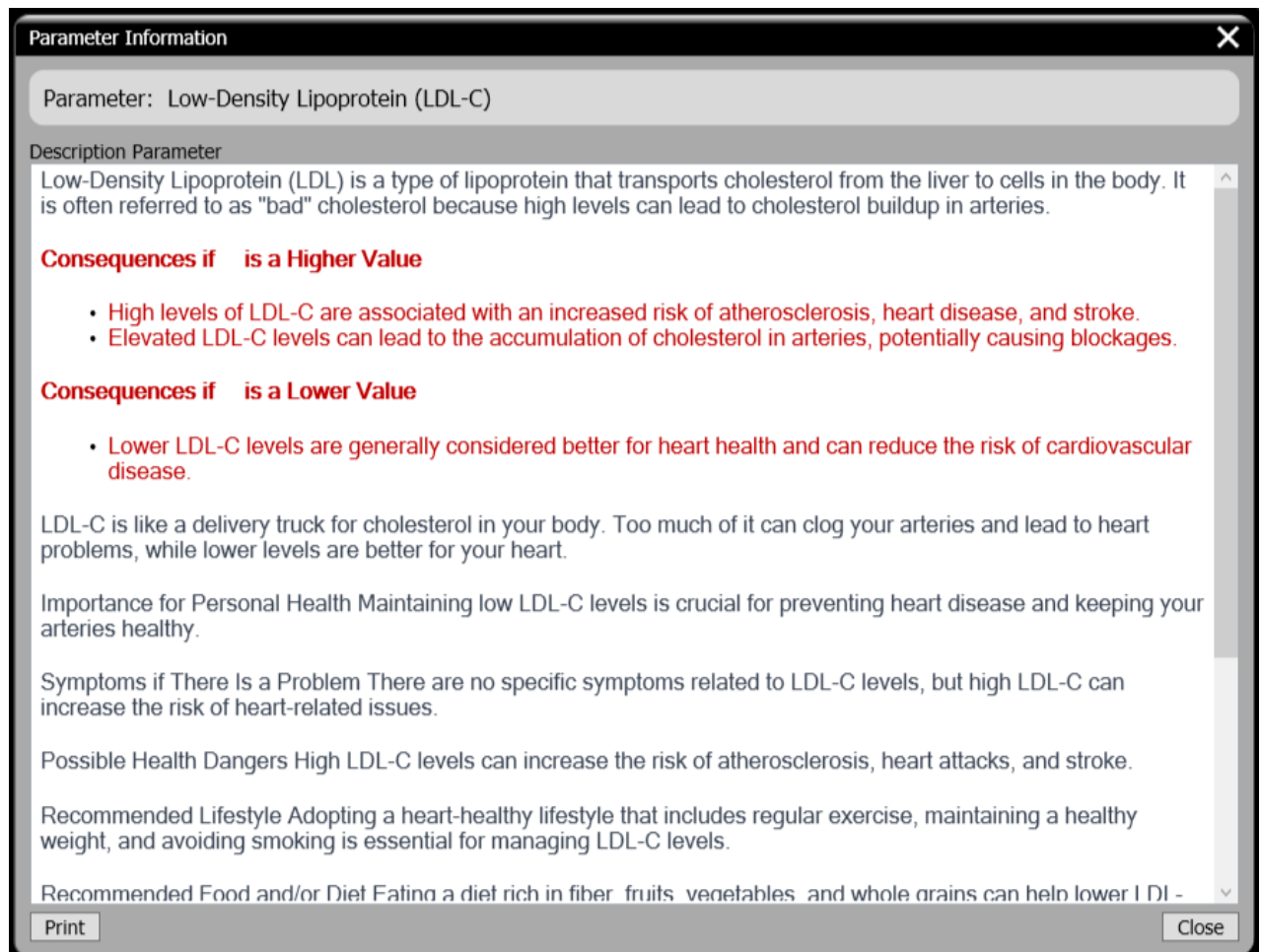

Informations détaillées et recommandations concernant un paramètre CA

### 3.3.11 Classer et analyser les résultats d'un point de vue professionnel

#### 3.3.11.1 Utilisation des informations relatives au résultat du test

Commencez par une vue d'ensemble et identifiez les groupes d'éléments les plus pertinents. Utilisez les textes informatifs comme un guide, et non comme un diagnostic définitif. Vérifiez que l'analyse, la conversation avec le client et le déroulement des événements convergent bien vers la même conclusion.

#### 3.3.11.2 Utilisation des informations thérapeutiques sur les paramètres et les groupes

Les informations thérapeutiques décrivent des pistes de collaboration et des points de départ possibles. Ne les utilisez pas sans les avoir vérifiées. Ne retenez que les informations pertinentes à vos qualifications, aux préoccupations du client et à la situation actuelle.

### **3.3.11.3 Du symptôme à la relation fonctionnelle**

Ne vous contentez pas d'interroger le problème apparent, mais renseignez-vous également sur ses relations fonctionnelles possibles, son apparition, ses facteurs de stress et les ressources disponibles. L'analyse critique peut aider à structurer les problèmes et à formuler des questions complémentaires.

### **3.3.11.4 Causes primaires, conséquences secondaires et compensation**

Un groupe distinct peut être le point de départ, la conséquence ou la compensation d'une autre corrélation. Il est donc important de rechercher des schémas communs à plusieurs groupes et points temporels. Évitez d'affirmer qu'une seule valeur CA est la cause d'un symptôme.

### **3.3.11.5 Définir les priorités de l'accompagnement**

Privilégiez quelques sujets scientifiquement rigoureux. Tenez compte de la gravité de l'écart, de sa pertinence par rapport au sujet étudié, de son évolution, de son impact sur la vie quotidienne et de sa faisabilité. Un ordre clair est plus utile qu'une longue liste de toutes les valeurs anormales.

### **3.3.11.6 Expliquer les résultats de manière compréhensible et sans poser de diagnostic.**

Utilisez des phrases claires telles que : « L'analyse des artères coronaires révèle une déviation plus importante dans ce domaine » ou « Cette corrélation a évolué au fil du temps ». Évitez les expressions comme « Vous avez... » ou « L'analyse prouve que... ». Laissez au client le temps de poser des questions et consignez par écrit les prochaines étapes convenues.


## **3.3.12 Harmonisation et transmission**

### **3.3.12.1 Vérifier l'activation et la disponibilité**

L'harmonisation CA est une fonctionnalité supplémentaire qui n'est pas activée pour de nombreux clients. Elle nécessite une licence spécifique pour être utilisée ; les commandes correspondantes seront alors masquées ou désactivées.

### 3.3.12.2 Différenciation entre l'harmonisation automatique et la transmission manuelle

Si la fonction est activée dans votre licence, l'harmonisation peut démarrer automatiquement en lien avec le scan, selon les paramètres, ou être lancée plus tard manuellement depuis Envoyer/Rapports. Si elle n'est pas activée, ni l'harmonisation automatique ni la transmission manuelle du CA ne sont disponibles.

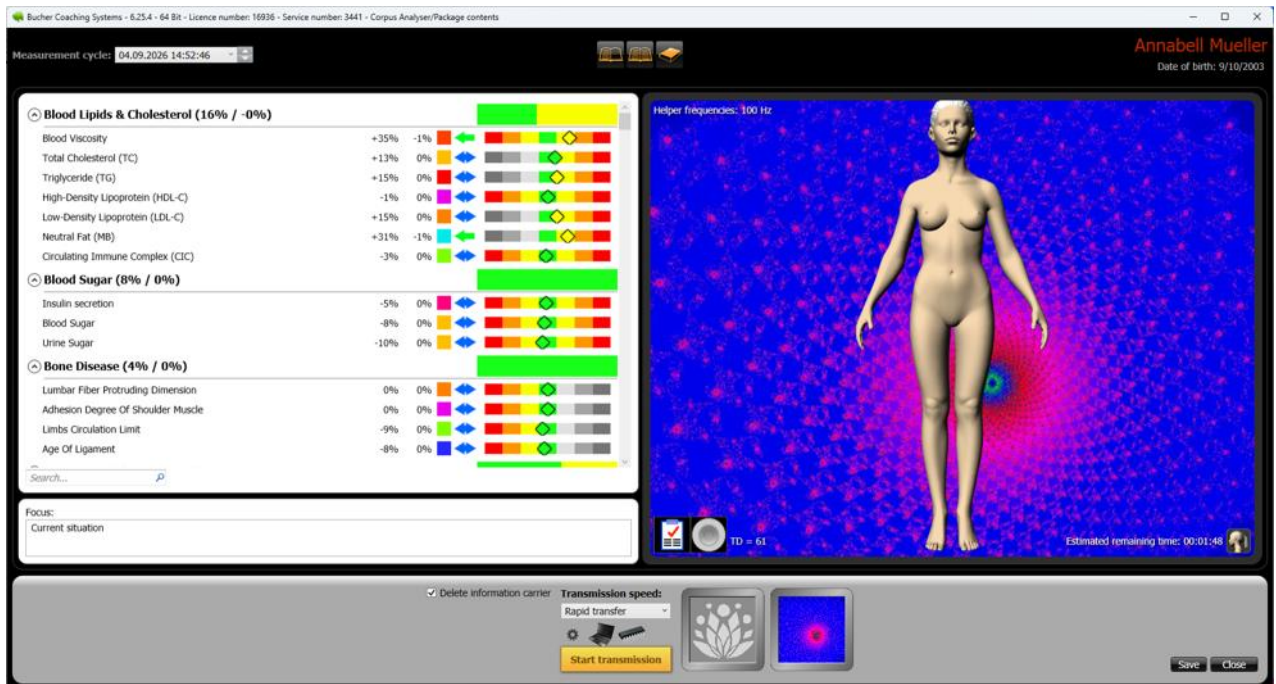

Préparation à l'harmonisation des CA

### 3.3.12.3 Choisir le paquet à transmettre

Utilisez toujours la mesure la plus récente pour le processus de transmission (harmonisation). Ouvrez le scan souhaité dans Envoyer/Rapports et vérifiez la date du scan, le focus et les paramètres visibles.

### 3.3.12.4 Sélectionner la vitesse de transmission

Sélectionnez la vitesse de transmission souhaitée. Les vitesses de transmission suivantes sont disponibles :

- Rapide
- Moyen
- Lent
- Rapid Transfer

La durée affichée en bas à droite correspond à la durée estimée de la transmission en cours. Les valeurs « Rapide », « Moyen » et « Lent », configurées dans les paramètres CA, déterminent cette durée ; il ne faut pas les confondre avec la durée des transmissions suivantes.

Rapid Transfer utilise la vitesse de transfert maximale. Choisissez Rapid Transfer ou Rapide lorsque le client est absent ou lors de la préparation d'un support d'information. Choisissez Moyen ou Lent pour une application consciemment accompagnée avec un client présent.

Une transmission plus lente n'est ni plus puissante ni de meilleure qualité ; elle ne fait qu'allonger le processus de transmission immédiatement visible.


La durée de transmission suivante est de quatre semaines par défaut, quel que soit le réglage (Rapid Transfer, Rapide, Moyen ou Lent). Consultez séparément la durée, l'intensité, le cycle et les autres options de transmission. Voir également la section 2.7 , « Différence entre la durée et la vitesse de transmission ».

### 3.3.12.5 Configuration du matériel de transmission et des propriétés de transmission

Après la réinstallation, les paramètres de transmission standard sont déjà correctement configurés. Si vous souhaitez les modifier, ouvrez les propriétés de transmission et vérifiez le matériel actif, les options de transmission disponibles et, le cas échéant, les heures de début et de fin de l'application. L'option « Transmettre sur capteur CA » doit être activée dans la gestion du matériel uniquement si votre configuration active l'utilise.

### 3.3.12.6 Utilisation d'une application de lumière colorée et d'une vue VR

Lors d'une diffusion activée, BCS peut afficher les couleurs détectées et, avec le matériel approprié, les restituer sous forme de lumière colorée (par exemple, un capteur CA ou un tweaklite). L'affichage en réalité virtuelle alterne entre les résultats et la visualisation de la lumière colorée. Avant utilisation, vérifiez que l'écran et/ou la source lumineuse sont adaptés à l'application prévue.

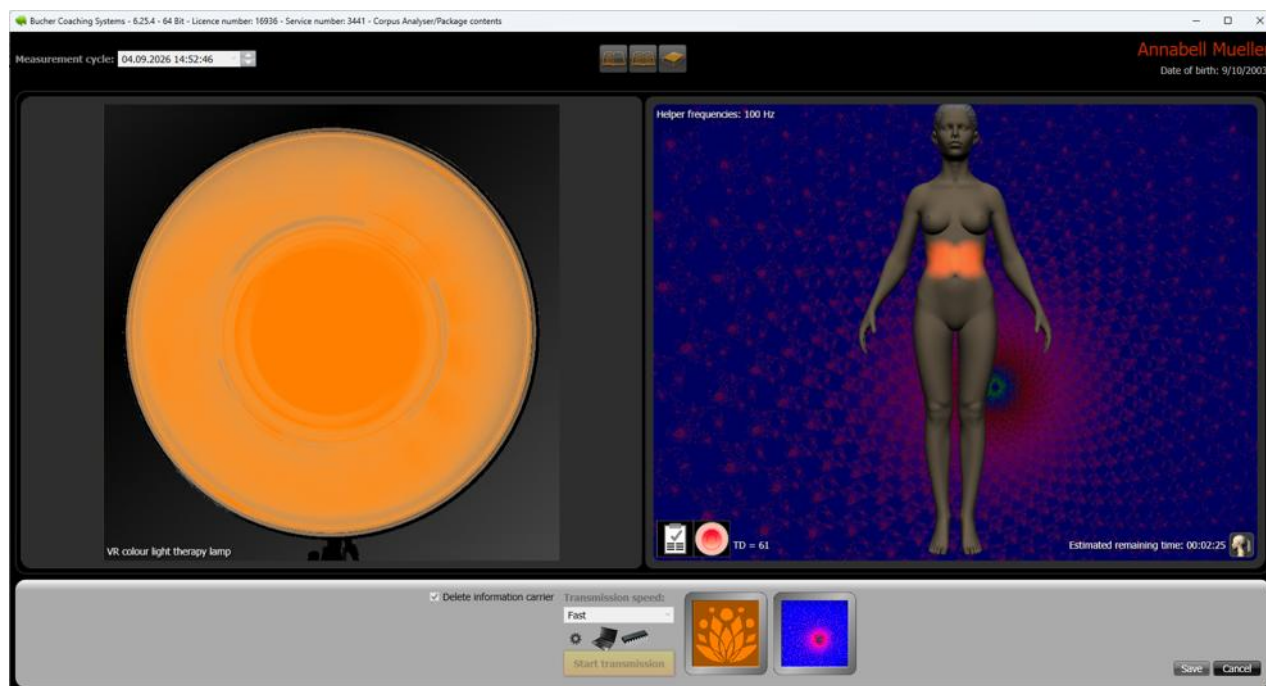

Progrès de l'harmonisation des CA

### 3.3.12.7 Utiliser l'harmonisation acoustique

L'activation des bols chantants ou d'autres options musicales peut fournir un accompagnement acoustique à la séance. Réglez un volume approprié et informez-en le client. Si l'option n'est pas visible, elle est soit non installée, soit désactivée.

### 3.3.12.8 Afficher la fractale et envoyer les couleurs fractales

Lorsque la fonction fractale est activée, la fenêtre de transmission affiche la fractale associée à l'analyse. Les couleurs de la fractale sont visibles dans la vue détaillée et, le cas échéant, peuvent être incluses dans la transmission. Vérifiez si la fractale utilisée est la fractale initiale ou une fractale nouvellement générée.

### 3.3.12.9 Démarrer, surveiller et annuler une diffusion

Ne lancez l'enregistrement qu'après avoir vérifié tous les paramètres. BCS affiche la progression, la couleur et la durée restante. Cliquez sur « Annuler » pour interrompre le processus. Après une interruption, vérifiez si l'enregistrement a été sauvegardé et, le cas échéant, dans quel état.

### 3.3.12.10 Enregistrer les modifications et vérifier l'état de la transmission

Enregistrez les modifications apportées au focus ou à d'autres paramètres modifiables à l'aide du bouton Enregistrer. Une analyse réussie est horodatée. Vérifiez ce statut dans l'aperçu de l'analyse avant de documenter le processus ou de générer un rapport.

## 3.3.13 Création de rapports et évaluation de l'IA dans Corpus Analyser

Pressure selection

Choose what you want to print for species Human.

☒ Patient printout  
☐ Therapist printout

☐ My selection  
Select all  
Select none

**Selection of group focus**

☐ Groups  
☐ Blood values  
☐ Digestion  
☐ Nutrition  
☐ Organs  
☐ Chakras

☐ Acids  
☐ Stress  
☐ Diabetes  
☐ Chronic fatigue  
☐ Depression

☒ M1

**Filter for evaluation colour**

☒ Green  
☒ Yellow  
☒ Orange  
☒ Red

☐ Info text  
☐ Info text

**Select comparison values**

Current scan  
Progress scan 9/4/2026 2:52:46 PM

Comparison scan  
Initial measurement 04.09.2026 14:47:14

**Associated parameter groups**

☒ Blood Lipids & Cholesterol  
☐ Blood Sugar  
☐ Bone Disease  
☐ Bone Growth  
☐ Bone Mineral Density  
☒ Cardiovascular  
☐ Colon  
☐ Cranial Nerves  
☐ Gallbladder  
☐ Gastrointestinal System  
☐ Kidneys  
☐ Liver  
☐ Lungs  
☐ Musculoskeletal Disorders  
☐ Pancreas  
☐ Thyroid  
☐ Vascular Hemodynamic  
☐ Amino Acids  
☐ Coenzymes  
☐ Fatty Acids  
☐ Lecithin  
☐ Trace Elements  
☐ Vitamins  
☐ Connective Tissue

☐ Endocrine system  
☐ Eyes  
☐ Immune System  
☐ Meridians  
☐ Skin  
☐ Allergies  
☐ General physical condition  
☐ Heavy Metals  
☐ Homotoxicology  
☐ Obesity  
☐ Scars  
☐ Male Hormones  
☐ Male Sexual Function  
☐ Prostate  
☐ Sperm and Semen  
☐ ADHD  
☐ Brainpower  
☐ Chakras  
☐ Human Consciousness Level  
☐ Female Hormones  
☐ Menstrual Cycles  
☐ Breasts  
☐ Gynaecology

**Additional printouts**

☒ Focus  
☒ Fractal graphic

**AI reports**

☒ Evaluation of individual scan results  
☐ Therapeutic evaluation  
☐ Recommendations for the client  
☐ Affirmations 4-week plan  
☐ Fractal interpretation  
☐ Individuell 1  
☐ Individuell 2

Available parameters: 3

Continue Save as default Cancel

Sélection du contenu d'un rapport CA

### 3.3.13.1 Ouvrir la sélection des rapports

Dans la section Envoyer/Rapports, sélectionnez l'analyse CA souhaitée et ouvrez la fonction d'impression ou de rapport à l'aide du petit bouton en forme de loupe. La sélection affiche le contenu du rapport disponible pour l'analyse, la licence et les textes AI enregistrés.

### **3.3.13.2 Profils de rapport « Impression pour le patient » et « Impression pour le thérapeute »**

Dans la fenêtre « Sélection d'impression », choisissez le profil « Impression patient » pour un rapport clair et concis destiné au client, ou « Impression thérapeute » pour un rapport interne plus détaillé. Vous pouvez sélectionner séparément le contenu d'impression et d'IA pour chaque profil. Cliquez sur « Enregistrer comme valeur par défaut » pour que BCS réutilise la sélection actuelle pour ce profil lors de votre prochaine utilisation. Passez ensuite au second profil et enregistrez sa sélection de la même manière.

### **3.3.13.3 Définition du focus, sélection personnalisée ou filtre de focus**

Indiquez si vous souhaitez utiliser une sélection prédéfinie, une sélection personnalisée ou un filtre de sélection. La sélection détermine les paramètres inclus dans le rapport. Prévisualisez le résultat.

### **3.3.13.4 Sélection des groupes de paramètres et des couleurs d'évaluation**

Activez les groupes requis et au moins une couleur d'évaluation. Un filtrage trop restrictif peut masquer des liens importants ; une sélection trop large peut allonger inutilement le rapport. Alignez le périmètre et le public cible.

### **3.3.13.5 Sélection des valeurs de comparaison et analyse comparative**

Pour les scans d'évolution, vous pouvez sélectionner des valeurs comparatives et un scan antérieur approprié dans le même cycle. Vérifiez la date et l'appartenance au bon suivi. N'utilisez la comparaison que si elle rend l'évolution plus compréhensible.

### **3.3.13.6 Inclure le focus, les fractales et d'autres éléments du rapport**


Selon le type d'analyse et la licence, le focus, les fractales et d'autres informations supplémentaires peuvent être activées. Le contenu inexistant est désactivé. N'incluez que les éléments compréhensibles et techniquement pertinents pour le destinataire.

### **3.3.13.7 Inclure les évaluations de l'IA dans le rapport**

Les évaluations IA enregistrées et disponibles peuvent être sélectionnées individuellement. Chaque texte est lu intégralement avant l'exportation. Supprimez le contenu IA non examiné ou ne correspondant pas au type de rapport sélectionné.

### 3.3.13.8 Vérifiez le rapport, imprimez-le et enregistrez-le au format PDF.

Ouvrez l'aperçu avant impression et vérifiez le client, la date, le focus, le nombre de pages, la sélection et le texte AI. Sélectionnez ensuite l'imprimante ou le format de sortie PDF. Si vous distribuez les rapports PDF par voie électronique, utilisez la fonction de chiffrement de BCS. Ainsi, les fichiers PDF ne pourront être ouverts qu'avec le mot de passe correct.

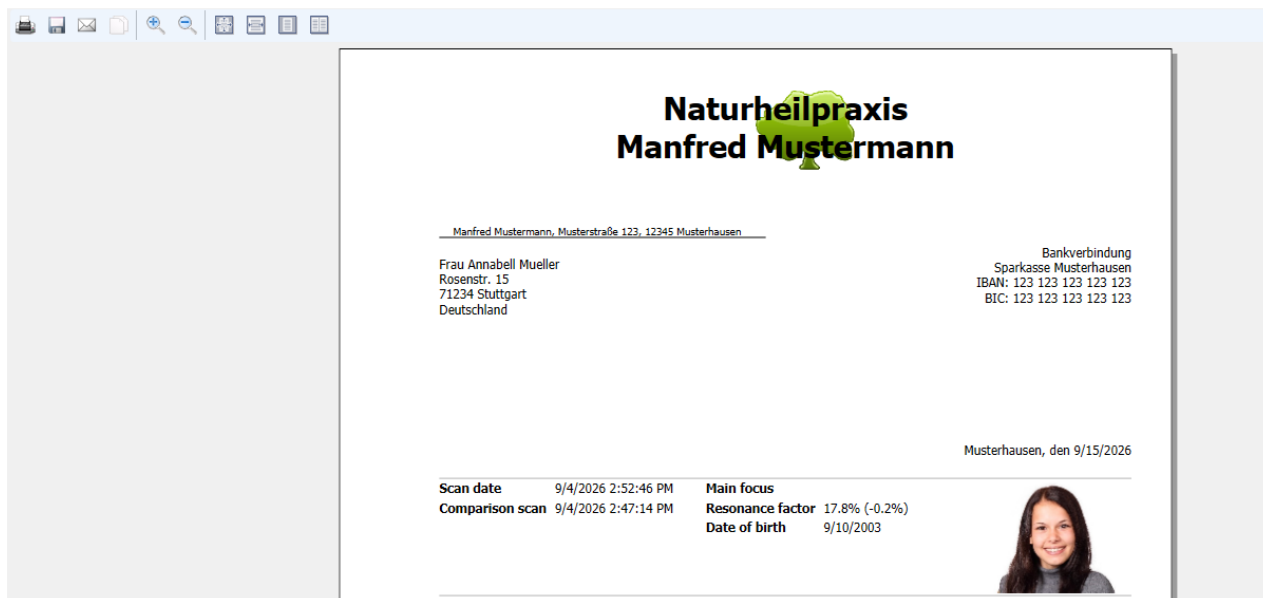

Examiner et générer le rapport CA


### 3.3.13.9 Envoyer un rapport par courriel

Une fois l'envoi par courriel configuré, le rapport peut être envoyé directement depuis la sortie. Vérifiez l'adresse du destinataire, son consentement, les pièces jointes et le texte du message. Pour les données sensibles, utilisez un chiffrement protégé par mot de passe et n'envoyez pas le rapport à une adresse non vérifiée.

### 3.3.13.10 Utilisation de l'évaluation par IA

L'intelligence artificielle étant activée, les données de Corpus Analyser peuvent être traitées pour diverses évaluations. Les domaines d'IA visibles dépendent de la configuration et de la licence.

Les textes générés par l'IA sont des ébauches et doivent être vérifiés quant à leur exactitude, leur qualité linguistique et leur conformité à la réglementation sur la protection des données. Ils ne doivent pas interpréter à tort les indicateurs de réponse symboliques comme des diagnostics, des affirmations factuelles ou des promesses de guérison. Des instructions détaillées, notamment sur la personnalisation des invites et la sauvegarde/le chargement des ensembles d'invites, sont disponibles au chapitre 4.1, « Évaluation de l'IA : Utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre du BCS ».

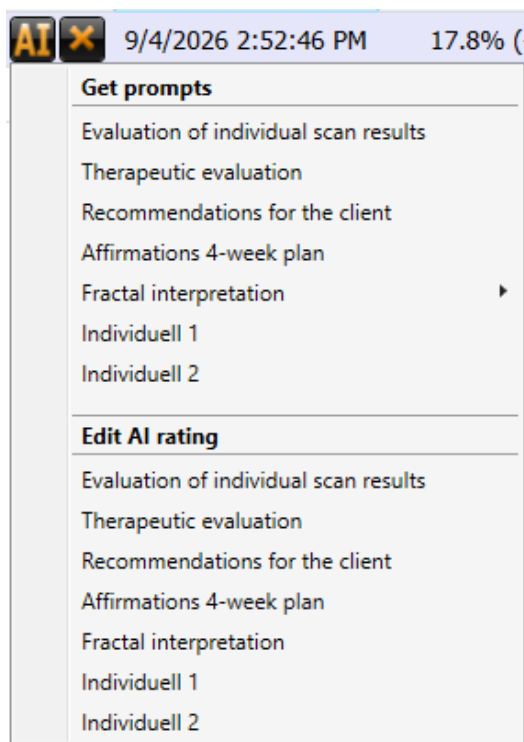

Préparation d'un scan CA pour l'évaluation de l'IA

### 3.3.14 Création, échange et utilisation des filtres de focus

Ces filtres sont généralement utilisés sur les animaux. Différentes espèces nécessitent différents ensembles de paramètres, dont certains ne peuvent pas être utilisés chez l'homme, par exemple.

#### 3.3.14.1 Création d'un filtre de focus personnalisé et sélection des paramètres

Ouvrez le Gestionnaire de filtres Focus et sélectionnez Nouveau filtre. Attribuez-lui un nom unique, choisissez l'espèce appropriée et ajoutez une brève description. Sélectionnez ensuite les paramètres que le filtre doit inclure et enregistrez votre sélection.

#### 3.3.14.2 Modification ou suppression des filtres de focus

Les filtres personnalisés peuvent être ouverts et modifiés (nom, description et paramètres). Ne supprimez un filtre que s'il n'est plus nécessaire pour les paramètres d'impression enregistrés. La suppression est irréversible et ne peut être annulée via la sélection du rapport.

### **3.3.14.3 Exportation et importation des filtres de focus sous forme de fichiers JSON**

Vous pouvez exporter votre filtre de focus personnalisé au format JSON. Lors de l'importation, sélectionnez un fichier approprié, puis vérifiez le nom, l'espèce et les paramètres. N'importez que des fichiers provenant de sources fiables.

### **3.3.14.4 Enregistrement en ligne des filtres de focus et paramétrage de leur visibilité**

Si la fonction en ligne est disponible, vous pouvez enregistrer votre propre filtre sur le serveur Bucher. Indiquez le nom du créateur et une description, et précisez si le filtre doit être visible uniquement par vous ou par les autres utilisateurs. Ne publiez aucune donnée personnelle dans le nom ni dans la description.

### **3.3.14.5 Rechercher, importer ou supprimer des filtres de focus en ligne**

La liste en ligne peut être triée et consultée par nom, auteur ou description. Importez un filtre pour créer une copie locale. Selon les autorisations et le statut, les filtres en ligne personnalisés peuvent être supprimés ou leur visibilité modifiée.

### **3.3.14.6 Application de filtres de focus dans la vue des résultats et le rapport**

Dans la sélection des résultats ou du rapport, choisissez le filtre de focus, puis le filtre souhaité. BCS n'affichera ou n'imprimera que les paramètres pertinents dans les groupes activés et les couleurs de notation. Vérifiez l'aperçu avant d'enregistrer définitivement le filtre dans les options d'impression.

## **3.3.15 Gestion des analyses et des résultats**

### **3.3.15.1 Ouverture des historiques enregistrés et des cycles d'analyse**

Dans la section Envoi/Rapports, vous trouverez les analyses CA enregistrées pour le client sélectionné. Sélectionnez l'historique approprié et naviguez entre les analyses à l'aide du cycle d'analyse. La date, le point de mire et l'heure d'analyse facilitent l'attribution. La liste des analyses est triée par ordre chronologique décroissant : l'analyse la plus récente apparaît toujours en haut.

### **3.3.15.2 Enregistrement du focus et des résultats modifiés**

Les modifications apportées aux paramètres enregistrés ne sont pas toujours appliquées automatiquement. Dans la fenêtre de résultats, utilisez le bouton Enregistrer et répondez attentivement aux invites lors du changement de cycle d'analyse. L'annulation conserve la sélection actuelle.

### **3.3.15.3 Exportation et importation des clients, y compris les données de numérisation**

L'exportation d'un client peut inclure ses scans du CA associées. Utilisez la fonction de gestion centralisée des clients et, après l'importation, vérifiez que toutes les analyses sont bien attribuées au client concerné. Pour plus d'informations, consultez le chapitre général sur l'exportation et l'importation.

### **3.3.15.4 Suppression des analyses ou des historiques et examen des conséquences**

Ne supprimez les analyses qu'après avoir soigneusement vérifié le client, la date et l'affiliation. La suppression d'une analyse initiale entraînera automatiquement la suppression de toutes les analyses d'historique associées. Créez une sauvegarde récente de vos données avant toute opération de nettoyage importante.

### **3.3.15.5 Inclure les données CA dans la sauvegarde générale des données**

Les analyses CA sont sauvegardées avec les autres données BCS. Vérifiez régulièrement que les sauvegardes automatiques et manuelles ont bien été effectuées et que l'emplacement de sauvegarde est accessible. La restauration complète est décrite dans le chapitre général sur la sauvegarde des données.

## **3.3.16 Erreurs courantes et solutions**

### **3.3.16.1 Les informations obligatoires fournies par le client sont manquantes ou invraisemblables.**

Vérifiez la date de naissance, le sexe, la langue, la taille et le poids, et assurez-vous que ces informations sont correctement attribuées au client. Corrigez les informations dans le système de gestion des clients, puis réessayez la numérisation.

### **3.3.16.2 Le scan d'évolution souhaité n'est pas disponible**

un scan d'évolution nécessite une analyse préalable appropriée. Vérifiez que le bon client est sélectionné et qu'au moins une analyse initiale a été effectuée.

### **3.3.16.3 La numérisation de sélection de couleur en ligne n'est pas proposée.**

Cette option n'apparaît que si une numérisation de sélection des couleurs en ligne entièrement transmise existe pour le client sélectionné. Vérifiez votre connexion Internet, l'attribution du client et l'état de la sélection des couleurs. Cette fonctionnalité est destinée aux clients absents.

### **3.3.16.4 L'analyse ne démarre pas, est interrompue ou n'est pas enregistrée.**

Vérifiez le capteur, la sélection du matériel, le focus et les informations requises. Prévoyez un délai d'au moins 24 heures entre les numérisations. Une numérisation interrompue ne sera pas enregistrée comme complète ; relancez-la après avoir résolu le problème.

### **3.3.16.5 Résultats, groupes ou paramètres manquants**

Commencez par ouvrir tous les groupes et réinitialiser la sélection ou les filtres. Vérifiez les couleurs d'évaluation, les points de focus et les filtres de focus actifs. Les entrées manquantes sont souvent simplement masquées et non supprimées du résultat de l'analyse.

### **3.3.16.6 L'harmonisation ou la transmission n'est pas disponible**

L'harmonisation CA doit être activée séparément. Sans licence, les fenêtres de transmission, l'harmonisation automatique et les options associées sont indisponibles. Si la fonction est mentionnée dans la licence, vérifiez le capteur, le matériel de transmission et l'option de transmission activée dans les paramètres de gestion du matériel.

### **3.3.16.7 Impossible de créer un rapport, un PDF ou un courriel.**

Vérifiez qu'au moins un élément du rapport est sélectionné, qu'une imprimante ou un format PDF est disponible et que le chemin d'accès au rapport est modifiable. Pour la messagerie électronique, consultez les paramètres de votre compte dans Paramètres / Paramètres de messagerie.

### **3.3.16.8 L'invite IA, le presse-papiers ou l'évaluation IA ne fonctionnent pas.**

Vérifiez que l'IA est activée, que l'invite est activée et que l'analyse est sélectionnée. Si le presse-papiers Windows a été temporairement bloqué, répétez la copie. Collez votre réponse uniquement dans le champ d'évaluation associé à l'invite et enregistrez-la après la vérification.

Actuellement, il n'est pas possible de copier simultanément le texte et l'image de l'invite dans l'IA lors de l'acceptation de l'invite pour l'interprétation fractale. Dans ce cas, vous devez transférer le texte et l'image de la fractale à l'IA en deux étapes via le presse-papiers.

### **3.3.16.9 Le filtre Focus ne peut pas être enregistré, chargé ou importé.**

Vérifiez le nom du filtre, l'espèce et les paramètres sélectionnés. Une connexion Internet est requise pour les fonctions en ligne. Lors de l'importation d'un fichier JSON, utilisez un fichier de filtre valide et non modifié. Une copie locale du filtre en ligne externe sera créée lors de l'importation.

## **3.3.17 FAQ concernant Corpus Analyser**

### **Comment BCS décide-t-elle entre un examen initial et un examen de suivi ?**

Le système BCS tient compte des antécédents d'examens d'imagerie. Si aucun examen initial approprié n'est disponible, un examen initial est proposé ; par la suite, BCS suggère le prochain examen disponible.

### **Pourquoi ne constate-t-on aucune harmonisation ?**

L'harmonisation est une fonction CA qui doit être activée séparément. Sans activation, elle est inutilisable et les commandes seront masquées ou désactivées.

### **Quand un scan de sélection de couleurs en ligne est-il utile ?**

Si le client ne peut pas être présent lors du scan, il peut sélectionner en ligne, depuis son domicile, les couleurs, formes et nuances qu'il préfère ou non. Les données transmises serviront ensuite de base au scan CA.

### **À quelle fréquence peut-on réaliser un examen CA ?**

Un intervalle minimal de 24 heures doit être respecté entre deux examens. Des intervalles plus courts doivent rester exceptionnels et justifiés par un professionnel de santé.

### **Les analyses terminées sont-elles enregistrées automatiquement ?**

Oui. Une analyse complète est automatiquement attribuée au client et à l'historique correspondant. Une analyse interrompue n'est pas considérée comme complète.

### **Une valeur en pourcentage peut-elle être considérée comme une valeur de laboratoire ?**

Non. Les pourcentages CA décrivent la force et la direction au sein du modèle utilisé. Ils ne représentent ni une quantité, ni une concentration, ni des valeurs de laboratoire.

### **Puis-je inclure des textes générés par l'IA dans le rapport sans les vérifier ?**

Non. Chaque réponse de l'IA doit être vérifiée quant à son exactitude technique, sa conformité linguistique et sa conformité à la réglementation sur la protection des données, et modifiée si nécessaire. La responsabilité incombe toujours à l'utilisateur.

### **Où puis-je sauvegarder un client ainsi que ses analyses de conformité ?**

Utilisez la fonction centrale d'exportation et de sauvegarde des données du système de gestion des clients. Vous trouverez des instructions détaillées dans le chapitre correspondant du manuel général.

## 3.4 Bucher TAO Medical

### 3.4.1 Aperçu et utilisation prévue

#### 3.4.1.1 Objet et champ d'application

Bucher TAO Medical est un module du système de coaching Bucher. Il associe le Yi Jing, en tant que modèle d'interprétation traditionnel, à des informations en résonance interne au programme concernant les points d'acupuncture, les problématiques psychologiques et physiques, les techniques de questionnement, la nutrition, les remèdes et d'autres domaines. Les résultats obtenus favorisent une approche structurée et un dialogue constructif avec le client.

Le processus habituel comprend la sélection du client, la définition du point de focalisation, un scan initial ou de suivi, l'analyse de l'hexagramme déterminé et de son contenu associé, la modification optionnelle des listes de points d'acupuncture et de programmes, la transmission d'énergie et la génération d'un rapport. Selon le niveau d'activation, des fonctions supplémentaires telles que l'analyse fractale, l'équilibrage des méridiens, le mode automatique, la luminothérapie, la musique et des fonctions d'intelligence artificielle peuvent être disponibles.

#### 3.4.1.2 Aperçu des principales fonctions

- Numérisations initiales et suivantes avec suggestion automatique du type de numérisation approprié.
- Détermination du trigramme inférieur et supérieur, des lignes variables et de l'hexagramme formé à partir de ceux-ci.
- Représentation de plusieurs perspectives internes du Yi Jing avec un hexagramme recommandé.
- Informations sur la résonance des points d'acupuncture, notamment leur origine, le côté du corps concerné et leurs propriétés régulatrices.
- Des textes pertinents sur la psyché, le physique et les techniques d'interrogation, ainsi que des informations complémentaires sur la nutrition et les remèdes.
- Inclusion optionnelle, manuelle ou automatique, des programmes.
- Images et vidéos fractales optionnelles comme support visuel pour le travail et les échanges.
- Transmission d'énergie via le matériel configuré, ainsi qu'un accompagnement acoustique et lumineux optionnel.
- Rapports, sortie PDF, envoi par e-mail et, si activés, évaluations par IA.
- Mode automatique optionnel pour les analyses, les envois et les rapports récurrents.

#### 3.4.1.3 Fonctions dépendantes de la licence et de la configuration

Les fonctions disponibles dépendent de la version du BCS, des modules complémentaires achetés et du matériel utilisé. Cela concerne notamment le balayage des programmes, l'analyse fractale, l'astrologie chinoise avec Lo Shu, l'équilibrage des méridiens, le mode automatique, les applications de couleur et de lumière, la musique et l'intelligence artificielle. Les fonctions non activées sont masquées ou inutilisables.

#### 3.4.1.4 Différenciation par rapport aux diagnostics et traitements médicaux

TAO Medical utilise un modèle énergétique et symbolique. Les hexagrammes, les lignes variables, les indicateurs de résonance, les attributions des points d'acupuncture et les textes décrivant la signification et les remèdes ne constituent ni des valeurs de laboratoire, ni des observations

anatomiques, ni des diagnostics médicaux. Ils ne doivent en aucun cas servir à confirmer ou à infirmer l'existence d'une maladie.

Ce système ne remplace pas un examen médical ni un traitement médical, psychothérapeutique ou d'acupuncture administré par un professionnel qualifié. En cas de symptômes aigus ou de risques pour la santé, il convient de consulter un professionnel de santé compétent. L'utilisateur demeure responsable du choix, de la classification, de la communication et de l'application du système.

## **3.4.2 Modèle technique de fonctionnement**

### **3.4.2.1 La médecine traditionnelle chinoise comme cadre de référence**

La médecine traditionnelle chinoise (MTC) englobe diverses écoles de pensée et de pratique développées au fil de l'histoire. Parmi ses composantes les plus connues figurent l'acupuncture, les thérapies par le mouvement et la phytothérapie chinoise. TAO Medical utilise certains termes et modèles de la MTC dans une perspective énergétique et symbolique. Ceci ne constitue pas une évaluation scientifique ou médicale des résultats d'examen.

### **3.4.2.2 Le Yi Jing, les trigrammes et les hexagrammes**

Le Yi Jing, aussi appelé Livre des Mutations, décrit le changement à l'aide de huit symboles fondamentaux : les trigrammes. Un trigramme est composé de trois lignes, continues ou discontinues. Deux trigrammes forment un hexagramme à six lignes ; on obtient ainsi 64 hexagrammes de base. Certaines lignes peuvent être marquées comme mutables et indiquer une transition vers une perspective d'interprétation différente.

Lors de l'analyse, TAO Medical identifie un trigramme inférieur et un trigramme supérieur, les lignes variables et l'hexagramme résultant. Les textes et les symboles graphiques servent de supports structurés à la réflexion et à la discussion. Ils doivent être liés à l'objectif défini et examinés avec le client.

### **3.4.2.3 Cinq perspectives interprétatives internes au système**

Lors de l'analyse, BCS peut afficher cinq perspectives hexagrammes interconnectées : diagnostic, pronostic, cause, partenaire et complément. Le programme sélectionne l'une de ces perspectives comme suggestion. Cette sélection tient compte, entre autres, de la configuration des lignes mutables.

Le terme « diagnostic » désigne ici uniquement une appellation historique propre à l'interface du programme. Il ne s'agit en aucun cas d'un diagnostic médical. De même, les termes « pronostic » et « cause » relèvent de perspectives symboliques du Yi Jing et ne doivent pas être présentés comme une prédiction confirmée ou une conclusion causale.


### **3.4.2.4 Points d'acupuncture dans le modèle de travail du TAO**

TAO Medical peut attribuer les points d'acupuncture à partir de diverses sources, telles que les résultats du Yi Jing, des programmes sélectionnés ou des calculs optionnels de Lo Shu. Les points ayant plusieurs applications sont combinés ; par conséquent, l'information relative à la source peut indiquer plusieurs sources.

La liste de points est une sélection interne d'informations énergétiques effectuée par un programme. Les modèles du corps et de l'oreille facilitent l'orientation et la sélection manuelle ; il ne faut pas en déduire une indication médicale.

L'utilisation de ce programme ne vous autorise pas à insérer des aiguilles, sauf si vous avez appris cette procédure lors de votre formation et que vous y êtes autorisé(e). Vous pouvez toutefois masser les points d'acupuncture pour stimuler énergétiquement leur fonction (acupression).

### 3.4.3 Prérequis et paramètres de base

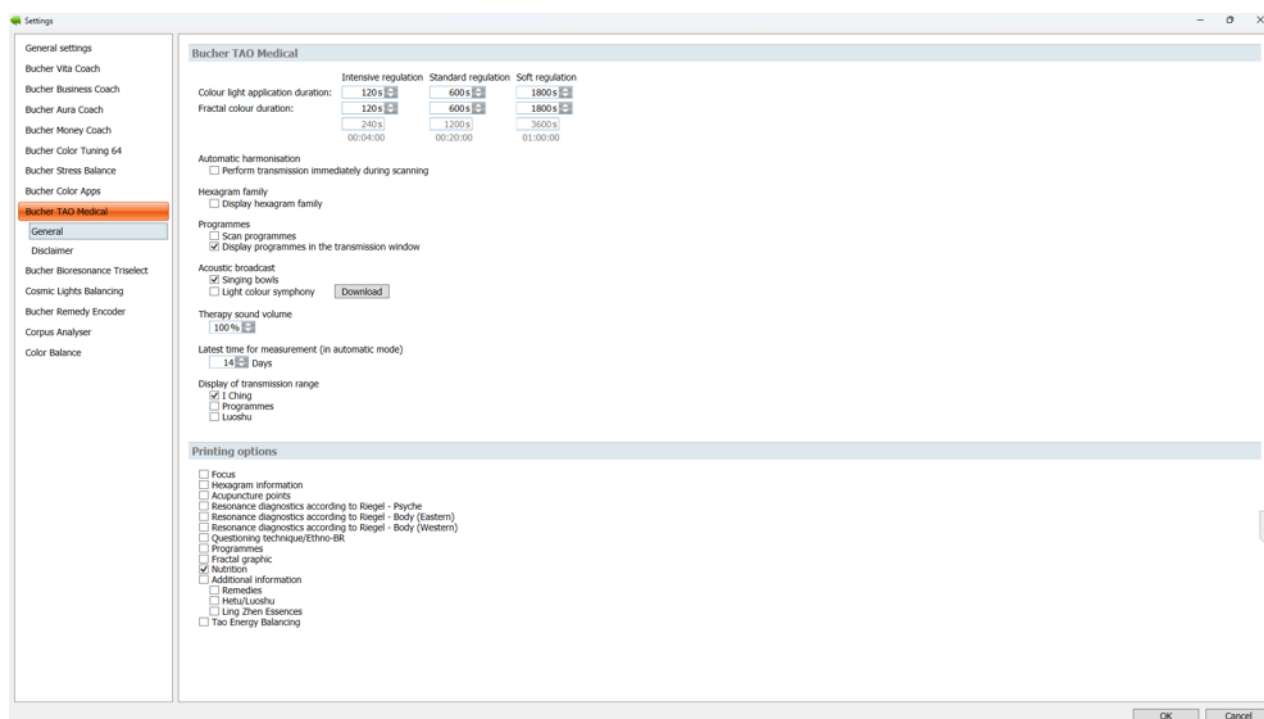

Paramètres de base pour Bucher TAO Medical

#### 3.4.3.1 Préparation du produit, du client et du matériel

Prérequis : une version de BCS installée et activée avec l'activation pour Bucher TAO Medical. Sélectionnez TAO Medical dans la barre de produits et vérifiez le client actuel. Avant de commencer, vérifiez le matériel destiné à la numérisation et à l'envoi.

Pour la connexion entre le client et le système, utilisez le terme neutre « interface esprit-matière ». Les interfaces et options disponibles dépendent de votre configuration BCS.

#### 3.4.3.2 Ouvrir les paramètres TAO

Ouvrez les paramètres BCS et sélectionnez la section TAO Medical. Vous pourrez alors définir, selon vos droits d'accès, les intervalles de temps, les paramètres de numérisation et de transmission, les fonctions du programme, l'accompagnement audio, le contenu du rapport et d'autres options TAO. Ensuite, testez les modifications apportées au dossier d'un patient avant de les intégrer à votre flux de travail habituel.

#### 3.4.3.3 Définir l'heure d'une nouvelle analyse initiale

Dans les paramètres TAO, vous pouvez spécifier l'intervalle après lequel BCS effectuera une nouvelle analyse initiale dans sa séquence d'analyse automatique ou suggérée. La valeur réglable est comprise entre 1 et 365 jours ; si aucun paramètre personnalisé n'est enregistré, le programme utilise une valeur par défaut. BCS tient également compte de l'historique des analyses et du mode TAO actuellement activé.

#### 3.4.3.4 Programmes prédéfinis et étendue de diffusion

Si l'analyse des programmes est activée, la recherche automatique peut être définie par défaut. Pour le programme, vous pouvez spécifier si les points d'acupuncture du Yi Jing, les programmes, le Lo Shu ou une combinaison de ces éléments sont inclus. Vérifiez cette sélection avant la première utilisation et de nouveau en cas de modification de la licence ou du mode d'emploi.


### 3.4.3.5 Réglage de l'accompagnement acoustique et lumineux

Selon les paramètres d'activation et l'installation, des bols chantants ou un éclairage coloré peuvent être activés. Vérifiez le volume, le périphérique de sortie et l'effet sur la durée de la transmission. Une option non visible est généralement désactivée ou indisponible dans la configuration actuelle.

### 3.4.3.6 Préparation des profils de rapport

TAO Medical utilise les profils de rapport « Impression patient » et « Impression thérapeute », enregistrables séparément, pour la sélection d'impression. Choisissez le contenu souhaité pour chaque profil et enregistrez votre sélection avec « Enregistrer comme valeur par défaut ». Lors de votre prochaine utilisation de la sélection d'impression, la sélection enregistrée pour le profil actif sera appliquée.

## 3.4.4 Préparer les données du client et le focus

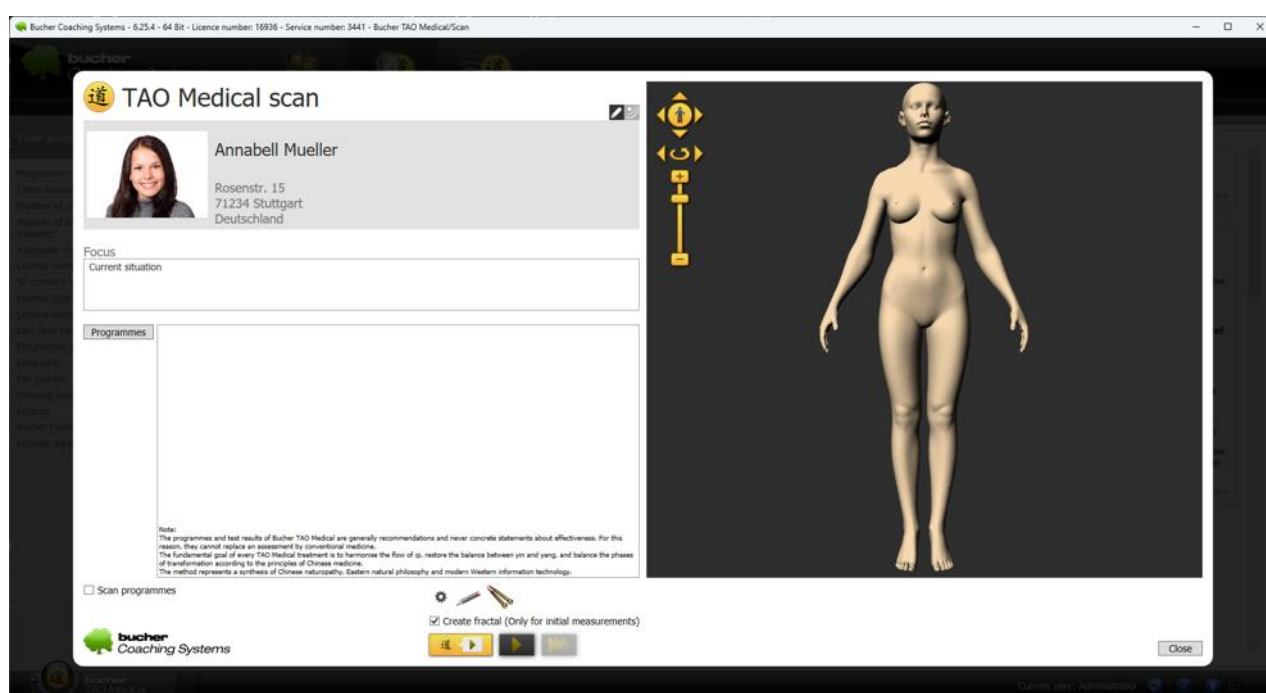

Préparation du client, orientation et programmes

### 3.4.4.1 Sélectionner le client et vérifier les données

Ouvrez la section « Gestion des clients » et sélectionnez le client concerné. Dans la fenêtre TAO, vérifiez le nom et la date de naissance. Pour les calculs astrologiques chinois optionnels, l'heure de naissance et le sexe peuvent également être requis. Des informations incomplètes ou incorrectes auront une incidence sur ces calculs.

### 3.4.4.2 Formuler le focus

Le champ « Sujet » décrit la question ou le thème de l'examen. Formulez-le brièvement, de manière neutre et sans idées préconçues. Évitez les diagnostics médicaux, les promesses de guérison, les instructions suggestives et les questions qui n'appellent qu'une réponse souhaitée. Dans ce champ, indiquez également l'objectif que le client souhaite atteindre.


### 3.4.4.3 Sélection manuelle des programmes

Selon les paramètres, les programmes peuvent être sélectionnés manuellement et ajoutés à la liste avant la numérisation. N'activez que les programmes correspondant à votre objectif et à votre flux de travail. Les programmes sélectionnés manuellement restent distincts des indicateurs de résonance déterminés automatiquement.

### 3.4.4.4 Utilisation de la numérisation de sélection des couleurs en ligne

Un scan de sélection de couleurs en ligne est particulièrement utile lorsque le client ne peut pas participer au scan en personne, par exemple en raison de la distance ou de l'impossibilité d'un rendez-vous physique. Le client sélectionne en ligne, depuis son domicile, les couleurs, formes et nuances qu'il préfère et celles qu'il n'aime pas. Après transmission à BCS, un ensemble complet de données peut servir de base supplémentaire au scan TAO.

## 3.4.5 Effectuer un scan TAO

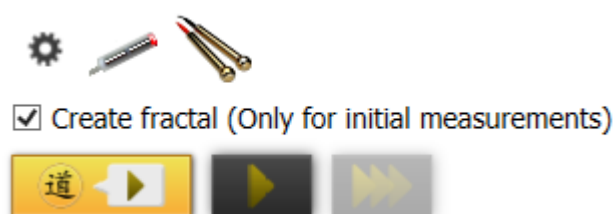

Préparez et lancez le scan TAO

### 3.4.5.1 Différencier l'examen initial et le scan de suivi

Une première analyse lance un nouveau cycle. Les analyses suivantes s'inscrivent dans un cycle existant et intègrent les données des analyses précédentes. BCS met en évidence le type d'analyse suggéré en fonction de l'historique et des paramètres.

Outre la suggestion automatique, des boutons distincts pour les examens initiaux et de suivi peuvent être disponibles. Ne vous écartez de la recommandation que de manière intentionnelle. Selon le flux de travail activé et l'historique existant, un scan de suivi peut ne pas être disponible ou un nouvel examen initial peut être nécessaire.

### 3.4.5.2 Vérifiez les options avant de commencer

- Vérifier le nom du client, sa date de naissance et son domaine d'expertise.
- Vérifiez l'interface esprit-matière active et les propriétés de l'analyse.
- Si nécessaire, activez une numérisation de sélection des couleurs en ligne entièrement transférée.
- Vérifiez les programmes sélectionnés manuellement et, si cette option est activée, la recherche automatique de programmes.
- La création de fractales est activée automatiquement lorsque la fonction est activée. Vous pouvez toutefois la désactiver à tout moment afin qu'aucune fractale ne soit détectée lors de l'analyse.
- Utilisez ensuite le bouton suggéré pour une première analyse ou une analyse ultérieure.

### 3.4.5.3 Observer et annuler le processus de numérisation


Durant ce processus, BCS affichera progressivement les trigrammes inférieur et supérieur, les lignes variables et l'hexagramme résultant. Veuillez laisser le processus se terminer complètement.

N'interrompez-le qu'en cas de nécessité ; un processus interrompu ne constitue pas une analyse complète. Toutes les données collectées jusqu'à ce point seront supprimées et non enregistrées.

### 3.4.5.4 Enregistrer l'analyse

Un scan complet est enregistré avec la date, le type de scan, le point focal, le résultat du Yi Jing, les points d'acupuncture associés, les programmes et autres informations de résonance. Un premier scan se voit attribuer un nouveau cycle ; les scans suivants sont ajoutés au cycle existant. Une fois le scan terminé, vérifiez que le résultat a bien été enregistré pour le client concerné.

### 3.4.6 Comprendre le résultat du Yi Jing

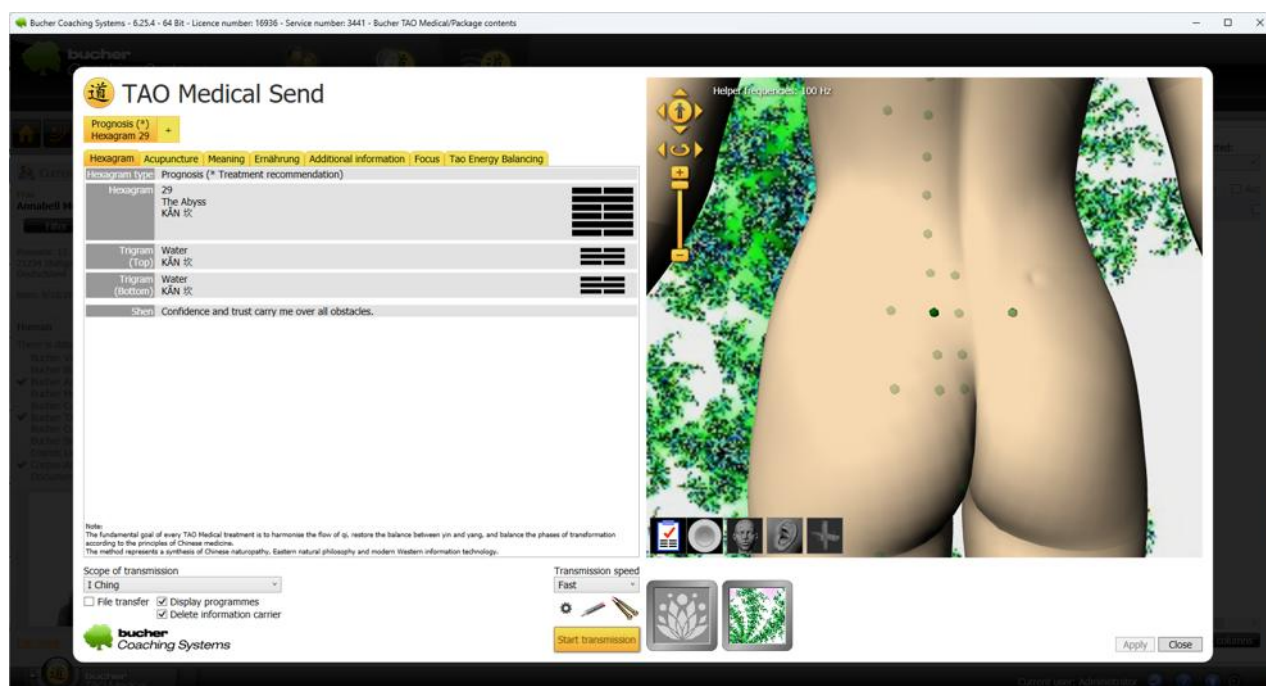

Résultat du Yi Jing avec l'hexagramme

#### 3.4.6.1 Aperçu de l'hexagramme

L'affichage de l'hexagramme présente le numéro et le nom de l'hexagramme, les trigrammes supérieurs et inférieurs, la structure des lignes, les lignes variables et les autres textes associés. Selon le contenu, les désignations Shen ou les formules peuvent également être affichées. Lors de la consultation des données, veuillez toujours vous référer à la zone de focus enregistrée et à l'heure de balayage sélectionnée.


#### 3.4.6.2 Hexagramme recommandé et perspectives complémentaires

BCS indique l'une des cinq perspectives (diagnostic, pronostic, cause, partenaire et complément) comme recommandation. Vous pouvez également consulter et comparer les autres perspectives. Cette recommandation constitue une aide à la sélection interne au programme et ne détermine pas quelle interprétation est objectivement correcte.

#### 3.4.6.3 Lignes variables

Les lignes variables (rouges ou bleues) du modèle du Yi Jing marquent une transition ou une dynamique. Leur nombre et leur position influencent la perspective suggérée par le programme. Utilisez les textes d'accompagnement comme des pistes de réflexion ou de discussion, et non comme une prédiction fiable.

## 3.4.7 Utilisation de la liste des points d'acupuncture

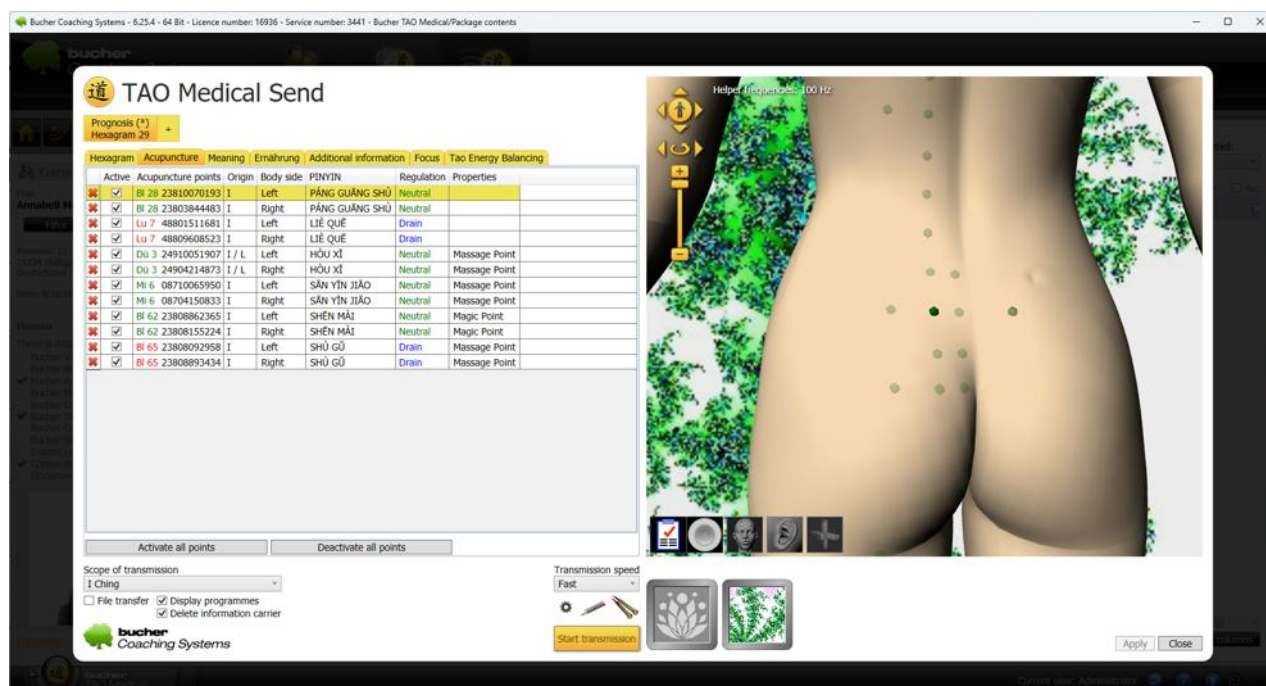

Utilisez la liste des points d'acupuncture

### 3.4.7.1 Lire les informations sur les points

La liste peut afficher, entre autres, le nom du point, son code en médecine traditionnelle chinoise (MTC), son origine, le côté du corps concerné, son nom en pinyin, sa régulation et ses propriétés. Les colonnes visibles dépendent de l'affichage et de la configuration. L'origine indique si le point provient du Yi Jing, des programmes, du Lo Shu ou de sources multiples. Cliquer sur un point dans la liste d'acupuncture permet de l'afficher sur le personnage virtuel.

### 3.4.7.2 Filtrage des points et classification de leur origine

Les filtres permettent d'afficher les points provenant de zones sources spécifiques. Un point peut être pertinent pour plusieurs sources simultanément et n'est donc pas dupliqué inutilement. Vérifiez les informations sources avant de supprimer une entrée qui semble être un doublon.

### 3.4.7.3 Activer, désactiver ou supprimer des points

Le commutateur d'activation détermine si un élément de programme est inclus dans la diffusion en cours. Les éléments inutiles peuvent être désactivés ou supprimés de la liste à l'aide de la croix rouge. Vérifiez la sélection active après chaque modification de filtre et avant de commencer une diffusion.

### 3.4.7.4 Ajout manuel de points via le modèle du corps ou de l'oreille

En utilisant la vue 3D du corps ou la vue de l'oreille, vous pouvez rechercher et ajouter manuellement des points supplémentaires. Pour ajouter des points sur un méridien déjà utilisé, cliquez sur l'un des points correspondants dans la liste d'acupuncture. Le point apparaîtra dans une couleur plus intense. Les autres points de ce méridien seront affichés dans une couleur moins intense. Vous pouvez survoler un point avec votre souris pour obtenir plus d'informations. Pour inclure un point dans les résultats de l'analyse, faites un clic droit dessus, puis un clic gauche pour sélectionner le mode de stimulation. Le point apparaîtra alors dans la liste d'acupuncture. Vous pouvez également cliquer sur l'icône « tête » en bas de la fenêtre du personnage virtuel pour afficher tous les points

d'acupuncture disponibles, puis sélectionner un point par un clic droit. De plus, vous pouvez cliquer sur l'icône « oreille » dans la même fenêtre. Cela vous permet d'inclure également les points d'acupuncture de l'oreille dans le rapport d'analyse. Là aussi, vous pouvez utiliser le bouton droit de la souris pour sélectionner les points d'acupuncture de l'oreille. Si nécessaire, sélectionnez des points sur le côté du corps souhaité (gauche ou droit). La localisation graphique sert d'aide à l'orientation dans le programme et ne remplace pas la localisation professionnelle des points sur le corps.

#### **3.4.7.5 Vérifier les propriétés de régulation**

Une propriété de régulation peut être affichée ou sélectionnée pour chaque point.

- Fournir
- Neutre
- Dériver

Ces modifications affecteront les informations ponctuelles préparées pour la diffusion.

### **3.4.8 Significations et zones d'information complémentaires**

#### **3.4.8.1 Psyché**

La section « Psyché » présente les textes explicatifs et les schémas de résonance associés à l'hexagramme sélectionné. Selon l'attitude du client et le profil du rapport, certains contenus sensibles peuvent rester initialement masqués. Formulez les sujets potentiels sous forme d'hypothèses ouvertes et laissez au client la liberté d'y adhérer ou de les contester.

#### **3.4.8.2 Physique**

La section « Physique » contient des textes relatifs au corps issus de diverses écoles de pensée. Ces affirmations sont des indications symboliques ou de résonance énergétique et non des conclusions médicales.

#### **3.4.8.3 Techniques d'interrogation**

Les techniques de questionnement favorisent le dialogue grâce à des questions préparées sur le sujet identifié. Choisissez des questions adaptées à la situation et posez-les avec ouverture, respect et sans orienter la conversation. Il n'est pas nécessaire de poser toutes les questions suggérées.

#### **3.4.8.4 Nutrition et remèdes**

Selon les résultats, des informations sur la nutrition, la phytothérapie chinoise, les formules standard, l'homéopathie ou les sels de Schuessler peuvent s'afficher. Ces informations servent à l'interprétation interne du programme. Il appartient à l'utilisateur de prendre en compte les intolérances, les interactions médicamenteuses, les contre-indications et les restrictions légales ; l'affichage ne constitue ni une prescription ni une recommandation posologique.

#### **3.4.8.5 Informations complémentaires et essences de Ling Zhen**

Des informations complémentaires peuvent inclure d'autres classifications traditionnelles, des textes ethnomédicaux et les essences de Ling Zhen. Utilisez-les comme aide supplémentaire pour la sélection et la discussion.

#### **3.4.8.6 Hetu et Lo Shu en option**

L'astrologie chinoise activée permet d'afficher les informations Hetu et Lo Shu. Le calcul prend en compte, entre autres, la date et l'heure de naissance, ainsi que le sexe. Les résultats correspondent

à des correspondances traditionnelles ou numérologiques et symboliques ; ils ne constituent en aucun cas une évaluation médicale ou psychologique.

#### **3.4.8.7 Équilibre méridien optionnel**

L'équilibre des méridiens permet de visualiser les contrastes énergétiques, tels que le yin et le yang, la gauche et la droite, le haut et le bas, ou l'avant et l'arrière, et d'identifier les points correspondants. Utilisez cette représentation comme une perspective interne supplémentaire.

#### **3.4.8.8 Ajouter le focus**

Dans la section « Points clés », vous pouvez consigner vos observations ou notes explicatives concernant l'examen. Rédigez de manière objective, concise et claire. Vous pouvez également y préciser les objectifs du client.

### **3.4.9 Utilisation d'images et de vidéos fractales**

Une image fractale personnalisée peut être créée à partir des résultats du scan TAO. Elle sert de représentation visuelle des informations de scan sélectionnées et peut être utilisée ultérieurement avec le client.

La création, l'utilisation et l'interprétation par l'IA des images fractales sont décrites en détail dans le chapitre 4.2 « Fonction fractale de Bucher ».

### **3.4.10 Envoi et application énergétique**

#### **3.4.10.1 Sélectionner l'analyse enregistrée**

Dans la section Envoyer/Rapports, ouvrez le scan TAO souhaité. Vérifiez le client, la date, le type de scan (initial ou de suivi), le point focal et l'hexagramme sélectionné. La transmission utilise les informations du scan actif dans la fenêtre.

#### **3.4.10.2 Définir l'hexagramme et le contenu à transmettre**

Le programme utilise généralement l'hexagramme recommandé par le logiciel ; vous pouvez toutefois choisir une autre perspective parmi les cinq. Ensuite, indiquez les points d'acupuncture à inclure. Selon vos paramètres, vous pouvez filtrer par Yi Jing, programmes, Lo Shu ou combinaisons.

#### **3.4.10.3 Vérification des programmes et des points actifs**

Consultez la liste des programmes si nécessaire et vérifiez toutes les entrées actives. Vérifiez également la liste des points après filtrage ou modification manuelle. Seuls les points et programmes activés seront inclus dans la séquence de diffusion programmée.

#### **3.4.10.4 Sélectionner la vitesse de transmission**

Sélectionnez la vitesse de transmission souhaitée. Les vitesses de transmission suivantes sont disponibles :

- Rapide
- Moyen
- Lent
- Rapid Transfer

La durée affichée en bas à droite correspond à la durée estimée de la transmission en cours. Les valeurs « Rapide », « Moyen » et « Lent » définies dans les paramètres TAO déterminent cette durée ; il ne faut pas les confondre avec la durée des transmissions suivantes.

Le Rapid Transfer utilise la vitesse de transmission maximale. Utilisez ce mode lorsque le client est absent ou pendant la préparation d'un support de données. Utilisez les modes Temps réel, Moyen ou Lent pour une application nécessitant la présence d'un client.

Une transmission plus lente n'est ni plus puissante ni de meilleure qualité. La durée de transmission est par défaut de quatre semaines, quelle que soit la vitesse de transmission. Consultez séparément la durée, l'intensité, le cycle et les autres options de transmission. Voir également la section 2.7 , « Différence entre la durée et la vitesse de transmission ».

#### **3.4.10.5 Vérifier le matériel de transmission et les supports d'information**

Ouvrez les propriétés de transmission via l'icône d'engrenage et vérifiez le matériel actif. Selon votre configuration, la transmission peut s'effectuer via différents périphériques, par transfert de fichiers ou via un support de données. La fonction permettant de supprimer ou de préparer un support de données ne doit être utilisée que pour le support actuellement sélectionné.

#### **3.4.10.6 Utiliser les options acoustiques et de lumière colorée**

Activez les bols chantants ou la lumière colorée selon vos besoins. Réglez un volume confortable et vérifiez la connexion. Les couleurs fractales ou d'autres informations chromatiques TAO peuvent être intégrées au processus, selon l'activation et la sélection.

#### **3.4.10.7 Démarrer, surveiller et annuler la diffusion**

- Vérifiez le scan sélectionné, l'hexagramme, les points actifs, les programmes, la durée et le matériel.
- Cliquez sur Envoyer et suivez l'état et le temps restant à droite, sous le personnage virtuel.
- Laisser le processus prévu suivre son cours.
- Si nécessaire, annulez à l'aide du bouton affiché, puis vérifiez l'état de l'enregistrement.

#### **3.4.10.8 Vérifier l'achèvement**

Après une analyse complète, BCS enregistre le temps de transmission dans l'analyse correspondante.

### 3.4.11 Rapports et évaluations de l'IA

Pressure selection

**Intimate topics**

☒ Patient printout  
☐ Therapist printout

☐ Focus  
☒ Hexagram information  
☒ Acupuncture points  
☐ Resonance diagnostics according to Riegel - Psyche  
☐ Resonance diagnostics according to Riegel - Body (Eastern)  
☐ Resonance diagnostics according to Riegel - Body (Western)  
☐ Questioning technique/Ethno-BR  
☐ Programmes  
☒ Fractal graphic  
☐ Nutrition  
☐ Additional information  
☐ Remedies  
☐ Hetu/Luoshu  
☐ Ling Zhen Essences  
☐ Tao Energy Balancing

**AI reports**

☒ Evaluation of individual scan results  
☐ Therapeutic evaluation  
☐ Recommendations for the client  
☐ Affirmations 4-week plan  
☐ Fractal interpretation

Sélection des rapports TAO et de l'évaluation de l'IA

#### 3.4.11.1 Ouvrir la sélection des rapports

Sélectionnez le scan TAO souhaité et ouvrez la fonction d'impression ou de rapport. Selon le résultat et votre licence, vous pouvez choisir, entre autres, la focalisation, l'hexagramme, les points d'acupuncture, le psychisme, le physique, les techniques de questionnement, les programmes, les graphiques fractals, la nutrition, les remèdes, les essences Hetu, Lo Shu et Ling Zhen, ainsi que l'équilibre des méridiens. Le contenu indisponible est désactivé.

#### 3.4.11.2 Différencier « l'Impression pour le patient » et « l'Impression pour le thérapeute »

Le profil « Impression pour le patient » est destiné à une communication claire avec le client. Le profil « Impression pour le thérapeute » peut contenir des informations internes plus détaillées. Dans les deux cas, veuillez vous assurer que les propos sensibles ou à connotation médicale sont présentés de manière objective et ne sont partagés qu'avec le destinataire prévu.

#### 3.4.11.3 Enregistrer le contenu du rapport par défaut

Sélectionnez « Impression patient » ou « Impression thérapeute », configurez le contenu du rapport souhaité, puis cliquez sur « Enregistrer comme valeur par défaut ». Passez ensuite au second profil et enregistrez-y également les paramètres correspondants. Avant chaque impression, prévisualisez le profil actif, le client, l'heure de l'analyse, l'hexagramme sélectionné, les informations sensibles et le texte généré par l'IA.

#### 3.4.11.4 Imprimer le rapport, l'enregistrer au format PDF ou l'envoyer par courriel

Cliquer sur l'icône de la loupe permet d'afficher un aperçu du rapport à l'écran, de l'imprimer, de l'enregistrer au format PDF ou, si l'envoi par courriel est activé, de l'envoyer. Veuillez vérifier l'adresse


du destinataire, le consentement, le nom du fichier et l'emplacement d'enregistrement. Les rapports contiennent des informations personnelles et potentiellement sensibles et doivent être protégés de manière adéquate. En particulier, lors de l'envoi du rapport par courriel, il est fortement recommandé de chiffrer les fichiers PDF. Cette fonction de chiffrement est disponible en option.

### 3.4.11.5 Utilisation de l'évaluation par l'IA

Grâce à l'IA, les données TAO peuvent être traitées pour diverses évaluations. Celles-ci peuvent inclure les hexagrammes et les trigrammes, les lignes variables, les points d'acupuncture actifs, le psychisme, le physique, les techniques de questionnement, la nutrition, les remèdes, le Hetu, le Lo Shu, les fractales et d'autres contenus débloqués. Les domaines d'IA visibles dépendent de la configuration et de la licence.

Les textes générés par l'IA sont des ébauches et doivent être vérifiés quant à leur exactitude, leur qualité linguistique et leur conformité à la réglementation sur la protection des données. Ils ne doivent pas interpréter à tort les indicateurs de réponse symboliques comme des diagnostics, des affirmations factuelles ou des promesses de guérison. Des instructions détaillées, notamment sur la personnalisation des invites et la sauvegarde/le chargement des ensembles d'invites, sont disponibles au chapitre 4.1, « Évaluation de l'IA : Utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre du BCS ».

### 3.4.12 Utilisation du mode automatique TAO optionnel

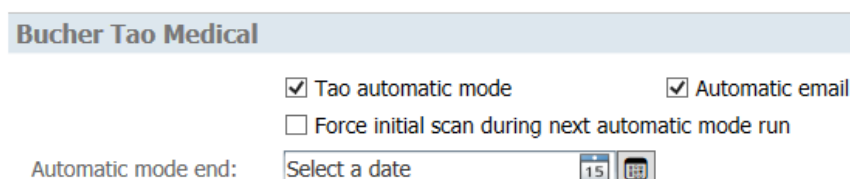

The screenshot shows a configuration window titled "Bucher Tao Medical". It contains several settings for automatic mode:

- ☒ Tao automatic mode
- ☒ Automatic email
- ☐ Force initial scan during next automatic mode run
- Automatic mode end: [Select a date] [15] [Calendar icon]

Configuration du mode automatique TAO

#### 3.4.12.1 Prérequis et objectif

Le mode automatique TAO nécessite une activation séparée. Il peut effectuer les analyses et transmissions programmées de manière séquentielle pour les clients activés et fournir ensuite des rapports par courriel. Cette automatisation ne dispense pas l'utilisateur de sa responsabilité quant à la sélection des clients, la définition des objectifs, les paramètres, le consentement et le suivi.

#### 3.4.12.2 Mise en place de l'automatisation pour le client

Dans les paramètres du client, activez le mode automatique TAO et, si nécessaire, l'envoi automatique d'e-mails. Selon l'interface, vous pouvez définir une date de fin et une date de prochaine analyse initiale forcée. Vérifiez également l'adresse e-mail, le profil de rapport et l'intervalle de temps configurés dans les paramètres TAO.

#### 3.4.12.3 Démarrer et contrôler le mode automatique

- Ouvrez Tao Medical et démarrez le mode automatique.
- Vérifiez les chiffres affichés pour les clients prévus, les numérisations, les expéditions et les courriels.
- Vérifiez les propriétés de numérisation et d'envoi, puis lancez le processus.
- Si nécessaire, surveillez l'étape en cours et, une fois celle-ci terminée, vérifiez le journal, les analyses enregistrées, l'état d'envoi et les courriels.

#### **3.4.12.4 Exécutions répétées le même jour et e-mails en attente**

BCS évite les répétitions inutiles dans le processus automatisé prévu si une analyse TAO a déjà été enregistrée pour le client le même jour. Les courriels non envoyés restent visibles pour un suivi et peuvent être renvoyés ou supprimés une fois le problème résolu.

### **3.4.13 Gestion, exportation et sauvegarde des analyses**

#### **3.4.13.1 Ouvrir les cycles d'analyse enregistrés**

Les analyses TAO du client actuel se trouvent dans Envoyer/Rapports. Sélectionnez le cycle souhaité et naviguez entre les différentes périodes d'analyse. Avant toute action, vérifiez la date, le type d'analyse (initiale ou de suivi) et le niveau de détail.

#### **3.4.13.2 Suppression des analyses**

Ne supprimez une analyse qu'après avoir vérifié le client, la date et le cycle d'appartenance à l'aide du bouton « X ». L'analyse initiale sert de référence pour toutes les analyses suivantes. Sa suppression entraînera également la suppression de toutes les analyses suivantes associées. Avant de procéder à un nettoyage complet, assurez-vous de disposer d'une sauvegarde de données récente et restaurable.

#### **3.4.13.3 Exportation et importation**

Pour exporter, importer et transférer les données client et de numérisation, utilisez les fonctions centrales de BCS via l'icône d'exportation. Après l'importation, vérifiez que toutes les numérisations TAO, les programmes, les fractales et les données supplémentaires ont été correctement attribués. Des instructions détaillées sont disponibles dans le chapitre général consacré à l'exportation et à l'importation.

### **3.4.14 Foire aux questions et dépannage**

#### **Pourquoi la fonction TAO n'est-elle pas affichée ?**

Vérifiez l'activation du produit, la licence supplémentaire et la configuration. Les fonctions de scan du programme, de fractales, d'astrologie chinoise, d'équilibre des méridiens, automatiques, de lumière colorée, de musique et d'IA peuvent être activées séparément. Par conséquent, une fonction masquée n'est généralement pas due à un bug du programme.

#### **Pourquoi un examen de contrôle n'est-il ni possible ni suggéré ?**

Vérifiez si une analyse initiale complète a été effectuée. Selon l'historique des analyses et le flux de travail activé, BCS peut nécessiter une nouvelle analyse initiale.

#### **Pourquoi des textes sensibles et porteurs de sens disparaissent-ils ?**

Les paramètres client relatifs aux sujets intimes ou sensibles permettent de masquer initialement le texte. L'utilisateur peut ensuite l'afficher sélectivement selon ses besoins. Il est également conseillé de vérifier le profil de rapport actif avant d'envoyer tout contenu.

Il est préférable de ne pas aborder les sujets sensibles sans les commenter. Ces sujets doivent être discutés avec précaution, diplomatie et empathie afin que le client ne les perçoive pas comme une source de culpabilité ou de reproche.

### **Pourquoi un point d'acupuncture peut-il avoir plusieurs origines ?**

Ce point a été attribué à partir de plusieurs sources, telles que le Yi Jing, des programmes ou le Lo Shu. BCS combine les informations du point et affiche l'ensemble des sources au lieu de les répéter inutilement.

### **La perspective du diagnostic est-elle celle d'un diagnostic médical ?**

Non. Le diagnostic désigne simplement l'une des cinq perspectives internes du Yi Jing. Il ne doit en aucun cas être utilisé comme un constat médical, ni comme preuve ou exclusion d'une maladie.

### **Pourquoi est-il impossible de générer ou d'envoyer une fractale ?**

Vérifiez l'activation fractale, le type de numérisation sélectionné, l'espace de stockage et le matériel d'envoi. La génération d'images ou de vidéos en très haute résolution peut prendre plus de temps. L'envoi par e-mail ou la publication peuvent également dépendre de votre connexion Internet et de sa configuration.

### **Pourquoi la diffusion prend-elle plus de temps que prévu ?**

La durée totale dépend du type de régulation, des points d'acupuncture actifs, des programmes, de l'équilibrage des méridiens, des options fractales, musicales et lumineuses (couleur/lumière). Vérifiez la sélection active et utilisez le Rapid Transfer uniquement pour la courte séquence d'informations prévue.

### **Comment les textes TAO sont-ils formulés lors des consultations avec les clients ?**

Utilisez des expressions telles que « indice symbolique », « résonance énergétique », « perspective possible » ou « amorce de conversation ». Évitez les certitudes diagnostiques, causales ou prédictives. Le client décide si l'interprétation proposée correspond à sa situation.

### **Une évaluation de l'IA peut-elle être adoptée sans vérification ?**

Non. Chaque réponse d'IA doit être vérifiée quant à son contenu, son langage et sa conformité aux règles de protection des données. Les déclarations à consonance médicale, les diagnostics, les promesses de guérison, les conclusions inexacts et les formulations inappropriées doivent être supprimés ou corrigés.

## **3.5 Bucher Bioresonanz Triselect FE**

### **3.5.1 Aperçu et utilisation prévue**

#### **3.5.1.1 Objet et champ d'application**

Bucher Bioresonanz Triselect FE est un module de Bucher Coaching Systems. Il aide l'utilisateur à représenter les informations énergétiques d'un client, telles qu'elles sont déterminées dans le modèle du système, à les diviser en différentes composantes et à les préparer pour une régulation énergétique ultérieure.

Le processus type comprend la sélection du client, la définition de l'objectif, une analyse initiale ou de suivi, l'examen des résultats, le choix facultatif de programmes de régulation, la transmission et la génération du rapport. Les données de réponse issues de bases de données complémentaires peuvent servir à l'interprétation et au dialogue avec le client.

#### **3.5.1.2 Aperçu des principales fonctions**

- Numérisations initiales et suivantes avec suggestion de numérisation automatique.
- Présentation des domaines Spiritual, Psychic et Somatic avec les composantes d'information respectives déterminées.
- Préparation des informations positives et des informations négatives inversées pour la diffusion.
- Indicateurs de résonance concernant des sujets liés aux organes ou aux systèmes et des sujets psychosomatiques.
- Analyse automatique optionnelle des programmes de régulation.
- Sélection et envoi manuels optionnels de 755 indications stockées avec oscillation régulée associée.
- Rapports, sortie PDF, envoi par e-mail et, si activés, évaluations par IA.
- Mode automatique optionnel pour les analyses, les envois et les rapports récurrents.

#### **3.5.1.3 Fonctions dépendantes de la licence**

Les fonctions disponibles dépendent de la licence acquise. Outre le module de base, les programmes d'indication, la numérisation automatique des programmes et le mode automatique Triselect peuvent être activés séparément. Les fonctions non activées sont masquées ou inutilisables.

#### **3.5.1.4 Différenciation par rapport aux diagnostics et aux thérapies médicales**

Triselect FE fonctionne selon un modèle énergétique. Les bandes de vibration, les résonances, les pourcentages et les données de la base de données affichés ne constituent ni des valeurs de laboratoire, ni des observations anatomiques, ni des diagnostics médicaux. Ils ne doivent en aucun cas servir à confirmer ou à infirmer l'existence d'une maladie.

Ce système ne remplace pas un examen médical ni un traitement médical ou psychothérapeutique nécessaire. En cas de plaintes, de symptômes aigus ou de risques pour la santé, il convient de consulter un professionnel qualifié. L'utilisateur demeure responsable du choix, de la classification, de la communication et de l'application du système.

## **3.5.2 Modèle de travail énergétique**

### **3.5.2.1 Classification selon Morell et Rasche**

La philosophie de biorésonance sur laquelle repose Triselect FE s'appuie sur les principes fondamentaux développés par Franz Morell et Erich Rasche. Le nom MORA provient historiquement des noms de Morell et Rasche. Ce modèle postule que l'information énergétique propre au corps peut être enregistrée, différenciée, traitée, puis restituée.

### **3.5.2.2 Composantes d'information positives et négatives**

Dans son modèle de fonctionnement énergétique, Triselect FE tente de capter les vibrations cellulaires ou informations cellulaires actuelles du client. Ces informations sont divisées en une composante positive et une composante négative. L'interface du programme utilise parfois les termes physiologique et pathologique pour les décrire.

La composante d'information négative est inversée pour la transmission. Ensuite, la composante positive et la composante négative inversée sont recombinaées. Cette information globale ainsi traitée peut être renvoyée au client via le matériel de transmission sélectionné. Les termes positif, négatif, physiologique et pathologique décrivent uniquement la classification énergétique interne du système et non un diagnostic médical.

### **3.5.2.3 Trois zones d'affichage**

La fenêtre de résultats comporte trois zones. Spiritual affiche une bande de longueurs d'onde de 315 à 1400 nm, répartie entre UVA, lumière visible et IRA. Psychic affiche une bande de fréquences de 0,025 à 1,000 MHz. Somatic affiche une bande de fréquences de 0 à 25 kHz.

Les composantes Psychic et Somatic sont représentées graphiquement : les informations initiales recueillies, la composante positive ou physiologique, la composante négative ou stressante, et les informations compilées pour le programme. Les indicateurs de pourcentage verts et rouges facilitent l'orientation dans le modèle du programme ; il ne s'agit pas de valeurs quantitatives ni de valeurs liées à une maladie.

### **3.5.2.4 Indications de résonance issues des bases de données**

Durant l'examen, le BCS récupère également des informations de résonance à partir de bases de données. Selon le type de programme et son activation, des liens avec des organes ou des systèmes, des problématiques psychosomatiques, des questions existentielles et des programmes de régulation appropriés peuvent être affichés. Ces informations servent d'outil de discussion et d'interprétation. Elles doivent être considérées comme des hypothèses et ne doivent en aucun cas être interprétées comme un diagnostic.

## **3.5.3 Prérequis et paramètres de base**


### **3.5.3.1 Préparation du produit et du matériel**

Il est nécessaire de disposer d'une version installée et activée de BCS, avec les autorisations requises pour Bucher Bioresonanz Triselect FE. Sélectionnez Triselect dans la barre de produits et consultez les paramètres matériels pour identifier les appareils compatibles avec la numérisation et la transmission. Le matériel disponible et les options affichées dépendent de votre configuration BCS.

Utilisez le terme neutre « interface esprit-matière » pour désigner la connexion entre le client et le système. Avant de commencer, vérifiez que l'interface requise est détectée et sélectionnée dans les propriétés d'analyse.

### 3.5.3.2 Ouvrir les paramètres Triselect

Ouvrez les paramètres via le bouton rond « Fonctions supplémentaires » et sélectionnez la section Bucher Bioresonanz Triselect. Les modifications sont appliquées après confirmation. Les sections visibles dépendent des licences supplémentaires installées.

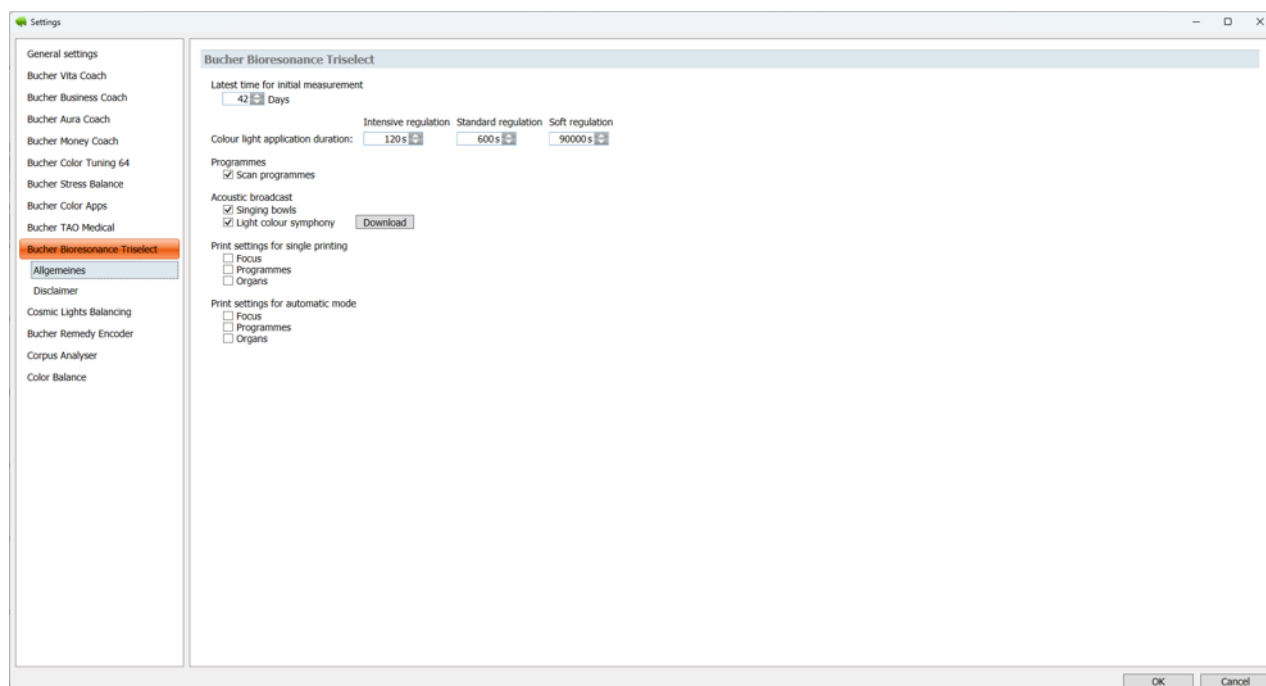

Paramètres de base pour Triselect

### 3.5.3.3 Définir l'heure d'une nouvelle analyse initiale

Dans les paramètres Triselect, vous spécifiez le nombre de jours après lesquels BCS doit suggérer une nouvelle analyse initiale. La plage réglable s'étend de 14 à 56 jours. Le réglage par défaut le plus judicieux est de 42 jours. BCS tient également compte de l'historique des analyses existantes et de toute information négative encore présente dans le modèle du système.

### 3.5.3.4 Réglage des spécifications temporelles pour la vitesse de transmission

Pour les modes Rapide (Court), Moyen et Lent (Long), vous pouvez saisir des valeurs en secondes dans les paramètres. BCS utilise ces valeurs pour calculer le nombre de passages et la durée estimée de la transmission immédiate. Ces valeurs déterminent la vitesse de transmission, et non sa durée. Ne modifiez ces valeurs que si nécessaire, puis vérifiez l'estimation de temps affichée.

### 3.5.3.5 Réglage de l'accompagnement acoustique

Selon votre activation et votre installation, vous pouvez utiliser la musique des bols chantants. Vérifiez le volume et le périphérique de sortie avant utilisation. Si une option musicale n'est pas visible ou est désactivée, l'activation correspondante ou le fichier requis est manquant.

### 3.5.3.6 Préréglage du contenu de l'analyse et du rapport du programme

Si le module complémentaire de numérisation automatique des programmes est activé, l'option « Numériser les programmes » peut être définie par défaut. Dans la sélection d'impression, le focus, les programmes et les notes relatives aux organes ou aux systèmes peuvent être sélectionnés séparément pour les « Impressions patient » et « Impressions thérapeute ». Cliquer sur « Enregistrer

comme valeur par défaut » enregistre la sélection pour le profil actif et l'applique à la prochaine impression.

### **3.5.4 Préparer le client et le focus**

#### **3.5.4.1 Sélectionnez le client et vérifiez l'affectation**

Ouvrez la gestion des clients et sélectionnez le client concerné. Dans la fenêtre Triselect, vérifiez le nom et la date de naissance avant de lancer une analyse. Cela évitera que les résultats de l'analyse ne soient attribués à un mauvais dossier.

#### **3.5.4.2 Formuler le focus**

L'objectif décrit la question ou le sujet que l'examen doit aborder. Formulez-le brièvement, de manière neutre et sans idées préconçues. Évitez les diagnostics, les promesses de guérison et les instructions suggestives. Lors d'un scan de suivi, le BCS indiquera si l'objectif a changé par rapport à l'examen initial.


#### **3.5.4.3 Sélectionner la propriété ou la catégorie de scan**

Utilisez le champ de sélection situé au-dessus du focus pour définir la propriété ou la catégorie d'analyse souhaitée. Celle-ci est liée à la situation actuelle du client, qui est précisée lors de la consultation initiale. Cette situation peut être aiguë, subaiguë ou chronique. Votre sélection influence le traitement interne du système et les propriétés de transmission suggérées. Vérifiez la catégorie avant de commencer, car elle est enregistrée avec l'analyse. La catégorie par défaut est « aiguë », car il s'agit de la situation la plus fréquente.

#### **3.5.4.4 Utilisation de la sélection de couleurs en ligne pour un client absent**

Si un scan de sélection de couleurs en ligne entièrement transféré est disponible pour le client, l'option « Utiliser le scan de sélection de couleurs en ligne existant » peut apparaître. Ceci est particulièrement utile si le client ne peut pas être présent. Les couleurs, formes et nuances préférées et non appréciées, sélectionnées à domicile, sont transférées vers BCS et peuvent servir de base au scan Triselect.

## 3.5.5 Effectuer une analyse Triselect

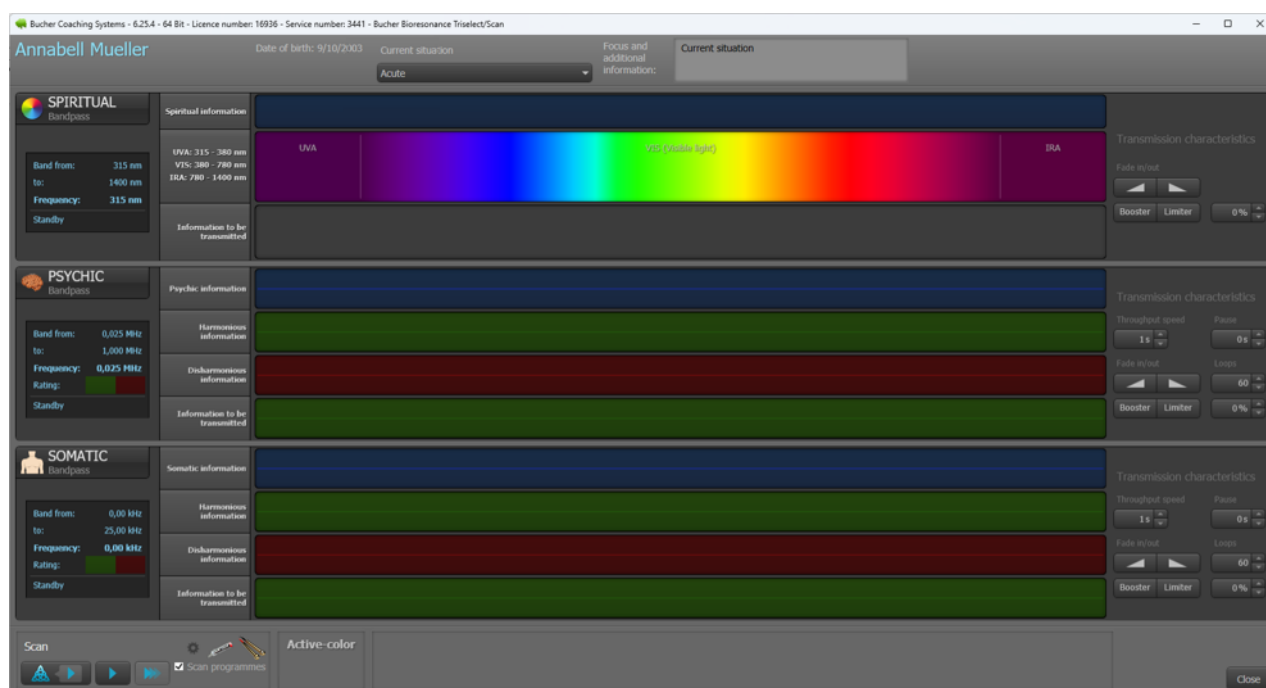

Préparation d'un scan Triselect

### 3.5.5.1 Différencier l'examen initial et le scan de suivi

Une première analyse lance un nouveau cycle et en constitue le point de départ. Une analyse ultérieure s'inscrit dans un cycle existant et intègre les données de l'analyse précédente au nouveau calcul. BCS indique, via le bouton de suggestion mis en évidence, le type d'analyse prévu en fonction de l'historique et des paramètres.

Outre le bouton de suggestion, des boutons distincts permettent d'effectuer une analyse initiale et une analyse de suivi. N'utilisez la sélection manuelle que si vous souhaitez vous écarter volontairement de la recommandation. Dans les paramètres du client, vous pouvez également forcer la prochaine analyse automatique à démarrer par une nouvelle analyse initiale.

### 3.5.5.2 Vérifier les propriétés de l'analyse et du matériel

Si nécessaire, ouvrez les propriétés de numérisation via l'icône d'engrenage. Vérifiez le matériel actif et les options de numérisation configurées. Ne lancez pas la numérisation tant que le client, le focus, la catégorie et l'interface esprit-matière appropriés ne sont pas sélectionnés.

### 3.5.5.3 Inclure l'analyse automatique du programme

Si le module complémentaire Bucher Bioresonanz Triselect - Program Scan est activé, vous pouvez activer la recherche de programmes. Lors de la première analyse, BCS vérifie la résonance des programmes de régulation enregistrés et ajoute les entrées correspondantes à la liste des programmes. Les analyses suivantes utiliseront les programmes associés au cycle.

### 3.5.5.4 Lancer l'analyse, observer et annuler


- Vérifier le nom du client, sa date de naissance, son domaine d'intérêt et les propriétés de l'analyse.
- Vérifiez le matériel de numérisation et, si nécessaire, activez la numérisation de sélection des couleurs en ligne ou la numérisation du programme sous licence.
- Cliquez sur le bouton suggéré pour effectuer un examen initial ou de suivi.

- Laissez le processus se dérouler dans son intégralité. BCS vous présentera successivement le traitement dans les domaines Spirituel, Psychic et Somatic.
- N'annulez qu'en cas de nécessité. Un processus interrompu n'est pas considéré comme une analyse complète.

### 3.5.5.5 Enregistrement automatique de l'analyse

Une numérisation complète est automatiquement enregistrée avec la date, le type de numérisation, le focus, la catégorie, les valeurs de numérisation, les programmes et les notes de résonance. Si vous cliquez sur « Annuler » en bas à droite pendant la numérisation, celle-ci est interrompue et les valeurs acquises sont perdues. Par conséquent, ne cliquez pas sur « Annuler » si vous souhaitez conserver cette numérisation. La première numérisation se voit attribuer un nouveau cycle ; les numérisations suivantes sont ajoutées au cycle existant. Un jeu de données de sélection de couleurs en ligne utilisé est considéré comme utilisé après traitement.

## 3.5.6 Comprendre les résultats et les utiliser dans le dialogue avec le client

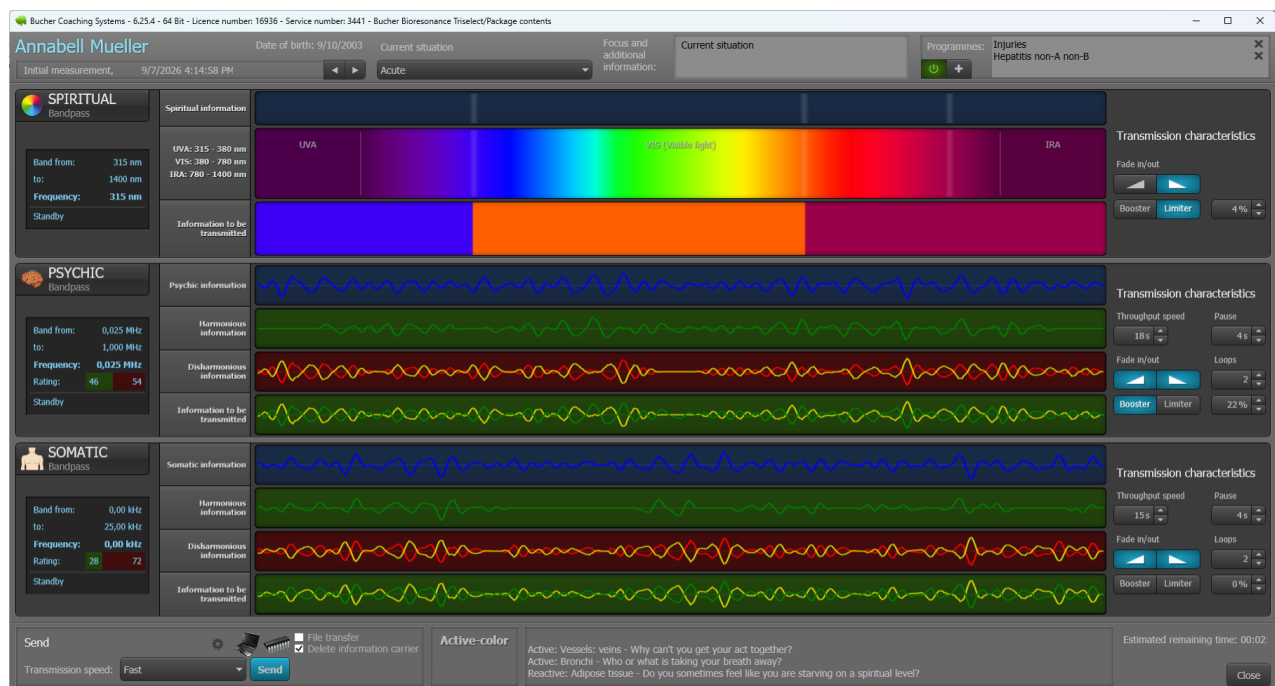

Le résultat de Triselect se situe dans trois zones.

### 3.5.6.1 Choisir le cycle de scans et la date du scan

Dans la fenêtre de résultats ou d'envoi, vous pouvez consulter les cycles d'analyse enregistrés et leurs durées. La date et la mention « analyse initiale » ou « analyse ultérieure » facilitent l'attribution. Vérifiez toujours l'analyse ouverte avant d'interpréter, de rédiger un rapport ou d'envoyer les résultats.

### 3.5.6.2 Évaluer Spirituel

La section Spirituelle affiche les informations de couleur et de longueur d'onde déterminées par le modèle du programme. Les résultats, codés par couleur, représentent les informations préparées pour la transmission. Cet affichage sert uniquement d'orientation et ne constitue en aucun cas un

examen optique ou dermatologique. Les couleurs affichées sont celles avec lesquelles le client était en résonance au moment du scan.

### **3.5.6.3 Évaluer Psychic et Somatic**

Les sections Psychic et Somatic affichent chacune les informations initiales, les attributions positives et négatives, ainsi que les informations transmises. Les zones vertes et rouges, affichées à gauche de l'écran, résument la proportion des composantes d'information attribuées. Plus la zone verte est grande (plus la zone rouge est petite), meilleur est le résultat énergétique pour cette zone. Analysez l'évolution au fil des différentes analyses sans surinterpréter les pourcentages individuels.


### **3.5.6.4 Classification des informations relatives aux organes et aux systèmes**

Les informations affichées concernant les organes ou les systèmes, ainsi que les questions existentielles, proviennent du modèle de résonance interne du programme. Utilisez des expressions telles que « indication de résonance », « sujet possible » ou « amorce de conversation ». Évitez les formulations qui pourraient être interprétées comme un diagnostic médical, une cause ou un dysfonctionnement confirmé.

### **3.5.6.5 Modifier et enregistrer le focus**

La zone de mise au point peut être modifiée pendant un cycle de numérisation. Enregistrez les modifications à l'aide de la fonction d'enregistrement prévue à cet effet ou confirmez l'invite lors de la modification de la durée de numérisation. Vérifiez ensuite que le texte modifié est bien affecté au cycle approprié.

### 3.5.7 Utilisation des programmes d'indication

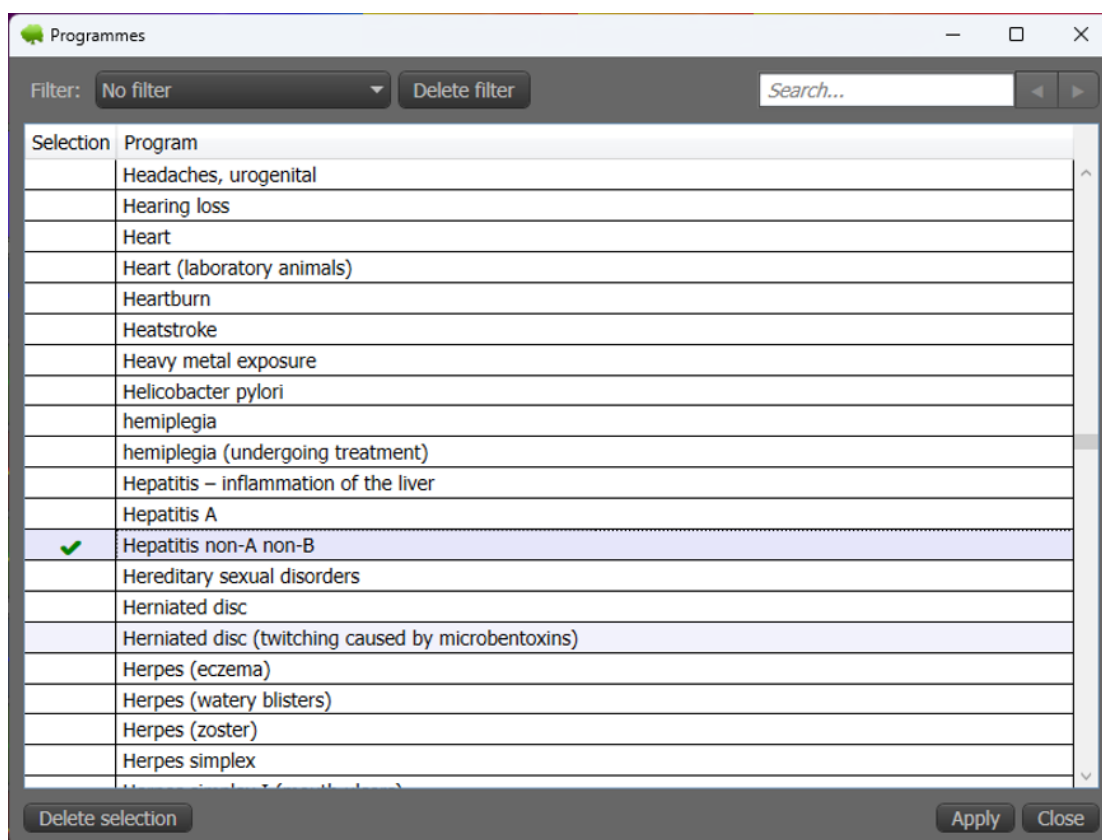

Programmes d'indication sélectionnés

#### 3.5.7.1 Portée et licence

La fonction d'indication manuelle est un module complémentaire optionnel. La base de données contient 755 indications prédéfinies, chacune avec sa fréquence de régulation correspondante. La sélection du programme nécessite une licence Bucher Bioresonanz Programs.

#### 3.5.7.2 Rechercher et sélectionner l'indication

- Dans la fenêtre Triselect, ouvrez la sélection de programme à l'aide du signe plus.
- Au besoin, sélectionnez le filtre « Tous », « Humain » ou « Dentaire ».
- Saisissez un terme de recherche et utilisez les boutons de recherche pour passer au résultat suivant ou précédent.
- Sélectionnez une ou plusieurs indications appropriées. Une description ou une intention existante peut servir d'indication supplémentaire.
- Acceptez la sélection. Utilisez « Effacer la sélection » pour supprimer toutes les sélections ; « Annuler » laisse la liste des programmes inchangée.

#### 3.5.7.3 Vérifier et modifier la liste des programmes

Les programmes importés apparaissent dans la fenêtre Triselect. Utilisez le bouton marche/arrêt pour déterminer s'ils sont inclus dans la diffusion. Vous pouvez supprimer des programmes de la liste à l'aide de l'icône de suppression. Vérifiez la sélection avant chaque diffusion et évitez une collection de programmes trop importante. Concentrez-vous sur la résolution du problème principal.


### 3.5.7.4 Envoyer uniquement les programmes

BCS peut également envoyer les programmes d'indication sans nouvelle analyse Triselect. Pour ce faire, ouvrez la fonction de programme dédiée, sélectionnez les indications souhaitées, activez la liste des programmes et lancez la transmission. Cette méthode est uniquement disponible avec la licence du programme correspondant.

### 3.5.7.5 Différenciation entre les programmes détectés automatiquement et les programmes sélectionnés manuellement

Les programmes détectés automatiquement proviennent de l'analyse des logiciels sous licence et sont inclus dans les suggestions. Les programmes sélectionnés manuellement sont choisis par l'utilisateur. Veuillez évaluer la pertinence de ces programmes dans le contexte global.

## 3.5.8 Transmission et régulation énergétique

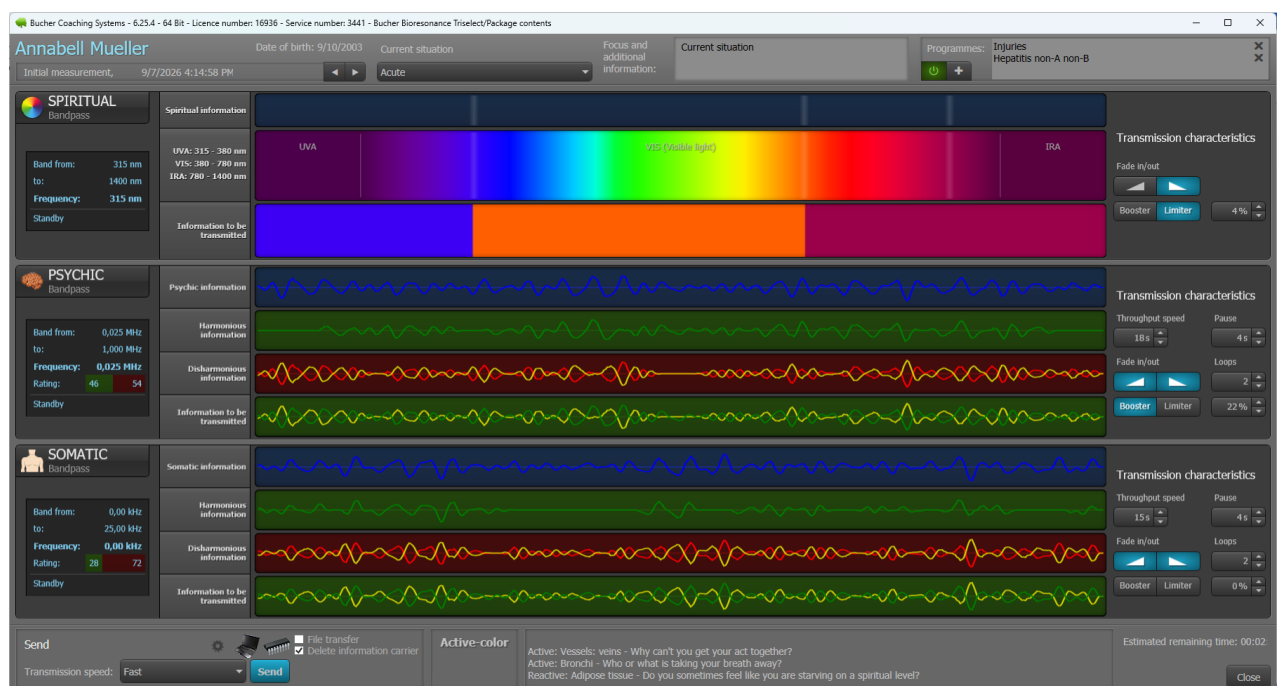

Envoyer les résultats de Triselect

### 3.5.8.1 Ouvrir le scan enregistré pour l'envoi

Dans la section Envoyer/Rapports, ouvrez l'analyse Triselect souhaitée et vérifiez le client, la date, le type d'analyse (initiale ou de suivi), la zone de mise au point et la liste des programmes. La transmission utilise les informations enregistrées dans l'analyse et affichées dans la fenêtre.

### 3.5.8.2 Sélectionner la vitesse de transmission

Sélectionnez la vitesse de transmission souhaitée. Les vitesses de transmission suivantes sont disponibles :

- En temps réel
- Rapide
- Moyen
- Lent
- Rapid Transfer

La durée affichée en bas à droite correspond à la durée estimée de la transmission en cours. Les valeurs Rapide, Moyenne et Lente définies dans les paramètres Triselect déterminent cette durée ; il ne faut pas les confondre avec la durée de la transmission suivante.

Le mode Temps réel suit le déroulement temporel prévu par le modèle de travail de la biorésonance ; Rapid Transfer utilise la vitesse de transfert maximale. Choisissez Rapid Transfer ou Rapide lorsque le client est absent ou lors de la préparation d'un support d'information. Choisissez Temps réel, Moyen ou Lent pour une application consciemment accompagnée avec un client présent.

Une transmission plus lente n'est ni plus puissante ni de meilleure qualité. La durée de transmission est de quatre semaines par défaut, quel que soit le mode de transmission (temps réel, rapide, moyen ou lent). Consultez séparément la durée, l'intensité, le cycle et les autres options de transmission.

Voir également la section 2.7 , « Différence entre la durée et la vitesse de transmission ».

### **3.5.8.3 Comprendre les caractéristiques de transmission**

Pour les modes Spiritual, Psychic et Somatic, vous pouvez ajuster la durée, la pause, le fondu en entrée/sortie, le nombre de répétitions, ainsi que l'amplification ou la limitation, à l'aide de pourcentages. Ces valeurs sont configurées pendant l'analyse. Ne les modifiez que si vous êtes certain de leur impact sur le déroulement et la durée totale ; en pratique, il est conseillé de conserver les paramètres définis.

### **3.5.8.4 Vérifier le matériel de transmission et les supports d'information**

Ouvrez les propriétés de transmission via l'icône d'engrenage et vérifiez le matériel actif. Selon votre configuration, la transmission peut s'effectuer via différents périphériques, par transfert de fichiers ou via un support de données. L'option « Effacer le support de données » détermine si un support de données utilisé est préparé avant la prochaine transmission. Consultez également le chapitre relatif aux options de transmission et au matériel.


### **3.5.8.5 Démarrage, surveillance et annulation d'une diffusion**

- Vérifiez le balayage sélectionné, la liste des programmes actifs, la vitesse de transmission et le matériel.
- Cliquez sur Soumettre. BCS exécute les informations traitées provenant des trois zones en fonction des propriétés sélectionnées.
- Observez la couleur active, l'indicateur d'état et le temps restant. Un accompagnement audio activé est diffusé conformément à la configuration.
- Annulez la transmission si nécessaire à l'aide du bouton affiché. Vérifiez ensuite l'état enregistré avant de répéter l'opération.

### **3.5.8.6 Vérifier l'état d'achèvement et de transmission**

Après une transmission réussie, BCS enregistre l'heure de transmission dans l'analyse associée.

## 3.5.9 Rapports et évaluations de l'IA

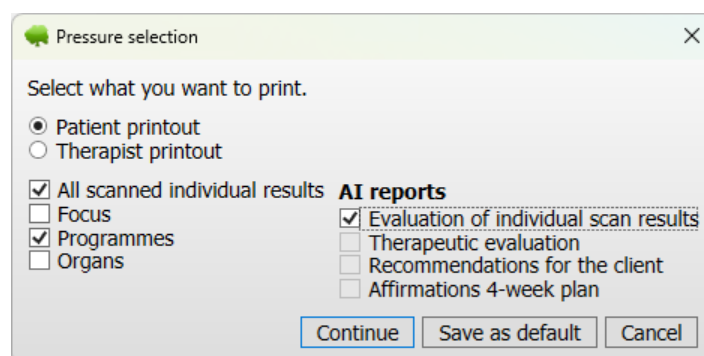

Rapports Triselect et évaluation de l'IA

### 3.5.9.1 Ouvrir la sélection des rapports

Dans le menu Envoyer/Rapports, sélectionnez l'analyse Triselect souhaitée et ouvrez la fonction d'impression ou de rapport. Vous pouvez alors activer ou désactiver l'affichage des résultats d'analyse, le focus, les programmes de régulation et les informations de résonance relatives aux organes ou aux systèmes. Les contenus indisponibles sont désactivés.

### 3.5.9.2 Profils de rapport « Impression pour le patient » et « Impression pour le thérapeute »

Dans la fenêtre « Sélection d'impression », choisissez « Impression patient » ou « Impression thérapeute » et activez le contenu du rapport souhaité. Cliquer sur « Enregistrer comme valeur par défaut » sauvegarde la sélection actuelle pour le profil actif ; elle sera réutilisée lors de votre prochaine connexion à ce profil. Passez au second profil si vous souhaitez également définir une valeur par défaut distincte pour celui-ci.

### 3.5.9.3 Imprimer le rapport, l'enregistrer au format PDF ou l'envoyer par courriel

Après prévisualisation, le rapport peut être imprimé, enregistré au format PDF ou, si la fonction d'envoi par courriel est activée, envoyé. Vérifiez l'adresse du destinataire, le consentement, le nom du fichier et l'emplacement d'enregistrement. Les rapports contiennent des informations personnelles et potentiellement sensibles et doivent être protégés de manière adéquate. En particulier, lors de l'envoi du rapport par courriel, il est fortement recommandé de chiffrer les fichiers PDF. Cette fonction de chiffrement est disponible en option.

### 3.5.9.4 Utilisation de l'évaluation par IA

Grâce à l'IA, les données Triselect peuvent être traitées en fonction des requêtes IA spécifiques. Le BCS prend en compte des facteurs tels que la couleur, le pourcentage d'allocation aux aspects Psychics et Somatics, les indicateurs de résonance, les programmes et la propriété de scan sélectionnée. La réponse de l'IA est ensuite transférée vers le champ d'évaluation approprié, vérifiée par un professionnel, modifiée si nécessaire, puis enregistrée.

Les textes générés par l'IA sont des brouillons. Ils ne doivent pas être réinterprétés comme des diagnostics ou des affirmations factuelles. Les évaluations enregistrées et activées peuvent être sélectionnées individuellement dans la sélection du rapport. Des instructions détaillées, y compris sur les invites personnalisées et l'enregistrement et le chargement des ensembles d'invites, se trouvent au chapitre 4.1, « Évaluation par l'IA : Utilisation de l'intelligence artificielle dans BCS ».

## 3.5.10 Utilisation du mode automatique Triselect en option

**Bucher Bioresonance Triselect**

☒ Bioresonance automatic mode ☐ Automatic email

☐ Force initial scan during next automatic mode run

Automatic mode end:   ☐ End cycle

Configuration du mode automatique Triselect

### 3.5.10.1 Prérequis et objectif

Le mode automatique de Triselect nécessite une licence distincte. Il traite les clients activés séquentiellement, effectue les analyses et transmissions planifiées, puis peut envoyer les rapports par courriel. Cette automatisation ne dispense pas l'utilisateur de la sélection, du paramétrage et du suivi des clients.

### 3.5.10.2 Configuration du mode automatique pour le client

Dans les paramètres du client, activez le mode automatique Triselect et, si vous le souhaitez, AutoMail. Vous pouvez également définir une date d'expiration. Si l'option « Attendre la fin du cycle d'analyse » est activée, le client ne s'arrêtera qu'après la date d'expiration, une fois le cycle évalué par le programme terminé. L'option d'analyse initiale forcée s'applique à la prochaine exécution planifiée.

### 3.5.10.3 Démarrage du mode automatique

- Ouvrez Triselect et cliquez sur le bouton pour activer le mode automatique.
- Vérifiez les chiffres affichés pour connaître le nombre total de clients prévus, les numérisations en attente, les expéditions et les courriels actuels et anciens.
- Vérifiez les propriétés de numérisation et d'envoi, puis démarrez le mode automatique.
- Surveillez l'état d'avancement selon les besoins. BCS traite les tâches séquentiellement et affiche l'étape en cours.
- Une fois l'opération terminée, vérifiez le journal ainsi que les analyses enregistrées, l'état de la transmission et les courriels.

### 3.5.10.4 Clients scannés le même jour

Un client pour lequel un scan Triselect a déjà été enregistré le même jour ne sera pas scanné une seconde fois lors du prochain passage automatique. Ceci évite les scans multiples accidentels le même jour.

### 3.5.10.5 Gestion des courriels non envoyés

Les courriels non envoyés restent visibles dans la liste des anciens courriels. Une fois le problème résolu, vous pouvez les renvoyer. Utilisez l'option « Supprimer » pour les retirer de la liste d'envoi lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Avant cela, vérifiez si le rapport a déjà été envoyé par un autre moyen.

## 3.5.11 Gestion et sauvegarde des analyses

### 3.5.11.1 Réouverture des cycles d'analyse enregistrés

Les analyses Triselect du client actuel se trouvent dans Envoyer/Rapports. Des filtres et des étiquettes permettent de distinguer les processus manuels des processus automatiques, selon

l'interface. Ouvrez le cycle correspondant et utilisez les boutons de navigation pour parcourir les horodatages des analyses.

### **3.5.11.2 Suppression ou exportation des analyses**

Ne supprimez une analyse Triselect qu'après avoir vérifié le client, la date et le cycle. L'analyse initiale sert de référence pour toutes les analyses suivantes. La suppression de l'analyse initiale (indiquée par un triangle) entraîne automatiquement la suppression de toutes les analyses suivantes associées. Pour l'exportation, l'importation et la sauvegarde complète des données, utilisez les fonctions de gestion centralisée des clients ; vous trouverez plus de détails dans le chapitre correspondant du manuel.

### **3.5.11.3 Vérifier la sauvegarde des données**

Les données Triselect font partie du système de stockage de données BCS et doivent être incluses dans les sauvegardes régulières. Vérifiez l'emplacement de la sauvegarde, sa date de dernière mise à jour et sa possibilité de restauration. Une sauvegarde récente doit être disponible avant tout nettoyage important ou modification du système.

## **3.5.12 Erreurs courantes et solutions**

### **3.5.12.1 La fonction Triselect ou une fonction supplémentaire n'est pas affichée.**

Vérifiez l'activation et la licence du produit. Les programmes d'indication, l'analyse automatique des programmes et le mode automatique sont des modules complémentaires distincts. Par conséquent, un bouton invisible indique souvent un problème d'activation et non une erreur du programme.

### **3.5.12.2 L'analyse ne démarre pas**

Vérifiez le client actuel, le focus, les propriétés de numérisation, l'interface esprit-matière et les caractéristiques de numérisation. Pour une numérisation avec sélection de couleurs en ligne, un jeu de données entièrement transféré du client approprié doit être présent. Si nécessaire, fermez et rouvrez la fenêtre après avoir effectué des modifications.

### **3.5.12.3 Les programmes d'indication ne sont pas disponibles**

Vérifiez la licence des programmes Bucher Bioresonanz. Dans la sélection des programmes, définissez le filtre sur « Tous » et supprimez tous les termes de recherche actifs. La licence Bucher Bioresonanz Triselect - Program Scan est également requise pour la détection automatique des programmes.

### **3.5.12.4 L'envoi ne démarre pas ou dure anormalement longtemps**

Vérifiez votre matériel de transmission, la liste des programmes activés, la durée sélectionnée et les paramètres de lecture, de pause et de répétition. Un grand nombre de programmes ou un nombre élevé de répétitions augmentera la durée totale. En cas de doute, rétablissez les valeurs précédemment définies et ne relancez la lecture qu'après les avoir vérifiées à nouveau.

### **3.5.12.5 Le rapport ne contient pas le contenu attendu**

Ouvrez la sélection de rapports et vérifiez le type de rapport sélectionné. Les sections Focus, Programmes et Notes de réponse ne sont disponibles que si elles figurent dans l'analyse ouverte. Vérifiez séparément les options d'impression enregistrées et les évaluations de l'IA pour chaque type de rapport.

### 3.5.13 FAQ sur Bucher Bioresonanz Triselect FE

#### **Une lecture rouge ou négative constitue-t-elle un diagnostic médical ?**

Non. Cela fait référence à une information négative ou contraignante au sein du modèle du programme énergétique. Il ne s'agit pas d'un diagnostic médical et cela ne permet en aucun cas d'affirmer la présence d'une maladie.

#### **Qu'est-ce qui sera diffusé pendant l'émission ?**

Selon le modèle de fonctionnement sous-jacent, les informations positives du client sont combinées à ses informations négatives inversées. Ces informations globales traitées, ainsi que les programmes de régulation activés, sont transmises dans le champ d'information du client via le matériel de transmission sélectionné.

#### **Dois-je choisir moi-même entre un examen initial et un scan de suivi ?**

BCS affiche une recommandation basée sur l'historique des analyses, la période définie et l'évaluation interne du système. En général, utilisez le bouton de suggestion légèrement plus grand situé à gauche. La sélection manuelle est possible, mais doit être réfléchie et transparente.

#### **Pourquoi ne puis-je pas voir la liste des 755 indications ?**

La base de données d'indications est un module de licence optionnel. La sélection manuelle n'est pas possible sans activer les programmes de biorésonance Bucher.

#### **Quelle est la différence entre la sélection de programme et l'analyse de programme ?**

Lors de la sélection d'un programme, l'utilisateur détermine manuellement les indications à envoyer. L'analyse du programme est un module complémentaire distinct qui, lors de l'analyse initiale, identifie les résonances avec les programmes de régulation enregistrés.

#### **Les indices de résonance dans les conversations avec les clients peuvent-ils être cités comme une cause ?**

Non. Ce sont des amorces de conversation au sein du modèle énergétique. Formulez-les comme des sujets possibles et examinez-les avec le client, sans poser de diagnostic ni établir de lien de causalité.

#### **Une évaluation de l'IA peut-elle être incluse dans le rapport sans vérification ?**

Non. Chaque réponse de l'IA doit être vérifiée quant à son exactitude, sa correction linguistique et sa conformité à la réglementation sur la protection des données. Les énoncés à connotation médicale, les diagnostics, les promesses de guérison et les conclusions inexacts doivent être supprimés ou corrigés.

## 3.6 Bucher Stress Balance

### 3.6.1 Aperçu et utilisation prévue

#### 3.6.1.1 Objet et champ d'application

Bucher Stress Balance est un module de biofeedback activable au sein de Bucher Coaching Systems. Conçu principalement pour les situations où le client est physiquement présent, il combine un environnement visuel et auditif apaisant avec l'animation d'un papillon. Grâce au capteur CA ou à une interface esprit-matière adaptée, le client reçoit un retour visuel immédiat sur sa progression.

L'accent est mis sur la conscience de soi, l'attention focalisée et l'expérience consciente du calme. Le client observe comment le mouvement et la position du papillon évoluent tandis qu'il tente de se détendre. Cet exercice peut être pratiqué avant une séance de coaching, entre deux étapes de travail, ou comme une phase de relaxation et de réflexion à part entière.

#### 3.6.1.2 Aperçu des principales fonctions

- Processus manuel avec auto-évaluation à l'aide de trois émoticônes.
- Boucle de biofeedback visuel avec un papillon animé, des images de la nature et des sons ambiants optionnels.
- Indicateur de stress servant d'affichage interne de la progression du programme.
- Sélection d'un environnement aléatoire ou fixe, d'une illustration de papillon appropriée ou choisie manuellement, et d'un son approprié ou choisi manuellement.
- Insérez vos propres images de fond JPG.
- Mode automatique pour une application largement autonome, par exemple dans une salle d'attente.
- Rapport final optionnel contenant les données du client, la vue finale et les informations sur les couleurs et les impulsions utilisées pendant le processus.
- Utilisation optionnelle de l'affichage de Stress Balance comme accompagnement visuel des séquences de transmission BCS compatibles.

#### 3.6.1.3 Dépendance de licence

Bucher Stress Balance nécessite une activation séparée. Sans licence, le module ne s'affichera pas ou ne pourra pas être ouvert. Le fonctionnement de certains matériels et fonctions automatiques dépend également des équipements connectés et configurés dans BCS.

#### 3.6.1.4 Démarcation

Stress Balance n'est pas un test de stress médical et ne permet pas d'établir un diagnostic.

L'indicateur de stress, le mouvement du papillon et les informations de couleur ou d'impulsion font partie du système de biofeedback interne du programme. Il ne s'agit pas de valeurs de laboratoire et elles ne doivent en aucun cas servir à diagnostiquer ou à exclure une maladie physique ou mentale.

### 3.6.2 Principe de fonctionnement et symbolisme

#### 3.6.2.1 Le biofeedback comme feedback visible

Lors d'une séance de biofeedback, les informations corporelles sont présentées de manière à ce que le client puisse percevoir immédiatement les changements. Dans la méthode Stress Balance, le papillon joue ce rôle. Le signal de rétroaction fourni par l'interface esprit-matière influence le

processus affiché. Le client observe la réaction et concentre consciemment son attention sur le calme, la respiration et le lâcher-prise.

L'application crée ainsi une boucle de rétroaction : une situation plus calme modifie l'apparence du papillon ; cette apparence visiblement plus calme peut, à son tour, favoriser la concentration et la relaxation. La réaction du client est individuelle. Aucun résultat spécifique ne peut être garanti.

### **3.6.2.2 Signification du papillon**

Le papillon a été choisi comme symbole simple, inoffensif et porteur de connotations positives. Sa métamorphose peut également symboliser le changement. Lors d'un dialogue avec un client, par exemple, on peut lui demander quel changement ou quelle forme d'amélioration il souhaite dans sa situation actuelle.

L'objectif pratique de l'animation est de calmer suffisamment le papillon pour qu'il se pose sur la fleur et détende ses ailes. Cette représentation est un symbole de retour d'information et non une évaluation objective du client.

### **3.6.2.3 Rôle de l'environnement et du son**

Les scènes de nature et les sons ambiants créent un environnement visuel et auditif apaisant. Ils sont destinés à détourner temporairement l'attention des pensées angoissantes et à la recentrer sur une tâche clairement définie. L'environnement doit être agréable pour le client ; les images et les sons perturbants, stressants ou trop intenses doivent être évités.

## **3.6.3 Prérequis et préparation**

### **3.6.3.1 Exigences techniques**

- Le système BCS est installé et l'Stress Balance Bucher est activé.
- Le capteur CA ou toute autre interface esprit-matière destinée à l'Stress Balance est connecté et activé dans les propriétés de l'analyse.
- Les fichiers image, texture et son requis sont disponibles.
- Un appareil audio fonctionnel et correctement réglé est disponible pour la lecture du son.

### **3.6.3.2 Préparation des clients**

Avant d'ouvrir Stress Balance, veuillez sélectionner le client concerné. Ceci est particulièrement important si un rapport doit être généré ultérieurement. Expliquez brièvement que le papillon est une représentation de biofeedback et ne constitue pas une évaluation médicale du niveau de stress actuel.


Si possible, assurez-vous que le client adopte une position assise confortable, que l'écran soit bien visible et que le volume sonore soit agréable. Il doit pouvoir tenir le capteur conformément aux instructions de l'appareil sans forcer inutilement sur sa main. Interrompez l'application si elle est perçue comme inconfortable, trop intense ou stressante.

### **3.6.3.3 Situations d'application appropriées**

- Pour une transition en douceur après l'arrivée et avant une séance de coaching.
- Interrompre brièvement le flux incessant de pensées par une tâche d'observation clairement définie.
- Pour une introspection sur la manière dont la tension, l'attention et la paix intérieure sont vécues.
- En guise de phase de relaxation préparatoire avant une autre application, si le client le souhaite.

- Le mode automatique est proposé comme service facultatif dans la salle d'attente, sous réserve du respect des règles de protection des données, d'instructions et d'hygiène.

### 3.6.4 Réglage des paramètres de Stress Balance

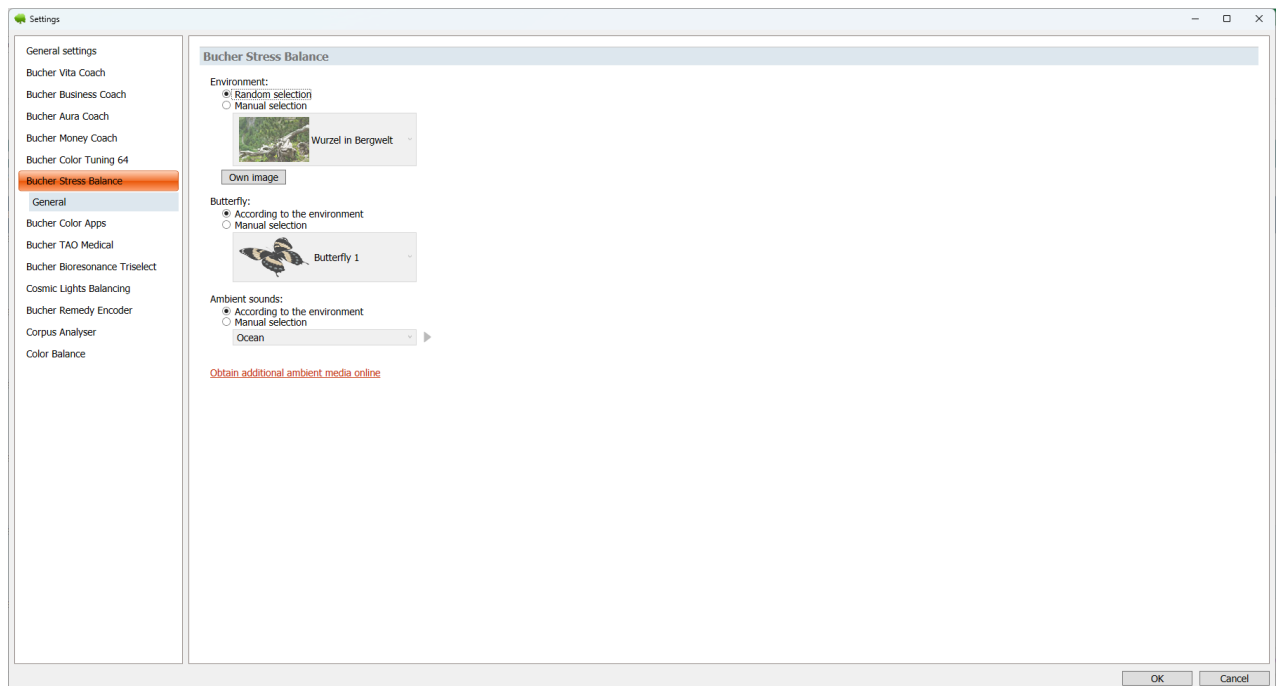

Paramètres de Stress Balance

#### 3.6.4.1 Ouvrir la zone des paramètres

Ouvrez les paramètres BCS et sélectionnez la section Stress Balance, puis Général. Cette section s'affiche uniquement si l'option Stress Balance est activée. Les modifications seront appliquées aux applications suivantes ; veuillez donc vérifier votre sélection avant chaque rendez-vous client.

#### 3.6.4.2 Sélectionner l'environnement

Pour l'environnement, vous pouvez choisir entre une sélection aléatoire et une sélection manuelle. En mode aléatoire, BCS détermine un thème d'arrière-plan disponible au démarrage. En mode manuel, vous spécifiez un thème particulier. Utilisez une sélection fixe si vous souhaitez convenir de l'environnement avec le client au préalable.

#### 3.6.4.3 Sélectionner papillon

Le papillon peut être sélectionné automatiquement en fonction de l'environnement choisi ou manuellement. En cas de sélection automatique, BCS utilise l'image du papillon déjà intégrée à l'arrière-plan. La sélection manuelle est utile si l'on préfère une couleur ou une texture particulière.

#### 3.6.4.4 Sélectionnez et écoutez le son ambiant

Le son d'ambiance peut être sélectionné automatiquement pour correspondre à l'environnement ou manuellement. Si vous choisissez la sélection manuelle, vous pouvez prévisualiser le son à l'aide du bouton Lecture et l'arrêter à tout moment. Vérifiez le volume avant de lancer l'application. Selon la version du programme et votre connexion Internet, vous pouvez télécharger des sons d'ambiance supplémentaires via le lien fourni.

### 3.6.4.5 Ajouter votre propre image de fond


Cliquez sur « Image personnelle ». Saisissez une brève description de l'image et sélectionnez le fichier JPG souhaité. Après prévisualisation, insérez l'image à l'aide de « Insérer une image ». L'image sera ajoutée à la sélection d'images pour l'Stress Balance et pourra ensuite être utilisée comme environnement manuel.

Idéalement, utilisez une image JPG au format paysage d'environ 3000 × 2000 pixels. Les images plus petites ou avec des proportions différentes peuvent entraîner des bordures visibles ou un aspect pixélisé. Utilisez uniquement des images pour lesquelles vous disposez des droits d'utilisation nécessaires et évitez de contenir des informations personnelles inutiles.

## 3.6.5 Effectuer une séance manuelle avec Stress Balance

### 3.6.5.1 Ouvrir Stress Balance

Ouvrez Bucher Stress Balance via le bouton rond « Fonctions supplémentaires ». BCS vérifie l'activation et la présence d'au moins un client actif. Vérifiez le client actuel. La fenêtre Stress Balance affiche l'environnement sélectionné, l'icône papillon, l'indicateur de stress, le bouton des propriétés d'analyse, ainsi que les options Démarrer, Démarrer en mode automatique et Fermer.

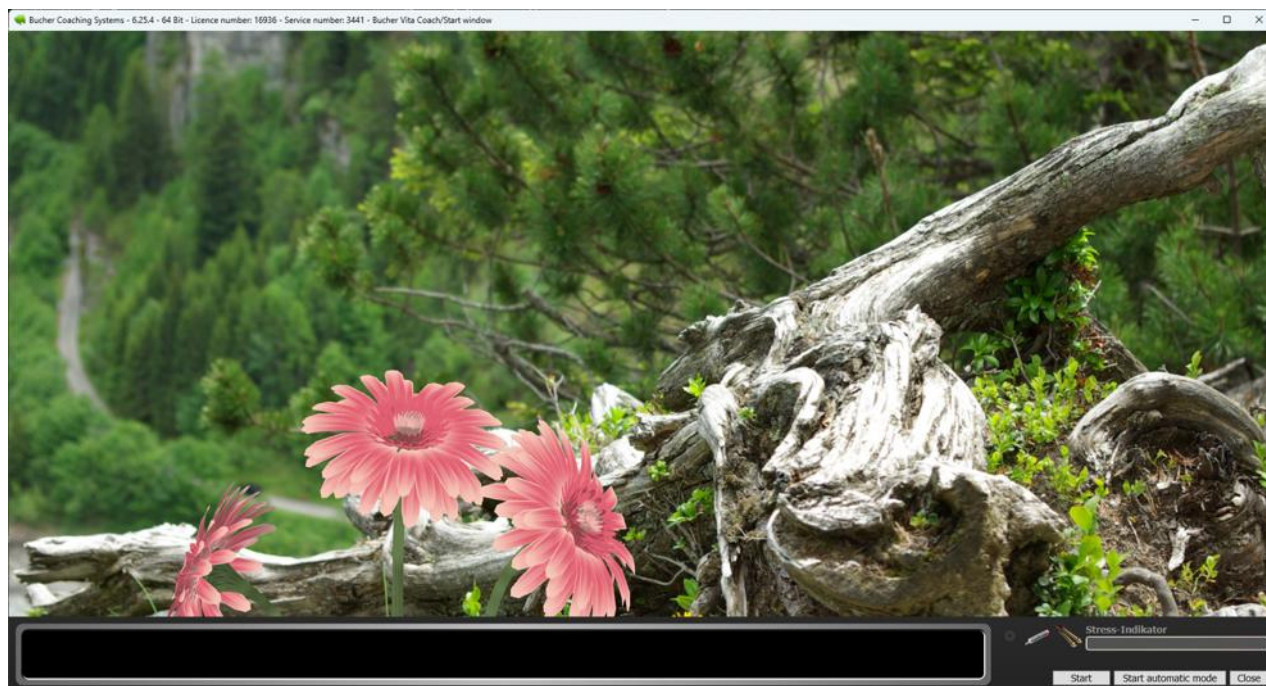

Démarrer l'application manuelle de Stress Balance

### 3.6.5.2 Vérifier les propriétés de l'analyse

Avant la première utilisation du scanner, ouvrez les propriétés de numérisation via l'icône d'engrenage. Vérifiez l'interface esprit-matière utilisée et assurez-vous que le capteur CA ou les applicateurs manuels sont actifs. Le mode automatique est disponible uniquement si une interface appropriée a été détectée et sélectionnée.

### 3.6.5.3 Lancez l'application et sélectionnez l'auto-évaluation


- Cliquez sur Démarrer.
- BCS demande au client comment il se sent en ce moment.

- Le client choisit un smiley souriant, neutre ou triste. Ce choix détermine le point de départ de l'affichage interne du programme.
- Récupérez le capteur CA comme indiqué.
- Attendez que la connexion soit établie et que le processus de biofeedback proprement dit commence.

#### 3.6.5.4 Observation des papillons

Durant ce processus, le papillon modifie ses mouvements, le battement de ses ailes et la distance qui le sépare de la fleur. L'indicateur de stress témoigne de la progression interne du programme. Le client peut s'asseoir tranquillement, respirer calmement et observer sans avoir à forcer un résultat précis.

Le BCS peut également afficher des informations sur les variations de couleur et le pouls. Ces informations font partie de la représentation du programme énergétique. Elles doivent être interprétées comme des impulsions concomitantes et non comme un diagnostic ou une affirmation confirmée.

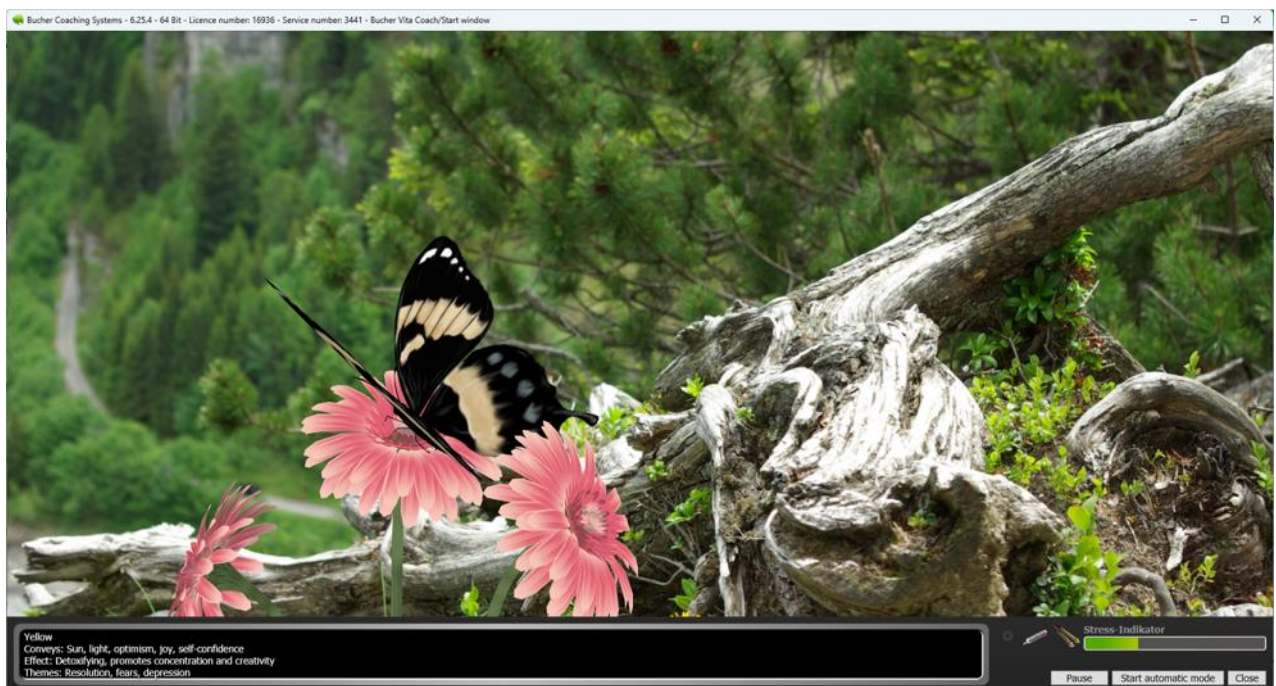

Stress Balance pendant l'application

#### 3.6.5.5 Mettre en pause et reprendre l'application

Pendant l'exécution d'une séquence, le bouton Démarrer se transforme en Pause. En pause, l'animation, le traitement des retours et la lecture audio sont interrompus. Le bouton Reprendre permet de relancer la séquence à partir du point où elle s'était arrêtée. Utilisez la fonction Pause, par exemple, pour une brève interruption ou pour ajuster la position du capteur.

#### 3.6.5.6 Interruption du contact

Si le signal de retour est interrompu, que le papillon s'éloigne à nouveau de la fleur ou que le processus attend une reconnexion, maintenez le capteur en place. Si l'interruption se répète, arrêtez le processus et vérifiez la connexion, les propriétés de balayage et la position du capteur.

### **3.6.5.7 Fin de l'application**

Une fois le rendu interne du programme terminé, le papillon se pose sur la fleur et déploie paisiblement ses ailes. BCS interrompt alors le processus en cours, enregistre une image finale et peut ensuite demander si un rapport doit être généré.

Dans certaines itérations, l'état final du programme ne peut être atteint. Le BCS le signale et interrompt le processus en conséquence. Ceci ne constitue ni un jugement négatif sur le client, ni une conclusion médicalement pertinente. Une itération ultérieure ne doit être effectuée que si le client le demande.

### **3.6.5.8 Annuler ou fermer l'application**

Fermer la fenêtre mettra fin à l'application en cours. Les animations, les sons, le traitement des données des capteurs et les minuteurs actifs seront arrêtés. Avant de fermer, vérifiez si le rapport souhaité a déjà été généré.

## **3.6.6 Classification des indicateurs de stress et retour d'information**

### **3.6.6.1 Indicateur de stress**

L'indicateur de stress affiche une tendance relative au sein de l'application. Il facilite l'orientation visuelle, mais ne saurait être comparé à un score de stress médical, une échelle psychologique ou une valeur de laboratoire. Les comparaisons entre individus différents ou entre rendez-vous espacés ne constituent donc pas une évaluation objective.

### **3.6.6.2 Auto-évaluation et progrès**

Le choix de l'émoticône décrit la situation initiale subjective. L'affichage suivant relie cette information au signal de retour d'information continu et aux processus internes du programme. Ainsi, la conversation peut aborder à la fois l'auto-évaluation initiale et l'expérience personnelle lors de l'utilisation de l'application.

### **3.6.6.3 Invites à la conversation**

- Qu'est-ce qui vous a aidé à vous calmer ?
- À quel moment avez-vous remarqué un changement ?
- Une image, un son ou l'activité avec le papillon ont-ils été particulièrement utiles ou perturbateurs ?
- Quelle petite action pourrait vous aider dans une situation quotidienne similaire ?

Exprimez vos arguments ouvertement et laissez au client la possibilité de n'avoir perçu aucun changement. L'affichage à l'écran ne doit pas servir à contredire sa perception.

## 3.6.7 Utilisation du mode automatique



Mode automatique d'équilibrage du stress

### 3.6.7.1 Objectif et conditions préalables

Le mode automatique guide le client pas à pas dans l'auto-évaluation et l'application du traitement. Il est particulièrement adapté comme option volontaire et largement autonome dans les salles d'attente. Les prérequis sont l'activation de Stress Balance, un capteur CA correctement configuré ou des applicateurs manuels adaptés, et une brève instruction.

Si le mode automatique est proposé sur un ordinateur sans surveillance dans la salle d'attente, seul un client virtuel neutre, sans données personnelles, peut être sélectionné dans BCS. Les données réelles des clients ne peuvent être ni affichées ni utilisées sur ce poste de travail. De plus, aucun rapport personnel ne peut être généré pour les applications anonymes.

### 3.6.7.2 Démarrer le mode automatique

- Ouvrez Stress Balance et vérifiez les propriétés de l'analyse.
- Cliquez sur Démarrer le mode automatique.
- Suivez les instructions pour maintenir le capteur enfoncé, puis relâchez-le. Cela permet à BCS de confirmer que le client a bien compris les commandes.
- Le BCS affiche successivement un smiley triste, neutre et joyeux. Le client prend le capteur en main pendant l'affichage correspondant à son auto-évaluation du moment.
- Si aucune sélection n'est effectuée dans le délai imparti, la séquence d'introduction recommence.

### 3.6.7.3 Processus automatique

Après avoir sélectionné un smiley, BCS affiche l'environnement préparé et lance la présentation du biofeedback. Le client tient le capteur pendant l'application. En cas d'interruption de contact, un message s'affiche brièvement pour inviter le client à reprendre le capteur en main. Si la connexion n'est pas rétablie, le mode automatique repasse en mode veille.

### 3.6.7.4 Fin de la séance et cycle suivant

Une fois l'opération terminée, BCS en informe le client par un signal sonore et un message à l'écran. Le capteur doit ensuite être relâché. Selon le résultat et les paramètres du programme, un rapport peut s'afficher. L'appareil repasse ensuite en mode veille et attend la prochaine utilisation.


### 3.6.7.5 Quitter le mode automatique

Cliquez sur « Quitter le mode automatique » avant de quitter votre poste de travail, de nettoyer le capteur, de changer de client ou de fermer BCS. Vérifiez ensuite qu'aucune donnée personnelle ni aucun rapport ne soit encore affiché.

### 3.6.7.6 Hygiène et surveillance dans la salle d'attente

Pour les capteurs partagés, établissez une procédure de nettoyage adaptée aux spécifications de chaque appareil. Assurez-vous qu'une assistance soit facilement accessible et que l'utilisation reste volontaire. Le mode automatique ne remplace pas la supervision si le client ne comprend pas pleinement le fonctionnement de l'appareil ou s'il se sent mal à l'aise pendant son utilisation.

## 3.6.8 Création et exportation d'un rapport

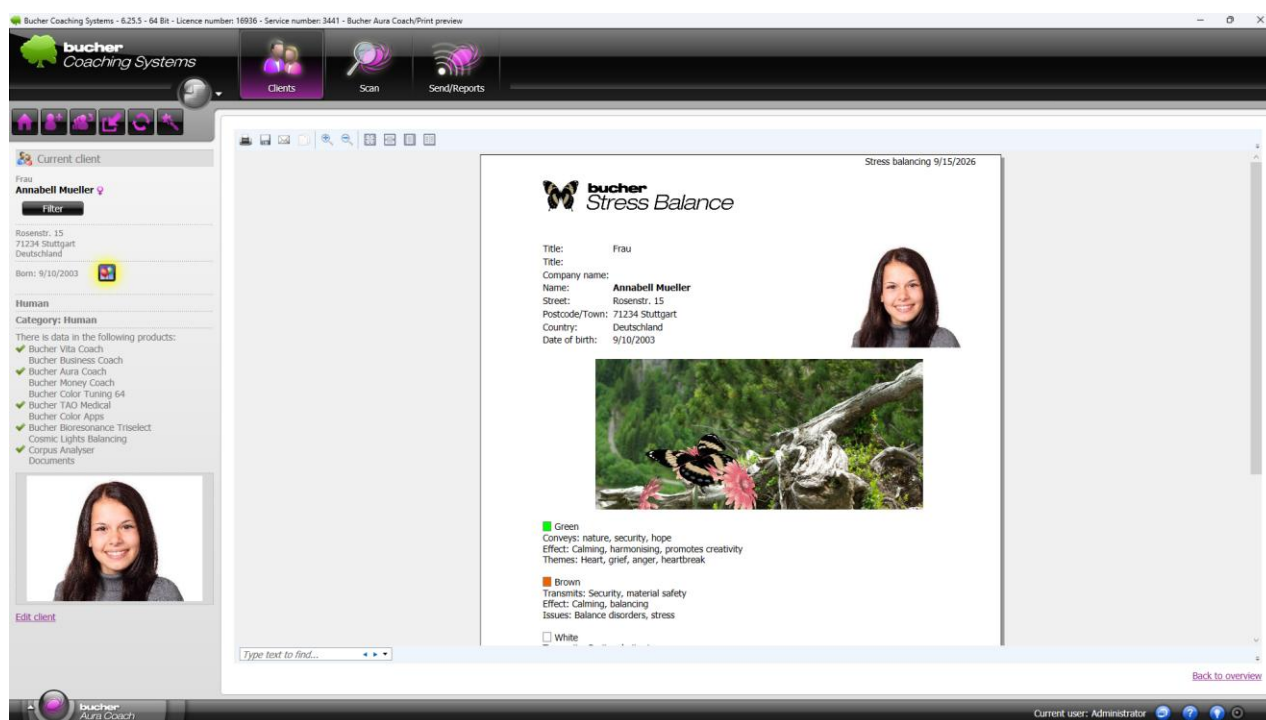

Créer un rapport de Stress Balance

### 3.6.8.1 Proposition de création d'un rapport après la séance

Une fois le traitement terminé, BCS peut vous demander si un rapport doit être généré. Confirmez cette demande uniquement si le client approprié est sélectionné et si une documentation est souhaitée. Dans le cas contraire, ignorez la demande.

### 3.6.8.2 Contenu du rapport

Le rapport de Stress Balance peut inclure les données et l'image du client, une vue finale enregistrée du papillon, ainsi que les informations sur la couleur et les impulsions utilisées pendant le processus. Les impulsions répétées et consécutives sont regroupées pour l'affichage.

L'indicateur de stress, l'image finale et les informations relatives à l'impulsion figurant dans le rapport ne constituent pas des constatations médicales. Discutez de leur contenu comme d'un élément de documentation de la demande et comme d'une aide potentielle à la réflexion. N'y incluez aucun diagnostic ni promesse de guérison.

### **3.6.8.3 Impression et PDF**

Ce rapport utilise les fonctions de génération de rapports standard de BCS. Selon vos paramètres d'impression et de format PDF, il peut être imprimé ou enregistré au format PDF. Avant l'impression, veuillez vérifier le nom, la photo du client et l'emplacement du fichier. Les rapports contiennent des informations personnelles et doivent être protégés en conséquence.

## **3.6.9 Stress Balance dans les autres processus BCS**

### **3.6.9.1 Accompagnement visuel d'une émission**

Sur les produits BCS compatibles, l'option « Stress Balance » peut être sélectionnée dans les paramètres matériels ou de transmission. Dans ce cas, l'icône papillon accompagne une séquence de transmission prédéfinie. La durée, les informations de couleur et la conclusion dépendent du produit appelant.

Cette utilisation diffère de l'application autonome de Stress Balance. Par conséquent, vérifiez le client sélectionné, la diffusion, la durée et le matériel actif dans le module initial. Cette option n'est pas disponible pour tous les produits, licences ou configurations matérielles.

## **3.6.10 Utilisation responsable**

### **3.6.10.1 Formuler des attentes réalistes**

Le stress est une réaction humaine normale face aux situations difficiles. Chacun vit le stress et la relaxation différemment. Par conséquent, Stress Balance doit être présenté comme un outil de biofeedback, de prise de conscience de soi et de soutien à la relaxation, et non comme un traitement contre une maladie ou une garantie de réduction du stress.

### **3.6.10.2 Troubles physiques et psychiques**

Stress Balance ne remplace pas une évaluation médicale, psychothérapeutique ou psychologique. En cas de symptômes graves, persistants ou s'aggravant, de perturbation importante de la vie quotidienne ou de crise aiguë, une aide professionnelle appropriée est nécessaire. L'utilisation de ce produit ne doit en aucun cas interrompre ou retarder un traitement nécessaire.

### **3.6.10.3 Caractère volontaire et limites personnelles**

Le client décide de participer, d'écouter un son, d'utiliser une image spécifique ou d'interrompre le processus. Si le client est sensible aux images animées, aux sons ou à une exposition prolongée à l'écran, il convient d'adapter l'environnement ou d'arrêter l'application.

### **3.6.10.4 Protection des données**

Sélectionnez le client par son nom uniquement si une documentation personnalisée est requise et autorisée. Protégez les écrans, les impressions et les fichiers PDF contre tout accès non autorisé. Activez le filtre client pour masquer tous les autres clients enregistrés dans le programme. Vos images d'arrière-plan ne doivent contenir aucune information personnelle concernant une autre personne.

## 3.6.11 Erreurs courantes et solutions

### **Le bilan du stress n'est pas affiché ou ne peut pas être ouvert.**

Vérifiez l'activation du produit. Sans licence Stress Balance, l'élément de menu ne sera ni visible ni utilisable. Assurez-vous également qu'au moins un client est installé dans BCS.

### **Le mode automatique est inutilisable.**

Ouvrez les propriétés de numérisation et vérifiez si un capteur CA approprié ou des applicateurs manuels adéquats sont détectés et activés. Le mode automatique restera désactivé sans interface esprit-matière appropriée.

### **Le papillon s'éloigne de la fleur, ou le processus est en attente.**

Le signal de retour a été interrompu. Vérifiez que le capteur est toujours correctement positionné, que le câble et la connexion sont stables et que l'interface appropriée est activée dans les propriétés de numérisation.

### **Il n'y a pas de bruit ambiant.**

Vérifiez le volume et le périphérique de sortie, le fichier audio sélectionné, ainsi que toute sélection manuelle ou dépendante de l'environnement. Écoutez le fichier dans les paramètres de Stress Balance à titre de test.

### **Votre image de fond présente des bordures ou apparaît floue.**

Utilisez un fichier JPG suffisamment grand au format paysage, idéalement d'environ 3000 × 2000 pixels. Les formats très différents ou les fichiers de petite taille ne peuvent pas être affichés en plein écran et avec une image nette.

### **Le processus ne peut pas être lancé.**

Vérifiez les propriétés de l'analyse, le matériel détecté et le client actuel. Si nécessaire, fermez la fenêtre Stress Balance, reconnectez-vous et rouvrez le module.

### **Aucun rapport n'est publié après l'achèvement des travaux.**

Un rapport n'est fourni que dans le cadre du processus de clôture complet. Veuillez également vérifier le client sélectionné et la configuration générale d'impression/PDF de BCS.

### **Impossible de charger les médias environnants supplémentaires.**

Vérifiez votre connexion internet et si le téléchargement est toujours proposé dans les paramètres de votre programme Stress Balance. Les images et les sons déjà enregistrés localement peuvent être utilisés dans tous les cas.

## 3.6.12 FAQ sur Bucher Stress Balance

### **L'indicateur de stress est-il une valeur de stress objective ?**

Non. Il s'agit d'un indicateur de progrès relatif et interne au programme pour la demande actuelle, et non d'une évaluation médicale ou psychologique.

### **Le client doit-il être présent ?**

L'application principale est conçue pour un client physiquement présent, car le capteur CA, ou interface esprit-matière, est maintenu en place pendant la séance de biofeedback. Bien qu'une

application entièrement à distance soit possible, elle est moins efficace en raison de l'absence de retour d'information. Cependant, il serait envisageable d'utiliser Zoom ou un autre logiciel pour transmettre l'écran d'évaluation du niveau de stress au client.

### **Quel smiley le client doit-il choisir ?**

Le client choisit spontanément la représentation qui correspond le mieux à sa perception actuelle. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix.

### **Que signifie le fait que le papillon n'atteigne pas la fleur ?**

Cela signifie simplement que l'état final prévu du programme n'a pas été atteint lors de cette exécution. Il ne faut en tirer aucun diagnostic, aucune évaluation de la coopération ni aucune conclusion négative concernant le client.

### **La méthode Stress Balance peut-elle fonctionner dans la salle d'attente sans personnel ?**

Le mode automatique est conçu pour un fonctionnement largement autonome. Toutefois, il est indispensable de prévoir des instructions, une utilisation volontaire, une assistance disponible, la protection des données et l'entretien des capteurs.

### **Puis-je utiliser ma propre photo de vacances ou de nature ?**

Oui. L'image doit être au format JPG et en format paysage suffisamment grand. Vérifiez les droits d'auteur et évitez les images susceptibles de heurter la sensibilité du client.

### **Stress Balance remplace-t-il un traitement ou une consultation ?**

Non. Stress Balance est un outil complémentaire de biofeedback et d'introspection. Il ne remplace pas un suivi médical, psychothérapeutique, psychologique ou tout autre soutien professionnel nécessaire.

## 4 Modules complémentaires communs à plusieurs produits

### 4.1 Évaluation de l'IA : Utilisation de l'intelligence artificielle dans le BCS

#### 4.1.1 Vue d'ensemble

Ce chapitre décrit comment utiliser l'intelligence artificielle, ou IA en abrégé, pour évaluer les résultats d'analyse dans les systèmes de coaching Bucher.

La fonction d'IA vous aide à mieux comprendre les résultats d'analyse, à identifier les corrélations et à générer des textes pour un usage professionnel ultérieur. Par exemple, elle peut expliquer les résultats d'analyses individuelles, formuler des suggestions thérapeutiques, créer des recommandations compréhensibles pour le client ou suggérer des affirmations personnalisées. L'IA ne remplace pas votre jugement professionnel. C'est un outil d'aide à la décision. Chaque réponse de l'IA doit être vérifiée par l'utilisateur, modifiée si nécessaire et justifiée par un professionnel.

Important : L'IA n'est pas directement intégrée à BCS. Elle n'a aucun accès direct à vos données BCS. Le transfert s'effectue intentionnellement via le presse-papiers. Vous conservez ainsi le contrôle des informations transmises à l'IA.

#### 4.1.2 Objectif de l'évaluation de l'IA

L'évaluation par l'IA permet de replacer les résultats de l'analyse dans un contexte compréhensible. Elle peut aider,

- Expliquer individuellement les résultats de l'analyse,
- afin de rendre visibles les liens possibles entre les résultats d'analyse et les problèmes des clients,
- Pour formuler des approches thérapeutiques ou de coaching,
- rédiger une recommandation pour le client qui soit facile à comprendre pour un profane,
- Pour suggérer des affirmations et des programmes d'exercices,
- Pour interpréter symboliquement les images fractales, à condition que le module fractal soit sous licence,
- pour répondre à vos questions spécifiques grâce à des invites individuelles.

L'évaluation par IA peut s'avérer particulièrement utile lorsqu'il y a de nombreux résultats d'analyse ou lorsque les relations sont difficiles à évaluer au premier coup d'œil.

#### 4.1.3 Protection des données et principes fondamentaux

BCS ne transfère pas automatiquement l'intégralité des données client à l'IA. Celle-ci ne reçoit que les informations nécessaires à l'évaluation concernée.

Le transfert s'effectue dans les deux sens :

1. BCS génère une invite préconfigurée.  
Résultat : l'invite contient les données d'analyse requises et les informations sélectionnées issues des données client.

2. La requête est transmise à un système d'IA externe via le presse-papiers.

Résultat : l'IA peut analyser la requête et générer une réponse.

3. La réponse de l'IA est copiée dans BCS via le presse-papiers.

Résultat : la réponse est disponible dans BCS pour traitement, documentation et affichage.

Important : N'utilisez pas les noms des clients ni d'autres données permettant de les identifier directement, sauf si cela est nécessaire à l'évaluation par IA. Dans la mesure du possible, utilisez les numéros de client, l'âge, le sexe, l'espèce, le domaine d'intervention, les diagnostics, les symptômes et les résultats d'analyse.

Attention : les systèmes d'IA peuvent commettre des erreurs. Veuillez examiner attentivement chaque réponse avant de l'enregistrer, de l'imprimer, de l'exporter au format PDF ou de la partager avec un client.

#### 4.1.4 Prérequis

Pour utiliser l'évaluation de l'IA, vous aurez besoin de :

- BCS dans une version qui prend en charge l'évaluation par IA (à partir de la version 6.23.4),
- une analyse terminée avec les résultats enregistrés,
- Si nécessaire, les champs « Diagnostics » et « Symptômes » du dossier client seront remplis.
- Accès à un système d'IA approprié,
- un presse-papiers fonctionnel sous Windows,
- une expertise technique suffisante pour vérifier la réponse de l'IA.

Remarque : La qualité de la réponse de l'IA dépend fortement de la qualité des données d'entrée.

Plus vous documentez précisément la situation du client dans les sections « Diagnostics » et « Symptômes », plus l'IA pourra classer les résultats de l'analyse avec précision.

#### 4.1.5 Consigner de manière significative les diagnostics et les symptômes

L'IA peut mieux évaluer les résultats d'analyse lorsqu'elle connaît le contexte du client. Ce contexte est principalement fourni par les champs « Diagnostics » et « Symptômes ».

Utilisez le champ « Diagnostics » pour les résultats médicalement confirmés.

Utilisez le champ « Symptômes » pour tout autre problème pertinent concernant le client.

Cela inclut non seulement les problèmes physiques, mais aussi les problèmes stressants du quotidien, par exemple :

- stress professionnels,
- conflits sociaux,
- problèmes familiaux
- Partenariat,
- soucis financiers
- Questions éducatives,
- Situation du logement,
- Motivation,
- nutrition et exercice
- Image de soi,
- Confiance en soi,
- croyances limitantes
- stress émotionnel.

Conseil pratique : n'entrez pas seulement des termes isolés dans le champ « Symptômes ». De courtes listes à puces ou quelques phrases explicatives aident l'IA à mieux situer les résultats de l'analyse dans leur contexte global.

### **4.1.6 Recréer l'évaluation de l'IA à partir d'informations supplémentaires**

Si des diagnostics ou des symptômes sont ajoutés après l'analyse, il n'est généralement pas nécessaire de la refaire. Si vous ajoutez ces informations au dossier client et qu'une évaluation par IA a déjà été réalisée, supprimez l'évaluation existante et générez-en une nouvelle afin que vos ajouts soient pris en compte. L'analyse initiale reste inchangée.

### **4.1.7 Messages d'invite standard dans BCS**

Une invite est une tâche préparée pour l'IA. Elle contient la question posée à l'IA, les données client pertinentes et les résultats de l'analyse.

BCS propose plusieurs invites standard. Celles-ci diffèrent par leur objectif.

#### **Consigne 1 : Évaluation des résultats individuels des examens d'imagerie**

Ce message explique individuellement les principaux résultats d'analyse. Il est particulièrement utile si vous souhaitez comprendre la signification de chaque entrée.

#### **Questionnaire 2 : Évaluation thérapeutique**

Cette invite est destinée aux utilisateurs professionnels. Elle peut suggérer des définitions de problèmes, des solutions possibles, des conseils thérapeutiques et des méthodes de soutien.

Important : Cette évaluation est destinée à l'utilisateur. Elle ne doit pas être transmise au client sans avoir été vérifiée.

#### **Question 3 : Recommandation au client**

Cette consigne permet de formuler une recommandation compréhensible et non médicale à l'intention du client. Le langage utilisé doit être positif, encourageant et pratique pour la vie quotidienne.

Cette invite est particulièrement adaptée aux rapports que le client est autorisé à lire.

#### **Consigne 4 : Affirmations et plan sur 4 semaines**

Ce module génère des affirmations personnalisées et un plan sur quatre semaines. Il convient aux personnes qui souhaitent travailler avec de courtes suggestions quotidiennes.

#### **Consigne 5 : Interprétation fractale**

Cette invite n'est disponible que si le module Fractal est sous licence. Elle sert à interpréter symboliquement les couleurs, les formes et les motifs d'une image fractale.

Remarque : Sans le module fractal, seules les invites standard sans interprétation fractale sont disponibles.

#### **Règle rapide à transmettre aux clients**

Les rapports/invites d'IA 1 et 2 sont destinés à un usage professionnel par les utilisateurs et les thérapeutes et ne doivent pas être transmis aux clients sans vérification préalable. Les rapports 3, 4 et, le cas échéant, 5 sont conçus pour une communication claire avec les clients. Néanmoins, veuillez relire et corriger chaque texte avant de le partager.

### 4.1.8 Quelles invites conviennent à quel usage

Toutes les invites ne sont pas adaptées à tous les usages.

**Les éléments suivants sont particulièrement adaptés à l'utilisateur (thérapeute / coach) :**

- « Évaluation des résultats individuels des examens d'imagerie »,
- "Évaluation thérapeutique".

Ces messages peuvent contenir des termes techniques, des conseils thérapeutiques et des interprétations plus approfondies.

**Les produits suivants conviennent particulièrement aux clients :**

- « Recommandation pour le client »,
- « Affirmations et plan sur 4 semaines »,
- « Interprétation des fractales », à condition qu'elle soit appropriée et autorisée.

Ces messages sont généralement plus compréhensibles, positifs et davantage axés sur l'entraide et l'orientation.

Attention : Ne transmettez pas une réponse d'IA à un client sans l'avoir vérifiée. Supprimez les affirmations trompeuses, trop directes, trop anxiogènes ou techniquement inappropriées.

### 4.1.9 Processus d'évaluation de l'IA

Cette section décrit le processus typique de création d'une évaluation par IA à partir d'un résultat d'analyse.

**Consignez les antécédents médicaux du patient (diagnostics / symptômes / problèmes du client).**

Résultat : Les diagnostics, les symptômes et les problèmes pertinents du client sont documentés.

**Effectuez l'analyse demandée.**


Résultat : Les résultats de l'analyse sont enregistrés et disponibles dans la section « Envoyer/Rapports ».

**Ouvrez la section « Envoyer/Rapports ».**

Résultat : Les paquets disponibles et les résultats de l'analyse sont affichés.

**Pour effectuer l'analyse souhaitée, ouvrez la fonction « IA ».**

Résultat : Les fonctionnalités d'IA de cette analyse sont affichées.

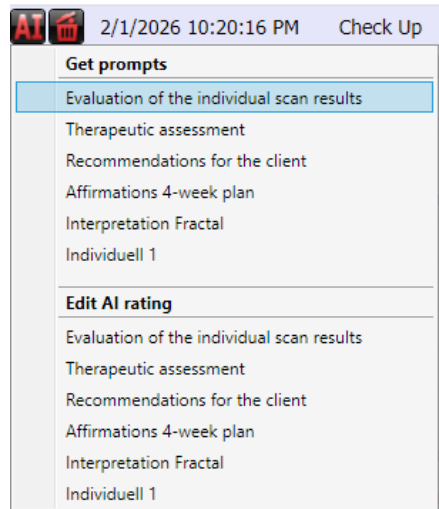

**Dans la section « Obtenir une invite », sélectionnez l'une des invites en cliquant dessus.**

Résultat : BCS crée l'invite et la copie dans le presse-papiers.

**Ouvrez le système d'IA souhaité (par exemple, ChatGPT.com).**

Résultat : Le champ de saisie de l'IA est visible.

**Collez l'invite de commande en utilisant « Ctrl+V ».**

Résultat : La requête préparée par BCS apparaît dans le champ d'entrée de l'IA.

**Envoyer la requête à l'IA.**

Résultat : L'IA génère une réponse.

**Copiez la réponse de l'IA dans votre presse-papiers. Utilisez l'icône de copie située sous la réponse de l'IA pour ce faire.**

Résultat : La réponse peut être réinsérée dans BCS.

**Revenez à BCS.**


Résultat : Le scan correspondant est toujours disponible.

**Ouvrez à nouveau « IA » et sélectionnez « Modifier la note de l'IA », puis l'entrée appropriée.**

Exemple : Si vous avez utilisé l'invite « Recommandation pour le client », sélectionnez également l'entrée « Recommandation pour le client » lors de la saisie.

Résultat : La réponse de l'IA est attribuée à la zone appropriée.

**Collez la réponse en cliquant sur « Coller depuis le presse-papiers AI ».**

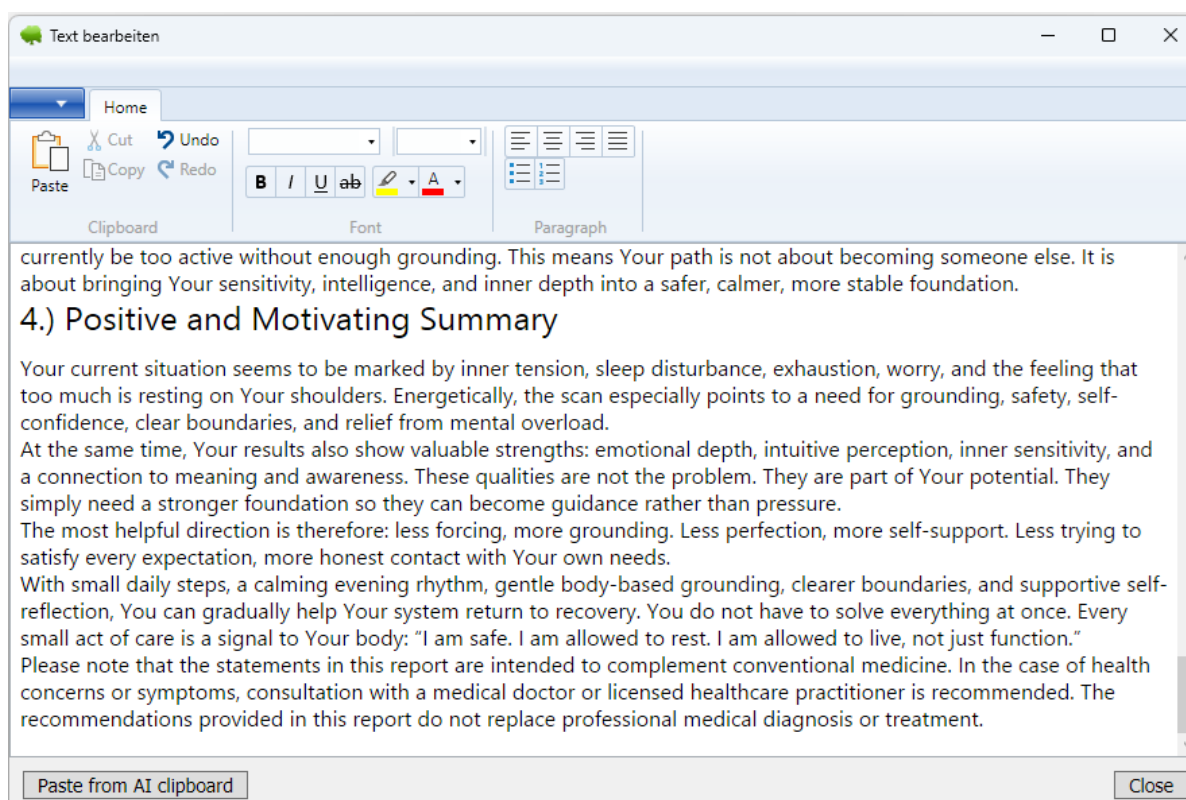

Résultat : La réponse de l'IA est disponible pour traitement dans le BCS.

**Vérifiez et corrigez le texte.**

Résultat : Le texte a été relu par des professionnels et peut être enregistré.

**Fermez la fenêtre d'édition.**

Résultat : Les modifications ont été enregistrées.

**Ouvrez l'aperçu avant impression si nécessaire.**

Résultat : Les évaluations de l'IA enregistrées apparaissent comme des entrées sélectionnables dans l'aperçu.

**Imprimez le rapport ou enregistrez-le au format PDF.**

Résultat : Le rapport peut être documenté ou transmis au client.

#### **4.1.10 Vérification et modification des réponses de l'IA**

Les réponses de l'IA ne doivent pas être acceptées sans vérification. Même les meilleures réponses peuvent contenir des formulations inappropriées, des inexactitudes techniques ou des affirmations trop générales.

Portez une attention particulière à :

- Ces déclarations sont-elles compréhensibles ?
- Les déclarations correspondent-elles à la description du client ?
- Aucune promesse de guérison n'est-elle faite ?
- Aucun diagnostic médical n'est-il établi ?

- Les recommandations sont-elles réalistes et responsables ?
- Le ton est-il adapté au client ?
- Le texte contient-il des passages sensibles qui devraient être supprimés ?

Une IA peut formuler des arguments convaincants, même si une affirmation est incorrecte. La responsabilité professionnelle incombe toujours à l'utilisateur.

#### 4.1.11 Utilisation d'invites personnalisées

Outre les invites standard, BCS vous permet de créer vos propres invites personnalisées. Cette fonctionnalité s'avère utile pour prendre en charge des analyses spécifiques ou vos propres flux de travail avec l'IA.

Exemples de questions individuelles :

- Sélection de produits adaptés parmi notre propre gamme de produits,
- questions de coaching spécifiques
- Logique d'évaluation individuelle pour une pratique spécifique,
- Des rapports rédigés dans un style spécifique,
- Résumés pour la documentation interne,
- Recommandations spécifiques pour des groupes cibles particuliers.

Important : Les invites personnalisées doivent être créées et testées avec soin. Une invite mal formulée conduit souvent à des réponses inexactes ou inutilisables.

#### 4.1.12 Activer et nommer l'invite individuelle


Cliquez sur le bouton rond « Fonctionnalités supplémentaires » en haut (info-bulle : « Fonctionnalités supplémentaires et d'aide »).



Bouton rond « Fonctionnalités supplémentaires »

Résultat : Le menu « Fonctions supplémentaires » s'affiche.


**Ouvrez « Paramètres ».**

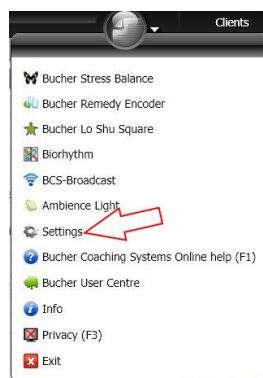

Accéder aux paramètres

Résultat : La fenêtre des paramètres s'ouvre.


Ouvrez la section « Évaluation de l'IA ».

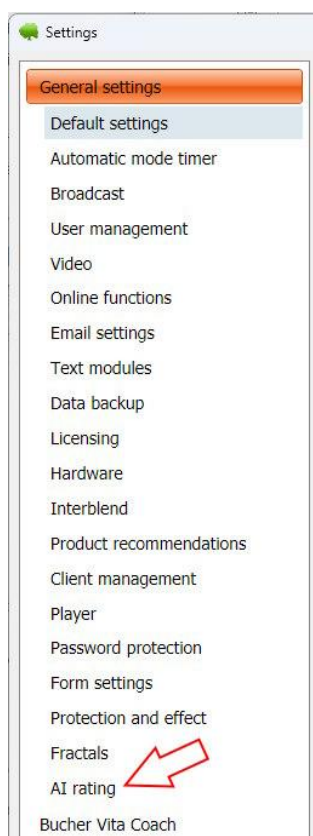

paramètres de notation IA


Résultat : Les paramètres d'invite de l'IA sont affichés.

Cliquez sur « Invites personnalisées » dans la section inférieure.

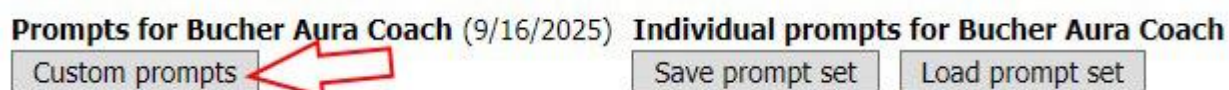

Résultat : La fenêtre « Invites personnalisées » s'ouvre.

## Activez une invite personnalisée en cochant la case.

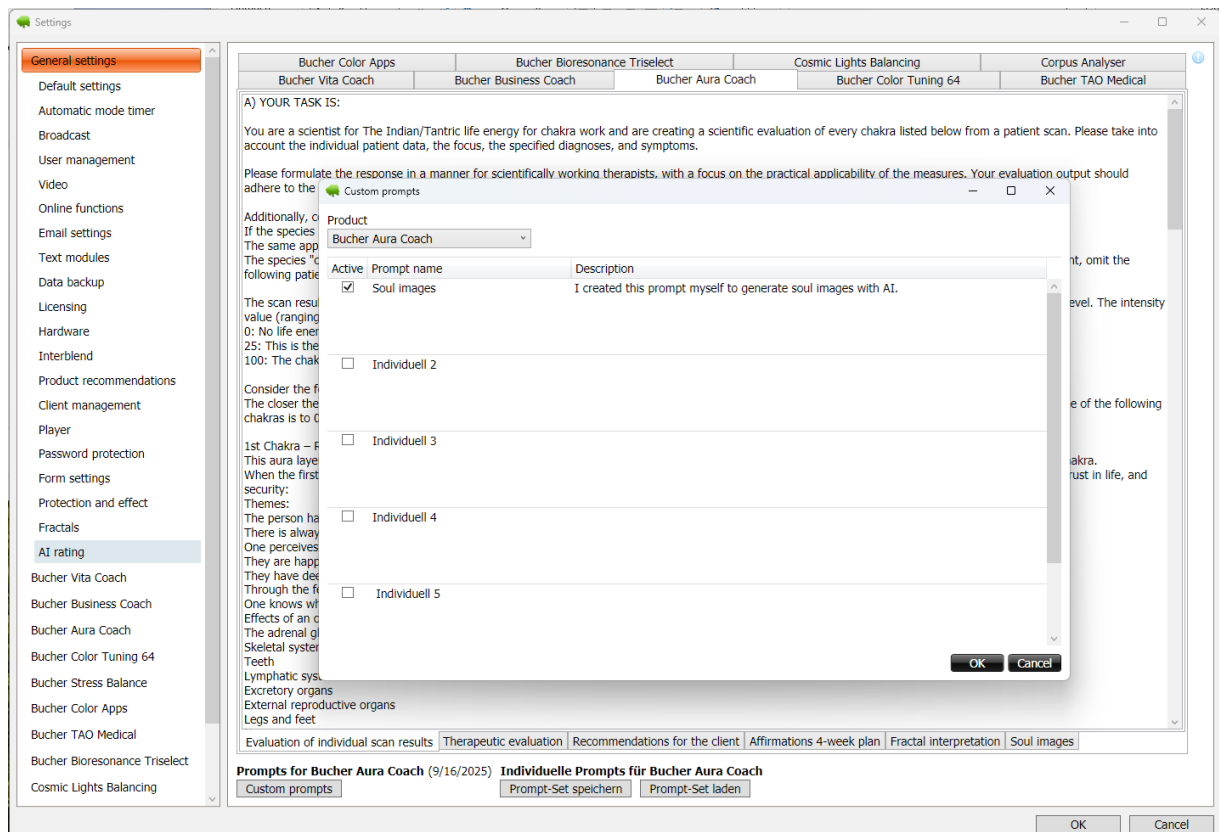

Créez 5 invites personnalisées supplémentaires

Résultat : L'invite individuelle est prête à être modifiée.

## Donnez un nom à l'invite en double-cliquant sur « Personnalisé ».

Résultat : Vous pouvez personnaliser le nom de cette invite. Vous pourrez ensuite la sélectionner ultérieurement grâce à ce nom. Il est également conseillé d'ajouter une description à l'invite. Cela vous permettra de la retrouver plus facilement.

## Confirmez avec « OK ».

Résultat : Un onglet distinct apparaît pour chaque invite.

## Saisissez ou modifiez l'invite dans le nouvel onglet (cliquez sur l'onglet DU BAS et saisissez l'invite).

Résultat : L'invite individuelle a été créée.

**Important :** Enregistrez la fenêtre de paramètres complète après utilisation. Ce n'est qu'ainsi que le texte d'invite saisi sera enregistré définitivement dans la base de données BCS locale. Si vous annulez les paramètres, toutes les modifications apportées aux textes d'invite depuis l'ouverture de la fenêtre seront perdues.

Les cinq invites standard sont en lecture seule. Seuls les cinq emplacements d'invite individuels peuvent être modifiés.

Conseil pratique : Copiez une invite standard existante (sélectionnez, copiez et collez dans une nouvelle fenêtre d'invite) et personnalisez-la. Vous préserverez ainsi les structures et espaces

réservés importants. Il est également judicieux de demander à l'IA si l'invite vous convient ou si elle a des suggestions d'amélioration.

### 4.1.13 Espaces réservés dans les invites individuelles

Les invites personnalisées peuvent contenir des espaces réservés. Ces espaces réservés seront ensuite automatiquement remplacés par des données provenant de BCS.

Exemples de valeurs possibles :

- Numéro de client,
- Âge,
- Genre,
- Espèces,
- Se concentrer,
- Taille,
- Poids,
- diagnostics,
- Symptômes,
- Langue de sortie,
- Résultats de l'analyse.

La liste exacte des espaces réservés disponibles se trouve dans la fenêtre des paramètres d'IA via l'icône d'information (en haut à droite, l'icône ronde bleue).



Important : Ne modifiez les espaces réservés que si vous en connaissez la signification. Des espaces réservés mal saisis ou supprimés peuvent empêcher l'insertion de données importantes dans l'invite. Ces espaces réservés sont renseignés avec les données du client et les résultats d'analyse lors de la génération de l'invite (mais aucune donnée personnelle).

### 4.1.14 Utilisation des invites individuelles dans la zone

#### « Envoyer/Rapports »

Une fois la configuration terminée, les invites individuelles sont disponibles dans la section « Envoyer/Rapports ».

Si vous cliquez sur « IA » pour l'analyse souhaitée, **les instructions individuelles apparaîtront** dans les fonctions d'IA. Elles pourront ensuite être utilisées de la même manière que les instructions standard.

Cela signifie :

Résultat : L'invite individuelle est renseignée avec les données d'analyse actuelles.

|    |  | Scan date             | Chakra 1 | Chakra 2 |
|----|--|-----------------------|----------|----------|
| 1  |  | 12/10/2025 8:08:33 PM | 14       | 85       |
| 2  |  | 12/10/2025 8:04:54 PM | 10       | 64       |
| 3  |  |                       | 6        | 74       |
| 4  |  |                       | 9        | 66       |
| 5  |  |                       | 2        | 36       |
| 6  |  |                       | 3        | 50       |
| 7  |  |                       | 7        | 67       |
| 8  |  |                       | 8        | 38       |
| 9  |  |                       | 1        | 24       |
| 10 |  |                       | 7        | 44       |
| 11 |  |                       | 7        | 93       |
| 12 |  |                       | 8        | 68       |
| 13 |  |                       | 5        | 43       |
| 14 |  | 1/15/2021 12:28:39 AM | 78       | 32       |

Invite individuelle « Images de l'âme » dans la fenêtre « Liste des paquets ».

**Transmis immédiatement à l'IA.**

Résultat : L'IA génère une réponse en fonction de votre tâche individuelle.

## Répondre à BCS.

Résultat : La réponse peut être enregistrée, modifiée et affichée ultérieurement.

Remarque : Les invites personnalisées sont particulièrement adaptées aux tâches récurrentes et spécialisées. Si vous n'avez besoin d'une requête qu'une seule fois, il peut être plus simple d'utiliser une invite standard et d'ajouter ensuite manuellement la réponse de l'IA.

#### 4.1.15 Enregistrement et chargement d'ensembles d'invites individuels sur le serveur Bucher

À partir de la version 6.24.1, les invites individuelles peuvent être enregistrées sous forme d'ensemble d'invites sur le serveur de Bucher GmbH.

Un ensemble d'invites est un regroupement d'invites individuelles actuellement configurées. Cela permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs propres configurations d'invites, de les charger ultérieurement ou de les mettre à la disposition d'autres utilisateurs de BCS, s'ils le souhaitent.

Les ensembles d'invites sont spécifiques à chaque produit. Seule la configuration du produit BCS actuellement sélectionné dans les paramètres d'IA est enregistrée, par exemple, Bucher Aura Coach. Un ensemble d'invites ne s'applique pas automatiquement à tous les produits BCS.

Un ensemble d'invites contient les cinq emplacements d'invites individuels pour ce produit : leur état d'activation, leur nom, leur description et leur texte complet. Même les emplacements d'invites actuellement désactivés sont inclus dans l'ensemble.

Il n'existe pas d'exportation ou d'importation de fichiers locaux pour les jeux de prompts. Leur enregistrement et leur chargement passent par le serveur Bucher et nécessitent une connexion Internet active.

**Précision :** Les invites individuelles actuellement configurées sont stockées localement dans la base de données BCS. Il n'existe aucune fonction d'exportation ou d'importation de fichiers locaux pour les ensembles d'invites réutilisables. La sauvegarde et l'échange supplémentaires d'ensembles d'invites nommés sont effectués exclusivement via le serveur Bucher.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous avez développé vos propres invites pour des espaces de travail spécifiques, par exemple :

- évaluations de coaching spéciales,
- groupes cibles spécifiques,
- leurs propres styles de reportage,
- Recommandations de produits,
- documentation interne,
- procédures pratiques récurrentes.

Important : Ne stockez aucune information permettant d'identifier personnellement un client dans les consignes, les noms des consignes ou leurs descriptions. Un ensemble de consignes doit uniquement contenir des instructions générales de travail, et non des noms, des diagnostics, des informations confidentielles sur un cas ou d'autres données sensibles.

#### 4.1.16 Enregistrer un jeu de prompts sur le serveur Bucher

La fonction « Enregistrer l'ensemble d'invites » vous permet d'enregistrer vos invites individuelles sous forme d'ensemble d'invites sur le serveur Bucher.

Exigences

- BCS est installé au moins en version 6.24.1.
- Les invites individuelles sont configurées.
- Une connexion internet est disponible.
- Vous vous trouvez actuellement dans les paramètres de « notation IA ».

Instructions étape par étape

**Dans BCS, ouvrez les « Paramètres ».**

Résultat : La fenêtre des paramètres s'ouvre.


**Passez à la section « Évaluation de l'IA ».**

Résultat : Les paramètres de notation par IA sont affichés.

**Vérifiez vos messages individuels.**


Résultat : Vous pouvez voir quelles invites doivent être enregistrées en tant qu'ensemble d'invites.

**Cliquez sur « Enregistrer l'ensemble d'invites ».**

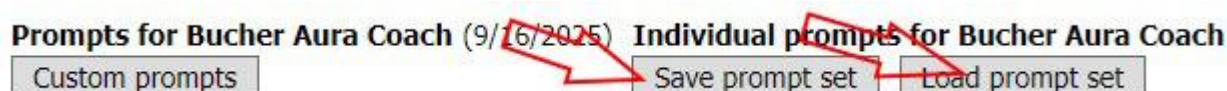

Résultat : Une petite fenêtre décrivant l'ensemble des invites s'ouvre.

**Remarque :** avant d'enregistrer, vérifiez que le produit BCS approprié est sélectionné dans les paramètres d'IA. Seuls ses cinq emplacements d'invite individuels seront enregistrés dans cet ensemble d'invite.

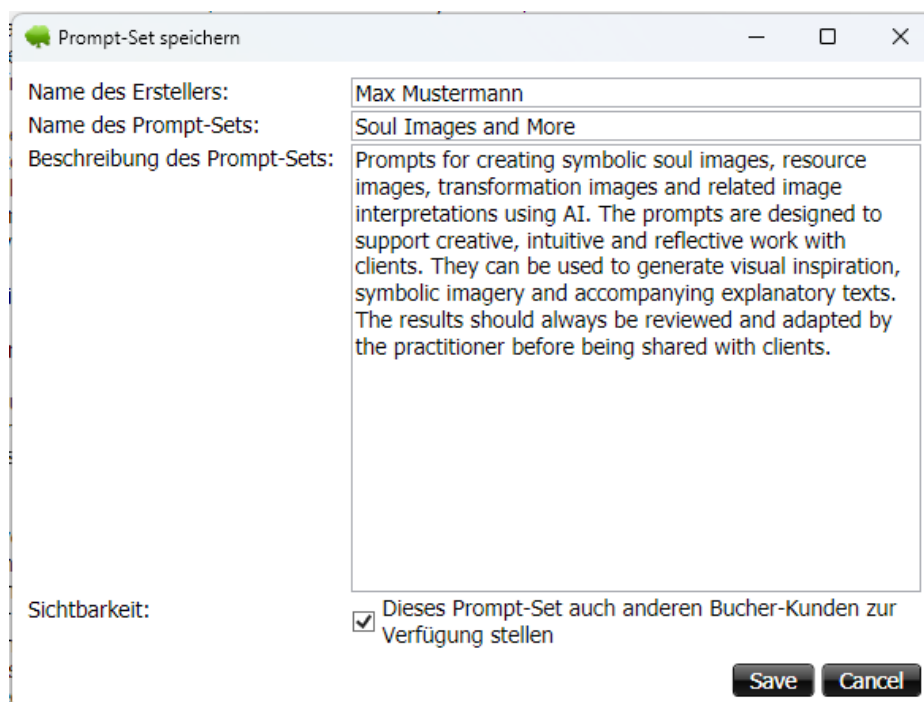

Informations concernant l'ensemble actuel de questions individuelles (les cinq emplacements de questions individuelles)

### **Saisissez le nom du créateur dans le champ « Nom du créateur ».**

Le nom du créateur est obligatoire et ne doit pas dépasser 30 caractères. Le nom du jeu d'invites est également obligatoire et limité à 30 caractères. La description du jeu d'invites est facultative.

Résultat : L'ensemble d'invites peut ultérieurement être attribué à son créateur.

### **Saisissez un nom unique dans le champ « Nom de l'invite ».**

Exemple : « Rapport client sur l'autorégulation » ou « Suggestions pour pratiquer le français ».

Résultat : Vous pourrez plus facilement reconnaître l'invite par la suite.

### **Saisissez une brève description dans le champ « Description de l'ensemble d'invites ».**

Résultat : Vous ou d'autres utilisateurs comprendrez plus tard à quoi sert cet ensemble d'invites.

### **Sous « Visibilité », indiquez si l'ensemble d'invites doit être visible uniquement pour vous ou également accessible aux autres clients de Bucher.**

Résultat : La visibilité de l'ensemble d'invites est définie.

### **Enregistrez l'ensemble d'invites.**

Résultat : L'ensemble des invites est stocké sur le serveur de Bucher GmbH.

Remarque : Si vous n'autorisez pas l'accès à d'autres utilisateurs, l'invite de commande ne sera visible que par vous. Elle sera néanmoins stockée sur le serveur Bucher, mais restera invisible aux autres utilisateurs de BCS.

## 4.1.17 Rendre l'ensemble d'invites accessible aux autres utilisateurs

Lors de l'enregistrement d'un ensemble d'invites, vous pouvez activer l'option « Visibilité : Rendre cet ensemble d'invites disponible aux autres clients Bucher ».

Lorsque cette option est activée, les autres utilisateurs de BCS peuvent voir cet ensemble d'invites lorsqu'ils cliquent sur « Charger l'ensemble d'invites » et l'intégrer à leur propre BCS.

Cette fonctionnalité a pour but de faciliter l'échange de modèles de messages éprouvés entre utilisateurs. Cela leur permet d'apprendre les uns des autres et d'adopter des structures de messages déjà testées.

Important : Avant de diffuser un ensemble de consignes, vérifiez soigneusement qu'il ne contient aucune information confidentielle, personnelle ou interne. Les ensembles de consignes diffusés doivent être formulés de manière générale et fonctionner indépendamment de clients spécifiques. Conseil pratique : Utilisez des noms clairs et des descriptions compréhensibles pour les ensembles d'invites partagés. Les autres utilisateurs doivent pouvoir comprendre à quoi sert l'ensemble d'invites rien qu'à partir de son nom et de sa description.

## 4.1.18 Charger un jeu de prompts

La fonction « Charger l'ensemble d'invites » permet de transférer les ensembles d'invites enregistrés du serveur Bucher vers BCS.

En fonction de la visibilité, les éléments suivants peuvent s'afficher :

- propres ensembles d'invites enregistrés,
- Des ensembles de prompts que d'autres clients de Bucher ont mis à disposition du grand public.

Exigences

- BCS est installé au moins en version 6.24.1.
- Une connexion internet est disponible.
- Vous vous trouvez actuellement dans les paramètres de « notation IA ».

### Instructions étape par étape


**Dans BCS, ouvrez les « Paramètres ».**

Résultat : La fenêtre des paramètres s'ouvre.

**Passez à la section « Évaluation de l'IA ».**

Résultat : Les paramètres de l'IA sont affichés.

**Cliquez sur « Charger l'ensemble d'invites ».**

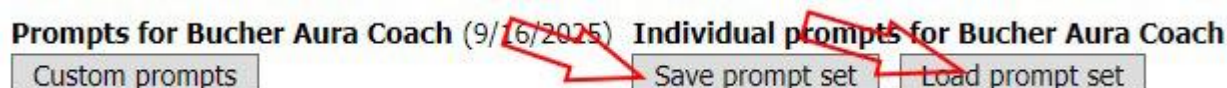

Résultat : La liste des ensembles d'invites disponibles s'affiche.

**Sélectionnez le jeu d'invites souhaité.**

Résultat : Vous voyez le nom, le créateur et la description de l'ensemble d'invites.

Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'importation située à côté de l'entrée de liste souhaitée. L'ensemble sera importé immédiatement ; aucun autre bouton de chargement général n'est nécessaire.

Résultat : Les invites sont transférées vers votre BCS et peuvent ensuite être utilisées ou personnalisées.

Lors de l'importation, les cinq emplacements d'invite du produit BCS sélectionné sont remplacés.

Les états d'activation, les noms, les descriptions et les textes d'invite sont transférés. La configuration importée est immédiatement enregistrée dans la base de données BCS locale.

Important : Lors du chargement d'un ensemble d'invites personnalisé (le vôtre ou celui d'un tiers), les invites personnalisées actuellement utilisées dans le système BCS seront écrasées. Si vous souhaitez utiliser ces invites ultérieurement, enregistrez-les avant de charger d'autres invites.

Après le chargement, vérifiez les invites personnalisées appliquées. Si vous souhaitez enregistrer vos propres invites avant le chargement, faites-le au préalable via l'option « Enregistrer l'ensemble d'invites » sur le serveur Bucher.

### 4.1.19 Visibilité des ensembles d'invites

La visibilité détermine qui peut voir et charger un ensemble d'invites enregistré.

| Réglage                                | Signification                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non publié                             | L'invite de commande n'est visible que par vous-même.                                                              |
| Partagé avec les autres clients Bucher | L'ensemble d'invites apparaît également pour les autres utilisateurs de BCS sous « Charger l'ensemble d'invites ». |

Recommandation : Dans un premier temps, réservez les ensembles de questions à usage personnel ou non testés à votre seul usage. Ne publiez un ensemble de questions que lorsqu'il est généralement compréhensible, testé et exempt d'informations confidentielles.

Les ensembles d'invites personnalisés peuvent ensuite être partagés ou limités à votre seul accès dans la fenêtre de chargement. Pour ce faire, utilisez le bouton « Partager » situé à côté de l'ensemble concerné ; il n'est pas nécessaire de l'enregistrer à nouveau.

Dans la fenêtre de chargement, les ensembles créés par l'utilisateur et ceux partagés par d'autres clients sont affichés séparément. La liste peut être triée par nom d'ensemble d'invites, par créateur ou par date de modification.

### 4.1.20 Protection des données dans les jeux de prompts

Les ensembles d'invites servent à stocker et à échanger des instructions de travail pour l'IA. Ils ne sont pas destinés à stocker des cas clients spécifiques.

Par conséquent, évitez les éléments suivants dans les ensembles d'invites :

- Noms des clients,
- Numéros de clients,
- Adresses,
- Adresses e-mail,
- Numéros de téléphone,
- diagnostics médicaux de personnes spécifiques,
- Descriptions de cas à valeur de reconnaissance,
- notes internes sur les clients individuels,
- Données confidentielles relatives à l'activité ou au cabinet.

Important : Si un ensemble de messages d'aide est diffusé à d'autres clients de Bucher, les messages, le nom de l'ensemble et sa description doivent être formulés de manière à ne divulguer aucune information confidentielle.

Conseil pratique : utilisez uniquement des espaces réservés et des phrases génériques dans les ensembles d'invites. Les données spécifiques au client ne seront insérées qu'ultérieurement, lors de la création d'une invite IA à partir de l'analyse correspondante.

### **4.1.21 Erreurs courantes et solutions pour les ensembles d'invites**

#### **Problème : Le bouton « Enregistrer l'ensemble d'invites » est manquant.**

Cause possible : vous utilisez une version plus ancienne de BCS.

Solution : Vérifiez si la version 6.24.1 au moins est installée.

#### **Problème : Impossible d'enregistrer le jeu d'invites.**

Cause possible : Il n'y a pas de connexion Internet ou la connexion au serveur Bucher est temporairement indisponible.

Solution : Vérifiez votre connexion Internet et réessayez.

#### **Problème : L'invite de commande enregistrée ne s'affiche pas lors du chargement.**

Cause possible : le jeu de commandes n'a pas été enregistré correctement ou il n'y a pas de connexion Internet.

Solution : Vérifiez votre connexion Internet. Si nécessaire, enregistrez à nouveau la configuration.

#### **Problème : Les autres utilisateurs ne peuvent pas voir mon invite de commande.**

Cause possible : l'option « Visibilité : rendre cet ensemble d'invites disponible aux autres clients Bucher » n'a pas été activée.

Solution : Ouvrez « Charger l'ensemble d'invites » et activez le commutateur « Partager » pour votre propre ensemble d'invites.

**Opération en cours :** Ouvrez « Charger l'ensemble d'invites » et activez l'option « Partager » pour votre propre ensemble d'invites. Cela modifie directement la visibilité sur le serveur Bucher.

#### **Problème : Un ensemble d'invites étranger ne correspond pas à son propre flux de travail.**

Cause possible : les ensembles d'invites reflètent toujours la logique de fonctionnement de leur créateur respectif.

Solution : Adaptez les invites chargées à votre flux de travail. Si nécessaire, enregistrez la version modifiée sous un nom d'ensemble d'invites personnalisé.

#### **Problème : Un ensemble d'invites contient des informations inappropriées ou confidentielles.**

Cause possible : lors de la création du dossier, du contenu spécifique a été saisi au lieu d'un contenu général.

Solution : Supprimez ce contenu des invites, du nom et de la description. Ensuite, enregistrez à nouveau l'ensemble d'invites. Ne partagez avec les autres utilisateurs que les ensembles d'invites nettoyés.

## 4.1.22 FAQ sur les jeux de prompts

### **Question : Les ensembles d'invites sont-ils stockés localement sur mon ordinateur ?**

Réponse : Non. Il n'existe pas de fonction de stockage local pour les jeux d'invites. Ces jeux d'invites sont stockés sur le serveur de Bucher GmbH et chargés à partir de là.

### **Question : Ai-je besoin d'une connexion internet ?**

Réponse : Oui. Une connexion Internet active est requise pour les fonctions « Enregistrer l'ensemble d'invites » et « Charger l'ensemble d'invites ».

### **Question : Les autres utilisateurs peuvent-ils voir automatiquement mes ensembles d'invites ?**

Réponse : Non. Les autres utilisateurs ne verront votre invite que si vous la rendez visible aux autres utilisateurs lors de l'enregistrement ou ultérieurement dans la fenêtre de chargement à l'aide du bouton « Partager ».

### **Question : Puis-je enregistrer un ensemble de consignes pour moi seul ?**

Réponse : Oui. Si vous n'activez pas l'option de partage, le message ne sera visible que pour vous.

### **Question : Ai-je le droit de stocker des données client dans un ensemble d'invites ?**

Réponse : Non. Les consignes ne doivent contenir aucune donnée personnelle ou confidentielle du client. Utilisez uniquement des instructions de travail générales et des espaces réservés.

### **Question : Quel est l'objectif de la description de l'ensemble des consignes ?**

Réponse : La description vous aide, ainsi que d'autres utilisateurs, à comprendre l'objectif de l'ensemble d'invites.

### **Question : Puis-je modifier les ensembles d'invites partagés par d'autres utilisateurs ?**

Réponse : Vous pouvez personnaliser un ensemble d'invites chargé pour l'adapter à votre flux de travail. Si nécessaire, enregistrez votre version personnalisée comme votre propre ensemble d'invites.

Vous pouvez également supprimer vos propres ensembles d'invites enregistrés dans la fenêtre de chargement. L'icône de suppression n'apparaît que pour vos propres ensembles ; BCS vous demandera une confirmation avant la suppression. Vous ne pouvez pas supprimer les ensembles partagés du serveur Bucher appartenant à d'autres utilisateurs.

## 4.1.23 Impression et sortie PDF

Toutes les réponses de l'IA enregistrées sont visibles dans l'aperçu avant impression. Elles y apparaissent comme des entrées distinctes et sélectionnables.

Si une seule réponse de l'IA a été enregistrée, seule cette entrée apparaîtra.

Si plusieurs réponses d'IA ont été enregistrées, elles peuvent être sélectionnées et affichées individuellement.

## Ouvrez l'aperçu avant impression à l'aide de l'icône de la loupe.

Résultat : La sélection d'impression est affichée.

|    |  | Scan date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chakra 1 | Chakra 2 | Chakra 3 | Chakra 4 | Chakra 5 | Chakra 6 | Chakra 7 |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  |  | 12/10/2025 8:08:33 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14       | 85       | 79       | 68       | 64       |          |          |
| 2  |  | 12/10/2025 8:04:54 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10       | 64       | 55       | 64       | 60       |          |          |
| 3  |  | Pressure selection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          | 71       |
| 4  |  | Select what you want to print.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          | 41       |
| 5  |  | <input checked="" type="radio"/> Patient printout<br><input type="radio"/> Therapist printout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          | 86       |
| 6  |  | <a href="#">Select all</a><br><a href="#">Select none</a><br><a href="#">Short report without statistics</a><br><a href="#">Short report with statistics</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          | 36       |
| 7  |  | <a href="#">Overview only</a><br><a href="#">Detailed evaluation only</a><br><a href="#">Statistics only</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          | 56       |
| 8  |  | <input checked="" type="checkbox"/> Overview<br><input checked="" type="checkbox"/> General information<br><input checked="" type="checkbox"/> Chakra 1<br><input checked="" type="checkbox"/> Chakra 2<br><input checked="" type="checkbox"/> Chakra 3<br><input checked="" type="checkbox"/> Chakra 4<br><input checked="" type="checkbox"/> Chakra 5<br><input checked="" type="checkbox"/> Chakra 6<br><input checked="" type="checkbox"/> Chakra 7<br><input checked="" type="checkbox"/> Detailed evaluation<br><input type="checkbox"/> Measurement cycle statistics<br><input type="checkbox"/> Initial measurement statistics<br><input checked="" type="checkbox"/> Focus<br><input checked="" type="checkbox"/> Fractal graphic |          |          |          |          |          |          | 24       |
| 9  |  | <b>AI reports</b><br><input type="checkbox"/> Evaluation of individual scan results<br><input type="checkbox"/> Therapeutic evaluation<br><input checked="" type="checkbox"/> Recommendations for the client<br><input checked="" type="checkbox"/> Affirmations 4-week plan<br><input checked="" type="checkbox"/> Fractal interpretation<br><input type="checkbox"/> Soul images                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          | 28       |
| 10 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          | 26       |
| 11 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          | 62       |
| 12 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          | 30       |
| 13 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          | 85       |
| 14 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          | 78       |
| 15 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          | 100      |
| 16 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          | 100      |
| 17 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          | 100      |
| 18 |  | 1/12/2021 9:15:38 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48       | 100      | 48       | 89       | 100      |          |          |

Dans les options d'impression, choisissez d'abord « Impression patient » ou « Impression thérapeute ». Activez les sections de rapport souhaitées et les évaluations par IA proposées à droite. Cliquez sur « Enregistrer comme valeur par défaut » pour sauvegarder la sélection actuelle pour ce profil et la réutiliser lors de votre prochaine visite. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Résultat : Le rapport correspondant s'affiche à l'écran.

## Imprimez le rapport ou enregistrez-le au format PDF. Utilisez les icônes situées en haut à gauche du rapport pour ce faire.



Résultat : Le rapport est disponible pour documentation ou diffusion.

Important : Veuillez vérifier attentivement le texte avant de l'imprimer ou de l'enregistrer au format PDF. Après transmission au client, le rapport doit être exact, tant sur le fond que sur la langue.

## Sélectionnez les sections de rapport appropriées

Dans les options d'impression, vous pouvez afficher ou masquer certaines sections du rapport. Par exemple, dans Bucher Aura Coach, décochez la case « Analyse détaillée » si cette section ne doit pas figurer dans le rapport final.

## 4.1.24 Directives pour une utilisation responsable

L'évaluation assistée par l'IA est un outil. Elle peut simplifier le travail, structurer les textes et clarifier les liens entre les idées. Toutefois, elle ne saurait se substituer à la responsabilité professionnelle de l'utilisateur.

Par conséquent, veuillez noter :

- Lisez toujours intégralement les réponses de l'IA.
- Ne transférez pas de messages non vérifiés.
- Aucune promesse de guérison ne peut être faite.
- Ne tirez aucun diagnostic médical des réponses de l'IA.
- Ne perturbez pas les clients.
- Raccourcissez, atténuez ou supprimez les phrases selon les besoins.
- Ne transmettez le rapport que sous une forme que vous pouvez justifier professionnellement.

Attention : ce manuel ne remplace pas un avis juridique ou médical. En cas de doute, vérifiez les exigences professionnelles, juridiques et de protection des données applicables à votre activité.

## 4.1.25 Erreurs courantes et solutions

### Problème : La réponse de l'IA ne convient pas au client.

Cause possible : les champs « Diagnostics » et « Symptômes » contiennent trop peu de contexte.

Solution : Ajoutez les sujets clients pertinents et recréez l'invite.

### Problème : La réponse de l'IA est formulée en termes trop médicaux.

Cause possible : Une invite professionnelle a été utilisée, par exemple « Évaluation thérapeutique ».

Solution : Pour les clients, utilisez l'invite « Recommandation pour le client » ou modifiez la réponse en conséquence.

### Problème : La réponse de l'IA contient trop de recommandations.

Cause possible : la question est trop générale ou l'IA a répondu de manière trop exhaustive.

Solution : Raccourcissez le texte dans la zone d'édition BCS. Supprimez tout ce qui est inutile.

### Problème : L'invite personnalisée ne s'affiche pas.

Cause possible : l'invite n'a pas été activée.

Solution : Ouvrez « Paramètres » > « Évaluation IA » > « Invites personnalisées » et vérifiez si la case est cochée.

### Problème : Des données sont manquantes dans l'invite.

Cause possible : des espaces réservés ont été supprimés ou mal orthographiés.

Solution : Vérifiez l'invite et comparez les espaces réservés utilisés avec la liste figurant dans la fenêtre des paramètres d'IA.

### Problème : L'IA répond dans la mauvaise langue.

Cause possible : la langue de sortie n'a pas été correctement reprise dans le prompt, ou l'IA n'a pas respecté la consigne linguistique. Une autre cause fréquente est une langue incorrecte dans la fiche du client. Vérifiez le champ « Langue » dans l'onglet « Données personnelles ». Ce réglage est prioritaire sur les autres paramètres linguistiques. Si une langue incorrecte ou inadaptée y est sélectionnée, la sortie est normalement préparée dans cette langue.

Solution : Ouvrez les données du client concerné. Accédez à l'onglet « Données personnelles » et vérifiez le champ « Langue ». Sélectionnez la langue souhaitée et enregistrez la modification en cliquant sur « Enregistrer ». Recréez ensuite l'invite IA.

Si l'IA continue de répondre dans une langue incorrecte, ajoutez une instruction vocale claire à l'invite, par exemple : « Veuillez répondre entièrement en allemand. » Répétez ensuite la demande à l'IA.

## **4.1.26 FAQ**

### **Question : L'IA a-t-elle un accès direct à mes données BCS ?**

Réponse : Non. L'IA n'est pas directement intégrée à BCS. Les données sont transférées via le presse-papiers. Cela permet de déterminer quelles informations sont transmises à l'IA.

### **Question : Dois-je utiliser toutes les invites ?**

Réponse : Non. Utilisez uniquement les invites pertinentes à la situation spécifique.

### **Question : Ai-je le droit de transmettre directement une réponse de l'IA au client ?**

Réponse : Ceci n'est pas recommandé. Veuillez lire et vérifier attentivement chaque réponse. Modifiez le texte avant de le transmettre.

### **Question : Quelles invites conviennent aux clients ?**

Réponse : Les options « Recommandation pour le client », « Affirmations et plan de 4 semaines » et, si une licence est disponible, « Interprétation fractale » sont particulièrement adaptées.

### **Question : Puis-je créer mes propres invites ?**

Réponse : Oui. Dans les paramètres de l'« Évaluation par IA », il est possible d'activer, de nommer et de modifier chaque invite individuellement.

### **Question : Que devient la réponse de l'IA dans BCS ?**

Réponse : La réponse peut être insérée dans BCS, modifiée, enregistrée, puis affichée en aperçu avant impression ou exportée au format PDF.

### **Question : L'IA remplace-t-elle l'évaluation thérapeutique ou de coaching ?**

Réponse : Non. L'IA facilite l'évaluation, mais ne remplace pas la responsabilité professionnelle de l'utilisateur.

## 4.2 Fonction fractale de Bucher

### 4.2.1 Vue d'ensemble

La fonction Bucher Fractal est un module complémentaire transversal à Bucher Coaching Systems. Elle permet de créer une image ou une vidéo fractale personnalisée à partir d'un scan ou d'un fichier existant.

Une fractale est une image abstraite de couleurs et de formes. Elle ne contient aucun message directement lisible, mais agit par le biais du symbolisme, des couleurs, des formes, du mouvement et de la perception intérieure. Le client peut observer la fractale et se laisser influencer par elle. Cela peut faciliter la perception de ses propres associations, images intérieures ou thèmes inconscients. Les images et vidéos fractales ne constituent pas un diagnostic médical. Elles ne doivent pas être utilisées comme preuve de maladies, de troubles ou de processus de guérison. Elles servent uniquement de support symbolique et de soutien dans le cadre de la pratique professionnelle concernée.

### 4.2.2 Objectif de la fonction fractale

La fonction fractale peut être utilisée pour accompagner visuellement les résultats de l'analyse. Elle peut aider,

- Pour rendre les résultats de l'analyse tangibles non seulement verbalement, mais aussi visuellement,
- pour créer un accès supplémentaire à des sujets inconscients ou difficiles à exprimer,
- Pour susciter des amorces de conversation en vue de travailler avec le client,
- pour promouvoir la perception intérieure du client,
- pour fournir un stimulus visuel d'accompagnement après la séance,
- soutenir symboliquement les processus énergétiques ou émotionnels.

La fonction fractale est particulièrement utile lorsque les clients réagissent bien aux couleurs, aux images, aux symboles ou à la perception intuitive.

### 4.2.3 Différence entre une image fractale et une vidéo fractale

La fonction fractale propose deux formats de sortie différents :

| fonction       | Description                                                                        | Utilisation typique                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Image fractale | Une image statique, de couleur et de forme calculée individuellement.              | Impression, PDF, image de fond, visualisation pendant ou après la session.            |
| Vidéo fractale | Une vidéo dynamique et harmonieuse basée sur des formes et des couleurs fractales. | Observation accompagnée à domicile, relaxation, concentration, application régulière. |

L'image fractale se prête particulièrement bien à une observation claire et sereine. Elle peut être imprimée, enregistrée ou remise au client sous forme numérique.

La vidéo fractale est particulièrement adaptée lorsqu'on souhaite du mouvement, du rythme ou une durée de visionnage prolongée. Elle peut également être associée à de la musique, si cette fonction est disponible.

### 4.2.4 Prérequis


Pour utiliser la fonction fractale, vous aurez besoin de :

- une licence valide pour la fonction Bucher Fractal,
- un client créé,
- un scan ou un paquet existant,
- Informations de numérisation ou d'emballage suffisamment stockées,
- Lors de la création de vidéos fractales, prévoyez suffisamment de temps.
- un emplacement de stockage approprié si vous souhaitez exporter une image ou une vidéo.

Remarque : La fonctionnalité fractale n'est pas disponible dans toutes les versions du produit. Si le bouton fractale n'apparaît pas, il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible ou sous licence dans le produit sélectionné.

## 4.2.5 Création d'une image fractale

Une image fractale est calculée à partir des informations disponibles lors de la numérisation d'un paquet. Elle est unique pour chaque client et chaque paquet sélectionné. Si l'option « Créer une fractale » est activée lors de la numérisation du paquet, l'image fractale est créée automatiquement pendant le processus de numérisation.

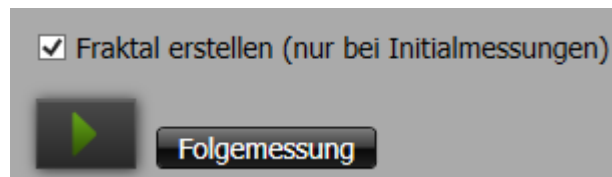

Conseil pratique : Donnez au client de brèves instructions sur la façon d'observer l'image fractale. Il ne s'agit pas d'« analyser » l'image comme un diagnostic. Une approche plus constructive consiste à l'observer calmement et à se demander : « Qu'est-ce que cette image évoque en moi ? »

## 4.2.6 Utilisation de l'image fractale avec le client

L'image fractale peut être utilisée pendant ou après la séance.

Applications possibles :

- visionnage conjoint pendant la conversation,
- Recueillir les associations spontanées du client,
- Utilisez les couleurs et les formes pour amorcer la conversation,
- Imprimez l'image fractale et remettez-la au client.
- Utilisez une image fractale comme image de fond sur votre ordinateur ou votre smartphone.
- Incluez l'image fractale dans la documentation.

N'interprétez pas l'image fractale de façon trop catégorique. L'effet provient principalement de la perception du client. Les questions sont souvent plus utiles que les affirmations péremptoires.

Exemples de questions pour l'entretien :

- Quelle couleur attire votre regard en premier ?
- Quelle partie de l'image attire votre attention ?
- L'image paraît-elle calme, dynamique, claire, dense ou ouverte ?
- Existe-t-il une forme que vous associez spontanément à un sentiment ?
- Que change-t-il lorsque vous regardez l'image pendant quelques minutes ?

Remarque : Les images fractales peuvent susciter des émotions profondes. Si un client réagit émotionnellement, il convient d'aborder la situation avec tact.

## 4.2.7 Création d'une vidéo fractale

Une vidéo fractale est une représentation animée de formes et de couleurs fractales. Elle peut servir de support visuel. Selon la méthode utilisée, elle peut également être associée à de la musique. La vidéo fractale utilise comme base la fractale stockée dans le paquet.

Instructions étape par étape

1. Ouvrez le client souhaité.

Résultat : Le client a été sélectionné comme client actuel.

2. Ouvrez la section « Envoyer/Rapports ».

Résultat : Les forfaits existants du client sont affichés.

3. Sélectionnez le forfait pour lequel vous souhaitez créer une vidéo fractale.

Résultat : Le bon paquet est indiqué.


4. Ouvrez la fonction Fractal.

|   |  | Scan date            | Package name             |
|---|--|----------------------|--------------------------|
| 1 |  | 6/24/2026 4:52:11 PM | Coaching perfekte Arbeit |
| 2 |  | 6/24/2026 4:51:28 PM | Immunsystem ist Stark    |
| 3 |  | 6/24/2026 4:20:29 PM | CD Ich lasse los         |
| 4 |  | 6/3/2026 2:34:48 PM  | Check Up                 |
| 5 |  | 6/3/2026 2:33:37 PM  | Check Up                 |

Utilisez le bouton orné du symbole fractal (escargot). Les paquets scannés avec un bouton comportant une coche verte affichent un graphique fractal. Les autres n'en possèdent pas encore.

Résultat : Les options fractales disponibles sont affichées.

5. Cliquez sur l'onglet pour visionner la vidéo fractale.

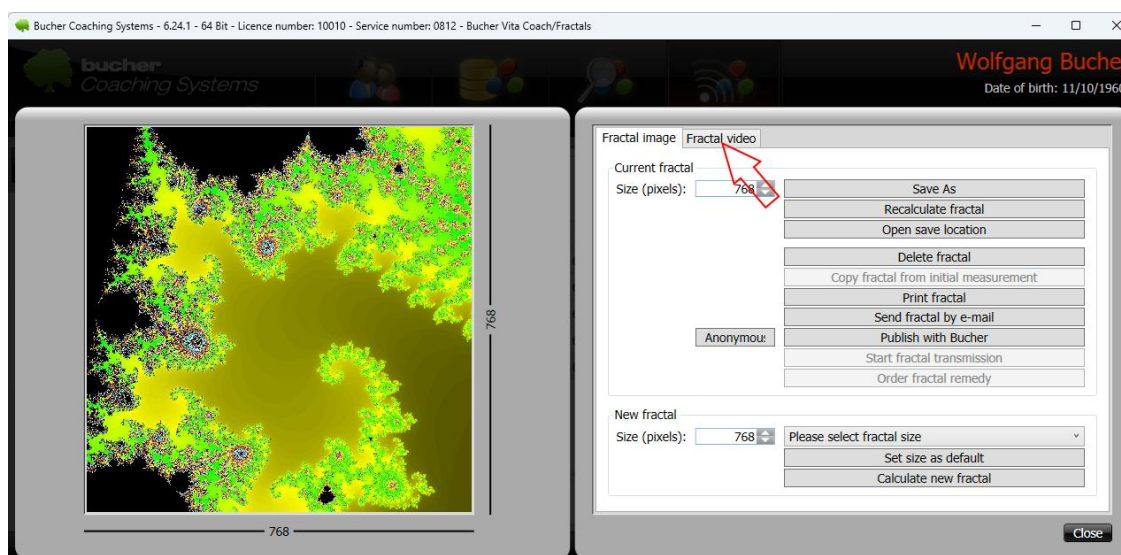

Résultat : BCS se prépare à réaliser la vidéo.

6. Définissez les paramètres souhaités pour la vidéo fractale.

Résultat : La sortie vidéo est prête et peut ensuite être créée.

Les paramètres suivants peuvent être configurés dans l'onglet « Vidéo fractale » :

| Zone               | Attitude                                      | Signification                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille de la vidéo | « Taille (pixels) »                           | Définissez la résolution vidéo, par exemple « Très grande vidéo (1080 pixels) ». Une résolution plus élevée offre généralement une meilleure qualité d'image, mais nécessite davantage de temps de traitement et d'espace de stockage.    |
| kaléidoscope       | « Paramètres du kaléidoscope »                | Spécifie le nombre d'axes de réflexion ou de rayons utilisés pour calculer l'effet kaléidoscopique, par exemple « 12 faisceaux ».                                                                                                         |
| kaléidoscope       | "Vitesse kaléidoscopique"                     | Définit la vitesse du mouvement du kaléidoscope. Une valeur plus faible produit un effet plus calme, une valeur plus élevée un effet plus dynamique.                                                                                      |
| arrière-plan       | « Vidéo de fond »                             | Utilise une vidéo d'arrière-plan. Vous pouvez choisir parmi la liste des vidéos d'arrière-plan disponibles. La durée de chaque vidéo est affichée. Vous pouvez télécharger des vidéos d'arrière-plan supplémentaires via « Télécharger ». |
| arrière-plan       | "Dos"                                         | Détermine si la vidéo d'arrière-plan sélectionnée est utilisée à l'envers.                                                                                                                                                                |
| arrière-plan       | "Plus de vidéos"                              | Ouvre ou charge des vidéos d'arrière-plan supplémentaires disponibles.                                                                                                                                                                    |
| arrière-plan       | « Image de fond »                             | Utilisez une image de fond plutôt qu'une vidéo de fond.                                                                                                                                                                                   |
| arrière-plan       | « No background » (sans arrière-plan)         | Créez la vidéo fractale sans vidéo de fond ni image de fond.                                                                                                                                                                              |
| Introduction       | "Intro"                                       | Active ou désactive un aperçu au début de la vidéo.                                                                                                                                                                                       |
| Introduction       | "Logo"                                        | Ajoute un logo à l'introduction. Le fichier image peut être sélectionné à l'aide du bouton « ... ».                                                                                                                                       |
| Introduction       | « Titre » / « Modifier le titre »             | Ajoutez un titre à l'introduction. Le texte peut être modifié via « Modifier le titre ».                                                                                                                                                  |
| Introduction       | « Description » / « Modifier la description » | Ajoutez une description à l'introduction. Le texte peut être modifié via « Modifier la description ».                                                                                                                                     |
| Introduction       | Graphique fractal                             | Ajoute le graphique fractal à la zone d'introduction si cette option est activée.                                                                                                                                                         |
| Durée du film      | « Durée du film » / « Durée souhaitée »       | Définissez la durée souhaitée de la vidéo fractale.                                                                                                                                                                                       |
| Durée du film      | « Durée totale calculée »                     | Affiche la durée totale calculée de la vidéo. Celle-ci peut différer de la durée souhaitée si l'introduction, la conclusion, la musique ou les éléments d'arrière-plan sont inclus.                                                       |
| Durée du film      | "Utiliser la durée totale"                    | Utilise la durée totale calculée comme durée du film.                                                                                                                                                                                     |
| Musique            | « Sans musique »                              | Créez la vidéo fractale sans musique.                                                                                                                                                                                                     |
| Musique            | « MP3/Interblend »                            | Utilise un fichier MP3 ou un fichier Interblend sélectionné comme musique. Le fichier peut être sélectionné à l'aide du bouton « ... ».                                                                                                   |

| Zone                | Attitude                                           | Signification                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musique             | « Répéter la musique si la vidéo est plus longue » | La musique est répétée si la vidéo est plus longue que le fichier audio sélectionné.                                                                                                                    |
| Musique             | « Bols chantants »                                 | Utilisez des bols chantants comme accompagnement sonore, si cette option est disponible.                                                                                                                |
| Conclusion          | "Outro"                                            | Active ou désactive le générique de fin à la fin de la vidéo.                                                                                                                                           |
| Conclusion          | "Logo"                                             | Ajoute un logo à la fin. Le fichier image peut être sélectionné via le bouton « ... ».                                                                                                                  |
| Conclusion          | « Titre » / « Modifier le titre »                  | Ajoutez un titre à la conclusion. Le texte peut être modifié via « Modifier le titre ».                                                                                                                 |
| Conclusion          | « Description » / « Modifier la description »      | Ajoutez une description à la conclusion. Le texte peut être modifié via « Modifier la description ».                                                                                                    |
| Qualité vidéo       | « Débit binaire MB/s (qualité film) »              | Définit le débit de données et donc la qualité vidéo. Un débit plus élevé améliore généralement la qualité, mais génère des fichiers vidéo plus volumineux.                                             |
| Données temporaires | « Supprimer les données d'image temporaires »      | Détermine si les données d'image temporaires sont supprimées après la création de la vidéo. En général, il est conseillé de choisir « Oui » afin d'éviter une utilisation inutile d'espace de stockage. |
| Modèle              | « Modèle » / « Enregistrer »                       | Enregistre les paramètres vidéo actuels comme modèle.                                                                                                                                                   |
| Modèle              | « Modèle » / « Charger »                           | Charge un modèle précédemment enregistré.                                                                                                                                                               |

Conseil pratique : Enregistrez vos combinaisons préférées de résolution, de paramètres kaléidoscopiques, d'intro, d'outro et de musique comme modèles. Vous pourrez ainsi créer plus rapidement et plus facilement des vidéos fractales par la suite.

The screenshot shows the 'Fractal video' window with the following settings:

- Fractal video** (selected tab)
- Size (pixels):** Very large video (1080 pixels)
- Kaleidoscope settings:** 12 Beams
- Kaleidoscope speed:** 1,0
- Background video:**
  - ☒ Background video
  - |                         |          |                               |                          |
|-------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| Violetter Tunnel        | 00:00:10 | <input type="checkbox"/> Back | <a href="#">Download</a> |
| Weißes Doppelherz Linie | 00:00:15 | <input type="checkbox"/> Back | <a href="#">Download</a> |
| Wellen HD               | 00:00:06 | <input type="checkbox"/> Back | <a href="#">Download</a> |
| Weltall Erde            | 00:00:40 | <input type="checkbox"/> Back | <a href="#">Download</a> |
  - [More videos](#)
- ☐ Background image
- ☐ No background
- ☒ Intro
  - ☒ Logo
  - ☒ Title [Titel bearbeiten](#)
  - ☒ Description [Beschreibung bearbeiten](#)
  - ☒ Fractal graphic
- Film duration:** 205 s (Desired duration) / 205 s (Calculated total duration) [Use total duration](#)
- Music:**
  - ☐ Without music
  - ☒ MP3/Interblend
    - ☐ Repeat music if video is longer
  - ☐ Singing bowls
- ☒ Outro
  - ☒ Logo
  - ☒ Title [Titel bearbeiten](#)
  - ☒ Description [Beschreibung bearbeiten](#)
- Video settings**
  - Bit rate MB/s (film quality):** 10.0
  - Delete temporary image data:** Yes
  - Template:** [Save](#) [Load](#)
- Produce fractal film** (button)
- Close** (button)

Résultat : La sortie vidéo est prête.

- Commencez à créer la vidéo fractale en utilisant le bouton tout en bas : « Créer une vidéo fractale ».

Résultat : BCS crée une vidéo fractale animée et, si souhaité, affiche l'emplacement de stockage de la vidéo à la fin.

8. Vérifiez la vidéo avant de la partager.

Résultat : Ils s'assurent que la vidéo a été créée correctement et qu'elle est adaptée à l'usage prévu.

Remarque : La création d'une vidéo peut prendre plus de temps en fonction des performances de l'ordinateur et de la taille de la vidéo (à titre indicatif, comptez entre 15 minutes pour une petite vidéo et 4 heures pour une très grande vidéo).

#### 4.2.8 Utilisation de la vidéo fractale avec le client

La vidéo fractale peut être proposée au client comme exercice complémentaire. Elle est particulièrement adaptée aux séances de visionnage calmes, par exemple le soir ou lors d'une courte phase de relaxation.

Étant donné que les vidéos fractales peuvent générer des fichiers très volumineux en fonction de la résolution, de la durée, de la musique et de la qualité vidéo, le partage direct par e-mail est souvent peu pratique. De nombreux fournisseurs de messagerie limitent la taille des pièces jointes. De plus, le téléchargement de fichiers vidéo volumineux peut s'avérer fastidieux pour le destinataire.

Une solution simple consiste à télécharger la vidéo sur YouTube en mode « Non répertoriée ». Dans ce cas, la vidéo n'apparaîtra pas publiquement dans les résultats de recherche YouTube ni sur une chaîne publique. Le client pourra toutefois la visionner via le lien fourni.

Important : « Non répertorié » ne signifie pas « privé ». Toute personne connaissant le lien peut visionner la vidéo. Par conséquent, n'utilisez aucune donnée client sensible dans le titre, la description, le nom du fichier ou tout autre texte visible dans la vidéo.

Procédure recommandée

1. Créez la vidéo fractale dans BCS.

Résultat : La vidéo est maintenant disponible sous forme de fichier vidéo sur votre ordinateur.

2. Vérifiez la vidéo avant de la télécharger.

Résultat : Ils s'assurent que la vidéo appartient au bon client et au bon forfait.

3. Connectez-vous à YouTube avec un compte Google.

Résultat : Vous pouvez télécharger la vidéo sur YouTube.

4. Téléversez la vidéo fractale sur YouTube.

Résultat : La vidéo sera enregistrée sur votre compte YouTube.

5. Définissez la visibilité sur « Non répertoriée ».

Résultat : La vidéo n'est pas accessible au public, mais peut être visionnée via le lien direct.

6. Utilisez un titre de vidéo neutre.

Exemple : « Vidéo fractale 2026-07-01 » ou « Vidéo fractale personnelle ».

Résultat : Le titre ne contient aucune information confidentielle ou médicale.

7. Copiez le lien vers la vidéo.

Résultat : Le lien peut être partagé avec le client.

8. Envoyez le lien au client par courriel.

Résultat : Le client peut visionner la vidéo partout où il y a une connexion internet.

Remarque : La mise en ligne sur YouTube nécessite un compte Google. En général, le client n'a pas besoin de son propre compte Google pour visionner une vidéo non répertoriée via un lien. L'essentiel est que le client ait accès au lien et à une connexion Internet.

Une vidéo fractale est particulièrement adaptée aux moments de visionnage calmes, par exemple le soir ou lors d'une courte phase de détente.

Applications possibles :

- Visualisation sur ordinateur,
- Visionnage sur smartphone ou tablette,
- exercice de relaxation d'accompagnement,

- support visuel pour un objectif convenu,
- un examen régulier sur une période déterminée.

Conseil pratique : convenez d'une application simple avec le client, par exemple : « Regardez la vidéo une fois par jour pendant quelques minutes dans un environnement calme. Soyez attentif aux pensées, aux sentiments ou aux images intérieures qui émergent. »

Important : L'utilisation de vidéos fractales est déconseillée si le client est sensible aux images en mouvement, s'il éprouve un malaise face à celles-ci ou s'il tolère mal les stimuli visuels. Dans ce cas, une image fractale statique est plus appropriée.

### 4.2.9 Interprétation par IA d'une image fractale

Lorsque la fonction d'IA est utilisée dans BCS, une image fractale peut également être interprétée symboliquement. L'IA peut décrire les couleurs, les formes, les motifs et l'effet global de l'image. L'interprétation par IA peut être utile.

- pour obtenir un cadre d'interprétation initial,
- Pour formuler des amorces de conversation,
- pour mettre en valeur les ressources positives de l'image,
- créer une description d'accompagnement compréhensible pour le client.

### 4.2.10 FAQ

#### Question : Qu'est-ce qu'une image fractale ?

Réponse : Une image fractale est une image abstraite de couleurs et de formes calculée à partir d'un scan ou d'un paquet de données. Elle sert d'impulsion symbolique pour des travaux ultérieurs.

#### Question : Quelle est la différence entre une image fractale et une vidéo fractale ?

Réponse : L'image fractale est statique. La vidéo fractale est animée et peut servir d'accompagnement visuel plus long.

#### Question : Une image fractale peut-elle permettre d'établir un diagnostic ?

Réponse : Non. Une image fractale n'est ni un résultat médical ni un diagnostic. Elle sert à la contemplation symbolique et à la perception intérieure.

#### Question : Le client est-il autorisé à emporter l'image fractale ?

Réponse : Oui. L'image fractale peut être imprimée ou fournie sous forme numérique, à condition que cela corresponde au concept de travail.

#### Question : À quoi convient une vidéo fractale ?

Réponse : Une vidéo fractale convient comme compagnon visuel apaisant, par exemple pour un visionnage à domicile ou pour appuyer un objectif convenu.

#### Question : Chaque paquet doit-il contenir une image ou une vidéo fractale ?

Réponse : Non. La fonction fractale est une fonctionnalité supplémentaire. Utilisez-la uniquement si elle est utile au client et au processus concerné.

## 4.3 Bucher Interblend

### 4.3.1 Vue d'ensemble

Bucher Interblend est un module complémentaire commun à plusieurs produits de Bucher Coaching Systems. Interblend permet d'intégrer dans la musique les informations de régulation d'un paquet sélectionné.

Le résultat est un nouveau fichier musical. Il contient la musique sélectionnée ainsi que l'oscillation de régulation du paquet. Le client peut ensuite écouter ce fichier. Il peut, par exemple, être lu directement, remis au client sur une clé USB ou utilisé pour une vidéo fractale.

Interblend est particulièrement utile lorsque l'application ne doit pas être réalisée via un support d'information classique, mais via un fichier musical.

Important : Interblend n'est pas une procédure médicale et ne remplace ni un diagnostic ni un traitement médical. Le fichier musical généré sert d'accompagnement complémentaire, énergétique ou de coaching.

### 4.3.2 Objectif d'Interblend

Interblend permet d'utiliser un paquet existant par l'intermédiaire de la musique.

Cette fonction peut être utilisée pour :

- Intégrer des informations de régulation d'un paquet dans la musique,
- fournir au client un fichier audio d'accompagnement,
- Utiliser la musique comme stimulus régulier à domicile,
- rendre les paquets BCS existants également disponibles via un accès auditif,
- utiliser un fichier musical Interblend ultérieurement dans une vidéo fractale.

La sélection musicale incluse représente environ cinq heures de musique. Vous pouvez écouter des extraits avant de faire votre choix.

### 4.3.3 Point d'entrée

Interblend se lance dans la section « Envoyer/Rapports » du paquet souhaité.

Dans la liste des paquets, chaque paquet possède un bouton orné d'un symbole de note de musique. Il s'agit du sixième bouton de la barre d'outils de la ligne du paquet.

Si une piste Interblend a déjà été créée pour un pack, une coche verte apparaît à l'écran. Ainsi, la présence d'un fichier musical Interblend pour ce pack est immédiatement visible dans la liste des packs.

[Capture d'écran : Liste des paquets dans la section « Envoyer/Rapports » avec un symbole de note de musique pour Interblend. Objectif : Montrer le point d'entrée d'Interblend et expliquer que la coche verte indique qu'un fichier musical a déjà été créé.]

### 4.3.4 Prérequis

Pour utiliser Interblend, vous aurez besoin de :

- une licence valide pour Bucher Interblend,

- un client créé,
- un paquet existant dans la section « Envoyer/Rapports »,
- au moins un morceau de musique sélectionnable,
- espace de stockage suffisant pour les fichiers musicaux nouvellement créés,
- Si nécessaire, une clé USB ou tout autre moyen de distribution approprié au client.

Remarque : Si le bouton Interblend n'est pas visible ou utilisable, il se peut que cette fonctionnalité ne soit pas sous licence ou disponible dans la version actuelle du produit.

### 4.3.5 Ouvrir la fenêtre Interblend

#### Instructions étape par étape

1. Ouvrez le client souhaité.

Résultat : Le client a été sélectionné comme client actuel.


2. Ouvrez la section « Envoyer/Rapports ».

Résultat : Les paquets existants du client sont affichés.

3. Sélectionnez le paquet dont les informations de régulation doivent être intégrées à la musique.

Résultat : Le bon paquet est indiqué.

4. Dans la rangée des paquets, cliquez sur le sixième bouton comportant le symbole de la note de musique.

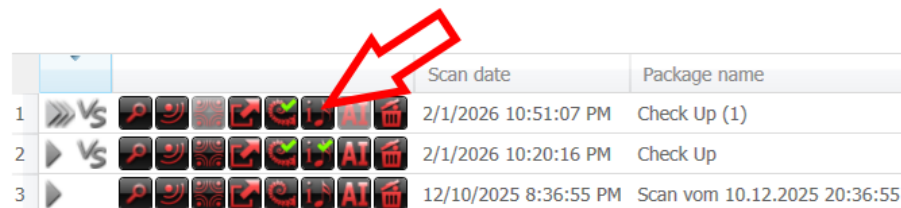

|   |              | Scan date             | Package name                 |
|---|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | » VS [Icons] | 2/1/2026 10:51:07 PM  | Check Up (1)                 |
| 2 | » VS [Icons] | 2/1/2026 10:20:16 PM  | Check Up                     |
| 3 | » [Icons]    | 12/10/2025 8:36:55 PM | Scan vom 10.12.2025 20:36:55 |

Résultat : La fenêtre « Interblend » s'ouvre.

5. Vérifiez si la sélection musicale souhaitée s'affiche.

Résultat : Les morceaux de musique disponibles sont prêts à être sélectionnés.

### 4.3.6 Structure de la fenêtre Interblend

La fenêtre « Interblend » affiche la liste des pistes musicales disponibles. Chaque piste peut être prévisualisée avant d'être sélectionnée.

La liste contient, entre autres, les informations suivantes :

Zone                      Signification

"Titre de la musique"      Titre et, le cas échéant, description de l'œuvre musicale.

"Longueur"            Durée du morceau de musique.


« Style musical »      Style ou catégorie musicale, par exemple pop, country, classique, paysages sonores ou affirmations vocales.

« Aperçu »            Cliquez sur le bouton « Lecture » pour écouter un extrait du morceau.

"Sélection"            Case à cocher. Elle permet de sélectionner les morceaux de musique à utiliser pour créer les fichiers Interblend.

Des fonctions supplémentaires sont disponibles dans la fenêtre :

| fonction                               | Signification                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Intensité"                            | Intensité avec laquelle la vibration régulatrice est intégrée à la musique.<br>La valeur idéale est de 1000. |
| « Extraction de CD »                   | Fonction permettant de lire de la musique à partir d'un CD, si cette fonction doit être utilisée.            |
| « Télécharger les morceaux manquants » | Télécharge les morceaux manquants s'ils ne sont pas déjà disponibles localement.                             |
| « Voir la musique créée précédemment » | Affiche les fichiers musicaux Interblend créés précédemment.                                                 |
| « Créer des fichiers Interblend »      | Crée de nouveaux fichiers musicaux Interblend à partir des pistes musicales sélectionnées.                   |
| "Annuler"                              | Ferme la fenêtre sans créer de nouveaux fichiers Interblend.                                                 |

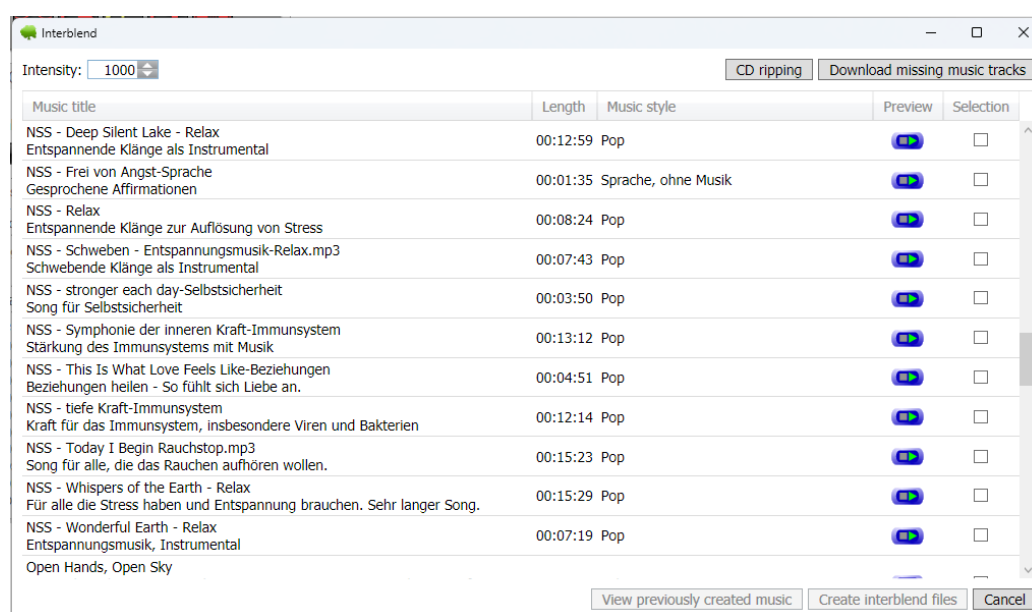

### 4.3.7 Écoute et sélection de morceaux de musique

Dans la fenêtre Interblend, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs morceaux de musique.  
Instructions étape par étape

1. Ouvrez la fenêtre « Interblend ».

Résultat : La liste des morceaux de musique disponibles s'affiche.

2. Choisissez un morceau de musique approprié dans la liste.

Résultat : Le morceau de musique souhaité est visible.

3. Dans la colonne « Aperçu », cliquez sur le bouton de lecture bleu.

Résultat : Le morceau de musique est joué à titre d'essai.

4. Vérifiez si le morceau de musique convient au client et au paquet sélectionné.

Résultat : C'est à vous de décider si le morceau de musique doit être utilisé.

5. Dans la colonne « Sélection », cochez la case correspondant au morceau de musique souhaité.

Résultat : Le morceau de musique a été sélectionné pour la création d'un fichier Interblend.

6. Répétez ce processus pour d'autres morceaux de musique, si nécessaire.

Résultat : Un ou plusieurs morceaux de musique ont été sélectionnés.

Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs pistes musicales. Dans ce cas, un fichier audio distinct sera créé pour chaque piste sélectionnée.

Conseil pratique : ne choisissez pas la musique uniquement en fonction de vos goûts personnels. Prenez en compte le style musical, le tempo et l'ambiance pour vous assurer qu'ils conviennent au client et à l'objectif de la séance.

### 4.3.8 Création de fichiers Interblend

Une fois les pistes musicales sélectionnées, les fichiers Interblend peuvent être créés.

Instructions étape par étape

1. Vérifiez la sélection dans la colonne « Sélection ».

Résultat : Seuls les morceaux de musique souhaités ont été sélectionnés.

2. Cliquez sur « Créer des fichiers Interblend ».

Résultat : BCS crée un nouveau fichier musical Interblend pour chaque morceau de musique sélectionné.

3. Veuillez patienter jusqu'à la fin du processus.

Résultat : Les fichiers musicaux nouvellement créés sont enregistrés dans un répertoire séparé.

4. Si nécessaire, ouvrez « Afficher la musique créée précédemment ».

Résultat : Les fichiers musicaux Interblend créés précédemment peuvent à nouveau être visualisés et utilisés.

Important : Les fichiers musicaux originaux ne seront pas écrasés. Interblend crée de nouveaux fichiers musicaux dans lesquels l'oscillation régulatrice du pack sélectionné est intégrée.

### 4.3.9 Utiliser la musique Interblend créée

La musique Interblend ainsi créée peut être utilisée de différentes manières.

Applications possibles :

- Lecture directe sur ordinateur,
- Distribution au client sur une clé USB,
- Classement des documents clients,
- À utiliser comme musique pour une vidéo fractale,
- Application à domicile par le client.

Lors de la remise du fichier au client, une brève explication doit être fournie sur la manière dont la musique doit être utilisée.

Exemple:

« Écoutez cette musique dans un environnement calme. Vous n'avez rien de spécial à faire. Observez simplement les pensées, les sentiments ou les images intérieures qui surgissent. »

Remarque : Ne donnez pas d'instructions trop strictes au client, sauf si cela s'avère nécessaire sur le plan professionnel. L'application doit rester simple et pratique pour un usage quotidien.

### 4.3.10 Utiliser la musique Interblend dans une vidéo fractale

Un fichier musical Interblend peut également être utilisé lors de la création d'une vidéo fractale.

Pour ce faire, sélectionnez l'option « MP3/Interblend » dans la section « Musique » de l'onglet « Vidéo fractale ». Ensuite, sélectionnez le fichier audio d'Interblend approprié.

Résultat : La vidéo fractale est créée à partir d'un fichier musical contenant déjà l'oscillation régulatrice du paquet.

Conseil pratique : Cette combinaison peut s'avérer utile si le client doit bénéficier d'un accompagnement visuel et auditif. La vidéo fractale apporte l'image et le mouvement, tandis qu'Interblend complète la dimension musicale.

### 4.3.11 Instructions à transmettre aux clients

Les fichiers Interblend peuvent être partagés de différentes manières en fonction de leur taille. Les méthodes appropriées comprennent, par exemple :

- clé USB,
- lien de téléchargement protégé,
- transfert personnel vers l'appareil du client,
- À utiliser dans une vidéo fractale, qui sera fournie séparément.

L'envoi d'un courriel n'est utile que si le fichier est suffisamment petit et qu'aucune restriction n'est imposée par le fournisseur de messagerie.

Attention : n'utilisez pas de données sensibles concernant le client dans le nom du fichier. En particulier, évitez les diagnostics, les noms complets et les informations confidentielles relatives au dossier.

Les noms de fichiers neutres appropriés incluent, par exemple :

Interblend\_2026-07-01.mp3

Musique\_Interblend\_01.mp3

Musique de fond\_01.mp3

### 4.3.12 Directives pour une utilisation responsable

Interblend est un outil complémentaire. Il peut accompagner une séance ou fournir au client un soutien supplémentaire après celle-ci.

Par conséquent, veuillez noter :

- Ne présentez pas la musique Interblend comme un remède.
- Ne faites aucune promesse de guérison.
- Aucun effet médical ne peut être garanti.
- N'incitez pas vos clients à l'utiliser trop fréquemment.
- En cas de malaise, demandez au client d'arrêter l'utilisation.
- Expliquez l'application de manière simple et compréhensible.

Important : Avant de distribuer un fichier, vérifiez toujours qu'il a bien été créé à partir du paquet souhaité.

### 4.3.13 Erreurs courantes et solutions

Problème : Le bouton Interblend ne s'affiche pas.

Cause possible : Interblend n'est pas autorisé ou n'est pas disponible dans le produit actuel.

Solution : Vérifiez votre licence et le produit actuellement sélectionné. Si nécessaire, contactez votre partenaire de service BCS.

Problème : Le symbole de la note de musique n'affiche pas de coche verte.

Cause possible : aucun fichier musical Interblend n'a encore été créé pour ce paquet.

Solution : Ouvrez Interblend, sélectionnez une piste musicale et cliquez sur « Créer des fichiers Interblend ».

Problème : le bouton « Créer des fichiers Interblend » est inactif.

Cause possible : aucun morceau de musique n'a encore été sélectionné.

Solution : Dans la colonne « Sélection », cochez au moins un morceau de musique.

Problème : Impossible d'écouter un morceau de musique.

Cause possible : le fichier musical est manquant ou n'a pas encore été téléchargé.

Solution : Cliquez sur « Télécharger les pistes musicales manquantes » puis réessayez.

Problème : Le fichier musical créé est introuvable.

Cause possible : le fichier a été enregistré dans un répertoire Interblend distinct.

Solution : Ouvrez « Afficher la musique créée précédemment » pour visualiser les fichiers musicaux créés précédemment.

Problème : Le fichier musical est trop volumineux pour être envoyé par courriel.

Cause possible : le fichier audio est trop long ou le fournisseur de messagerie limite la taille des pièces jointes.

Solution : Utilisez une clé USB ou un lien de téléchargement approprié.

Problème : Le mauvais paquet a été intégré à la musique.

Cause possible : le mauvais paquet a été sélectionné avant l'ouverture d'Interblend.

Solution : Avant de commencer, vérifiez toujours le client actuel et le paquet sélectionné.

## 4.3.14 FAQ

### Question : Que fait Interblend ?

Réponse : Interblend intègre l'oscillation régulatrice d'un paquet BCS dans la musique sélectionnée. Cela crée un nouveau fichier musical que le client peut écouter.

### Question : La musique originale sera-t-elle modifiée ?

Réponse : Non. Interblend crée de nouveaux fichiers musicaux. Les pistes musicales originales restent inchangées.

### Question : Puis-je sélectionner plusieurs morceaux de musique ?

Réponse : Oui. Vous pouvez sélectionner plusieurs options. Un fichier Interblend distinct sera créé pour chaque morceau de musique sélectionné.

**Question : Comment puis-je savoir si un paquet contient déjà un fichier musical Interblend ?**

Réponse : Dans la liste des paquets sous « Envoyer/Rapports », l'icône Interblend avec la note affiche une coche verte.

**Question : Puis-je fournir la musique Interblend au client ?**

Réponse : Oui. Le fichier peut être fourni, par exemple, sur une clé USB ou via un lien de téléchargement approprié.

**Question : Puis-je utiliser la musique Interblend pour des vidéos fractales ?**

Réponse : Oui. Dans la vidéo fractale, la musique Interblend créée peut être sélectionnée comme musique à l'aide de l'option « MP3/Interblend ».

**Question : Interblend est-il une procédure médicale ?**

Réponse : Non. Interblend est un module complémentaire qui offre un soutien énergétique ou un accompagnement personnalisé. Il ne remplace en aucun cas un diagnostic ou un traitement médical.

## 4.4 Numérisation de sélection des couleurs en ligne

### 4.4.1 Vue d'ensemble

#### 4.4.1.1 Objet et champ d'application

Le scan de sélection de couleur en ligne permet la participation active d'un client ne pouvant être présent lors du scan physique, par exemple en raison de la distance, d'une mobilité réduite ou d'un rendez-vous exclusivement en ligne. Le client effectue sa sélection depuis son domicile via un lien personnel. BCS utilise ensuite cette sélection comme critère supplémentaire pour le scan du produit souhaité.

Le client et l'utilisateur n'ont pas besoin d'être connectés simultanément. L'utilisateur passe d'abord la commande, le client fait sa sélection au moment opportun, et l'utilisateur récupère ensuite les informations complétées dans BCS.

#### 4.4.1.2 Utilisation croisée des produits

Cette fonction est accessible depuis la gestion générale des clients. De petites icônes s'affichent dans la ligne client pour les produits BCS disposant de l'activation correspondante. Il est impératif de toujours créer la commande pour le produit sur lequel l'analyse doit être effectuée. Les icônes de produit visibles et l'emplacement de l'option dans la fenêtre d'analyse dépendent de la licence, du produit et de la version du programme.

#### 4.4.1.3 Démarcation

Le test de sélection des couleurs en ligne n'est ni un examen médical ni un examen psychologique. Les couleurs, les formes, les nuances de gris et les temps de sélection sont utilisés par BCS comme paramètres internes de son modèle énergétique. Ils ne permettent pas, à eux seuls, d'établir un diagnostic, une évaluation de la personnalité ou de formuler une quelconque affirmation fiable concernant le client.

### 4.4.2 Prérequis

- BCS est installé et activé avec le produit souhaité.
- La station de travail BCS dispose d'une connexion internet.
- Le client est enregistré dans le système de gestion de la clientèle et sélectionné de manière unique.
- Une adresse électronique valide est enregistrée dans le dossier client.
- L'envoi d'e-mails dans BCS est entièrement configuré.
- Le client possède un smartphone, une tablette, un ordinateur portable ou un ordinateur connecté à Internet et doté d'un navigateur à jour.

Avant de valider votre commande, veuillez vérifier attentivement le nom, l'adresse e-mail, la langue et le produit souhaité. La commande sera attribuée au client et au produit sélectionnés. Une erreur d'attribution ne peut être corrigée en sélectionnant à nouveau le client. Dans ce cas, veuillez supprimer la commande et en créer une nouvelle pour le client correct.

### 4.4.3 Aperçu du processus

- Utilisateur : Sélectionnez le client approprié et l'icône du produit souhaité dans la gestion des clients.

- Utilisateur : Demandez une nouvelle numérisation de sélection de couleurs en ligne ; BCS vous enverra un courriel contenant un lien personnel.
- Client : Ouvrez le lien dans votre navigateur et sélectionnez les couleurs, formes et nuances de gris proposées.
- BCS : Récupérer la sélection terminée depuis le serveur Bucher et l'attribuer au client et au produit.
- Utilisateur : Dans la fenêtre de numérisation, activez l'option « Utiliser la numérisation de sélection de couleurs en ligne existante » et lancez la numérisation.
- BCS : Utilisez les informations de sélection et de temps pour cette analyse et supprimez la tâche acceptée après traitement réussi.

## 4.4.4 Création d'une commande dans la gestion des clients

### 4.4.4.1 Sélectionner l'icône du client et du produit

- Ouvrir la gestion des clients.
- Trouvez et sélectionnez le client souhaité.
- Vérifiez l'adresse e-mail et la langue enregistrées du client.
- Dans la colonne de sélection des couleurs en ligne, repérez la petite icône du produit souhaité. En survolant l'icône avec votre souris (sans cliquer ni déplacer la souris), le nom du produit s'affichera.
- Cliquez sur l'icône du produit et sélectionnez l'élément de menu pour créer une nouvelle analyse de sélection de couleurs en ligne.

BCS vérifie les paramètres et l'adresse e-mail, puis confirme l'envoi. Une fois la commande validée, le client reçoit un e-mail contenant un lien personnalisé ; BCS met simultanément à jour le statut du produit.

### 4.4.4.2 Comprendre les symboles d'état

- Symbole gris plein : Aucune commande n'est en cours ou terminée pour ce produit.
- Symbole clair à contour foncé : La commande a été envoyée, mais n'est pas encore finalisée.
- Icône de produit colorée : La sélection est terminée et prête pour le produit correspondant.

Déplacez le curseur de votre souris sur une icône pour afficher le texte d'information associé.

L'apparence peut varier légèrement selon la version du programme ; l'attribution du produit et l'état affiché sont déterminants.

### 4.4.4.3 Renvoyer le lien ou supprimer la commande

Tant qu'une commande a été envoyée mais pas encore finalisée, vous pouvez renvoyer le lien via l'icône du produit. Utilisez cette fonctionnalité, par exemple, si le premier e-mail n'est pas arrivé ou a été supprimé par erreur. Au préalable, vérifiez l'adresse e-mail et, si nécessaire, demandez au client de vérifier également son dossier de courriers indésirables.

Une tâche ouverte ou terminée peut être supprimée via le même menu. Supprimez-la si elle a été attribuée au mauvais client ou produit, si elle n'est plus nécessaire ou si elle doit être remplacée par une nouvelle tâche. Après suppression, les informations de sélection associées ne sont plus disponibles pour la numérisation.

## **4.4.5 Mise en œuvre par le client**

### **4.4.5.1 Ouvrir le lien et commencer la sélection**


Le client ouvre l'e-mail envoyé par BCS sur un appareil connecté à Internet et clique sur le lien dans son navigateur. La sélection peut se faire à l'aide d'une souris, d'un pavé tactile ou d'un écran tactile. Une fois le site web lancé, le client est guidé pas à pas tout au long du processus.

Le client doit choisir spontanément, en fonction de son ressenti personnel du moment, sans concertation avec autrui. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Le navigateur ne doit pas être fermé pendant le processus et la page ne doit pas être rechargée intentionnellement.

### **4.4.5.2 Quels détails sont sélectionnés**

- deux couleurs actuellement préférées
- deux couleurs qui ne sont pas actuellement préférées
- deux formes préférées
- deux formes non préférées
- une nuance de gris préférée et une nuance de gris non préférée

Pour chaque deuxième sélection de couleur, l'application masque la première couleur sélectionnée et les nuances adjacentes. Cela crée une sélection supplémentaire plus indépendante du premier choix. Le temps nécessaire pour chaque sélection est également enregistré.

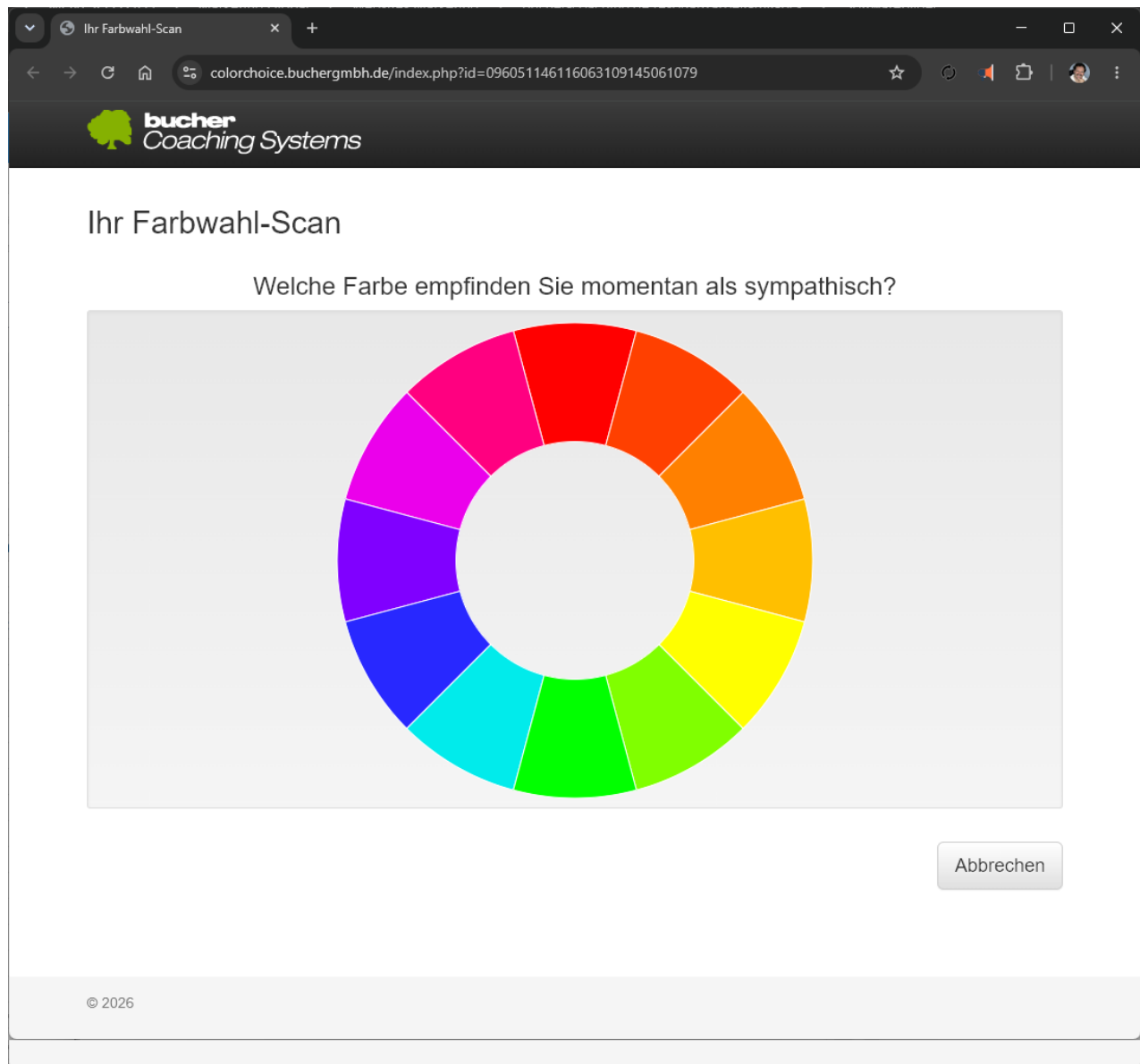

Le client effectue le scan de sélection des couleurs

#### 4.4.5.3 Terminer la sélection

Une fois la sélection finale effectuée, le site web transmet les informations. Le client doit attendre la confirmation. La commande personnelle est valable pour une seule exécution. Si une intervention ultérieure est nécessaire, l'utilisateur crée une nouvelle commande dans BCS.

#### 4.4.6 Récupération des sélections terminées dans BCS

##### 4.4.6.1 Actualiser l'état

BCS consulte les nuanciers en ligne disponibles dès l'ouverture du système de gestion des clients. Pour vérifier immédiatement leur disponibilité, cliquez sur « Mettre à jour le nuancier en ligne » dans

le système de gestion des clients. Une fois la recherche effectuée, l'icône du produit concerné s'illuminera en couleur.

La réponse du client par courriel fournit des informations complémentaires. Il est essentiel que le statut soit entièrement récupéré dans BCS pour son utilisation. Si l'icône reste inchangée, vérifiez votre connexion Internet, la tâche du client et le produit sélectionné.

## **4.4.7 Utilisation de la sélection de couleurs en ligne pour la numérisation d'un produit**

### **4.4.7.1 Vérifier avant de commencer**

- Dans BCS, sélectionnez le client exact pour lequel l'icône produit colorée est affichée.
- Ouvrez le produit pour lequel la commande a été créée.
- Ouvrez la zone de numérisation et effectuez la sélection de la base de données, de la catégorie ou du programme spécifique au produit.
- Vérifiez le focus, le type de numérisation et tous les autres paramètres spécifiques au produit.

### **4.4.7.2 Activer l'analyse de sélection des couleurs en ligne existante**

Si un jeu de données complet existe pour le client et le produit actuels, la fenêtre de numérisation affichera l'option « Utiliser la numérisation de sélection de couleurs en ligne existante ». Activez cette option. Lancez ensuite la numérisation comme indiqué pour le produit.

BCS utilise désormais la sélection des couleurs, des formes et des nuances de gris, ainsi que leurs temps de décision associés, comme base du processus de numérisation. Selon le produit, lorsque la sélection des couleurs en ligne est activée, d'autres options de numérisation peuvent être masquées, désactivées ou configurées automatiquement.

### **4.4.7.3 Après une utilisation réussie**

Une fois utilisées avec succès, les données de sélection des couleurs en ligne sont retirées de la demande ouverte. L'option dans la fenêtre de scan et l'icône d'état colorée ne sont alors plus disponibles pour cette demande. Pour faire participer de nouveau le client ultérieurement, créez une nouvelle demande de scan de sélection des couleurs en ligne.

Si l'analyse du produit est interrompue avant la fin du traitement, vérifiez son statut dans la gestion des clients avant de réessayer. Ne créez pas de deuxième tâche prématurément tant que l'enregistrement de données existant est disponible.

## **4.4.8 Classification responsable des informations de sélection**

BCS intègre les couleurs, formes, nuances de gris et temps de réponse sélectionnés dans son algorithme de résonance. Ces valeurs constituent des données d'entrée techniques pour le modèle de fonctionnement interne du programme. Une sélection rapide ou lente ne doit pas être interprétée isolément comme une mesure de certitude, d'incertitude ou de caractéristique. De même, les couleurs ou formes prises individuellement n'ont pas de signification univoque sans leur contexte global.

Utilisez les résultats de l'analyse comme point de départ potentiel pour la discussion et examinez leur plausibilité avec le client. Évitez de formuler des affirmations, des diagnostics ou des promesses définitives.

#### 4.4.9 Protection des données et répartition judiciaire

Pour le traitement des commandes, l'envoi des e-mails, les mises à jour de statut et l'attribution, les informations nécessaires relatives à la licence, au produit et au client, ainsi que les informations de sélection, sont traitées via le service de réservation. Par conséquent, veuillez passer vos commandes uniquement en utilisant une adresse e-mail valide et en respectant vos procédures applicables en matière de protection des données et de consentement.

Vérifiez le client actuel avant chaque expédition et analyse de produit. Ne partagez votre lien personnel avec personne. Évitez de divulguer des informations sensibles inutiles dans des notes publiques, des objets d'e-mails ou des captures d'écran. Vous pouvez supprimer les commandes ouvertes ou terminées inutiles dans la section « Gestion des clients ».

#### 4.4.10 Erreurs courantes et solutions

##### **Aucune icône de produit n'est affichée pour le client.**

Vérifiez que le produit souhaité est activé. La gestion des clients n'affiche que les icônes des produits associés à la licence existante.

##### **La commande ne peut pas être envoyée.**

Vérifiez votre connexion internet, vos paramètres de messagerie et l'adresse e-mail enregistrée dans votre dossier client. Corrigez et enregistrez ces informations avant de recréer la commande.

##### **Le client n'a pas reçu d'e-mail.**

Vérifiez l'adresse e-mail et demandez au client de vérifier son dossier de courriers indésirables. Tant que la commande est en cours, vous pouvez renvoyer le lien via l'icône du produit.

##### **Le client signale que l'opération est terminée, mais le symbole n'est pas encore coloré.**

Cliquez sur « Mettre à jour l'analyse de sélection des couleurs en ligne ». Vérifiez ensuite votre connexion Internet, le client et le produit sélectionnés. Si nécessaire, rouvrez la gestion des clients.

##### **L'option « Utiliser la sélection de couleurs en ligne existante » est absente de la fenêtre de numérisation.**

Cette option n'apparaît que si un ensemble complet de données a été récupéré pour le client et le produit actuels. Cochez l'icône colorée du produit, puis rouvrez la zone de numérisation.

##### **La commande a été créée pour le mauvais client ou le mauvais produit.**

N'utilisez pas cette commande. Supprimez-la à l'aide de l'icône du produit correspondant, puis créez une nouvelle commande avec l'affectation correcte.

### **Le lien ne peut pas être réutilisé une fois la sélection effectuée.**

Une commande est programmée pour **exécution** . Créez un nouveau scan de sélection de couleurs en ligne pour une nouvelle mission client.

## **4.4.11 FAQ**

### **L'utilisateur et le client doivent-ils être en ligne simultanément ?**

Non. La commande, la sélection, la récupération et le scan des produits peuvent avoir lieu à des moments distincts.

### **Le client peut-il effectuer sa sélection sur un smartphone ?**

Oui. Un navigateur moderne et une connexion internet suffisent généralement. La sélection peut également se faire via un écran tactile.

### **Un scan de sélection de couleurs en ligne déjà effectué peut-il être utilisé pour un autre produit ?**

Non. La commande est associée au produit sélectionné lors de l'expédition. Elle doit être utilisée avec ce produit et le client associé.

### **La même tâche peut-elle être utilisée plusieurs fois pour des analyses ?**

Non. Après utilisation, les données importées sont supprimées. Une nouvelle tâche est nécessaire pour une analyse ultérieure.

### **La sélection des couleurs en ligne remplace-t-elle les autres étapes de préparation à la numérisation du produit ?**

Non. Veuillez continuer à vérifier le client, le focus, les bases de données, les catégories, le type de numérisation et tous les paramètres spécifiques au produit. La sélection des couleurs en ligne complète le flux de travail de numérisation prévu.

# 5 Glossaire des termes importants

## 5.1 Vue d'ensemble

Ce glossaire explique les termes et fonctions les plus importants qui reviennent fréquemment dans le manuel. Il sert de section de référence. Vous pouvez y ajouter des termes au fur et à mesure de la publication de nouveaux chapitres.

### 5.1.1 Termes de A à Z

| Terme                                    | Signification / Utilisation                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouton IA / IA                           | Un bouton dans « Envoyer/Rapports » permet de créer une invite d'IA ou de modifier une évaluation d'IA enregistrée. Les données sont transférées vers un système d'IA externe via le presse-papiers.                                                            |
| analyse                                  | Étape d'évaluation au cours de laquelle les résultats sont déterminés et hiérarchisés (par exemple, analyse).                                                                                                                                                   |
| Annexe                                   | Section du chapitre contenant des informations supplémentaires, un glossaire, une FAQ et l'historique des versions.                                                                                                                                             |
| Scan d'aura                              | Le scan Bucher Aura Coach offre une vue d'ensemble structurée de l'aura, du corps et des chakras. Les résultats constituent un accompagnement énergétique et ne sauraient se substituer à un diagnostic médical.                                                |
| Langue de sortie (IA)                    | Langue dans laquelle la réponse de l'IA doit être générée. La langue définie dans le champ « Langue » de l'onglet « Données personnelles » du client est prioritaire. Après toute modification, l'invite doit être régénérée.                                   |
| Mode automatique / Mode automatique Aura | Cette fonction du Bucher Aura Coach effectue une analyse, une harmonisation et, en option, l'envoi d'un rapport par courriel aux clients préalablement sélectionnés. La participation est paramétrable individuellement pour chaque client dans ses paramètres. |
| Journal du mode automatique              | Aperçu après une exécution en mode automatique. Ce journal affiche les clients traités et les erreurs éventuelles, comme les courriels non envoyés. Il est recommandé de le consulter après chaque exécution.                                                   |
| BCS (Bucher Coaching Systems)            | Plateforme logicielle partagée de Bucher GmbH. Elle combine des fonctions centrales telles que la gestion des clients, la sauvegarde des données et le reporting avec divers produits et fonctions supplémentaires.                                             |
| BCS Core                                 | Pack de démarrage professionnel comprenant la version complète de Bucher Vita Coach, Bucher Fractal, Bucher Interblend, l'analyse IA et le capteur CA. Conçu comme une base solide et évolutive.                                                                |
| BCS Focus Edition                        | Un ensemble pré-assemblé et spécialisé pour un domaine d'application clairement défini. Il existe des éditions Focus, par exemple, pour Bucher Aura Coach, Bucher TAO Medical, Bucher Bioresonanz Triselect et Corpus Analyser.                                 |

| Terme                                   | Signification / Utilisation                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCS Premium                             | Pack BCS complet combinant les systèmes les plus importants, les principales fonctions supplémentaires, l'évaluation par IA, le capteur CA et la maintenance logicielle mentionnés dans l'offre.                                              |
| Partenaire de service BCS               | Votre représentant commercial dédié et interlocuteur privilégié pour les demandes d'utilisation, les instructions et la formation. Les problèmes techniques, l'installation et l'activation sont généralement pris en charge par Bucher GmbH. |
| Broadcast                               | Zone de paramètres permettant de définir les valeurs par défaut de la durée, de l'intensité et des autres paramètres de transmission. Ces valeurs standardisent le fonctionnement.                                                            |
| Bucher-Family                           | Fonction permettant de transférer des paquets à d'autres utilisateurs (ou à soi-même avec plusieurs licences). Désactivée par défaut, elle est activée sur demande.                                                                           |
| serveur Bucher                          | Les serveurs de Bucher GmbH sont utilisés pour des fonctions en ligne spécifiques, telles que la récupération de bases de données ou l'enregistrement et le chargement de séquences d'invites. Une connexion internet est requise.            |
| Capteur CA                              | Le matériel BCS connecté en USB sert à la numérisation ou à l'envoi, selon le produit et le flux de travail. Pour les échantillons et les supports de données, le capteur est positionné dans le plateau prévu à cet effet.                   |
| Évolution des chakras                   | Affichage des progrès dans le Bucher Aura Coach, qui permet de visualiser les changements dans les résultats des chakras sur plusieurs analyses.                                                                                              |
| Exportation CSV (Excel)                 | Fonction d'exportation permettant de générer un fichier CSV pour Excel à partir des données du paquet.                                                                                                                                        |
| Bases de données                        | Bases de données radioniques gérées, importées et sélectionnées pour les analyses dans Vita Coach.                                                                                                                                            |
| Fenêtre de détails                      | Dans certaines boîtes de dialogue ou certains paramètres, les boutons principaux peuvent être masqués. Le retour s'effectue généralement via le bouton Retour.                                                                                |
| Diagnostics/Symptômes                   | Onglet de la gestion des clients permettant de saisir des informations destinées, par exemple, à de futures évaluations par IA.                                                                                                               |
| Documents (Module)                      | Onglet du client disponible selon la licence, pour conserver des fichiers tels que des rapports de laboratoire, des photos ou des documents Office.                                                                                           |
| Rapport par courriel (mode automatique) | Un rapport peut être envoyé automatiquement au client après une exécution en mode automatique. Pour cela, le compte de messagerie, l'adresse du client et le consentement à l'envoi doivent être correctement configurés.                     |
| Texte introductif                       | Texte libre permettant de documenter l'objectif, le contexte ou l'évolution d'un paquet, souvent dans Envoyer/Rapports.                                                                                                                       |
| entrée                                  | Un résultat/élément unique au sein d'un paquet (par exemple, issu d'une analyse ou ajouté manuellement).                                                                                                                                      |
| Date de fin                             | Date limite de transmission ou de participation d'un client au mode automatique Aura. Passée cette date, le processus s'arrêtera.                                                                                                             |

| Terme                                 | Signification / Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouton Exporter                       | Bouton dans la liste des paquets (Envoyer/Rapports) qui ouvre un menu contextuel avec des fonctions d'exportation/transfert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Travail à distance (télésomatique)    | Méthode de travail impliquant une collaboration à distance avec le client. Nécessite une clarification claire du consentement, de la protection des données et des procédures.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| maintenance à distance                | Fonction d'assistance pour lancer une maintenance à distance sécurisée si nécessaire (chapitre dans la section des notions de base).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Filtre (clients)                      | Une fonction de gestion des clients qui restreint la visibilité des clients. Lorsqu'elle est activée, les clients semblent avoir « disparu ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| scan de suivi                         | Il s'agit d'un examen ultérieur réalisé au cours du processus. Il complète/met à jour les résultats par rapport à l'examen initial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Progression / Évolution               | Documentation relative à plusieurs paquets (scan initial et scans de suivi), incluant la planification, les ajustements et les résultats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fractale / Fonction fractale          | Une fonction complémentaire de produit croisé permettant de créer des représentations abstraites individuelles de couleurs et de formes à partir d'un scan ou d'un paquet. Les fractales servent d'accompagnement symbolique et non de diagnostic médical.                                                                                                                                                                                                                  |
| Image fractale                        | Représentation statique, calculée individuellement en couleur et en forme à partir d'un scan ou d'un paquet. Elle peut être visualisée, imprimée, enregistrée ou partagée numériquement.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vidéo fractale                        | Affichage animé de formes fractales et de couleurs. Selon les paramètres, il peut inclure des éléments d'arrière-plan, une introduction, une conclusion et de la musique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Point de crédit                       | « Crédit » dans le système collectif : pour chaque groupe de 50 paquets d'autres utilisateurs que vous transmettez, vous recevez un point de crédit permettant de téléverser vos propres paquets.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Harmonisation / transmission          | Étape de mise en œuvre ou de transmission au cours de laquelle les informations de régulation sélectionnées sont transmises conformément au flux de travail prévu par le BCS.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Boutons principaux                    | Barre de boutons en haut de l'écran pour les fonctions les plus importantes (clients, numérisation, envoi/rapports, bases de données le cas échéant). Pour une navigation rapide.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| importer                              | Importer des bases de données ou des paquets importés/fichiers d'exportation (par exemple, ZIP) dans une installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Invite individuelle                   | Tâche activée et modifiée par l'utilisateur pour une analyse d'IA spécifique. Chaque invite peut contenir des espaces réservés et être enregistrée comme ensemble d'invites sur le serveur Bucher.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Effacer les informations des supports | Lorsque cette option est activée, les supports d'information utilisés sont effacés avant leur traitement. Toute information incorporée accidentellement est ainsi éliminée. Le support d'information retrouve alors ses propriétés d'origine. Un cristal de roche, par exemple, redevient un cristal de roche avec toutes ses propriétés et fonctions, mais sans vibrations parasites. Les propriétés « pures » originelles du support d'information sont ainsi préservées. |

| Terme                                   | Signification / Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moduler des supports d'information      | Transfert/« impression » des informations de régulation sur des supports (par exemple, des globules, une carte magnétique), selon le mode de fonctionnement.                                                                                                                                                                        |
| Analyse initiale                        | Analyse initiale d'un sujet/point de départ. Elle sert souvent de base aux analyses de suivi et à l'avancement des travaux.                                                                                                                                                                                                         |
| Forcer l'analyse initiale               | Paramètre client en mode automatique Aura. Ceci garantit qu'une analyse initiale sera effectuée pour ce client lors de la prochaine exécution du mode automatique.                                                                                                                                                                  |
| Interblend / Musique subliminale        | Une fonction supplémentaire permet d'intégrer des informations de régulation issues d'un paquet sélectionné dans une ou plusieurs pièces musicales. Un nouveau fichier Interblend est créé pour chaque pièce sélectionnée ; la musique originale reste inchangée.                                                                   |
| Fichier Interblend / Musique Interblend | Un fichier audio nouvellement généré, dans lequel Interblend intègre les informations de régulation du paquet sélectionné. Il peut être écouté, partagé ou utilisé comme musique pour une vidéo fractale.                                                                                                                           |
| Intensité d'Interblend                  | Le paramètre « Intensité » de la fenêtre Interblend détermine l'intensité avec laquelle les informations de régulation sont intégrées à la musique sélectionnée.                                                                                                                                                                    |
| Intro / Outro (Vidéo Fractal)           | Introduction ou conclusion optionnelle pour une vidéo fractale. Selon les paramètres, un logo, un titre, une description et une image fractale peuvent être inclus.                                                                                                                                                                 |
| Effet kaléidoscope                      | Option d'affichage pour les vidéos fractales. L'apparence dépend du nombre de rayons ou d'axes de symétrie et de la vitesse de déplacement.                                                                                                                                                                                         |
| Réponse de l'IA                         | Texte généré par un système d'IA externe. Il doit faire l'objet d'une vérification complète de son exactitude et de sa qualité linguistique avant d'être stocké dans BCS ou transmis à un client.                                                                                                                                   |
| Évaluation de l'IA                      | Évaluation complémentaire des informations d'un scan ou d'un paquet par un système d'IA externe. Le transfert s'effectue via le presse-papiers ; l'IA n'a pas d'accès direct à BCS. La responsabilité professionnelle reste celle de l'utilisateur.                                                                                 |
| client                                  | Personne, animal, plante ou objet sur lequel des données sont collectées et avec lequel un travail est effectué.                                                                                                                                                                                                                    |
| Image du client                         | Photo ou image dans la gestion des clients pour faciliter leur identification. Elle peut être ajoutée par capture, importation ou via le presse-papiers.                                                                                                                                                                            |
| Paramètres du client                    | Options spécifiques au client, en fonction du produit et de la licence.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestion de la clientèle                 | Pôle central de création, de gestion et de sélection des clients. Base du travail transversal sur les produits au sein de BCS.                                                                                                                                                                                                      |
| Diffusion collective                    | Fonction permettant de mettre des paquets à disposition afin que de nombreux utilisateurs puissent également les transmettre. Leur contenu est fourni sous forme de fichier MP3 dont les informations ne sont pas lisibles (bruit blanc). Une brève description et, le cas échéant, le nom du thérapeute ou du coach sont visibles. |

| Terme                                              | Signification / Utilisation                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu contextuel                                    | Un menu qui propose des fonctions supplémentaires dans une ligne/au sein d'un élément (par exemple, les options d'exportation du paquet).                                                                                                                       |
| Brève description                                  | Texte court dans le système collectif de classification des paquets. Ne doit contenir aucune donnée permettant d'identifier le client.                                                                                                                          |
| Stocké localement                                  | Remarque : Les données client et les tâches quotidiennes de BCS sont généralement stockées localement sur le PC. Les fonctions en ligne explicitement désignées, telles que la récupération de données ou les ensembles d'invites, utilisent le serveur Bucher. |
| Non répertorié (YouTube)                           | La visibilité sur YouTube désigne une vidéo qui n'est pas accessible publiquement par le biais des recherches ou affichée sur la chaîne, mais qui reste accessible à toute personne possédant le lien. Ce n'est pas la même chose qu'une vidéo « privée ».      |
| Paquet                                             | Un ensemble d'entrées relatives à un sujet, une séance ou une phase de traitement. Facilite la priorisation, la planification et la documentation.                                                                                                              |
| Copier le paquet                                   | Fonction permettant de dupliquer et de développer ou modifier un paquet initial.                                                                                                                                                                                |
| Transmission des paquets et analyse des intensités | Transfère les paquets vers un autre client et réanalyse les paramètres pour correspondre au nouveau client.                                                                                                                                                     |
| Fusionner les paquets                              | Fonction permettant de regrouper plusieurs paquets initiaux en un seul paquet s'ils traitent du même sujet. Améliore la clarté.                                                                                                                                 |
| Intensité du paquet                                | Intensité de la transmission dans le plan d'envoi. Elle est souvent influencée par les valeurs prédéfinies dans Broadcast.                                                                                                                                      |
| Nom du paquet                                      | Nom librement sélectionnable pour la reconnaissance et le suivi des progrès (par exemple, Session 1, Sommeil).                                                                                                                                                  |
| Type de paquet                                     | Indique si un paquet correspond à un scan initial ou à un scan de suivi.                                                                                                                                                                                        |
| Espace réservé (IA)                                | Étiquettes d'une invite individuelle qui sont automatiquement remplacées par des données provenant de BCS lors de la génération de l'invite, par exemple, l'âge, le point focal, les symptômes, la langue de sortie ou les résultats de l'analyse.              |
| Prompt                                             | Définition de tâche préparée pour un système d'IA. BCS propose des invites standard et des invites personnalisées ; les espaces réservés sont remplis avec les données du client désigné et les données de numérisation lors de la génération.                  |
| Ensemble d'invites                                 | Ensemble d'invites individuelles configurées. À partir de la version 6.24.1 de BCS, un ensemble d'invites ne peut être enregistré et chargé que depuis le serveur Bucher ; le stockage local d'ensembles d'invites n'est pas possible.                          |
| Visibilité de l'ensemble d'invites                 | Déterminer si un ensemble d'invites stocké sur le serveur Bucher est uniquement visible par l'utilisateur ou s'il est également proposé aux autres clients Bucher sous « Charger l'ensemble d'invites ».                                                        |
| Rapid Transfer                                     | Transmission rapide, utilisée notamment pour la préparation des supports d'information. Pour une transmission directe à un client présent, une transmission plus lente est utilisée selon la procédure décrite.                                                 |

| Terme                            | Signification / Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oscillation régulatrice          | Terme interne du BCS désignant les informations de régulation d'un paquet pouvant être envoyé, transféré sur un support de données ou intégré à de la musique par Interblend. Ce terme ne fait pas référence à une valeur de laboratoire médical.                                                                                                                                                 |
| Remedy Pyramid                   | Fonction/registre client qui n'est pertinente que lors de l'utilisation de Remedy Pyramids.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| résonance                        | Terme désignant l'« adéquation » d'une entrée au client dans un contexte énergétique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Analyse/scan par résonance       | Ce processus d'analyse identifie les résonances les plus fortes pour le client sélectionné à partir de bases de données choisies. Les résultats sont des indications/thèmes, et non un diagnostic médical.                                                                                                                                                                                        |
| Facteur de résonance             | Valeur indicative de l'ambiance générale d'un paquet. Définie dans le manuel comme la moyenne des valeurs d'intensité.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hygiène du sommeil               | Aménager son quotidien et son environnement de sommeil pour favoriser un sommeil sain et réparateur. Cela inclut, par exemple, des horaires de sommeil réguliers, une chambre calme et sombre, une température confortable, de l'exercice physique en journée, une routine relaxante en soirée et une consommation modérée de caféine, d'alcool, de repas copieux et d'écrans stimulants le soir. |
| Envoyer/Rapports                 | Zone de stockage, d'évaluation, de documentation et, selon la procédure, de transfert/envoi ou d'exportation des paquets. L'analyse (numérisation) est délibérément dissociée de la mise en œuvre.                                                                                                                                                                                                |
| Phase de diffusion               | Période pendant laquelle la transmission a lieu (par exemple, toute la journée, le jour, la nuit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Programme de diffusion           | L'ensemble des paramètres qui définissent le début, la durée, le rythme et l'intensité de la diffusion.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transmission                     | Heure/statut indiquant qu'un paquet a été transmis (partie de l'affichage de l'historique des paquets).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ensemble                         | Combinaison de bases de données enregistrées pour les analyses récurrentes. Un ensemble d'analyses ne doit pas être confondu avec un ensemble d'invites pour les invites d'IA individuelles.                                                                                                                                                                                                      |
| Maintenance logicielle           | La fourniture contractuelle de mises à jour régulières, de nouvelles versions du programme et d'ajustements techniques du logiciel Bucher est incluse. La formation, le conseil méthodologique et le dépannage des logiciels tiers ou du matériel informatique ne sont pas inclus de façon automatique.                                                                                           |
| espèces                          | Type de client (par exemple, humain, chien, plante, objet). Ce type est attribué au client et détermine notamment la classification.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Invite standard                  | Tâches fournies par BCS pour les évaluations récurrentes de l'IA, par exemple, l'évaluation des résultats d'analyses individuelles, une recommandation pour le client ou des affirmations.                                                                                                                                                                                                        |
| Catégorie de départ (Aura Coach) | Catégorie choisie au départ dans une Aura Coach Focus Edition, par exemple Human, Fauna, Horse, Business ou Place. D'autres catégories peuvent être ajoutées selon la licence et l'offre.                                                                                                                                                                                                         |

| Terme                     | Signification / Utilisation                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heure de début            | Période à partir de laquelle une diffusion est censée prendre effet (élément de la grille des programmes).                                                                               |
| Tweak                     | Enregistrer une transmission sous forme de Tweak, uniquement pour les scans initiaux. Utile avec tweaklite.                                                                              |
| tweaklite                 | Matériel de lumière colorée utilisant les fonctions Tweak.                                                                                                                               |
| transmission              | Étape de mise en œuvre/transmission (par exemple, envoi/rapports, supports d'information).                                                                                               |
| rappel de renouvellement  | Fonction de marquage/planification pour étendre ou révéifier un paquet ultérieurement.                                                                                                   |
| Fenêtre de bienvenue      | Fenêtre de démarrage et de vue d'ensemble donnant accès notamment aux clients, aux bases de données et au changement de produit.                                                         |
| Retour                    | Bouton de navigation permettant de revenir à la fenêtre principale depuis les fenêtres de détail.                                                                                        |
| Presse-papiers (IA)       | Chemin de transfert entre BCS et un système d'IA externe. BCS copie l'invite préparée dans le presse-papiers ; la réponse validée de l'IA est ensuite renvoyée à BCS par le même chemin. |
| Cycle / Cycle de balayage | Une série cohérente comprenant un examen initial et tous les scans de suivi associés. Un nouvel examen initial marque le début d'un nouveau cycle.                                       |

## 6 Contact et assistance

### aperçu

Ce chapitre explique qui contacter en cas de questions. Pour toute question relative au contenu de l'application, veuillez contacter votre représentant Bucher (partenaire de service BCS). Pour toute question technique ou en cas de dysfonctionnement, veuillez contacter Bucher GmbH.

### Questions relatives au contenu de l'application

Pour toute question relative aux procédures, au contenu des formations, aux exemples pratiques et aux flux de travail liés aux produits, veuillez contacter votre représentant Bucher (partenaire de service BCS). Il connaît votre système, votre situation en matière de licences et votre application type.

### Questions techniques et dysfonctionnements

Pour tout problème d'installation, d'activation, message d'erreur, problème de base de données ou de mise à jour, veuillez contacter Bucher GmbH.

### Contact (Bucher GmbH)

Téléphone : +49 7174 7400 (du lundi au vendredi de 11h00 à 16h00)

Courriel : [support@buchergmbh.de](mailto:support@buchergmbh.de)

### Conseil pratique

Lors de l'envoi de demandes d'assistance technique, veuillez indiquer la version du logiciel, son architecture (32 ou 64 bits) et une brève description de l'erreur. Cela permettra d'accélérer le traitement de votre demande.

### FAQ

Qu'est-ce qu'un partenaire de service BCS ?

Il s'agit de votre partenaire commercial dédié et de votre interlocuteur privilégié pour les demandes, les instructions et la formation.

### De quoi Bucher GmbH est-elle responsable ?

Pour toute question technique, dysfonctionnement, installation, activation et mises à jour.