



bucher
Coaching Systems

Manuale BCS

**Manuale d'uso di Bucher
Coaching Systems**

Versione del software: 6.25.5

Versione del manuale: V029 · Revisione italiana: 16 settembre 2026

Destinatari:

utenti, coach e terapeuti

Editore:

Bucher GmbH,

Schloßstraße 30, 73572 Heuchlingen, Germania

Contatti e assistenza:

Domande sui contenuti e sull'utilizzo:

Si prega di contattare il proprio partner di assistenza BCS.

Per domande tecniche e malfunzionamenti:

Si prega di contattare Bucher GmbH.

E-mail: support@buchergmbh.de

Sito web:

www.buchergmbh.de

www.bucher-vita-coach.de

Chatta nel BCS

Sommario

1. Informazioni su Bucher GmbH e BCS	7
1.1 Prefazione	7
1.2 Storia della sua creazione	7
1.3 Filosofia e gruppi target	7
1.4 Modello di licenza e concetto di installazione	7
2 Fondamenti comuni di BCS	8
2.1 Installazione e configurazione	9
2.1.1 Requisiti di installazione:	9
2.1.2 Il download (Scaricare il software).....	9
2.1.3 L'installazione	11
2.1.4 Attivazione del software	13
2.1.5 In caso di problemi.....	15
2.1.6 Funzionalità speciali quando si utilizza il browser Microsoft Edge.....	15
2.1.7 Avvio del programma e accesso	16
2.1.8 La finestra di benvenuto in sintesi	17
2.2 Gestione dei clienti	19
2.2.1 Scopo	19
2.2.2 Prerequisiti	19
2.2.3 Aprire la gestione clienti	19
2.2.4 Creazione di un nuovo cliente	20
2.2.5 Modifica dei clienti esistenti	20
2.2.6 Eliminazione dei clienti.....	21
2.2.7 Ricerca, ordinamento ed esportazione	21
2.2.8 Utilizzo delle funzioni di protezione dei dati.....	22
2.2.9 Note	22
2.3 Navigazione generale e logica di funzionamento	23
2.3.1 Scopo	23
2.3.2 Prerequisiti	23
2.3.3 Passaggio dalla finestra di benvenuto alle aree principali	23
2.3.4 Navigazione all'interno delle finestre principali	23
2.3.5 Utilizzo dei menu contestuali e dei pulsanti di accesso rapido	24
2.3.6 Simboli e pulsanti uniformi	24
2.3.7 Passaggio tra i prodotti	24
2.3.8 Utilizzo di più lingue dell'interfaccia	25
2.3.9 Note	25
2.4 Backup e ripristino dei dati	26
2.4.1 Scopo	26
2.4.2 Prerequisiti	26
2.4.3 Backup automatico dei dati all'uscita	26
2.4.4 Avvio manuale di un backup completo	26
2.4.5 Verifica del backup automatico	27
2.4.6 Definire un obiettivo di backup sensato	27
2.4.7 Creare un backup completo	27
2.4.8 Ripristino di emergenza	27
2.4.9 Domande frequenti	28
2.4.10 Protezione tramite password per i file PDF	28

2.4.11 Trasferimento dati dalla precedente versione BCS 5	28
2.5 Chat, seminari e supporto	30
2.5.1 Scopo	30
2.5.2 Prerequisiti	30
2.5.3 Apri la chat e scegli un nome	30
2.5.4 Invio di messaggi	30
2.5.5 Accesso a seminari e seminari online	30
2.5.6 Utilizzare la sezione "Notizie"	31
2.5.7 Contatta l'assistenza	31
2.5.8 Note	31
2.6 Manutenzione remota	32
2.6.1 Scopo	32
2.6.2 Prerequisiti	32
2.6.3 Istruzioni dettagliate	32
2.7 Distinzione tra durata della trasmissione e velocità di trasmissione	33
2.7.1 Due riferimenti temporali indipendenti	33
2.7.2 Selezionare la velocità di trasmissione appropriata	33
2.7.3 Impostazione della durata della trasmissione	33
2.7.4 Regola breve ed esempio	34
3 Capitoli specifici dei prodotti	35
3.1 Bucher Vita Coach	35
3.1.1 Introduzione e caratteristiche speciali	35
3.1.2 Primi passi (registrazione, interfaccia, creazione dei clienti)	41
3.1.3 Eseguire l'analisi di risonanza (scansione)	51
3.1.4 Valutare e dare priorità ai risultati	56
3.1.5 Pianificazione dei pacchetti di coaching e dei programmi delle sessioni	62
3.1.6 Stampa il pacchetto/i risultati o salvati come PDF	66
3.1.7 Trasferimento dei pacchetti al campo informazioni	67
3.1.8 Trasmissione collettiva	70
3.1.9 Esportazione dei pacchetti	74
3.1.10 Valutazione dei risultati della scansione mediante intelligenza artificiale	75
3.1.11 Eliminazione dei pacchetti	75
3.2 Bucher Aura Coach	77
3.2.1 Panoramica	77
3.2.2 Prerequisiti	78
3.2.3 Selezione dei clienti	79
3.2.4 Impostazioni di categoria per il cliente	79
3.2.5 Eseguire una scansione dell'aura	80
3.2.6 Visualizzazione e comprensione dei risultati	82
3.2.7 Armonizzazione e trasmissione	86
3.2.8 Utilizzo della modalità automatica	87
3.3 Corpus Analyser	94
3.3.1 Panoramica e utilizzo previsto	94
3.3.2 Prerequisiti, installazione e configurazione	94
3.3.3 Impostazioni di base dell'Corpus Analyser	96
3.3.4 Fondamenti tecnici	97
3.3.5 Preparazione dei clienti	98
3.3.6 Preparare la scansione	100
3.3.7 Utilizzo della tecnica di scansione di andamento	102

3.3.8 Eseguire la scansione	104
3.3.9 Valutazione delle scansioni di andamento	105
3.3.10 Visualizzazione e selezione dei risultati della scansione	106
3.3.11 Classificare e discutere i risultati da una prospettiva professionale	109
3.3.12 Armonizzazione e trasmissione	110
3.3.13 Creazione di report e valutazione dell'IA in Corpus Analyser	113
3.3.14 Creazione, scambio e utilizzo dei filtri di focus	116
3.3.15 Gestione delle scansioni e dei risultati	117
3.3.16 Errori comuni e soluzioni	118
3.3.17 Domande frequenti sull'Corpus Analyser	119
3.4 Bucher TAO Medical	120
3.4.1 Panoramica e utilizzo previsto	120
3.4.2 Modello tecnico di funzionamento	121
3.4.3 Prerequisiti e impostazioni di base	122
3.4.4 Preparazione dei dati del cliente e focus	123
3.4.5 Eseguire la scansione TAO	124
3.4.6 Interpretazione del risultato dell'I Ching	125
3.4.7 Utilizzo dell'elenco dei punti di agopuntura	126
3.4.8 Significati e aree di informazioni supplementari	127
3.4.9 Utilizzo di immagini e video frattali	128
3.4.10 Invio e applicazione energetica	128
3.4.11 Rapporti e valutazioni sull'IA	130
3.4.12 Utilizzo della modalità automatica TAO opzionale	131
3.4.13 Gestione, esportazione e backup delle scansioni	132
3.4.14 Domande frequenti e risoluzione dei problemi	132
3.5 Bucher Bioresonanz Triselect FE	134
3.5.1 Panoramica e utilizzo previsto	134
3.5.2 Modello di funzionamento energetico	134
3.5.3 Prerequisiti e impostazioni di base	135
3.5.4 Preparazione del cliente e focalizzazione	137
3.5.5 Eseguire la scansione Triselect	138
3.5.6 Comprendere i risultati e utilizzarli per il dialogo con il cliente	139
3.5.7 Utilizzo dei programmi di indicazione	140
3.5.8 Trasmissione e regolazione energetica	142
3.5.9 Rapporti e valutazioni dell'IA	143
3.5.10 Utilizzo della modalità automatica Triselect opzionale	144
3.5.11 Gestione e backup delle scansioni	145
3.5.12 Errori comuni e soluzioni	145
3.5.13 Domande frequenti su Bucher Bioresonanz Triselect FE	146
3.6 Bucher Stress Balance	148
3.6.1 Panoramica e utilizzo previsto	148
3.6.2 Principio di funzionamento e simbolismo	148
3.6.3 Prerequisiti e preparazione	149
3.6.4 Configurazione di Stress Balance	150
3.6.5 Eseguire l'applicazione manuale di Stress Balance	151
3.6.6 Classificazione degli indicatori di stress e del feedback	153
3.6.7 Utilizzo della modalità automatica	154
3.6.8 Creazione e output di un report	155
3.6.9 Stress Balance in altri processi BCS	156
3.6.10 Uso responsabile	156
3.6.11 Errori comuni e soluzioni	157

3.6.12 Domande frequenti su Bucher Stress Balance	157
4 Moduli aggiuntivi comuni a più prodotti.....	159
4.1 Valutazione dell'IA: lavorare con l'intelligenza artificiale in BCS	159
4.1.1 Panoramica	159
4.1.2 Scopo della valutazione dell'IA	159
4.1.3 Protezione dei dati e principio fondamentale	159
4.1.4 Prerequisiti	160
4.1.5 Registrare in modo significativo diagnosi e sintomi.....	160
4.1.6 Ricreare la valutazione dell'IA sulla base di informazioni aggiuntive.....	161
4.1.7 Prompt standard in BCS	161
4.1.8 Quali prompt sono adatti ai diversi scopi	161
4.1.9 Processo di valutazione dell'IA.....	162
4.1.10 Verifica e modifica delle risposte dell'IA.....	164
4.1.11 Utilizzo di prompt personalizzati.....	165
4.1.12 Attivare e assegnare un nome al prompt personalizzato.....	165
4.1.13 Segnaposto nei prompt personalizzati	168
4.1.14 Utilizzo di prompt personalizzati nell'area "Invia/Report"	168
4.1.15 Salvataggio e caricamento di singoli set di prompt sul server Bucher	169
4.1.16 Salvare un set di prompt sul server Bucher	170
4.1.17 Rendere disponibile il set di prompt ad altri utenti	172
4.1.18 Caricare un set di prompt	172
4.1.19 Visibilità dei set di prompt.....	173
4.1.20 Informazioni sulla protezione dei dati per i set di prompt.....	173
4.1.21 Errori comuni e soluzioni per i set di prompt.....	174
4.1.22 Domande frequenti sui set di prompt	174
4.1.23 Stampa e output PDF	175
4.1.24 Linee guida per un utilizzo responsabile.....	177
4.1.25 Errori comuni e soluzioni	177
4.1.26 FAQ	178
4.2 Funzione frattale di Bucher.....	179
4.2.1 Panoramica	179
4.2.2 Scopo della funzione frattale	179
4.2.3 Differenza tra immagine frattale e video frattale	179
4.2.4 Prerequisiti	179
4.2.5 Creazione di un'immagine frattale.....	180
4.2.6 Utilizzo dell'immagine frattale con il cliente	180
4.2.7 Creazione di un video frattale.....	181
4.2.8 Utilizzo del video frattale con il cliente	185
4.2.9 Interpretazione tramite IA di un'immagine frattale	186
4.2.10 FAQ	186
4.3 Bucher Interblend.....	187
4.3.1 Panoramica	187
4.3.2 Scopo di Interblend.....	187
4.3.3 Punto di ingresso.....	187
4.3.4 Prerequisiti	187
4.3.5 Aprire la finestra di Interblend	188
4.3.6 Struttura della finestra Interblend.....	188
4.3.7 Ascolto e selezione di brani musicali	189
4.3.8 Creazione di file Interblend	190
4.3.9 Utilizzo della musica Interblend creata	190

4.3.10 Utilizzo della musica Interblend per un video frattale	190
4.3.11 Istruzioni da trasmettere ai clienti	191
4.3.12 Linee guida per un utilizzo responsabile.....	191
4.3.13 Errori comuni e soluzioni	191
4.3.14 FAQ	192
4.4 Scansione di selezione del colore online	194
4.4.1 Panoramica	194
4.4.2 Prerequisiti	194
4.4.3 Panoramica del processo	194
4.4.4 Creare una richiesta nella gestione clienti	195
4.4.5 Implementazione da parte del cliente	195
4.4.6 Recupero delle selezioni completate in BCS	197
4.4.7 Utilizzo della selezione del colore online per la scansione di un prodotto.....	197
4.4.8 Classificazione responsabile delle informazioni di selezione	197
4.4.9 Protezione dei dati e assegnazione accurata	198
4.4.10 Errori comuni e soluzioni	198
4.4.11 FAQ.....	199
5 Glossario dei termini importanti	200
5.1 Panoramica	200
5.1.1 Termini dalla A alla Z.....	200
6 Contatti e supporto	207

1. Informazioni su Bucher GmbH e BCS

1.1 Prefazione

La piattaforma Bucher Coaching Systems (BCS) è il risultato di oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni software per la medicina complementare e il coaching. Il nostro obiettivo è fornire a terapeuti, coach e consulenti uno strumento potente, flessibile e intuitivo che li supporti al meglio nel loro lavoro quotidiano.

Tutte le denominazioni personali contenute in questo manuale si applicano a tutti i generi.

1.2 Storia della sua creazione

Fin dalla fondazione di Bucher GmbH nel 1994, ci siamo dedicati costantemente allo sviluppo dei nostri prodotti. La piattaforma BCS riunisce oggi un'ampia gamma di prodotti specializzati sotto un'unica base tecnica. Grazie alla stretta collaborazione con i nostri utenti e all'integrazione dei loro feedback, siamo stati in grado di migliorare costantemente il software e di adattarlo alle esigenze pratiche.

1.3 Filosofia e gruppi target

La nostra filosofia è quella di raggruppare tutti i prodotti in un'unica piattaforma installata centralmente. Un modello di licenza flessibile sblocca i moduli necessari e le funzioni aggiuntive. Ciò consente ai nostri clienti di beneficiare di un'interfaccia utente uniforme, strutture dati condivise (ad esempio, per la gestione dei clienti) e massima scalabilità.

La famiglia di prodotti BCS è destinata a:

- Coach e consulenti
- Operatori e terapeuti alternativi
- Studi, istituti e aziende che utilizzano metodi olistici

1.4 Modello di licenza e concetto di installazione

Il software BCS viene sempre installato come pacchetto completo (in versione a 32 o 64 bit). Il sistema di gestione delle licenze attiva i prodotti e i moduli aggiuntivi acquistati. Nuovi prodotti o moduli possono essere attivati in qualsiasi momento importando un file di licenza, senza necessità di reinstallazione. Questo approccio consente una facile manutenzione, una rapida espansione e una documentazione coerente.

2 Fundamenti comuni di BCS

Questo capitolo descrive tutte le funzioni e le aree applicabili a tutti i prodotti della piattaforma Bucher Coaching Systems (BCS). Questi principi fondamentali costituiscono la base per l'utilizzo di tutti i prodotti e sono gestiti centralmente.



Produktstruktur und enthaltene Module
BCS Core · Focus Editions · BCS Premium

PROFESSIONELLES EINSTIEGSPAKET
BCS Core

Breite Analysegrundlage mit integrierten Auswertungswerkzeugen.

ZENTRALES MODUL



Vollversion

INTEGRIERTE ZUSATZFUNKTIONEN

● Bucher Fraktal

● Interblend

● KI-Auswertung

● CA Sensor

EINORDNUNG

Empfohlen für Anwender, die ein breites, erweiterbares System für unterschiedliche Kliententhemen benötigen.

SPEZIALISIERTE PRODUKTPAKETE
BCS Focus Editions

Wählen Sie einen klar definierten Anwendungsbereich.


Aura Coach Focus Edition

- Aura Coach Grundprogramm
- Aura-Automatik-Modus
- Eine frei wählbare Start-Kategorie
- CA Sensor

Human · Fauna · Horse · Business · Place


TAO Medical Focus Edition

- Bucher TAO Medical
- TAO-Automatik-Modus
- HETU and Luoshu
- CA Sensor

Meridiane · TCM · I Ging


Bioresonance Triselect FE

- Bioresonance Triselect
- Bioresonanz-Automatik-Modus
- Zusatzprogramme
- CA Sensor

Testung · Frequenzen · Harmonisierung


Corpus Analyser Focus Edition

- Corpus Analyser
- KI-gestützte Auswertung
- CA Sensor

Körperbezogene energetische Analyse

KOMPLETTES PROFESSIONELLES SYSTEM
BCS Premium

Die wichtigsten BCS-Systeme und zentralen Optionen in einem Komplettpaket.

ENTHALTENE SYSTEME


Vollversion


Alle Kategorien
+ Automatik-Modus


Alle Optionen


Automatik-Modus
+ Zusatzprogramme


Corpus Analyser

Bucher Stress Balance

INTEGRIERTE OPTIONEN UND LEISTUNGEN

Fraktal · Interblend · KI-Auswertung
CA-Sensor · 10 Jahre Software-Pflege

Focus Editions sind Spezialpakete. Fraktal, Interblend und KI werden als integrierte Funktionen dargestellt, nicht als eigene Produktgruppen.

Quelle: BCS-Strategie-Arbeitsmappe

2.1 Installazione e configurazione

2.1.1 Requisiti di installazione:

- È necessario un computer Windows con Windows 11 installato. Altri sistemi operativi come macOS o Linux non sono compatibili. Un computer con Windows 10 può essere utilizzato come ultima risorsa; tuttavia, il supporto di Microsoft per questo sistema operativo sta per terminare.
- Idealmente, il computer non dovrebbe avere più di 3 anni, altrimenti le prestazioni potrebbero risultare lente.
- La risoluzione dello schermo dovrebbe essere HD o, meglio ancora, Full HD (più bassa è la risoluzione, più bisogna scorrere per vedere tutto).
- Il processore dovrebbe essere almeno di livello prestazionale pari a un "Intel i3", idealmente un i5 o un i7.
- La RAM dovrebbe essere di 8 GB o, idealmente, di 16 GB.
- L'hard disk dovrebbe avere una capacità di archiviazione di almeno 512 GB e dovrebbe essere un'unità SSD. Anche 256 GB sono possibili, ma in tal caso potresti avere problemi di spazio dopo qualche anno.
- Durante l'installazione e l'attivazione, il computer deve essere connesso a una connessione Internet stabile (cavo LAN o Wi-Fi). Successivamente, il programma funzionerà anche offline. È possibile lavorare localmente con i dati esistenti anche senza connessione a Internet. La connessione a Internet è necessaria per le funzioni online e per l'invio di e-mail.

2.1.2 Il download (Scaricare il software)

Per scaricare il software, clicca sul seguente link:


https://buchergmbh.de/public/bcs_setup.exe

(In alternativa, è possibile visitare il sito web di Bucher GmbH, www.buchergmbh.de, ed effettuare l'accesso nella sezione "Accesso clienti". Utilizzare il nome utente e la password forniti da Bucher GmbH nella documentazione di licenza. Successivamente, nella sezione "Download", cliccare su "Bucher Coaching Systems" e scaricare la versione più recente.)

Se cliccando sul link qui sopra non si apre una finestra del browser, copiate questo link nella finestra del browser (in alto, nella barra degli indirizzi).

Quando si apre Google Chrome, procedere come segue:


Nell'angolo in alto a destra del browser troverai una piccola icona che indica l'avanzamento del download. Quando il cerchio blu è pieno, il download è completato. Se utilizzi Firefox, la procedura è identica a quella di Google Chrome. Le icone potrebbero apparire diverse, ma sono simili. Se utilizzi Microsoft Edge, dovrai completare un passaggio aggiuntivo, descritto alla fine di questo testo.

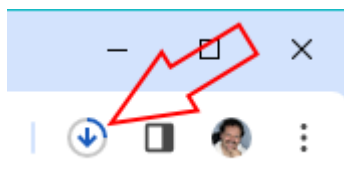

Questo simbolo cambia al termine del download e appare così:




Fai clic su questa icona per visualizzare i download. Il file di installazione del programma dovrebbe apparire in cima all'elenco:

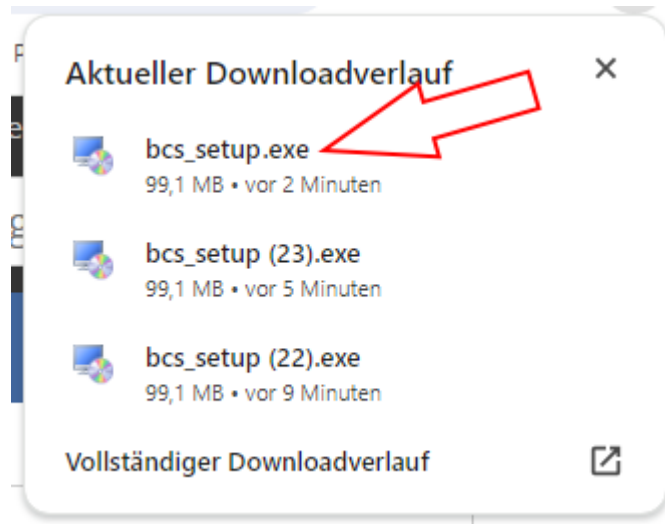

Fai clic su questa voce.

Apparirà un messaggio di avviso da Windows, sul quale dovrai fare clic su "Ulteriori informazioni".

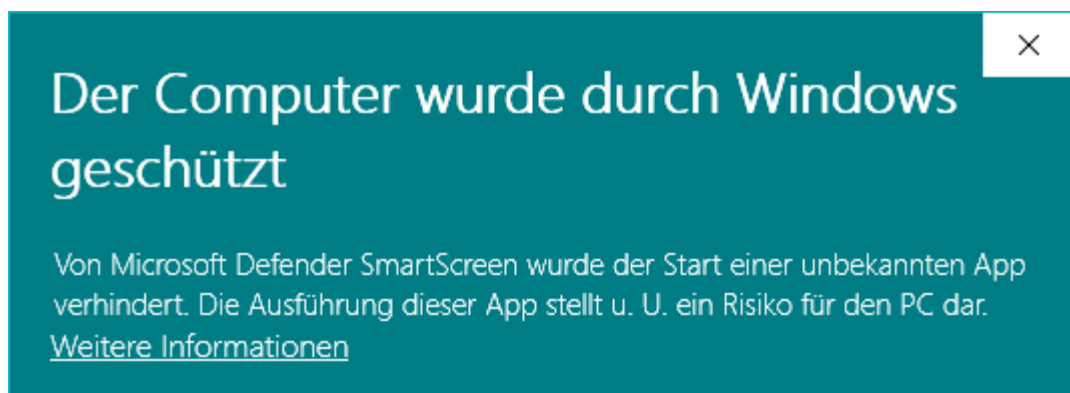

Successivamente, devi fare clic su "Esegui comunque":




(Questo messaggio viene sempre visualizzato all'avvio di un programma appena scaricato.)

A questo punto verrà visualizzato un messaggio di avviso relativo all'installazione del file di installazione. Quando viene chiesto: "Si desidera consentire...?", è necessario fare clic su "Sì".


2.1.3 L'installazione

A questo punto verrà visualizzato il programma di installazione, che richiederà di selezionare la lingua di installazione (questa scelta non ha nulla a che vedere con la lingua che verrà impostata successivamente nel programma).

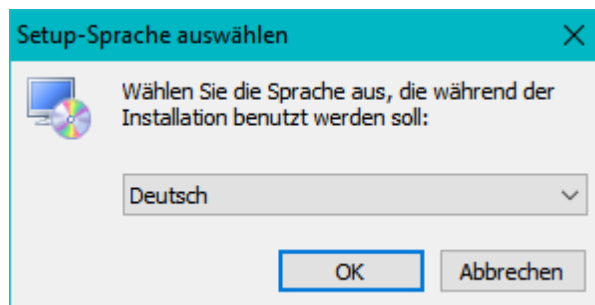


Conferma la lingua con "OK".

Ci vorrà qualche istante prima che appaia la finestra successiva:

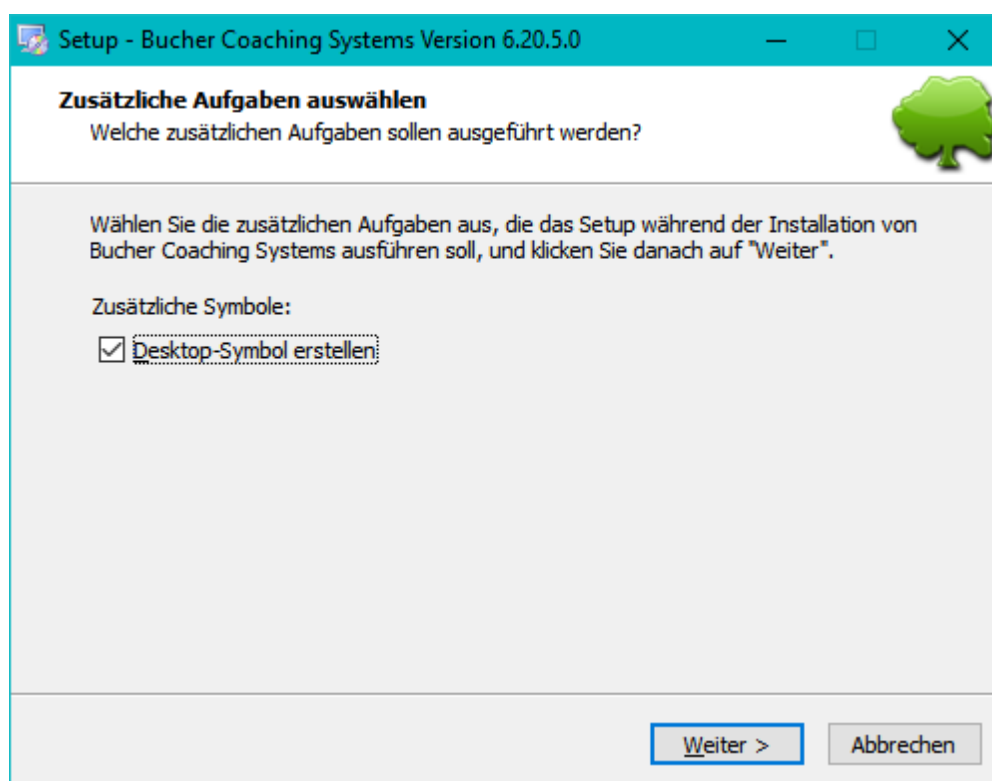


Fai clic qui e, se necessario, fai clic anche su "Avanti" nelle finestre successive finché non compare il pulsante "Installa".

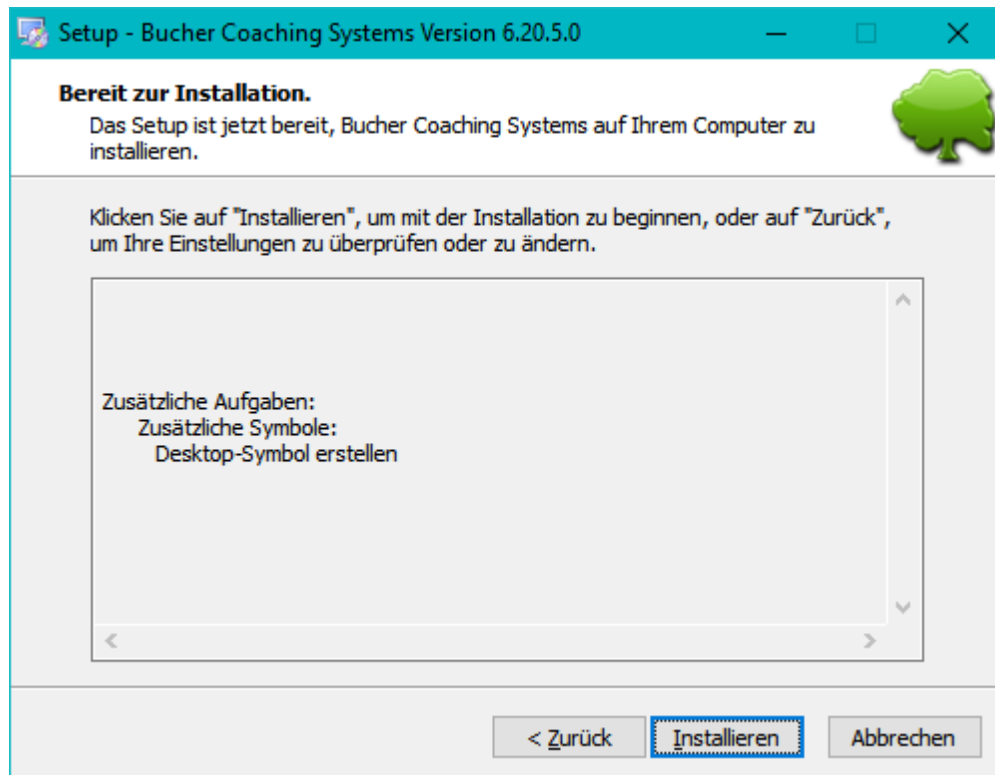


Fai clic su "Installa" ora.

Il programma necessita di qualche istante per installare tutti i file sul computer:

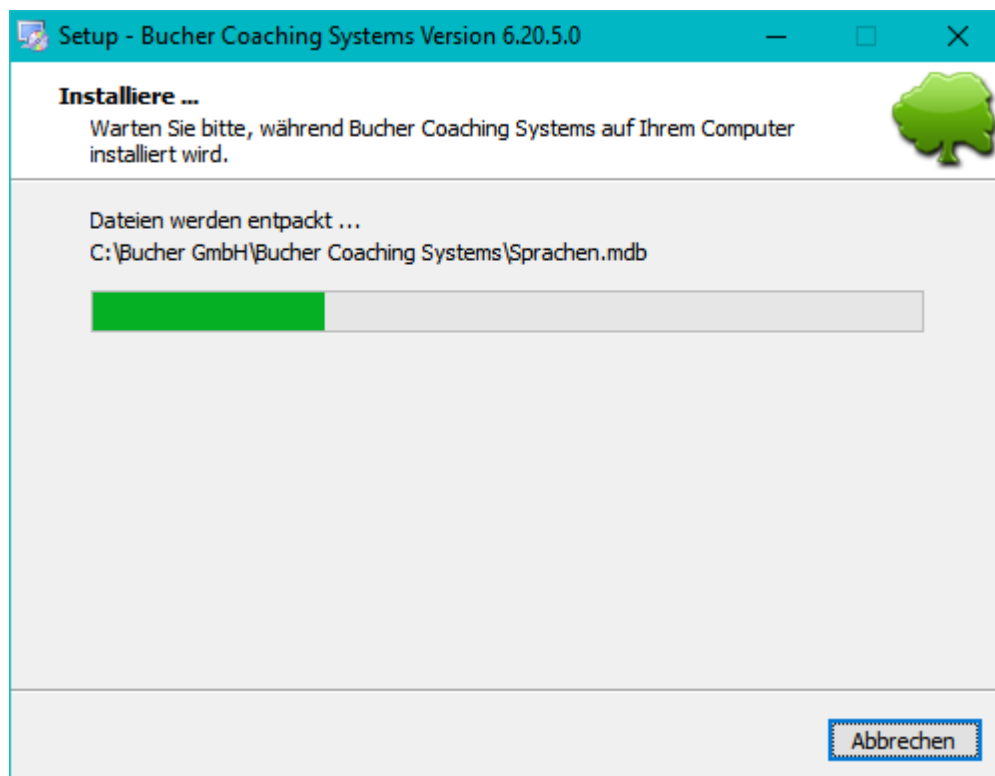

Una volta completata l'installazione, verrà visualizzata la seguente immagine:

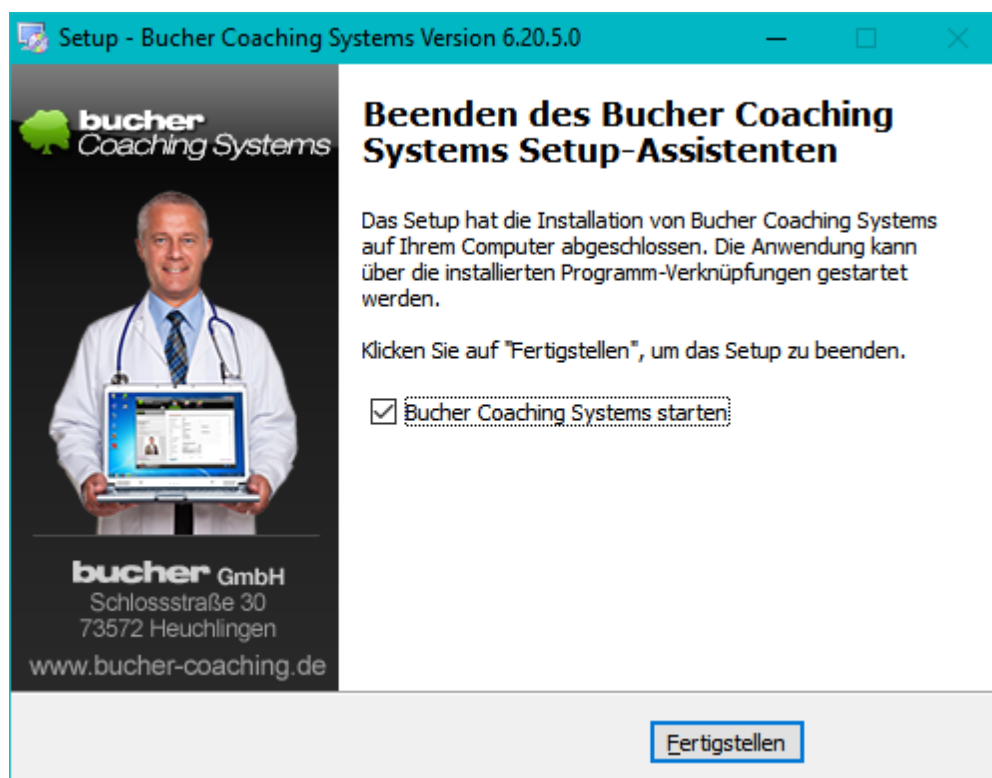


Fai clic su "Fine" per completare l'installazione. Il programma si avvierà automaticamente, a meno che tu non abbia deselezionato la casella.

Il programma esegue sempre un autotest all'avvio.

2.1.4 Attivazione del software

(Trasferimento della licenza sul tuo computer)

La finestra "Attiva prodotto" viene visualizzata al primo avvio del programma.

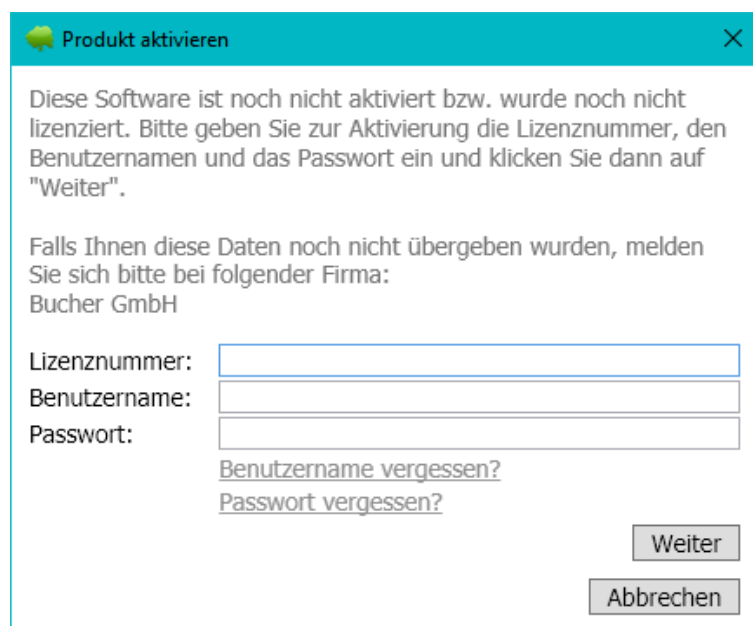

Produkt aktivieren

Diese Software ist noch nicht aktiviert bzw. wurde noch nicht lizenziert. Bitte geben Sie zur Aktivierung die Lizenznummer, den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie dann auf "Weiter".

Falls Ihnen diese Daten noch nicht übergeben wurden, melden Sie sich bitte bei folgender Firma:
Bucher GmbH

Lizenznummer:

Benutzername:

Passwort:

[Benutzername vergessen?](#)

[Passwort vergessen?](#)

Weiter

Abbrechen

È necessario inserire le seguenti tre informazioni:


Il **numero di licenza**

Il **nome utente** della licenza

La **password** di licenza

Dopo aver inserito questi dati, clicca su "Avanti".

Si aprirà la seguente finestra.

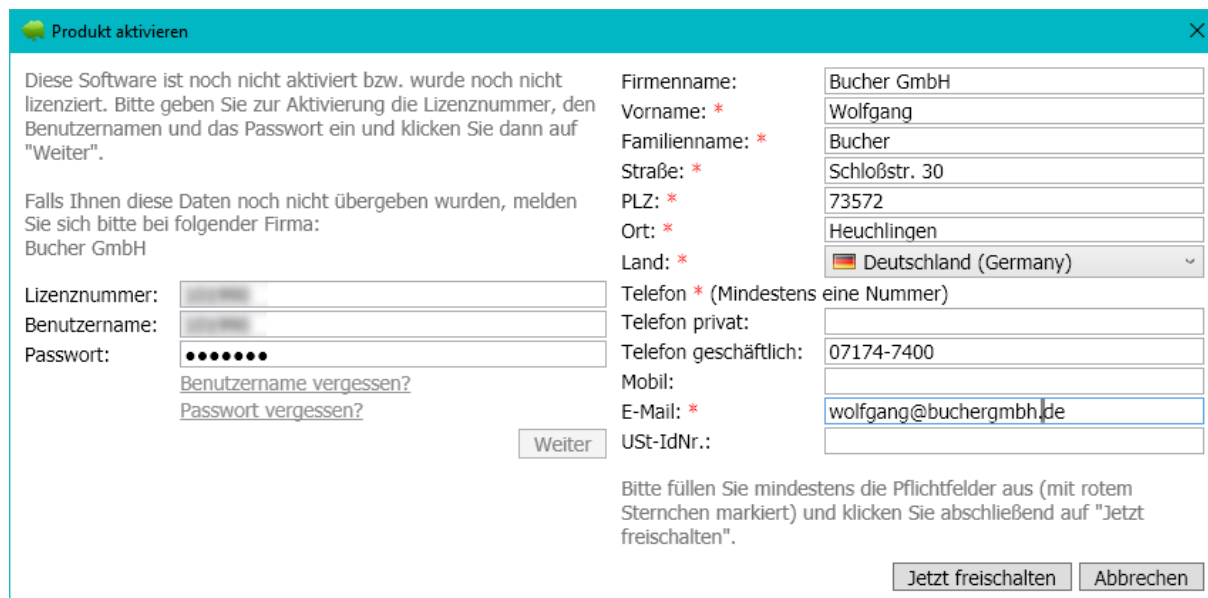

Produkt aktivieren

Diese Software ist noch nicht aktiviert bzw. wurde noch nicht lizenziert. Bitte geben Sie zur Aktivierung die Lizenznummer, den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie dann auf "Weiter".

Falls Ihnen diese Daten noch nicht übergeben wurden, melden Sie sich bitte bei folgender Firma:
Bucher GmbH

Lizenznummer:

Benutzername:

Passwort:

[Benutzername vergessen?](#)

[Passwort vergessen?](#)

Weiter

Firmenname:

Vorname: *

Familiennamen: *

Straße: *

PLZ: *

Ort: *

Land: *

Telefon * (Mindestens eine Nummer)

Telefon privat:

Telefon geschäftlich:

Mobil:

E-Mail: *

USt-IdNr.:


Bitte füllen Sie mindestens die Pflichtfelder aus (mit rotem Sternchen markiert) und klicken Sie abschließend auf "Jetzt freischalten".

Jetzt freischalten

Abbrechen

Si prega di compilare tutti i campi contrassegnati da un asterisco rosso. È richiesto almeno un numero di telefono (di norma non vi chiamiamo, se non in caso di emergenza).

Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, è necessario fare clic su "Attiva ora". In questo modo la licenza verrà attivata. Verrà visualizzato il seguente messaggio:

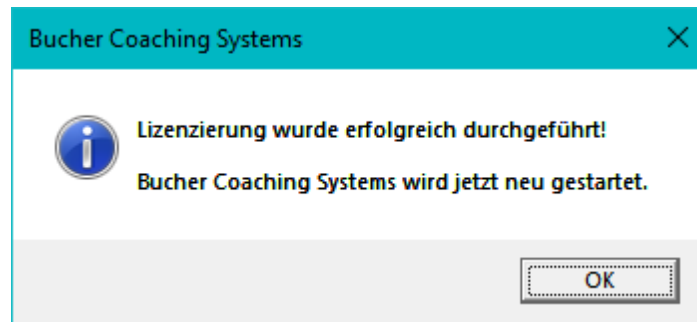

Dopo aver cliccato su "OK", il programma si avvia con tutte le sue funzioni.

In futuro, potrai avviare il programma cliccando sull'icona ad albero sul desktop.




2.1.5 In caso di problemi

Qualora la licenza non andasse a buon fine o si presentasse un problema, si prega di contattare Bucher GmbH al numero +49 7174 7400. La linea di assistenza è attiva nei giorni feriali dalle 11:00 alle 16:00.


Puoi anche inviare un'e-mail a wolfgang@buchergmbh.de

2.1.6 Funzionalità speciali quando si utilizza il browser Microsoft Edge

Se utilizzi il browser Edge, dovrai eseguire un passaggio aggiuntivo durante il processo di download. Anche qui, il file appare nell'angolo in alto a destra, accanto all'icona di download.

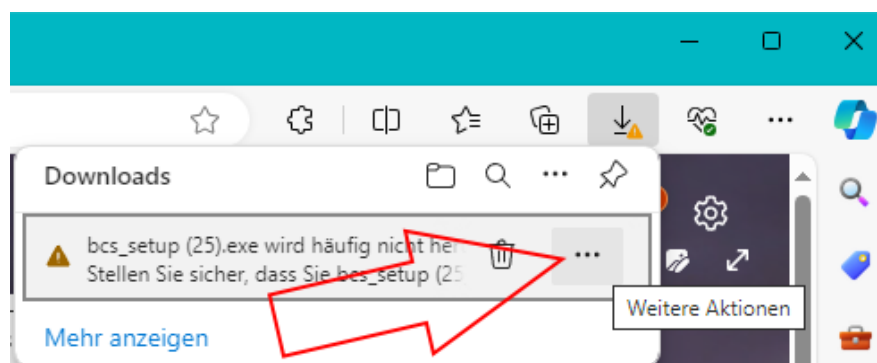


Devi cliccare sui tre puntini che vedi lì. Tuttavia, questi appaiono solo quando posizioni il mouse su quel punto. Quindi clicca su quei tre puntini.

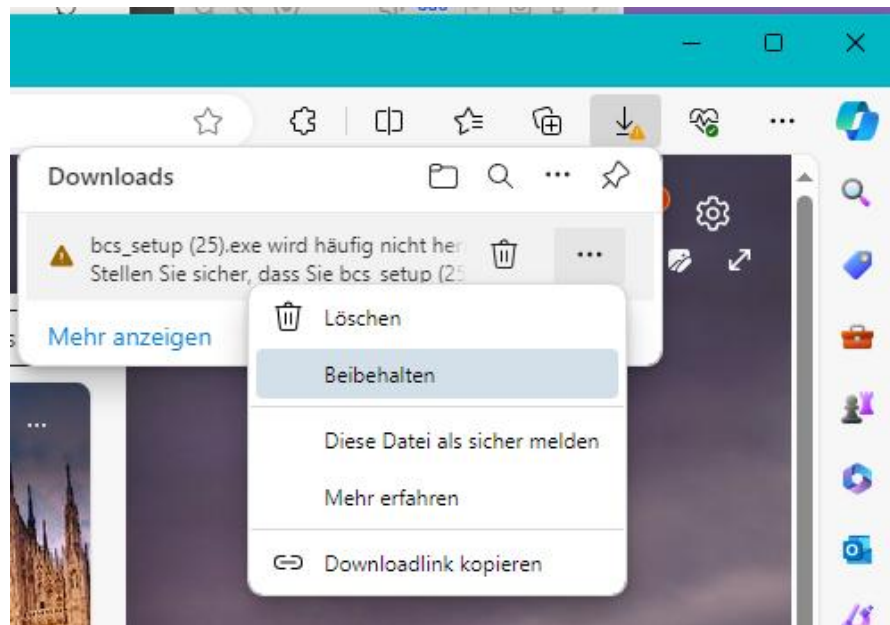

Nel piccolo menu contestuale, fai clic su "Mantieni". Si aprirà una piccola finestra. Fai clic su "Mostra altro" al suo interno. Quindi fai clic su "Mantieni comunque". Solo ora bcs_setup.exe verrà scaricato completamente e sarà disponibile per l'apertura dopo un breve periodo di tempo.

Ecco come si presenta:

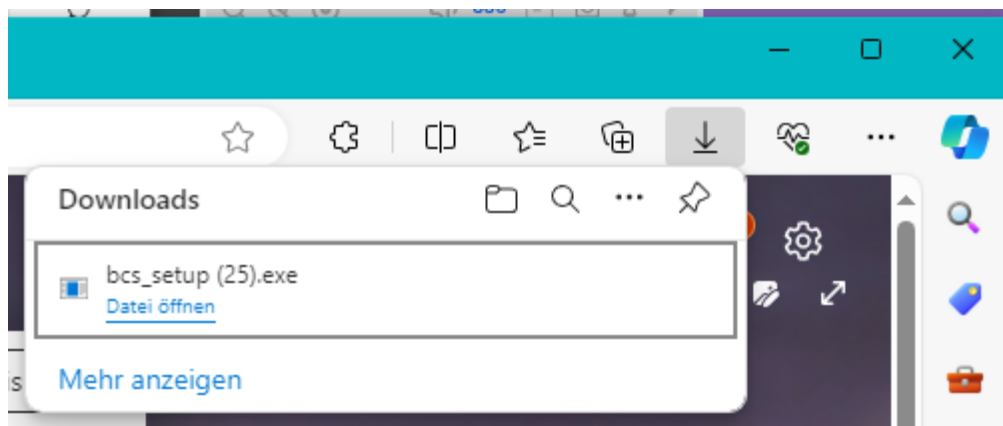

Fai clic su "Apri file" lì.

Ora puoi continuare l'installazione come descritto sopra.

2.1.7 Avvio del programma e accesso

Dopo l'installazione, troverai l'icona di Bucher Coaching Systems sul desktop, tra le altre posizioni.



Fai doppio clic sull'icona per avviare il programma.

- Al primo avvio, potrebbe esserti richiesto di inserire i dettagli della tua licenza (vedi la sezione 2.1 "Installazione e configurazione").
- **Dopo l'attivazione, si apre la finestra di benvenuto** come punto di accesso centrale.

L'icona BCS-Broadcast consente di visualizzare le trasmissioni in corso.

L'icona Bucher Repair Tool consente di riparare i database se il programma visualizza messaggi di errore all'avvio.

2.1.8 La finestra di benvenuto in sintesi



La finestra di benvenuto è il centro di controllo del software. Qui troverai:

- **Informazioni di sistema** (nella parte superiore della cornice della finestra):
 - Numero di versione
 - Versione a bit (32 o 64 bit)
 - Numero di licenza e numero di servizio
 - Nome del prodotto e nome della finestra
- Pulsante rotondo "Funzioni aggiuntive":
 - Il pulsante rotondo "Funzioni aggiuntive" nell'angolo in alto a sinistra della finestra consente di accedere alle impostazioni, alle opzioni relative alla privacy e ad altre funzionalità. Il testo del pulsante recita "Funzioni aggiuntive e di aiuto".
- Pulsanti principali (sopra):
 - **Clients:** crea, seleziona, modifica ed elimina i clienti
 - **Database:** importare, gestire e creare database di radionica (*visibile solo in Bucher Vita Coach*)
 - **Scansione:** Eseguire le scansioni
 - **Invia/Report:** Visualizza, invia ed esporta i risultati della scansione

Panoramica del programma (lato sinistro della finestra):

- Visualizza le informazioni più importanti relative a software, licenze e dati.

Funzione di chat (al centro, in basso):

- Comunica con altri utenti o direttamente con Bucher GmbH.
- Puoi scegliere il tuo nome nella chat e inviare messaggi a tutti oppure specificamente a "Bucher direttamente".

Seminari/Seminari online:

- L'elenco dei seminari attualmente disponibili è visualizzato sul lato destro dello schermo ed è possibile registrarsi direttamente.

Notizie:

- Sotto l'elenco dei seminari sono visualizzate le notizie e gli aggiornamenti di Bucher GmbH.

Manutenzione da remoto:

- Se hai bisogno di assistenza, puoi avviare una sessione di manutenzione remota sicura tramite il pulsante "UltraViewer" (in basso a sinistra).

Modifica del prodotto:

- Se hai acquistato la licenza per più prodotti, puoi passare da uno all'altro utilizzando il pulsante rotondo nell'angolo in basso a sinistra.

Utente e dimensioni della finestra:

- Visualizzazione dell'utente corrente, regolazione delle dimensioni della finestra, accesso alle informazioni sul prodotto e controllo di hardware aggiuntivo (ad esempio, luce colorata).

Navigazione e logica operativa


- Il funzionamento avviene tramite pulsanti e simboli chiaramente etichettati.
- I menu contestuali e i suggerimenti a comparsa ti aiutano a orientarti.
- I pulsanti principali (aree principali: dati cliente, scansione, pacchetti/invio/report, database, se applicabile) sono sempre disponibili nella parte superiore delle finestre principali del software. Ciò consente di passare direttamente da un'area di lavoro all'altra.
- In alcune finestre di dettaglio (ad esempio, nelle finestre di dialogo delle impostazioni speciali o di modifica), questi pulsanti principali non sono visibili. In questi casi, è possibile tornare alla finestra principale utilizzando il pulsante "Indietro".

Nota:

L'interfaccia utente è progettata in modo uniforme per tutti i prodotti della piattaforma BCS. Le funzionalità specifiche di ciascun prodotto sono descritte nei rispettivi capitoli.

I dati dei clienti e il lavoro quotidiano con i dati esistenti vengono gestiti localmente sul computer. Dopo l'attivazione e la configurazione, le funzioni locali sono utilizzabili anche senza internet. Il download dei database, la trasmissione collettiva, i set di prompt, la selezione dei colori online e l'invio di e-mail richiedono invece una connessione e trasferiscono i dati necessari.

2.2 Gestione dei clienti

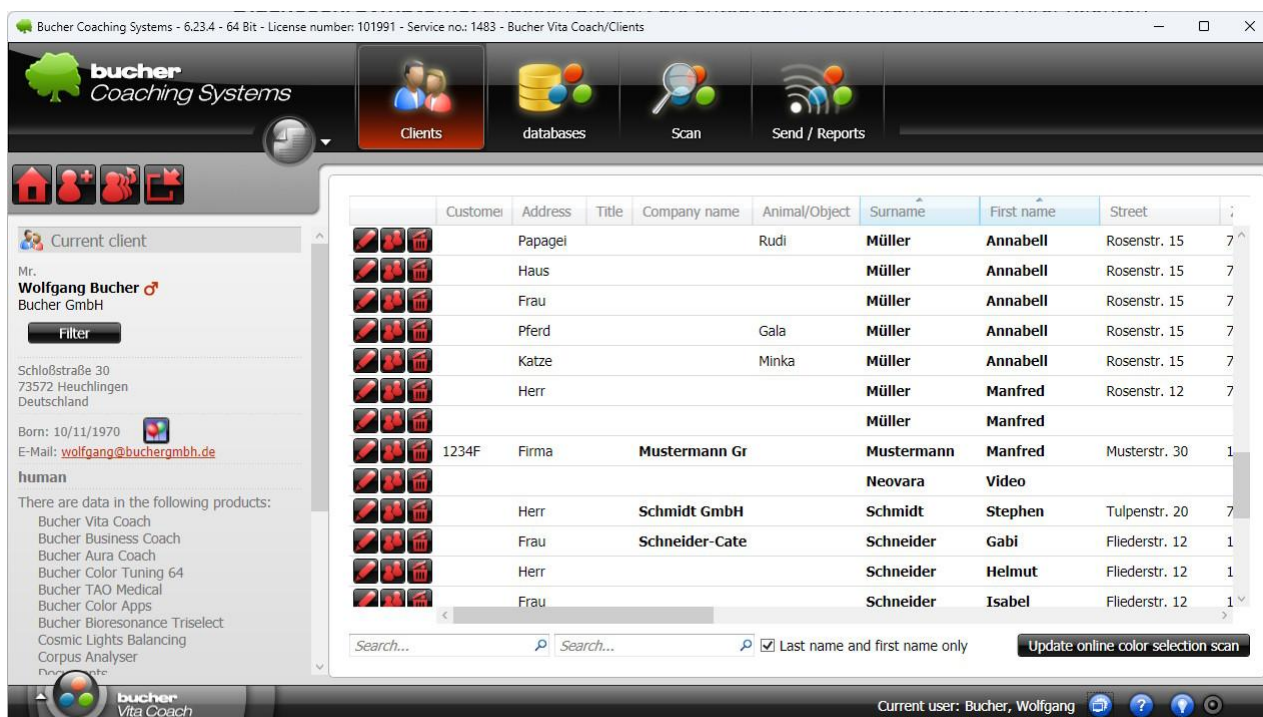

2.2.1 Scopo

La gestione dei clienti è disponibile in tutti i prodotti BCS e serve a registrare e gestire centralmente tutti i dati rilevanti dei clienti, rendendoli disponibili per scansioni e analisi. Costituisce la base comune per tutti i prodotti della piattaforma Bucher Coaching Systems e ti supporta in tutti i prodotti del tuo lavoro.

2.2.2 Prerequisiti

- BCS è installato e concesso in licenza (vedere il capitolo 1.4).
- Hai effettuato l'accesso al sistema e disponi dei diritti necessari per elaborare i dati dei clienti.
- È concesso in licenza almeno un prodotto che funziona con i dati del cliente (ad esempio, Bucher Vita Coach, Corpus Analyser, Bucher Aura Coach, ecc.).

2.2.3 Aprire la gestione clienti

È possibile accedere alla gestione clienti direttamente tramite la finestra di benvenuto (pulsante "Clients") oppure da una delle finestre principali tramite il pulsante corrispondente.



2.2.4 Creazione di un nuovo cliente

Fai clic sul pulsante per creare un nuovo cliente (a sinistra nella finestra del cliente, la seconda icona, un "omino" con un segno più).



I dati vengono inseriti in diverse schede:

- **Dati personali:** Inserisci qui tutte le informazioni di base, come nome, indirizzo, recapiti e data di nascita.
- **Impostazioni cliente:** Impostazioni delle opzioni a seconda del prodotto utilizzato per il cliente selezionato.
- **Immagine del cliente:** aggiungi una foto del cliente, scattandone una nuova, importando un file o copiandola dagli appunti. Un'immagine recente facilita l'identificazione e il riconoscimento del cliente.
- **Remedy Pyramid:** necessaria solo se si utilizzano le Remedy Pyramid.
- **Note:** utilizzare questa scheda per documentare annotazioni, indicazioni o accordi individuali.
- **Documenti:** qui è possibile archiviare dati come referti di laboratorio, foto, file di Office o qualsiasi altro tipo di file (utilizzabile solo se si possiede una licenza per "Documenti").
- **Diagnosi/Sintomi:** Registra qui le informazioni rilevanti sui tuoi clienti per una successiva valutazione da parte dell'intelligenza artificiale.

2.2.5 Modifica dei clienti esistenti

Per aggiornare dati quali indirizzo, recapiti, specie o altre informazioni, apri una scheda cliente esistente utilizzando il pulsante seguente nella finestra "Clienti", situato nella riga dell'indirizzo desiderato in alto a sinistra.



Bucher Coaching Systems - 6.23.4 - 64 Bit - License number: 101991 - Service no.: 1483 - Bucher Vita Coach/Clients

bucher Coaching Systems

Clients databases Scan Send / Reports

Current client

Mr. **Wolfgang Bucher**
Bucher GmbH

Filter

Schloßstraße 30
73572 Heuchlingen
Deutschland

Born: 10/11/1970

E-Mail: wolfgang@buchergmbh.de

human

There are data in the following products:

- Bucher Vita Coach
- Bucher Business Coach
- Bucher Aura Coach
- Bucher Color Tuning 64
- Bucher TAO Medical
- Bucher Color Apps
- Bucher Bioresonance Triselect
- Cosmic Lights Balancing
- Corpus Analyser
- Documents

Edit client

Personal data Client settings clients' image Remedy Pyramid Notes Documents Diagnoses/Symptoms

Customer number: Client123

Address/Title: Mr.

Company name: Bucher GmbH

Surname/First name: Bucher Wolfgang

Street: Schloßstraße 30

Zip code/Place: 73572 Heuchlingen

Country: Deutschland

Phone (privat/business): +49 7174 7400

Mobile/Fax:

E-Mail: wolfgang@buchergmbh.de

Date of birth/Time: 10/11/1970 5:50:13 PM species: human

55 years old, born on a Sunday

Zodiac sign: Libra

Chinese astrological sign: Dog (Metal) 狗金

Gender/Account holder: Male

Language/IBAN: Select a language

Marital status/BIC: No information

Occupation:

Height/Weight: 182 cm 92.0 kg BMI: 27.8

Save Close

Current user: Bucher, Wolfgang

Gestisci la specie per ogni cliente (ad esempio, persona, cane, gatto, cavallo, pianta, oggetto): ciò facilita l'organizzazione e le valutazioni successive.

Le modifiche verranno applicate quando si fa clic sul pulsante "Salva" nell'angolo in basso a destra.

2.2.6 Eliminazione dei clienti

I dati non necessari dei clienti possono essere eliminati dall'elenco. Attenzione: i dati dei clienti eliminati non possono essere facilmente recuperati.



2.2.7 Ricerca, ordinamento ed esportazione

Utilizza i campi di ricerca nella finestra del cliente in basso a sinistra per trovare i clienti per cognome (e, facoltativamente, per nome).

Search... Search... ☒ Last name and first name only

Ordina l'elenco in base a diversi criteri (ad esempio, luogo, cognome).

Surname First name

Müller Annabell

Esporta i dati dei clienti come file Excel per documentazione o backup.



2.2.8 Utilizzo delle funzioni di protezione dei dati

La funzione filtro consente di limitare la visualizzazione a un singolo cliente per proteggere i dati di altre persone, aspetto particolarmente importante quando i clienti stanno guardando lo schermo.



Il filtro non viene ripristinato riavviando il programma; rimane attivo finché non lo si disattiva. Un filtro attivo presenta un'illuminazione rossa attorno al pulsante del filtro.



2.2.9 Note

- Il sistema di gestione dei clienti non è un sistema di gestione dei pazienti in senso legale. Serve esclusivamente a organizzare il tuo lavoro di radionica e di coaching.
- Si consiglia di creare uno o più clienti demo a scopo di test. Questo permette di provare funzioni e processi senza rischi.
- È possibile esportare i dati dei clienti in qualsiasi momento (ad esempio, in Excel) ed eseguirne regolarmente il backup per evitare la perdita di dati.
- La scelta della specie corretta è particolarmente importante per le successive valutazioni e per l'organizzazione dei dati del cliente.
- Sfruttate al meglio le schede aggiuntive: una foto recente facilita il riconoscimento, mentre la scheda "Note" è ideale per appunti di riunione o istruzioni individuali.
- Il sistema ti avvisa dei compleanni imminenti o in corso dei tuoi clienti. In tal caso, il pulsante seguente sarà evidenziato in giallo o in rosso.



2.3 Navigazione generale e logica di funzionamento

2.3.1 Scopo

Questa sezione descrive la logica operativa di base di BCS, che è la stessa per tutti i prodotti. L'obiettivo è aiutarti a orientarti rapidamente, sia che tu stia lavorando con Vita Coach o con un altro prodotto. Imparerai come passare da una finestra all'altra, accedere alle aree principali e trovare le funzioni più comuni.

2.3.2 Prerequisiti

- BCS è installato, concesso in licenza e avviato (vedere la sezione 2.1.4).
- Hai effettuato l'accesso con successo e ora visualizzi la finestra di benvenuto o la finestra principale.

2.3.3 Passaggio dalla finestra di benvenuto alle aree principali

Utilizza i grandi pulsanti principali (ad esempio "**Clients**", "**Scansione**", "**Invia/Report**" e, se applicabile, "**Database**") per passare all'area di lavoro desiderata.



Il pulsante di selezione del prodotto (in basso a sinistra) consente di visualizzare in qualsiasi momento il prodotto in uso e la licenza attiva.




2.3.4 Navigazione all'interno delle finestre principali

- Molte finestre principali presentano una barra nella parte superiore con i **pulsanti principali** che consentono di passare direttamente ad altre aree centrali senza dover tornare alla finestra di benvenuto.
- Nelle finestre di dettaglio (ad esempio, impostazioni, finestre di dialogo speciali), questa barra non è sempre visibile. Utilizzare il pulsante "**Indietro**" presente in tali finestre per tornare alla finestra principale.




2.3.5 Utilizzo dei menu contestuali e dei pulsanti di accesso rapido

- **Facendo clic con il pulsante** destro del mouse su elenchi, tabelle o voci, spesso si apre un menu contestuale (ad esempio, "Modifica", "Elimina", "Esporta").

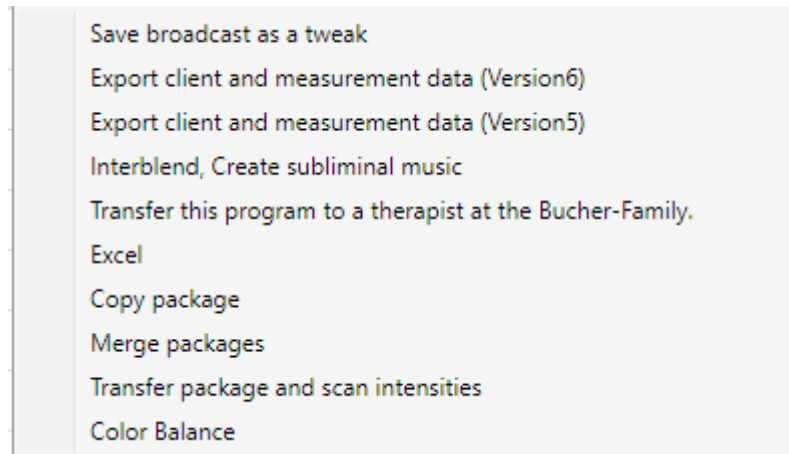

- I tooltip (brevi suggerimenti che compaiono passando il mouse sopra un elemento) spiegano il funzionamento di simboli e pulsanti.

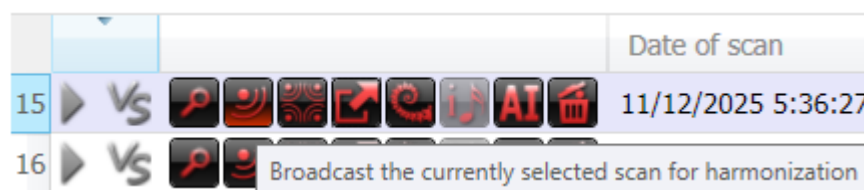

2.3.6 Simboli e pulsanti uniformi

- BCS utilizza i simboli più coerenti possibili per le azioni ricorrenti:
 - **Utilizzare il simbolo più** o la parola "Nuovo" per creare nuovi record di dati.
 - **Fai clic sull'icona della matita** o sul pulsante "Modifica" per modificare le voci.
 - **Icona del cestino** o "Canc" per rimuovere.
 - **Fai clic sull'icona del floppy disk** o su "Salva" per salvare le modifiche.
- Il nome esatto può variare leggermente a seconda della finestra, ma il significato rimane lo stesso.

2.3.7 Passaggio tra i prodotti

- Apri la finestra di benvenuto o un'altra finestra principale, se non è già visibile.
- Utilizza il pulsante "**Cambia prodotto**" (un pulsante rotondo in basso a sinistra).
- Seleziona il prodotto desiderato dall'elenco visualizzato (ad esempio, "Bucher Vita Coach", "Bucher Aura Coach", "Corpus Analyser", ecc.). L'interfaccia e le funzioni disponibili si adatteranno di conseguenza al prodotto selezionato.
- Il passaggio da un prodotto all'altro **non modifica** le informazioni sulla licenza, ma solo il prodotto in esecuzione in primo piano. Tutti i prodotti vengono eseguiti sulla stessa installazione condivisa di BCS.
- Se il prodotto desiderato non compare nell'elenco, potrebbe non essere (ancora) disponibile in licenza. In tal caso, si prega di contattare Bucher GmbH.

2.3.8 Utilizzo di più lingue dell'interfaccia


Durante l'attivazione della licenza BCS è possibile abilitare più lingue dell'interfaccia. Comunica all'assistenza le lingue desiderate. Potrai poi cambiarle direttamente nel programma e aggiungerne altre in seguito.

Se la lingua desiderata non è disponibile, verifica le impostazioni della licenza e dell'account oppure contatta l'assistenza.

2.3.9 Note

- L'interfaccia utente è volutamente **coerente in tutti i prodotti**. Se hai familiarità con un prodotto, ti risulterà più facile utilizzare gli altri.
- Utilizza i suggerimenti e i menu contestuali per scoprire le funzionalità senza dover leggere ogni voce di menu nel dettaglio.
- Durante la formazione dei nuovi dipendenti, è opportuno fornire una breve introduzione utilizzando la finestra di benvenuto e i pulsanti principali prima di passare ai dettagli specifici del prodotto.

2.4 Backup e ripristino dei dati

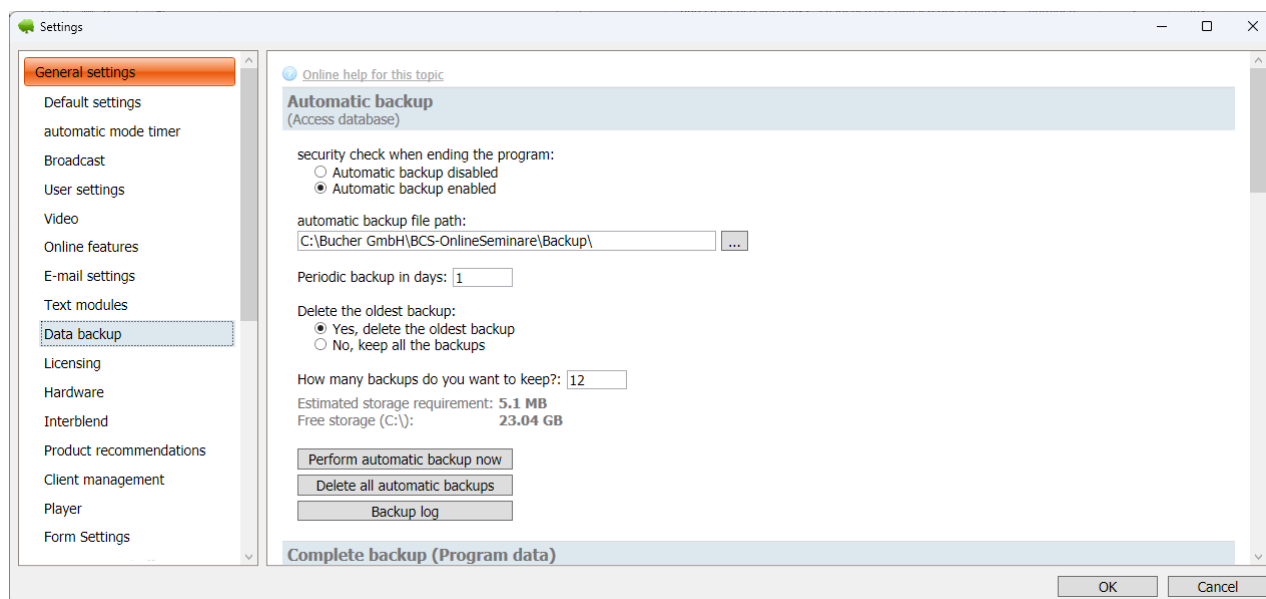

2.4.1 Scopo

Grazie alle funzioni di backup e ripristino dei dati, proteggi i dati dei tuoi clienti e dei tuoi programmi dalla perdita (ad esempio, a causa di difetti hardware o errori dell'utente). Puoi creare copie di backup, archivarle esternamente e ripristinarle quando necessario.

2.4.2 Prerequisiti

- BCS è installato e concesso in licenza.
- È necessario disporre dei permessi di scrittura sull'unità in cui verranno archiviati i file di backup (ad esempio, disco rigido esterno, chiavetta USB, unità di rete).
- Idealmente, dovresti disporre dei diritti di amministratore in BCS o sul sistema Windows.
- Tutte le impostazioni per l'organizzazione del backup dei dati si trovano in "Impostazioni" / "Backup dei dati".

2.4.3 Backup automatico dei dati all'uscita

BCS è preimpostato per eseguire automaticamente il backup dei database all'uscita.

- Ambito: Database (escluse le immagini collegate).
- Ritmo: automatico all'uscita dal BCS.
- Conservazione: vengono mantenute 12 copie di backup.
- Principio di rotazione: il backup più vecchio viene eliminato non appena ne viene aggiunto uno nuovo.

Nota: questo backup automatico offre una protezione di base per l'uso quotidiano. Non sostituisce i backup completi regolari.

2.4.4 Avvio manuale di un backup completo

Il backup completo deve essere avviato manualmente in "Impostazioni" / "Backup dei dati". Include anche il backup di tutte le immagini collegate al programma.

- Ambito: database e immagini collegate.

- Utilizzo: prima degli aggiornamenti, prima di modifiche importanti, prima delle operazioni di pulizia, per i file importanti dei clienti.

Importante: se si lavora con immagini dei clienti e altre immagini collegate, un backup completo è fondamentale per eseguire un backup affidabile di questi file.

2.4.5 Verifica del backup automatico

1. Apri le impostazioni in BCS.
Risultato: le aree delle impostazioni sono ora visibili.
2. Passa alla sezione Backup dei dati.
Risultato: le opzioni di backup e ripristino sono ora visibili.
3. Verifica se il backup automatico all'arresto è abilitato.
Risultato: puoi vedere che i database vengono sottoposti a backup all'arresto.
4. Verifica il numero di copie di backup conservate.
Risultato: sono impostate 12 copie e la più vecchia viene sostituita automaticamente.

[Screenshot: Impostazioni > Backup dei dati. Scopo: Mostrare la posizione e le opzioni di base.]

2.4.6 Definire un obiettivo di backup sensato

Se possibile, specificare un'unità esterna o un'unità di rete come destinazione del backup.

Risultato: i backup saranno disponibili anche in caso di guasto del disco rigido di sistema.

Attenzione: se i backup si trovano sullo stesso disco rigido dei dati correnti, spesso vengono anch'essi compromessi in caso di guasto del disco rigido.

2.4.7 Creare un backup completo

1. Apri Impostazioni > Backup dei dati.
Risultato: ti trovi nella sezione backup.
2. Avviare un backup completo (esecuzione manuale del backup).
Risultato: BCS crea un backup completo, incluse le immagini collegate.
3. Successivamente, verifica se il file di backup esiste nella destinazione del backup.
Risultato: il backup completo è stato creato correttamente.

Suggerimento pratico

Prima di ogni aggiornamento di BCS e prima di ogni aggiornamento importante di Windows, esegui un backup completo. Si consiglia inoltre di effettuare un backup completo una volta al mese. Questo backup completo è adatto anche per il cambio di computer. Tutti i dati, incluse le immagini, saranno contenuti in un unico file ZIP. È possibile copiare questo file sul nuovo computer e ripristinarlo utilizzando la funzione di ripristino. Se si prevede di cambiare computer, si prega di contattare il proprio partner di assistenza BCS.

2.4.8 Ripristino di emergenza

Se devi ripristinare i dati da un backup, contatta il tuo partner di assistenza BCS. Durante questi processi possono verificarsi diversi problemi e il rischio di perdita di dati è elevato.

2.4.9 Domande frequenti

Devo avviare il backup automatico separatamente?

No. Si avvia automaticamente per impostazione predefinita alla chiusura di BCS e conserva 12 backup.

Quando dovrei creare un backup completo?

Mensilmente (un messaggio corrispondente appare ogni 30 giorni), prima degli aggiornamenti e prima di modifiche importanti.

Cosa succede se vengono creati più di 12 backup automatici?

BCS elimina automaticamente il backup più vecchio e conserva i 12 più recenti.

2.4.10 Protezione tramite password per i file PDF

La protezione tramite password è un modulo opzionale. Questa funzione è disponibile solo dopo l'attivazione. Protegge i file PDF contenenti dati dei clienti durante il salvataggio e l'invio tramite e-mail.

2.4.10.1 Impostazione della protezione tramite password

Apri Impostazioni > Generali > Protezione PDF con password. Se necessario, abilita la crittografia per i file PDF salvati e/o per gli allegati PDF quando invii email.

2.4.10.2 Selezione della password: Raccomandazione per la pratica quotidiana

Per la maggior parte degli studi, si consiglia l'impostazione "Stessa password per tutti". È possibile definire una password condivisa e, se necessario, farla generare automaticamente dal programma, oppure utilizzare una password molto semplice come "sole del mattino", "fiore dello studio" o "il mio centro". In questo modo si evita che ogni cliente riceva una password diversa e si riducono le frequenti richieste di password dimenticate, che altrimenti dovrebbero essere ricercate tra le cartelle dei clienti, un processo che richiede molto tempo.

Le password individuali generate dal programma sono utili solo se la maggiore sicurezza è necessaria in un caso specifico e se si è disposti a gestire consapevolmente le password aggiuntive. Non condividere mai le password insieme al PDF nello stesso corpo dell'e-mail, ma piuttosto tramite un metodo separato e concordato.

2.4.10.3 Password utente e modifiche della password

Nella stessa finestra puoi impostare o generare una password utente aggiuntiva (password master) per l'utente BCS. I PDF possono quindi essere aperti sia con la password del cliente sia con quella dell'utente. È particolarmente utile quando ogni paziente ha una password diversa: per consultare un PDF generato puoi usare la password master senza cercare quella del cliente. La password master consente di aprire tutti questi documenti; ciascun cliente può aprire il proprio documento con la propria password.

Modificate una password condivisa solo se pianificato e informate tempestivamente i clienti interessati. I file PDF già inviati manterranno la password precedente; pertanto, documentate chiaramente la modifica.

2.4.11 Trasferimento dati dalla precedente versione BCS 5

Il processo centrale di migrazione dei dati viene utilizzato per spostare i dati da un'installazione BCS precedente con numero di versione 5. Si distingue dalle singole esportazioni di file CSV, pacchetti o

database: importa direttamente i dati di programma selezionati dal percorso dati della precedente versione 5.

2.4.11.1 Prima del trasferimento dei dati con il backup completo

Crea un backup completo dei dati (il cosiddetto "backup completo (dati di programma)") sul vecchio sistema. Salva il file ZIP creato su un dispositivo di archiviazione. Installa BCS sul nuovo computer. Utilizza il file ZIP per eseguire un "ripristino completo (dati di programma)". Attenzione: questa operazione sovrascriverà tutti i dati sul nuovo computer. Pertanto, esegui questo ripristino solo se il sistema è completamente pulito.

Per motivi di sicurezza, per ripristinare i dati è necessaria una password, poiché un ripristino accidentale potrebbe eliminare tutti i clienti e le scansioni. È possibile ottenere questa password da Bucher GmbH o dal proprio partner commerciale.

2.5 Chat, seminari e supporto

2.5.1 Scopo


Puoi rimanere in contatto con altri utenti e con Bucher GmbH tramite chat, l'area seminari e le funzioni di supporto. Puoi porre domande, condividere esperienze, iscriverti a seminari online e accedere alle informazioni più recenti. Queste funzioni e informazioni sono disponibili nella finestra di benvenuto.

2.5.2 Prerequisiti

- BCS è installato e avviato.
- Per chattare, registrarsi ai seminari e ricevere assistenza da remoto è generalmente necessaria una **connessione internet attiva**.
- Ti sei registrato con un nome di chat appropriato (pseudonimo facoltativo).

2.5.3 Apri la chat e scegli un nome

- Nella finestra di benvenuto è visibile la sezione «**Chat**».
- Scegli un **nome per la chat** sotto il quale verranno visualizzati i tuoi messaggi.

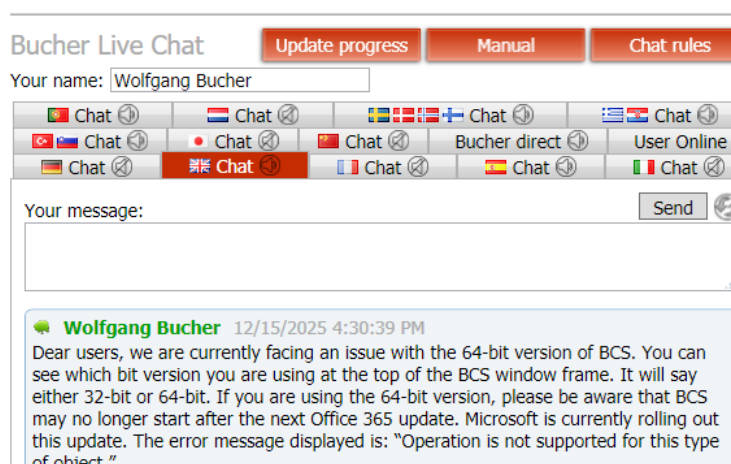

2.5.4 Invio di messaggi

- Scegli se il tuo messaggio deve essere inviato a **tutti gli utenti** o specificamente a "**Bucher direct**" (Assistenza).
- Scrivi il tuo messaggio nel campo di testo nella lingua desiderata e invialo.
- Le risposte vengono visualizzate nella cronologia dei messaggi. Se necessario, puoi scorrere verso l'alto per visualizzare i messaggi più vecchi.

2.5.5 Accesso a seminari e seminari online

- Nella finestra di benvenuto, apri la sezione "**Seminari/Seminari online**".
- Sfoglia le offerte visualizzate.
- Seleziona un seminario per visualizzarne i dettagli (data, contenuto, requisiti di partecipazione).
- Segui i passaggi indicati per **registrarti** (ad esempio, cliccando o tramite un link al sito web).

2.5.6 Utilizzare la sezione "Notizie"

- Apri la sezione **"Notizie"** nella finestra di benvenuto.
- Leggi gli appunti su:
 - nuove versioni del software,
 - miglioramenti funzionali,
 - Comunicazioni organizzative importanti (ad esempio, modifiche agli orari di assistenza).

2.5.7 Contatta l'assistenza

- Utilizzare le seguenti opzioni a seconda delle proprie esigenze:
 - **Chat** (domande brevi)
 - **Posta** support@buchergmbh.de (per richieste dettagliate, si prega di allegare screenshot)
 - **Telefono** (per domande urgenti, si prega di contattare l'assistenza telefonica del proprio partner di sistema).
- Si prega di avere a portata di mano le seguenti informazioni quando si richiede assistenza:
 - il numero di licenza,
 - la variante di prodotto utilizzata
 - una breve descrizione del problema (inclusi i messaggi di errore)
 - UltraViewer già avviato, con ID e password. Le informazioni sull'assistenza remota tramite UltraViewer si trovano nel capitolo 2.6.

2.5.8 Note

- La funzione di chat è particolarmente adatta per **domande brevi o scambi con altri utenti**. Argomenti di formazione più complessi sono più indicati per i seminari.
- Consulta regolarmente la sezione **"Notizie"** per rimanere informato su nuove versioni e aggiornamenti.
- **Non inviare dati sensibili dei clienti** (ad esempio, nomi completi con informazioni sanitarie) in chat o via e-mail a meno che non sia stato esplicitamente concordato.

2.6 Manutenzione remota

2.6.1 Scopo

La funzione di manutenzione remota consente di ricevere rapidamente assistenza da Bucher GmbH per problemi tecnici senza la necessità di intervento in loco. La funzione di cambio prodotto permette di passare comodamente da un prodotto con licenza all'altro senza dover reinstallare il software.

2.6.2 Prerequisiti

- Per la manutenzione da remoto è necessaria una connessione internet attiva.
- Contatta l'assistenza telefonicamente o per iscritto, in modo che un membro del nostro staff sia pronto a gestire la tua richiesta di manutenzione da remoto.

2.6.3 Istruzioni dettagliate

Avviare la manutenzione remota

- Nella finestra di benvenuto, fare clic sul pulsante **"Manutenzione remota"** (ad esempio, "UltraViewer").
- Avvia il programma di manutenzione remota fornito. Se non è già installato, puoi scaricarlo e installarlo da www.ultraviewer.net.
- Leggi l'ID visualizzato e la password temporanea.

Invia i dati di accesso all'assistenza

- Contatta l'assistenza clienti o utilizza il canale di comunicazione precedentemente concordato.
- Si prega di fornire l'ID e la password temporanea del software di manutenzione remota.
- Vi preghiamo di rimanere al computer durante la sessione in modo da poter rispondere a eventuali domande.

Fine del lavoro da remoto

- Una volta completata l'assistenza, chiudere il software di manutenzione remota.
- La password temporanea diventerà quindi non valida; l'accesso non autorizzato non sarà più possibile.

Installazione remota in diverse lingue

- Se l'assistenza e gli utenti non parlano la stessa lingua, è possibile fornire indicazioni per iscritto, ad esempio tramite WhatsApp o Telegram. Istruzioni brevi e individuali sono più facili da tradurre in modo affidabile rispetto a una telefonata più lunga.
- Trasmetti l'ID di manutenzione remota e la password temporanea esclusivamente tramite il canale di comunicazione precedentemente concordato e solo dopo aver verificato l'identità dell'operatore. Non inviare alcun dato relativo al cliente o alla sua salute.
- Rimanete reperibili durante la sessione, tenete conto delle pause dovute alla traduzione e chiudete immediatamente il software di manutenzione remota al termine della procedura.

Note

- Consenti l'accesso remoto solo se sei certo che la persona che accede al sistema sia effettivamente un dipendente di Bucher GmbH o una persona da te autorizzata.
- Durante l'assistenza remota, tutto il contenuto visualizzato sullo schermo potrebbe essere visibile. Prima di iniziare, si prega di chiudere tutti gli altri programmi contenenti informazioni sensibili.

2.7 Distinzione tra durata della trasmissione e velocità di trasmissione

2.7.1 Due riferimenti temporali indipendenti

Il sistema BCS utilizza due misurazioni temporali indipendenti: la velocità di trasmissione determina la durata del processo di trasmissione, immediatamente visibile sul computer. La durata della trasmissione, invece, determina l'effetto energetico successivo alla fine di tale processo.

I livelli di selezione Rapid Transfer, Veloce/Breve, Medio e Lento/Lungo fanno quindi parte della velocità di trasmissione. In alcuni programmi o finestre di impostazioni, questi valori in secondi potrebbero ancora apparire con la vecchia dicitura "durata di trasmissione". Tecnicamente, tuttavia, controllano la durata del processo di trasmissione in corso.

Il periodo di trasmissione effettivo inizia al termine del trasferimento. Salvo diversa indicazione nelle opzioni di trasmissione, questo effetto energetico dura di default quattro settimane. Rimane invariato indipendentemente dalla velocità della trasmissione precedente (Rapid Transfer, veloce, media o lenta).

2.7.2 Selezionare la velocità di trasmissione appropriata

2.7.2.1 Rapid Transfer

Utilizzare il Rapid Transfer quando il cliente non è presente o quando le informazioni vengono trasferite a un supporto informativo. Il Rapid Transfer sfrutta la massima velocità possibile del computer e riduce al minimo la durata del processo di trasmissione immediata. In presenza del cliente, questa fase è solitamente troppo breve per consentire un'applicazione guidata consapevole.

2.7.2.2 Veloce o breve

Utilizzare Rapido o Breve per una trasmissione breve e immediata, ad esempio se il cliente non è in loco e il Rapid Transfer non è desiderato o disponibile. Nelle applicazioni in loco, questo livello può essere selezionato se si prevede intenzionalmente solo una breve sessione di supporto.

2.7.2.3 Medio

Questo metodo è adatto come impostazione standard quando il cliente è presente e accompagna consapevolmente il processo di trasmissione. Il tempo di visualizzazione più lungo sullo schermo o sull'applicazione offre al cliente l'opportunità di interagire con il processo.

2.7.2.4 Lento o lungo

Utilizzate l'opzione "Lento" o "Lungo" se il cliente presente richiede espressamente una sessione più lunga e guidata con calma. Una trasmissione più lunga non è né più forte né di qualità superiore; si limita semplicemente ad estendere il processo di trasmissione direttamente percepibile.

2.7.2.5 Tempo reale

Il prodotto Bucher Bioresonanz Triselect offre anche funzionalità in tempo reale. Questa fase utilizza la sequenza temporale specificata per il rispettivo modello di prodotto ed è particolarmente adatta all'uso supervisionato con la presenza di un paziente.

2.7.3 Impostazione della durata della trasmissione

Di norma, si consiglia di mantenere la durata della trasmissione al periodo preimpostato di quattro settimane. Periodi più brevi o più lunghi devono essere scelti e documentati solo in modo deliberato,

in modo da corrispondere al periodo di monitoraggio pianificato. Altre opzioni di trasmissione, come intensità, intervallo, ciclo di trasmissione o hardware selezionato, devono essere valutate separatamente.

2.7.4 Regola breve ed esempio

Regola sintetica: la velocità di trasmissione si riferisce ai secondi o ai minuti sul computer; la durata della trasmissione si riferisce al periodo di tempo effettivo successivo alla fine della trasmissione ed è solitamente definita in giorni o settimane.

Esempio: con un cliente non presente, il trasferimento tramite Rapid Transfer può essere completato in breve tempo. Secondo il modello operativo di BCS, le informazioni inserite rimangono valide per quattro settimane per impostazione predefinita. Se per un cliente presente si seleziona la modalità Media o Lenta, solo il processo di trasmissione immediata richiede più tempo; anche la durata della trasmissione successiva rimane di quattro settimane.

3 Capitoli specifici dei prodotti

3.1 Bucher Vita Coach



3.1.1 Introduzione e caratteristiche speciali

3.1.1.1 Panoramica

Il Bucher Vita Coach è un prodotto chiave all'interno del sistema Bucher Coaching Systems (BCS). Questa sezione illustra lo scopo del Vita Coach, come comprendere il principio di base di "scansione" e "invio" e le caratteristiche speciali del sistema (ad esempio, lavoro da remoto, scansioni online, supporti informativi). Le istruzioni operative pratiche sono riportate nelle sezioni da 3.1.2 a 3.1.11.

3.1.1.2 Scopo

Il Bucher Vita Coach supporta terapisti, coach e consulenti nell'identificazione e nella definizione sistematica delle priorità relative alle problematiche energetiche ed emotive, nonché nella formulazione di passi successivi comprensibili. L'obiettivo è quello di supportare i processi e fornire un orientamento all'interno del percorso terapeutico (ad esempio, argomenti, connessioni, priorità, flusso delle sessioni).

Importante: l'utilizzo di questo software non sostituisce la diagnosi o il trattamento medico. I risultati devono essere considerati come una guida complementare e il vostro approccio e le vostre responsabilità devono sempre essere in linea con il vostro ruolo professionale e il contesto specifico.

3.1.1.3 Principio di base: database, scansione e invio

Il Vita Coach opera essenzialmente in quattro aree:

1. "clienti"
 - La configurazione e la selezione dei nuovi clienti sono già state trattate nel Capitolo 2.2.
2. "Database"
 - È possibile importare da internet i database di radionica forniti da Bucher GmbH (Vita-Databases).
 - In un'area database separata, gli utenti possono creare e gestire i propri database (I miei database).
3. "Scansione"
 - Una scansione è una ricerca energetica basata su database di radionica selezionati.
 - Prima di avviare la scansione, si selezionano i database appropriati (ad esempio, aree tematiche, sistemi, aree emotive).
 - I risultati vengono visualizzati come voci con valori di rilevanza. Questi valori vengono utilizzati per la prioritizzazione. I risultati della scansione vengono memorizzati in un "pacchetto radionico".
4. "Invia/Reportzioni"

- Nella sezione "Invia/Report", dove sono memorizzati i "Pacchetti Radionici", è possibile valutare i risultati delle scansioni, creare report e trasmettere informazioni di regolazione (a seconda della licenza e del metodo di lavoro).
- Vita Coach separa volutamente l'analisi (scansione) dall'implementazione (invio/report) in modo da consentirti di lavorare in maniera strutturata e documentare i risultati in modo comprensibile.

Nota:

I pulsanti "Database", "Scansione" e "Invia/Report" sono punti di accesso fondamentali. Il pulsante "Database" è in genere visibile solo in Vita Coach perché è lì che vengono gestiti i database di radionica.

3.1.1.4 Integrazione BCS: basi uniche, utilizzate in tutti i prodotti

Il Vita Coach si avvale dei principi condivisi del BCS. Ciò significa:

- I clienti vengono creati centralmente e sono disponibili anche in altri prodotti (a seconda della licenza) (vedere il Capitolo 2.2).
- Il backup e il ripristino dei dati vengono eseguiti centralmente (vedere il capitolo 2.4).
- La logica operativa, la navigazione e la commutazione dei prodotti sono il più possibile uniformi nel sistema BCS (vedere il capitolo 2.3).

Consiglio pratico:

Mantieni i dati dei clienti e le cronologie delle sessioni centralizzati in BCS. Ciò evita l'inserimento duplicato dei dati e garantisce la coerenza dei report nelle analisi successive.

3.1.1.5 Lavorare con i database


Nel database di radionica sono presenti due strutture principali:

1. "Database Vita"

Questa sezione mostra tutti i database che Bucher GmbH mette a disposizione come download aggiuntivi gratuiti. Questi database sono di sola lettura e non possono essere modificati dagli utenti.

2. "I miei database"

In quest'area gli utenti possono creare e gestire i propri database.

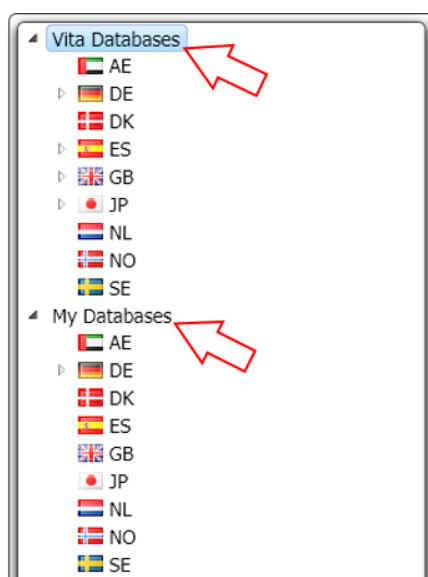

Nota:

Sebbene i database di Bucher GmbH siano di sola lettura su **Vita Databases**, gli utenti possono comunque modificarli o aggiungervi dati semplicemente copiando il database desiderato da Vita Databases e incollandolo in "**I miei database**". Eventuali modifiche potranno poi essere apportate a questa copia.

Il programma è attualmente disponibile in 20 lingue. Di conseguenza, i database presentano le bandiere dei vari paesi, sotto le quali è possibile trovare le relative voci nella lingua appropriata.

My Databases

 AE

 BR

 CN

 CO

▷  DE

 DK

▷  ES

 FI

 FR

 GB

 GR

 HR

 IT

 JP

 NL

 NO


 PT

 SE


 SI

 TR

In genere, i nostri utenti hanno abilitata una sola lingua per mantenere l'ordine. Se si desiderano altre lingue, possiamo abilitarle gratuitamente.

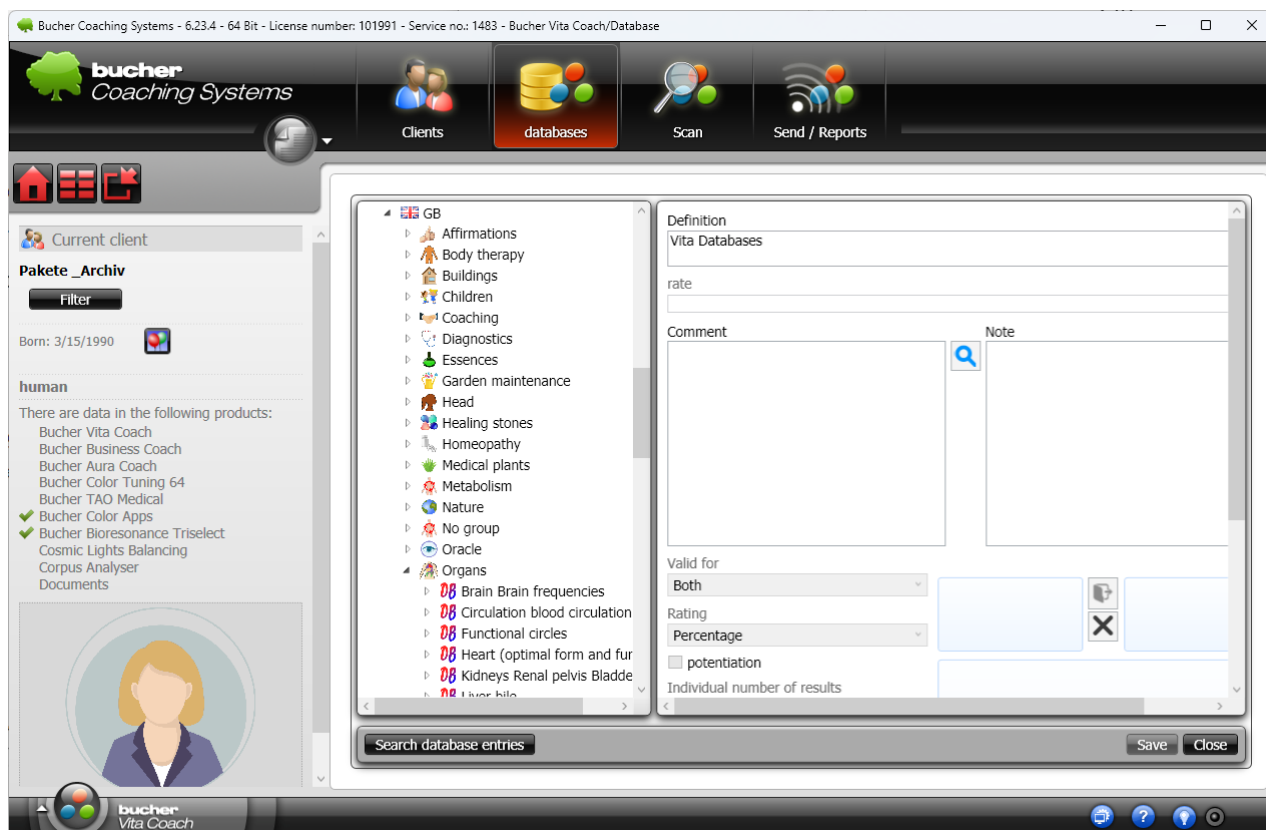


Molte delle funzioni per la modifica del database possono essere visualizzate ed eseguite facendo clic con il pulsante destro del mouse su una voce del database.

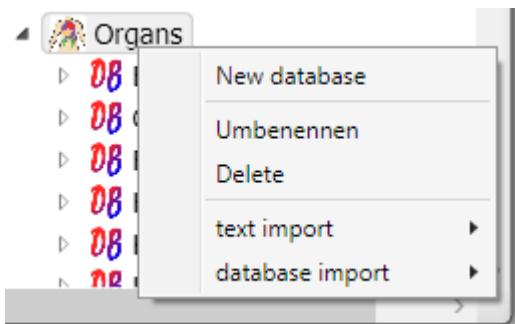

3.1.1.6 Logica e prioritizzazione dei pacchetti

I risultati delle scansioni sono spesso organizzati in "pacchetti". I pacchetti consentono di raggruppare le voci (ad esempio, per argomento, sessione o fase del trattamento) e di elaborarle in base alla priorità. I pacchetti possono contenere, ad esempio, voci scansionate o selezionate da diversi database.

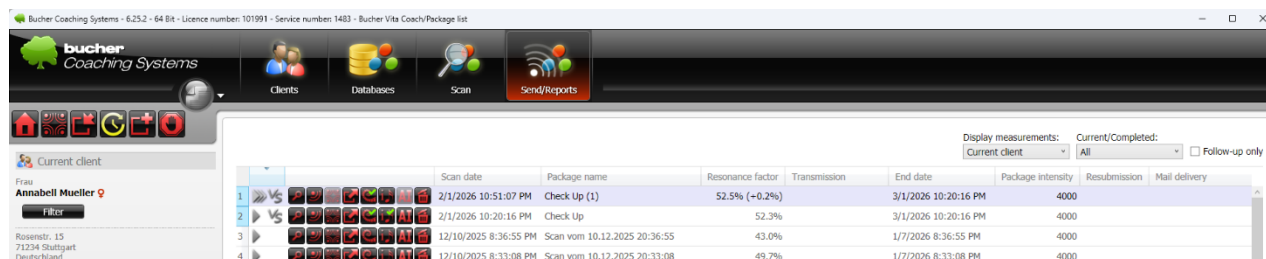

The screenshot shows the Bucher Coaching Systems software interface. On the left, there's a sidebar with navigation icons and a 'Current client' section for 'Frau Annabell Mueller'. The main area displays a table of packages with columns for Scan date, Package name, Resonance factor, Transmission, End date, Package intensity, Resubmission, and Mail delivery. The table contains four rows of data.

	Scan date	Package name	Resonance factor	Transmission	End date	Package intensity	Resubmission	Mail delivery
1	2/1/2026 10:51:07 PM	Check Up (1)	52.5% (+0.2%)		3/1/2026 10:20:16 PM	4000		
2	2/1/2026 10:20:16 PM	Check Up	52.3%		3/1/2026 10:20:16 PM	4000		
3	12/10/2025 8:36:55 PM	Scan vom 10.12.2025 20:36:55	43.0%		1/7/2026 8:36:55 PM	4000		
4	12/10/2025 8:33:08 PM	Scan vom 10.12.2025 20:33:08	49.7%		1/7/2026 8:33:08 PM	4000		

Termini tipici in Vita Coach:

- Nome del pacchetto: nome liberamente selezionabile per il riconoscimento (ad esempio "Sessione 1", "Sonno", "Ripristino della salute intestinale").
- Tipologia di pacchetto: Focalizzato sulla causa / Focalizzato sulla risoluzione dei sintomi
- Fattore di risonanza: valore medio di tutti i valori di intensità presenti nel pacchetto.
- Intensità del pacchetto: Forza o intensità di trasmissione per l'implementazione, a seconda del metodo di lavoro e del contenuto.

Nota:

Una struttura chiara dei pacchetti facilita il monitoraggio dei progressi e la documentazione. Stabilisci se i pacchetti debbano essere gestiti in modo più "orientato all'argomento" (ad esempio, Sonno) o "orientato alla sessione" (ad esempio, Sessione 1). Assegna a ciascun pacchetto un nome che ne rifletta l'argomento.

3.1.1.7 Lavoro a distanza (telesomatica) e applicazioni online

Un aspetto chiave dell'applicazione è il lavoro da remoto. A seconda della procedura, è possibile utilizzare come base dei campioni (ad esempio, capelli, saliva). Inoltre, esiste la possibilità di effettuare scansioni online e trasmettere i dati, consentendo ai clienti di partecipare da remoto in tempo reale.

Nota:

Prima del lavoro a distanza e delle applicazioni online, chiarire sempre la protezione dei dati, il consenso e le condizioni organizzative. Evitare di trasmettere dati sensibili dei clienti tramite canali non sicuri.

3.1.1.8 Campioni animali durante la scansione e la successiva trasmissione

Per gli animali, è possibile utilizzare un campione per l'analisi, ad esempio peli o saliva prelevati con un tampone. Collocare il campione nell'apposito contenitore. Evitare il contatto diretto con materiale potenzialmente contaminato e, se necessario, utilizzare un contenitore pulito, chiuso e monouso, oppure avvolgere il campione in carta o in un sacchetto di plastica richiudibile e solo successivamente riporre il campione avvolto nel contenitore.

Il sensore CA collegato rimane nel suo alloggiamento durante la scansione. Posizionarlo in modo che la luce illumini il bicchiere.

Rimuovere il campione dopo la scansione. Se in seguito è necessario preparare un supporto informativo, posizionare l'oggetto desiderato nel bicchiere e avviare la trasmissione.

Igiene: pulire o sostituire tutti gli strumenti toccati dopo l'uso e osservare le norme igieniche applicabili al proprio studio.

3.1.1.9 «Modulare» i supporti informativi

A seconda del metodo utilizzato, i supporti informativi (ad esempio, globuli, integratori alimentari o carte magnetiche) possono essere contrassegnati con informazioni di regolazione. Questi supporti informativi possono essere integrati nel processo come elemento supplementare.

Importante: utilizzate i supporti informativi esclusivamente nell'ambito della vostra attività professionale. Documentate cosa avete utilizzato, in quale formato e per quale scopo.



3.1.1.10 Flusso di lavoro breve (classificazione, non istruzioni)

1. Seleziona o crea un cliente. Risultato: il cliente corretto è attivo.
2. Selezionare i database appropriati (o caricare il set). Risultato: la scansione è ora pronta per l'analisi dei contenuti.
3. Eseguire la scansione. Risultato: un elenco dei risultati prioritari è disponibile come pacchetto in "Invia/Report".
4. Rivedi e rinomina i risultati nella sezione "Invia/Report". Risultato: gli argomenti sono organizzati e comprensibili.
5. Nella sezione "Invia/Report", valuta, documenta e invia o trasferisci secondo necessità. Risultato: report, progressi e passaggi successivi vengono registrati.

3.1.1.11 Domande frequenti / Risoluzione dei problemi (3.1.1)

Perché visualizzo solo la sezione "Database" in Bucher Vita Coach?

Perché la gestione dei database è una funzionalità fondamentale specifica di Vita Coach. Altri prodotti utilizzano fonti di dati diverse e generalmente non mostrano questa sezione.

Vita Coach è un dispositivo medico?

Vita Coach è concepito come strumento di coaching complementare e non come dispositivo medico. Non sostituisce la diagnosi o il trattamento medico.

Posso lavorare da remoto con Vita Coach?

Sì, il lavoro da remoto (telesomatica) è un caso d'uso tipico. È sempre consigliabile chiarire preventivamente il consenso, la protezione dei dati e le procedure organizzative.

A cosa servono i "pacchetti"?

I pacchetti raccolgono tutte le informazioni (tramite scansione o aggiunta manuale) necessarie per risolvere un problema specifico. I pacchetti aiutano a raggruppare i risultati, a stabilire le priorità e a documentare chiaramente i progressi della sessione. I pacchetti possono essere trasferiti direttamente al cliente o modulati su supporti informativi che i clienti possono utilizzare durante la terapia. I supporti informativi possono essere, ad esempio:

- Carte magnetiche
- Globuli vuoti
- Pietre curative (cristallo di rocca / quarzo rosa...)
- ecc.

Qual è la differenza tra "Scansione" e "Invia/Report"?

- La funzione "Scan" viene utilizzata per l'analisi e la definizione delle priorità.
- La funzione "Invia/Report" viene utilizzata per la valutazione, la documentazione e la trasmissione ai clienti.

3.1.2 Primi passi (registrazione, interfaccia, creazione dei clienti)

3.1.2.1 Panoramica

In questa sezione, configurerai il **Bucher Vita Coach** per l'uso quotidiano. Imparerai come...

1. scegliere il prodotto giusto
2. Importa o aggiorna i database di radionica,
3. Crea i clienti e impostali in modo sicuro come "clienti attuali".

3.1.2.2 Prerequisiti

- BCS è installato e attivato.
- Stai visualizzando la finestra di benvenuto.
- Per l'importazione **iniziale** dei database dal server Bucher è necessaria una connessione a Internet.

Nota:

Il lavoro (scansioni, valutazioni, dati dei clienti) viene generalmente svolto localmente sul tuo PC. L'accesso a Internet potrebbe essere necessario per l'importazione dei database. Dopo l'installazione di BCS non sono disponibili database. Questi devono essere importati preventivamente.

3.1.2.3 Istruzioni dettagliate per l'importazione di database


Passaggio 1: Seleziona Bucher Vita Coach come prodotto

1. Apri la **finestra di benvenuto** (se non è visibile) utilizzando l'icona ad albero sul desktop.
2. Se "Bucher Vita Coach" non è già visualizzato, fai clic su "Cambia prodotto" (pulsante rotondo nell'angolo in basso a sinistra).



3. Seleziona "Bucher Vita Coach".

Risultato: Vita Coach è attivo nella finestra di benvenuto. Il pulsante "Database" è visibile.

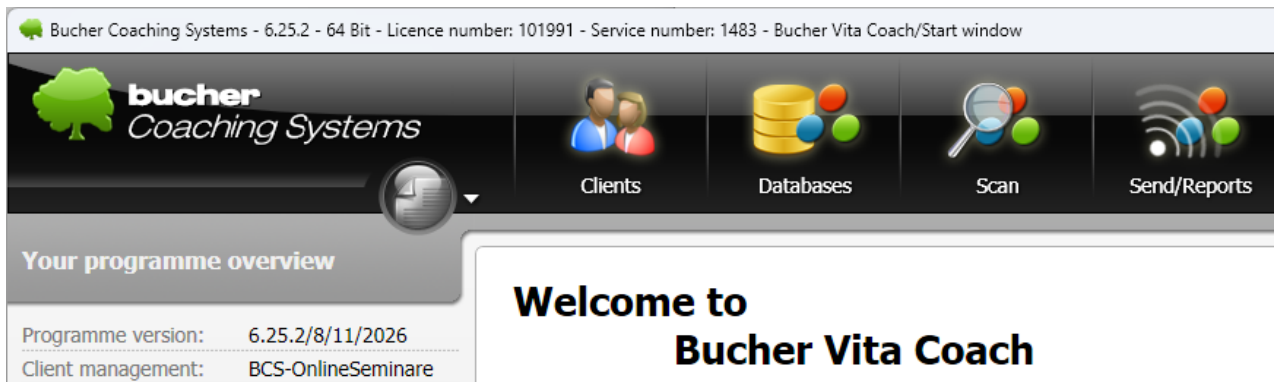

Passaggio 2: Importazione dei database (primo avvio)


1. Nella finestra di benvenuto, fai clic su "Database".
2. Fai clic sull'icona di importazione nell'angolo in alto a sinistra e seleziona "Importa database da Internet" dal menu contestuale.



Si aprirà la finestra "Gestione database". Tutti i database non ancora disponibili in Bucher Vita Coach sono elencati in rosso. Utilizza la casella di controllo nella prima colonna per selezionare se importare o meno un database.

3. Fai clic su "Importa" nell'angolo in basso a destra per importare i database selezionati. L'importazione dei database richiederà del tempo. Importa prima tutti i database. Potrai eliminare i database non necessari in seguito, nella struttura ad albero dei database.

Risultato: i database appaiono nella struttura ad albero a sinistra (ad esempio, per lingua e gruppi).

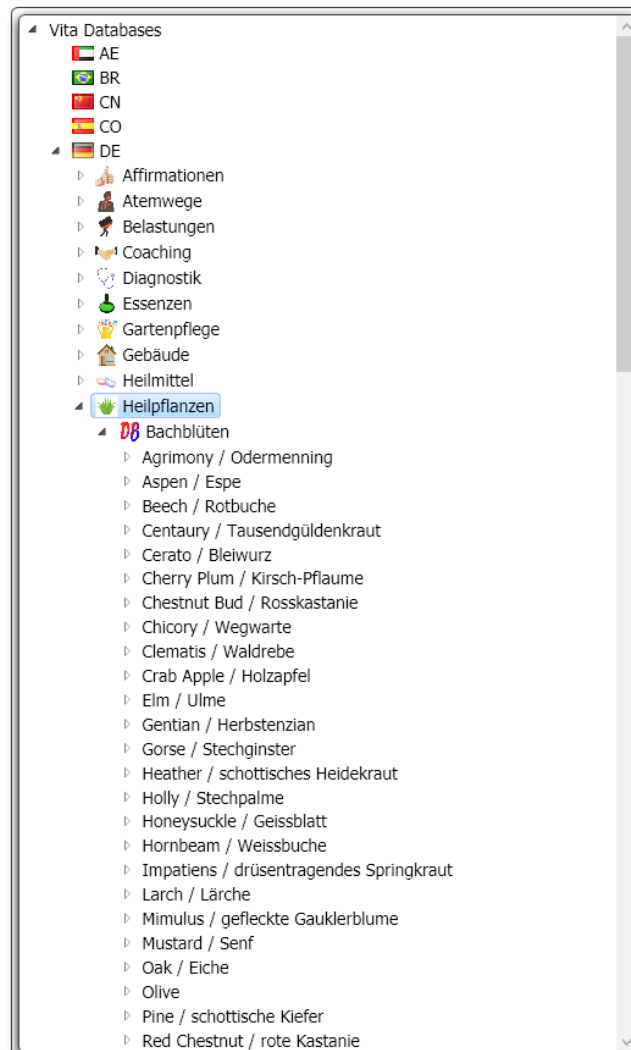

Nota:


Dopo una nuova installazione di BCS, inizialmente non sono presenti database. Le scansioni non sono possibili senza i database importati.

Passaggio 3: Aggiornare i database (se già esistenti)

1. Apri "Database".
2. Aprire "Gestione database" come descritto al punto 2, passaggio 2.
3. Presta attenzione alla codifica a colori nell'elenco di importazione:
 - **Rosso:** non ancora importato
 - **Verde:** già importato
 - **Verde scuro:** importato, ma è presente una versione precedente (aggiornamento disponibile)

4. Importa i database contrassegnati in verde scuro se desideri aggiornarli, e i database contrassegnati in rosso se desideri aggiungerli a Bucher Vita Coach per la prima volta.

Risultato: le vecchie versioni del database vengono sostituite e i database mancanti vengono scaricati. Ciò garantisce che i database siano aggiornati.

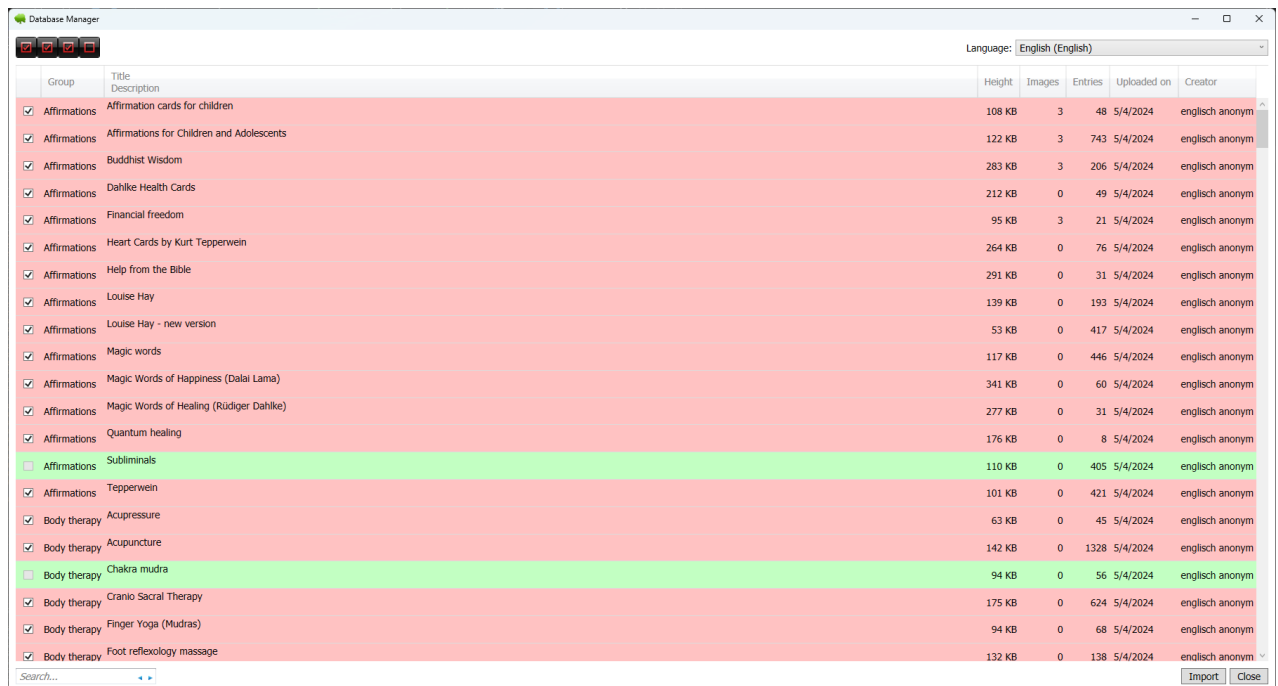

	Group	Title Description	Height	Images	Entries	Uploaded on	Creator
☒	Affirmations	Affirmation cards for children	108 KB	3	48	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Affirmations for Children and Adolescents	122 KB	3	743	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Buddhist Wisdom	283 KB	3	206	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Dahlike Health Cards	212 KB	0	49	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Financial freedom	95 KB	3	21	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Heart Cards by Kurt Tepperwein	264 KB	0	76	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Help from the Bible	291 KB	0	31	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Louise Hay	139 KB	0	193	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Louise Hay - new version	53 KB	0	417	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Magic words	117 KB	0	446	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Magic Words of Happiness (Dalai Lama)	341 KB	0	60	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Magic Words of Healing (Rüdiger Dahlke)	277 KB	0	31	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Quantum healing	176 KB	0	8	5/4/2024	englisch anonym
☐	Affirmations	Subliminals	110 KB	0	405	5/4/2024	englisch anonym
☒	Affirmations	Tepperwein	101 KB	0	421	5/4/2024	englisch anonym
☒	Body therapy	Acupressure	63 KB	0	45	5/4/2024	englisch anonym
☒	Body therapy	Acupuncture	142 KB	0	1328	5/4/2024	englisch anonym
☐	Body therapy	Chakra mudra	94 KB	0	56	5/4/2024	englisch anonym
☒	Body therapy	Cranio Sacral Therapy	175 KB	0	624	5/4/2024	englisch anonym
☒	Body therapy	Finger Yoga (Mudras)	94 KB	0	68	5/4/2024	englisch anonym
☒	Body therapy	Foot reflexology massage	132 KB	0	138	5/4/2024	englisch anonym

Gestore di database: Selezionare e importare database

2. Ti trovi ora nel registro dei dati personali. Inserisci le informazioni richieste (in genere: nome, indirizzo, data di nascita, sesso ed eventualmente altri campi).

 Edit client

Personal	Password protection	Client settings	Client image	Remedy Pyramid	Comments	Documents	Diagnoses/Symptoms
----------	---------------------	-----------------	--------------	----------------	----------	-----------	--------------------

Customer number:

Title/Title:

Company name:

Surname/First name:

Street:

Postcode/Town:

Country:

Tel. (private/business):

Mobile/Fax:

Email:

Date of birth/Time: Species:

22 years old, born on a Wednesday

Star sign:  Virgo

Chinese zodiac sign:  Goat (Water) 羊 水

Gender/Account holder:

Language/IBAN:

Marital status/BIC:

Bank details

3. Seleziona la specie appropriata, ad esempio "Umano", "Cavallo", "Cane", "Gatto", "Altro animale", "Pianta" o "Altro". Se non si tratta di un essere umano, utilizza il campo "Nome animale/oggetto" per specificare il nome dell'animale o dell'oggetto. I campi relativi all'indirizzo, inclusi nome e cognome del proprietario, conterranno quindi le sue informazioni.
4. Se disponibile, carica un'immagine del cliente nella scheda "Immagine del cliente".

 Edit client

Personal	Password protection	Client settings	Client image	Remedy Pyramid	Comments	Documents	Diagnoses/Symptoms
----------	---------------------	-----------------	--------------	----------------	----------	-----------	--------------------



5. Aggiungere "Osservazioni" se necessario (ad esempio, preoccupazioni, condizioni quadro, accordi).
6. Ai fini di una successiva valutazione da parte dell'IA, è inoltre utile compilare i campi di input "Diagnosi/Sintomi".

7. Fai clic su "Salva" nell'angolo in basso a destra.

Risultato: Il cliente viene creato, inserito nell'elenco clienti e diventa automaticamente il "cliente corrente" (visibile in alto a sinistra dello schermo).


Consiglio pratico:

Una foto recente del cliente migliora il riconoscimento nelle situazioni quotidiane. Utilizza la sezione "Note" per annotare informazioni che desideri ricordare rapidamente durante i prossimi appuntamenti.

Passaggio 3: assicurarsi che il cliente corretto sia attivo

1. Controlla a sinistra, sotto "Cliente corrente", se viene visualizzato il cliente corretto.


Risultato: Questo cliente è quello **attualmente selezionato**. Tutte le fasi successive (scansione, valutazione, invio/report) faranno riferimento a questo cliente.

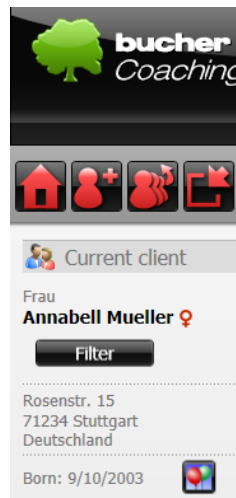

Passaggio 4: Utilizzare filtri per la privacy (facoltativo, ma consigliato se il cliente può vedere lo schermo)

1. Seleziona il cliente.
2. Fai clic su "Filtra".

Risultato: viene visualizzato solo questo cliente. Il pulsante "Filtro" indica chiaramente (tramite un effetto rosso) che il filtro è attivo.

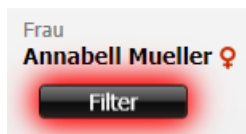

Attenzione:

Se il filtro rimane attivo, sembrerà che tutti gli altri clienti siano "scomparsi". Non si tratta di una perdita di dati. Cliccando nuovamente sul pulsante del filtro, tutti i clienti verranno visualizzati di nuovo.

Nota:

Quando apporti modifiche, ricordati di "Salvare". Se esci dalla finestra senza salvare, ti verrà chiesto se desideri salvare i dati modificati. Se rispondi "No", le modifiche andranno perse.

3.1.2.5 Ulteriori funzioni nella gestione dei clienti

Oltre alla creazione e alla modifica dei record, la finestra cliente contiene altre funzioni che consentono di risparmiare tempo e prevenire errori nella gestione di grandi quantità di dati. Le funzioni visibili possono variare a seconda della licenza e della versione del programma.

Verifica i clienti attivi e la protezione dei dati

Cliccando su una riga, la persona corrispondente viene impostata come cliente corrente. Prima di ogni scansione, esportazione e trasmissione, verificare il nome nella sezione "Cliente corrente". Tutti i passaggi successivi faranno riferimento a questa selezione.

Se un cliente può visualizzare lo schermo, attiva il filtro. Solo il cliente selezionato sarà visibile. Un pulsante del filtro evidenziato in rosso indica che il filtro è attivo; cliccandoci nuovamente sopra, verranno visualizzati tutti i record.

Modifica, copia ed elimina i record di dati

Apri il record di dati utilizzando l'icona di modifica nella riga corrispondente (l'icona più a sinistra). Salva esplicitamente tutte le modifiche prima di chiudere la finestra.



La funzione di copia (l'icona centrale) consente di utilizzare un record esistente come base per un nuovo cliente, ad esempio per famiglie o più animali appartenenti allo stesso proprietario. Successivamente, verificare e modificare tutti i campi personali per assicurarsi che nessun dato della persona originale venga copiato accidentalmente.

È possibile eliminare un cliente utilizzando l'icona più a destra. Eliminare un cliente solo dopo un'attenta valutazione. L'eliminazione di un cliente potrebbe comportare anche la rimozione dei pacchetti associati e dei risultati delle scansioni da tutti gli altri prodotti con licenza. Creare un backup aggiornato dei dati prima di procedere, qualora questi dovessero essere necessari in futuro.

Ordina e cerca

Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare l'elenco in base a quel campo. Un piccolo triangolo indica la direzione di ordinamento. Quando si ordina per cognome, anche il nome viene preso in considerazione come criterio aggiuntivo.

	Online colour selection scan	Customer number	Title	Title	Company name	Animal/Object	Surname	First name
  	●●●●●●●●		Haus				Müller	Annabell

Innanzitutto, inserisci le prime lettere del cognome nel campo di ricerca. L'elenco visualizzerà automaticamente il primo risultato corrispondente. Se necessario, puoi affinare ulteriormente la ricerca includendo anche il nome.

Search...		Search...		☒ Surname and first name only
--	---	--	---	---

Foto del cliente, note e recapiti

Nella scheda "Immagine cliente" è possibile, a seconda delle impostazioni, scattare una foto con la webcam, importarla da un file o incollarla dagli appunti. L'immagine può essere ritagliata, ruotata o eliminata. Utilizzare le immagini solo con il consenso esplicito del cliente e non utilizzare foto provenienti dai social media senza autorizzazione.


Nella sezione "Note" è possibile memorizzare note organizzative e riepiloghi delle conversazioni. Inserire solo le informazioni necessarie per fornire assistenza.

La funzione di copia dei dati di indirizzo trasferisce le informazioni di contatto negli appunti di Windows. Prima di incollarle in altri programmi, verificare se il trasferimento è consentito dalle normative sulla protezione dei dati e se il documento di destinazione è protetto.

3.1.2.6 Finestra del database in dettaglio

Il sistema di gestione del database è strutturato gerarchicamente: Area → Lingua → Gruppo → Database → Voce del database. È possibile aprire o chiudere i livelli subordinati utilizzando il piccolo triangolo accanto a un elemento.

"Database Vita" contiene i database di sola lettura forniti da Bucher GmbH. "I miei database" contiene i tuoi database personali modificabili. Le informazioni relative alla voce selezionata vengono visualizzate a destra.

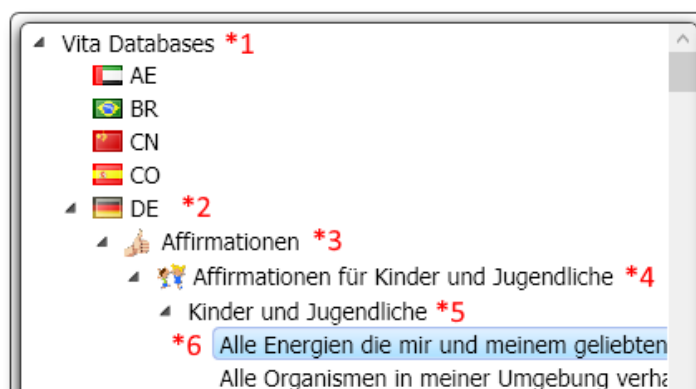

*1 = Area (Database Vita o I miei database)

*2 = Lingua

*3 = Nome del gruppo di database


*4 = Nome del database

*5 = Voce nel database

*6 = Sottovoce di una voce del database

Opzioni di importazione


A seconda della versione e dell'attivazione, il menu di importazione può importare database da un dispositivo di archiviazione locale, dal server Bucher o da uno scambio con altri utenti BCS.

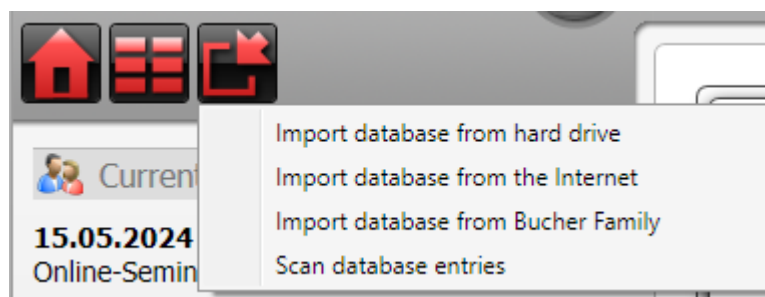

Se disponi di più versioni del tuo database, puoi utilizzare la funzione di confronto per identificare le differenze prima di sostituire o modificare ulteriormente una versione.

Ricerca voci del database

Apri la funzione di ricerca del database e inserisci un termine di ricerca il più specifico possibile. A seconda della tua selezione, la ricerca può considerare solo il termine o anche commenti e note. I termini generici spesso producono molti risultati; termini più precisi facilitano la selezione. Potrebbero essere visualizzati più risultati identici, poiché alcuni termini compaiono in più database.

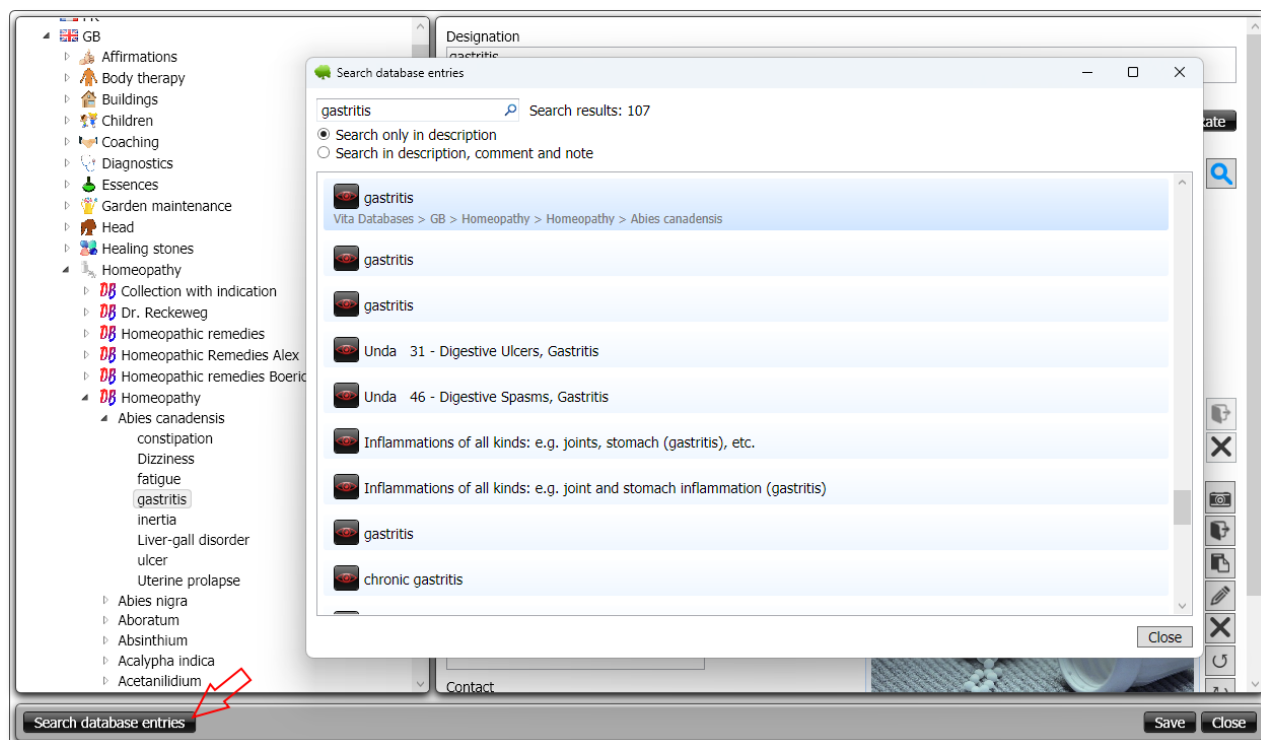

3.1.2.7 Creazione del proprio database

I database personalizzati vengono creati esclusivamente nella sezione "I miei database".

Nell'interfaccia in inglese potrebbero comparire le seguenti voci di menu:

1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla bandiera della lingua desiderata e seleziona «New group». Inserisci un nome univoco per il gruppo.
2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo gruppo e seleziona «New database». Inserisci un nome univoco per il database.
3. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul database e seleziona «New subentry» oppure «New entry». Inserisci il nome della prima voce.
4. Sul lato destro, aggiungi una descrizione, un commento, una nota e, se opportuno, un'immagine. Salva la voce prima di passare alla successiva.

Consiglio pratico:

Prima di apportare modifiche importanti, crea una copia di backup dei dati. Utilizza nomi di gruppo e di database coerenti e verifica se una voce esiste già prima di crearla nuovamente.

3.1.2.8 Errori comuni e soluzioni

"Non vedo alcun database."

Causa: Inizialmente, dopo l'installazione, non vengono importati database.

Soluzione: Apri "Database" → Fai clic sull'icona di importazione nell'angolo in alto a sinistra e seleziona "Importa database da Internet" dal menu contestuale.

"Tutti i clienti sono spariti, ne rimane solo uno."

Causa: "Filtro" è attivo. Soluzione: fare nuovamente clic su "Filtro" nella finestra del cliente in modo che l'indicatore rosso scompaia.

"Le modifiche al cliente non sono state salvate."

Causa: non è stato fatto clic su "Salva" e la richiesta di salvataggio è stata rifiutata. Soluzione: modificare nuovamente il cliente → apportare le modifiche → "Salva".

"Stavo lavorando per il cliente sbagliato."

Causa: è stato selezionato il cliente sbagliato. Soluzione: verificare sempre brevemente quale cliente è attualmente selezionato prima di procedere con la scansione/valutazione. È anche possibile trasferire i pacchetti ad altri clienti.

3.1.2.9 FAQ

Devo caricare una foto del cliente?

No. Tuttavia, è consigliato perché facilita l'identificazione. Se non è disponibile una foto, si può lavorare senza.

Posso aggiungere anche animali, piante o oggetti come clienti?

Sì. Seleziona la specie appropriata:

- Persona
- Cavallo
- Cane
- Gatto
- Altri animali
- pianta
- Altre cose (ad esempio edifici, giardino, veicoli, ecc.)

Ho bisogno di una connessione internet permanente?

Una connessione internet potrebbe essere necessaria per importare/aggiornare i database.

L'elaborazione dei dati esistenti (clienti, scansioni, report, invii) avviene localmente e funziona anche senza connessione internet.

3.1.3 Eseguire l'analisi di risonanza (scansione)

3.1.3.1 Panoramica

L'analisi di risonanza (scansione) viene utilizzata per individuare, tra i database di radionica selezionati, le voci che risuonano maggiormente con il cliente attualmente selezionato. Il risultato è un pacchetto di voci di scansione che possono essere ulteriormente elaborate in "Invia/Report" (visualizza, modifica, aggiungi, stampa, invia, esporta).

Per eseguire una scansione, fai clic sul pulsante principale «Scansione».

Importante: una scansione non sostituisce una diagnosi medica. I risultati della scansione forniscono informazioni e indicazioni per ulteriori accertamenti, non costituiscono "la diagnosi".

3.1.3.2 Prerequisiti


1. Il cliente viene creato e selezionato nel sistema di gestione clienti.
Risultato: il cliente attualmente selezionato viene visualizzato nell'angolo in alto a destra della finestra di scansione.
2. Almeno un database idoneo è stato importato ed è visibile nella finestra di scansione.
Risultato: è possibile selezionare le caselle di controllo nell'area di selezione del database.
3. Opzionale: l'hardware di radionica è collegato e selezionato nella finestra di scansione.
Risultato: l'hardware in uso è identificabile nell'area hardware (icona a forma di ingranaggio).

3.1.3.3 Istruzioni dettagliate per la "Scansione"

A) Scansione standard (consigliata per il primo contatto): "Scansione vitale" → "Check-up"

1. Aprire la finestra "Scansione".

Risultato: viene visualizzata la finestra di scansione con la selezione del database e le opzioni di scansione.

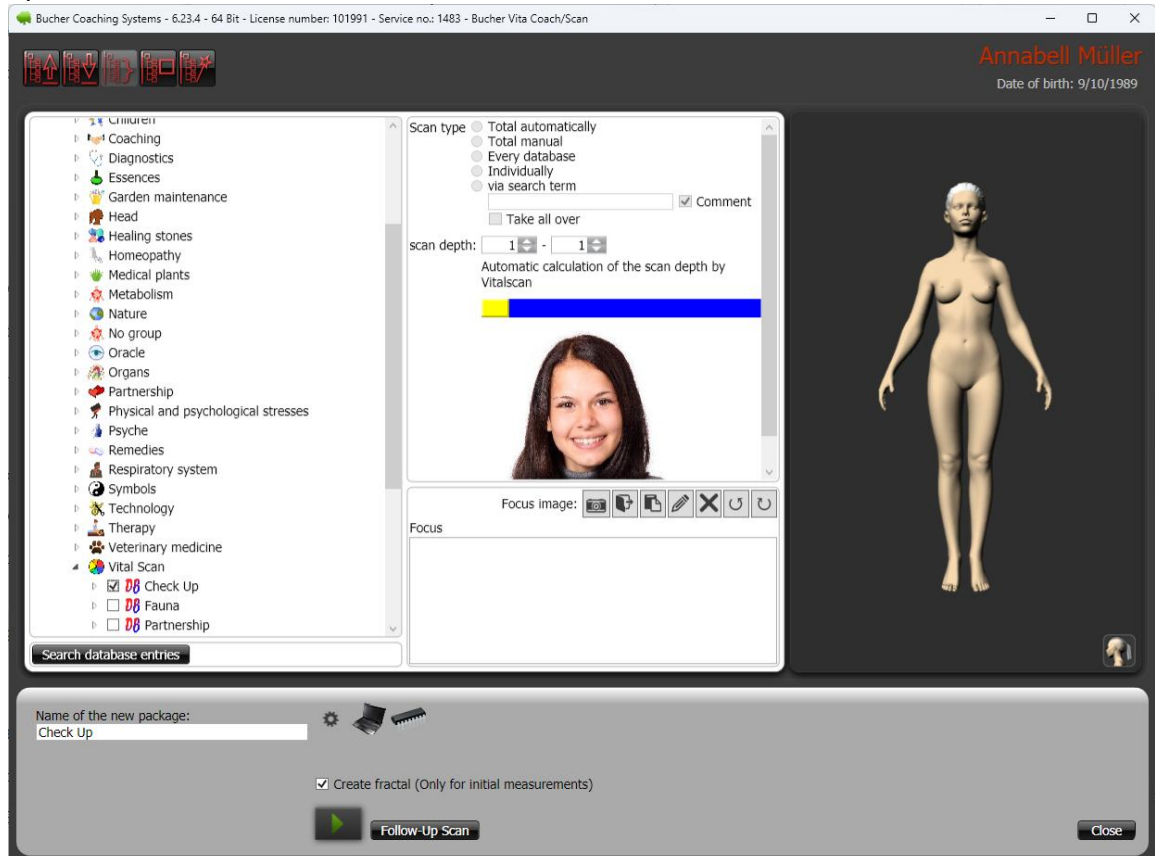

2. Verifica il cliente attualmente selezionato (inclusa la data di nascita) nell'angolo in alto a destra.
In questo modo eviti di scansionare accidentalmente il cliente sbagliato.
3. Aprire il gruppo "Vital Scan" nell'elenco del database.
Risultato: le voci del gruppo diventano visibili.
4. Selezionare **esattamente una** casella di controllo per "Controllo" (database delle persone).
Risultato: è selezionata solo "Controllo". Attenzione: è possibile scansionare esclusivamente i database di scansione vitale. Non è possibile selezionare altre caselle di controllo per questa scansione.
5. Se necessario, rinomina il pacchetto di scansione prima di avviare la scansione (in basso a sinistra della finestra).
Risultato: potrai identificare chiaramente la scansione in seguito, anche in caso di scansioni multiple.
6. Opzionale: inserisci un problema nel campo "Focus" (ad esempio, "Risoluzione degli attacchi di emicrania").
Risultato: la scansione si concentrerà su questo problema. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzata automaticamente la "Situazione attuale".

7. Avvia la scansione utilizzando il pulsante "Avvia scansione" (triangolo verde).

Risultato: la scansione è in corso.




8. Attendi che la scritta "Annulla" nell'angolo in basso a destra venga sostituita da "Chiudi".
Risultato: la scansione è completa e può essere salvata. Importante: se fai clic su "Annulla" durante la scansione, la scansione verrà interrotta e i risultati non verranno salvati.
9. Conferma il messaggio di completamento con "OK" e chiudi la scansione con "Chiudi".
Risultato: il risultato della scansione viene salvato come pacchetto ed è disponibile in "Invia/Report".

B) Scansione individuale (lavoro su argomento o soluzione)

1. Aprire la finestra "Scansione".
Risultato: la finestra di scansione è visibile.
2. Verifica il cliente attualmente selezionato nell'angolo in alto a destra.
Risultato: il cliente corretto è stato confermato.
3. Seleziona i database pertinenti agli argomenti del cliente spuntando le caselle corrispondenti.

Risultato: vengono contrassegnati solo i database che corrispondono alla richiesta.

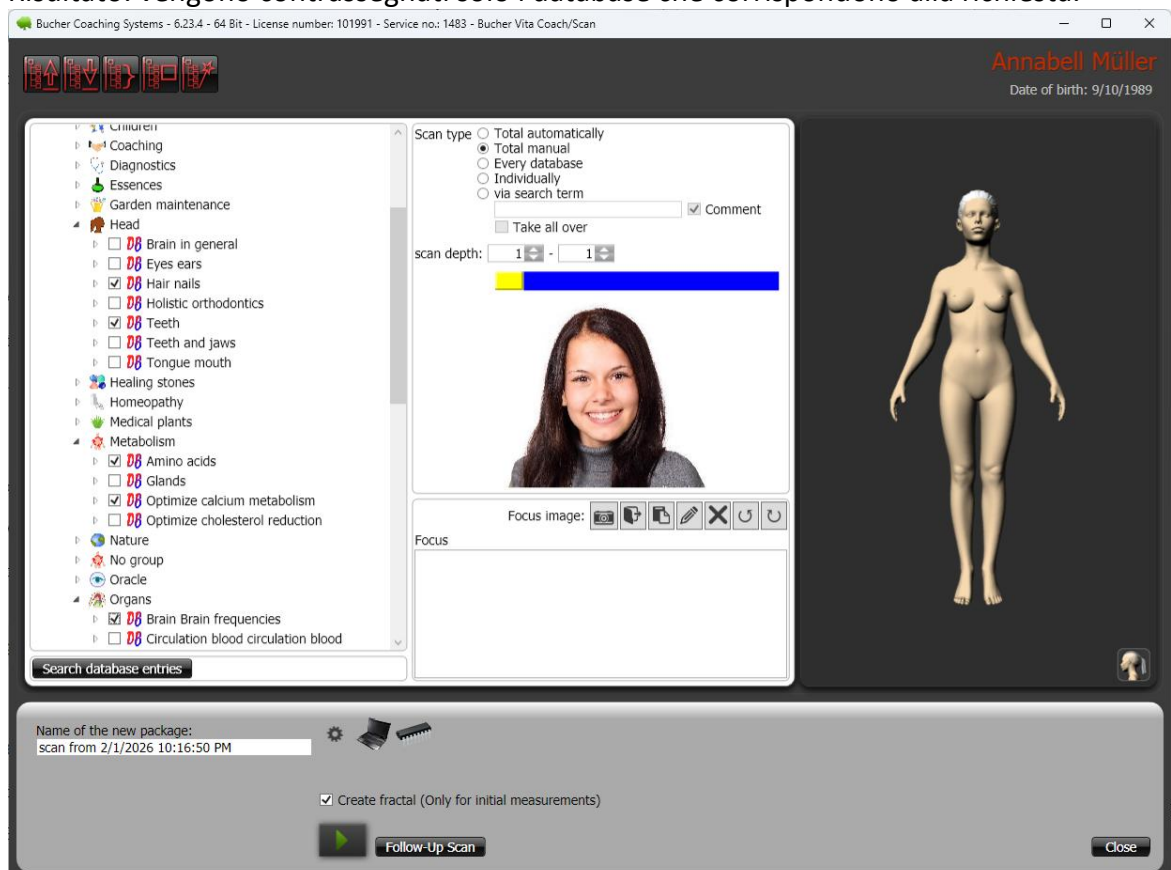

Consiglio pratico: per le richieste ricorrenti, utilizza un "set di scansione". Questo ti permette di salvare una selezione di caselle spuntate e di ricaricarla in seguito.



4. Opzionale: utilizza la funzione "interroga campo morfico" per ricevere suggerimenti su ulteriori database adatti.



Risultato: verranno attivati circa 10 database aggiuntivi rispetto a quelli già selezionati.

5. Seleziona un tipo di scansione per definire il numero di risultati. Per l'uso quotidiano si consiglia «Totale automatico»

: il sistema determina il numero di risultati in base alla selezione, riducendo quelli marginali.

Opzioni (breve panoramica):

1. "Totale automatico": Il sistema determina il numero di risultati.
2. "Totale manuale": la profondità di scansione viene determinata tramite un cursore.
3. "Ogni database": viene recuperato un numero fisso di risultati per ogni database selezionato.
4. "Individuale": per ogni database viene definito un numero di risultati separato.
5. "Con parola chiave": Innanzitutto, vengono filtrate le voci che contengono una parola chiave, quindi viene eseguita la ricerca.
6. Opzionale: Inserire una descrizione chiara nel campo "Obiettivo" (ad esempio, "Risoluzione del mal di schiena").
Risultato: La scansione si concentrerà esplicitamente sul problema. Se lasciato vuoto, verrà utilizzata la "Situazione attuale".
7. Assegna un nome significativo alla scansione.
Risultato: manterrai una visione d'insieme quando gestisci più scansioni (ad esempio, "Problemi alla schiena", "Sonno", "Stress lavorativo").
8. Verifica le impostazioni hardware utilizzando l'icona a forma di ingranaggio (nella parte inferiore della finestra).
Risultato: saprai se la scansione viene eseguita con o senza hardware.
9. Avviare la scansione tramite "Avvia scansione" (triangolo verde).
Risultato: la scansione è in corso.
10. Attendi che "Annulla" venga sostituito da "Chiudi".
Risultato: la scansione è completata.
11. Conferma il messaggio di completamento con "OK" e chiudi con "Chiudi".
Risultato: il risultato della scansione è stato salvato e può essere aperto in "Invia/Report".

3.1.3.4 Utilizzo dei set di scansione e della selezione rapida

Un set di scansione memorizza le posizioni delle caselle di controllo del database selezionato. Non contiene né i risultati della scansione né i dati del cliente. I set di scansione sono adatti per domande ricorrenti in cui vengono selezionati regolarmente gli stessi database.

Carica set di scansione: carica una selezione di database salvata in precedenza.

Salva set di scansione: salva le caselle di controllo attualmente selezionate con un nome significativo.

Seleziona l'intero gruppo: evidenzia un gruppo e utilizza la funzione gruppo per controllare tutti i database associati.

Reimposta selezione: rimuove tutte le caselle selezionate e crea un punto di partenza pulito.

Suggerisci database aggiuntivi: questa funzione aggiunge ulteriori database alla selezione esistente, se disponibili nella tua versione.

Fase di controllo: dopo aver caricato un set di scansione, verificare sempre il cliente corrente, i database selezionati e l'impostazione. Un set salvato non sostituisce la selezione professionale necessaria per il caso specifico.

Avvisi e note importanti

Importante: una profondità di scansione manuale molto elevata può generare numerosi problemi indesiderati, rendendo l'analisi più difficile. È preferibile utilizzare la modalità "Totale automatico" e aumentare la profondità in modo selettivo.

Nota:

Vengono scansionati esclusivamente i database di screening vitale (ad esempio, "Check Up"). Non mescolarli con altri database.

Importante

Non annullare la scansione con "Annulla" se desideri conservare i risultati. Termina la scansione facendo clic su "Chiudi".

3.1.3.5 Errori comuni e soluzioni

Scansione effettuata sul cliente sbagliato.

Soluzione: prima di ogni scansione, verificare il cliente (inclusa la data di nascita) nell'angolo in alto a destra. È anche possibile spostare la scansione su un cliente diverso nella finestra "Invia/Report".

Risultati mancanti dopo la scansione.

Causa: la scansione è stata annullata tramite il pulsante "Annulla".

Soluzione: riavviare la scansione e attendere che sia disponibile il pulsante "Chiudi".

Troppi risultati poco chiari.

Causa: Profondità di scansione troppo elevata o troppi database selezionati.

Soluzione: Passare a "Totale automatico" e ridurre il numero di database selezionati.

Impossibile avviare la scansione vitale.

Causa: sono selezionati anche database aggiuntivi.

Soluzione: selezionare UN SOLO database per la scansione vitale, ad esempio selezionare "Check Up" e deselectare tutte le altre opzioni. Quindi, eseguire nuovamente la scansione.

In alternativa, se non si utilizza un database Vital Scan, è possibile selezionare un qualsiasi altro database per la scansione.

3.1.3.6 FAQ

Domanda: Devo sempre specificare un obiettivo?

Risposta: No. Se il campo "Obiettivo" rimane vuoto, viene utilizzato automaticamente "Situazione attuale".

Domanda: Qual è il vantaggio di un nome per la scansione?

Risposta: Con più scansioni, è possibile identificare più rapidamente i dati risultanti e assegnarli in modo chiaro. Pertanto, è consigliabile descrivere brevemente la scansione nel nome della scansione.

Domanda: Quale impostazione di scansione è la più sicura per iniziare?

Risposta: "Totale automatico" perché il sistema limita in modo appropriato il numero di risultati.


Domanda: Posso testare il programma senza il sensore CA?

Risposta: Per familiarizzare con il funzionamento, è possibile selezionare temporaneamente l'hardware del computer come hardware radionico. Questo è esclusivamente a scopo di test e pratica. Per il normale funzionamento previsto, collegare il sensore CA e testarne la funzionalità.

3.1.4 Valutare e dare priorità ai risultati

3.1.4.1 Panoramica

Dopo la scansione, i risultati sono disponibili in un pacchetto. Questo pacchetto contiene le singole risonanze (temi). L'obiettivo dell'analisi è identificare i temi più importanti, raggrupparli in modo significativo e definire insieme al cliente i passi successivi. L'attenzione è focalizzata su soluzioni e approcci concreti, non su diagnosi.

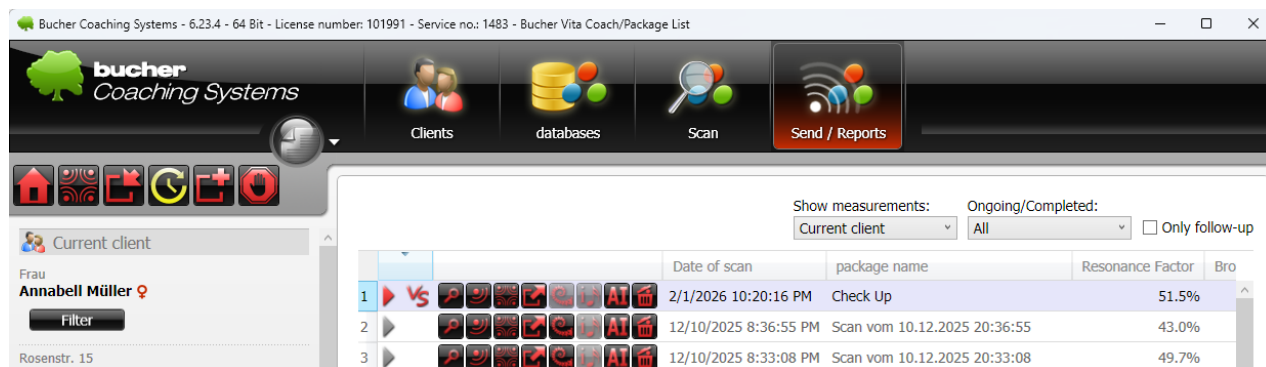

3.1.4.2 Prerequisiti

- Il cliente è stato selezionato.
- È disponibile un risultato della scansione (pacchetto).
- Conosci il contesto della richiesta (focus) oppure lo chiarisci prima della valutazione.

3.1.4.3 Istruzioni passo passo

1. Aprire l'elenco dei risultati tramite "Invia/Report".

Risultato: viene visualizzato l'elenco dei pacchetti di scansione per il cliente attualmente selezionato.

2. Nella riga dei risultati desiderati, aprire la "Finestra di invio".



Risultato: il pacchetto può essere visualizzato in dettaglio e utilizzato per ulteriori elaborazioni.


3. Verificare i dati del pacchetto (prima orientazione).

Prestare particolare attenzione a:

- "Fattore di risonanza" (valore medio delle intensità nel pacchetto).
- "Intensità del pacchetto" (potenza di trasmissione, valore predefinito = 2.500 su 10.000).
- "Ora di inizio", "Data di fine", "Intervallo" (controllo del tempo).

Risultato: si comprende la struttura del pacchetto prima di entrare nei dettagli.

4. Iniziate a stabilire le priorità in base all'intensità.

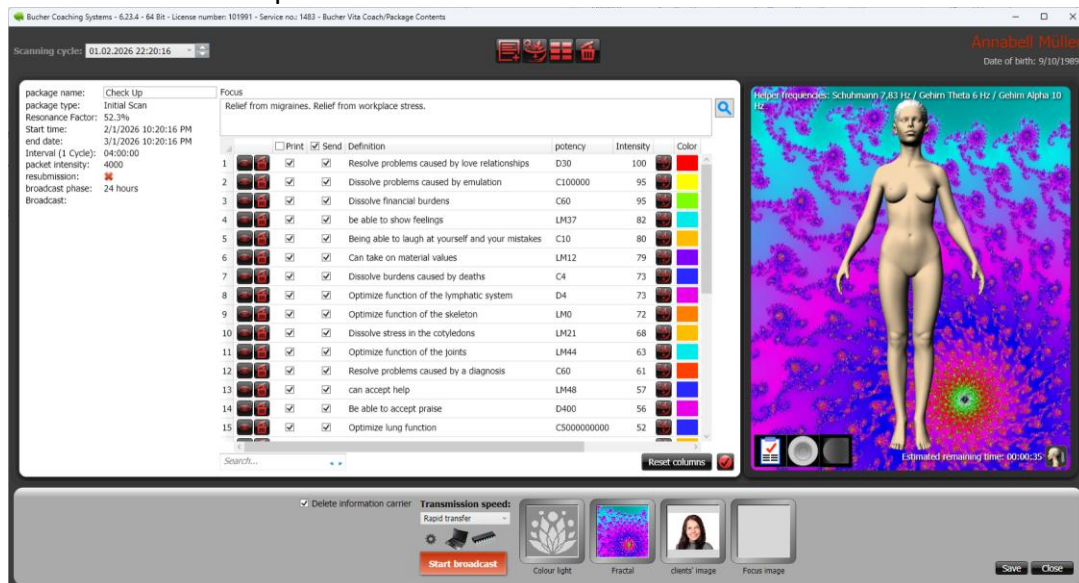

- Le risposte sono generalmente ordinate in ordine decrescente di intensità. Gli argomenti più importanti si trovano in cima.
- Utilizza l'intensità come prima regola di filtro.
Risultato: otterrai una classifica iniziale degli argomenti. Gli argomenti importanti si trovano in cima, quelli meno importanti in fondo.

5. Svolgete il processo di definizione delle priorità insieme al cliente.

Esaminate ogni elemento, partendo dal più importante, e ponete domande brevi e aperte, ad esempio:

- "Cosa ti viene in mente quando senti il termine: relazione sentimentale?"
- "Vi viene subito in mente una situazione in particolare?"
- "Stai provando una reazione a questo proprio ora?"

Risultato: Riesci a riconoscere quali risposte sono effettivamente significative per il cliente in quel momento.

6. Presta attenzione agli indicatori emotivi e al filo conduttore.

- Se un intervento è carico di emotività (voce tremante, lacrime, tensione visibile), ciò indica la sua rilevanza.
- Cerca temi ricorrenti in più voci (un filo conduttore).

Risultato: da molti termini individuali emerge un tema centrale coerente.

7. Utilizzare la potenza come indicatore temporale (facoltativo).

Se il pacchetto contiene indicazioni sulla potenza, queste possono suggerire un

inquadramento temporale approssimativo, utile per collegare fasi della vita o eventi pertinenti.

- Le potenze D indicano eventi nell'ordine delle settimane.
- Le potenze C indicano eventi nell'ordine dei mesi.
- Le potenze LM indicano eventi nell'ordine degli anni.

Risultato: si ottengono indizi su quando potrebbe essersi verificata una risonanza.

8. Stabilisci un elenco pragmatico di priorità.

Il seguente ordine si è dimostrato efficace:

1. Risposta emotiva intensa e chiara da parte del cliente.
2. Voci che supportano il filo conduttore (nodi).
3. Voci che suggeriscono direttamente soluzioni o passi concreti da intraprendere.

Risultato: avrai un breve elenco di aree chiave per il tuo prossimo compito.

9. Scegli consapevolmente cosa stampare.

- Utilizzare la colonna "Stampa" per includere o escludere selettivamente le voci.
- È meglio non stampare le voci che potrebbero generare ansia; è preferibile discuterne attentamente.

Il risultato: il documento rimane utile e non sovraccarica il cliente.

10. Se necessario, verificare se i singoli elementi devono essere inviati.

In genere, le caselle di controllo nella colonna "Invia" rimangono selezionate. In casi giustificati, è possibile escludere singoli elementi (ad esempio, se il cliente non desidera esplicitamente includere qualcosa nel proprio campo). Risultato: il pacchetto è adatto al cliente e alle sue esigenze.

11. Documentare la priorità al di fuori del pacchetto, ad esempio nella sezione

"Diagnosi/Sintomi" dell'area clienti.

Annotare brevemente:

- Argomenti principali (ad esempio, da 3 a 7 punti)
- obiettivo o tema concordato per la prossima riunione
- Istruzioni su come gestire argomenti delicati (ad esempio, evitare l'uso di determinati termini).

Risultato: il processo è comprensibile e consente di proseguire in un secondo momento.

Nota:

Le voci rappresentano risonanze e temi. Non costituiscono automaticamente una diagnosi. Termini come gelosia, irascibilità, calunnia, frode, indicazioni di malattie o altri temi possono riguardare anche persone vicine al cliente. Il cliente può risentirne quando entra in contatto con queste persone e il tema in questione assume un ruolo nell'interazione.

Importante: un numero elevato di voci può anche dipendere da un'elevata profondità di scansione. In tal caso, non tutte le voci hanno la stessa rilevanza.

Attenzione:

Evitate di imporre un'interpretazione al cliente. Lavorate con le domande e verificate se il cliente le comprende, ad esempio attraverso una reazione emotiva.

3.1.4.4 Utilizzo sicuro dell'elenco dei pacchetti

L'elenco dei pacchetti mostra i risultati relativi al cliente attualmente selezionato. Imposta il filtro clienti su "Tutti" solo se desideri effettuare una ricerca tra tutti i clienti. Con diverse migliaia di pacchetti, la generazione dell'elenco completo potrebbe richiedere più tempo.

Rileva lo stato e il tipo di pacchetto

I simboli distinguono tra scansioni iniziali, scansioni di controllo e, se disponibili, scansioni vitali. I simboli colorati o rossi indicano scansioni in corso; i simboli grigi rappresentano scansioni completate.

Funzioni in una linea di pacchetti

A seconda della licenza, ogni pacchetto offre funzioni per l'anteprima di stampa, l'invio, la trasmissione collettiva, l'esportazione, la progettazione frattale, la fusione e la cancellazione. Le icone sbiadite spesso indicano che la funzione non è disponibile per quel pacchetto o non è stata eseguita.

Utilizza la funzione di ricerca del pacchetto per trovare un nome in avanti o indietro nell'elenco. Se le colonne sono state spostate o ridimensionate, "Ripristina larghezza colonne" ripristina la disposizione predefinita.

The screenshot displays the Bucher Coaching Systems software interface. The top menu bar includes icons for Clients, Databases, Scan, and Send/Reports. The left sidebar shows the current client, Frau Annabell Mueller, with her contact information and a list of products she is using. The main area displays a table of packages with columns for Scan date, Package name, Resonance factor, and Transmission. The table lists 18 packages, including 'relieve migraine symptoms', 'Check Up (1)', 'Check Up', 'CD Angstauflösung', and 'Kopfschmerzen'. The interface also includes a search bar and a 'Reset columns' button.

	Scan date	Package name	Resonance factor	Transmission
1	8/21/2026 8:43:48 PM	relieve migraine symptoms	75.0%	
2	2/1/2026 10:51:07 PM	Check Up (1)	52.5% (+0.2%)	
3	2/1/2026 10:20:16 PM	Check Up	52.3%	
4	12/10/2025 8:36:55 PM	Scan vom 10.12.2025 20:36:55	43.0%	
5	12/10/2025 8:33:08 PM	Scan vom 10.12.2025 20:33:08	49.7%	
6	12/10/2025 7:49:34 PM	Check Up	52.9%	12/10/2025 8:01:10 PM
7	12/10/2025 7:46:03 PM	CD Einschlafhilfe	50.4%	12/10/2025 7:59:02 PM
8	12/10/2025 7:31:12 PM	Check Up	50.6%	
9	12/10/2025 4:06:33 PM	Check Up	49.9%	
10	11/12/2025 5:36:27 PM	Check Up	45.7%	11/12/2025 5:38:37 PM
11	10/15/2025 7:09:00 PM	Check Up	50.3%	10/15/2025 8:01:23 PM
12	10/15/2025 5:37:20 PM	Check Up	58.5%	
13	2/21/2025 3:40:27 PM	CD Angstauflösung	50.4%	
14	2/21/2025 3:40:00 PM	CD Angstauflösung	52.0%	
15	2/21/2025 3:38:42 PM	CD Angstauflösung	47.9%	
16	2/21/2025 3:11:53 PM	Scan vom 21.02.2025 15:11:53	48.4%	2/21/2025 3:27:45 PM
17	2/18/2025 6:40:16 PM	Kopfschmerzen	40.7%	2/18/2025 6:48:53 PM
18	1/25/2025 1:00:55 PM	Scan vom 25.01.2025 13:00:55	60.3%	1/28/2025 2:10:56 PM

3.1.4.5 Modifica selettivamente il contenuto del pacchetto

Aprire il contenuto del pacchetto utilizzando il pulsante corrispondente nella riga del pacchetto.



Aggiungi voci

A seconda del tipo di pacchetto, è possibile utilizzare "Aggiungi voci" per avviare una scansione supplementare oppure creare una voce vuota e descriverla manualmente. Queste funzioni sono generalmente disponibili completamente solo per una singola scansione iniziale, senza possibilità di scansioni successive.



Ricalcola i parametri

Il menu dei parametri consente di ridefinire o impostare potenza, intensità, colore, intensità del pacchetto o intervallo su valori predefiniti. Utilizzare questa funzione principalmente per pacchetti creati manualmente, copiati o importati. Prima di eseguire la modifica, verificare se influisce su tutte le voci o solo su quelle con o senza un valore esistente.




Testo, ricerca ed evidenziazione

La sezione "Focus" descrive il problema o l'obiettivo del pacchetto. I testi più lunghi possono essere modificati in una finestra di input più grande utilizzando l'icona della lente d'ingrandimento.

La funzione di ricerca ti aiuta a trovare termini all'interno di pacchetti estesi. La funzione di evidenziazione colora le voci esistenti, rendendo più facile identificare i risultati appena aggiunti dopo una successiva ricerca. Per rimuovere l'evidenziazione, fai nuovamente clic.

Per escludere una voce del pacchetto dalla stampa, deseleziona la casella «Stampa». Per escluderla anche dalla trasmissione, deseleziona la casella «Invia».

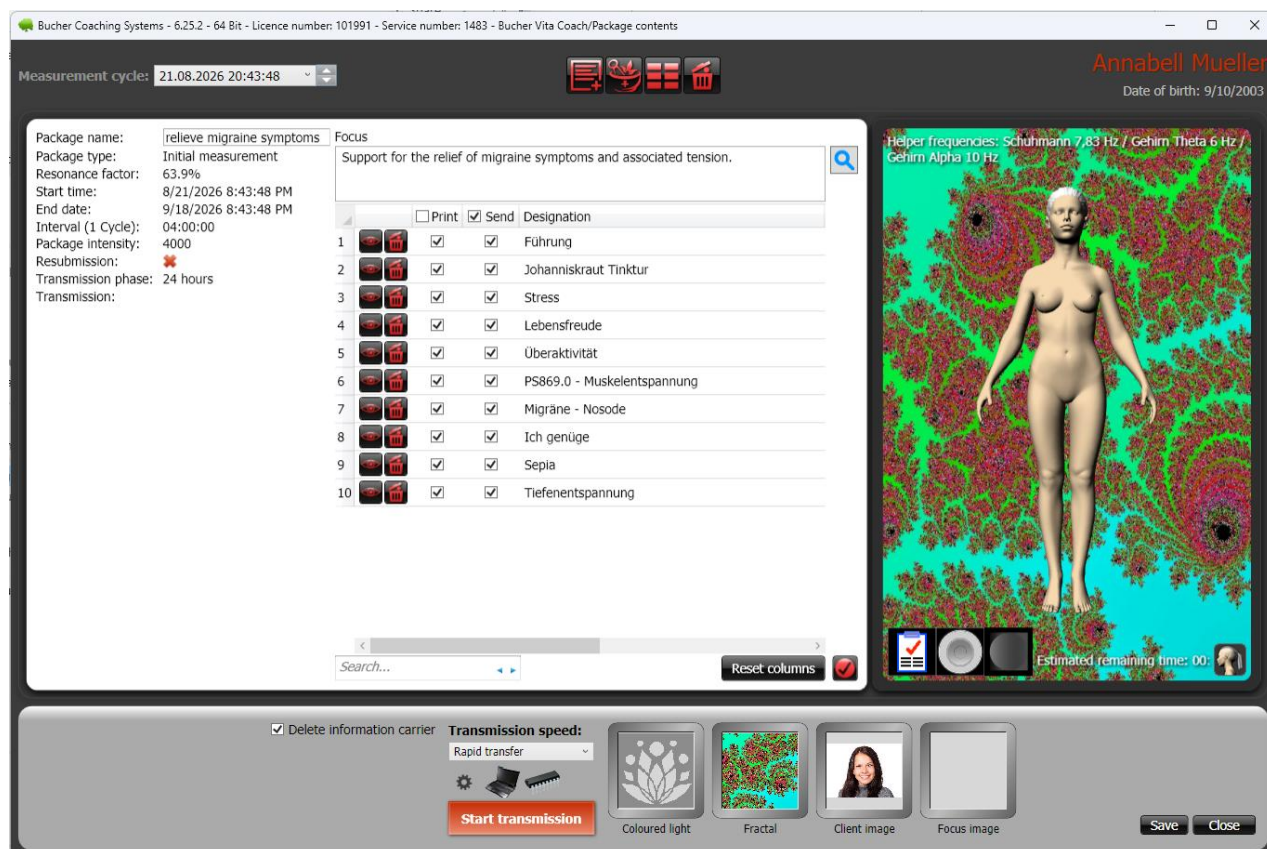

3.1.4.6 Errori comuni e soluzioni

Problema: il cliente si sente insicuro dopo aver visto una voce.

Soluzione: escludere dalla stampa, ma non dalla trasmissione, le voci delicate, compromettenti o spaventose. Affrontare questi temi con cautela durante il colloquio, anziché presentarli direttamente. Una voce che spaventa potrebbe riguardare il cliente solo indirettamente, attraverso un'altra persona.

Problema: il pacchetto contiene troppi temi e appare poco mirato.

Soluzione: individuare il filo conduttore, affrontare prima le voci con l'intensità più elevata e scegliere una profondità più adatta per le scansioni future. Impostare la profondità di scansione automatica per ottenere un numero adeguato di voci, né troppe né troppo poche.

Problema: Le voci sono incomprensibili per il cliente.

Soluzione: Verificare se queste voci non siano relative al cliente personalmente, ma piuttosto al suo contesto. Lasciare per il momento le voci per le quali non è possibile stabilire un collegamento. La pertinenza spesso emerge in seguito. L'attenzione deve rimanere sui punti chiave chiari.

3.1.4.7 FAQ

Qual è il parametro più importante per stabilire le priorità?

L'intensità è un punto di partenza pragmatico. Fondamentalmente, ciò che conta è la combinazione di intensità, dialogo e chiarezza di intenti. In definitiva, le risposte del cliente durante il dialogo di valutazione determinano quali argomenti potrebbero scatenare i sintomi.

Bisogna discutere di tutto nel pacchetto?

No. Iniziate con le voci più rilevanti (in particolare quelle di maggiore intensità e qualsiasi possibile collegamento con i problemi del cliente) e procedete passo dopo passo.

Posso stampare tutto?

Tecnicamente sì. Tuttavia, è consigliabile selezionare le informazioni più rilevanti per garantire che la stampa sia utile e non causi inutili ansie. Se possibile, escludere dalla stampa le seguenti voci:

- Voci che incutono timore (ad esempio, una malattia grave)
- Voci compromettenti (ad esempio, a causa di una potenziale perdita di reputazione)
- Voci che ti mettono in una posizione difficile da spiegare (ad esempio, metodi che dovresti poi spiegare)

Tuttavia, queste 3 restrizioni vengono meno nel momento in cui l'argomento entra a far parte della terapia, ad esempio perché è il paziente stesso ad averlo sollevato.

3.1.5 Pianificazione dei pacchetti di coaching e dei programmi delle sessioni

3.1.5.1 Panoramica

In questa fase, si pianifica l'utilizzo del pacchetto selezionato per un periodo di tempo definito. Si determina **quando** e **per quanto tempo** inizierà la trasmissione, **la frequenza con cui** le informazioni verranno ripetute e l' **intensità della trasmissione**. Inoltre, si documenta l'obiettivo nel **testo introduttivo** e si monitora sistematicamente l'andamento attraverso le scansioni **iniziali** e **successive**.

3.1.5.2 Prerequisiti

- È stato selezionato un cliente.
- È disponibile il risultato di una scansione, un pacchetto creato manualmente o un pacchetto importato.
- Hai già valutato e assegnato priorità ai contenuti (vedi i passaggi precedenti).

3.1.5.3 Parametri del pacchetto per la pianificazione

I seguenti parametri controllano la "pianificazione di invio" del pacchetto:

parametro	Significato
Nome del pacchetto	Etichettatura chiara, ideale per il tracciamento e il recupero.
Tipo di pacchetto	Scansione iniziale o scansione di controllo
fattore di risonanza	Valore indicativo dell'atmosfera generale del pacchetto
Ora di inizio	A partire dal momento in cui la trasmissione dovrebbe entrare in vigore
Data di fine	Fino a quando la trasmissione deve avere effetto
intervallo	Intervallo di ripetizione di un ciclo completo
Intensità del pacchetto	Forza di trasmissione
Promemoria di rinnovo	Promemoria per prorogare successivamente il pacchetto

parametro	Significato
Fase di trasmissione	Ad esempio, tutto il giorno, solo durante il giorno o solo di notte.
Trasmissione	Momento in cui è stato trasmesso il pacchetto

Nota:

in «Impostazioni», alla voce «Broadcast», puoi scegliere valori predefiniti per la durata dell'effetto, l'intensità del pacchetto e altri parametri. La durata della trasmissione indica il periodo di efficacia energetica successivo al trasferimento immediato ed è impostata su quattro settimane. Modifica questi valori solo in casi eccezionali motivati e documenta le variazioni.

3.1.5.4 Istruzioni dettagliate

A) Assegna un nome al pacchetto e imposta una pianificazione

1. Apri la sezione "Invia/Report".

Risultato: visualizzerai l'elenco dei pacchetti del cliente attualmente selezionato.

2. Apri la "Finestra di invio" nella riga del pacchetto desiderato.



Risultato: puoi controllare i dettagli del pacchetto e impostare le opzioni di trasmissione.

3. Assegna un nome univoco al pacchetto utilizzando "Nome pacchetto" (in alto a sinistra della finestra).

In questo modo, il pacchetto sarà facilmente identificabile in seguito. Consiglio pratico: utilizza l'argomento principale del cliente per la descrizione (ad esempio, risolvere l'emicrania / acquisire fiducia in se stessi / trovare un partner, ecc.).

Nota:

Le date di inizio e fine, l'intervallo e l'intensità dei pacchetti vengono impostati automaticamente in base alle tue preferenze. Modifica queste impostazioni solo in casi eccezionali e giustificati. Puoi apportare tali modifiche per il pacchetto selezionato utilizzando l'icona a forma di ingranaggio nella parte inferiore della finestra (Opzioni di invio). Da lì, puoi anche estendere il periodo di validità di un pacchetto scaduto.



B) Documentare il testo di destinazione (focus)

1. Apri la finestra "Contenuto del pacchetto".

Risultato: vedrai il contenuto del pacchetto e i campi di testo.

2. Inserisci l'obiettivo nel campo "Obiettivo". Formula l'obiettivo in modo chiaro, specifico e comprensibile per il cliente.

Risultato: l'obiettivo viene documentato insieme al pacchetto e viene trasferito anche nel campo del destinatario (il tuo cliente) durante la trasmissione.

3. Se il testo è lungo, apri la finestra di input più grande utilizzando l'icona della lente d'ingrandimento a destra del campo di selezione.

Risultato: potrai inserire e controllare chiaramente testi di destinazione più lunghi.

Suggerimento pratico:

formulate il testo introduttivo in modo che il cliente possa utilizzarlo nella vita di tutti i giorni (breve, concreto, con un orientamento positivo). Il cliente potrà usare il focus come guida per "la propria vita" durante il periodo di terapia.

C) Strutturazione e controllo dell'andamento della sessione (scansione iniziale e scansioni di follow-up)

1. Nella finestra "Scansione", utilizzare il pulsante "Scansione di follow-up" per verificare, per le scansioni iniziali selezionate, se e in che misura le condizioni e i problemi riscontrati sul campo dal cliente sono migliorati/cambiati.
2. È possibile eseguire scansioni di follow-up in qualsiasi momento, anche immediatamente dopo la scansione iniziale (la prima scansione). Una scansione di follow-up non cerca nuovi argomenti. Il programma utilizza invece tutte le voci della scansione iniziale per ricalcolare l'intensità. Queste voci, inclusa la nuova intensità, vengono quindi scritte nel pacchetto di follow-up. Il risultato: i progressi sono tracciabili ed è possibile reagire agli sviluppi secondo necessità.
3. Le scansioni iniziali sono identificate da un singolo triangolo sulla linea del pacchetto. Le scansioni successive sono identificate da tre triangoli sulla linea del pacchetto.

		Date of scan	package name
1		2/1/2026 10:51:07 PM	Check Up (1)
2		2/1/2026 10:20:16 PM	Check Up

D) Utilizzare la procedura di promemoria di rinnovo (estendere i pacchetti)

1. Per i pacchetti che devono proseguire, attiva l'opzione «Promemoria di rinnovo». Puoi modificare questa impostazione nelle opzioni di invio (tramite l'icona a forma di ingranaggio). Risultato: il pacchetto viene contrassegnato come idoneo al rinnovo.
2. Nell'elenco dei pacchetti, presta attenzione all'indicatore di rinnovo. Se per un determinato cliente sono presenti uno o più pacchetti che desideri rinnovare anziché lasciarli scadere, il simbolo corrispondente apparirà in giallo non appena sarà trascorsa la data di scadenza del pacchetto.



Risultato: è possibile capire quando i pacchetti devono essere rinnovati o prorogati.

3. Estendete questi pacchetti (anche più pacchetti contemporaneamente) utilizzando l'apposita funzione nell'elenco dei pacchetti (indicata dall'icona gialla nel grafico sopra). Tutti i pacchetti verranno estesi esattamente della durata che già hanno.
Risultato: l'esecuzione e la pianificazione proseguono senza interruzioni.

E) Facoltativo: Personalizza il pacchetto (dopo averlo copiato o creato manualmente)

1. Se hai creato un pacchetto manualmente o lo hai importato da un archivio, verifica i parametri del pacchetto e i valori delle voci. Per i pacchetti provenienti da archivi o da gestori di pacchetti, l'intensità e la potenza di ogni voce vengono automaticamente riesaminate e aggiornate per il cliente corrente.
Questo impedisce l'utilizzo di "valori predefiniti" non adatti al cliente.
2. Ad esempio, con i pacchetti meno recenti, è possibile utilizzare la funzione per eseguire una nuova scansione o impostare i parametri (ad esempio, intensità, intensità dei pacchetti, intervallo).
Risultato: il pacchetto viene personalizzato.



Nota:

Questa personalizzazione è particolarmente utile se un pacchetto non proviene direttamente da una scansione recente.

Utilizzare la funzione di ricerca nell'elenco dei pacchetti (in basso a sinistra) per trovare un pacchetto su un argomento specifico quando sono presenti molti pacchetti. Un nome di pacchetto coerente è essenziale per una cronologia di sessione pulita. Un orario di inizio errato (ad esempio, nel futuro) farà sì che l'effetto pianificato inizi più tardi del previsto. Normalmente, il sistema imposta la data di inizio all'ora immediatamente successiva alla scansione.

3.1.5.5 Errori comuni e soluzioni

Problema: Il pacchetto non funziona.

Soluzione: Verificare l'ora di inizio, la data di fine e se la trasmissione è stata effettivamente inviata. Ci sono ostacoli che ne impediscono l'efficacia? Questi potrebbero includere la fiducia nel tuo lavoro, la mancanza di motivazione del cliente a risolvere il problema o il fatto che il cliente tragga beneficio dal suo problema o dalla sua malattia. Tali fattori possono sabotare l'autoguarigione e la risoluzione del problema.

Problema: Il pacchetto viene visualizzato come completato anche se il problema del cliente non è ancora stato completamente risolto.

Soluzione: Verificare la "Data di fine". Se necessario, estendere la durata del pacchetto (icona a forma di ingranaggio nella finestra di invio).

3.1.5.6 FAQ

Devo sempre scrivere un testo di riferimento?

Consigliato. Documenta l'obiettivo. Molte persone sanno esattamente cosa **non** vogliono, ma non hanno mai considerato cosa vogliono. È proprio su questo che dovete lavorare insieme al cliente, da riportare nel testo di riferimento e dargli gli strumenti per raggiungerlo.


Quando è opportuno eseguire scansioni di follow-up?

Quando si desidera monitorare i progressi e apportare modifiche in modo strutturato.

Qual è lo scopo della promemoria di rinnovo?

Consente di identificare e prorogare i pacchetti che devono proseguire entro i termini previsti.

3.1.6 Stampa il pacchetto/i risultati o salvati come PDF

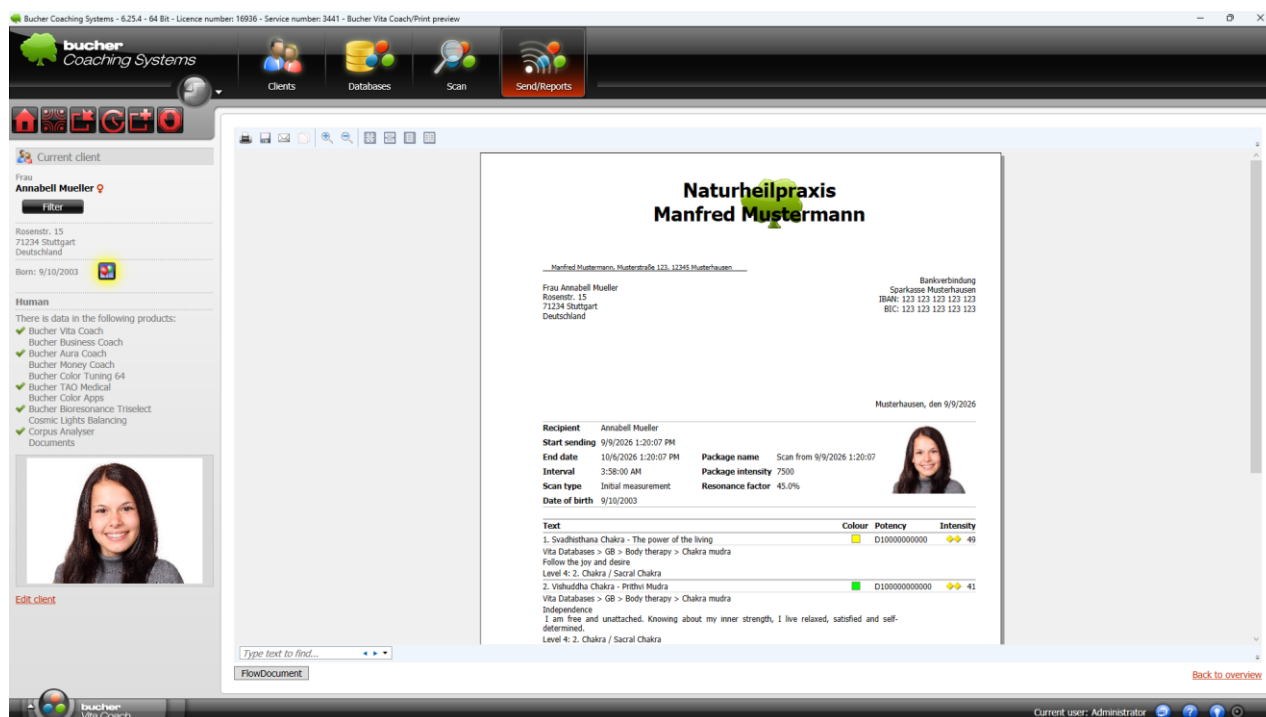

Anteprima di stampa di un pacchetto

1. Aprire "Invia/Report" e individuare il pacchetto desiderato nell'elenco. Avviare la funzione di stampa facendo clic sull'icona della lente d'ingrandimento nella riga del pacchetto.

Nella finestra "Selezione di stampa", selezionare il profilo di report "Stampa per il paziente" o "Stampa per il terapeuta". Quindi, attivare il contenuto del report che si desidera includere in questo profilo.

Fare clic sul pulsante "Salva come predefinito" per salvare la selezione corrente del contenuto per il profilo scelto. Questa selezione verrà utilizzata la prossima volta che si apre la selezione di stampa. Pertanto, verificare quale dei due profili è attivo prima di ogni lavoro di stampa.

Fare clic su "Avanti" per aprire l'anteprima di stampa. Risultato: si apre l'output di stampa o l'anteprima di stampa.

2. Seleziona uno dei simboli nell'anteprima di stampa qui sopra:



- Per stampare
, seleziona una stampante e accendila.
- Salva come PDF.
In questo modo il report non verrà stampato, ma salvato come file PDF.
- Invio tramite e-mail.
Questa funzione è disponibile solo se nelle impostazioni hai definito un account e-mail per l'invio.

Nota:

L'anteprima di stampa non può essere visualizzata se non è selezionata alcuna stampante in Windows. In tal caso, vai a Impostazioni di Windows / Bluetooth e dispositivi / Stampanti e scanner. Seleziona la tua stampante come dispositivo predefinito. Se ciò non fosse possibile, potrebbe essere necessario disabilitare l'opzione "Consenti a Windows di gestire la stampante predefinita". Se non hai una stampante installata, utilizza la stampante virtuale "Microsoft Print to PDF". L'anteprima di stampa può essere utilizzata anche con questa.

3.1.7 Trasferimento dei pacchetti al campo informazioni

3.1.7.1 Panoramica

In questo capitolo, trasferirete un pacchetto completo nel campo delle informazioni del cliente. Definirete le opzioni di trasmissione, in particolare la velocità di trasmissione. Avvierete e interromperete le trasmissioni in modo controllato.

3.1.7.2 Scopo

L'avvio di una trasmissione invia le informazioni del pacchetto selezionato insieme alle informazioni del destinatario. La trasmissione può essere programmata, ad esempio, in base alla sua durata, con un'ora di inizio, una data di fine, un intervallo e una fase di trasmissione.


3.1.7.3 Prerequisiti

- Il cliente desiderato è stato selezionato.
- È presente almeno un pacchetto (risultato della scansione o pacchetto creato manualmente).
- Sai se il cliente è presente o meno (importante per la velocità di trasmissione).
- Opzionale: è disponibile un supporto informativo (ad esempio, globuli, tessera magnetica, pietra curativa) nel caso in cui si desideri creare un supporto informativo in parallelo.

3.1.7.4 Istruzioni dettagliate

1. Apri la finestra "Invia/Report".

Risultato: visualizzerai l'elenco dei pacchetti del cliente attualmente selezionato.

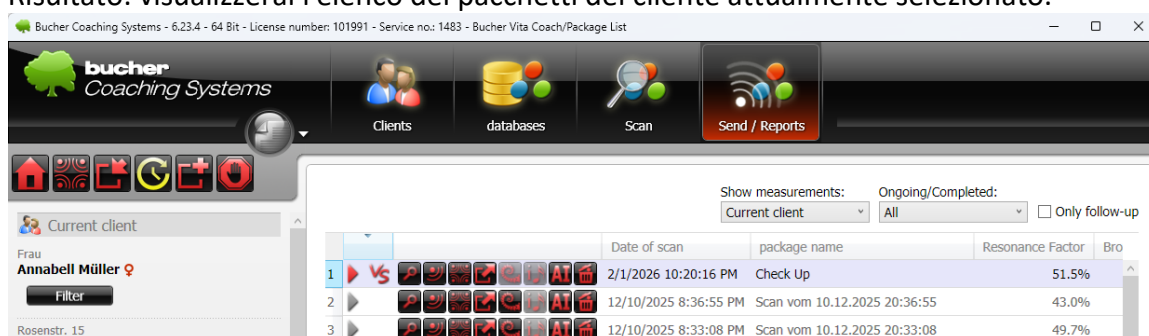

2. Seleziona il pacchetto che desideri trasferire dall'elenco e fai clic sull'icona "Invia" nella riga corrispondente.



Risultato: si aprirà la finestra di invio.

3. Regolate la velocità di trasmissione in base alla situazione. Il tempo visualizzato sul lato destro della finestra indica la durata stimata del processo di trasmissione immediatamente visibile, non il tempo di trasmissione successivo.
 - Il cliente è presente: di norma, scegliete un'impostazione **media** o **lenta**, oppure una in cui il processo di trasmissione duri almeno due minuti. Ciò consente al cliente di partecipare consapevolmente all'applicazione.
 - Se il cliente non è presente o si sta preparando un supporto informativo, **il Rapid Transfer è l'opzione preferibile. "Veloce"** è un'alternativa se il tempo a disposizione per la trasmissione è limitato.
 - Indipendentemente dalla velocità di trasmissione selezionata, la durata della trasmissione successiva è di quattro settimane per impostazione predefinita. Le opzioni Rapid Transfer, Veloce, Media o Lenta modificano solo la durata del processo di trasmissione corrente, non la durata dell'effetto energetico successivo.
 - Una trasmissione più lenta non è necessariamente più potente o di qualità migliore. Scegli la velocità in base alla presenza del cliente e alla procedura desiderata; verifica separatamente la durata, l'intensità, l'intervallo e le altre opzioni di trasmissione.
4. Verificare ulteriori parametri di trasmissione (impostazioni di trasmissione/hardware di trasmissione) se necessario.

Risultato: il programma di trasmissione è adatto alle procedure del vostro studio. I parametri tipici includono: ora di inizio, data di fine, intervallo, fase di trasmissione e intensità.
5. Avvia la trasmissione utilizzando il pulsante "Avvia trasmissione".

Risultato: la trasmissione viene avviata e prosegue secondo i parametri impostati.

Nota:

Se si crea un supporto informativo aggiuntivo durante l'invio, il sistema utilizza in parallelo le opzioni hardware disponibili. Per motivi di sicurezza, il supporto informativo viene cancellato prima della trasmissione e poi ricreato successivamente.

3.1.7.5 Visualizzazione durante la trasmissione

A seconda della versione e della licenza, è possibile selezionare diverse opzioni di visualizzazione per la trasmissione all'interno del contenuto del pacchetto:

Elenco dei risultati: le risposte selezionate rimangono visibili. Utilizzare questa visualizzazione solo se il cliente può vedere lo schermo, dovrebbe vedere i termini e se questi sono stati precedentemente categorizzati.

Luce virtuale a colori: l'elenco dei risultati viene sovrapposto a una visualizzazione a colori. Questa visualizzazione impedisce al cliente di leggere termini sensibili durante la trasmissione.

Immagine del cliente: l'immagine salvata dal cliente viene combinata con l'immagine visualizzata. Utilizzare questa opzione solo se è stato ottenuto il consenso al trattamento dell'immagine.



Nota:

Le modalità di visualizzazione attive sono evidenziate a colori; le icone inattive appaiono spesso in grigio. Prima di iniziare, verificare che il cliente possa vedere lo schermo e quale modalità di visualizzazione sia appropriata.

3.1.7.6 Verificare le opzioni di trasmissione e i supporti informativi

Apri le opzioni di trasmissione tramite l'icona a forma di ingranaggio nella finestra di trasmissione. A sinistra vengono visualizzati i componenti hardware e i metodi di trasmissione disponibili. A destra, a seconda della versione, è possibile impostare la durata della trasmissione, l'intervallo, le pause, i giorni della settimana, l'ora del giorno e l'intensità dei pacchetti.

Le modifiche alle opzioni di invio sono possibili solo durante la scansione iniziale. L'invio di scansioni successive è inutile. Inviare sempre la scansione iniziale. Se il cliente torna in seguito, è comunque possibile inviare la scansione iniziale anche se sono già in sospeso scansioni successive. Pertanto, prima di iniziare, verificare di aver aperto il pacchetto corretto nel ciclo di scansione, indicato da un simbolo a forma di triangolo.

Se si utilizza contemporaneamente un supporto informativo, selezionare l'opzione per cancellare preventivamente il supporto. Assicurarsi che il supporto corretto sia inserito o collegato e che non vengano sovrascritti dati indesiderati.

Il tempo rimanente stimato visualizzato (in basso a destra della finestra di trasmissione) aiuta a selezionare la velocità di trasmissione. Regolare la durata in base al processo organizzativo; questa impostazione non sostituisce una revisione professionale dei parametri del pacchetto.

priority	Definition	Hardware ID	method	Switching threshold	0-sequence
2	Computer	Computer	☒ Quantum Resonance ☐ acoustics (WN)		
3	Remedy Pyramid	RemedyPyramid	☒ Direct transfer		
5	Corpus Analyser	23230399	☒ Colour light ☐ Hand Applicators	5	2

Broadcast options

☒ Broadcast
The broadcast list only possible with initial scans.
Changes to the send options can only be made in the initial measurement.

Interval: 4:00:00 AM Interval duration: 230 m Interval pause: 10 m

Duration of action
☐ Unlimited
☒ 10/2/2024 5:12 PM

Broadcast according to weekdays
☒ Mon ☒ Tue ☒ Wed ☒ Thu ☒ Fri ☒ Sat ☒ Su

Without phase (Broadcast according to day time)
☒ 24 hours per day
☐ 12:00 AM - 12:00 AM

Extend package

3.1.7.7 Sensore CA e supporto informativo nella pratica

Selezione hardware durante l'invio

Nella versione del programma descritta, non è richiesta alcuna selezione aggiuntiva di singoli componenti hardware. L'hardware radionico collegato viene automaticamente preso in considerazione all'avvio della trasmissione. Termini come "risonanza quantistica" o "trasmissione diretta" si riferiscono ai metodi di trasmissione del computer e non a dispositivi aggiuntivi.

Allinea il sensore CA

Durante la manipolazione di un campione o di un supporto informativo, il sensore CA rimane collegato tramite USB e posizionato nell'apposito alloggiamento. La luce è rivolta verso il supporto in vetro o magnetico per schede; il cavo è rivolto nella direzione opposta.

Preparare i supporti informativi con Rapid Transfer

A seconda del metodo, come supporti informativi si possono utilizzare carte magnetiche, monete, rimedi omeopatici o pietre curative. Posizionare piccoli oggetti nel bicchiere; una carta magnetica va inserita nell'apposito supporto. Posizionare il bicchiere o il supporto in modo che la luce del sensore sia diretta verso di esso, quindi avviare "Rapid Transfer". Non è necessaria alcuna ulteriore selezione del supporto nel programma.

Di solito, una singola carta magnetica è sufficiente per una singola applicazione. È opportuno utilizzare più carte contemporaneamente solo se sono destinate alla stessa trasmissione.

Ordine con cliente presente

Se il cliente è presente, eseguire prima la trasmissione diretta; il cliente tiene in mano il sensore CA. Se è necessario preparare un ulteriore supporto informativo, posizionarlo successivamente davanti al sensore e avviare una trasmissione separata utilizzando "Rapid Transfer". Se il cliente non è presente, la trasmissione diretta viene omessa.

Spiega il processo in modo trasparente

Prima di iniziare, spiegate i passaggi che intraprenderete e lo scopo del bicchiere, del sensore o del porta carte magnetico nel modello di lavoro energetico. Non presentate il processo come una procedura medicalmente comprovata e concedete al cliente il tempo necessario per porre domande e dare il proprio consenso.

3.1.7.8 Errori comuni e soluzioni

Cliente selezionato errato.

Soluzione: prima di avviare la trasmissione, verificare il nome del "cliente corrente" nella finestra.

La trasmissione è "troppo veloce" durante l'appuntamento in loco.

Soluzione: regolare la velocità in modo che la trasmissione duri almeno 2 minuti, preferibilmente di più.

3.1.7.9 FAQ

Una trasmissione durante un appuntamento in presenza deve durare diversi minuti?

Non necessariamente. Nella pratica è spesso utile, perché i clienti desiderano percepire consapevolmente la trasmissione.

Quando dovrei usare "Rapid Transfer"?

Quando il cliente non è fisicamente presente e la sessione non è pensata come un'esperienza "a schermo". In questo caso, è più utile far sì che la sessione si svolga il più rapidamente possibile per evitare di generare tempo di visualizzazione non necessario.

Posso annullare una trasmissione?

Sì. Termina le trasmissioni in corso utilizzando l'apposito pulsante "Fine" nella finestra "Invia/Report".

3.1.8 Trasmissione collettiva

3.1.8.1 Panoramica

La trasmissione collettiva è una funzione che permette di rendere disponibile un pacchetto in modo che possa essere inviato da più utenti del sistema BCS nella rete Bucher.

Un principio fondamentale del lavoro con il sistema è l'intenzione deliberata del terapeuta di supportare il cliente nella risoluzione del suo problema, ad esempio attivando l'autoregolazione. Il problema e l'obiettivo desiderato spesso emergono chiaramente solo nel corso del percorso terapeutico. Vengono registrati per iscritto all'interno del sistema, ad esempio nel campo "Obiettivo".

In alcune situazioni, i terapeuti sentono un livello di responsabilità particolarmente elevato nel raggiungere questo obiettivo, ad esempio nei casi più gravi, con i bambini o quando si tratta di conoscenti e parenti. In questi contesti, la trasmissione collettiva può contribuire a distribuire la responsabilità tra più terapeuti. Allo stesso tempo, l'intento condiviso di raggiungere l'obiettivo viene rafforzato e consolidato. Ogni terapeuta partecipante apporta il proprio punto di vista specifico sulla soluzione. La trasmissione collettiva consente quindi un supporto collaborativo senza la condivisione di dati personali dei pazienti con altri professionisti.

3.1.8.2 Scopo

- Rafforzamento dell'intento comune della trasmissione grazie a numerosi utenti che sostengono lo stesso obiettivo.
- Condivisione nel rispetto della protezione dei dati: i dati del cliente, gli obiettivi, le voci e la pianificazione delle trasmissioni vengono incorporati come «rumore bianco» in un file MP3 riproducibile. I contenuti non sono leggibili dagli utenti e non possono essere estratti dal file MP3 in chiaro.
- Scambio energetico tramite un sistema di crediti: per caricare i tuoi pacchetti, trasmetti prima pacchetti di altri utenti. Ogni 50 trasmissioni effettuate per altri terapeuti ricevi un punto di credito. Queste trasmissioni sono automatizzate, quindi l'impegno personale richiesto per 50 trasmissioni è di circa 1–2 minuti.

3.1.8.3 Prerequisiti

- Utilizzi un prodotto che supporta la trasmissione collettiva.
- Connessione a Internet (per caricare e scaricare automaticamente altri pacchetti dal server Bucher).
- Un pacchetto completamente pianificato con una data di fine definita.

Importante: la breve descrizione che inserisci per un pacchetto in una trasmissione collettiva non deve contenere dati personali.

3.1.8.4 Caricare il pacchetto per la trasmissione collettiva

1. Individua il pacchetto per il cliente desiderato nell'elenco dei pacchetti e fai clic sull'icona di trasmissione collettiva.



Risultato: si apre la finestra di trasmissione collettiva.

2. Verifica di avere almeno UN punto credito per aggiungere questo pacchetto al collettivo.
3. Crea una breve descrizione che delinei il problema o l'obiettivo utilizzando parole chiave, senza menzionare i dati del cliente, ad esempio: "Risolvere l'emicrania", "Trovare un partner per la vita" o "Trovare un nuovo lavoro appagante".
Risultato: gli altri utenti possono comprendere a grandi linee il contenuto senza ricevere informazioni personali e, inviando questo pacchetto sotto forma di file MP3, intendono contribuire a realizzare questo obiettivo.

4. Conferma le seguenti due caselle di opzione:
 - Acconsento alla pubblicazione della breve descrizione riportata di seguito.

- Il testo della breve descrizione non contiene contenuti proibiti.

Transfer your own information to the collective broadcast

Information for the collective broadcast
The measurement of 2/1/2026 10:20:16 PM has not been uploaded for collective broadcast yet.
Upload the measurement of 2/1/2026 10:20:16 PM for collective broadcast now.

Confirmation required before broadcasting
☒ I agree with the publication of the short description below.
☒ The summary text does not contain any unauthorized contents.

sender details
☒ Publish my name as owner
sender name: Wolfgang Bucher visible for everybody
E-mail sender address: huch@huchilo.eu not visible
☐ Provide personal information anonymously

Credit for uploading your own information
22

Name of the client (will not be published):
Annabell Müller

Brief description of the information (visible to all):
Relief from migraines. Relief from workplace stress.

Upload your own information for the collective beoadcast Cancel

5. Clicca su "Carica le tue informazioni per la trasmissione collettiva".
Risultato: il sistema genera un file MP3 (rumore bianco) e lo carica, insieme a una breve descrizione, sul server BCS.

3.1.8.5 Accumula credito per poter caricare i tuoi pacchetti

1. Avvia il programma di trasmissione collettiva. (icona di trasmissione collettiva più grande a sinistra)
Risultato: il programma seleziona i pacchetti di altri utenti e ne visualizza le brevi descrizioni in una tabella.
2. Leggete attentamente le brevi descrizioni. Questa è l'operazione che richiede più tempo e dura circa due minuti. Mentre leggete, ricordate che anche voi desiderate raggiungere l'obiettivo prefissato.
Risultato: integrate consapevolmente la vostra intenzione nel processo.
3. In fondo all'elenco, fare clic consapevolmente sul pulsante rosso «Desidero trasmettere tutte le informazioni con l'intento che gli obiettivi desiderati diventino realtà».
Risultato: il programma carica le trasmissioni e le esegue automaticamente. Mentre il computer trasmette, è possibile dedicarsi ad altre attività.

4. Controlla il tuo saldo.

Risultato: dopo ogni 50 pacchetti inviati, il tuo saldo per caricare i tuoi pacchetti aumenterà di 1 punto.

Collective broadcast - Version: 6.25.0.0

Other therapists' broadcasts | **My own broadcasts**

Please start the collective broadcast by clicking the button below the chart

	therapist	group	Registered on	Sent	Brief description
41	Anonym	Bucher Vita Coach	2026-02-25 06:56:02	921	NNNEVECES - 7778777812 Ich bin der Lic... Ich bin das silberne Licht der Lebensfreud... Ich bin das goldene Licht der Lebensfreu... Ich bin das Licht meiner Selbst. Ich bin der/die ich bin, aus der Quelle des... Ich bin im manifestierten Körper der Lebe... Ich lebe in einem glücklichen Menschenfl... Danke zum Wohle aller Beteiligte -Wir und Gilbert O.-R. Bäcksteiner, www.k... Alles, was wir tun, wird auf die positivste...
42	Anonym	Bucher Business Coach	2026-02-26 09:23:55	923	Ich übernehme volle Verantwortung für al... Danke zum wohle aller Beteiligten
43	Anonym	Corpus Analyser	2026-02-25 08:40:25	950	
44	Anonym	Bucher Vita Coach	2026-02-19 20:45:36	987	Alles was mich glücklich macht, kommt i...
45	Gerhard Hämmerle	Bucher Business Coach	2026-02-01 17:50:56	1009	
46	Anonym	Bucher Vita Coach	2026-01-30 07:21:57	1045	Ich bin im Mutkreis der Erde geboren – v...
47	Helena Schmidiger	Bucher Aura Coach	2026-01-18 19:04:06	1122	Heilung auf allen Ebenen. Danke
48	Spielmann	Bucher Vita Coach	2025-12-30 14:29:15	1187	Perfekte Heilung aktivieren jetzt
49	Anonym	Bucher Vita Coach	2025-12-14 10:18:25	1233	GESUNDHEITSACHEK NACH bURN OUT
50	POWER MIND COACHING Spielmann	Bucher Vita Coach	2025-03-31 12:28:37	2374	Zahn- und Kieferheilung geschieht jetzt

I would like to send all the information and I intend to make the desired goals become reality.

Progress of all broadcasts: 0%

Cancel

Trasmissione di gruppo con elenco dei pacchetti e pulsante di avvio

Nota:

Mentre il programma è in esecuzione per gli altri terapeuti e i loro pazienti, non devi per forza stare seduto davanti al computer. Puoi fare altre cose.

I file MP3 di altri utenti, dopo essere stati scaricati e riprodotti, vengono eliminati per non occupare inutilmente spazio sul disco rigido.

Durante la riproduzione, il programma è udibile come un debole "rumore bianco". Se lo si desidera, è possibile abbassare il volume a 0. Non è necessario sentire il rumore per farlo.

Un pacchetto caricato rimarrà nel sistema collettivo solo fino alla data di scadenza da te specificata. Trascorso tale periodo, verrà rimosso e riceverai un'e-mail con il numero di trasmissioni effettuate.

Anche l'intensità desiderata dell'effetto viene trasmessa. Tuttavia, in questo concetto, non è l'intensità dell'effetto ad essere amplificata, bensì il desiderio condiviso da tutti i terapeuti partecipanti di raggiungere l'obiettivo. Pertanto, il cliente non riceve un "sovradosaggio" di questo trattamento, ma può risolvere o aggirare più facilmente i blocchi esistenti che impediscono il raggiungimento dell'obiettivo, poiché riceve l'energia necessaria da più terapeuti.

Importante

Non includere mai nomi, indirizzi, date di nascita o altre informazioni identificative nella breve descrizione di una trasmissione collettiva.

[Screenshot: Programma di trasmissione collettiva con elenco dei pacchetti e pulsante rosso di avvio. Scopo: "leggere brevi descrizioni" e iniziare l'invio.]

3.1.8.6 Errori comuni e soluzioni

Problema: credito insufficiente per caricare i propri pacchetti.

Soluzione: avviare il programma di trasmissione collettiva e trasmettere almeno 50 pacchetti di altri utenti per ottenere uno o più punti di credito.

3.1.8.7 FAQ

Quali dati vedono gli altri utenti?

Gli altri utenti vedono solo la tua breve descrizione e, a meno che tu non pubblichi in forma anonima, il tuo nome come terapeuta/coach. Se selezioni l'opzione "Rendi i dati disponibili in forma anonima", il tuo nome non verrà pubblicato. Il contenuto effettivo viene fornito come file MP3 (rumore bianco) e non è né leggibile né decifrabile dagli utenti.

Per quanto tempo un pacchetto rimane nel sistema collettivo?

Fino alla data di scadenza da te specificata. Dopodiché, il pacchetto viene rimosso.

Come si ottengono i punti di credito?


Per ogni 50 pacchetti di altri utenti che trasmetti, ricevi un punto di credito per caricare i tuoi pacchetti.

3.1.9 Esportazione dei pacchetti

1. Apri "Invia/Report" e fai clic sul pulsante Esporta per il pacchetto desiderato.



Risultato: le funzioni di esportazione e invio verranno visualizzate in un menu contestuale.

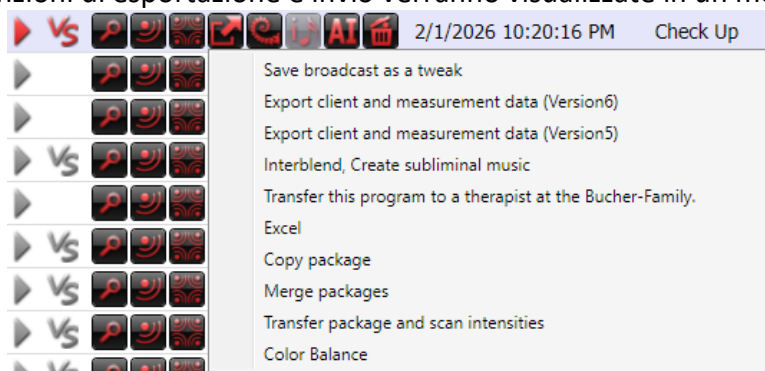

2. A seconda del tuo obiettivo, utilizza l'opzione più adatta da questo menu contestuale:
 - **Salva la trasmissione come Tweak (disponibile solo per le scansioni iniziali).**
Questa funzione è utile solo se utilizzi l'hardware per luce colorata TweakLite.
 - **Esportazione dei dati del cliente e della scansione (versione 6):**
i dati del pacchetto iniziale e di tutti i pacchetti successivi (se presenti) vengono esportati in un file ZIP. Questo file può quindi essere importato, ad esempio, su un altro computer utilizzando BCS. Vengono trasferiti i dati del cliente e l'intero ciclo del pacchetto (scansione iniziale più tutte le scansioni successive).

- **Interblend, Crea musica subliminale (disponibile solo per le scansioni iniziali)**
Questa funzione consente di incorporare le informazioni del pacchetto nella musica che il cliente potrà poi riprodurre autonomamente in viaggio o a casa.
- **Trasferisci questa trasmissione a un terapeuta della Famiglia Bucher (disponibile solo per le scansioni iniziali).**
La Famiglia Bucher è una funzionalità che consente agli utenti di condividere i pacchetti con altri utenti o con se stessi (se sono disponibili più licenze). Questa funzionalità è disabilitata per impostazione predefinita. Per entrare a far parte della Famiglia Bucher, si prega di contattare Bucher GmbH. Provvederemo quindi ad attivare la funzionalità gratuitamente.
- **Excel:**
Questa funzione consente di esportare i dati di un pacchetto in un file Excel (file CSV).
- **Copia pacchetto (disponibile solo per le scansioni iniziali)**
Questa funzione consente di copiare un pacchetto e quindi, ad esempio, di svilupparlo ulteriormente o modificarlo.
- **Unisci pacchetti (disponibile solo per le scansioni iniziali):**
questa funzione consente di copiare più pacchetti in un unico pacchetto. È utile quando i diversi pacchetti trattano lo stesso argomento. È quindi possibile eliminare i pacchetti originali, ottenendo una panoramica più chiara.
- **Trasferimento di pacchetti e intensità di scansione (disponibile solo per le scansioni iniziali):**
questa funzione consente di trasferire i pacchetti a un cliente diverso. Ad esempio, se si seleziona accidentalmente il cliente sbagliato ma non si desidera perdere il pacchetto. Un altro scenario potrebbe essere quello di aver creato un pacchetto "generico", aver constatato che funziona correttamente e volerlo poi utilizzare con un cliente diverso per lo stesso scopo. In questo caso, tutti i parametri delle voci vengono riesaminati e confrontati con il nuovo cliente.

Nota:

quando si condividono report o file esportati, potrebbero essere inclusi dati personali. Prima dell'invio, verificare se è richiesta l'anonimizzazione o un metodo di trasmissione sicuro. Fanno eccezione le trasmissioni collettive, che non contengono informazioni personali che altri potrebbero leggere.

3.1.10 Valutazione dei risultati della scansione mediante intelligenza artificiale

Le funzioni di intelligenza artificiale di questo modulo si basano sulle impostazioni generali e sui principi operativi dell'IA di BCS. Una descrizione dettagliata delle funzioni di IA, dei prompt personalizzati e della memorizzazione dei set di prompt sul server Bucher è disponibile nel Capitolo 4.1 "Valutazione con IA: lavorare con l'intelligenza artificiale in BCS".

3.1.11 Eliminazione dei pacchetti

Se un pacchetto non è più necessario, è possibile eliminarlo utilizzando l'icona "elimina" (si prega di farlo solo dopo un'attenta verifica).

Risultato: il pacchetto verrà rimosso.

Nota:

quando un cliente viene eliminato, vengono eliminati anche tutti i pacchetti associati. Se si utilizzano più prodotti di Bucher GmbH, come Bucher Vita Coach e Bucher Aura Coach, e si elimina un cliente in Bucher Vita Coach, verranno eliminate anche tutte le scansioni di Bucher Aura Coach.

3.1.11.1 Prerequisiti

- Hai accesso alle impostazioni nel BCS.
- Hai i permessi di scrittura per la destinazione del backup (cartella locale, unità di rete o dispositivo di archiviazione esterno).
- Per garantire la massima sicurezza, è disponibile una destinazione di backup che non si trova sullo stesso disco rigido dei dati BCS.

3.2 Bucher Aura Coach

3.2.1 Panoramica

Il Bucher Aura Coach è un prodotto che fa parte dei "Bucher Coaching Systems" (BCS). Il suo scopo è quello di registrare, valutare e presentare in modo sistematico le informazioni energetiche di un cliente e di utilizzarle per un ulteriore lavoro energetico.

L'attenzione si concentra sull'aura e sui chakra del cliente. Il programma aiuta gli utenti a visualizzare gli stati energetici, a identificare potenziali blocchi e a sviluppare un processo strutturato per la valutazione, l'armonizzazione e la documentazione.

Il Bucher Aura Coach è particolarmente indicato per gli utenti che lavorano regolarmente con stati energetici, chakra, livelli aurici e applicazioni di armonizzazione.

Scopo

Bucher Aura Coach supporta il lavoro con temi sottili ed energetici. Aiuta a:

- registrare in modo strutturato le informazioni energetiche di un cliente,
- visualizzare chiaramente le aree dell'aura e dei chakra,
- rendere visibili anomalie o blocchi energetici,
- preparare e attuare armonizzazioni,
- documentare i risultati,
- semplificare l'uso regolare con la modalità automatica,
- creare e inviare report ai clienti secondo necessità.

L'obiettivo è un metodo di lavoro chiaro, comprensibile e che consenta di risparmiare tempo nell'ambito del supporto energetico.

Classificazione all'interno del BCS

Il Bucher Aura Coach si avvale dei principi fondamentali dei sistemi di coaching Bucher. Questi includono, in particolare:

- il sistema centrale di gestione dei clienti,
- i dati cliente condivisi,
- backup dei dati,
- l'interfaccia utente,
- la modifica del prodotto all'interno di BCS,
- le funzioni di supporto e manutenzione remota.

Se un cliente è già stato inserito in BCS, non è necessario inserirlo nuovamente in Bucher Aura Coach FE. I dati dei clienti esistenti possono essere utilizzati in tutti i prodotti.

Principio fondamentale

Lavorare con Bucher Aura Coach FE segue sostanzialmente questo processo:

- Seleziona il cliente.
- Risultato: Il cliente corretto è attivo.
- Esegui una scansione con Aura Coach.
- Risultato: Il programma acquisisce le informazioni energetiche del cliente.
- Visualizzare e interpretare i risultati.
- Risultato: è possibile identificare e classificare le anomalie nell'aura e nelle aree dei chakra.

- Eseguire l'armonizzazione o la trasmissione.
- Risultato: Le informazioni selezionate vengono trasmesse energeticamente.
- Esaminare il rapporto o il verbale.
- Risultato: l'applicazione è documentata e può essere discussa con il cliente o inviata secondo necessità.

Ambiti di applicazione tipici

Il Bucher Aura Coach FE è particolarmente adatto alle seguenti applicazioni:

- valutazione energetica regolare,
- Lavorando con temi legati all'aura e ai chakra,
- Creazione di un'"immagine dell'aura",
- Identificazione dei blocchi energetici,
- Supporto durante i processi di cambiamento,
- Preparazione per una conversazione con il cliente,
- Monitoraggio dei progressi su più applicazioni,
- Supporto periodico automatizzato tramite la modalità automatica.

Il Bucher Aura Coach può essere utilizzato sia per applicazioni singole che per applicazioni ricorrenti.



Rappresentazione schematica dei sette chakra

3.2.2 Prerequisiti

Prima della prima scansione manuale dell'aura, è necessario verificare i seguenti punti:


- Il Bucher Aura Coach è un prodotto autorizzato e selezionato come prodotto attivo all'interno di BCS.
- È stato creato e selezionato il record del cliente o dell'oggetto corretto.
- Sono stati verificati il nome o la denominazione dell'oggetto, la data di nascita o la data di riferimento e le informazioni di contatto necessarie per la richiesta. A seconda del flusso di lavoro e della versione del programma, potrebbe essere richiesta l'aggiunta di una foto.
- Se si intende utilizzare hardware collegato, un campione o un supporto informativo, viene predisposto il flusso di lavoro BCS generale corrispondente. (Campione in vetro, vetro davanti al sensore CA, sensore CA inserito)
- Se i risultati della scansione devono essere inviati via e-mail, è necessario configurare le impostazioni di posta elettronica e ottenere il consenso del cliente.
- Le segnalazioni vengono trattate con la massima riservatezza e trasmesse esclusivamente tramite un canale di comunicazione appropriato e concordato.

3.2.3 Selezione dei clienti

Aprire il sistema di gestione clienti e selezionare il record desiderato. Prima di ogni scansione, verificare attentamente il nome, la data di nascita o la descrizione dell'oggetto e la categoria. Ciò eviterà che una scansione venga accidentalmente assegnata al record sbagliato.


3.2.4 Impostazioni di categoria per il cliente

Nella sezione di gestione clienti, fai clic sulla scheda "Impostazioni cliente".

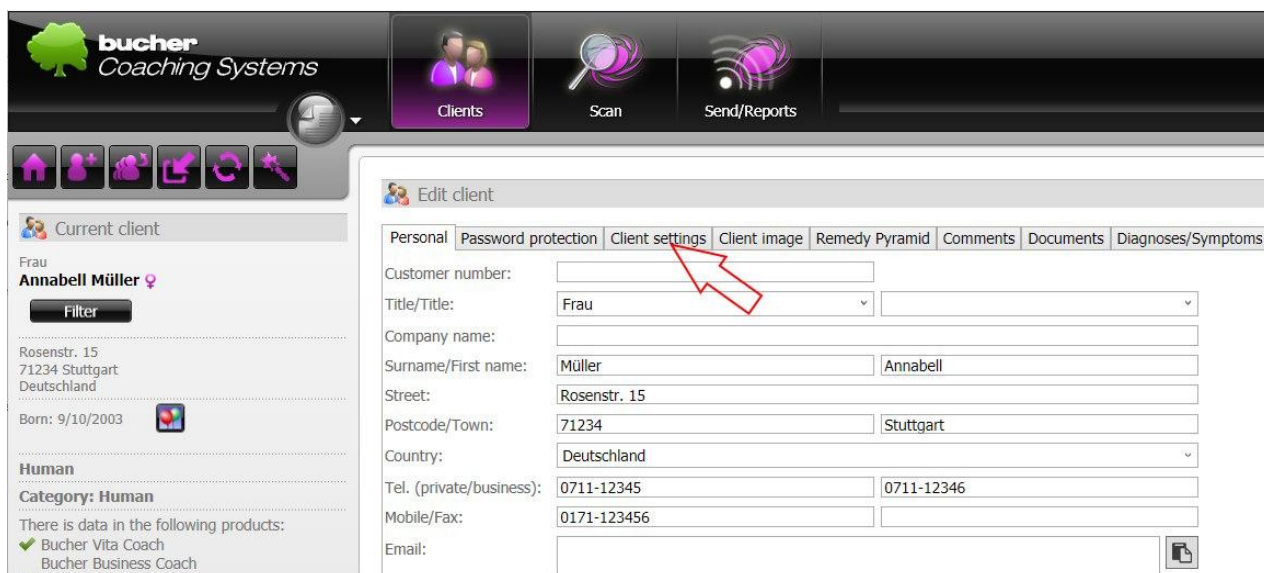

Modifica dei dati del cliente (3-3-3A)

Lì puoi, tra le altre cose, impostare la categoria per questo cliente.

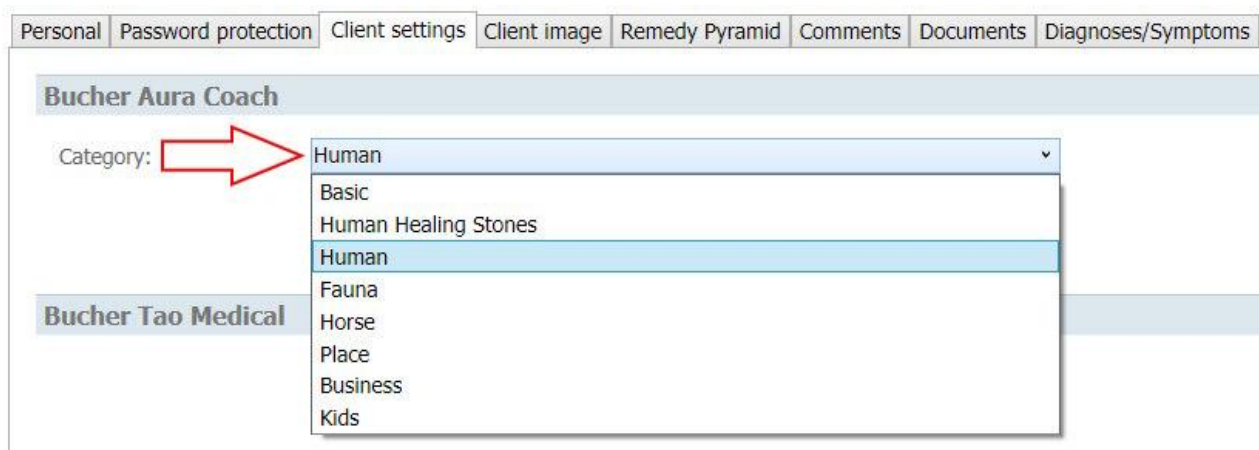

Selezione della categoria più adatta al cliente (3-3-3B)

La categoria determina con quali contenuti e associazioni il programma interagisce. Pertanto, seleziona solo la categoria che corrisponde al tuo caso d'uso effettivo e che è disponibile nella tua licenza attuale.

A seconda del cliente, scegliere una delle seguenti opzioni:

Persone

- Human (consigliato)
- Human Healing Stones (se lavori intensamente con le pietre curative)

- Kids (se si tratta di un bambino, cioè la persona non ha ancora raggiunto la pubertà)
- Basic (se non si dispone di una licenza per nessuna delle tre categorie sopra indicate)

Gli animali in generale (indipendentemente dalla specie)

- Fauna (consigliato, valido per tutti gli animali)
- Basic (se non si dispone della licenza per la categoria "Fauna")

cavalli

- Horse (consigliato)
- Fauna (se non hai ottenuto la licenza per la categoria "Horse")
- Basic (se non si dispone delle licenze per le categorie "Horse" e "Fauna")

Luoghi, edifici o appartamenti

- Place (consigliato)
- Basic (se non si dispone della licenza per la categoria "Place")

Per aziende o organizzazioni

- Business (consigliato)
- Basic (se non si dispone della licenza per la categoria "Business")

Per tutto il resto


- Basic (se si seleziona "Basic", la valutazione dettagliata viene omessa, ma vengono visualizzati tutti gli altri risultati)

3.2.5 Eseguire una scansione dell'aura

3.2.5.1 Avviare una scansione manuale dell'aura

Passaggio 1: Verificare che Bucher Aura Coach e il cliente corretto siano attivi.

Passaggio 2: Aprire la sezione "Scansione". A seconda della versione del programma, verranno visualizzati i percorsi di scansione disponibili o i componenti collegati.

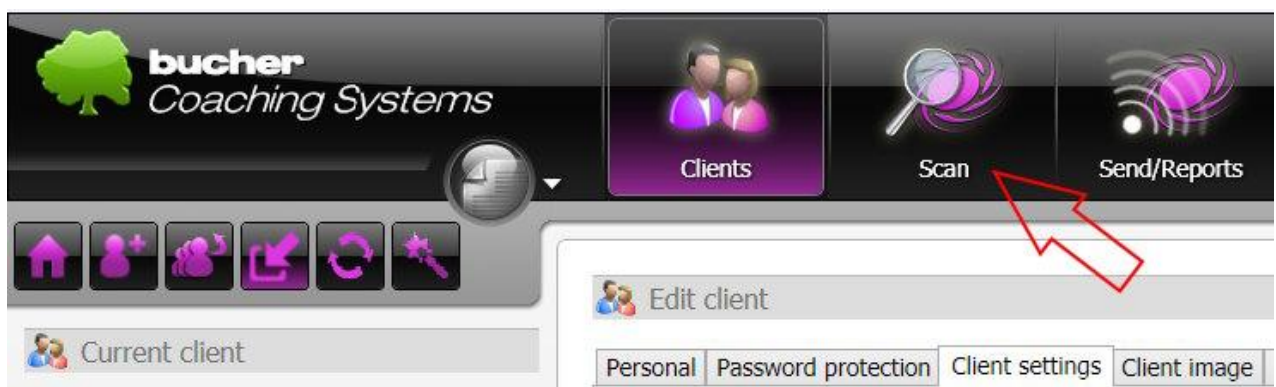

Apri la finestra di scansione

Passaggio 3: Posizionare il sensore CA nell'apposito vassoio. Avviare quindi la scansione. In genere, questa operazione si esegue cliccando sul pulsante più a sinistra, quello leggermente più largo dei tre. Questo pulsante contiene il suggerimento del sistema. Nell'immagine sottostante, questo pulsante avvia una scansione iniziale. Se si desidera discostarsi da questa procedura, è possibile selezionare uno dei due pulsanti alla sua destra.



Avvia la scansione


Il sistema visualizza un messaggio che invita il cliente a prendere il sensore in mano. Deve utilizzare la mano dominante (destra per i destrimani / sinistra per i mancini / le persone ambidestre possono usare entrambe le mani).

Durante il processo, le sette aree dei chakra vengono elaborate una dopo l'altra e i valori corrispondenti vengono visualizzati nella schermata dei risultati.

Passaggio 4: attendere che il pulsante "Annulla" nell'angolo in basso a destra della finestra cambi in "Chiudi". Se si desidera annullare la scansione, è possibile fare clic su "Annulla" prima che termini. In questo caso, nessun dato di scansione verrà salvato.

Passaggio 5: Chiudere la finestra di scansione e quindi aprire "Invia/Report".

Risultato: è disponibile una panoramica delle sette aree dei chakra per la valutazione, la redazione di report e, se necessario, l'armonizzazione.

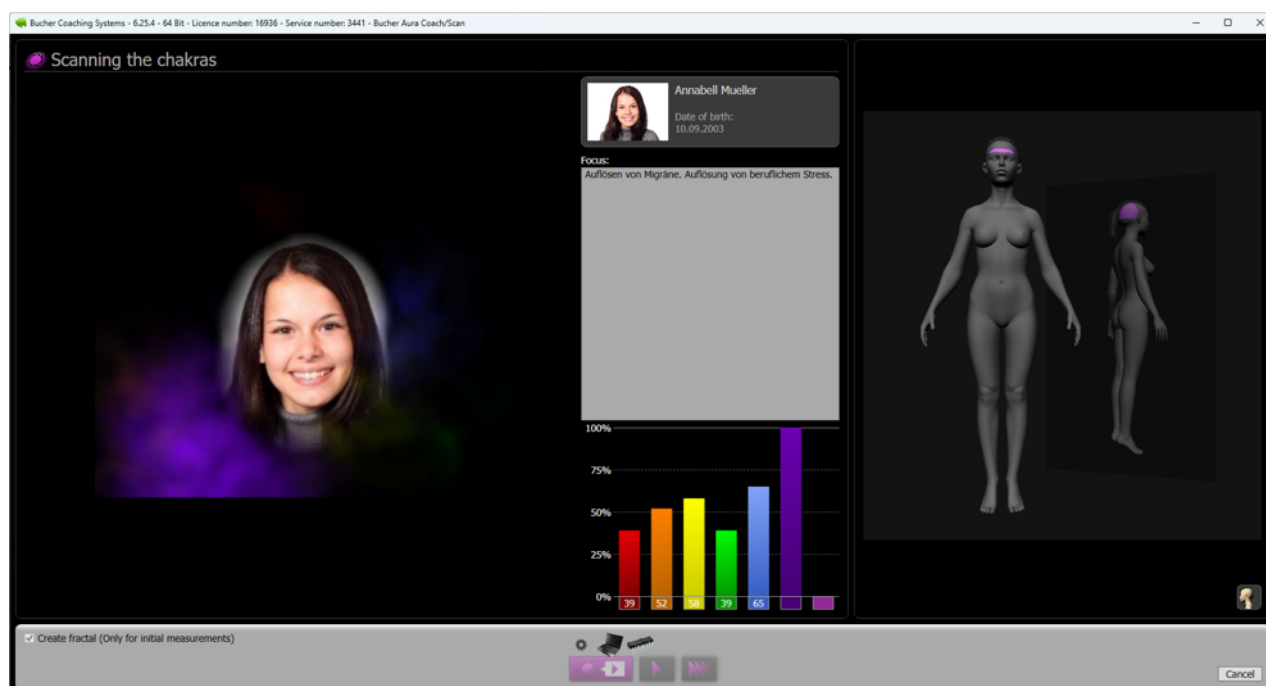

Scansione dell'aura durante la procedura

3.2.5.2 Scansione iniziale, scansione di controllo e informazioni supplementari

In genere, è prevista una scansione dell'aura a settimana per ciascun cliente.

Ulteriori scansioni di follow-up devono essere eseguiti solo in casi eccezionali e giustificati.


Un'ulteriore scansione iniziale nello stesso giorno potrebbe essere tecnicamente possibile dopo un periodo di attesa minimo e conferma, ma dovrebbe essere limitata a casi eccezionali e giustificati. Se dopo la scansione vengono aggiunte solo diagnosi o sintomi, la scansione iniziale di solito rimane invariata. Invece, è necessario eliminare la valutazione IA esistente e ricrearla con le informazioni aggiunte.

3.2.6 Visualizzazione e comprensione dei risultati

3.2.6.1 Panoramica dei risultati

La sezione dei risultati mostra i chakra da 1 a 7 con i rispettivi valori di scansione e una rappresentazione a colori. Utilizzate inizialmente questa panoramica per identificare i punti focali relativi all'interno della scansione corrente. I singoli valori non devono essere interpretati isolatamente o come risultati di laboratorio medico.

Un valore significativamente diverso può rappresentare un'opportunità per approfondire l'argomento in questione durante la conversazione. Verificate sempre che l'interpretazione sia comprensibile al cliente e che sia coerente con le informazioni già fornite.

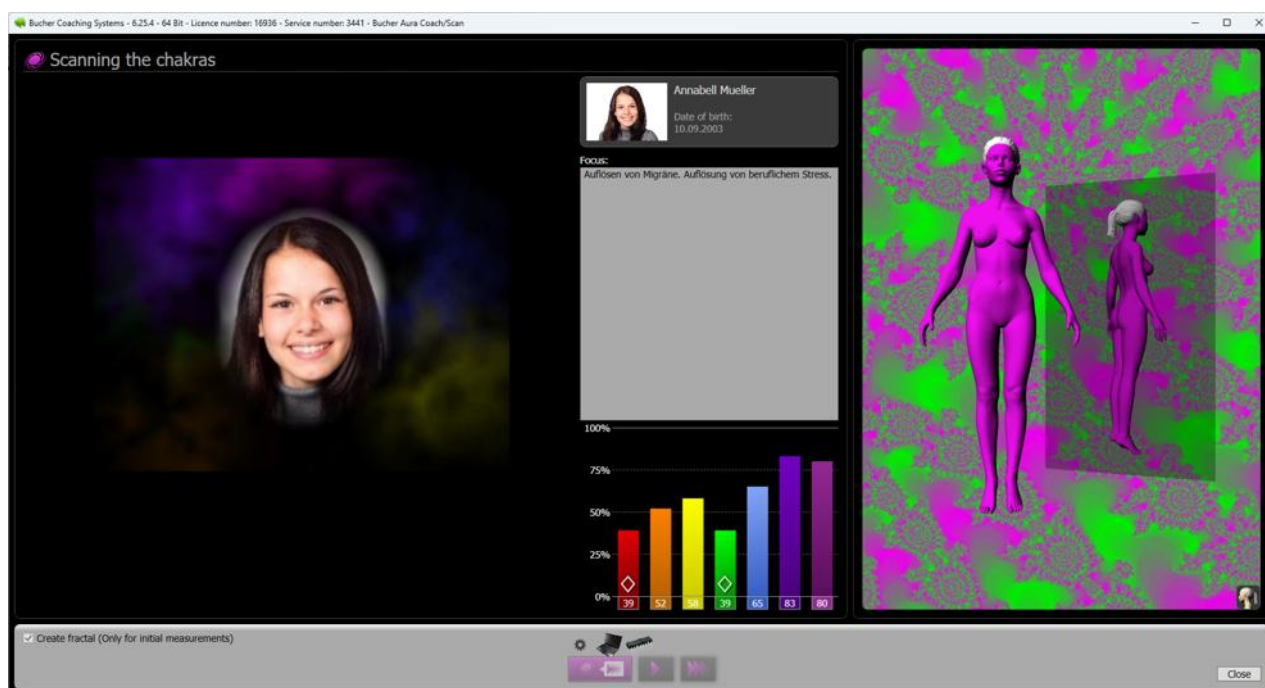

Panoramica dei risultati di una scansione dell'aura

3.2.6.2 Anteprima di stampa e report dettagliato

Apri l'anteprima di stampa e seleziona le sezioni del report desiderate.


The screenshot shows the 'bucher Coaching Systems' software interface. The 'Send/Reports' menu is highlighted with a red arrow. Below the menu, a table displays the scan results for two clients. The table has columns for 'Scan date', 'Chakra 1', 'Chakra 2', 'Chakra 3', 'Chakra 4', 'Chakra 5', 'Chakra 6', and 'Chakra 7'. The first row shows a scan for 'Frau Annabell Müller' on 12/10/2025 at 8:08:33 PM with values: 14, 85, 79, 68, 64, 100, 75. The second row shows a scan for 'Frau Annabell Müller' on 12/10/2025 at 8:04:54 PM with values: 10, 64, 55, 64, 60, 91, 68.

	Scan date	Chakra 1	Chakra 2	Chakra 3	Chakra 4	Chakra 5	Chakra 6	Chakra 7
1	12/10/2025 8:08:33 PM	14	85	79	68	64	100	75
2	12/10/2025 8:04:54 PM	10	64	55	64	60	91	68

Mostra l'elenco delle scansioni e apri l'anteprima di stampa

Nella sezione "Invia/Report" sono elencate tutte le scansioni per questo cliente. Per visualizzare l'anteprima delle scansioni, fare clic sulla prima icona con la lente d'ingrandimento e quindi sulla voce di menu "Visualizza nel layout del pacchetto" che appare. Tutte le informazioni relative a questa scansione, come la valutazione IA, possono essere stampate solo durante la scansione iniziale di questo ciclo di scansione. Pertanto, in genere è consigliabile fornire al cliente una stampa della scansione iniziale (un triangolo). Le scansioni successive (tre triangoli) mostrano le variazioni nel tempo rispetto alla scansione iniziale.

Nella finestra "Selezione di stampa", selezionare prima "Stampa per il paziente" o "Stampa per il terapeuta" e quindi definire il contenuto del report desiderato. Facendo clic su "Salva come predefinito" si salva la selezione corrente per il profilo scelto; verrà utilizzata nuovamente al successivo accesso alla pagina.

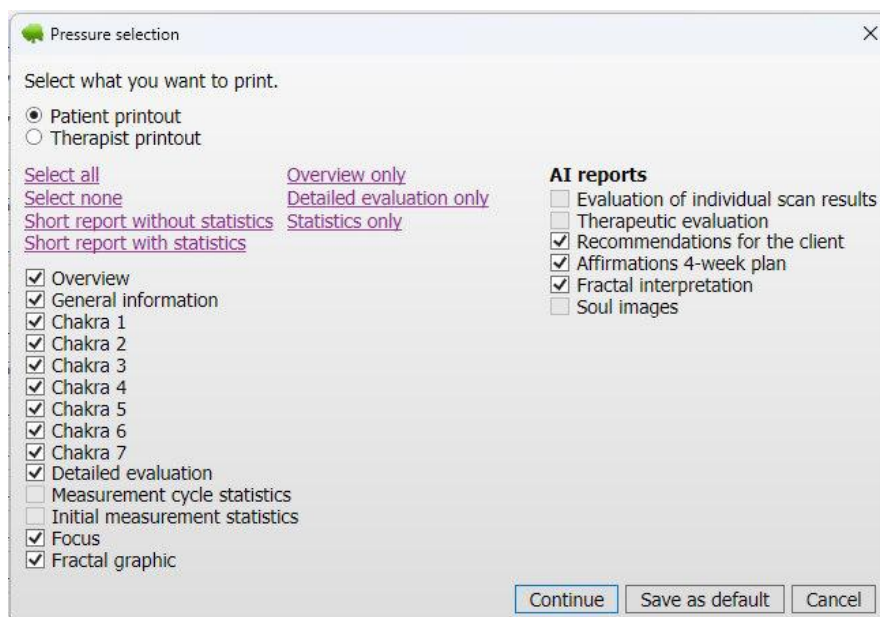

Finestra di selezione Stampa

I testi dettagliati possono menzionare temi energetici e riferimenti simbolici a parti del corpo o sistemi di organi. Sono intesi come spunti di discussione e riflessione all'interno del modello di lavoro energetico e non sostituiscono la diagnosi o il trattamento medico.


Prima di salvare, stampare o inviare il report, rivedetelo attentamente. Nelle opzioni di stampa, nascondete eventuali sezioni superflue o linguisticamente inappropriate.



Anteprima di stampa di un report Aura

3.2.6.3 Blocchi e statistiche


L'analisi dettagliata può elencare gli argomenti identificati come risonanze o blocchi nella scansione. Nelle scansioni successive, gli argomenti precedentemente identificati ma che sono stati rilevati come non più rilevanti possono essere contrassegnati come risolti.

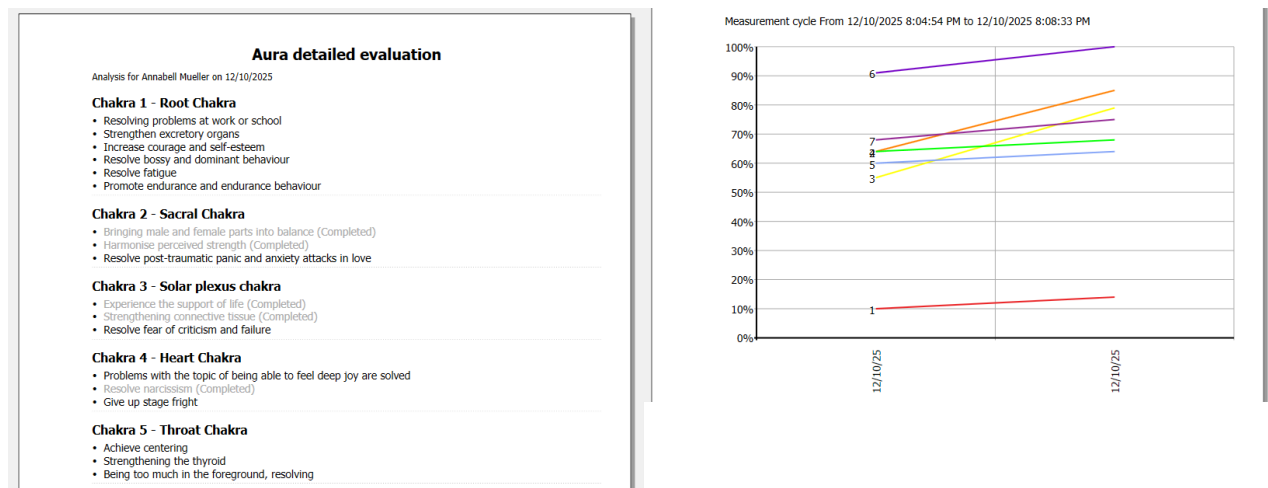

Blocchi e statistiche nel report dell'aura

3.2.6.4 Andamento dei chakra nelle scansioni di follow-up

L'andamento dei chakra è disponibile solo per una scansione di follow-up, perché confronta la scansione iniziale con quella successiva. Nell'elenco, le scansioni di follow-up sono contrassegnate da tre triangoli all'inizio della riga.

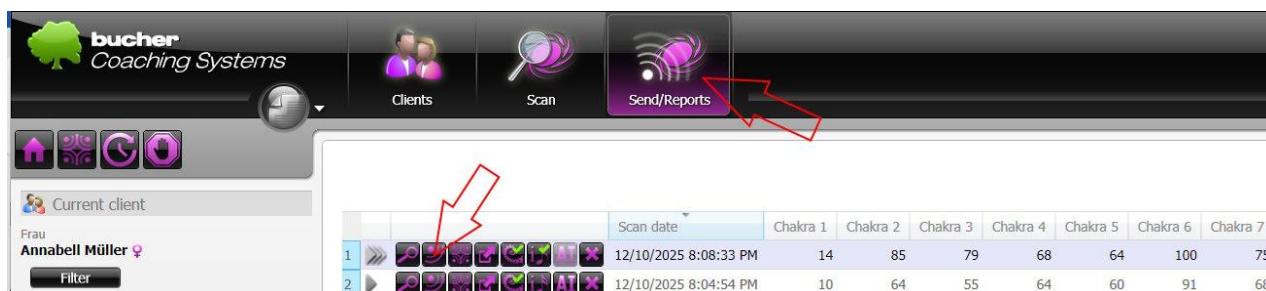

		Scan date	Chakra 1	Chakra 2	Chakra 3	Chakra 4	Chakra 5	Chakra 6	Chakra 7
1	▶▶▶	12/10/2025 8:08:33 PM	14	85	79	68	64	100	75
2	▶▶▶	12/10/2025 8:04:54 PM	10	64	55	64	60	91	68


Visualizzazione di una scansione di controllo

Apri la scansione di follow-up tramite la seconda icona (invio) e seleziona «Andamento dei chakra» in basso a destra.



Apri la andamento dei chakra nella finestra di invio per visualizzare i cambiamenti dei chakra.

Nella visualizzazione "Andamento dei chakra" è possibile riprodurre una breve animazione che mostra graficamente la variazione dei valori dei chakra dalla scansione iniziale a quella di controllo. Per farlo, clicca sul pulsante "Riproduci" sotto i valori dei chakra.

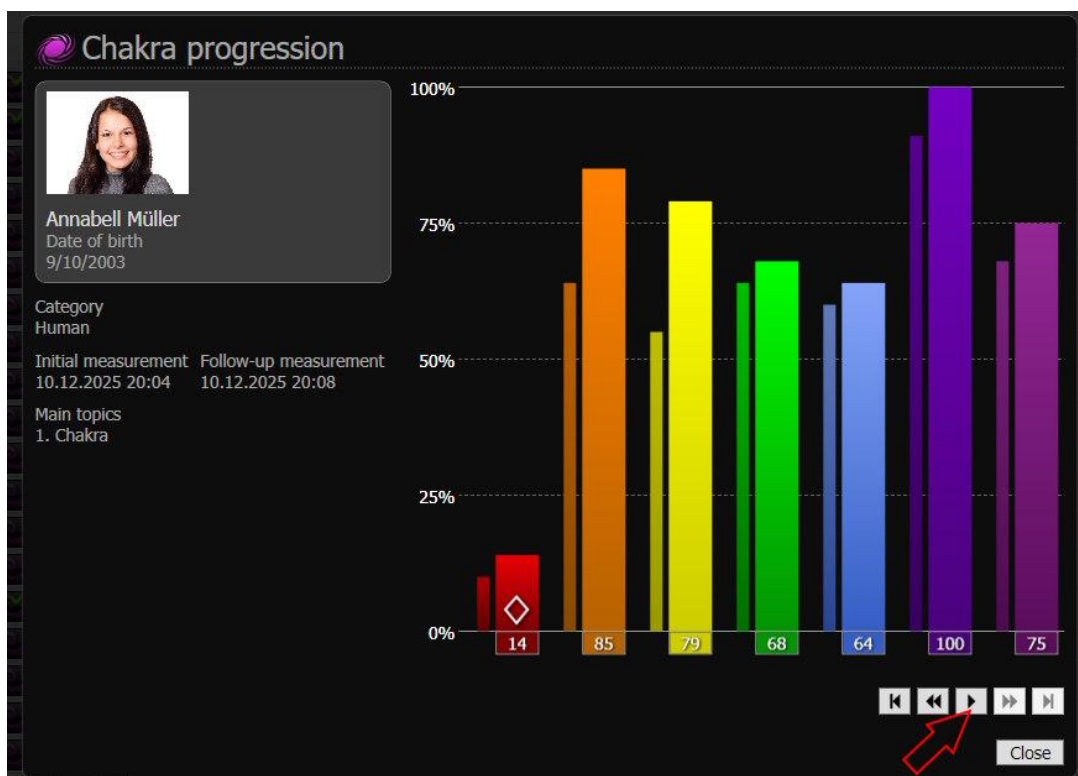


Riprodurre l'andamento dei chakra

3.2.7 Armonizzazione e trasmissione


Dopo la valutazione e la discussione con il cliente, la scansione corrente può essere inviata al campo morfogenetico del cliente per armonizzare i chakra e risolvere i blocchi. In genere, è sempre consigliabile inviare la scansione iniziale (UN triangolo), poiché contiene tutte le frequenze scansionate nella loro forma originale. Sebbene sia possibile inviare anche le scansioni di follow-up (TRE triangoli), queste sono principalmente destinate al monitoraggio dei progressi nel tempo, non alla trasmissione. Pertanto, se il cliente vi visita più volte ed eseguite scansioni di follow-up, vi preghiamo di inviare comunque la scansione iniziale dopo ogni scansione di follow-up. Questo, come rituale di ripetizione, è più efficace nello stimolare l'autoguarigione rispetto all'invio della sola scansione di follow-up. Cercate nell'elenco dall'alto verso il basso la prima occorrenza di una scansione iniziale (contrassegnata con UN triangolo).

Passaggio 1: Aprire la sezione "Invia/Report" e fare clic sull'icona di invio nella parte superiore della scansione iniziale.

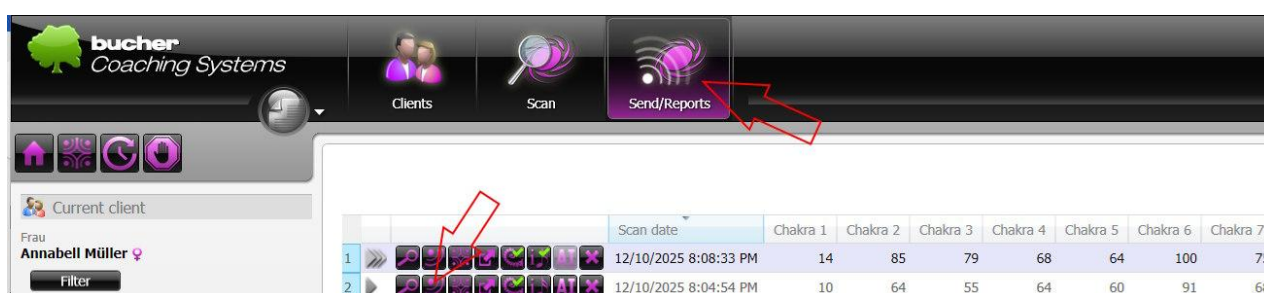

Apertura della finestra di invio

Fase 2: Se il cliente è presente, tiene in mano il sensore CA durante il processo di trasmissione e può guardare la piccola luce sulla parte anteriore del sensore. Selezionare Medio o Lento, oppure un tempo di trasmissione sufficientemente lungo in modo che il cliente possa seguire consapevolmente il processo.

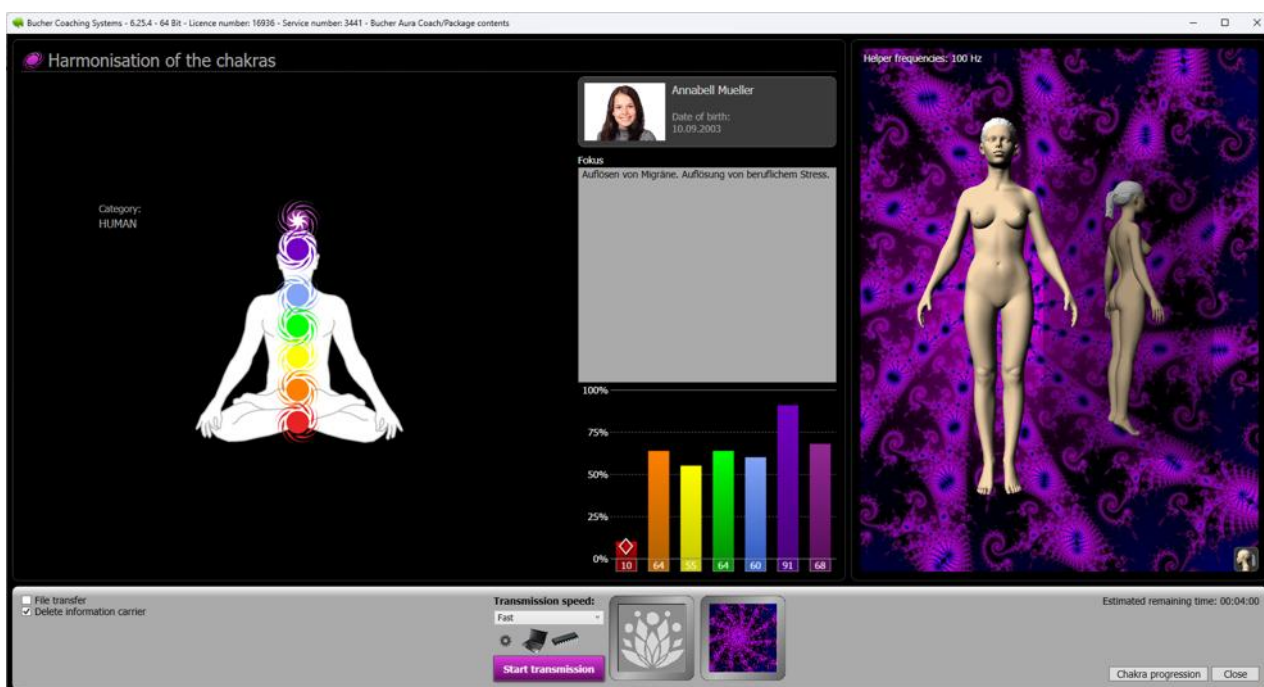

Armonizzazione dell'aura durante la trasmissione

Se il cliente non è presente o si desidera trasferire informazioni di regolazione a un supporto informativo, utilizzare il Rapid Transfer. Le opzioni "Rapido" o "Breve" possono essere utilizzate se il Rapid Transfer non è desiderato o disponibile. Quando si utilizzano supporti informativi, osservare l'orientamento del sensore, del bicchiere o del supporto per schede come descritto nel capitolo sulla trasmissione generale.

La velocità di trasmissione influisce solo sulla durata della trasmissione corrente. La durata della trasmissione successiva è, di default, di quattro settimane, indipendentemente dal fatto che la velocità sia impostata su Rapid Transfer, Veloce, Media o Lenta. Una trasmissione più lenta non si traduce in una qualità migliore. Vedere anche la sezione 2.7, " Distinzione tra durata e velocità di trasmissione ".



Avviare la trasmissione

Avvia la trasmissione cliccando sul pulsante "Avvia trasmissione" e attendi che il processo sia completato.

3.2.8 Utilizzo della modalità automatica

La modalità automatica di Bucher Aura Coach viene utilizzata per eseguire automaticamente le applicazioni di Aura Coach per diversi clienti selezionati in successione. A seconda delle impostazioni, il programma può eseguire la scansione, inviare le informazioni raccolte e, facoltativamente, inviare un report al cliente via e-mail.

La modalità automatica è particolarmente utile quando i clienti devono ricevere sessioni regolari di Aura Coach. Invece di selezionare ogni cliente singolarmente, avviare manualmente la scansione, impostare la sessione e quindi inviare un report, questo processo può essere automatizzato utilizzando la modalità automatica.

3.2.8.1 Scopo della modalità automatica

La modalità automatica è progettata per semplificare i flussi di lavoro ricorrenti e risparmiare tempo.

Aiuta gli utenti a

- eseguire automaticamente scansioni periodiche con Aura Coach,
- lavorare per diversi clienti selezionati in successione,
- eseguire automaticamente la trasmissione successiva,
- inviare automaticamente i report ai clienti, se la posta elettronica è configurata,
- ridurre i passaggi manuali,
- mantenere il processo chiaro e comprensibile anche con molti clienti.

La selezione dei clienti da includere nella modalità automatica viene effettuata nelle impostazioni del cliente. Lì è possibile specificare per ciascun cliente se debba partecipare o meno alla modalità automatica di Aura.

3.2.8.2 Benefici nella pratica quotidiana

Il vantaggio più significativo della modalità automatica è il tempo risparmiato. Con pochi clienti, la differenza è minima. Tuttavia, con molti clienti abituali, la modalità automatica può offrire un notevole sollievo.

Un processo manuale in genere consiste in diverse fasi:

1. Seleziona il cliente.

Risultato: il cliente corretto è attivo.

2. Eseguire la scansione.

Risultato: vengono determinati i risultati di Aura Coach.

3. Eseguire la trasmissione.

Risultato: le informazioni raccolte vengono trasmesse.

4. Creare o inviare il report.

Risultato: Il cliente riceve la documentazione dei risultati.

In modalità automatica, questo processo può essere eseguito automaticamente per tutti i clienti opportunamente configurati, uno dopo l'altro. L'utente non deve essere presente al computer durante questa fase. Il programma BCS viene bloccato e non può essere utilizzato per altre attività in modalità automatica. Tuttavia, è comunque possibile utilizzare altri programmi sul computer.

3.2.8.3 Processo più rapido

La modalità automatica è generalmente più veloce di quella manuale. Questo perché non sono necessarie varie rappresentazioni grafiche né passaggi intermedi manuali. Il programma esegue i passaggi richiesti nel modo più diretto possibile.

Ciò consente di automatizzare completamente il processo di scansione, invio e trasmissione via e-mail, rendendolo molto più rapido in molti casi rispetto all'elaborazione manuale.

3.2.8.4 Invio di email in modalità automatica

Se le impostazioni di posta elettronica sono configurate nel programma, la modalità automatica può inviare i report anche tramite e-mail. Affinché ciò funzioni, è necessario configurare nel sistema un account di posta elettronica dedicato per l'invio di tali report.

Quando questa funzione è attivata, la modalità automatica non solo esegue la scansione e l'invio, ma invia automaticamente al cliente anche un report completo con i risultati.

Importante: l'invio automatico di email deve essere utilizzato solo se le impostazioni di posta elettronica sono configurate correttamente e il cliente acconsente a ricevere i report via email.

3.2.8.5 Significato di Intenzione

Sebbene il processo tecnico sia automatizzato, l'attenzione consapevole dell'utente rimane un aspetto importante quando si lavora con i sistemi energetici. Pertanto, è opportuno controllare il registro al termine dell'esecuzione della modalità automatica.

Si raccomanda di richiamare brevemente l'attenzione su ciascun cliente internamente e di concentrare l'intenzione affinché le scansioni e le trasmissioni effettuate abbiano un effetto ottimale e armonioso per i clienti.

Importante

La modalità automatica non sostituisce la responsabilità professionale dell'utente. Automatizza le fasi di lavoro ricorrenti, ma non valuta autonomamente se un'applicazione sia professionalmente appropriata in un dato caso.

3.2.8.6 Attivazione della modalità automatica per un cliente

In questa sezione, si specifica se un determinato cliente deve partecipare alla Modalità automatica di Aura. Questa impostazione non è globale per tutti i clienti, ma individuale per ciascun cliente.

Ciò consente di controllare con precisione quali clienti devono essere scansionati, armonizzati e, facoltativamente, informati via e-mail in modo automatico e periodico.

Istruzioni passo passo

1. Aprire la gestione clienti.

Risultato: viene visualizzata la finestra "Clienti".

2. Selezionare il cliente desiderato.


Risultato: il cliente viene evidenziato e visualizzato come cliente corrente.

3. Aprire i dati del cliente per la modifica.

Risultato: si apre la visualizzazione dettagliata del cliente.

4. Passare alla scheda "Impostazioni cliente".

Risultato: vengono visualizzate le impostazioni individuali per questo cliente.

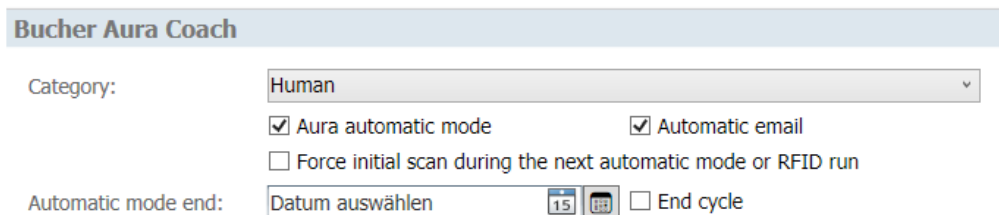

The screenshot shows the 'Bucher Aura Coach' interface. At the top, the title 'Bucher Aura Coach' is displayed. Below it, there is a 'Category:' label followed by a dropdown menu currently set to 'Human'. Underneath the dropdown, there are two checked checkboxes: 'Aura automatic mode' and 'Automatic email'. Below these, there is an unchecked checkbox labeled 'Force initial scan during the next automatic mode or RFID run'. At the bottom, there is a label 'Automatic mode end:' followed by a date selection field showing 'Datum auswählen' with a calendar icon and the date '15'. To the right of the date field is an unchecked checkbox labeled 'End cycle'.

5. Attivare l'opzione "Modalità automatica Aura" se si desidera che questo cliente partecipi alla modalità automatica.

Risultato: il cliente verrà incluso nella successiva esecuzione della modalità automatica Aura.

6. Abilitare l'opzione di invio automatico delle email se il cliente deve ricevere automaticamente un report al termine dell'esecuzione in modalità automatica.

Risultato: Dopo la scansione e l'armonizzazione, un'email contenente il report verrà preparata e inviata automaticamente al cliente, a condizione che le impostazioni email siano configurate correttamente.

7. Se necessario, attivare l'opzione "Forza scansione iniziale alla successiva esecuzione in modalità automatica".

Risultato: per questo cliente verrà sicuramente eseguita una scansione iniziale alla successiva esecuzione in modalità automatica. Questa opzione è utile se si desidera impostare deliberatamente un nuovo punto di partenza, ad esempio dopo una lunga pausa o dopo una modifica sostanziale del supporto fornito.

8. Se necessario, inserisci una data di fine.

Risultato: la modalità automatica sarà attiva per questo cliente solo fino a questa data.

Esempio: se il cliente deve essere supportato solo fino alla fine dell'anno, inserire "31.12." come data di fine. Le scansioni in modalità automatica, l'armonizzazione e le notifiche e-mail facoltative verranno eseguite fino a tale data. Dal 1° gennaio dell'anno successivo, questo cliente non sarà più incluso nella modalità automatica.

9. Lasciare vuota la data di fine se il cliente deve rimanere in modalità automatica a tempo indeterminato.

Risultato: il cliente verrà incluso permanentemente nelle esecuzioni in modalità automatica finché l'opzione modalità automatica rimarrà attiva.

10. Salvare i dati del cliente.

Risultato: le impostazioni della modalità automatica per questo cliente sono state salvate.



Importante

Le impostazioni si applicano solo al cliente attualmente in fase di elaborazione. Se si desidera elaborare automaticamente più clienti, è necessario verificare e attivare la modalità automatica singolarmente per ciascun cliente.

Nota:

L'invio automatico delle email funziona solo se è stato configurato un account email dedicato all'interno del programma. In caso contrario, la modalità automatica può scansionare e armonizzare i dati, ma non può inviare report via email.

Errori comuni e soluzioni

Problema: Il cliente non viene considerato in modalità automatica.

Possibile causa: L'opzione "Modalità automatica Aura" non è attivata nelle impostazioni del cliente.

Soluzione: Aprire le impostazioni del cliente e attivare l'opzione corrispondente.

Problema: Il cliente non riceve l'e-mail.

Possibile causa: L'invio automatico delle e-mail non è abilitato per questo cliente oppure le impostazioni generali della posta elettronica non sono configurate. Soluzione: Innanzitutto, verificare le impostazioni del cliente e successivamente le impostazioni generali della posta elettronica del programma.

Problema: Il cliente ha smesso di essere elaborato automaticamente dopo una certa data.

Possibile causa: È stata inserita una data di fine, che è stata raggiunta o superata. Soluzione: Rimuovere o modificare la data di fine se il cliente deve tornare a partecipare alla modalità automatica.

3.2.8.7 Avviare la modalità automatica e verificare il processo

In questa sezione, si avvia l'esecuzione della Modalità automatica di Aura. Il programma elaborerà automaticamente tutti i clienti per i quali la Modalità automatica di Aura è stata attivata nelle impostazioni del cliente.

A seconda delle impostazioni, la modalità automatica può eseguire automaticamente i seguenti passaggi:

- Scansione cliente
- Armonizzazione o trasmissione
- Invio di un report via e-mail

Il processo viene eseguito in sequenza per tutti i clienti selezionati. Al termine, viene visualizzato un registro in cui è possibile esaminare l'andamento dell'esecuzione in modalità automatica.

Ritmo di lavoro consigliato

Per un utilizzo pratico quotidiano, è consigliabile impostare un orario fisso per la modalità automatica.

Esempio:

- un giorno specifico della settimana
- un orario fisso
- un ritmo regolare, ad esempio una volta alla settimana
- Questo crea un processo chiaro. I clienti vengono gestiti regolarmente e l'utente può integrare in modo sicuro il monitoraggio del registro nel proprio flusso di lavoro.

Requisiti

- Almeno un cliente è attivato per la modalità automatica Aura.
- BCS è stato lanciato.
- È stato selezionato il Bucher Aura Coach.
- Se i report devono essere inviati via e-mail, è necessario configurare le impostazioni di posta elettronica.
- Il sistema BCS non deve essere utilizzato per altre attività quando è in modalità automatica.

Istruzioni passo passo

1. Aprire la finestra del cliente.
Risultato: viene visualizzata la gestione del cliente.
2. Fai clic sulla quinta icona nella finestra del cliente per aprire la modalità Aura Auto.



Risultato: si apre la finestra "Modalità automatica Aura".

3. Controlla l'elenco delle attività visualizzate nella finestra "Modalità automatica Aura".
Risultato: puoi vedere quali attività verranno eseguite durante la prossima esecuzione in modalità automatica.


Esempio:

- "6 clienti totali in modalità automatica"
- "Scansiona 5 clienti"
- "Per armonizzare 5 clienti"
- "Invia 3 email recenti"

In questo esempio, 6 clienti sono attivati per la modalità automatica. Di questi, 1 cliente è già stato scansionato oggi e pertanto non verrà preso in considerazione oggi.

Vengono eseguite la scansione e l'armonizzazione di cinque clienti.

Solo 3 di questi 5 clienti hanno l'invio automatico delle email abilitato.

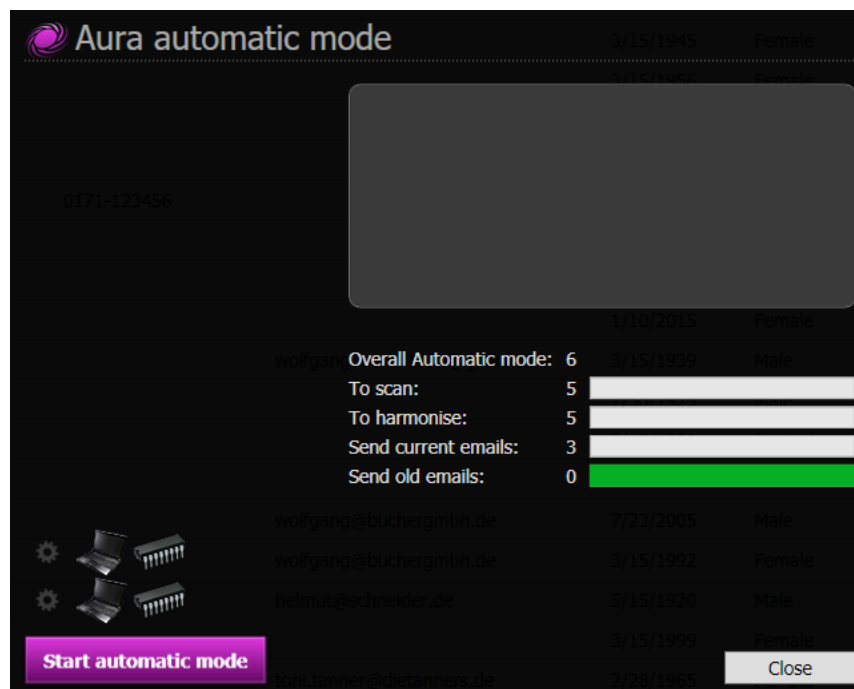

4. Avviare la modalità automatica.
Risultato: il programma inizia a elaborare automaticamente i clienti.
5. Se necessario, monitorare l'attività corrente nella finestra della modalità automatica.
Risultato: il programma visualizza la fase attualmente in esecuzione.

Esempi:

- "Scansione del cliente A"
 - "Armonizzazione del Cliente A"
 - "Scansione del cliente B"
 - "Armonizzazione del Cliente B"
 - Ecc.
6. Attendere il completamento di tutte le scansioni e armonizzazioni.
Risultato: tutti i clienti designati per la modalità automatica sono stati elaborati.
 7. Il programma inizia quindi a inviare email a tutti i clienti per i quali è abilitato l'invio automatico di email.
Risultato: i report vengono inviati via email, a condizione che le impostazioni di posta elettronica funzionino correttamente e che sia disponibile una connessione a Internet.
 8. Al termine dell'esecuzione in modalità automatica, controlla il registro.
Il risultato: vedrai quali cliente sono stati elaborati e se si sono verificati problemi durante la scansione, l'armonizzazione o l'invio delle e-mail.

Caratteristica speciale: il cliente è stato sottoposto a scansione lo stesso giorno.

Se per un cliente è già stata eseguita una scansione dell'aura nello stesso giorno, tale cliente non verrà scansionato nuovamente durante la scansione automatica.

Motivo: il programma impedisce che un cliente venga accidentalmente scansionato due volte nello stesso giorno. Risultato: il cliente viene escluso da questa scansione automatica se esiste già una scansione effettuata nello stesso giorno.

Come gestire i problemi di posta elettronica

Se l'invio di un'e-mail non riesce, ad esempio a causa di una connessione Internet inesistente o di impostazioni di posta elettronica errate, questo viene registrato nel log.

Le e-mail non inviate non vanno perse. Tornando alla modalità automatica Aura, la riga «Vecchie e-mail da inviare» indica se restano messaggi in sospeso da un'esecuzione precedente.

Le e-mail non inviate per assenza di connessione o problemi simili possono essere inviate in seguito. Con «Scarta» si annulla l'invio dei vecchi messaggi in sospeso, ad esempio perché ormai superati.

Procedura dettagliata: come reinviare vecchie email

1. Apri nuovamente la "Modalità automatica Aura".
Risultato: viene visualizzato l'elenco delle attività.
2. Seleziona la riga "Vecchie email da inviare".
Risultato: vedrai se ci sono email non inviate da una precedente esecuzione in modalità automatica.
3. Fai clic sul pulsante per reinviare le vecchie email.
Risultato: il programma tenta di reinviare le email ancora in sospeso.
4. Controlla quindi il registro.
Risultato: potrai verificare se l'invio successivo è andato a buon fine.

Importante

Durante l'esecuzione automatica, BCS non è disponibile per altre attività. È però possibile usare altri programmi o lasciare che il computer esegua il processo senza supervisione.

Post-elaborazione: rivedere attentamente il registro

Dopo l'esecuzione automatica, oltre al controllo tecnico del registro, è consigliabile esaminare attentamente l'elenco dei clienti elaborati.

L'utente può richiamare brevemente nella propria mente ciascun cliente e concentrare la propria attenzione affinché le scansioni e le armonizzazioni eseguite abbiano un effetto ottimale e coerente.

Nota: l'intento consapevole è parte importante del lavoro con i sistemi energetici. La modalità automatica gestisce il processo tecnico, ma non sostituisce l'attenzione professionale e l'orientamento interiore dell'utente.

Errori comuni e soluzioni

Problema: in modalità automatica vengono visualizzati meno clienti del previsto.

Possibile causa: non tutti i clienti hanno la modalità automatica di Aura abilitata nelle proprie impostazioni. Soluzione: verificare le impostazioni dei clienti interessati.

Problema: Un cliente non è stato scansionato in modalità automatica.

Possibile causa: Per questo cliente è già stata eseguita una scansione lo stesso giorno. Soluzione: Verificare se esiste già una scansione dell'aura relativa allo stesso giorno.

Problema: sono state inviate meno email rispetto ai clienti elaborati.

Possibile causa: l'invio automatico delle email non è abilitato per tutti i clienti. Soluzione: verificare nella scheda "Impostazioni cliente" quali clienti hanno l'invio automatico delle email abilitato.

Problema: e-mail non inviate.

Possibili cause: connessione assente, impostazioni e-mail errate o problema temporaneo d'invio.

Soluzione: verificare connessione e impostazioni e-mail. Aprire poi la «Modalità automatica Aura» e usare la funzione per inviare i vecchi messaggi in sospeso.

3.3 Corpus Analyser

3.3.1 Panoramica e utilizzo previsto

3.3.1.1 Scopo e ambiti di applicazione

Il Corpus Analyser (CA) è un modulo integrato nei sistemi di coaching Bucher. Supporta l'utente nell'esaminare sistematicamente le relazioni funzionali ed energetiche, documentando i cambiamenti in diversi punti di scansione e preparando i risultati per la discussione con il cliente. Il flusso di lavoro tipico prevede la selezione del cliente, la preparazione, la scansione iniziale, le successive scansioni di andamento, la revisione dei risultati e la generazione del report. A seconda della licenza, è possibile utilizzare anche la valutazione tramite intelligenza artificiale, l'analisi frattale e l'armonizzazione.

3.3.1.2 Panoramica delle funzionalità dell'Corpus Analyser

- Scansione iniziale per rilevare la situazione di partenza attuale.
- Scansioni di andamento che utilizzano le scansioni precedenti come base per calcolare la nuova situazione.
- Visualizzazione per gruppi, parametri, colori di valutazione e serie temporali.
- Informazioni dettagliate, filtri di selezione, prodotti e consigli su come agire.
- Report, output in PDF, invio tramite e-mail e valutazioni opzionali tramite intelligenza artificiale.
- Funzioni di armonizzazione, luce colorata, suono e frattale attivabili a scelta.

3.3.1.3 Responsabilità dell'utente e verifica della plausibilità tecnica

Esaminare ciascun risultato nel contesto del cliente, dell'obiettivo prefissato e della tempistica. I singoli valori non devono essere interpretati isolatamente. Documentare solo le affermazioni professionalmente corrette e spiegare le probabilità come indicazioni piuttosto che come affermazioni fattuali.

3.3.2 Prerequisiti, installazione e configurazione

3.3.2.1 Requisiti di sistema e di licenza

Per utilizzare Corpus Analyser, è necessaria una versione di BCS installata e attivata, con la relativa attivazione CA. Una connessione Internet è indispensabile per l'attivazione, gli aggiornamenti, la selezione del colore online, le funzioni di intelligenza artificiale, l'invio di e-mail e lo scambio online dei filtri di focus. Le funzioni aggiuntive visibili dipendono dalla licenza in possesso e dall'hardware connesso.

3.3.2.2 Installare, aggiornare e abilitare Corpus Analyser in Windows

L'installazione e gli aggiornamenti vengono eseguiti in collaborazione con Bucher Coaching Systems. Se al primo avvio Windows visualizza un avviso di sicurezza, verificare il produttore e autorizzare l'applicazione fornita da Bucher. Chiudere BCS prima di eseguire l'aggiornamento e quindi riavviare il programma.

Nota:

Se Corpus Analyser non viene visualizzato dopo un aggiornamento, verificare innanzitutto l'attivazione e la licenza. Non installare driver o file di programma di terze parti senza prima

consultare l'assistenza Bucher. Quando possibile, utilizzare i programmi di sicurezza integrati in Windows anziché software antivirus di terze parti.

3.3.2.3 Identificazione delle funzioni dipendenti dalla licenza e dei moduli aggiuntivi

BCS in genere nasconde o disabilita i pulsanti corrispondenti alle funzioni non abilitate. Ciò vale in particolare per l'armonizzazione (la funzione di trasmissione), la funzione frattale, alcune funzioni audio e altri moduli speciali. Pertanto, una funzione non visibile non è automaticamente indice di un errore del programma.

3.3.2.4 Collegamento e rilevamento del sensore CA

Collega il sensore CA direttamente a una porta USB idonea. Attendi che Windows riconosca il dispositivo, quindi apri le Impostazioni tramite il pulsante rotondo "Funzioni aggiuntive" e poi le Impostazioni hardware. Il sensore dovrebbe essere visualizzato come hardware attivo.

Passo dopo passo: controlla il sensore

1. Apri le impostazioni tramite il pulsante rotondo "Funzioni aggiuntive" e passa alla sezione Hardware.
2. Individua la voce "Corpus Analyser" e verifica se il dispositivo è attivo tenendo premuto il pulsante "Test". Una luce bianca si accenderà sul sensore CA mentre tieni premuto "Test".
3. Posiziona il sensore CA in cima all'elenco delle priorità (prima posizione) utilizzando i due pulsanti freccia, in modo che venga visualizzato immediatamente durante la scansione.

Hardware priority list			
Priority	Designation		
	Corpus Analyser		
	Computer		
	Remedy Pyramid		

Sensore CA nella gestione hardware

3.3.2.5 Assegnare priorità al sensore CA e al display per la scansione e la trasmissione

L'hardware visualizzato nella parte superiore è quello attivo durante la scansione e la trasmissione. Tuttavia, tutte le opzioni hardware vengono utilizzate simultaneamente se sono collegati più dispositivi, come TweakLite, Philips Hue, Loxone, Artnet o Shelly. Si tratta di sistemi di illuminazione a colori in grado di illuminare un'intera stanza per la terapia con luce colorata terapeutica. Pertanto, tutte queste opzioni hardware visualizzano contemporaneamente la stessa luce colorata quando sono collegate simultaneamente a BCS.

3.3.2.6 Configurazione dell'interfaccia mente-materia

Nella configurazione hardware, l'interfaccia utilizzata per il sensore può essere definita interfaccia mente-materia. Utilizzate questo termine neutro quando parlate con i clienti. Modificate le proprietà hardware associate solo se ciò è consentito dalla configurazione del dispositivo o se è consigliato dall'assistenza.

3.3.2.7 Spie luminose e corretto utilizzo del sensore

Gli indicatori luminosi mostrano lo stato del sensore. Il display può cambiare a seconda della fase di scansione. Inizialmente, posizionare il sensore su una superficie stabile o nel suo supporto e

sollevarlo solo quando BCS lo richiede. Mantenerlo fermo durante la scansione ed evitare di tirare il cavo.


3.3.2.8 Impostazione di lingua, modulo, stampante ed e-mail

Nelle impostazioni generali, specificare la lingua del programma, il formato desiderato e la stampante predefinita. Per l'invio tramite e-mail, è necessario configurare l'account di posta elettronica e il modello di report designati. Dopo aver apportato le modifiche, eseguire un breve test inviandosi un report di esempio.

3.3.3 Impostazioni di base dell'Corpus Analyser

3.3.3.1 Aprire le impostazioni CA

Apri le impostazioni tramite il pulsante rotondo "Funzioni aggiuntive" e seleziona la sezione Corpus Analyser. Le opzioni visualizzate dipendono dalla tua licenza. Conferma le modifiche con OK per applicarle in modo permanente.

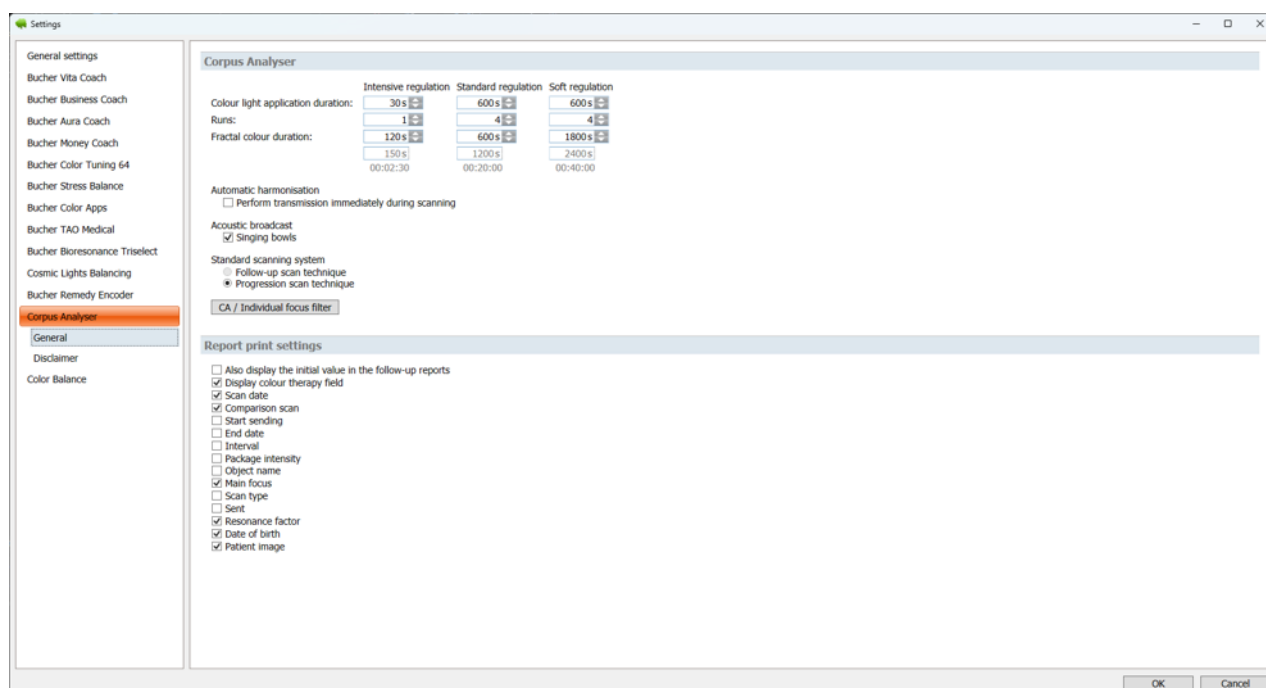

Impostazioni di base dell'Corpus Analyser

3.3.3.2 Impostazione della durata della luce colorata e dei cicli di colore

Per i livelli breve, medio e lungo è possibile impostare la durata della luce colorata e il numero di cicli dei colori. BCS calcola quindi la durata totale prevista. Scegliere valori adatti al proprio flusso di lavoro, all'hardware utilizzato e all'accompagnamento previsto durante l'applicazione.

3.3.3.3 Tempo di trasmissione dei colori frattali

Se la funzione frattale è attivata, è possibile specificare per quanto tempo trasmettere i colori utilizzati nell'immagine frattale durante il trasferimento immediato. Questa impostazione determina la durata del trasferimento e non modifica il successivo periodo di trasmissione, che per impostazione predefinita è di quattro settimane.

3.3.3.4 Abilitare o disabilitare l'armonizzazione automatica

L'armonizzazione automatica è disponibile solo se la funzione di armonizzazione CA è abilitata. Se attivata, la trasmissione viene eseguita automaticamente in concomitanza con la scansione. Senza l'attivazione, l'impostazione non è disponibile e non ha alcun effetto.

3.3.3.5 Configurare il valore iniziale, il campo della terapia con luce colorata e le informazioni del report

Nelle impostazioni dei report di Corpus Analyser puoi scegliere se mostrare anche il valore iniziale nelle scansioni di andamento e se includere il campo della terapia con luce colorata. A seconda della voce, puoi mostrare o nascondere altre informazioni. Verifica il risultato con entrambi i tipi di report prima di adottare l'impostazione in modo permanente.

3.3.3.6 Gestione dei filtri di focus

Le impostazioni di CA consentono di accedere alla gestione dei filtri di focus. Qui è possibile creare, modificare, importare, esportare o, se è disponibile una funzione online, condividere i propri filtri con altri utenti. Istruzioni dettagliate sono disponibili nella sezione 3.3.14, " Creazione, condivisione e utilizzo dei filtri di focus ".

I filtri di focus vengono utilizzati, ad esempio, con gli animali. Per i cavalli, è sufficiente utilizzare solo una parte dei parametri disponibili in CA. Con il filtro di focus, è possibile attivare solo i parametri desiderati e nascondere tutti gli altri.

CA / Individual focus filter

Aprire la gestione dei filtri di focus

3.3.4 Fondamenti tecnici

3.3.4.1 Principio di base dell'Corpus Analyser

L'Corpus Analyser categorizza i dati rilevati in gruppi e parametri e visualizza le deviazioni rispetto ai valori di riferimento personali. La visualizzazione supporta un'analisi funzionale ed energetica. Non descrive i valori di laboratorio o le quantità di sostanze.

3.3.4.2 Cellule, regolazione e omeostasi

Il modello di base considera la regolazione come un equilibrio continuo tra stress, adattamento e stabilizzazione. L'omeostasi si riferisce alla capacità di un sistema di mantenere un equilibrio dinamico. I risultati dell'Corpus Analyser possono indicare dove questo equilibrio appare più o meno compromesso all'interno del modello.

3.3.4.3 Considerazioni funzionali ed energetiche

L'analisi CA si concentra su relazioni, direzioni di regolazione e priorità. Non è equivalente a un esame medico anatomico, patologico o di laboratorio. Utilizzare termini quali indicazione, risonanza, tendenza o relazione funzionale.

3.3.4.4 Valori di riferimento personali

Il calcolo tiene conto delle informazioni raccolte sul cliente e del contesto individuale della scansione. Pertanto, i risultati ottenuti da individui diversi non sono direttamente confrontabili. Ciò che conta è il quadro generale e l'evoluzione della stessa persona in più punti di scansione.

3.3.4.5 Probabilità anziché valori quantitativi

I valori percentuali in CA indicano una forza o una direzione all'interno del modello utilizzato. Non rappresentano la concentrazione di una sostanza né un valore di laboratorio in senso medico. Anche le deviazioni significative sono inizialmente indicative e devono essere esaminate da un professionista e discusse con il cliente.

3.3.4.6 Differenziazione tra Corpus Analyser e biorisonanza classica

Il Corpus Analyser utilizza un proprio modello di valutazione e visualizzazione. Non trasferire automaticamente termini o aspettative dai sistemi di biorisonanza classici al CA. I gruppi, i parametri, i valori di tendenza e le spiegazioni visualizzati nel CA sono da considerarsi autorevoli.


3.3.4.7 Termini: Parametri, gruppi, scansione iniziale e scansione di andamento

I parametri sono singole voci nella valutazione. I gruppi combinano parametri tematicamente correlati. Una scansione iniziale costituisce il punto di partenza. Una scansione di andamento utilizza le scansioni precedenti come base per il calcolo e descrive la situazione attuale appena calcolata.

3.3.5 Preparazione dei clienti

3.3.5.1 Creare un nuovo cliente o selezionare un cliente esistente


Aprire la sezione di gestione clienti e selezionare il cliente corretto. Prima di ogni scansione, verificare il nome e la data di nascita per evitare che i risultati vengano accidentalmente assegnati alla persona sbagliata. Creare un nuovo record solo se non esiste già un cliente corrispondente.

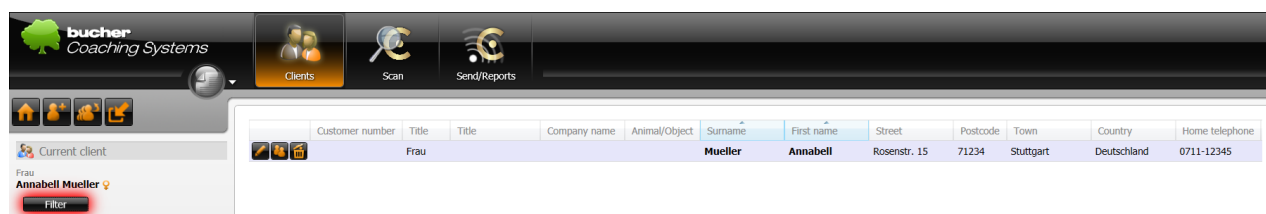

Seleziona il cliente di esempio Mueller Annabell

3.3.5.2 Completare le informazioni obbligatorie per il calcolo

Per un incarico affidabile, è necessario compilare i campi obbligatori del modulo cliente. Questi includono, in particolare, nome, data di nascita, sesso, lingua e – a seconda del calcolo – altezza e peso. È richiesto un indirizzo email per l'invio diretto del report tramite email.

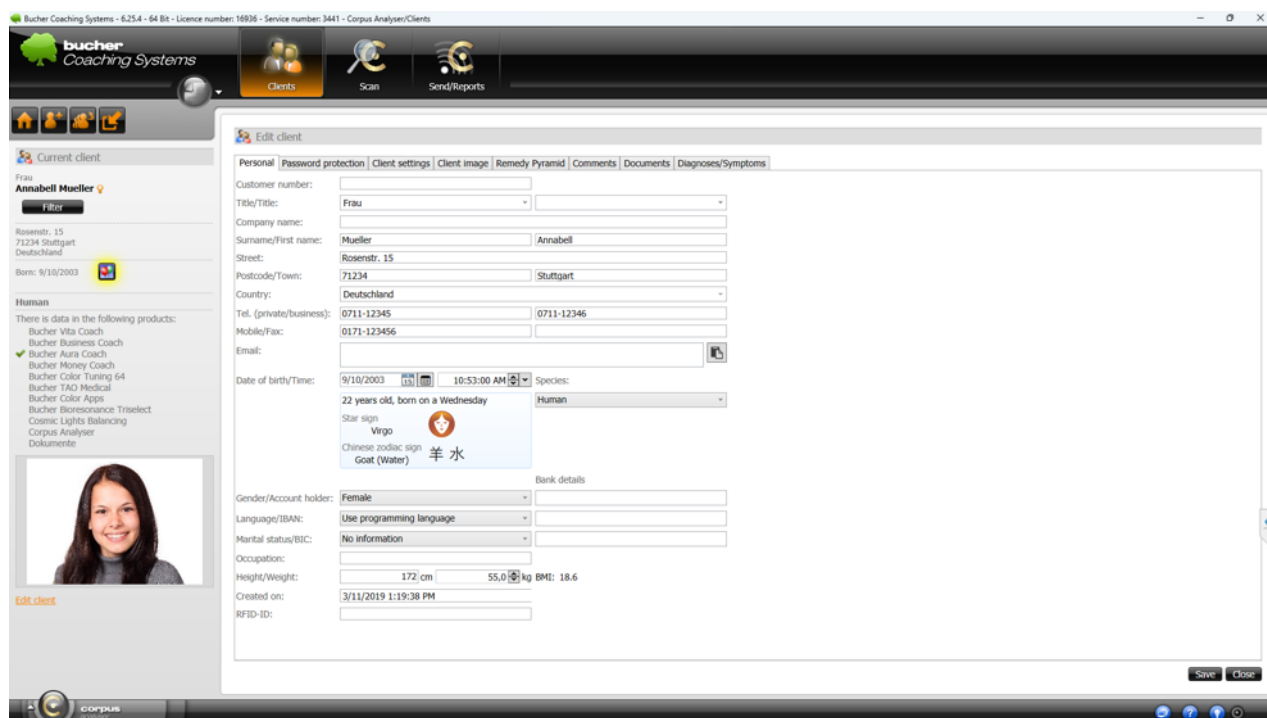

Preparare i dati del cliente per il CA

3.3.5.3 Definire la lingua del cliente e dei report

La lingua impostata per il cliente nei suoi dati personali controlla i testi forniti e può influenzare la lingua del report. Verificare la selezione prima della scansione per assicurarsi che le spiegazioni e i documenti di output vengano generati nella lingua desiderata. Se non viene inserita alcuna lingua per il cliente e si seleziona l'opzione "Usa lingua del programma", il report verrà generato nella lingua impostata nel BCS al momento della creazione del report.

3.3.5.4 Registrazione delle osservazioni

La sezione "Osservazioni" documenta informazioni organizzative, professionali e, talvolta, personali del cliente. Annotate qui le informazioni che potrebbero esservi utili, ad esempio, durante la prossima visita del cliente.


3.3.5.5 Scattare, selezionare o rimuovere una foto

La foto del cliente può essere scattata utilizzando una webcam esistente o selezionata da un file. La foto può anche essere copiata in anticipo (ad esempio, da una pagina Facebook) e poi incollata nel profilo del cliente. Verificare di aver ottenuto il consenso. Una foto non più necessaria può anche essere rimossa dal modulo del cliente.

3.3.5.6 Esportazione o importazione dei dati del cliente e della scansione

I clienti, insieme ai relativi dati di scansione di un ciclo, possono essere esportati e importati in un altro sistema BCS. A tale scopo, utilizzare la funzione centrale di esportazione e importazione del sistema di gestione clienti. Le istruzioni generali sono disponibili nella sezione 2.2 "Gestione clienti" e nella sezione 2.4 "Backup e ripristino dei dati".

3.3.6 Preparare la scansione

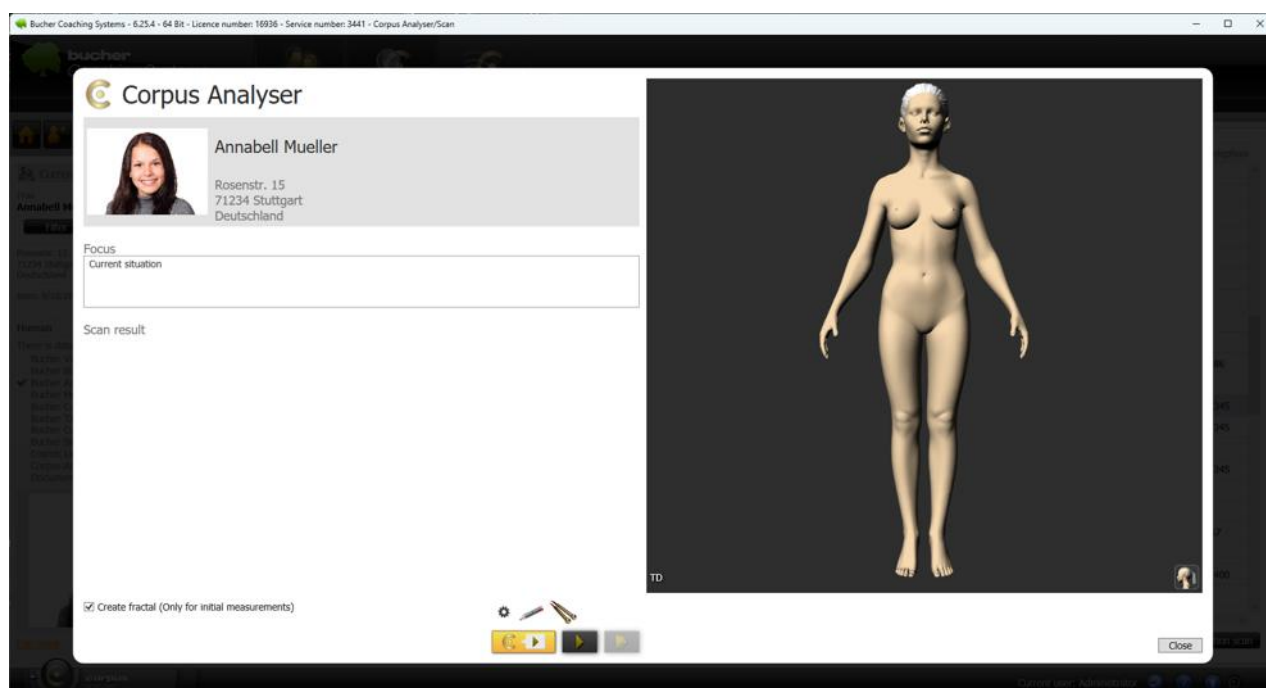

Preparazione di una scansione CA con focus e hardware

3.3.6.1 Descrivere la situazione attuale al centro dell'attenzione

L'attenzione deve concentrarsi sulla comprensione della situazione attuale del cliente e, dopo la valutazione iniziale e l'individuazione delle cause profonde dei problemi, sulla definizione di un obiettivo che il cliente dovrebbe raggiungere. Sono appropriate brevi formulazioni relative a un problema attuale, a un fattore di stress, a un obiettivo o a una domanda. Evitare un linguaggio giudicante, suggestivo o diagnostico.

3.3.6.2 Creare condizioni di silenzio per la scansione ed evitare conversazioni

Assicuratevi che l'ambiente sia tranquillo. Evitate di parlare durante la scansione. Telefonate, notifiche e movimenti non necessari possono interrompere la procedura. Il paziente deve sedersi comodamente e comprendere che il sensore rimarrà immobile durante la scansione.

3.3.6.3 Innanzitutto, posizionare il sensore e sollevarlo all'ora indicata.

Prima di iniziare, appoggia il sensore sul tavolo, preferibilmente su un panno morbido o nell'apposito supporto, se fornito. Avvia la scansione e attendi l'indicazione in BCS. Il cliente deve prendere il sensore solo quando il programma lo richiede, avvolgendolo con le dita della mano dominante (destra per i destrimani, sinistra per i mancini; entrambe vanno bene per gli ambidestri). Il cavo deve essere rivolto verso il basso e la luce verso l'alto. Durante la trasmissione è preferibile che il cliente osservi la luce. Deve tenere il sensore saldamente, senza stringerlo eccessivamente.

3.3.6.4 Verifica dell'hardware di scansione e delle proprietà di scansione

Se il sensore CA è impostato con priorità 1 nelle impostazioni hardware, verrà visualizzato nella finestra di scansione come dispositivo di scansione principale sullo schermo sopra il pulsante "Scansione". Se necessario, aprire le proprietà di scansione utilizzando l'icona a forma di ingranaggio per modificare le opzioni di scansione.

3.3.6.5 Utilizzare la scansione online per la selezione del colore per i clienti assenti


La scansione online di selezione dei colori serve quando il cliente non può essere presente, per esempio a causa della distanza. Il cliente riceve via internet una selezione e sceglie da casa colori, forme e sfumature preferiti e sgraditi. La selezione viene trasmessa a BCS e archiviata nella scheda del cliente come scansione online completata. Nella finestra di scansione CA compare quindi l'opzione per utilizzare questi dati come base della scansione.

Quando è presente un cliente, in genere si utilizza il normale flusso di lavoro CA, inclusa la scansione con l'hardware del sensore CA.

Passo dopo passo: utilizzo della selezione di colori online esistente

1. Apri la scansione CA per questo cliente.
2. Attiva l'opzione "Utilizza la scansione di selezione del colore online esistente".
3. Verifica il focus e l'assegnazione del cliente, quindi avvia la scansione.

4. I dati online utilizzati vengono elaborati di conseguenza da BCS e non sono più disponibili per altre scansioni dopo la scansione stessa.

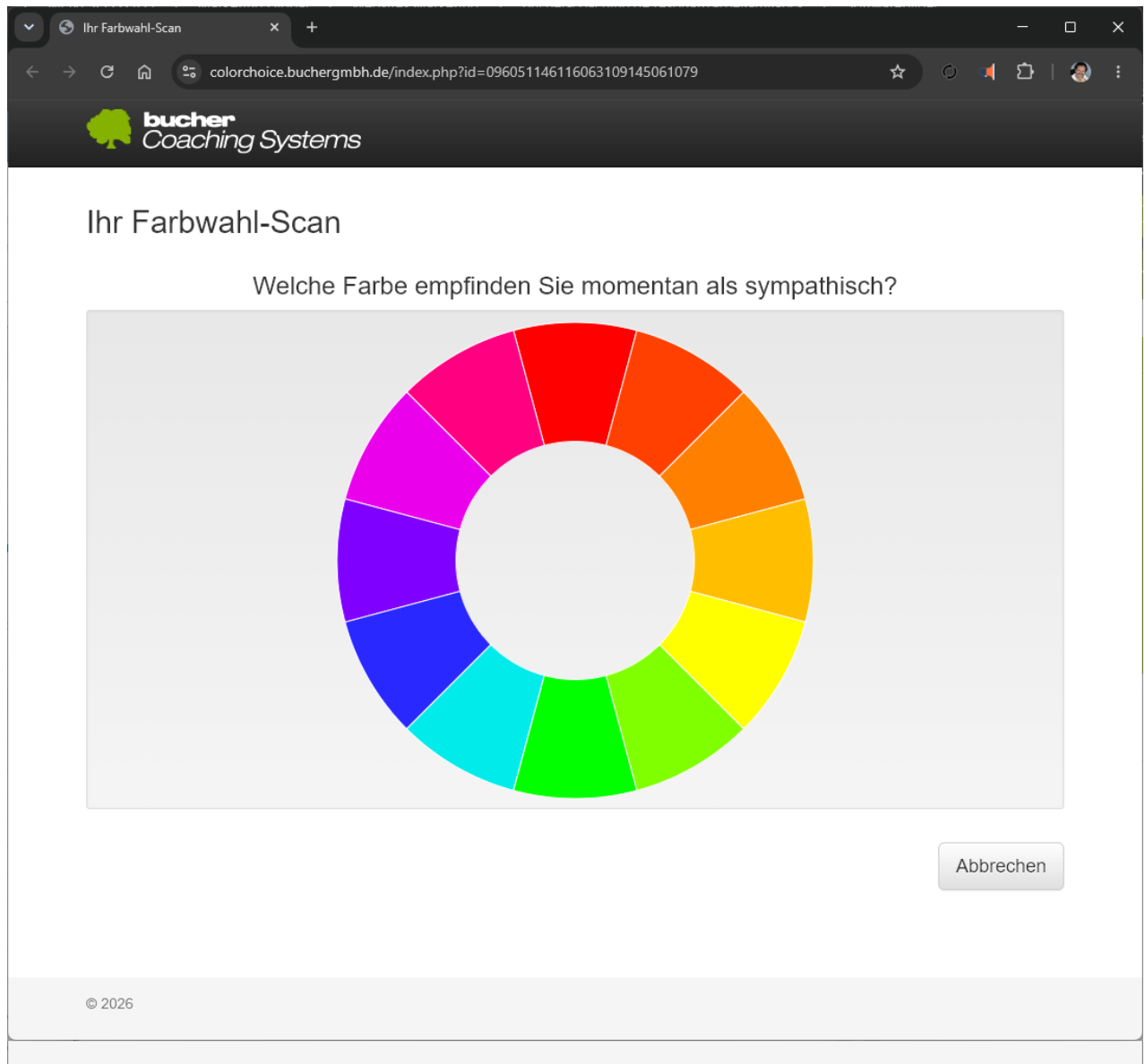

Il cliente esegue la scansione per la selezione del colore

3.3.6.6 Includi facoltativamente i frattali nella scansione

Se la funzione frattale è abilitata, è possibile generare un frattale durante la scansione o applicarlo in base alle impostazioni selezionate. Questa opzione è visibile solo se il modulo corrispondente è attivo. Un frattale migliora la visualizzazione, ma non sostituisce l'analisi di un esperto.

3.3.7 Utilizzo della tecnica di scansione di andamento

3.3.7.1 Principio di base della scansione di andamento

La scansione di andamento è la tecnica standard dell'Corpus Analyser. Utilizza le scansioni precedenti come base per il calcolo e ricava da esse la situazione attuale. Ciò consente di visualizzare le variazioni all'interno di un periodo di tempo correlato senza trattare ogni punto di scansione in modo isolato.

3.3.7.2 Utilizzare il suggerimento di scansione del programma

A seconda delle scansioni esistenti, BCS suggerisce una nuova scansione iniziale o la successiva scansione di andamento. In genere, utilizzare il pulsante di suggerimento evidenziato a sinistra.



Suggerimento per la scansione iniziale o di controllo

3.3.7.3 Avviare la scansione iniziale per una nuova cronologia

Una scansione iniziale costituisce il punto di partenza di un nuovo andamento. Utilizzarla per la prima scansione CA di un cliente o quando occorre documentare una nuova situazione iniziale chiaramente distinta dal punto di vista professionale. Prima di iniziare, verificare il cliente, il focus e l'hardware di scansione. Il sistema propone automaticamente una scansione iniziale, ad esempio alla prima scansione o quando è trascorso molto tempo dall'ultima. Di norma è quindi possibile utilizzare il pulsante più a sinistra dei tre pulsanti di scansione. Questo mostra un triangolo per una scansione iniziale o due triangoli per una scansione di andamento.

3.3.7.4 Avvia la scansione di andamento

È possibile avviare una scansione di andamento se esiste una scansione precedente adatta. Aprire la scansione CA, verificare il focus corrente e avviare la scansione di andamento suggerita. BCS incorpora le scansioni precedenti nel calcolo e salva la nuova scansione nella cronologia corrispondente.

3.3.7.5 Comprensione dei pulsanti di scansione disponibili e disabilitati

BCS attiva solo i pulsanti corrispondenti alla cronologia delle scansioni e alla licenza. Se non esiste una scansione iniziale adatta, viene proposta prima una scansione iniziale; una scansione di andamento può essere avviata solo in base a questa. Pertanto, ad esempio, non è possibile avviare la prima scansione per un cliente come scansione di andamento (due triangoli), poiché in tal caso questo pulsante è disattivato.

3.3.7.6 Osservare un intervallo minimo di 24 ore tra le scansioni.

Tra due scansioni CA deve trascorrere almeno un intervallo di 24 ore. Intervalli troppo brevi rendono difficile l'interpretazione professionale e possono portare a sopravvalutare le oscillazioni a breve termine. Se in un caso eccezionale motivato viene eseguita una scansione prima di questo termine, documentarne il motivo.


3.3.7.7 Quando è consigliabile una nuova scansione iniziale

Avvia una nuova scansione se l'argomento e la situazione iniziale sono cambiati in modo sostanziale, se la scansione precedente è tecnicamente completa o se la vecchia serie di scansioni non fornisce più una base significativa per i calcoli. Per le normali modifiche all'interno dello stesso argomento, utilizza una scansione di andamento. Il programma di solito suggerisce automaticamente il tipo di scansione appropriato, quindi in genere non è necessario discostarsi da questo suggerimento.

3.3.8 Eseguire la scansione

3.3.8.1 Avvio di una scansione e comprensione degli indicatori di stato

Avviare la scansione solo dopo aver verificato il focus, il cliente e l'hardware. Durante la scansione, BCS visualizzerà l'avanzamento e lo stato attuale del dispositivo. Seguire le istruzioni nell'interfaccia e non passare ad altre sezioni di BCS durante il processo di scansione.

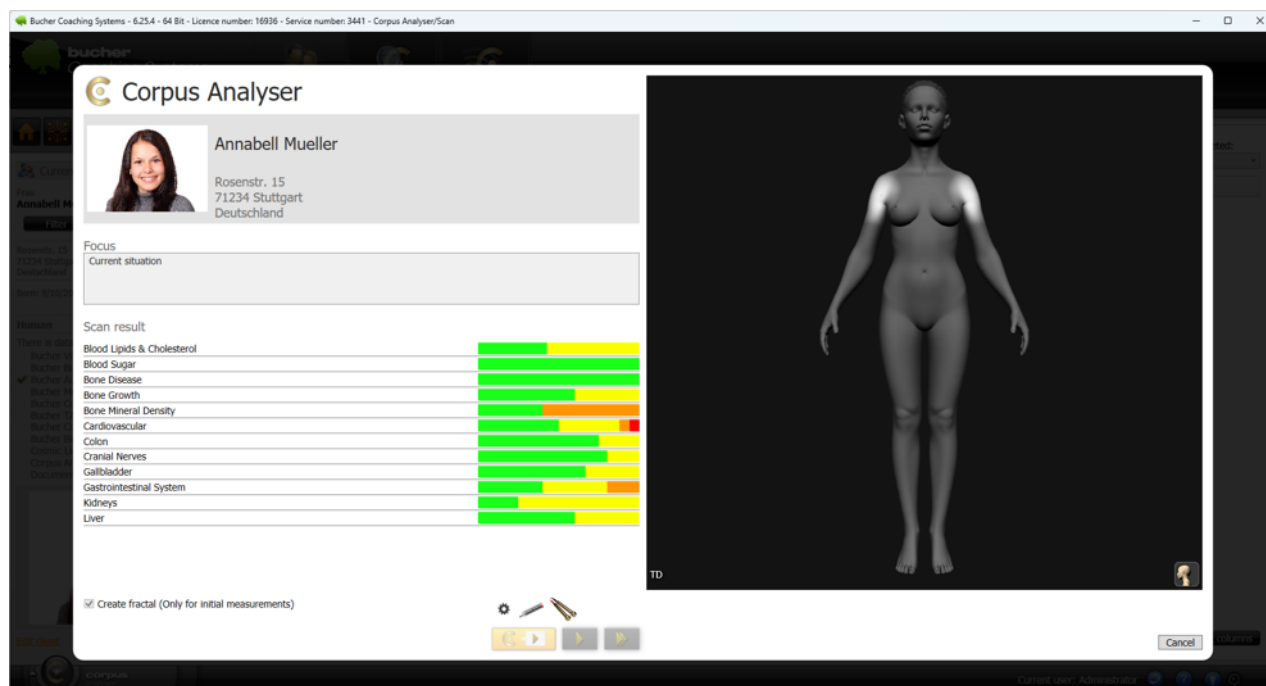

Scansione CA durante la procedura

3.3.8.2 Tenere fermo il sensore durante la scansione

Assicurarsi che il cliente tenga il sensore in modo delicato e il più immobile possibile. Evitare di parlare, cambiare mano, stringere il sensore con forza e tirare il cavo. Se il sensore viene accidentalmente appoggiato o scollegato, la scansione può essere ripresa riprendendolo. Tuttavia, se la connessione alla mano viene interrotta per troppo tempo, la scansione verrà interrotta.

3.3.8.3 Annulla la scansione o completa la scansione

Utilizzare il pulsante "Annulla" (in basso a destra della finestra) per terminare una scansione in corso. Una scansione annullata non viene salvata. Tutti i dati raccolti fino al momento dell'annullamento vengono eliminati. Attendere il completamento di una scansione normale e chiudere la finestra solo dopo la visualizzazione del messaggio di fine scansione. Una volta terminata la scansione, l'etichetta del pulsante cambia da "Annulla" a "Chiudi". Pertanto, attendere sempre che venga visualizzato "Chiudi" nell'angolo in basso a destra per evitare di perdere i dati della scansione.


3.3.8.4 Salvataggio automatico di una scansione completata

Una volta completata la scansione, BCS salva automaticamente i risultati sul cliente e li assegna alla cronologia appropriata. Non è necessario alcun ulteriore passaggio di salvataggio nella finestra di scansione. Successivamente, aprire Invia/Report per rivedere e interpretare i risultati.

3.3.9 Valutazione delle scansioni di andamento

3.3.9.1 Selezionare la scansione comparativa

Nella cronologia delle scansioni, è possibile visualizzare per confronto una scansione precedente o la scansione iniziale dello stesso ciclo.

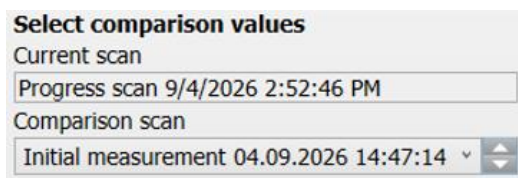

Select comparison values

Current scan

Progress scan 9/4/2026 2:52:46 PM

Comparison scan

Initial measurement 04.09.2026 14:47:14 ▼

Confronto tra valore iniziale, valore di scansione attuale e andamento

3.3.9.2 Distinzione tra valore iniziale, valore corrente e differenza

Il valore iniziale descrive il punto di partenza, il valore corrente la situazione appena calcolata e la differenza la sua variazione. A seconda delle impostazioni del report, può essere visualizzato anche il valore iniziale.

3.3.9.3 Valutazione dei cambiamenti, della direzione e del trend

Bisogna considerare non solo l'entità di una deviazione, ma anche la sua direzione, il contesto di gruppo e l'evoluzione temporale. Un singolo valore migliore o peggiore non costituisce di per sé una tendenza stabile. Un'evoluzione comprensibile emerge solo attraverso diverse osservazioni pertinenti e un confronto con il cliente.

3.3.9.4 Classificazione della scansione di andamento da una prospettiva professionale

Poiché l'analisi delle tendenze utilizza le analisi precedenti come base di calcolo, descrive la situazione attuale in relazione agli sviluppi passati. Non si tratta di una ripetizione indipendente di un test di laboratorio o di una verifica del dispositivo. Pertanto, qualsiasi variazione va interpretata come un'osservazione correlata al modello.

3.3.10 Visualizzazione e selezione dei risultati della scansione

3.3.10.1 Selezionare il ciclo e la scansione salvata

Apri Invia/Report e seleziona Corpus Analyser. Usa Ciclo di scansione o Selezione scansione per passare da una scansione salvata all'altra della cronologia selezionata. Verifica la data, l'ora della scansione e il focus prima di modificare o esportare i risultati.

Bucher Coaching Systems - 6.25.5 - 64 Bit - Licence number: - Corpus Analyser/Package list

bucher
Coaching Systems

Clients Scan Send/Reports

Send collective mailings from other therapists to receive credit points for your own mailings.

Measurement type: Progression scan technique Display measurements: Current client Current/Completed: All

	Scan date	Resonance factor	Transmission	End date	Recommendations	Mail delivery
1	9/15/2026 4:06:59 PM	16.9% (-0.8%)		10/13/2026 4:06:59 PM	✓	
2	7/5/2026 11:54:31 PM	17.7% (-0.2%)		8/2/2026 11:54:31 PM	✓	7/15/2026 1:30:05 I
3	7/5/2026 11:21:20 PM	17.9%		8/2/2026 11:21:20 PM	✓	

Frau Annabell Mueller

Filter

Rosenstr. 15
71234 Stuttgart
Deutschland

Born: 9/10/2003
Email: wolfgang@buchercoaching.de

Human

There is data in the following products:


- ✓ Bucher Vita Coach
- ✓ Bucher Business Coach
- ✓ Bucher Aura Coach
- ✓ Bucher Color Tuning 64
- ✓ Bucher TAO Medical
- ✓ Bucher Color Apps
- ✓ Bucher Bioresonance Triselect
- ✓ Cosmic Lights Balancing
- ✓ Corpus Analyser
- ✓ Dokumente

Reset columns

Seleziona la scansione CA salvata

3.3.10.2 Mostra i gruppi per intero, dopo la selezione, oppure compressi

I pulsanti sopra l'elenco dei risultati consentono di aprire tutti i gruppi, aprire una selezione specifica o comprimere tutti i gruppi. Utilizza la visualizzazione completa per la revisione e la visualizzazione filtrata per riunioni o report.

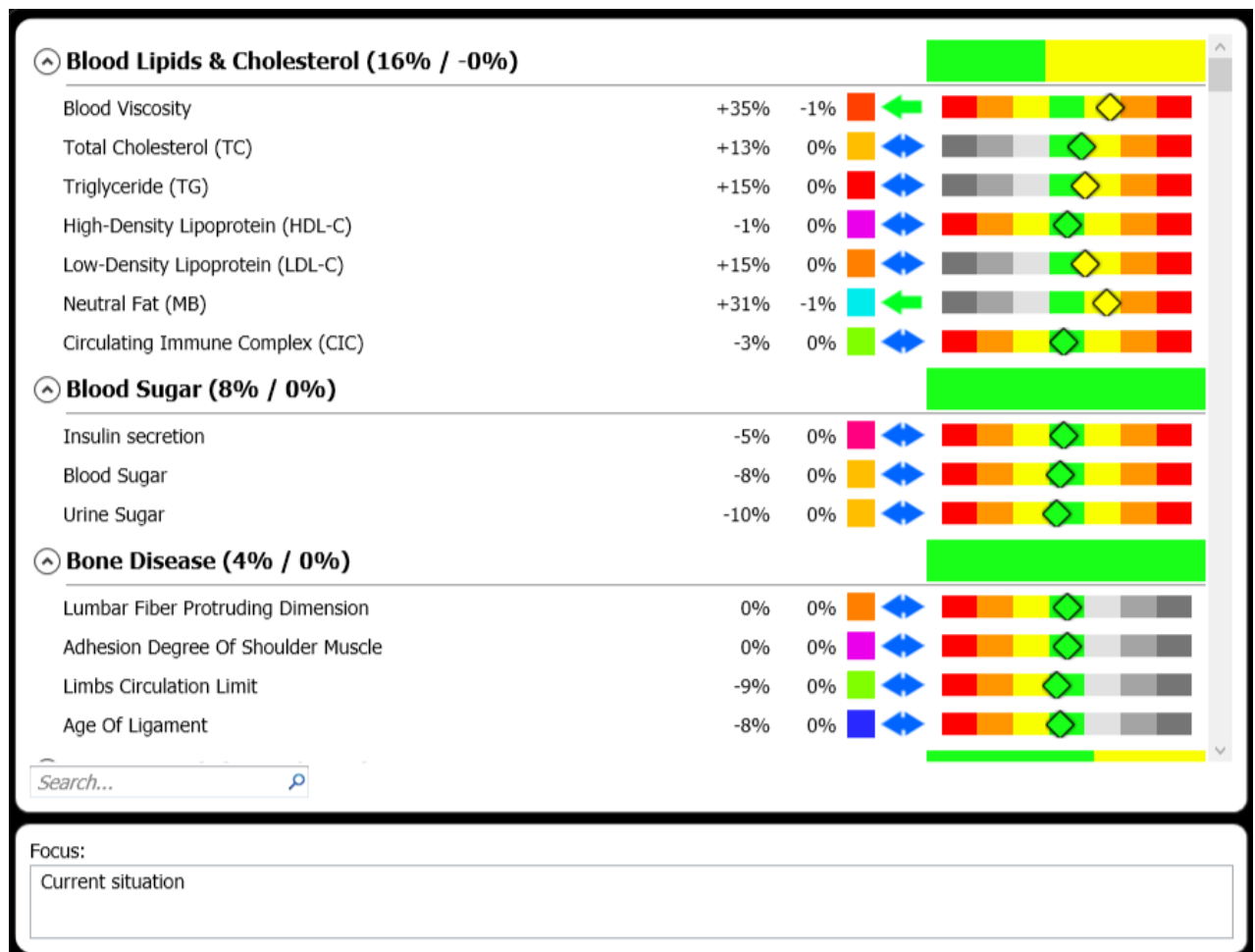

Risultati CA per gruppi, colori e filtri

3.3.10.3 Comprensione della panoramica dei risultati e della visione di gruppo

La panoramica dei risultati assegna i parametri ai rispettivi gruppi. I gruppi aiutano a collocare i singoli valori in un contesto più ampio. Apri un gruppo per visualizzare i parametri associati, i valori, i colori di valutazione e, se disponibili, i dati di confronto.

3.3.10.4 Interpretazione di percentuali e segni

Il segno indica la direzione di regolazione determinata dal modello, mentre l'entità rappresenta la portata della deviazione. Valori positivi e negativi non sono automaticamente buoni o cattivi. Idealmente, il valore è 0, il che significa né carenza né eccesso. Una carenza massima sarebbe -100 e un eccesso massimo sarebbe +100. Il fattore cruciale è la direzione prevista per il rispettivo parametro e come il valore si inserisce nel quadro generale.

3.3.10.5 Significato dei colori verde, giallo, arancione e rosso

I colori indicano diversi intervalli di deviazione. Il verde rappresenta un valore normale o vicino all'intervallo di riferimento; il giallo, l'arancione e il rosso indicano livelli crescenti di deviazione. Il colore serve da guida per la selezione e la definizione delle priorità, non come prova di una malattia.

3.3.10.6 Differenziare tra direzioni regolatorie positive, negative e impossibili

A seconda della sua definizione, un parametro può essere valutato in entrambe le direzioni o solo in una. Se non viene definita alcuna direzione per il parametro, la visualizzazione può apparire neutra o grigia. Si consideri il parametro pressione sanguigna: può essere troppo bassa (valori negativi) o troppo alta (valori positivi). Analogamente, si consideri il parametro prestazioni di memoria: la memoria può essere scarsa (intervallo negativo), ma non può mai essere troppo buona. Pertanto, il parametro memoria non può visualizzare valori positivi.

3.3.10.7 Applicazione di filtri di focus, selezione personalizzata e focus


Per la visualizzazione e la creazione di report, è possibile utilizzare un focus predefinito, una selezione di gruppo personalizzata o un filtro di focus. Questa selezione non modifica la scansione salvata, ma determina quali parametri sono visibili o rilevanti per la visualizzazione corrente. Ulteriori informazioni sui filtri di focus sono disponibili nella sezione 3.3.14.

3.3.10.8 Filtraggio dei gruppi di parametri e dei colori di valutazione

Seleziona i gruppi e i colori di valutazione applicabili alla rispettiva domanda. Almeno un colore di valutazione deve essere attivo. Prima di generare il report, verifica che il filtro non nasconda involontariamente connessioni importanti.

3.3.10.9 Visualizzare e stampare informazioni dettagliate su gruppi e parametri

Cliccando su un gruppo o un parametro si aprono le relative informazioni dettagliate. Il testo può essere utilizzato come sfondo per la conversazione e stampato tramite l'apposita funzione di stampa. Si prega di verificare che le informazioni corrispondano alla versione e alla lingua correnti.

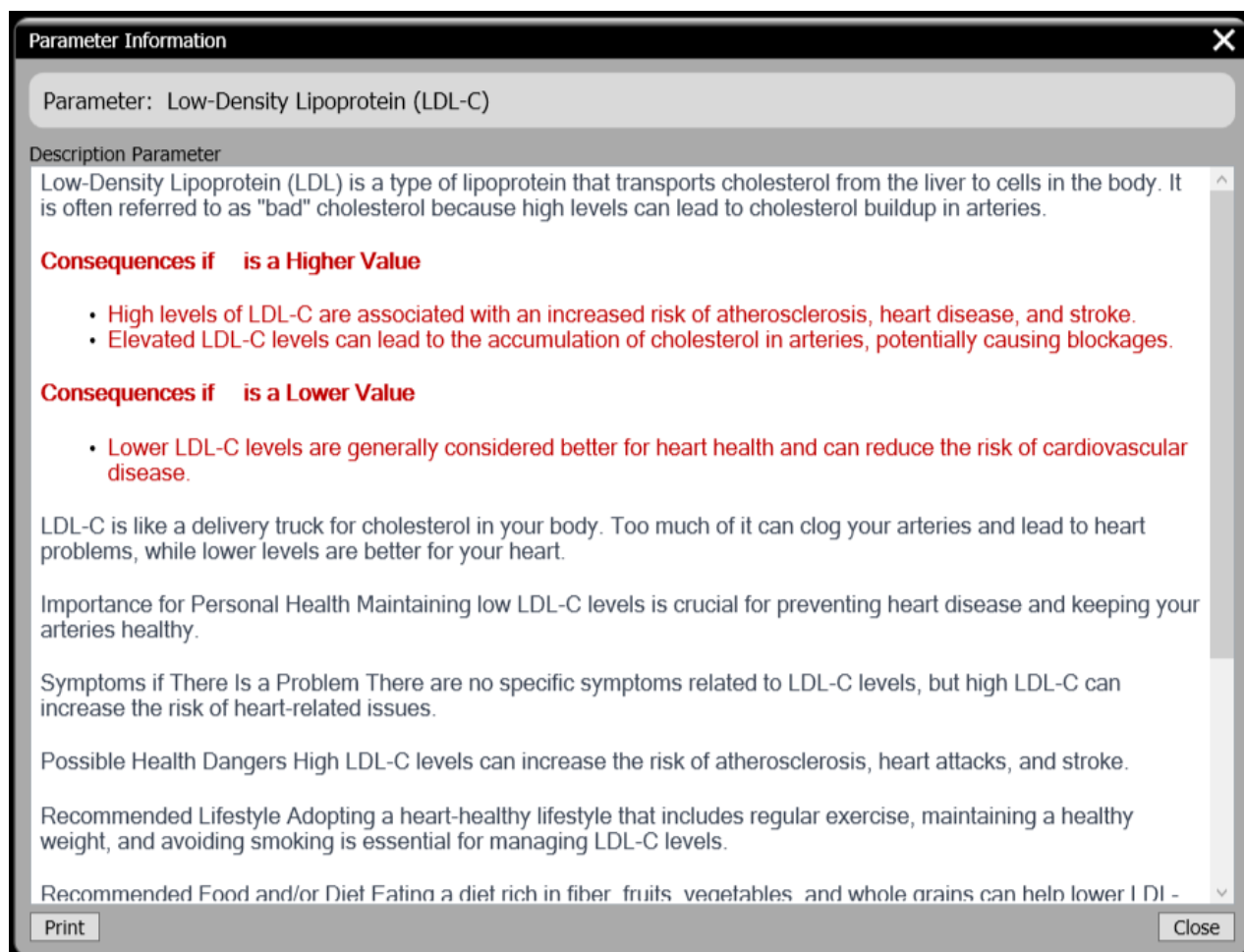

Informazioni dettagliate e raccomandazioni per un parametro CA

3.3.11 Classificare e discutere i risultati da una prospettiva professionale

3.3.11.1 Utilizzo delle informazioni relative al risultato del test

Iniziate con il quadro generale e con i gruppi di elementi correlati più evidenti. Utilizzate i test informativi come guida, non come diagnosi definitiva. Verificate se l'attenzione, la conversazione con il cliente e lo svolgimento degli eventi supportano tutti la stessa conclusione.

3.3.11.2 Utilizzo delle informazioni terapeutiche su parametri e gruppi

Le informazioni sulla terapia descrivono possibili collegamenti professionali e punti di partenza. Non adottare queste informazioni senza averle verificate. Seleziona solo le informazioni pertinenti alle tue qualifiche, alle problematiche del cliente e alla situazione attuale.

3.3.11.3 Dal sintomo alla relazione funzionale

Non limitarti a chiedere informazioni sul problema visibile, ma anche sulle possibili relazioni funzionali, la sua insorgenza, i fattori di stress e le risorse. L'Corpus Analyser può aiutare a organizzare le problematiche e a sviluppare ulteriori domande.

3.3.11.4 Cause primarie, conseguenze secondarie e compensazioni

Un gruppo evidente può essere il punto di partenza, la conseguenza o la compensazione di un'altra correlazione. Pertanto, è importante ricercare schemi ricorrenti in più gruppi e punti temporali di analisi. Bisogna evitare di affermare che un singolo valore CA sia la causa di un sintomo.

3.3.11.5 Definizione delle priorità per il supporto

Dai priorità a pochi temi motivati sul piano professionale. Considera l'entità della deviazione, il legame con il focus, l'andamento, la situazione quotidiana e la fattibilità. Un ordine chiaro è più utile di un lungo elenco di tutti i valori anomali.

3.3.11.6 Spiegare i risultati in modo comprensibile e senza formulare una diagnosi.

Utilizza frasi chiare come: "L'analisi CA mostra una maggiore deviazione in quest'area" o "Questa correlazione è cambiata nel tempo". Evita espressioni come "Hai..." o "La scansione dimostra che...". Concedi al cliente il tempo necessario per porre domande e documenta i passaggi successivi concordati.


3.3.12 Armonizzazione e trasmissione

3.3.12.1 Verifica attivazione e disponibilità

L'armonizzazione CA è una funzionalità aggiuntiva e non è attivata per molti clienti. Non può essere utilizzata senza la licenza appropriata; in tal caso, i controlli saranno nascosti o disabilitati.

3.3.12.2 Distinguere tra trasmissione automatica e manuale

Quando la funzione è abilitata, l'armonizzazione può essere avviata automaticamente durante la scansione, a seconda delle impostazioni, oppure manualmente in un secondo momento tramite Invia/Report. Se la funzione di armonizzazione non è abilitata, non sono disponibili né l'armonizzazione automatica né l'invio manuale delle CA.

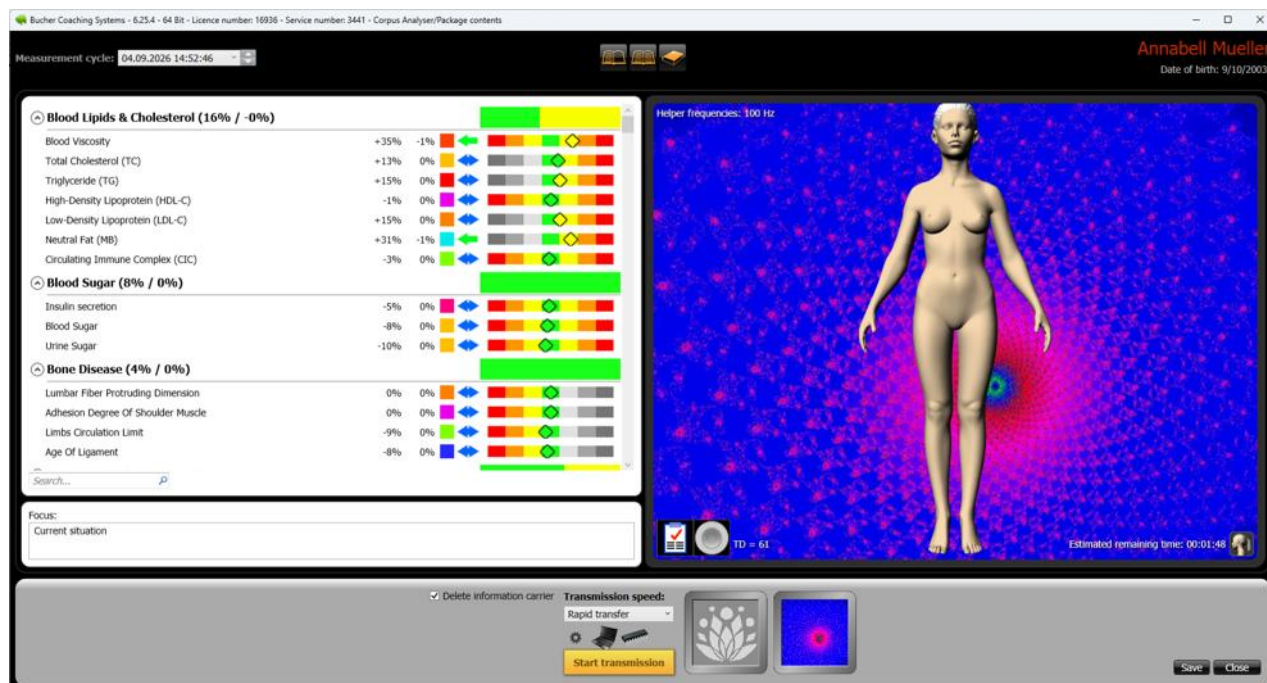

Preparazione all'armonizzazione CA

3.3.12.3 Selezionare il pacchetto da trasmettere

Utilizzare sempre la misurazione più recente per il processo di trasmissione (armonizzazione). Aprire la scansione desiderata in Invia/Report e verificare la data di scansione, il focus e i parametri visibili.

3.3.12.4 Selezionare la velocità di trasmissione

Selezionare la velocità di trasmissione desiderata. Sono disponibili le seguenti velocità di trasmissione:

- Veloce
- Medio
- Lento
- Rapid Transfer

Il tempo visualizzato nell'angolo in basso a destra rappresenta la durata stimata della trasmissione corrente. I valori per Veloce, Medio e Lento, configurati nelle impostazioni CA, controllano questa durata della trasmissione; non devono essere confusi con la durata della trasmissione successiva. Il Rapid Transfer utilizza la massima velocità di trasferimento possibile. Utilizzare il Rapid Transfer quando il cliente non è presente o quando si sta preparando un supporto informativo. Utilizzare la modalità media per un'applicazione guidata in modo mirato con un cliente presente.

Una trasmissione più lenta non è sinonimo di maggiore potenza o qualità superiore; si limita semplicemente a prolungare il processo di trasmissione immediatamente visibile.

La durata della trasmissione successiva è di quattro settimane per impostazione predefinita, indipendentemente dal fatto che l'impostazione sia Rapid Transfer, Veloce, Media o Lenta. Verificare


separatamente la durata della trasmissione, l'intensità, il ciclo e le altre opzioni di trasmissione. Vedere anche la sezione 2.7, " Distinzione tra durata della trasmissione e velocità di trasmissione ".

3.3.12.5 Configurazione dell'hardware di trasmissione e delle proprietà di trasmissione

Dopo la reinstallazione, i parametri di trasmissione standard sono già configurati correttamente. Se si desidera comunque modificare i parametri di trasmissione, aprire le proprietà di trasmissione e verificare l'hardware attivo, le opzioni di trasmissione disponibili e, se necessario, gli orari di inizio e fine dell'applicazione. L'opzione "Trasmetti sul sensore CA" deve essere abilitata nella gestione hardware solo se la configurazione attivata la prevede.

3.3.12.6 Utilizzo dell'applicazione di luce colorata e della visualizzazione VR

Durante una trasmissione attiva, BCS può visualizzare i colori rilevati e, con hardware appropriato, riprodurli sotto forma di luce colorata (ad esempio, sensore CA o TweakLite). La visualizzazione in realtà virtuale alterna la visualizzazione dei risultati con quella della luce colorata. Prima dell'uso, verificare che lo schermo e/o la sorgente luminosa siano adatti all'applicazione prevista.

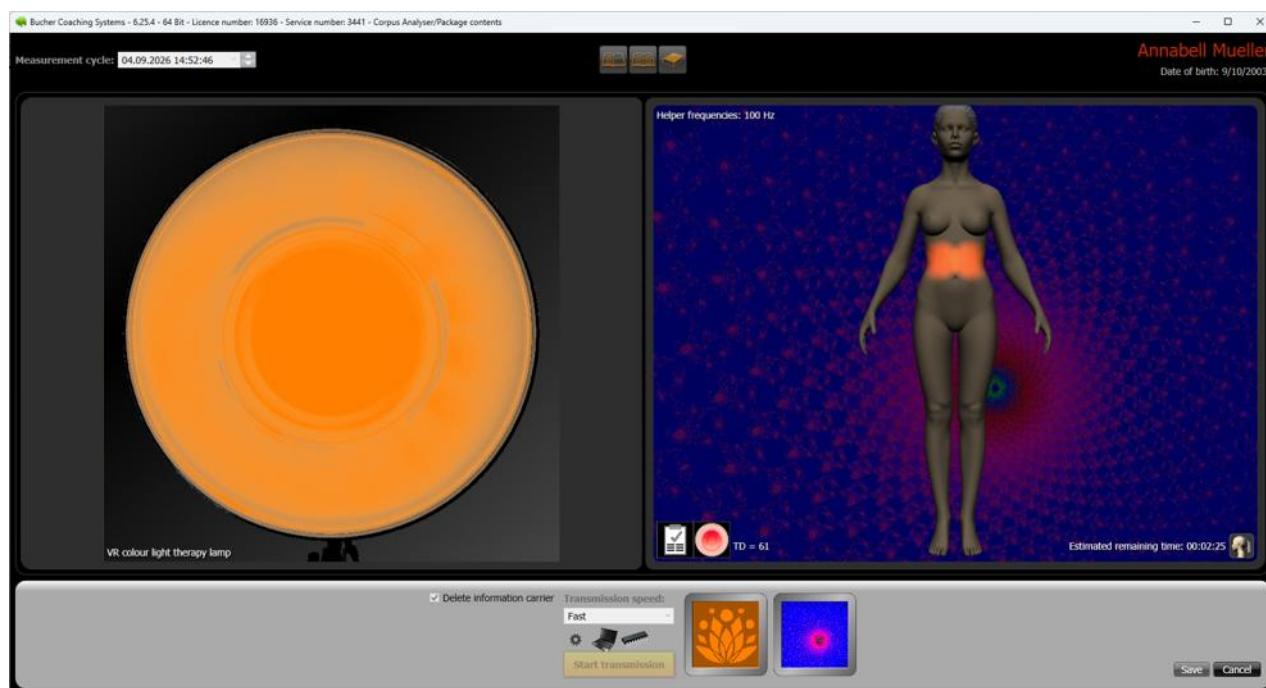

Avanzamento dell'armonizzazione CA

3.3.12.7 Utilizzare l'armonizzazione acustica

Le campane tibetane o le opzioni musicali attivate possono fornire un accompagnamento acustico alla sessione. Imposta un volume appropriato e informa il cliente. Se l'opzione non è visibile, significa che non è installata o non è abilitata.

3.3.12.8 Visualizza frattali e invia colori frattali

Quando la funzione frattale è abilitata, la finestra di trasmissione visualizza il frattale associato alla scansione. I colori frattali possono essere visualizzati nella vista dettagliata e, se disponibili, inclusi nella trasmissione. Verificare se viene utilizzato il frattale iniziale o un frattale appena generato.

3.3.12.9 Avviare, monitorare e annullare una trasmissione

Avvia la trasmissione solo dopo aver verificato tutte le impostazioni. BCS mostra l'avanzamento, il colore e il tempo rimanente. Fai clic su «Annulla» per interrompere il processo. Dopo un'interruzione, verifica se la trasmissione è stata salvata e con quale stato.

3.3.12.10 Salva le modifiche e verifica lo stato della trasmissione

Salva le modifiche al focus o alle altre impostazioni modificabili tramite il pulsante Salva. Una trasmissione completata riceve un'indicazione temporale. Verifica questo stato nella panoramica delle scansioni prima di documentare il processo o generare un report.

3.3.13 Creazione di report e valutazione dell'IA in Corpus Analyser

Pressure selection

Choose what you want to print for species Human.

☒ Patient printout
☐ Therapist printout
☐ My selection

Select all
Select none

Selection of group focus

☐ Groups
☐ Blood values
☐ Digestion
☐ Nutrition
☐ Organs
☐ Chakras

☐ Acids
☐ Stress
☐ Diabetes
☐ Chronic fatigue
☐ Depression
☒ M1

Filter for evaluation colour

☒ Green
☒ Yellow
☒ Orange
☒ Red
☐ Info text
☐ Info text

Select comparison values

Current scan
Progress scan 9/4/2026 2:52:46 PM
Comparison scan
Initial measurement 04.09.2026 14:47:14

Associated parameter groups

☒ Blood Lipids & Cholesterol
☐ Blood Sugar
☐ Bone Disease
☐ Bone Growth
☐ Bone Mineral Density
☒ Cardiovascular
☐ Colon
☐ Cranial Nerves
☐ Gallbladder
☐ Gastrointestinal System
☐ Kidneys
☐ Liver
☐ Lungs
☐ Musculoskeletal Disorders
☐ Pancreas
☐ Thyroid
☐ Vascular Hemodynamic
☐ Amino Acids
☐ Coenzymes
☐ Fatty Acids
☐ Lecithin
☐ Trace Elements
☐ Vitamins
☐ Connective Tissue

☐ Endocrine system
☐ Eyes
☐ Immune System
☐ Meridians
☐ Skin
☐ Allergies
☐ General physical condition
☐ Heavy Metals
☐ Homotoxicology
☐ Obesity
☐ Scars
☐ Male Hormones
☐ Male Sexual Function
☐ Prostate
☐ Sperm and Semen
☐ ADHD
☐ Brainpower
☐ Chakras
☐ Human Consciousness Level
☐ Female Hormones
☐ Menstrual Cycles
☐ Breasts
☐ Gynaecology

Additional printouts

☒ Focus
☒ Fractal graphic

AI reports

☒ Evaluation of individual scan results
☐ Therapeutic evaluation
☐ Recommendations for the client
☐ Affirmations 4-week plan
☐ Fractal interpretation
☐ Individuell 1
☐ Individuell 2

Available parameters: 3

Continue Save as default Cancel

Selezione dei contenuti per un report CA

3.3.13.1 Apertura della selezione del report

In Invia/Report, seleziona la scansione CA desiderata e apri la funzione di stampa o report utilizzando il piccolo pulsante con l'icona della lente d'ingrandimento. La selezione visualizza il contenuto del report disponibile per la scansione, la licenza e i testi IA salvati.

3.3.13.2 Profili del report “Stampa per il paziente” ed “Stampa per il terapeuta”

Nella finestra "Selezione di stampa", scegli il profilo "Stampa per il paziente" per un report chiaro e conciso da presentare al cliente, oppure "Stampa per il terapeuta" per un report interno più

dettagliato. Puoi selezionare separatamente i contenuti di stampa e quelli generati dall'IA per ciascun profilo. Fai clic su "Salva come predefinito" per fare in modo che BCS riutilizzi la selezione corrente per quel profilo al successivo accesso. Quindi passa al secondo profilo e salva la relativa selezione allo stesso modo.

3.3.13.3 Impostazione del focus, selezione personalizzata o filtro di focus

Specifica se utilizzare un focus predefinito, una selezione personalizzata o un filtro di focus. La selezione controlla quali parametri vengono inclusi nel report. Visualizza l'anteprima del risultato.

3.3.13.4 Selezione dei gruppi di parametri e dei colori di valutazione

Attiva i gruppi richiesti e almeno un colore di valutazione. Un filtro troppo restrittivo può nascondere connessioni importanti; una selezione troppo ampia può allungare inutilmente il report. Allinea l'ambito e il pubblico di destinazione.

3.3.13.5 Selezionare i valori di confronto e la scansione di confronto

Per le scansioni di andamento, è possibile selezionare i valori di confronto e una scansione precedente pertinente all'interno del ciclo. Verificare la data e la sua rilevanza rispetto alla tendenza. Utilizzare il confronto solo se contribuisce a chiarire l'andamento.

3.3.13.6 Includere il focus, il frattale e altri contenuti del report


A seconda della scansione e della licenza, è possibile attivare informazioni aggiuntive come il focus, la struttura frattale e altre ancora. I contenuti inesistenti vengono disattivati. Includere solo elementi comprensibili e tecnicamente rilevanti per il destinatario.

3.3.13.7 Includere le valutazioni sull'IA nel rapporto

Le valutazioni IA memorizzate e disponibili possono essere selezionate singolarmente. Leggere attentamente ogni testo prima di inviarlo. Rimuovere i contenuti IA non revisionati o non pertinenti al tipo di report selezionato.

3.3.13.8 Controlla il report, stampalo e salvalo come PDF

Apri l'anteprima di stampa e verifica il cliente, la data, l'impostazione, il numero di pagine, la selezione e il testo IA. Quindi seleziona la stampante o l'output PDF. Se distribuisce i report PDF in formato elettronico, dovresti utilizzare la funzione di crittografia di BCS. In questo modo, i file PDF possono essere aperti solo con la password corretta.

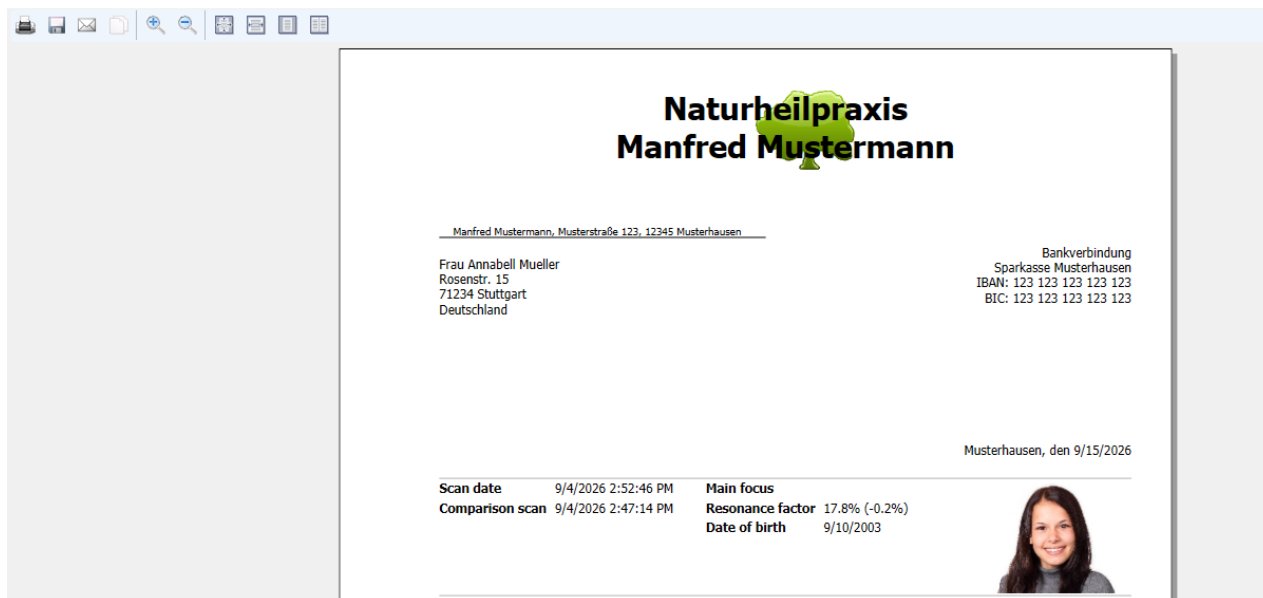

Revisione e output del report CA


3.3.13.9 Invia il report via e-mail

Una volta configurato l'invio tramite e-mail, il report può essere inviato direttamente dall'output. Verificare l'indirizzo del destinatario, il consenso, gli allegati e il testo del messaggio. Per i dati sensibili, utilizzare la crittografia protetta da password e non inviare il report a un indirizzo non verificato.

3.3.13.10 Utilizzo della valutazione tramite IA

Con l'intelligenza artificiale abilitata, i dati di Corpus Analyser possono essere elaborati per diverse aree di valutazione. Le aree di intelligenza artificiale visibili dipendono dalla configurazione e dalla licenza.

I testi generati dall'IA sono bozze e devono essere rivisti per verificarne l'accuratezza, la correttezza linguistica e la conformità alle normative sulla protezione dei dati. Non devono interpretare erroneamente gli indicatori di risonanza simbolica come diagnosi, affermazioni fattuali o promesse di guarigione. Istruzioni dettagliate, incluse le istruzioni per personalizzare i prompt e per salvare e caricare i set di prompt, sono disponibili nel Capitolo 4.1, "Valutazione tramite IA: lavorare con l'intelligenza artificiale nel BCS".

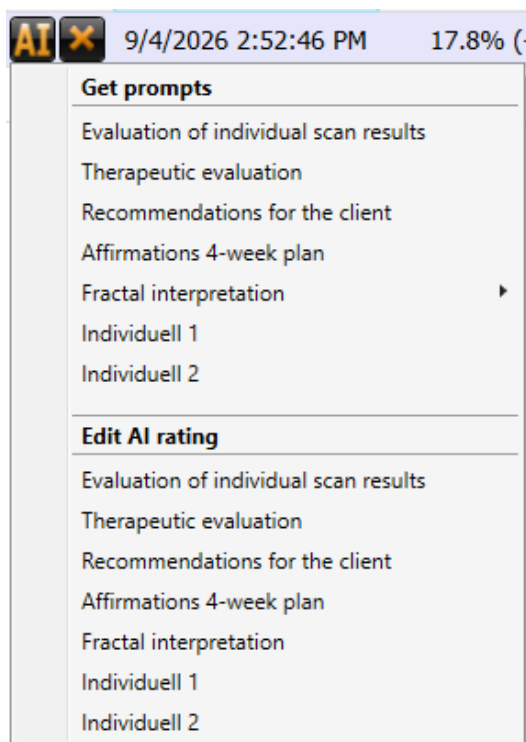

Preparazione di una scansione CA per la valutazione dell'IA

3.3.14 Creazione, scambio e utilizzo dei filtri di focus

Questi filtri vengono generalmente utilizzati sugli animali. Specie diverse richiedono set di parametri diversi, non tutti quelli utilizzabili per gli esseri umani, ad esempio.

3.3.14.1 Creazione di un filtro di focus personalizzato e selezione dei parametri

Apri Gestione filtri di focus e seleziona Nuovo filtro. Assegna un nome univoco, scegli la specie appropriata e aggiungi una breve descrizione. Quindi seleziona i parametri che il filtro deve includere e salva la selezione.

3.3.14.2 Modifica o eliminazione dei filtri di focus

I filtri personalizzati possono essere aperti e modificati per quanto riguarda nome, descrizione e selezione dei parametri. Elimina un filtro solo se non è più necessario per le impostazioni di stampa salvate. L'eliminazione non può essere annullata tramite la selezione del report.

3.3.14.3 Esportazione e importazione di filtri di focus come file JSON

È possibile esportare il filtro di focus personalizzato come file JSON. Durante l'importazione, selezionare un file appropriato e quindi verificare il nome, la specie e la selezione dei parametri. Importare file solo da fonti attendibili.

3.3.14.4 Salvataggio online dei filtri di focus e impostazione della visibilità

Se la funzione online è disponibile, puoi salvare il tuo filtro sul server Bucher. Specifica il nome dell'autore e una descrizione, e decidi se il filtro deve essere visibile solo a te o anche agli altri utenti. Non pubblicare dati personali nel nome o nella descrizione.

3.3.14.5 Ricerca, importazione o eliminazione di filtri di focus online

L'elenco online può essere ordinato e ricercato per nome, autore o descrizione. Importa un filtro per crearne una copia locale. A seconda delle autorizzazioni e dello stato, i filtri online personalizzati possono essere eliminati o la loro visibilità modificata.

3.3.14.6 Applicazione di filtri di focus nella visualizzazione dei risultati e nel report

Nella sezione "Risultati" o "Seleziona report", scegli il filtro di focus e quindi il filtro desiderato. BCS visualizzerà o stamperà solo i parametri pertinenti nei gruppi e nei colori di valutazione attivati. Controlla l'anteprima prima di salvare definitivamente il filtro nelle opzioni di stampa.

3.3.15 Gestione delle scansioni e dei risultati

3.3.15.1 Apertura delle cronologie salvate e dei cicli di scansione

Nella sezione Invia/Report, troverai le scansioni CA salvate per il cliente selezionato. Seleziona la cronologia corretta e naviga tra le scansioni utilizzando il ciclo di scansione. Data, focus e ora della scansione ti aiuteranno nell'assegnazione. L'elenco delle scansioni è ordinato in ordine decrescente per data, quindi la scansione eseguita più di recente è sempre in cima.

3.3.15.2 Salvataggio del focus e dei risultati modificati

Le modifiche alle impostazioni salvate non vengono sempre applicate automaticamente. Nella finestra dei risultati, utilizzare il pulsante Salva e rispondere attentamente a tutte le richieste quando si passa da un ciclo di scansione all'altro. Annullando, la selezione corrente viene mantenuta.

3.3.15.3 Esportazione e importazione di cliente, inclusi i dati di scansione

L'esportazione di un cliente può includere le relative scansioni CA. Utilizzare la funzione di gestione centralizzata dei clienti e, dopo l'importazione, verificare che tutte le scansioni siano assegnate al cliente corretto. Ulteriori dettagli sono disponibili nel capitolo generale sull'esportazione e l'importazione.

3.3.15.4 Eliminazione di scansioni o cronologie e valutazione delle conseguenze

Elimina le scansioni solo dopo aver verificato il cliente, la data e l'appartenenza al ciclo. Eliminando una scansione iniziale, vengono eliminate automaticamente anche tutte le scansioni di andamento associate. Prima di una pulizia importante, crea un backup aggiornato dei dati.

3.3.15.5 Includere i dati CA nel backup generale dei dati

Le scansioni CA vengono salvate insieme agli altri dati BCS. Verificare regolarmente che i backup automatici e manuali siano stati completati correttamente e che la posizione di backup sia disponibile. Il ripristino completo è descritto nel capitolo generale sul backup dei dati.

3.3.16 Errori comuni e soluzioni

3.3.16.1 Le informazioni obbligatorie fornite dal cliente sono mancanti o non plausibili.

Verifica la data di nascita, il sesso, la lingua, l'altezza e il peso e assicurati che le informazioni siano correttamente associate al cliente. Correggi le informazioni nel sistema di gestione clienti e riprova a eseguire la scansione.

3.3.16.2 La scansione di andamento richiesta non è disponibile

Una scansione di andamento richiede una scansione precedente adeguata. Verificare che sia stato selezionato il cliente corretto e che sia stata eseguita almeno una scansione iniziale.

3.3.16.3 La scansione per la selezione del colore online non è disponibile.

Questa opzione viene visualizzata solo se esiste una scansione di selezione colore online completamente trasmessa per il cliente selezionato. Verifica la tua connessione internet, l'assegnazione del cliente e lo stato della selezione colore. Questa funzione è pensata per i clienti che non sono fisicamente presenti.

3.3.16.4 La scansione non si avvia, viene interrotta o non viene salvata

Verifica il sensore, la selezione dell'hardware, il focus e le informazioni richieste. Attendi almeno 24 ore tra una scansione e l'altra. Una scansione interrotta non verrà salvata come scansione completa; riavviala dopo aver risolto il problema.

3.3.16.5 Risultati, gruppi o parametri mancanti

Innanzitutto, apri tutti i gruppi e reimposta la selezione o i filtri. Verifica i colori di valutazione attivi, i punti focali e i filtri di focus. Le voci mancanti sono spesso solo nascoste e non eliminate dal risultato della scansione.

3.3.16.6 L'armonizzazione o la trasmissione non sono disponibili

L'armonizzazione CA deve essere abilitata separatamente. Senza una licenza, le finestre di trasmissione, l'armonizzazione automatica e le opzioni correlate non sono disponibili. Se la funzione è elencata nella licenza, verificare il sensore, l'hardware di trasmissione e l'opzione di trasmissione abilitata nelle impostazioni di gestione hardware.

3.3.16.7 Impossibile creare report, PDF o e-mail

Verifica che sia selezionato almeno un elemento del report, che sia disponibile una stampante o una destinazione PDF e che il percorso del report sia scrivibile. Per la posta elettronica, controlla le impostazioni del tuo account e-mail in Impostazioni / Impostazioni e-mail.

3.3.16.8 Il prompt dell'IA, gli appunti o la valutazione dell'IA non funzionano

Verifica che l'IA sia abilitata, che il prompt sia attivato e che la scansione sia selezionata. Ripeti il processo di copia se gli Appunti di Windows sono stati temporaneamente bloccati. Incolla la risposta solo nel campo di valutazione associato al prompt e salvala dopo la revisione.

Attualmente, non è possibile copiare simultaneamente il testo del prompt e l'immagine nell'IA quando si accetta il prompt per l'interpretazione frattale. In questo caso, è necessario trasferire il testo del prompt e l'immagine del frattale all'IA in due passaggi tramite gli appunti.

3.3.16.9 Il filtro di focus non può essere salvato, caricato o importato.

Verificare il nome del filtro, la specie e la selezione dei parametri. Per le funzioni online è necessaria una connessione a Internet. Quando si importa un file JSON, utilizzare un file di filtro valido e non modificato. Un filtro online esterno verrà creato come copia locale durante l'importazione.

3.3.17 Domande frequenti sull'Corpus Analyser

Come sceglie BCS tra una scansione iniziale e una scansione di andamento?

BCS tiene conto della cronologia delle scansioni precedenti. Se non è disponibile una scansione iniziale idonea, ne viene proposta una; successivamente, BCS suggerisce la scansione successiva disponibile.

Perché non vedo alcuna armonizzazione?

L'armonizzazione è una funzione di CA che deve essere attivata separatamente. Senza attivazione, non può essere utilizzata e i relativi controlli saranno nascosti o disabilitati.

Quando è utile una scansione online per la selezione del colore?

Se il cliente non può essere presente durante la scansione, può selezionare online da casa i colori, le forme e le tonalità preferite e quelle che non gradisce. I dati trasmessi potranno poi essere utilizzati come base per la scansione CA.

Con quale frequenza si può eseguire una scansione CA?

Tra due scansioni deve intercorrere un intervallo minimo di 24 ore. Intervalli più brevi devono essere considerati eccezioni, previa giustificazione professionale.

Le scansioni completate vengono salvate automaticamente?

Sì. Una scansione completata viene automaticamente assegnata al cliente e alla relativa cronologia. Una scansione interrotta non è considerata completa.

È possibile interpretare un valore percentuale come un valore di laboratorio?

No. Le percentuali CA descrivono la forza e la direzione all'interno del modello utilizzato. Non si tratta di quantità, concentrazioni o valori di laboratorio.

Posso includere testi generati dall'IA nel report senza controllarli?

No. Ogni risposta dell'IA deve essere verificata per accuratezza tecnica, conformità linguistica e rispetto delle normative sulla protezione dei dati, e modificata se necessario. La responsabilità rimane dell'utente.

Dove posso eseguire il backup di un cliente insieme alle scansioni CA?

Utilizzate la funzione centralizzata di esportazione e backup dei dati del sistema di gestione clienti. Istruzioni dettagliate sono disponibili nel capitolo del manuale generale.

3.4 Bucher TAO Medical

3.4.1 Panoramica e utilizzo previsto

3.4.1.1 Scopo e ambito di applicazione

Bucher TAO Medical è un modulo all'interno dei Bucher Coaching Systems. Combina l'I Ching come modello interpretativo tradizionale con informazioni interne al programma relative a punti di agopuntura, problematiche psicologiche e fisiche, tecniche di formulazione delle domande, nutrizione, rimedi e altre aree informative. I risultati supportano un approccio strutturato e il dialogo con il cliente.

Il processo tipico consiste nella selezione del cliente, nell'impostazione del focus, nella scansione iniziale o di follow-up, nella revisione dell'esagramma determinato e del suo contenuto associato, nella modifica facoltativa degli elenchi di punti di agopuntura e programmi, nella trasmissione di energia e nella generazione del report. A seconda del livello di attivazione, possono essere disponibili funzioni aggiuntive come l'analisi frattale, il riequilibrio dei meridiani, la modalità automatica, la luce colorata, la musica e le funzioni di intelligenza artificiale.

3.4.1.2 Funzioni principali in sintesi

- Scansioni iniziali e successive con suggerimento automatico del tipo di scansione appropriato.
- Determinazione del trigramma inferiore e superiore, delle linee variabili e dell'esagramma da essi formato.
- Rappresentazione di diverse prospettive interne dell'I Ching con un esagramma consigliato.
- Informazioni sulla risonanza dei punti di agopuntura, tra cui origine, lato del corpo e proprietà regolatrici.
- Testi significativi su psiche, corpo e tecniche di formulazione delle domande, oltre a informazioni supplementari su nutrizione e rimedi.
- Inclusione manuale o automatica dei programmi (opzionale).
- Immagini e video frattali facoltativi come supporto visivo per il lavoro e il dialogo.
- Trasmissione di energia tramite l'hardware configurato, nonché accompagnamento acustico e luminoso opzionale.
- Report, output in PDF, invio tramite e-mail e, se attivato, valutazioni tramite intelligenza artificiale.
- Modalità automatica opzionale per scansioni, trasmissioni e invio di report ricorrenti.

3.4.1.3 Funzioni dipendenti dalla licenza e dalla configurazione

La gamma di funzioni visibili dipende dalla versione di BCS, dai moduli aggiuntivi acquistati e dall'hardware disponibile. Ciò vale in particolare per la scansione dei programmi, l'analisi frattale, l'astrologia cinese con Lo Shu, l'equilibrio dei meridiani, la modalità automatica, l'applicazione di colori e luci, la musica e l'intelligenza artificiale. Le funzioni non attivate sono nascoste o non utilizzabili.

3.4.1.4 Differenziazione dalla diagnostica e dal trattamento medico

TAO Medical opera secondo un modello energetico e simbolico. Esagrammi, linee variabili, indicatori di risonanza, assegnazione di punti di agopuntura e testi che descrivono significati e rimedi non sono valori di laboratorio, reperti anatomici o diagnosi mediche. Non devono essere utilizzati per dimostrare o escludere una malattia.

Questo sistema non sostituisce una visita medica o un trattamento medico, psicoterapeutico o di agopuntura eseguito da un esperto, qualora necessario. In caso di disturbi, sintomi acuti o rischi per la salute, è opportuno consultare un professionista qualificato. L'utente è responsabile della selezione, classificazione, comunicazione e applicazione.

3.4.2 Modello tecnico di funzionamento

3.4.2.1 La medicina tradizionale cinese come quadro di riferimento

La Medicina Tradizionale Cinese (MTC) comprende diverse scuole di pensiero e pratiche sviluppatesi nel corso della storia. Tra i suoi componenti più noti figurano l'agopuntura, le terapie del movimento e la fitoterapia cinese. TAO Medical adotta termini e modelli selezionati dalla MTC per una prospettiva energetica e simbolica. Ciò non costituisce una valutazione scientifica o medica dei risultati della scansione.

3.4.2.2 I Ching, trigrammi ed esagrammi

L'I Ching, noto anche come Libro dei Mutamenti, descrive il cambiamento utilizzando otto simboli fondamentali, i trigrammi. Un trigramma è composto da tre linee continue o tratteggiate. Due trigrammi insieme formano un esagramma con sei linee; ciò si traduce in 64 esagrammi di base. Le singole linee possono essere contrassegnate come mutabili e indicare una transizione a una diversa prospettiva interpretativa.

Durante la scansione, TAO Medical identifica un trigramma inferiore e uno superiore, le linee variabili e l'esagramma risultante. I testi e i simboli grafici fungono da spunti strutturati per la riflessione e la discussione. Devono essere correlati all'obiettivo dichiarato e analizzati insieme al cliente.

3.4.2.3 Cinque prospettive interpretative interne al sistema

BCS può visualizzare cinque prospettive esagrammatiche interconnesse durante la scansione: diagnosi, prognosi, causa, partner e complemento. Il programma contrassegna una di queste prospettive come suggerimento. La selezione tiene conto, tra le altre cose, della costellazione delle linee mutabili.

Il termine "diagnosi" qui è semplicemente un nome sviluppato storicamente all'interno dell'interfaccia del programma. Non indica una diagnosi medica. Allo stesso modo, "prognosi" e "causa" sono prospettive simboliche dell'I Ching e non devono essere comunicate come una previsione confermata o una constatazione causale.


3.4.2.4 Punti di agopuntura nel modello operativo TAO

TAO Medical può assegnare punti di agopuntura da diverse fonti, come il risultato dell'I Ching, programmi specifici o calcoli opzionali di Lo Shu. I punti con più di una rilevanza vengono combinati; pertanto, le informazioni sulla fonte potrebbero indicare più fonti.

L'elenco dei punti è una selezione interna di informazioni energetiche basata su un programma. I modelli del corpo e dell'orecchio aiutano nell'orientamento e nella selezione manuale; da essi non si deve ricavare un'indicazione medica sui punti.

L'utilizzo di questo programma non autorizza l'inserimento di aghi, a meno che non si sia appresa tale procedura durante il proprio percorso formativo e si sia autorizzati a farlo. Tuttavia, è possibile massaggiare i punti di agopuntura per stimolarne energeticamente la funzione (digitopressione).

3.4.3 Prerequisiti e impostazioni di base

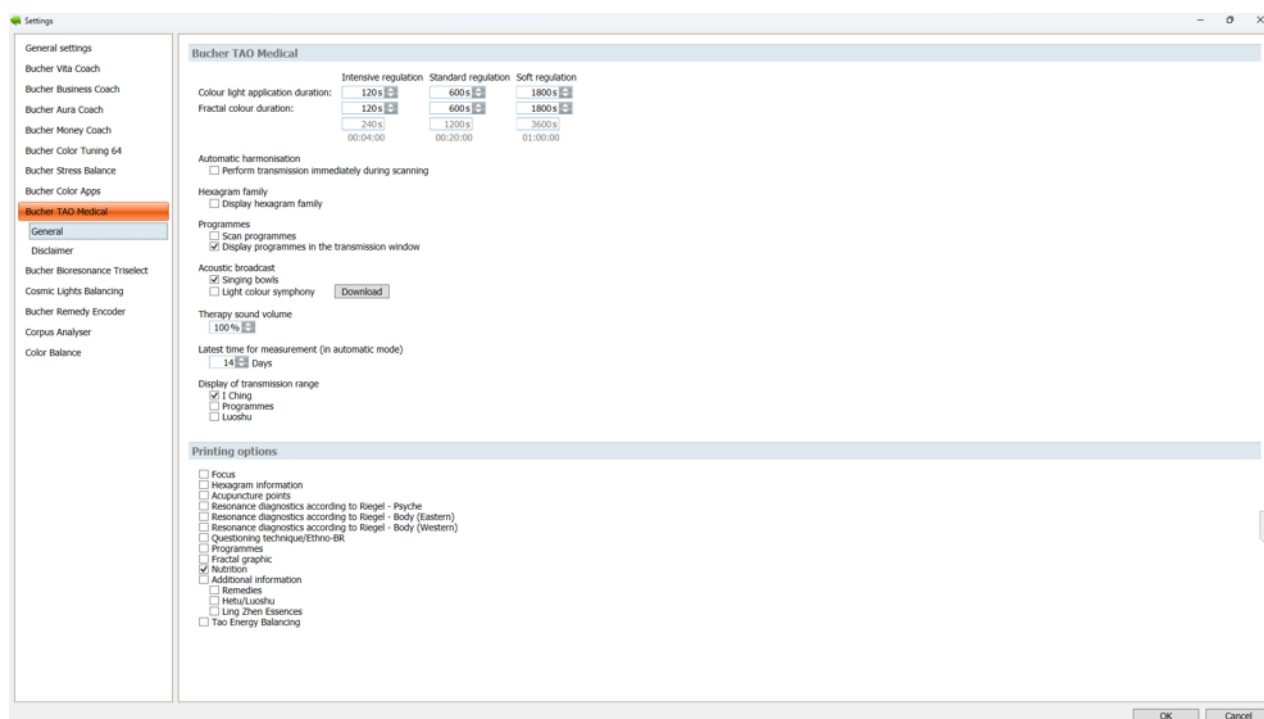

Impostazioni di base per Bucher TAO Medical

3.4.3.1 Preparazione del prodotto, del cliente e dell'hardware

Prerequisito: una versione di BCS installata e attivata con attivazione per Bucher TAO Medical. Selezionare TAO Medical nella barra dei prodotti e verificare il cliente corrente. Prima di iniziare, verificare l'hardware destinato alla scansione e all'invio.

Per la connessione tra cliente e sistema, si utilizza il termine neutro "interfaccia mente-materia". Le interfacce e le opzioni disponibili dipendono dalla configurazione del sistema BCS.

3.4.3.2 Aprire le impostazioni TAO

Aprire le impostazioni di BCS e selezionare la sezione TAO Medical. Qui, a seconda delle funzioni attivate, è possibile definire intervalli di tempo, impostazioni predefinite di scansione e trasmissione, funzioni del programma, accompagnamento audio, contenuti dei report e altre opzioni TAO. Verificare poi le modifiche nella scheda di un cliente prima di utilizzarle nel normale flusso di lavoro.

3.4.3.3 Impostare l'ora per una nuova scansione iniziale

Nelle impostazioni TAO, è possibile specificare l'intervallo dopo il quale BCS eseguirà un'altra scansione iniziale nella sua sequenza di scansione automatica o suggerita. Il valore regolabile va da 1 a 365 giorni; se non viene salvata alcuna impostazione personalizzata, il programma utilizza un valore predefinito. BCS tiene conto anche della cronologia delle scansioni e della modalità TAO attualmente attiva.

3.4.3.4 Programmi preimpostati e ambito di trasmissione

Se la scansione dei programmi è attivata, è possibile abilitare la ricerca automatica dei programmi come impostazione predefinita. Per la trasmissione si può specificare se includere i punti di agopuntura dell'I Ching, dei programmi, del Lo Shu o di una loro combinazione. Verificare questa selezione prima del primo utilizzo e nuovamente in caso di modifiche alla licenza o al metodo di lavoro.


3.4.3.5 Regolazione dell'accompagnamento acustico e cromatico-luminoso

A seconda delle impostazioni di attivazione e dell'installazione, è possibile attivare le campane tibetane o un'emissione luminosa colorata. Verificare il volume, il dispositivo di uscita e l'effetto sulla durata della trasmissione immediata. Un'opzione non visibile di solito non è attiva o non è disponibile nella configurazione corrente.

3.4.3.6 Preparazione dei profili di report

TAO Medical utilizza i profili di report salvabili separatamente "Stampa per il paziente" e "Stampa per il terapeuta" nella selezione di stampa. Seleziona il contenuto del report desiderato per ciascun profilo e salva la selezione con "Salva come predefinito". La prossima volta che accederai alla selezione di stampa, verrà utilizzata la selezione salvata per il profilo attivo.

3.4.4 Preparazione dei dati del cliente e focus

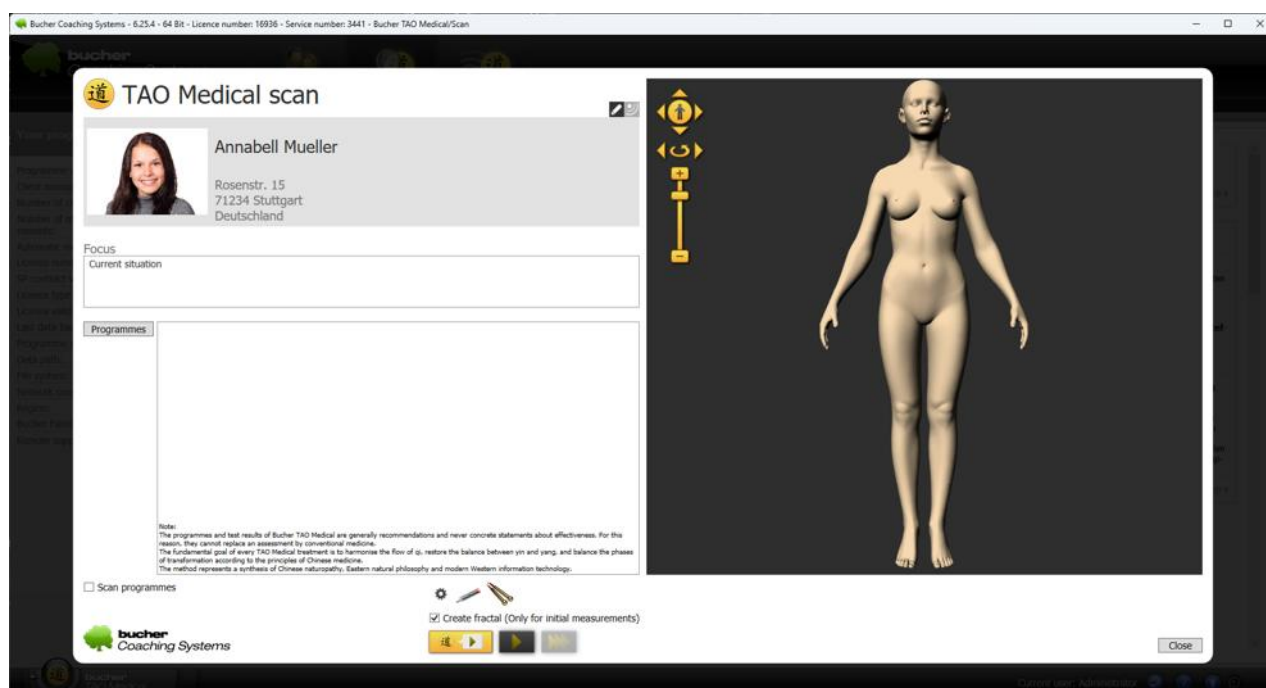

Preparazione del cliente, focus e programmi

3.4.4.1 Selezionare il cliente e verificare i dati

Aprire la sezione di gestione clienti e selezionare il cliente corretto. Nella finestra TAO, verificare il nome e la data di nascita. Per i calcoli astrologici cinesi opzionali, potrebbero essere richiesti anche l'ora di nascita e il sesso. Informazioni incomplete o errate influiranno su questi calcoli aggiuntivi.

3.4.4.2 Formulazione dell'obiettivo

Il focus descrive la domanda o l'argomento principale della scansione. Formulalo in modo conciso, neutrale e senza preconcetti. Evita diagnosi mediche, promesse di guarigione, istruzioni suggestive o domande che ammettono solo una risposta desiderata. Nel campo del focus, indica anche l'obiettivo che il cliente desidera raggiungere.


3.4.4.3 Selezione manuale dei programmi

A seconda delle impostazioni, i programmi possono essere selezionati manualmente e aggiunti all'elenco prima della scansione. Attivare solo le voci che corrispondono all'attenzione corrente e al flusso di lavoro previsto. I programmi selezionati manualmente rimangono distinguibili dagli indicatori di risonanza determinati automaticamente.

3.4.4.4 Utilizzo della scansione di selezione del colore online

La scansione online per la selezione del colore è particolarmente utile quando il cliente non può partecipare di persona, ad esempio a causa della distanza o perché non è possibile fissare un appuntamento in presenza. Il cliente seleziona online da casa i colori, le forme e le tonalità che preferisce e quelli che non gradisce. Dopo la trasmissione a BCS, un set di dati completo può essere utilizzato come base aggiuntiva per la scansione TAO.

3.4.5 Eseguire la scansione TAO

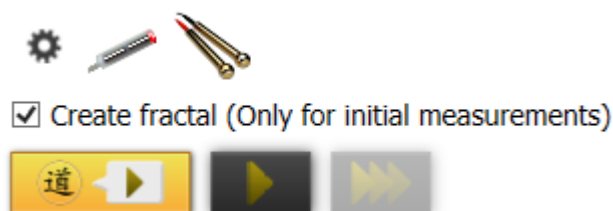

Preparare e avviare la scansione TAO

3.4.5.1 Differenziazione tra scansione iniziale e scansione di controllo

Una scansione iniziale avvia un nuovo ciclo di scansione. Una scansione successiva appartiene a un ciclo esistente e incorpora i dati della scansione precedente nella nuova situazione. BCS evidenzia il tipo di scansione consigliato in base alla cronologia e alle impostazioni.

Oltre al suggerimento automatico, potrebbero essere disponibili pulsanti separati per la scansione iniziale e per quella di controllo. Deviare dal suggerimento solo intenzionalmente. A seconda del flusso di lavoro abilitato e della cronologia esistente, la scansione di controllo potrebbe non essere disponibile o potrebbe essere necessaria una nuova scansione iniziale.

3.4.5.2 Verificare le opzioni prima di iniziare

- Verificare il nome del cliente, la data di nascita e l'ambito di intervento.
- Verifica l'interfaccia mente-materia attiva e le proprietà di scansione.
- Se necessario, attivare una scansione di selezione del colore online completamente trasferita.
- Verifica i programmi selezionati manualmente e, se abilitata, la ricerca automatica dei programmi.
- La creazione di frattali si attiva automaticamente quando la funzione è abilitata. Tuttavia, è possibile disattivarla in qualsiasi momento in modo che non venga rilevato alcun frattale durante la scansione.
- Quindi utilizzare il pulsante suggerito per la scansione iniziale o successiva.

3.4.5.3 Osservare e annullare il processo di scansione


Durante il processo, BCS visualizzerà gradualmente i trigrammi inferiore e superiore, le linee variabili e l'esagramma risultante. Attendere il completamento del processo. Interrompere solo se

necessario; un processo interrotto non è una scansione completa. Tutti i dati raccolti fino a quel momento verranno scartati e non salvati.

3.4.5.4 Salva scansione

Una scansione completata viene salvata con la data, il tipo di scansione, il focus, il risultato dell'I Ching, i punti di agopuntura associati, i programmi e altre informazioni di risonanza. Una scansione iniziale riceve una nuova assegnazione di ciclo; le scansioni successive vengono aggiunte al ciclo esistente. Al termine, verificare che il risultato sia stato salvato per il cliente corretto.

3.4.6 Interpretazione del risultato dell'I Ching

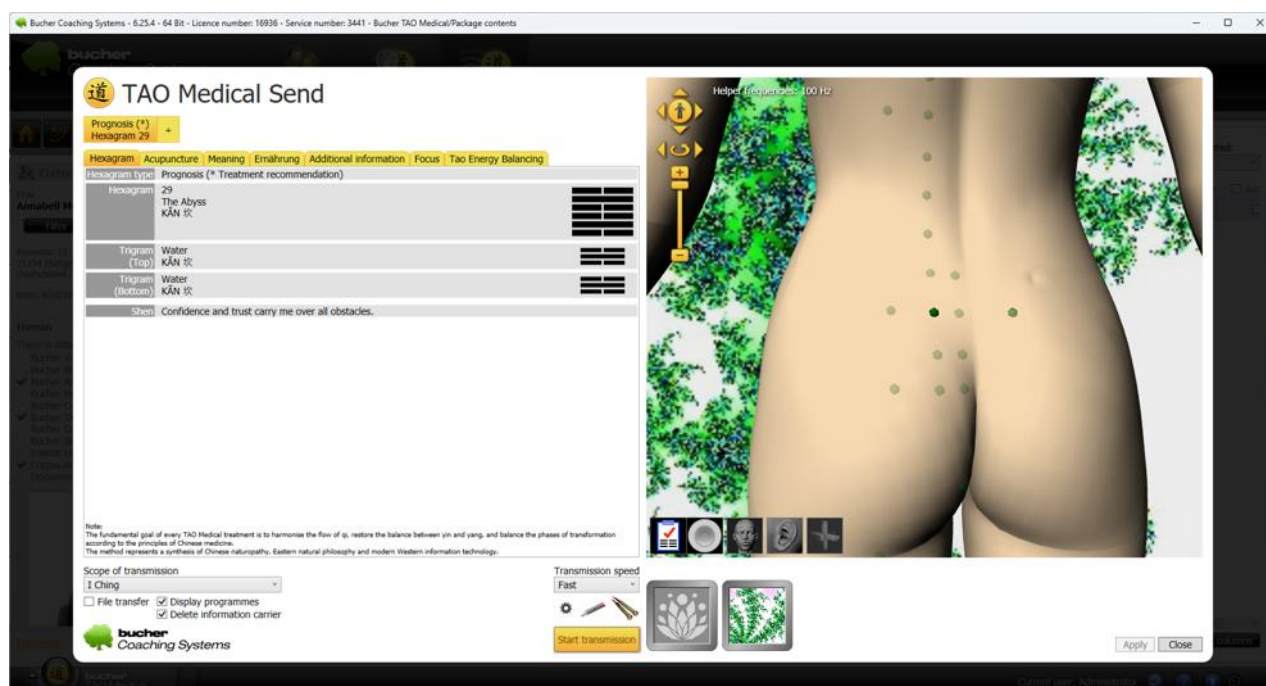

Risultato dell'I Ching con esagramma

3.4.6.1 Panoramica dell'esagramma

La visualizzazione dell'esagramma mostra il numero e il nome dell'esagramma, i trigrammi superiore e inferiore, la struttura delle linee, le linee variabili e altro testo associato. A seconda del contenuto, possono essere visualizzate anche le designazioni Shen o le formule. Fare sempre riferimento al focus salvato e al tempo di scansione selezionato durante la visualizzazione dei dati.


3.4.6.2 Esagramma consigliato e ulteriori prospettive

Il BCS indica una delle cinque prospettive – diagnosi, prognosi, causa, partner e complemento – come raccomandazione. È anche possibile visualizzare e confrontare le altre prospettive. La raccomandazione è uno strumento di selezione interno al programma e non determina quale interpretazione sia oggettivamente corretta.

3.4.6.3 Linee variabili

Le linee variabili (rosse o blu) nel modello dell'I Ching indicano una transizione o una dinamica. Il loro numero e la loro posizione influenzano la prospettiva suggerita dal programma. Utilizzate i testi di accompagnamento come potenziali spunti di riflessione o discussione, non come una previsione affidabile.

3.4.7 Utilizzo dell'elenco dei punti di agopuntura

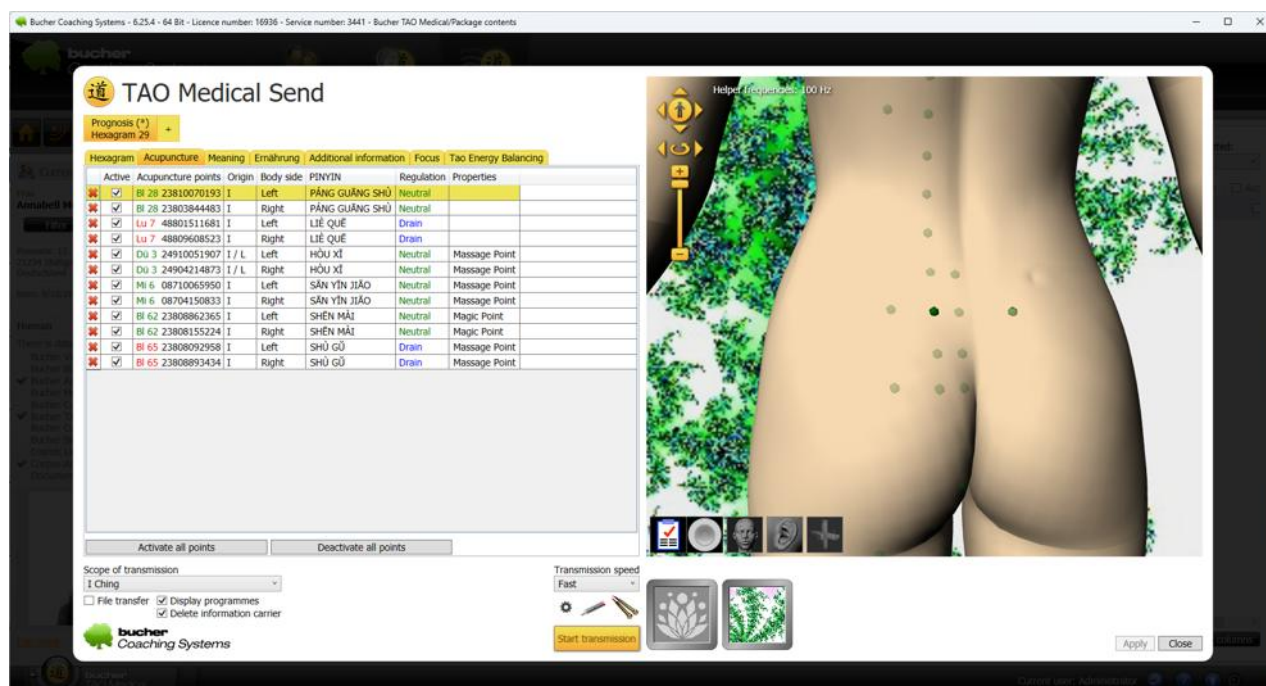

Utilizzare l'elenco dei punti di agopuntura

3.4.7.1 Leggere le informazioni sui punti

L'elenco può visualizzare, tra le altre cose, il nome del punto, il codice della MTC, l'origine, il lato del corpo, il nome in Pinyin, la regolazione e le proprietà. Le colonne visibili dipendono dalla visualizzazione e dalla configurazione. L'origine indica se un punto è stato ricavato dall'I Ching, da programmi, dal Lo Shu o da più fonti. Cliccando su un punto nell'elenco di agopuntura, questo viene visualizzato come punto sulla persona virtuale.

3.4.7.2 Filtraggio dei punti e classificazione della loro origine

I filtri aiutano a visualizzare i punti provenienti da aree di origine specifiche. Un punto può essere rilevante da più fonti contemporaneamente e quindi non viene duplicato inutilmente. Verifica le informazioni sulla fonte prima di rimuovere una voce che sembra essere duplicata.

3.4.7.3 Attivare, disattivare o rimuovere i punti

L'interruttore di attivazione determina se un elemento del programma è incluso nella trasmissione corrente. Gli elementi non necessari possono essere disattivati o rimossi dall'elenco utilizzando la "X rossa". Verificare la selezione attiva dopo ogni modifica del filtro e prima di avviare una trasmissione.

3.4.7.4 Aggiunta manuale di punti tramite modello del corpo o dell'orecchio

Utilizzando la vista 3D del corpo o la vista dell'orecchio, è possibile cercare e aggiungere manualmente ulteriori punti. Se si desidera aggiungere altri punti su un meridiano già utilizzato, fare clic su uno dei punti corrispondenti nell'elenco di agopuntura. Il punto verrà visualizzato con un colore più intenso. Gli altri punti su questo meridiano verranno visualizzati con un colore meno intenso. È possibile posizionare il puntatore del mouse su uno di questi punti per ottenere maggiori informazioni. Se si desidera includere uno di questi punti nei risultati della scansione, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e quindi fare clic con il pulsante sinistro per selezionare come

il punto deve essere stimolato. Il punto apparirà quindi nell'elenco di agopuntura. In alternativa, è possibile fare clic sull'icona "testa" nella parte inferiore della finestra della persona virtuale per visualizzare tutti i punti di agopuntura disponibili sulla persona virtuale e selezionare qualsiasi punto facendo clic con il pulsante destro del mouse. Inoltre, è possibile fare clic sull'icona dell'orecchio nella stessa finestra. Ciò consente di includere anche i punti di agopuntura dell'orecchio nel referto della scansione. Anche in questo caso, è possibile utilizzare il pulsante destro del mouse per selezionare i punti di agopuntura dell'orecchio. Se necessario, selezionare i punti sul lato del corpo desiderato (sinistro o destro). La posizione grafica serve come ausilio all'orientamento all'interno del programma e non sostituisce la localizzazione professionale dei punti sul corpo.

3.4.7.5 Verificare le proprietà di regolazione

Per ogni punto puoi visualizzare o selezionare una proprietà di regolazione:

- Apporto
- Neutro
- Drenaggio

Le modifiche influiscono sulle informazioni del punto preparate per la trasmissione.

3.4.8 Significati e aree di informazioni supplementari

3.4.8.1 Psiche

La sezione "Psiche" mostra i testi significativi e gli schemi di risonanza associati all'esagramma selezionato. A seconda dell'atteggiamento del cliente e del profilo del report, i contenuti sensibili potrebbero inizialmente rimanere nascosti. Formula i potenziali argomenti come ipotesi aperte e lascia al cliente lo spazio per concordare o dissentire.

3.4.8.2 Physis

La sezione "Physis" contiene testi relativi al corpo provenienti da diverse scuole di pensiero. Queste affermazioni sono indicazioni simboliche o di risonanza energetica e non riscontri medici.

3.4.8.3 Tecniche di formulazione delle domande

Le tecniche di formulazione delle domande favoriscono il dialogo attraverso domande preparate sull'argomento individuato. Scegliete domande appropriate alla situazione e ponetele in modo aperto, rispettoso e non tendenzioso. Non è necessario porre tutte le domande suggerite.

3.4.8.4 Nutrizione e rimedi

A seconda dei risultati, potrebbero comparire informazioni su nutrizione, erbe cinesi, formule standard, rimedi omeopatici o sali di Schuessler. Queste informazioni servono all'interpretazione interna del programma. Gli utenti sono responsabili del rispetto di intolleranze, interazioni, controindicazioni e restrizioni legali; la visualizzazione non costituisce una prescrizione o una raccomandazione di dosaggio.

3.4.8.5 Ulteriori informazioni ed essenze di Ling Zhen

Ulteriori informazioni possono includere classificazioni tradizionali, testi etnomedicinali ed essenze di Ling Zhen. Utilizzatele come supporto supplementare per la selezione e la discussione.

3.4.8.6 Hetu e Lo Shu opzionali

Con l'astrologia cinese attivata, è possibile visualizzare le informazioni Hetu e Lo Shu. Il calcolo utilizza, tra le altre cose, la data di nascita, l'ora di nascita e il sesso. I risultati sono corrispondenze tradizionali o numerologico-simboliche; non si tratta di una valutazione medica o psicologica.

3.4.8.7 Bilanciamento dei meridiani opzionale

L'equilibrio dei meridiani può mettere a confronto graficamente schemi energetici come yin e yang, sinistra e destra, alto e basso, o anteriore e posteriore, e visualizzare i punti corrispondenti. Utilizzate questa rappresentazione come ulteriore prospettiva interna.

3.4.8.8 Aggiungi focus

Nella sezione "Focus" è possibile documentare le proprie osservazioni o note esplicative relative alla scansione. Scrivere in modo obiettivo, conciso e chiaro. È inoltre possibile specificare gli obiettivi del paziente.

3.4.9 Utilizzo di immagini e video frattali

Dai risultati della scansione TAO è possibile creare un'immagine frattale individuale. Essa funge da rappresentazione visiva delle informazioni di scansione selezionate e può essere utilizzata per ulteriori elaborazioni con il cliente.

La creazione, l'utilizzo e l'interpretazione tramite intelligenza artificiale delle immagini frattali sono descritti in dettaglio nel Capitolo 4.2 " Funzione frattale di Bucher ".

3.4.10 Invio e applicazione energetica

3.4.10.1 Seleziona la scansione salvata

In Invia/Report, apri la scansione TAO desiderata. Verifica il cliente, la data, se si tratta di una scansione iniziale o di follow-up, il focus e l'esagramma attualmente selezionato. La trasmissione utilizza le informazioni della scansione aperta e attiva nella finestra.

3.4.10.2 Definire l'esagramma e i contenuti da trasmettere

Il programma utilizza in genere l'esagramma consigliato dal software; tuttavia, è possibile scegliere anche una prospettiva diversa tra le cinque disponibili. Successivamente, specificare quali punti di agopuntura includere. A seconda delle impostazioni, è possibile filtrare per I Ching, programmi, Lo Shu o combinazioni.

3.4.10.3 Verifica dei programmi e dei punti attivi

Visualizza l'elenco dei programmi, se necessario, e seleziona tutte le voci attive. Verifica anche l'elenco dei punti dopo aver applicato filtri o effettuato modifiche manuali. Solo i punti e i programmi attivati saranno inclusi nella sequenza di trasmissione programmata.

3.4.10.4 Selezionare la velocità di trasmissione

Selezionare la velocità di trasmissione desiderata. Sono disponibili le seguenti velocità di trasmissione:

- Veloce
- Medio
- Lento
- Rapid Transfer

Il tempo visualizzato nell'angolo in basso a destra rappresenta la durata stimata della trasmissione corrente. I valori per Veloce, Medio e Lento impostati nelle impostazioni TAO controllano la durata di questa trasmissione; non devono essere confusi con la durata della trasmissione successiva.

Il Rapid Transfer utilizza la massima velocità di trasmissione possibile. Utilizzare il Rapid Transfer quando il cliente non è presente o quando si sta preparando un supporto informativo. Utilizzare le

modalità In tempo reale, Media o Lenta per un'applicazione guidata intenzionalmente con un cliente presente.

Una trasmissione più lenta non è né più potente né di qualità migliore. La durata della trasmissione successiva è di default di quattro settimane, indipendentemente dalla velocità di trasmissione. Verificare separatamente la durata, l'intensità, il ciclo e le altre opzioni di trasmissione. Vedere anche la sezione 2.7, " Distinzione tra durata e velocità di trasmissione ".

3.4.10.5 Verificare l'hardware di trasmissione e i supporti informativi

Apri le proprietà di trasmissione tramite l'icona a forma di ingranaggio e verifica l'hardware attivo. A seconda della configurazione, la trasmissione può avvenire tramite vari dispositivi, trasferimento file o un supporto informativo. La funzione per eliminare o preparare un supporto informativo deve essere utilizzata solo per il supporto attualmente selezionato.

3.4.10.6 Utilizzo delle opzioni di illuminazione acustica e colorata

Attiva le campane tibetane o l'emissione luminosa colorata secondo necessità. Imposta un volume confortevole e verifica la connessione hardware. I colori frattali o altre informazioni cromatiche TAO possono essere incorporate nel processo, a seconda dell'attivazione e della selezione.


3.4.10.7 Avviare, monitorare e annullare la trasmissione

- Verifica la scansione selezionata, l'esagramma, i punti attivi, i programmi, la durata e l'hardware.
- Fai clic su Invia e controlla lo stato e il tempo rimanente sulla destra, sotto la persona virtuale.
- Lasciate che l'intero processo previsto segua il suo corso.
- Se necessario, annulla utilizzando il pulsante visualizzato e quindi verifica lo stato salvato.

3.4.10.8 Verifica del completamento

Al termine di una trasmissione completa, BCS salva il momento della trasmissione nella scansione corrispondente.

3.4.11 Rapporti e valutazioni sull'IA

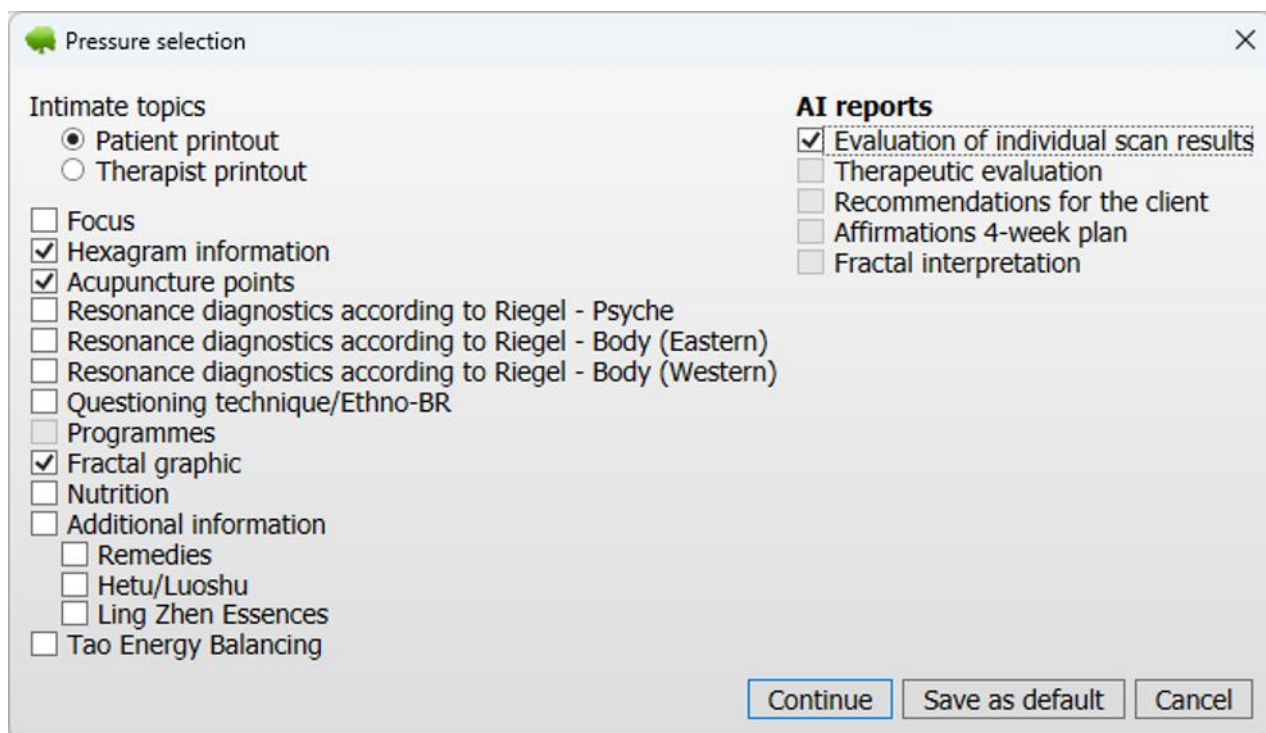

Pressure selection

Intimate topics

☒ Patient printout
☐ Therapist printout

☐ Focus
☒ Hexagram information
☒ Acupuncture points
☐ Resonance diagnostics according to Riegel - Psyche
☐ Resonance diagnostics according to Riegel - Body (Eastern)
☐ Resonance diagnostics according to Riegel - Body (Western)
☐ Questioning technique/Ethno-BR
☐ Programmes
☒ Fractal graphic
☐ Nutrition
☐ Additional information
☐ Remedies
☐ Hetu/Luoshu
☐ Ling Zhen Essences
☐ Tao Energy Balancing

AI reports

☒ Evaluation of individual scan results
☐ Therapeutic evaluation
☐ Recommendations for the client
☐ Affirmations 4-week plan
☐ Fractal interpretation

Continue Save as default Cancel

Seleziona i report TAO e la valutazione dell'IA

3.4.11.1 Apri la selezione del report

Seleziona la scansione TAO desiderata e apri la funzione di stampa o di report. A seconda del risultato e della licenza, puoi selezionare, tra le altre cose, focus, esagramma, punti di agopuntura, psiche, Physis, tecniche di formulazione delle domande, programmi, grafica frattale, nutrizione, rimedi, essenze Hetu, Lo Shu, Ling Zhen e equilibrio dei meridiani. I contenuti non disponibili sono disabilitati.

3.4.11.2 Differenziare tra “stampa per il paziente” ed “stampa per il terapeuta”

Il profilo "Stampa per il paziente" è pensato per una comunicazione chiara con il cliente. Il profilo "Stampa per il terapeuta" può contenere informazioni interne più dettagliate. In entrambi i casi, si prega di assicurarsi che le affermazioni sensibili o di carattere medico siano presentate in modo obiettivo e condivise solo con il destinatario previsto.

3.4.11.3 Salva il contenuto del report come predefinito

Seleziona "Stampa per il paziente" o "Stampa per il terapeuta", configura il contenuto del report desiderato e fai clic su "Salva come predefinito". Quindi passa al secondo profilo e salva anche lì le impostazioni corrispondenti. Prima di ogni stampa, visualizza in anteprima il profilo attivo, il cliente, il tempo di scansione, l'esagramma selezionato, i contenuti sensibili e il testo generato dall'IA.

3.4.11.4 Stampa il report, salvalo come PDF o invialo tramite e-mail

Cliccando sull'icona della lente d'ingrandimento, viene visualizzata un'anteprima del report sullo schermo e si può stamparlo, salvarlo come PDF o, se la funzionalità di invio tramite e-mail è abilitata, inviarlo. Si prega di verificare l'indirizzo del destinatario, il consenso, il nome del file e la posizione di salvataggio. I report contengono informazioni personali e potenzialmente sensibili e


devono essere adeguatamente protetti. In particolare, quando si invia il report via e-mail, è consigliabile crittografare i file PDF. Questa funzione di crittografia è disponibile come opzione.

3.4.11.5 Utilizzo della valutazione tramite IA

Con l'intelligenza artificiale abilitata, i dati TAO possono essere elaborati per diverse aree di valutazione. Queste possono includere esagrammi e trigrammi, linee variabili, punti di agopuntura attivi, psiche, Physis, tecniche di formulazione delle domande, nutrizione, rimedi, Hetu, Lo Shu, frattali e altri contenuti sbloccati. Le aree di intelligenza artificiale visibili dipendono dalla configurazione e dalla licenza.

I testi generati dall'IA sono bozze e devono essere rivisti per verificarne l'accuratezza, la correttezza linguistica e la conformità alle normative sulla protezione dei dati. Non devono interpretare erroneamente gli indicatori di risonanza simbolica come diagnosi, affermazioni fattuali o promesse di guarigione. Istruzioni dettagliate, incluse le istruzioni per personalizzare i prompt e per salvare e caricare i set di prompt, sono disponibili nel Capitolo 4.1, "Valutazione tramite IA: lavorare con l'intelligenza artificiale nel BCS".

3.4.12 Utilizzo della modalità automatica TAO opzionale

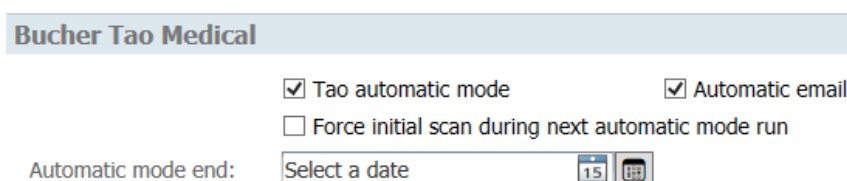

The screenshot shows the 'Bucher Tao Medical' interface. It features two checked checkboxes: 'Tao automatic mode' and 'Automatic email'. Below them is an unchecked checkbox labeled 'Force initial scan during next automatic mode run'. At the bottom, there is a label 'Automatic mode end:' followed by a date selection field with the text 'Select a date' and a calendar icon showing the date 15.

Impostazione della modalità automatica di TAO

3.4.12.1 Prerequisiti e scopo

La modalità automatica di TAO richiede un'attivazione separata. Può eseguire scansioni e trasmissioni programmate in sequenza per i clienti attivati e successivamente fornire report via e-mail. Questa automazione non sostituisce la responsabilità dell'utente per la selezione, la focalizzazione, le impostazioni, il consenso e il follow-up dei clienti.

3.4.12.2 Impostazione dell'automazione per il cliente

Nelle impostazioni del cliente, attiva la modalità automatica TAO e, se necessario, l'invio automatico di e-mail. A seconda dell'interfaccia, puoi impostare una data di fine e forzare una scansione iniziale. Verifica inoltre l'indirizzo e-mail, il profilo del report e l'intervallo configurato nelle impostazioni TAO.

3.4.12.3 Avviare e controllare la modalità automatica

- Apri TAO Medical e avvia la modalità automatica.
- Verifica i numeri visualizzati per clienti, scansioni, trasmissioni ed e-mail.
- Verifica le proprietà di scansione e invio, e solo dopo avvia il processo.
- Se necessario, monitora la fase corrente e, al termine, controlla il registro, le scansioni salvate, lo stato dell'invio e le e-mail.

3.4.12.4 Esecuzioni ripetute nello stesso giorno ed e-mail in sospeso

BCS impedisce inutili ripetizioni nel processo automatizzato previsto se una scansione TAO è già stata salvata per il cliente nello stesso giorno. Le email non inviate rimangono visibili per il follow-up e possono essere reinviolate o eliminate deliberatamente una volta risolta la causa.

3.4.13 Gestione, esportazione e backup delle scansioni

3.4.13.1 Aprire i cicli di scansione salvati

Le scansioni TAO del cliente corrente sono disponibili in Invia/Report. Seleziona il ciclo desiderato e naviga tra gli orari delle scansioni al suo interno. Prima di procedere ulteriormente, verifica l'assegnazione della data, se si tratta di una scansione iniziale o di controllo e il focus.

3.4.13.2 Eliminazione delle scansioni

Elimina una scansione solo dopo aver verificato il cliente, la data e l'associazione al ciclo utilizzando il pulsante "X". La scansione iniziale funge da punto di riferimento per tutte le scansioni successive. Eliminandola, verranno eliminate anche tutte le scansioni successive associate. Prima di eseguire una pulizia approfondita, assicurati di disporre di un backup dei dati aggiornato e ripristinabile.

3.4.13.3 Esportazione e importazione

Per esportare, importare e trasferire i dati del cliente e delle scansioni, utilizzare le funzioni centrali di BCS con l'icona di esportazione. Dopo l'importazione, verificare che tutte le scansioni TAO, i programmi, i frattali e i dati aggiuntivi siano stati assegnati correttamente. Istruzioni dettagliate sono descritte nel capitolo generale sull'esportazione e l'importazione.

3.4.14 Domande frequenti e risoluzione dei problemi

Perché la funzione TAO non viene visualizzata?

Verifica l'attivazione del prodotto, le licenze aggiuntive e la configurazione. Le funzioni di scansione del programma, frattali, astrologia cinese, equilibrio dei meridiani, automatico, luce colorata, musica e intelligenza artificiale possono essere attivate separatamente. Pertanto, una funzione nascosta spesso non è un errore del programma.

Perché non è possibile o consigliabile eseguire un'ulteriore scansione?

Verifica se è stata eseguita una scansione iniziale completa. A seconda della cronologia delle scansioni e del flusso di lavoro abilitato, BCS potrebbe richiedere una nuova scansione iniziale.

Perché mancano testi delicati e significativi?

Le impostazioni del cliente per argomenti intimi o sensibili possono inizialmente nascondere il testo aggiuntivo. L'utente può quindi visualizzarlo selettivamente secondo necessità. Inoltre, verificare il profilo del report attivo prima di pubblicare qualsiasi contenuto.

È meglio non limitarsi a trattare argomenti delicati senza alcun commento. Questi argomenti dovrebbero essere discussi con attenzione, diplomazia ed empatia, in modo che il cliente non li percepisca come un senso di colpa o di biasimo.

Perché un singolo punto di agopuntura può avere origini multiple?

Il punto è stato individuato da più fonti, per esempio I Ching, programmi o Lo Shu. BCS lo raggruppa e mostra le diverse origini, anziché elencarlo inutilmente più volte.

La prospettiva della diagnosi è una diagnosi medica?

No. Diagnosi è semplicemente il nome di una delle cinque prospettive interne dell'I Ching. Non deve essere utilizzata come riscontro medico, né come prova o esclusione di una malattia.

Perché non è possibile generare o inviare un frattale?

Verifica l'attivazione frattale, la scansione selezionata, lo spazio di archiviazione e l'hardware di invio. Le risoluzioni di immagini o video molto elevate potrebbero richiedere più tempo per la generazione. Anche le funzioni di invio tramite e-mail o di pubblicazione potrebbero dipendere dalla tua connessione Internet e dalla sua configurazione.

Perché la trasmissione sta impiegando più tempo del previsto?

La durata totale dipende dal tipo di regolazione, dai punti di agopuntura attivi, dai programmi, dall'equilibrio dei meridiani, dalla modalità frattale, dalla musica e dalle opzioni di colore/luce. Verificare la selezione attiva e utilizzare Rapid Transfer solo per la sequenza di trasmissione di informazioni brevi designata.

Come vengono formulati i testi del TAO durante le consultazioni con i clienti?

Utilizza espressioni come indizio simbolico, risonanza energetica, possibile prospettiva o spunto di conversazione. Evita certezze diagnostiche, causali o predittive. Sarà il cliente a decidere se l'interpretazione proposta è in sintonia con la propria situazione.

È possibile adottare una valutazione basata sull'IA senza verifica?

No. Ogni risposta dell'IA deve essere esaminata per verificarne il contenuto, il linguaggio e la conformità alla protezione dei dati. Affermazioni di carattere medico, diagnosi, promesse di cure, conclusioni inaccurate e formulazioni eccessivamente sensibili devono essere rimosse o corrette.

3.5 Bucher Bioresonanz Triselect FE

3.5.1 Panoramica e utilizzo previsto

3.5.1.1 Scopo e ambito di applicazione

Bucher Bioresonanz Triselect FE è un modulo integrato nei Sistemi di Coaching Bucher. Aiuta l'utente a rappresentare le informazioni energetiche di un cliente, determinate nel modello del sistema, suddividendole in diverse componenti informative e preparandole per la successiva regolazione energetica.

Il processo tipico prevede la selezione del cliente, la definizione dell'obiettivo, una scansione iniziale o di follow-up, la revisione dei risultati, la selezione facoltativa di programmi di regolazione, la trasmissione dei dati e la generazione del report. I indicazioni di risonanza provenienti da database supplementari possono essere utilizzati per l'interpretazione e il dialogo con il cliente.

3.5.1.2 Funzioni principali in sintesi

- Scansioni iniziali e successive con suggerimento automatico della scansione.
- Presentazione delle aree Spirituale, Psicica e Somatica con la relativa individuazione delle componenti informative.
- Preparazione delle informazioni positive e delle informazioni negative ribaltate per la trasmissione.
- Indicatori di risonanza relativi a temi di natura organo- o sistemica e a tematiche psicosomatiche.
- Scansione automatica opzionale dei programmi di regolazione.
- Selezione manuale facoltativa e invio di 755 indicazioni memorizzate con relativa oscillazione regolatoria.
- Report, output in PDF, invio tramite e-mail e, se attivato, valutazioni tramite intelligenza artificiale.
- Modalità automatica opzionale per scansioni, trasmissioni e invio di report ricorrenti.

3.5.1.3 Funzioni dipendenti dalla licenza

La gamma di funzioni visibili dipende dalla licenza acquistata. Oltre al modulo base, è possibile attivare separatamente i programmi di indicazione, la scansione automatica dei programmi e la modalità automatica Triselect. Le funzioni non attivate sono nascoste o non utilizzabili.

3.5.1.4 Differenziazione dalla diagnostica e dalla terapia medica

Triselect FE opera secondo un modello energetico. Le bande di vibrazione, le risonanze, i valori percentuali e le voci del database visualizzati non rappresentano valori di laboratorio, reperti anatomici o diagnosi mediche. Non devono essere utilizzati per dimostrare o escludere una malattia. Questo sistema non sostituisce una visita medica o un trattamento medico o psicoterapeutico necessario. In caso di disturbi, sintomi acuti o rischi per la salute, è necessario consultare un professionista qualificato. L'utente è responsabile della selezione, classificazione, comunicazione e applicazione.

3.5.2 Modello di funzionamento energetico

3.5.2.1 Classificazione secondo Morell e Rasche

La filosofia della biorisonanza su cui si basa Triselect FE affonda le sue radici nei principi fondamentali sviluppati da Franz Morell ed Erich Rasche. Il nome MORA deriva storicamente dai

nomi di Morell e Rasche. Il modello presuppone che le informazioni energetiche del corpo possano essere registrate, differenziate, elaborate e poi ritrasmesse.

3.5.2.2 Componenti informative positive e negative

Nel suo modello di funzionamento energetico, Triselect FE tenta di catturare la vibrazione cellulare o le informazioni cellulari attuali del cliente. Queste informazioni sono suddivise in una componente positiva e una negativa. L'interfaccia del programma a volte utilizza i termini fisiologico e patologico per descrivere questo processo.

La componente informativa negativa viene invertita per la trasmissione. Successivamente, la componente positiva e la componente negativa invertita vengono ricombinate. Queste informazioni complessive elaborate possono essere ritrasmesse al campo informativo del cliente tramite l'hardware di trasmissione selezionato. I termini positivo, negativo, fisiologico e patologico descrivono esclusivamente la classificazione energetica interna del sistema e non una diagnosi medica.

3.5.2.3 Tre aree di visualizzazione

La finestra dei risultati divide la visualizzazione in tre sezioni. La sezione Spirituale mostra una banda di lunghezze d'onda da 315 a 1400 nm e la assegna alle gamme UVA, luce visibile e IRA. La sezione Psichica mostra una banda di frequenza da 0,025 a 1,000 MHz. La sezione Somatica mostra una banda di frequenza da 0 a 25 kHz.

Le componenti psichica e somatica rappresentano graficamente le informazioni iniziali raccolte, la componente positiva o fisiologica, la componente negativa o stressante e le informazioni elaborate per il programma. Gli indicatori percentuali verdi e rossi facilitano l'orientamento all'interno del modello del programma; non si tratta di valori quantitativi o correlati alla malattia.

3.5.2.4 Indicatori di risonanza dai database

Durante la scansione, il BCS recupera anche informazioni di risonanza da database memorizzati. A seconda del tipo di programma e dell'attivazione, possono essere visualizzate connessioni relative a organi o sistemi, problematiche psicosomatiche, interrogativi esistenziali e programmi regolatori appropriati. Queste voci servono come supporto alla discussione e all'interpretazione. Devono essere esaminate come ipotesi e non devono essere comunicate come diagnosi.

3.5.3 Prerequisiti e impostazioni di base


3.5.3.1 Preparazione del prodotto e dell'hardware

Il prerequisito è una versione di BCS installata e attivata con le autorizzazioni necessarie per Bucher Bioresonanz Triselect FE. Seleziona Triselect dalla barra dei prodotti e controlla le impostazioni hardware per vedere quali dispositivi sono destinati alla scansione e alla trasmissione. L'hardware disponibile e le opzioni visualizzate dipendono dalla configurazione di BCS.

Utilizza il termine neutro "interfaccia mente-materia" per indicare la connessione tra cliente e sistema. Prima di iniziare, verifica che l'interfaccia richiesta sia stata rilevata e selezionata nelle proprietà della scansione.

3.5.3.2 Aprire le impostazioni di Triselect

Aprire le impostazioni tramite il pulsante rotondo "Funzioni aggiuntive" e selezionare la sezione Bucher Bioresonanz Triselect. Le modifiche vengono applicate dopo la conferma delle impostazioni. Le sezioni visibili dipendono dalle licenze aggiuntive installate.

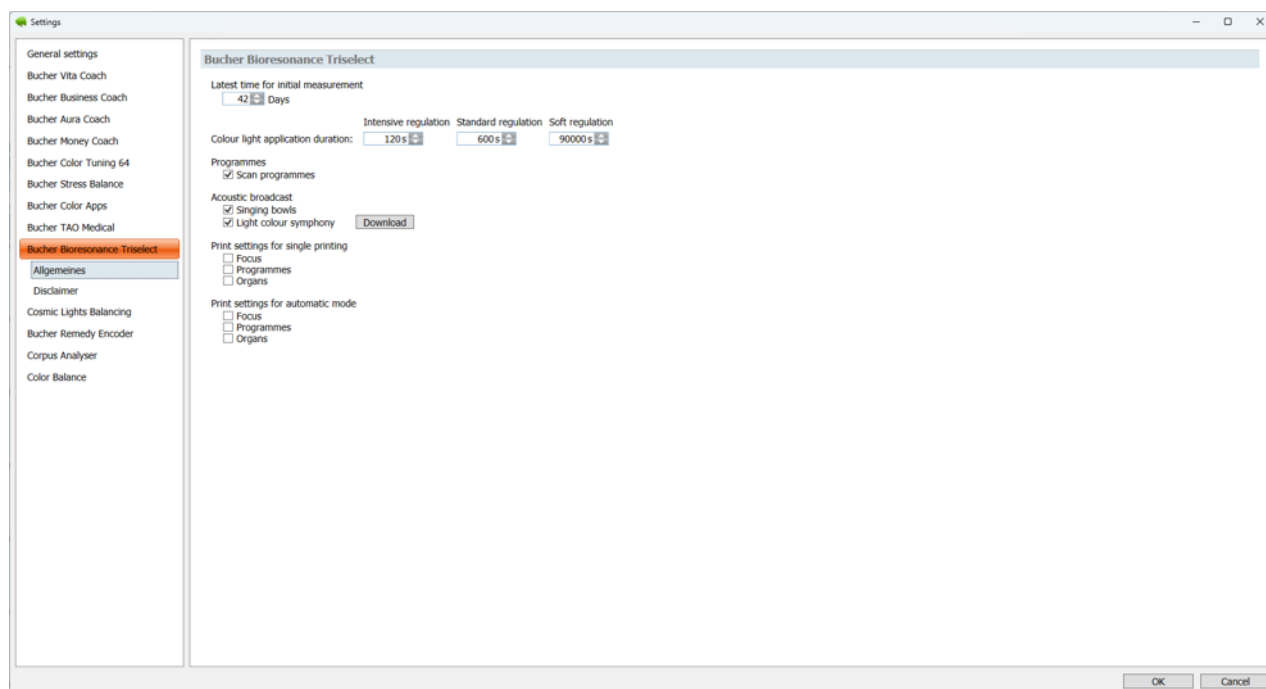

Impostazioni di base per Triselect

3.5.3.3 Impostare l'ora per una nuova scansione iniziale

Nelle impostazioni di Triselect, si specifica dopo quanti giorni BCS deve suggerire un'altra scansione iniziale. L'intervallo regolabile va da 14 a 56 giorni. L'impostazione predefinita più sensata è 42 giorni. BCS tiene conto anche della cronologia delle scansioni esistenti e di eventuali informazioni negative ancora presenti nel modello del sistema.

3.5.3.4 Impostazione delle specifiche temporali per la velocità di trasmissione

Per le opzioni Veloce (Breve), Media e Lenta (Lunga), è possibile inserire valori in secondi nelle impostazioni. Il sistema BCS utilizza questi valori per calcolare il numero di passaggi e la durata stimata del processo di trasmissione immediato. Questi valori controllano la velocità di trasmissione, non la durata della trasmissione successiva. Modificare questi valori solo intenzionalmente e quindi verificare la stima del tempo visualizzata.

3.5.3.5 Regolazione dell'accompagnamento acustico

A seconda dell'attivazione e dell'installazione, è possibile utilizzare la musica delle campane tibetane. Prima dell'uso, verificare il volume e il dispositivo di output. Se un'opzione musicale non è visibile o è disabilitata, significa che manca l'attivazione corrispondente o il file necessario.

3.5.3.6 Preimpostazione del programma di scansione e del contenuto del report

Se il modulo aggiuntivo per la scansione automatica dei programmi è attivato, è possibile impostare "Scansione programmi" come predefinito. Nella selezione di stampa, è possibile selezionare

separatamente il focus, i programmi e le note relative ad organi o sistemi per la "Stampa per il paziente" e la "Stampa per il terapeuta". Facendo clic su "Salva come predefinito" la selezione per il profilo attivo viene salvata e applicata alla stampa successiva.

3.5.4 Preparazione del cliente e focalizzazione

3.5.4.1 Selezionare il cliente e verificare l'assegnazione

Aprire la gestione clienti e selezionare il cliente corretto. Nella finestra Triselect, verificare il nome e la data di nascita prima di avviare la scansione. Questo eviterà che i risultati della scansione vengano assegnati al record sbagliato.

3.5.4.2 Formulazione dell'obiettivo

Il focus descrive la domanda o l'argomento attuale che la scansione dovrebbe affrontare. Formulalo in modo conciso, neutrale e senza preconcetti. Evita diagnosi, promesse di guarigione o istruzioni suggestive. In una scansione di controllo, la BCS indicherà se il focus è cambiato rispetto alla scansione iniziale.


3.5.4.3 Selezionare la proprietà o la categoria di scansione

Utilizzare il campo di selezione sopra il focus per definire la proprietà o la categoria di scansione desiderata. Questa scelta si riferisce alla situazione attuale del paziente, che viene chiarita durante la prima visita. Tale situazione può essere acuta, subacuta o cronica. La selezione influenza l'elaborazione interna del sistema e le proprietà di trasmissione suggerite. Verificare la categoria prima di iniziare, poiché viene salvata insieme alla scansione. L'impostazione predefinita è acuta, in quanto questo tipo di situazione è la più comune.

3.5.4.4 Utilizzo della selezione del colore online per un cliente assente

Se per il cliente è disponibile una scansione di selezione del colore online completamente trasferita, potrebbe apparire l'opzione "Usa scansione di selezione del colore online esistente". Questa opzione è particolarmente utile se il cliente non può essere presente. I colori, le forme e le tonalità preferiti e non graditi selezionati a casa vengono trasferiti a BCS e possono essere utilizzati come base per la scansione Triselect.

3.5.5 Eseguire la scansione Triselect

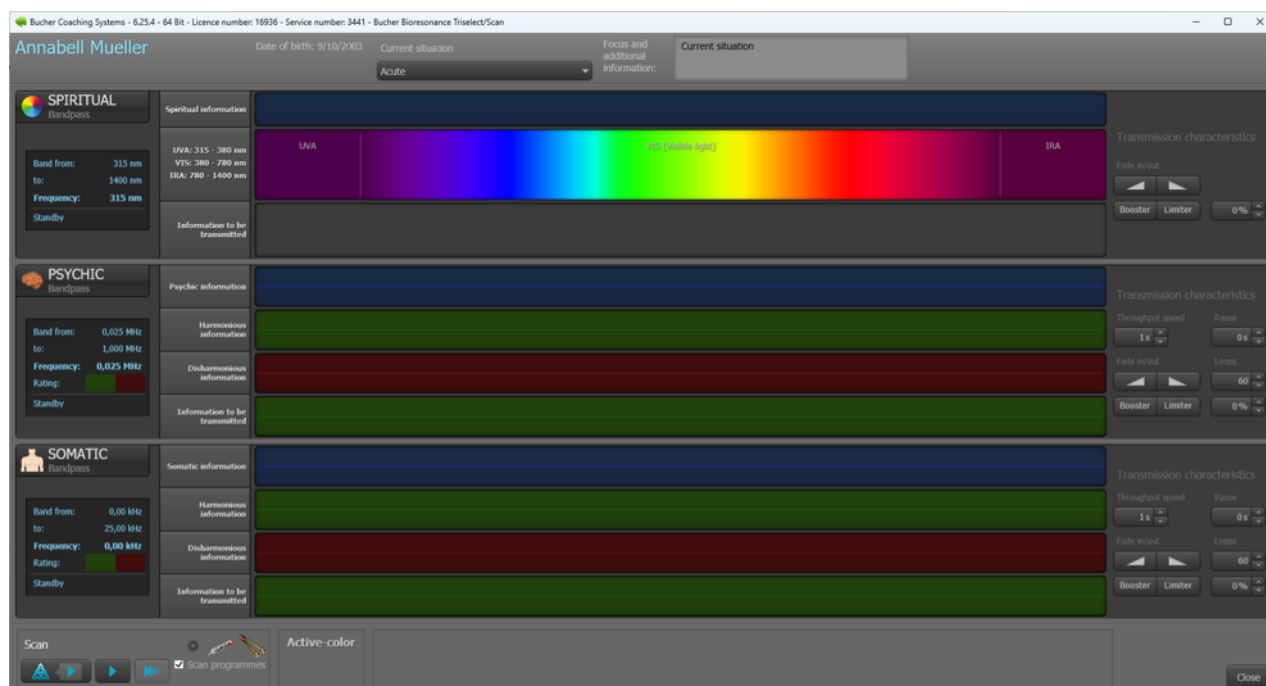

Preparazione di una scansione Triselect

3.5.5.1 Differenziazione tra scansione iniziale e scansione di controllo

Una scansione iniziale avvia un nuovo ciclo di scansione e ne costituisce il punto di partenza. Una scansione successiva appartiene a un ciclo esistente e incorpora i dati della scansione precedente nel nuovo calcolo. BCS indica, tramite il pulsante di suggerimento evidenziato, quale tipo di scansione è pianificato in base alla cronologia e alle impostazioni.

Oltre al pulsante per i suggerimenti, sono disponibili pulsanti separati per la scansione iniziale e per la scansione di controllo. Utilizzare la selezione manuale solo se si intende discostarsi intenzionalmente dal suggerimento. Nelle impostazioni del cliente è inoltre possibile forzare la successiva scansione automatica ad avviare una nuova scansione iniziale.

3.5.5.2 Verifica delle proprietà di scansione e hardware

Se necessario, apri le proprietà della scansione tramite l'icona a forma di ingranaggio. Verifica l'hardware attivo e le opzioni di scansione assegnate alla tua configurazione. Non iniziare finché non hai selezionato il cliente, il focus, la categoria e l'interfaccia mente-materia appropriati.

3.5.5.3 Includere la scansione automatica del programma

Se il modulo aggiuntivo Bucher Bioresonanz Triselect - Program Scan è attivato, è possibile abilitare la scansione dei programmi. Durante la scansione iniziale, BCS verifica la risonanza dei programmi di regolazione memorizzati e aggiunge le voci corrispondenti all'elenco dei programmi. Le scansioni successive utilizzeranno i programmi assegnati al ciclo.

3.5.5.4 Avvia la scansione, osserva e annulla


- Verifica il nome del cliente, la data di nascita, il focus e le proprietà di scansione.
- Verifica l'hardware dello scanner e, se necessario, attiva la scansione con selezione del colore online o la scansione tramite programma con licenza.
- Fai clic sul pulsante suggerito per la scansione iniziale o di controllo.

- Lascia che l'intero processo si svolga senza intoppi. Il BCS dimostrerà in sequenza l'elaborazione nei domini spirituale, psichico e somatico.
- Annulla solo se necessario. Un processo interrotto non è una scansione completa.

3.5.5.5 Salvataggio automatico della scansione

Una scansione completata viene salvata automaticamente con data, tipo di scansione, focus, categoria, valori di scansione, programmi e note di risonanza. Se si fa clic su "Annulla" nell'angolo in basso a destra durante la scansione, quest'ultima viene interrotta e i valori acquisiti fino a quel momento vengono scartati. Pertanto, non fare clic su "Annulla" se si desidera conservare questa scansione. Alla scansione iniziale viene assegnato un nuovo ciclo; le scansioni successive vengono aggiunte al ciclo esistente. Un set di dati del selettore di colore online utilizzato viene considerato come utilizzato dopo l'elaborazione corretta.

3.5.6 Comprendere i risultati e utilizzarli per il dialogo con il cliente

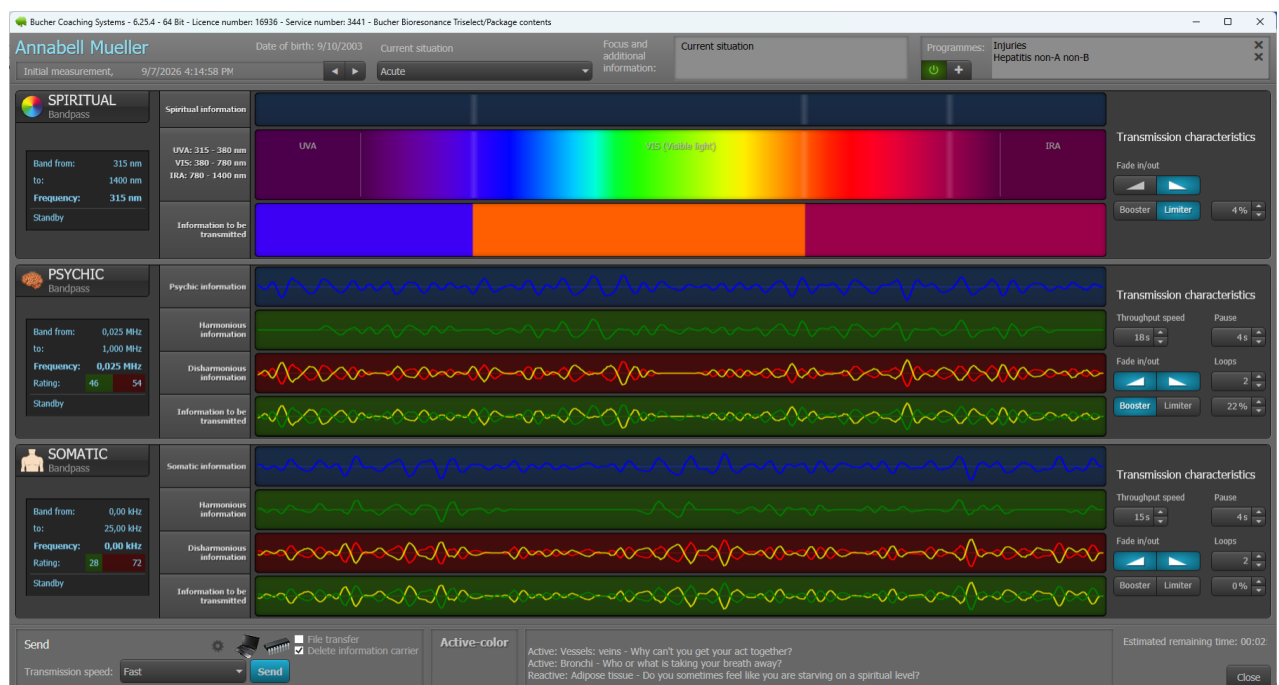

Risultati Triselect in tre aree

3.5.6.1 Selezionare il ciclo di scansione e il tempo di scansione

Nella finestra dei risultati o di invio, è possibile passare da un ciclo di scansione salvato all'altro e visualizzare i relativi tempi di scansione. La data e la dicitura "scansione iniziale" o "scansione successiva" sono utili per l'assegnazione. Verificare sempre quale scansione è aperta prima di interpretare, refertare o inviare i risultati.

3.5.6.2 Valutare l'area Spirituale

La sezione Spirituale visualizza le informazioni relative al colore e alla lunghezza d'onda determinate all'interno del modello del programma. I risultati codificati a colori rappresentano le informazioni preparate per la trasmissione. Utilizzare questa visualizzazione a scopo di orientamento e non come valutazione ottica o dermatologica. I colori mostrati sono quelli con cui il cliente ha avuto risonanza al momento della scansione.

3.5.6.3 Valutazione psichica e somatica

Le sezioni Psichica e Somatica mostrano ciascuna le informazioni iniziali, le assegnazioni positive e negative e le informazioni trasmesse risultanti. Le valutazioni verdi e rosse riassumono il rapporto tra le componenti informative assegnate sul lato sinistro dello schermo. Maggiore è l'area verde (minore è l'area rossa), migliore è il risultato energetico per quell'area. Discutere gli sviluppi nel corso di più scansioni senza sovrainterpretare i singoli valori percentuali.


3.5.6.4 Classificazione delle informazioni relative ad organi e sistemi

Le informazioni relative a organi o sistemi e le domande di vita visualizzate derivano dal modello di risonanza interno del programma. Utilizzare espressioni come "indicazione di risonanza", "possibile argomento" o "spunto di conversazione". Evitare affermazioni che suonino come una diagnosi medica, una causa o una disfunzione confermata.

3.5.6.5 Modifica e salva il focus

È possibile modificare il focus durante un ciclo di scansione aperto. Salvare le modifiche utilizzando l'apposita funzione di salvataggio oppure confermare la richiesta quando si modifica il tempo di scansione. Successivamente, verificare che il testo modificato sia stato assegnato al ciclo corretto.

3.5.7 Utilizzo dei programmi di indicazione

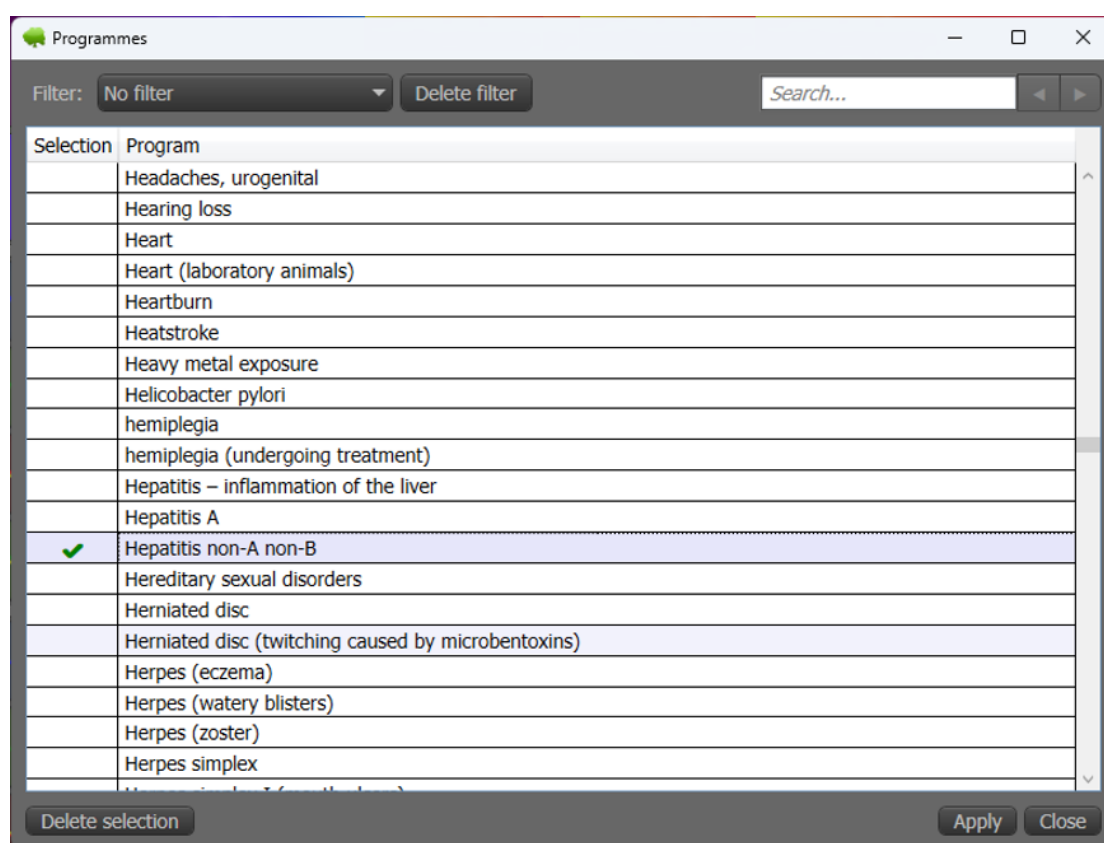

Programmi di indicazione selezionati

3.5.7.1 Ambito di applicazione e licenza

La funzione di indicazione manuale è un modulo aggiuntivo opzionale. Il database contiene 755 indicazioni predefinite, ciascuna con la relativa frequenza regolatoria. La selezione del programma non può essere utilizzata senza una licenza Bucher Bioresonanz Programs.

3.5.7.2 Ricerca e selezione dell'indicazione

- Nella finestra Triselect, apri la selezione del programma utilizzando il segno più.
- Se necessario, selezionare il filtro Tutti, Umani o Dentali.
- Inserisci un termine di ricerca e utilizza i pulsanti di ricerca per passare al risultato successivo o precedente.
- Selezionare una o più indicazioni appropriate. Una descrizione o un'intenzione preesistente possono servire da ulteriore guida.
- Conferma la selezione. Usa "Cancella selezione" per rimuovere tutte le selezioni; "Annulla" lascia invariato l'elenco dei programmi.

3.5.7.3 Verificare e modificare l'elenco dei programmi

I programmi importati vengono visualizzati nella finestra Triselect. Utilizzare l'interruttore on/off per decidere se includerli nella trasmissione. È possibile rimuovere singole voci dall'elenco corrente utilizzando l'icona di eliminazione. Verificare la selezione prima di ogni trasmissione ed evitare una raccolta di programmi eccessivamente ampia. Concentrarsi sulla risoluzione dell'argomento principale.


3.5.7.4 Invia solo programmi

BCS può inviare i programmi di indicazione anche senza una nuova scansione Triselect. Per farlo, è sufficiente aprire la funzione di programma desiderata, selezionare le indicazioni desiderate, attivare l'elenco dei programmi e avviare la trasmissione. Questa modalità è disponibile solo con la relativa licenza di programma.

3.5.7.5 Differenziazione tra programmi trovati automaticamente e programmi selezionati manualmente

I programmi rilevati automaticamente provengono dalla scansione dei programmi con licenza e sono inclusi come risultati suggeriti. I programmi selezionati manualmente si basano su una scelta consapevole dell'utente. Si prega di valutare l'idoneità dei programmi nel contesto generale.

3.5.8 Trasmissione e regolazione energetica

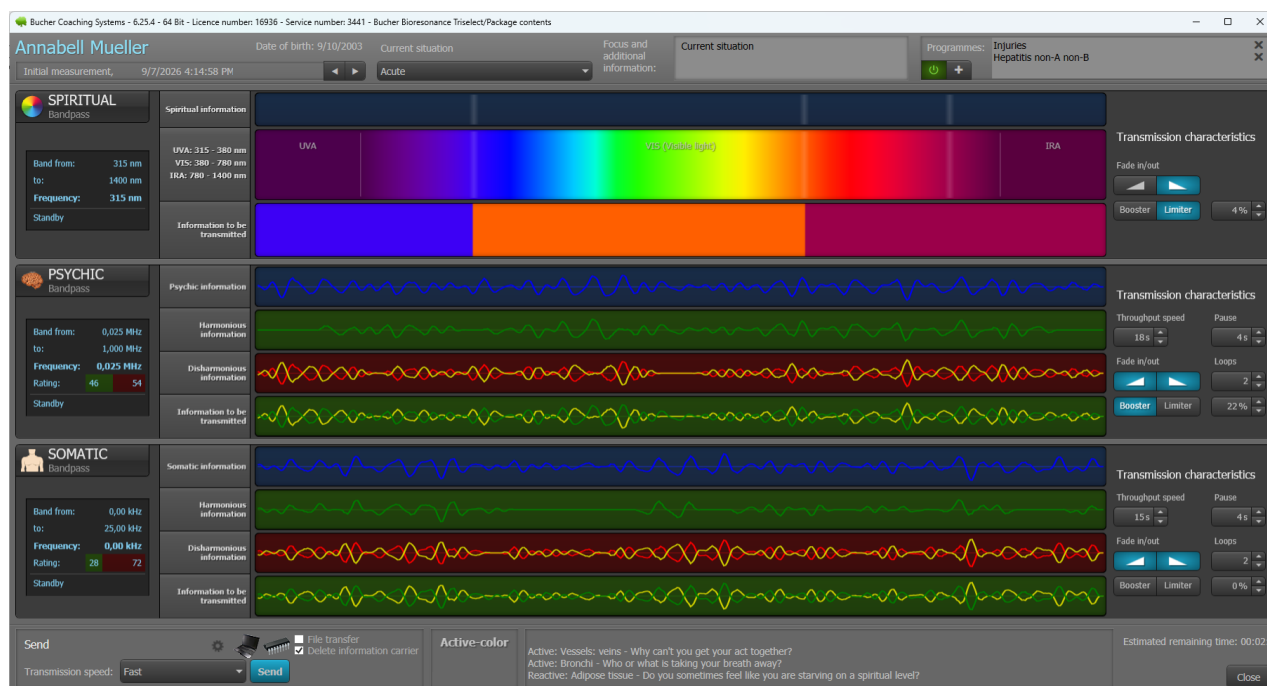

Invia i risultati di Triselect

3.5.8.1 Apri la scansione salvata per l'invio

In Invia/Report, apri la scansione Triselect desiderata e verifica il cliente, la data, se si tratta di una scansione iniziale o di follow-up, il focus e l'elenco dei programmi. La trasmissione utilizza le informazioni memorizzate nella scansione e visualizzate nella finestra.

3.5.8.2 Selezionare la velocità di trasmissione

Selezionare la velocità di trasmissione desiderata. Sono disponibili le seguenti velocità di trasmissione:

- In tempo reale
- Veloce
- Medio
- Lento
- Rapid Transfer

Il tempo visualizzato nell'angolo in basso a destra rappresenta la durata stimata della trasmissione corrente. I valori per Veloce, Medio e Lento impostati nelle impostazioni di Triselect controllano questa durata della trasmissione; non devono essere confusi con la durata della trasmissione successiva.

La modalità "Tempo reale" utilizza la sequenza temporale prevista dal modello di lavoro della biorisonanza; la modalità "Rapid Transfer" utilizza la massima velocità di trasmissione possibile. Utilizzare le modalità "Rapid Transfer" o "Veloce" quando il cliente non è presente o quando si sta preparando un supporto informativo. Utilizzare le modalità "Tempo reale", "Media" o "Lenta" per un'applicazione guidata consapevolmente con un cliente presente.

Una trasmissione più lenta non è necessariamente più potente o di qualità superiore. La durata della trasmissione successiva è di quattro settimane per impostazione predefinita, indipendentemente dal fatto che la trasmissione sia impostata su Tempo reale, Rapid Transfer, Veloce, Media o Lenta.

Verificare separatamente la durata, l'intensità, il ciclo e le altre opzioni di trasmissione. Vedere anche la sezione 2.7, " Distinzione tra durata e velocità di trasmissione ".

3.5.8.3 Comprensione delle caratteristiche di trasmissione

Per le modalità Spirituale, Psichica e Somatica, è possibile regolare la durata, la pausa, l'effetto di dissolvenza in entrata/uscita, il numero di ripetizioni e l'intensità (booster o limiter) tramite valori percentuali. Questi valori vengono configurati durante la scansione. Modificateli solo se siete in grado di valutarne con sicurezza l'impatto sul flusso e sulla durata complessiva; in un normale flusso di lavoro, è consigliabile mantenere le impostazioni predefinite.

3.5.8.4 Verificare l'hardware di trasmissione e i supporti informativi

Apri le proprietà di trasmissione tramite l'icona a forma di ingranaggio e verifica l'hardware attivo. A seconda della configurazione, la trasmissione può avvenire tramite diversi dispositivi, trasferimento file o supporto informativo. L'opzione "Cancella supporto informativo" controlla se un supporto informativo utilizzato viene preparato prima della trasmissione successiva. Consulta anche il capitolo relativo alle opzioni di trasmissione e all'hardware.


3.5.8.5 Avvio, monitoraggio e annullamento di una trasmissione

- Verificare la scansione selezionata, l'elenco dei programmi attivi, la velocità di trasmissione e l'hardware.
- Fai clic su Invia. BCS elabora le informazioni provenienti dalle tre aree in base alle proprietà selezionate.
- Osserva il colore attivo, l'indicatore di stato e il tempo rimanente. L'accompagnamento audio attivato viene riprodotto in base alla configurazione.
- Se necessario, annulla la trasmissione utilizzando il pulsante visualizzato. Quindi verifica lo stato salvato prima di ripetere la procedura.

3.5.8.6 Verifica del completamento e dello stato di trasmissione

Dopo una trasmissione avvenuta con successo, BCS salva il tempo di trasmissione nella scansione associata.

3.5.9 Rapporti e valutazioni dell'IA

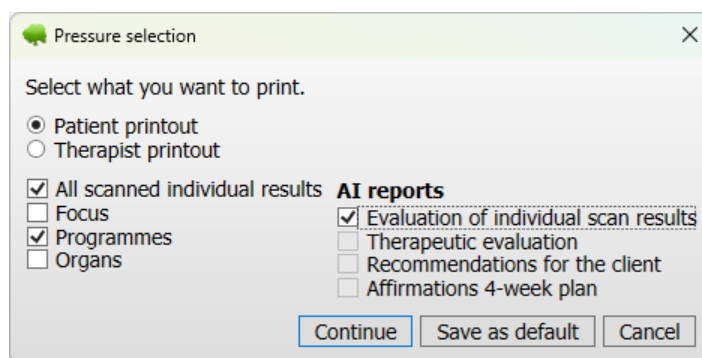

Rapporti Triselect e valutazione dell'IA

3.5.9.1 Apri la selezione del report

In Invia/Report, selezionare la scansione Triselect desiderata e aprire la funzione di stampa o di report. All'interno della selezione, è possibile abilitare o disabilitare i risultati della scansione, il focus, i programmi di regolazione e le informazioni sulla risonanza relative a organi o sistemi. I contenuti non disponibili vengono disattivati.

3.5.9.2 Profili del report “Stampa per il paziente” ed “Stampa per il terapeuta”

Nella finestra "Selezione di stampa", seleziona "Stampa per il paziente" o "Stampa per il terapeuta" e attiva il contenuto del report desiderato. Facendo clic su "Salva come predefinito" la selezione corrente viene salvata per il profilo attivo; verrà utilizzata nuovamente al successivo accesso al profilo. Passa al secondo profilo se desideri definire un predefinito separato anche per esso.

3.5.9.3 Stampa il report, salvalo come PDF o invialo tramite e-mail


Dopo l'anteprima, il report può essere stampato, salvato come PDF o, se la funzionalità di invio tramite e-mail è abilitata, inviato. Verificare l'indirizzo del destinatario, il consenso, il nome del file e la posizione di salvataggio. I report contengono informazioni personali e potenzialmente sensibili e devono essere adeguatamente protetti. In particolare, quando si invia il report tramite e-mail, è consigliabile crittografare i file PDF. Questa funzione di crittografia è disponibile come opzione.

3.5.9.4 Utilizzo della valutazione tramite IA

Con l'intelligenza artificiale (IA) abilitata, i dati di Triselect possono essere elaborati in base ai prompt IA designati. BCS tiene conto di fattori quali il colore, la percentuale di allocazione tra psichico e somatico, gli indicatori di risonanza, i programmi e la proprietà di scansione selezionata. La risposta dell'IA viene quindi trasferita nell'apposito campo di valutazione, revisionata da professionisti, modificata se necessario e salvata.

I testi generati dall'IA sono bozze. Non devono essere reinterpretati come diagnosi o affermazioni fattuali. Le valutazioni salvate e attivate possono essere selezionate singolarmente nella sezione di selezione del report. Istruzioni dettagliate, inclusi i prompt personalizzati e le modalità di salvataggio e caricamento dei set di prompt, sono disponibili nel Capitolo 4.1, "Valutazione tramite IA: lavorare con l'intelligenza artificiale nel BCS".

3.5.10 Utilizzo della modalità automatica Triselect opzionale

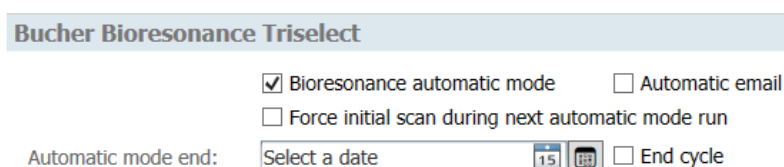

The screenshot shows the 'Bucher Bioresonance Triselect' settings window. It contains several checkboxes: 'Bioresonance automatic mode' (checked), 'Automatic email' (unchecked), and 'Force initial scan during next automatic mode run' (unchecked). Below these, there is a label 'Automatic mode end:' followed by a date selection field showing '15' and a calendar icon, and an 'End cycle' checkbox (unchecked).

Impostazione della modalità automatica Triselect

3.5.10.1 Prerequisiti e scopo

La modalità automatica di Triselect richiede una licenza separata. Elabora i clienti attivati in sequenza, esegue le scansioni e le trasmissioni programmate e può quindi inviare i report via e-mail. Questa automazione non sostituisce la responsabilità dell'utente per la selezione, la gestione, le impostazioni e i controlli successivi dei clienti.

3.5.10.2 Impostazione della modalità automatica per il cliente

Nelle impostazioni del cliente, attivare la modalità automatica Triselect e, se lo si desidera, AutoMail. È possibile impostare anche una data di scadenza. Con l'opzione "Attendi il completamento del ciclo di scansione", il cliente terminerà solo dopo la data di scadenza, una volta completato il ciclo valutato dal programma. L'opzione per una scansione iniziale forzata si applica alla successiva esecuzione programmata.

3.5.10.3 Avvio della modalità automatica

- Apri Triselect e fai clic sul pulsante per la modalità automatica.
- Controlla i numeri visualizzati per il totale dei clienti previsti, delle scansioni in sospeso, delle trasmissioni e delle email attuali e precedenti.
- Seleziona le proprietà di scansione e invio e avvia la modalità automatica.
- Monitorare lo stato secondo necessità. BCS elabora le attività in sequenza e visualizza la fase corrente.
- Una volta completata l'operazione, controlla il registro, le scansioni salvate, lo stato della trasmissione e le e-mail.

3.5.10.4 Clienti scansionati lo stesso giorno

Un cliente per il quale è già stata registrata una scansione Triselect nello stesso giorno non verrà scansionato nuovamente nella successiva sessione automatica. Ciò impedisce scansioni multiple accidentali nello stesso giorno.

3.5.10.5 Gestione delle email non inviate

Le email non inviate rimangono visibili come email vecchie. Una volta risolta la causa, è possibile reinviarle. Utilizzare "Elimina" per rimuoverle dall'elenco di posta in sospeso quando non sono più necessarie. Prima di farlo, verificare se il report è già stato inviato tramite un altro metodo.

3.5.11 Gestione e backup delle scansioni

3.5.11.1 Riapertura dei cicli di scansione salvati

Le scansioni Triselect per il cliente corrente sono disponibili in Invia/Report. Filtri ed etichette distinguono tra processi manuali e automatici, a seconda dell'interfaccia. Aprire il ciclo corretto e utilizzare i pulsanti di navigazione per passare da una data e ora di scansione all'altra.

3.5.11.2 Eliminazione o esportazione delle scansioni

Eliminare una scansione Triselect solo dopo aver verificato il cliente, la data e l'affiliazione al ciclo. Una scansione iniziale funge da punto di riferimento per tutte le scansioni successive. L'eliminazione di una scansione iniziale (indicata da un triangolo) elimina automaticamente tutte le scansioni successive associate. Per l'esportazione, l'importazione e il backup completo dei dati, utilizzare le funzioni di gestione centralizzata dei clienti; i dettagli sono descritti nel capitolo del manuale generale.

3.5.11.3 Verifica il backup dei dati

I dati di Triselect fanno parte del sistema di archiviazione dati BCS e devono essere inclusi nei backup periodici. Verificare la posizione del backup, la sua data di creazione e la sua recuperabilità. È necessario disporre di un backup aggiornato prima di effettuare operazioni di pulizia importanti o modifiche al sistema.

3.5.12 Errori comuni e soluzioni

3.5.12.1 Triselect o una funzione aggiuntiva non viene visualizzata

Verificare l'attivazione e la licenza del prodotto. I programmi di indicazione, la scansione automatica dei programmi e la modalità automatica sono moduli aggiuntivi separati. Pertanto, un pulsante invisibile spesso indica una mancata attivazione, non un errore del programma.

3.5.12.2 La scansione non si avvia

Verificare il cliente corrente, il focus, le proprietà di scansione, l'interfaccia mente-materia e le caratteristiche di scansione. Per una scansione con selezione del colore online, è necessario che sia presente un dataset completamente trasferito del cliente corretto. Se necessario, chiudere e riaprire la finestra dopo aver apportato modifiche.

3.5.12.3 Mancano programmi di indicazione

Verifica la licenza di Bucher Bioresonanz Programs. Nella selezione del programma, imposta il filtro su "Tutti" e rimuovi eventuali termini di ricerca attivi. Per il rilevamento automatico del programma è necessaria anche la licenza di Bucher Bioresonanz Triselect - Program Scan.

3.5.12.4 La trasmissione non si avvia o dura più del previsto

Verifica l'hardware di trasmissione, l'elenco dei programmi attivati, la durata selezionata e le impostazioni di riproduzione, pausa e ripetizioni. Un numero elevato di programmi o un numero elevato di ripetizioni aumenteranno la durata complessiva. In caso di dubbi, ripristina i valori impostati in precedenza e riavvia la riproduzione solo dopo averli ricontrollati.

3.5.12.5 Il report non contiene il contenuto previsto

Apri la selezione dei report e verifica il tipo di report selezionato. Focus, programmi e indicazioni di risonanza sono disponibili solo se presenti nella scansione aperta. Verifica separatamente le opzioni di stampa salvate e le valutazioni IA per entrambi i tipi di report.

3.5.13 Domande frequenti su Bucher Bioresonanz Triselect FE

Un risultato rosso o negativo indica una diagnosi medica?

No. Si riferisce a un'informazione negativa o gravosa all'interno del modello del programma energetico. Non è una diagnosi medica e non consente di affermare la presenza di una malattia.

Quali informazioni vengono trasferite durante la trasmissione?

Secondo il modello di funzionamento sottostante, le informazioni positive del cliente vengono combinate con le sue informazioni negative invertite. Queste informazioni complessive elaborate, insieme a eventuali programmi regolatori attivati, vengono trasmesse nel campo informativo del cliente tramite l'hardware di trasmissione selezionato.

Devo scegliere io tra una prima scansione e una di controllo?

BCS visualizza un suggerimento basato sulla cronologia delle scansioni, sul periodo di tempo impostato e sulla valutazione interna del sistema. In genere, utilizzare il pulsante di suggerimento leggermente più grande sulla sinistra. È possibile la selezione manuale, ma deve essere ponderata e trasparente.

Perché non riesco a visualizzare l'elenco delle 755 indicazioni?

Il database delle indicazioni è un modulo di licenza opzionale. La selezione manuale non è disponibile senza l'attivazione dei programmi di biorisonanza Bucher.

Qual è la differenza tra selezione del programma e scansione dei programmi?

Quando si seleziona un programma, l'utente determina manualmente quali indicazioni inviare. La scansione del programma è un modulo aggiuntivo separato e, durante la scansione iniziale, identifica le risonanze con i programmi di regolazione memorizzati.

È possibile indicare le risonanze emotive nelle conversazioni con i clienti come causa?

No. Sono spunti di conversazione all'interno del modello energetico. Formulali come possibili argomenti e analizzali insieme al cliente, senza formulare affermazioni diagnostiche o causali.

È possibile includere una valutazione basata sull'intelligenza artificiale nel report senza verifica?

No. Ogni risposta dell'IA deve essere esaminata per verificarne l'accuratezza, la correttezza linguistica e la conformità alle normative sulla protezione dei dati. Affermazioni che suonano particolarmente mediche, diagnosi, promesse di cure e conclusioni inaccurate devono essere rimosse o corrette.

3.6 Bucher Stress Balance

3.6.1 Panoramica e utilizzo previsto

3.6.1.1 Scopo e ambito di applicazione

Bucher Stress Balance è un modulo di biofeedback sbloccabile all'interno di Bucher Coaching Systems. È stato sviluppato principalmente per situazioni in cui il cliente è fisicamente presente. L'applicazione combina un ambiente visivo e uditivo rilassante con una farfalla animata. Tramite il sensore CA o un'interfaccia mente-materia opportunamente configurata, il cliente riceve un feedback visivo immediato sui suoi progressi.

L'attenzione si concentra sulla consapevolezza di sé, sulla focalizzazione e sull'esperienza cosciente della calma. Il cliente osserva come cambiano il movimento e la posizione della farfalla mentre cerca di rilassarsi. Questo esercizio può essere utilizzato prima di una sessione di coaching, tra una fase di lavoro e l'altra, oppure come fase autonoma di rilassamento e riflessione.

3.6.1.2 Funzioni principali in sintesi

- Procedura manuale con autovalutazione tramite tre emoticon.
- Ciclo di biofeedback visivo con una farfalla animata, immagini della natura e suoni ambientali opzionali.
- Indicatore di stress come visualizzazione interna dell'avanzamento del programma.
- Selezione di un ambiente casuale o fisso, di un'illustrazione di farfalla adatta o scelta manualmente e di un suono adatto o scelto manualmente.
- Inserisci le tue immagini di sfondo in formato JPG.
- Modalità automatica per un'applicazione in gran parte autoguidata, ad esempio in una sala d'attesa.
- Report finale opzionale con i dati del cliente, la vista finale e le informazioni su colore e impulso utilizzate durante il processo.
- Utilizzo facoltativo della visualizzazione di Stress Balance come accompagnamento visivo alle sequenze di trasmissione BCS compatibili.

3.6.1.3 Dipendenza dalla licenza

Bucher Stress Balance richiede un'attivazione separata. Se il modulo non è concesso in licenza, la voce non verrà visualizzata o non potrà essere aperta. Anche le singole funzioni hardware e automatiche dipendono dalle apparecchiature collegate e configurate in BCS.

3.6.1.4 Delimitazione

Stress Balance non è un test da sforzo medico e non fornisce una diagnosi. L'indicatore di stress, il movimento a farfalla e le informazioni relative al colore o all'impulso sono elementi del sistema di biofeedback interno del programma. Non si tratta di valori di laboratorio e non devono essere utilizzati per diagnosticare o escludere una malattia fisica o mentale.

3.6.2 Principio di funzionamento e simbolismo

3.6.2.1 Il biofeedback come feedback visibile

In una sessione di biofeedback, il feedback relativo al corpo viene presentato in modo tale che il cliente possa percepire immediatamente i cambiamenti. In Stress Balance, la farfalla assume questo ruolo. Il segnale di feedback fornito dall'interfaccia mente-materia influenza il processo

visualizzato. Il cliente osserva la reazione e concentra consapevolmente la sua attenzione sulla calma, sulla respirazione e sul lasciar andare.

L'applicazione crea quindi un ciclo di feedback: una situazione più tranquilla modifica l'aspetto della farfalla; l'aspetto visibilmente più calmo può, a sua volta, favorire la concentrazione e il rilassamento. La reazione del cliente è soggettiva. Non è possibile garantire un risultato specifico.

3.6.2.2 Significato della farfalla

La farfalla è stata scelta come simbolo facilmente comprensibile, innocuo e con una connotazione positiva. La sua metamorfosi può essere utilizzata anche come immagine del cambiamento. Nel dialogo con il cliente, ad esempio, si può porre la domanda aperta su quale cambiamento o quale forma di serenità il cliente desideri nella sua situazione attuale.

L'obiettivo pratico dell'animazione è quello di calmare la farfalla a sufficienza da permetterle di posarsi sul fiore e rilassare le ali. Questa rappresentazione è un simbolo di feedback e non una valutazione oggettiva del cliente.

3.6.2.3 Ruolo dell'ambiente e del suono

Scene naturali e suoni ambientali creano un ambiente visivo e uditivo rilassante. Hanno lo scopo di distogliere temporaneamente l'attenzione da pensieri angoscianti e di concentrarla su un compito ben definito. L'ambiente deve essere piacevole per il cliente; immagini e suoni disturbanti, stressanti a livello personale o eccessivamente intensi devono essere evitati.

3.6.3 Prerequisiti e preparazione

3.6.3.1 Requisiti tecnici

- BCS è installato e Bucher Stress Balance è attivato.
- Il sensore CA o altra interfaccia mente-materia destinata a Stress Balance è collegato e abilitato nelle proprietà della scansione.
- I file immagine, texture e audio necessari sono disponibili.
- È disponibile un dispositivo audio funzionante e correttamente regolato per la riproduzione del suono.

3.6.3.2 Preparazione dei clienti

Prima di aprire Stress Balance, selezionare il cliente corretto. Questo è particolarmente importante se in seguito verrà generato un report. Spiegare brevemente che la farfalla rappresenta un feedback biologico e non fornisce una valutazione medica del livello di stress attuale.


Se possibile, assicurarsi di assumere una posizione di seduta comoda, di avere uno schermo ben visibile e un volume piacevole. Il cliente deve essere in grado di tenere il sensore secondo le istruzioni del dispositivo, senza sforzare inutilmente la mano. Interrompere l'applicazione se viene percepita come scomoda, eccessiva o stressante.

3.6.3.3 Situazioni di applicazione idonee

- Come momento di transizione tranquillo dopo l'arrivo e prima di una sessione di coaching.
- Interrompere brevemente un flusso incessante di pensieri con un compito di osservazione ben definito.
- Per una riflessione personale su come vengono vissute la tensione, l'attenzione e la pace interiore.
- Come fase preparatoria di rilassamento prima di un'altra applicazione, se il cliente lo desidera.

- La modalità automatica è offerta come servizio facoltativo nella sala d'attesa, a condizione che siano garantite la protezione dei dati, l'istruzione e l'igiene.

3.6.4 Configurazione di Stress Balance

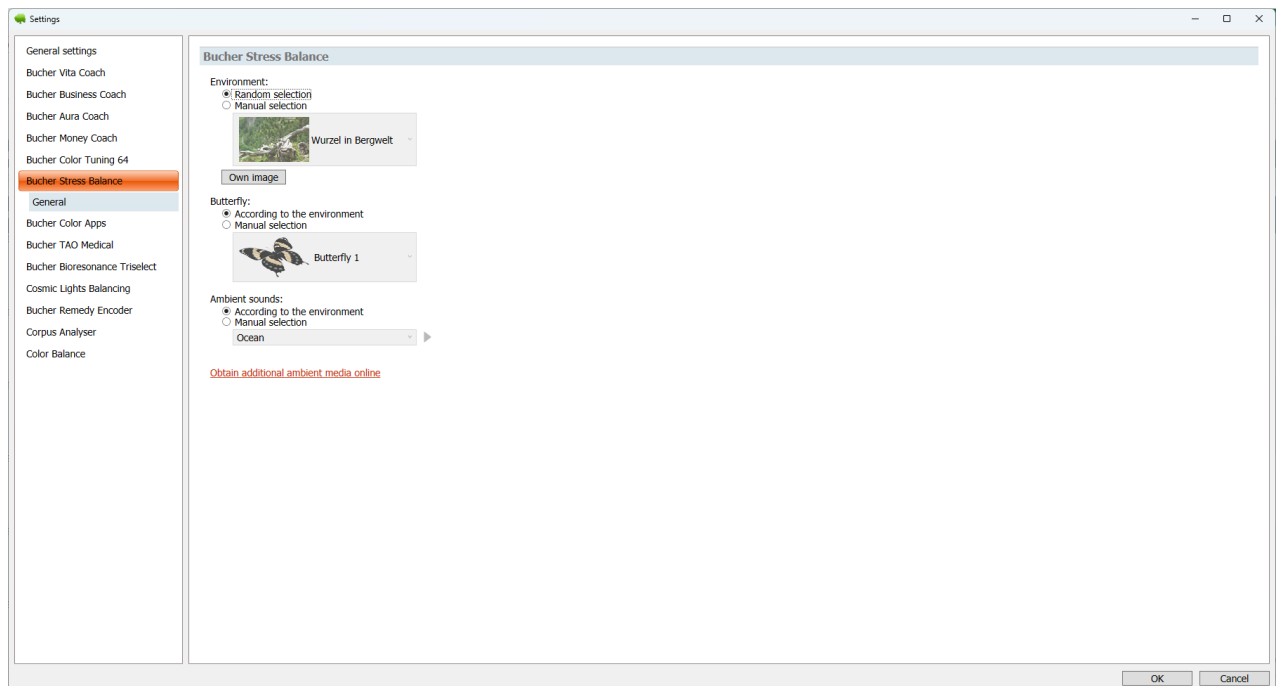

impostazioni di Stress Balance

3.6.4.1 Aprire l'area delle impostazioni

Apri le impostazioni di BCS e seleziona la sezione Stress Balance, quindi Generale. Questa sezione viene visualizzata solo se l'opzione Stress Balance è abilitata. Le modifiche verranno applicate alle applicazioni successive; pertanto, verifica la tua selezione prima di un appuntamento con un cliente.

3.6.4.2 Selezionare l'ambiente

Per quanto riguarda l'ambiente, è possibile scegliere tra selezione casuale e manuale. Con la selezione casuale, BCS determina automaticamente un tema di sfondo disponibile all'avvio. Con la selezione manuale, si specifica un tema particolare. Utilizzare la selezione fissa se si desidera concordare l'ambiente con il cliente in anticipo.

3.6.4.3 Selezionare la farfalla

La farfalla può essere selezionata automaticamente in base all'ambiente scelto oppure manualmente. Per la selezione automatica, BCS utilizza l'immagine della farfalla già incorporata nello sfondo. La selezione manuale è utile se si preferisce una specifica variante di colore o texture.

3.6.4.4 Selezionare e ascoltare il suono ambientale

Il suono ambientale può essere selezionato automaticamente in base all'ambiente circostante oppure manualmente. Se si sceglie la selezione manuale, è possibile ascoltare un'anteprima del suono utilizzando il pulsante di riproduzione e interromperlo in qualsiasi momento. Verificare il volume prima di avviare l'applicazione. A seconda della versione del programma e della connessione Internet, è possibile scaricare ulteriori suoni ambientali tramite il link fornito.

3.6.4.5 Aggiungi la tua immagine di sfondo


Fai clic su "Immagine personale". Inserisci una breve descrizione dell'immagine e seleziona il file JPG desiderato. Dopo l'anteprima, inserisci l'immagine utilizzando "Inserisci immagine". L'immagine verrà aggiunta alla selezione delle immagini per Stress Balance e potrà quindi essere utilizzata come ambiente manuale.

Idealmente, utilizza un'immagine JPG in formato orizzontale con circa 3000 × 2000 pixel. Immagini più piccole o con proporzioni diverse potrebbero presentare bordi visibili o un aspetto pixelato. Utilizza solo immagini per le quali possiedi i necessari diritti di utilizzo ed evita di includere informazioni personali non necessarie.

3.6.5 Eseguire l'applicazione manuale di Stress Balance

3.6.5.1 Aprire Stress Balance

Aprire Bucher Stress Balance tramite il pulsante rotondo "Funzioni aggiuntive". BCS verifica l'attivazione e se almeno un cliente è attivo. Ricontrollare il cliente corrente. La finestra di Stress Balance visualizza l'ambiente selezionato, l'icona a forma di farfalla, l'indicatore di stress, il pulsante delle proprietà di scansione, nonché le opzioni Avvia, Avvia in modalità automatica e Chiudi.

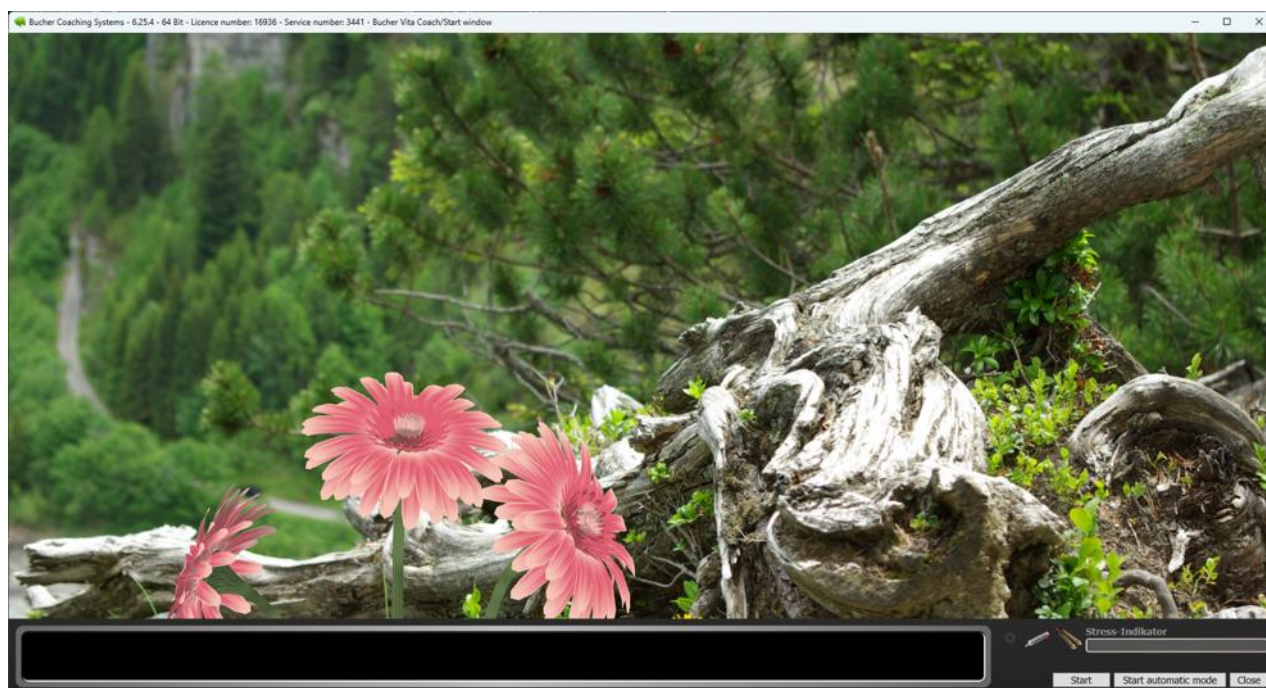

Avviare l'applicazione manuale di Stress Balance

3.6.5.2 Verifica delle proprietà di scansione

Prima di utilizzare lo scanner per la prima volta, aprire le proprietà di scansione tramite l'icona a forma di ingranaggio. Verificare quale interfaccia mente-materia è in uso e se il sensore CA o gli applicatori manuali previsti sono attivi. La modalità automatica è disponibile solo se è stata rilevata e selezionata un'interfaccia appropriata.

3.6.5.3 Avviare l'applicazione e selezionare l'autovalutazione


- fare clic su Avvia.
- BCS chiede al cliente come si sente in quel momento.

- Il cliente seleziona una faccina: felice, neutra o triste. Questa selezione determina il punto di partenza per la visualizzazione interna del programma.
- Raccogli il sensore CA come indicato.
- Attendi che la connessione venga stabilita e che inizi il processo di biofeedback vero e proprio.

3.6.5.4 Osservare le farfalle

Durante il processo, la farfalla cambia movimento, battito d'ali e distanza dal fiore. L'indicatore di stress mostra i progressi interni del programma. Il cliente può sedersi in silenzio, respirare regolarmente e osservare senza dover forzare un risultato specifico.

Il BCS può anche visualizzare informazioni relative a cambiamenti di colore e impulsi. Queste informazioni fanno parte della rappresentazione del programma energetico. Devono essere interpretate come impulsi di accompagnamento e non come una diagnosi o una conferma diagnostica.

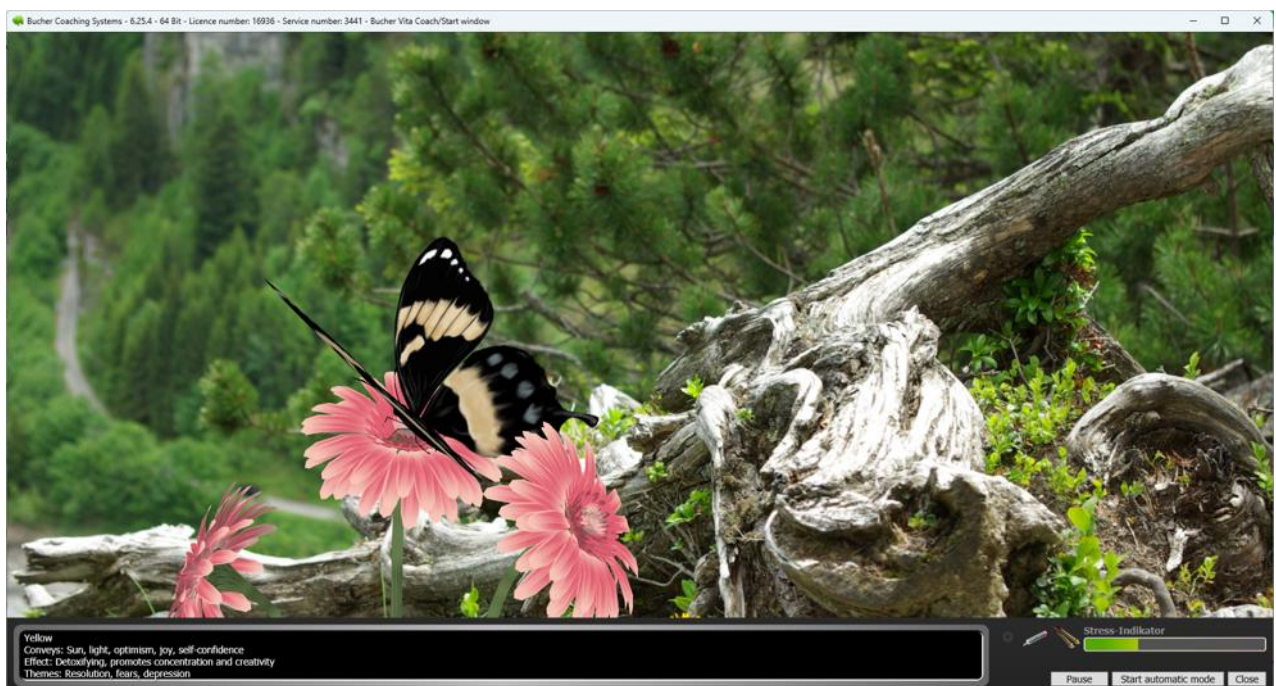

Stress Balance durante l'applicazione

3.6.5.5 Mettere in pausa e riprendere l'applicazione

Durante una sequenza in esecuzione, il pulsante Avvia si trasforma in Pausa. In pausa, l'animazione, l'elaborazione del feedback e la riproduzione audio vengono interrotte. Il pulsante Riprendi riavvia la sequenza dallo stesso punto. Utilizzare la funzione Pausa, ad esempio, per una breve interruzione o quando è necessario regolare la posizione del sensore.

3.6.5.6 Interruzione del contatto

Se il segnale di feedback viene interrotto, la farfalla si allontana nuovamente dal fiore oppure il processo attende il ripristino della connessione. Tenere il sensore nella posizione prevista. Se l'interruzione si verifica ripetutamente, terminare il processo e verificare la connessione, le proprietà di scansione e la posizione del sensore.

3.6.5.7 Completamento dell'applicazione

Quando la visualizzazione interna del programma raggiunge la conclusione prevista, la farfalla si posa sul fiore e distende tranquillamente le ali. BCS termina il processo in corso, salva una vista finale e può quindi chiedere se si desidera creare un report.

In alcune iterazioni, non è possibile raggiungere lo stato finale del programma. Il sistema BCS lo segnala e interrompe il processo di conseguenza. Questo non costituisce né un giudizio negativo sul cliente né una constatazione clinicamente rilevante. Un'iterazione successiva deve essere eseguita solo su richiesta del cliente.

3.6.5.8 Annullare o chiudere l'applicazione

Chiudendo la finestra, l'applicazione corrente verrà terminata. Animazioni, suoni, elaborazione dei sensori e qualsiasi timer attivo verranno interrotti. Prima di chiudere, verificare se è già stato generato il report desiderato.

3.6.6 Classificazione degli indicatori di stress e del feedback

3.6.6.1 Indicatore di stress

L'indicatore di stress visualizza un andamento relativo all'interno dell'applicazione corrente. Fornisce un orientamento visivo, ma non è paragonabile a un punteggio di stress medico, a una scala psicologica o a un valore di laboratorio. Pertanto, i confronti tra individui diversi o tra appuntamenti distanti nel tempo non sono adatti a una valutazione oggettiva.

3.6.6.2 Autovalutazione e progressi

La selezione delle emoticon descrive la situazione iniziale soggettiva. La visualizzazione successiva collega queste informazioni al segnale di feedback continuo e ai processi interni del programma. Pertanto, la conversazione può coprire sia l'autovalutazione iniziale sia l'esperienza personale durante l'applicazione.

3.6.6.3 Spunti di conversazione

- Cosa ti ha aiutato a calmarti?
- A che punto hai notato un cambiamento?
- L'immagine, il suono o l'attività con la farfalla sono stati particolarmente utili o di disturbo?
- Quale piccola azione potrebbe esserti d'aiuto in una situazione quotidiana simile?

Esprimi i tuoi concetti in modo chiaro e lascia al cliente la possibilità di non aver notato alcun cambiamento. Le informazioni visualizzate sullo schermo non devono essere utilizzate per contraddire la percezione del cliente.

3.6.7 Utilizzo della modalità automatica



modalità automatica di Stress Balance

3.6.7.1 Scopo e prerequisiti

La modalità automatica guida il cliente passo dopo passo attraverso l'autovalutazione e la successiva applicazione. È particolarmente adatta come opzione volontaria, in gran parte self-service, nelle sale d'attesa. I prerequisiti includono l'attivazione del sistema di Stress Balance, un sensore CA correttamente configurato o applicatori manuali idonei e brevi istruzioni.

Se la modalità automatica è disponibile su un computer non presidiato nella sala d'attesa, in BCS è possibile selezionare solo un cliente segnaposto neutro senza dati personali. Su questa postazione di lavoro non è consentito visualizzare o utilizzare i dati reali del cliente. Inoltre, non è possibile generare alcun report personale per le richieste anonime.

3.6.7.2 Avvio automatico

- Apri Stress Balance e controlla le proprietà della scansione.
- Fare clic su Avvia modalità automatica.
- Segui le istruzioni: prendi prima il sensore in mano e poi lascialo. In questo modo BCS riconosce che il cliente ha compreso il funzionamento.
- Il sistema BCS visualizza in successione una faccina triste, una neutra e una sorridente. Il cliente prende in mano il sensore durante la visualizzazione dell'immagine corrispondente alla sua attuale autovalutazione.
- Se non viene effettuata alcuna selezione entro l'intervallo di tempo visualizzato, la sequenza introduttiva ricomincia.

3.6.7.3 Processo automatico

Dopo la selezione della faccina, BCS visualizza l'ambiente predisposto e avvia la presentazione del biofeedback. Il cliente tiene in mano il sensore durante l'applicazione. Se il contatto viene interrotto, viene visualizzato un messaggio a tempo limitato che invita a riprendere il sensore. Se la connessione non viene ristabilita, la modalità automatica torna in modalità standby.

3.6.7.4 Conclusione e iterazione successiva

Una volta completata l'operazione, BCS informa il cliente tramite un segnale acustico e un messaggio a schermo. A questo punto, il sensore deve essere rilasciato. A seconda del risultato e delle impostazioni del programma, potrebbe essere visualizzato un report. Successivamente, la modalità automatica torna in standby e attende la successiva applicazione.


3.6.7.5 Uscita dalla modalità automatica

Prima di lasciare la postazione di lavoro, pulire il sensore, cambiare cliente o chiudere BCS, fai clic su "Esci dalla modalità automatica". Successivamente, verifica che non siano ancora visualizzati dati personali o report.

3.6.7.6 Igiene e sorveglianza nell'area di attesa

Per i sensori condivisi, stabilire una procedura di pulizia adeguata in base alle specifiche di ciascun dispositivo. Assicurarsi che l'assistenza sia facilmente disponibile e che l'utilizzo rimanga volontario. La modalità automatica non sostituisce la supervisione se il cliente non comprende appieno come utilizzare il dispositivo o si sente a disagio durante l'uso.

3.6.8 Creazione e output di un report

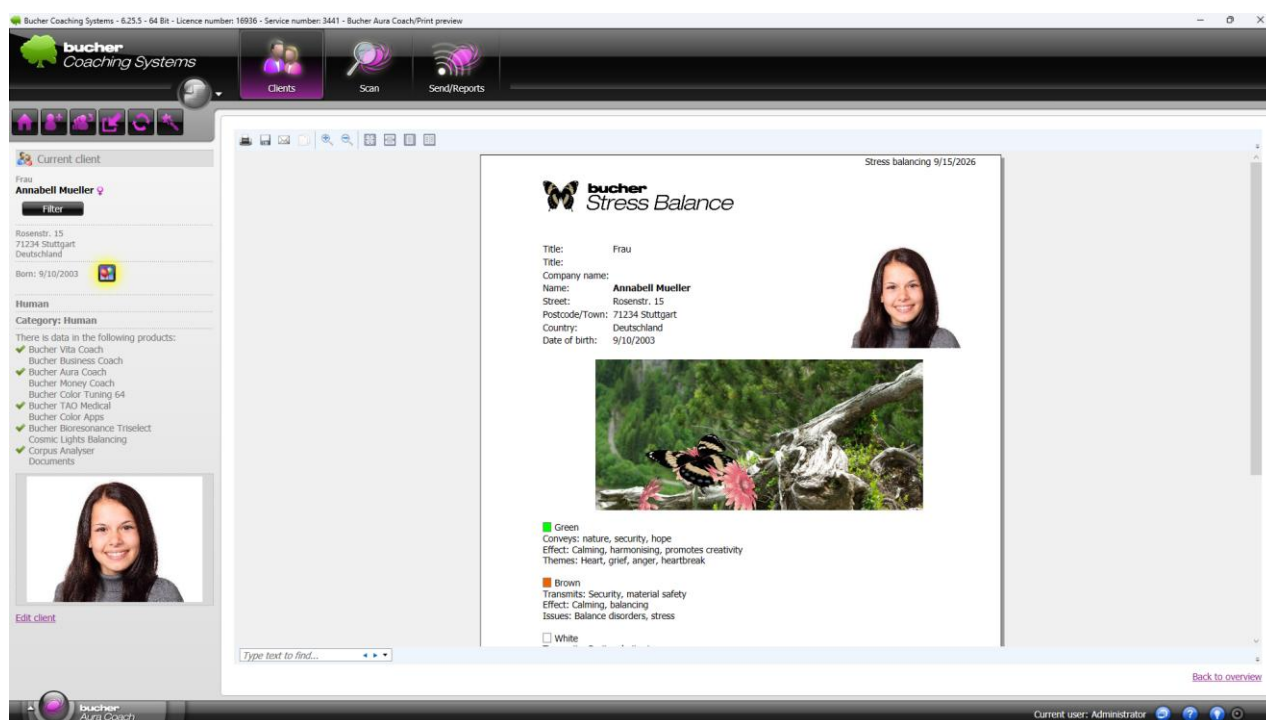

Creare un report di Stress Balance

3.6.8.1 Proposta di un report al termine dell'applicazione

Al termine della procedura, BCS potrebbe chiedere se si desidera generare un report. Confermare questa richiesta solo se è stato selezionato il cliente corretto e si desidera effettivamente la documentazione. Se non è necessario un report, rifiutare la richiesta.

3.6.8.2 Contenuto del rapporto

Il report di Stress Balance può includere dati e immagini del cliente, una vista finale salvata della farfalla e informazioni su colore e impulsi utilizzati durante il processo. Gli impulsi ripetuti e immediatamente consecutivi vengono raggruppati per l'output.

L'indicatore di stress, l'immagine finale e le informazioni sugli impulsi presenti nel referto non costituiscono riscontri medici. Discutetene il contenuto come documentazione dell'applicazione e come potenziale strumento di riflessione. Non includete diagnosi né promesse di guarigione.

3.6.8.3 Stampa e PDF

Il report utilizza le funzioni di reporting standard di BCS. A seconda delle impostazioni di stampa e PDF, il report può essere stampato o salvato come PDF. Prima di stampare, verificare il nome, l'immagine del cliente e la posizione del file. I report contengono informazioni personali e devono essere protetti di conseguenza.

3.6.9 Stress Balance in altri processi BCS

3.6.9.1 Accompagnamento visivo di una trasmissione

Nei prodotti BCS compatibili, Stress Balance può essere selezionato come opzione di visualizzazione basata su computer nelle impostazioni hardware o di trasmissione. In questo caso, l'icona a forma di farfalla accompagna una sequenza di trasmissione predefinita. Durata, informazioni sul colore e conclusione dipendono dal prodotto chiamante.

Questo utilizzo è distinto dall'applicazione autonoma di Stress Balance. Pertanto, verificare il cliente selezionato, la trasmissione, la durata e l'hardware attivo nel modulo iniziale. Non tutti i prodotti, le licenze o le combinazioni hardware offrono questa opzione.

3.6.10 Uso responsabile

3.6.10.1 Formulazione di aspettative realistiche

Lo stress è una normale reazione umana a situazioni difficili. Le persone vivono lo stress e il rilassamento in modo diverso. Pertanto, Stress Balance va descritto come uno strumento di biofeedback, autoconsapevolezza e supporto al rilassamento, non come una cura per una malattia né come una garanzia di riduzione dello stress.

3.6.10.2 Disturbi medici e psicologici

Stress Balance non sostituisce una valutazione medica, psicoterapeutica o psicologica. In caso di sintomi gravi, persistenti o in peggioramento, di compromissione significativa della vita quotidiana o di crisi acuta, è necessario un adeguato supporto professionale. L'utilizzo di questo prodotto non deve interrompere o ritardare le cure necessarie.

3.6.10.3 Volontarietà e limiti personali

Il cliente decide se partecipare, ascoltare un suono, utilizzare un'immagine specifica o interrompere il processo. Se il cliente è sensibile alle immagini in movimento, ai suoni o a un tempo prolungato davanti allo schermo, è necessario adattare l'ambiente o interrompere l'applicazione.

3.6.10.4 Protezione dei dati

Seleziona il cliente per nome solo se è richiesta e consentita la personalizzazione della documentazione. Proteggi schermate, stampe e PDF da accessi non autorizzati. Attiva il filtro clienti per nascondere tutti gli altri clienti registrati nel programma. Le tue immagini di sfondo non devono contenere informazioni personali di altre persone.

3.6.11 Errori comuni e soluzioni

Stress Balance non viene visualizzato o non può essere aperto.

Verifica l'attivazione del prodotto. Senza una licenza Stress Balance, la voce di menu non è visibile o utilizzabile. Assicurati inoltre che sia stato creato almeno un cliente in BCS.

La modalità automatica è inutilizzabile.

Aprire le proprietà di scansione e verificare se vengono rilevati e attivati un sensore CA o degli applicatori manuali idonei. La modalità automatica rimarrà disabilitata in assenza di un'interfaccia mente-materia adeguata.

La farfalla si allontana dal fiore, oppure il processo è in attesa.

Il segnale di feedback è stato interrotto. Verificare che il sensore sia ancora tenuto nella posizione corretta, che il cavo e la connessione siano stabili e che l'interfaccia corretta sia attiva nelle proprietà di scansione.

Non c'è alcun rumore ambientale.

Verifica il volume e il dispositivo di uscita, il file audio selezionato e qualsiasi selezione manuale o dipendente dall'ambiente. Ascolta il file con le impostazioni di Stress Balance a scopo di test.

L'immagine di sfondo che hai scelto presenta bordi o appare sfocata.

Utilizza un file JPG di dimensioni sufficientemente grandi, in formato orizzontale, idealmente di circa 3000 × 2000 pixel. Formati significativamente diversi o file di piccole dimensioni non possono essere visualizzati a schermo intero e con nitidezza.

Impossibile avviare il processo.

Verifica le proprietà della scansione, l'hardware rilevato e il cliente corrente. Se necessario, chiudi la finestra di Stress Balance, riconnettiti e riapri il modulo.

Al termine dell'applicazione non viene proposto alcun report.

Il report viene fornito solo nell'ambito della procedura di chiusura completa. Si prega inoltre di verificare il cliente selezionato e le impostazioni generali di stampa/PDF di BCS.

Non è possibile scaricare immagini e suoni ambientali.

Verifica la tua connessione internet e se il download è ancora disponibile nelle impostazioni del programma Stress Balance. Le immagini e i suoni già memorizzati localmente possono essere utilizzati comunque.

3.6.12 Domande frequenti su Bucher Stress Balance

L'indicatore di stress rappresenta un valore oggettivo di stress?

No. Si tratta di un indicatore di progresso relativo, interno al programma, per l'applicazione in corso e non di una valutazione medica o psicologica.

Il cliente deve essere presente?

L'applicazione principale è pensata per un cliente fisicamente presente, poiché il sensore CA, o interfaccia mente-materia, viene tenuto in mano durante il processo di biofeedback. Sebbene sia possibile un'applicazione completamente a distanza, risulta meno efficace a causa della mancanza

di un ciclo di feedback. Tuttavia, sarebbe ipotizzabile utilizzare Zoom o altri software per trasmettere la schermata di Stress Balance al cliente.

Quale emoticon dovrebbe scegliere il cliente?

Il cliente sceglie spontaneamente la rappresentazione che più si avvicina alla sua percezione attuale. Non esiste una scelta giusta o sbagliata.

Cosa significa se la farfalla non riesce a raggiungere il fiore?

Ciò significa semplicemente che lo stato finale previsto dal programma non è stato raggiunto in questa esecuzione. Da ciò non si devono trarre diagnosi, valutazioni sulla collaborazione o dichiarazioni negative sul cliente.

Stress Balance può funzionare nella sala d'attesa senza personale?

La modalità automatica è progettata per un funzionamento in gran parte autonomo. Ciononostante, è necessario organizzare istruzioni, utilizzo volontario, supporto disponibile, protezione dei dati e pulizia dei sensori.

Posso usare una mia foto delle vacanze o una foto naturalistica?

Sì. L'immagine deve essere in formato JPG e di dimensioni sufficientemente grandi, in formato orizzontale. Verifica i diritti d'autore ed evita immagini che potrebbero turbare il cliente.

Il metodo Stress Balance sostituisce la terapia o la consulenza psicologica?

No. Stress Balance è uno strumento supplementare di biofeedback e autoriflessione. Non sostituisce il supporto medico, psicoterapeutico, psicologico o di altro tipo fornito da professionisti.

4 Moduli aggiuntivi comuni a più prodotti

4.1 Valutazione dell'IA: lavorare con l'intelligenza artificiale in BCS

4.1.1 Panoramica

Questo capitolo descrive come utilizzare l'intelligenza artificiale, o IA, per valutare i risultati delle scansioni nei sistemi di coaching Bucher.

La funzione di intelligenza artificiale ti aiuta a comprendere meglio i risultati delle scansioni, a individuare correlazioni e a generare testi per il lavoro professionale successivo. Ad esempio, l'IA può spiegare i risultati delle singole scansioni, formulare suggerimenti terapeutici, creare raccomandazioni comprensibili per il cliente o suggerire affermazioni personalizzate.

L'intelligenza artificiale non sostituisce il giudizio professionale. È uno strumento di supporto. Ogni risposta generata dall'IA deve essere esaminata dall'utente, modificata se necessario e giustificata in modo professionale.

Importante: l'IA non è integrata direttamente in BCS. Non ha accesso diretto ai tuoi dati BCS. Il trasferimento avviene intenzionalmente tramite gli appunti. Questo ti garantisce di mantenere il controllo sulle informazioni che vengono trasmesse all'IA.

4.1.2 Scopo della valutazione dell'IA

La valutazione tramite intelligenza artificiale serve a contestualizzare i risultati della scansione in modo comprensibile.

Può aiutare a:

- spiegare i singoli risultati della scansione,
- rendere visibili possibili collegamenti tra i risultati e i problemi del cliente,
- formulare approcci terapeutici o di coaching,
- creare raccomandazioni comprensibili anche ai non esperti,
- proporre affermazioni e piani di esercizio,
- interpretare simbolicamente immagini frattali, se il modulo è attivato,
- affrontare domande specifiche con prompt personalizzati.

La valutazione tramite intelligenza artificiale può essere particolarmente utile quando i risultati delle scansioni sono numerosi o quando le relazioni sono difficili da valutare a prima vista.

4.1.3 Protezione dei dati e principio fondamentale

BCS non trasferisce automaticamente i dati completi del cliente a un'IA. L'IA riceve solo le informazioni necessarie per la rispettiva valutazione.

Il trasferimento avviene in due direzioni:

1. BCS genera un prompt preconfigurato.
Risultato: il prompt contiene i dati di scansione richiesti e le informazioni selezionate dai dati del cliente.
2. Il prompt viene passato a un sistema di intelligenza artificiale esterno tramite gli appunti.
Risultato: l'IA può valutare il prompt e generare una risposta.

3. La risposta dell'IA viene copiata nuovamente in BCS tramite gli appunti.

Risultato: la risposta è disponibile in BCS per ulteriori elaborazioni, documentazione e output.

Importante: non utilizzare i nomi dei clienti o altri dati che consentano l'identificazione diretta, a meno che non siano necessari per la valutazione tramite IA. Ove possibile, utilizzare i numeri identificativi dei clienti, l'età, il sesso, la specie, l'obiettivo, le diagnosi, i sintomi e i risultati delle scansioni.

Attenzione: i sistemi di intelligenza artificiale possono commettere errori. Esaminate attentamente ogni risposta prima di salvarla, stamparla, esportarla come PDF o condividerla con un cliente.

4.1.4 Prerequisiti

Per utilizzare la valutazione basata sull'IA, avrai bisogno di:

- BCS in una versione che supporta la valutazione IA (dalla versione 6.23.4 in poi),
- una scansione completata con risultati salvati,
- i campi «Diagnosi» e «Sintomi» della scheda cliente compilati, se necessario,
- Accesso a un sistema di intelligenza artificiale adeguato,
- gli Appunti di Windows funzionanti,
- sufficiente competenza tecnica per verificare la risposta dell'IA.

Nota: la qualità della risposta dell'IA dipende in larga misura dalla qualità dei dati di input. Quanto più accuratamente documenterete la situazione del cliente nelle sezioni "Diagnosi" e "Sintomi", tanto più precisamente l'IA potrà classificare i risultati della scansione.

4.1.5 Registrare in modo significativo diagnosi e sintomi

L'intelligenza artificiale è in grado di valutare meglio i risultati della scansione quando conosce il contesto del paziente. Questo contesto viene fornito principalmente tramite i campi "Diagnosi" e "Sintomi".

Utilizzare il campo "Diagnosi" per i risultati confermati da un medico.

Utilizza il campo "Sintomi" per qualsiasi altra problematica rilevante riguardante il cliente.

Ciò include non solo disturbi fisici, ma anche problemi quotidiani fonte di stress, ad esempio:

- stress lavorativo,
- conflitti sociali,
- problemi familiari
- relazione di coppia,
- preoccupazioni finanziarie
- Questioni educative,
- Situazione abitativa,
- Motivazione,
- Alimentazione ed esercizio fisico
- Immagine di sé,
- Fiducia in se stessi,
- convinzioni limitanti
- stress emotivo.

Suggerimento pratico: non limitarti a inserire singoli termini nel campo "Sintomi". Brevi elenchi puntati o alcune frasi esplicative aiutano l'IA a contestualizzare meglio i risultati della scansione.

4.1.6 Ricreare la valutazione dell'IA sulla base di informazioni aggiuntive

Se dopo la scansione vengono aggiunte diagnosi o sintomi, di solito non è necessario ripetere la scansione. Se si aggiungono queste informazioni alla cartella clinica del paziente e si è già creata una valutazione IA, è necessario eliminare la valutazione IA esistente e generarne una nuova, in modo che vengano prese in considerazione anche le aggiunte. La scansione iniziale esistente rimane invariata.

4.1.7 Prompt standard in BCS

Un prompt è un'attività preparata per l'IA. Contiene la domanda da porre all'IA, i dati rilevanti del cliente e i risultati della scansione.

BCS fornisce diversi prompt standard, che si differenziano per il loro obiettivo.

Prompt 1: Valutazione dei singoli risultati della scansione

Questo prompt spiega singolarmente i risultati più importanti della scansione. È utile per comprendere il significato delle singole voci.

Prompt 2: Valutazione terapeutica

Questo prompt è destinato agli utenti professionali. Può suggerire definizioni di problemi, possibili soluzioni, consigli terapeutici e metodi di supporto.

Importante: questa valutazione è destinata all'utente. Non deve essere trasmessa al cliente senza essere stata prima verificata.

Prompt 3: Raccomandazione per il cliente

Questo prompt crea una raccomandazione comprensibile e non medica per il cliente, con un linguaggio positivo, incoraggiante e pratico per la vita quotidiana.

Questo prompt è particolarmente adatto ai report destinati al cliente.

Prompt 4: Affermazioni e piano di 4 settimane

Questo strumento crea affermazioni personalizzate e un piano di quattro settimane. È adatto a clienti che desiderano lavorare con brevi spunti quotidiani.

Prompt 5: Interpretazione frattale

Questo prompt è disponibile solo se si possiede una licenza per il modulo Frattale. Viene utilizzato per interpretare simbolicamente i colori, le forme e i motivi di un'immagine frattale.

Nota: senza il modulo frattale, sono disponibili solo i prompt standard senza interpretazione frattale.

Regola rapida da trasmettere ai clienti

I report/suggerimenti 1 e 2 dell'IA sono destinati all'uso professionale da parte di utenti e terapeuti e non devono essere trasmessi ai clienti senza previa revisione. I report 3, 4 e, se disponibile, 5 sono progettati per una comunicazione chiara con il cliente. Ciononostante, si prega di rivedere e modificare ogni testo prima di condividerlo.

4.1.8 Quali prompt sono adatti ai diversi scopi

Non tutti i prompt sono adatti a ogni scopo.

Per l'utente (terapeuta o coach) sono particolarmente adatti i prompt:

- “Valutazione dei risultati delle singole scansioni”
- "Valutazione terapeutica".

Questi prompt possono includere termini tecnici, indicazioni terapeutiche e interpretazioni approfondite.

Particolarmente adatti ai clienti sono:

- “Raccomandazione per il cliente”
- “Affermazioni e piano di 4 settimane”
- "Interpretazione dei frattali", purché appropriata e autorizzata.

Questi prompt sono generalmente più comprensibili, positivi e orientati all'autoaiuto e al sostegno personale.

Attenzione: non inoltrare una risposta generata dall'IA a un cliente senza averla prima verificata.

Elimina le affermazioni fuorvianti, troppo dirette, eccessivamente stressanti o tecnicamente inappropriate.

4.1.9 Processo di valutazione dell'IA

Questa sezione descrive il processo tipico per la creazione di una valutazione basata sull'intelligenza artificiale a partire dal risultato di una scansione.

Registrare l'anamnesi del paziente (diagnosi / sintomi / problemi del paziente).

Risultato: Diagnosi, sintomi e problematiche rilevanti del paziente vengono documentati.

Eseguire la scansione richiesta.


Risultato: I risultati della scansione sono stati salvati e sono disponibili nella sezione "Invia/Report".

Apri la sezione "Invia/Reportzioni".

Risultato: vengono visualizzati i pacchetti disponibili e i risultati della scansione.

Per la scansione desiderata, apri la funzione «AI».

Risultato: vengono visualizzate le funzionalità di intelligenza artificiale relative a questa scansione.

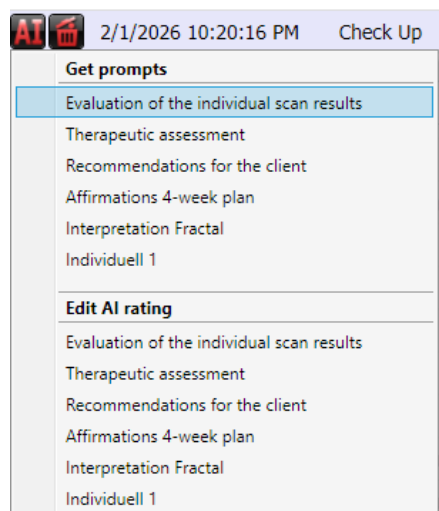

Nella sezione «Ottieni prompt», fai clic sul prompt desiderato.

Risultato: BCS crea il prompt e lo copia negli appunti.

Apri il sistema di intelligenza artificiale desiderato (ad esempio, ChatGPT.com).

Risultato: Il campo di input dell'IA è visibile.

Incolla il prompt usando "Ctrl+V".

Risultato: la query preparata da BCS appare nel campo di input dell'IA.

Invia la richiesta all'IA.

Risultato: l'IA genera una risposta.

Copia la risposta dell'IA negli appunti. Per farlo, usa l'icona di copia che trovi sotto la risposta dell'IA.

Risultato: la risposta può essere reinserita in BCS.

Torna a utilizzare BCS.


Risultato: la scansione corrispondente è ancora disponibile.

Apri nuovamente la sezione "AI" e seleziona "Modifica valutazione IA", quindi la voce appropriata.

Esempio: se hai utilizzato il prompt "Raccomandazione per il cliente", seleziona anche la voce "Raccomandazione per il cliente" durante l'inserimento.

Risultato: la risposta dell'IA è stata assegnata all'area corretta.

Incolla la risposta facendo clic su "Incolla dagli appunti di IA".

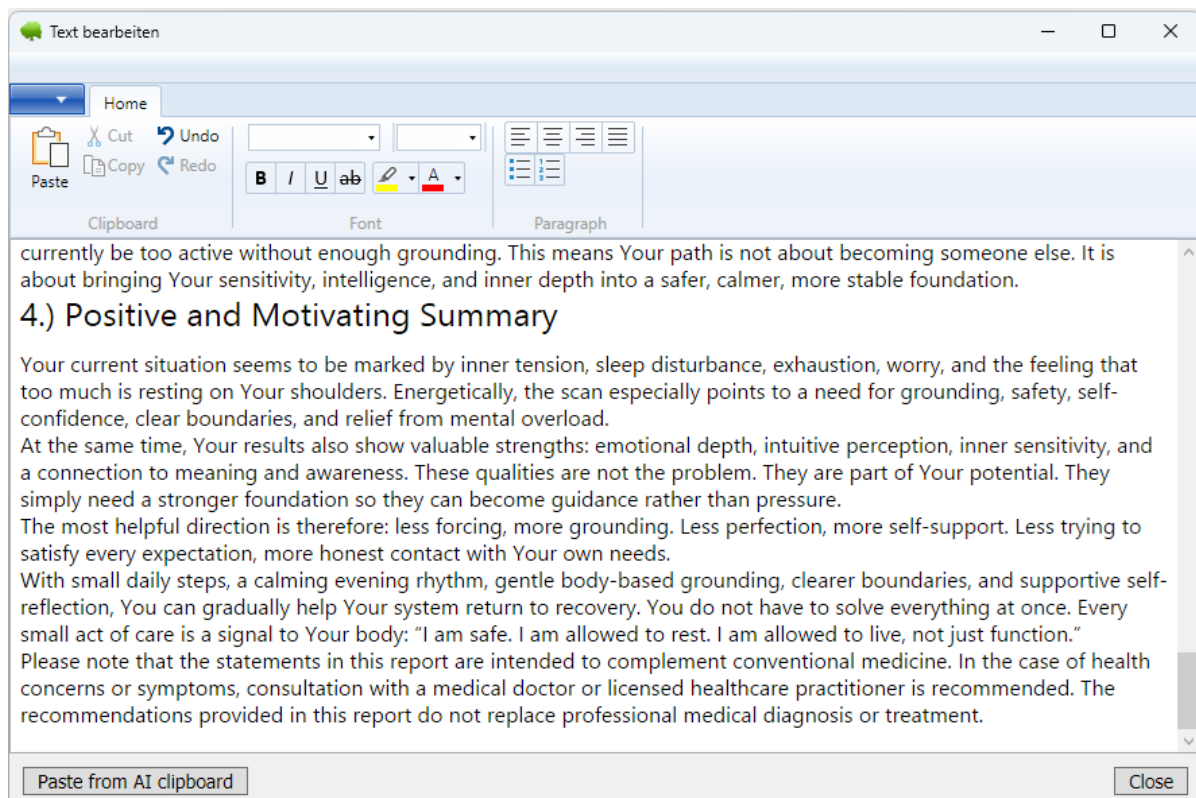

Risultato: la risposta dell'IA è disponibile per l'elaborazione nel BCS.

Controlla e modifica il testo.

Risultato: Il testo è stato revisionato da professionisti e può essere salvato.

Chiudi la finestra di modifica.

Risultato: Le modifiche sono state salvate.

Se necessario, apri l'anteprima di stampa.

Risultato: le valutazioni dell'IA registrate vengono visualizzate come voci selezionabili nell'anteprima.

Stampa il report oppure salvalo come PDF.

Risultato: il rapporto può essere documentato o trasmesso al cliente.

4.1.10 Verifica e modifica delle risposte dell'IA

Le risposte generate dall'IA non dovrebbero essere accettate senza verifica. Anche le risposte generate dall'IA, per quanto valide, possono contenere formulazioni inappropriate, imprecisioni tecniche o affermazioni eccessivamente generiche.

Presta particolare attenzione a:

- Le affermazioni sono comprensibili?
- Le dichiarazioni corrispondono alla descrizione fornita dal cliente?
- Non vengono fatte promesse di guarigione?
- Non vengono formulate diagnosi mediche?
- Le raccomandazioni sono realistiche e responsabili?

- Il tono è adeguato al cliente?
- Il testo contiene affermazioni sensibili che dovrebbero essere rimosse?

Un'intelligenza artificiale può formulare argomentazioni convincenti, anche se un'affermazione è errata. La responsabilità professionale rimane sempre dell'utente.

4.1.11 Utilizzo di prompt personalizzati

Oltre ai prompt standard, BCS consente di creare prompt personalizzati. Questa funzione è utile se si desidera supportare analisi specifiche o flussi di lavoro personalizzati con l'intelligenza artificiale. Esempi di prompt personalizzati:

- Selezione di prodotti adatti dalla nostra gamma di prodotti,
- domande specifiche di coaching,
- Logica di valutazione individuale per una pratica specifica,
- Rapporti in uno stile specifico,
- Riepiloghi per la documentazione interna,
- Raccomandazioni specifiche per particolari gruppi target.

Importante: i prompt personalizzati devono essere creati e testati con attenzione. Un prompt formulato male spesso porta a risposte imprecise o inutilizzabili.

4.1.12 Attivare e assegnare un nome al prompt personalizzato


Fai clic sul pulsante rotondo "Funzioni aggiuntive" in alto (testo del suggerimento: "Funzioni aggiuntive e di aiuto").



Pulsante rotondo "Funzioni aggiuntive"

Risultato: viene visualizzato il menu "Funzioni aggiuntive".


Apri "Impostazioni".

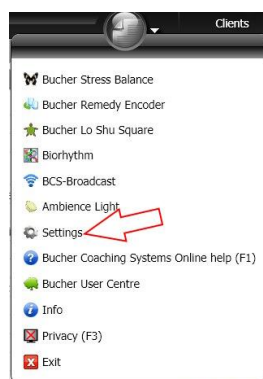

Accesso alle impostazioni

Risultato: si apre la finestra delle impostazioni.


Apri la sezione "Valutazione dell'IA".

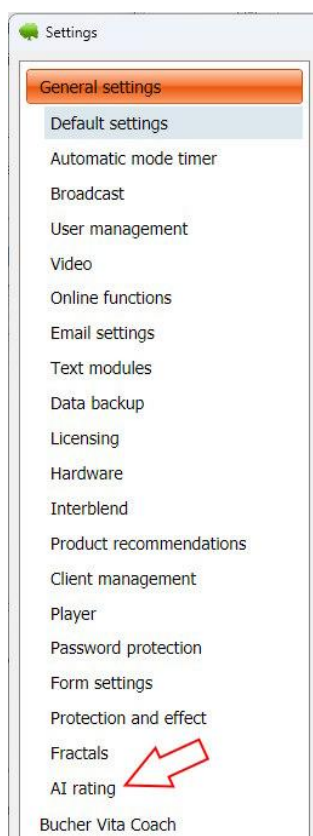

impostazioni di valutazione dell'IA


Risultato: vengono visualizzate le impostazioni del prompt IA.

Fai clic su “Prompt personalizzati” nella sezione inferiore.

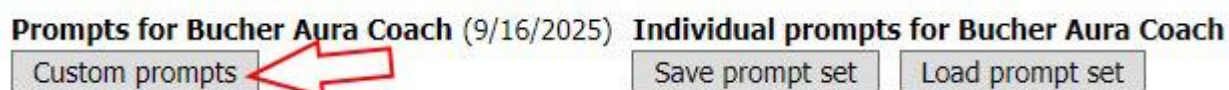

Risultato: si apre la finestra "Prompt personalizzati".

Attiva un prompt personalizzato selezionando la casella.

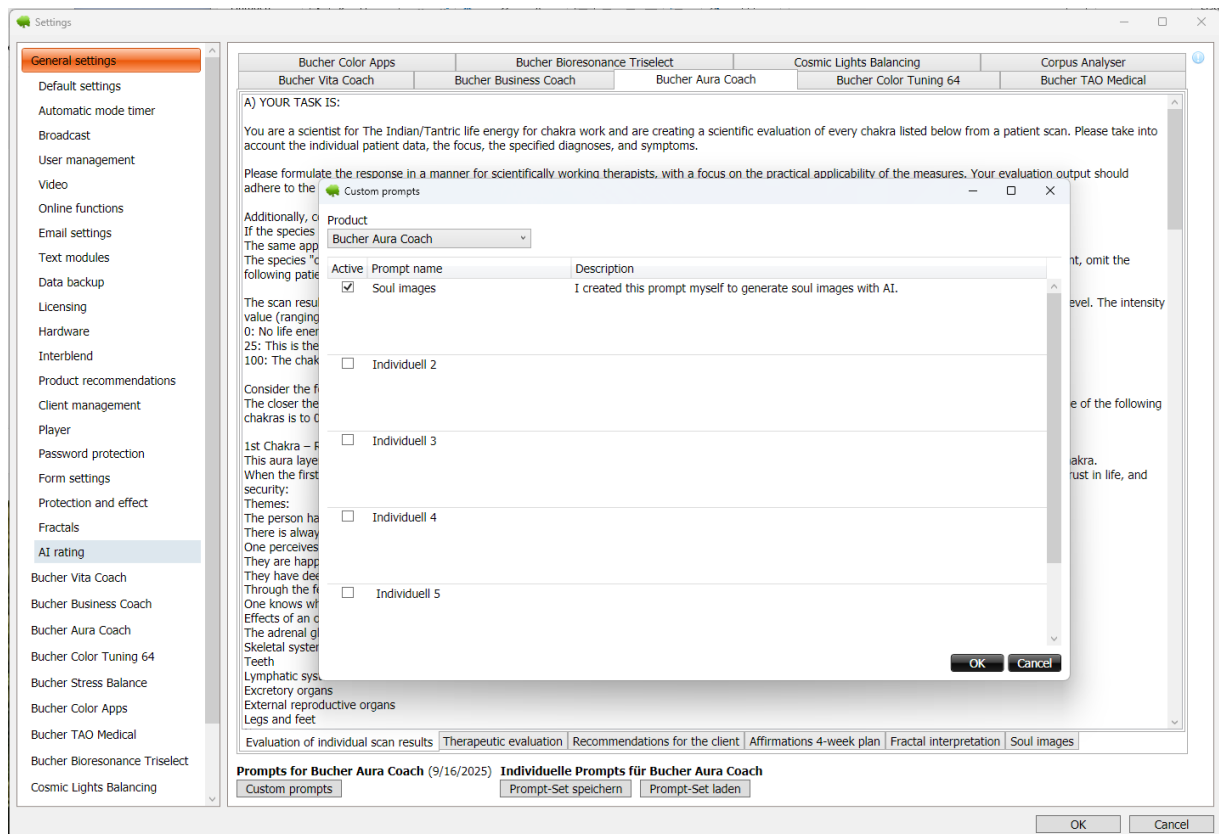

Crea 5 prompt personalizzati aggiuntivi

Risultato: il prompt personalizzato è pronto per la modifica.

Assegna un nome al prompt facendo doppio clic su "Personalizzato".

Risultato: Puoi inserire un nome personalizzato per questo prompt. Il prompt potrà poi essere selezionato in seguito utilizzando questo nome. È anche consigliabile aggiungere una descrizione al prompt. Questo ti aiuterà a tenerne traccia più facilmente.

Conferma con "OK".

Risultato: viene visualizzata una scheda separata per il singolo prompt.

Inserisci o modifica il prompt nella nuova scheda (clicca sulla scheda IN BASSO e inserisci il prompt).

Risultato: Il prompt personalizzato è stato creato.

Importante: salvare l'intera finestra delle impostazioni al termine. Solo in questo modo il testo del prompt inserito verrà salvato in modo permanente nel database BCS locale. Se si annullano le impostazioni, tutte le modifiche apportate al testo del prompt dall'apertura della finestra andranno perse.

I cinque prompt standard sono di sola lettura. Solo i cinque slot di prompt personalizzati possono essere modificati.

Suggerimento pratico: copia un prompt standard esistente (seleziona/copia/incolla in una nuova finestra di prompt) e personalizzalo. In questo modo, le strutture e i segnaposto importanti vengono

preservati. È anche una buona idea chiedere all'IA se il prompt è accettabile o se ha suggerimenti per migliorarlo.

4.1.13 Segnaposto nei prompt personalizzati

I prompt personalizzati possono contenere dei segnaposto. Questi segnaposto verranno successivamente sostituiti automaticamente con i dati provenienti da BCS.

Esempi di segnaposto potrebbero essere:

- Numero cliente,
- Età,
- Genere,
- Specie,
- Focus,
- Altezza,
- Peso,
- diagnosi,
- Sintomi,
- Lingua di output,
- Risultati della scansione.

L'elenco preciso dei segnaposto disponibili si trova nella finestra delle impostazioni dell'IA, accessibile tramite l'icona informativa (in alto a destra, l'icona rotonda blu).



Importante: modificare i segnaposto solo se se ne conosce il significato. Segnaposto digitati in modo errato o rimossi possono impedire l'inserimento di dati importanti nel prompt. I segnaposto vengono popolati con i dati del cliente e i risultati della scansione al momento della generazione del prompt (ma non con dati personali).

4.1.14 Utilizzo di prompt personalizzati nell'area "Invia/Report"

Una volta impostati, i prompt personalizzati sono disponibili nella sezione "Invia/Report".

Facendo clic su «AI» per la scansione desiderata, i **prompt personalizzati compaiono** tra le funzioni IA e si utilizzano come i prompt standard.

Ciò significa:

Seleziona il prompt.

Risultato: il prompt personalizzato viene popolato con i dati di scansione correnti.

			Scan date	Chakra 1	Chakra 2
1	▶▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀	AI ✖	12/10/2025 8:08:33 PM	14 85
2	▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀	AI ✖	12/10/2025 8:04:54 PM	10 64
3	▶▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀			6 74
4	▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀			9 66
5	▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀			2 36
6	▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀			3 50
7	▶▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀			7 67
8	▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀			8 38
9	▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀			1 24
10	▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀			7 44
11	▶▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀	✓		7 93
12	▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀	✓		8 68
13	▶▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀			5 43
14	▶	🔍🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀	AI ✖	1/15/2021 12:28:39 AM	78 32

Get prompts

- Evaluation of individual scan results
- Therapeutic evaluation
- Recommendations for the client
- Affirmations 4-week plan
- Fractal interpretation
- Soul images

Edit AI rating

- Evaluation of individual scan results
- Therapeutic evaluation
- Recommendations for the client
- Affirmations 4-week plan
- Fractal interpretation
- Soul images

Prompt personalizzato «Immagini dell'anima» nella finestra «Elenco pacchetti».

Trasferisci il prompt all'IA.

Risultato: l'IA genera una risposta basata sul tuo compito specifico.

Copia la risposta e inviala a BCS.

Risultato: La risposta può essere salvata, modificata e visualizzata in seguito.

Nota: i prompt personalizzati sono adatti soprattutto a compiti specialistici ricorrenti. Per una richiesta occasionale può essere più semplice utilizzare un prompt standard e integrare poi manualmente la risposta dell'IA.

4.1.15 Salvataggio e caricamento di singoli set di prompt sul server Bucher

Dalla versione 6.24.1 in poi, i prompt personalizzati possono essere salvati come set di prompt sul server di Bucher GmbH.

Un set di prompt è una raccolta di prompt personalizzati attualmente configurati. Ciò consente agli utenti di salvare le proprie configurazioni di prompt, caricarle in seguito o renderle disponibili ad altri utenti BCS, se lo desiderano.

I set di prompt sono specifici per prodotto. Viene salvata solo la configurazione del prodotto BCS attualmente selezionato nelle impostazioni IA, ad esempio Bucher Aura Coach. Un set di prompt non viene applicato automaticamente a tutti i prodotti BCS.

Un set di prompt contiene tutti e cinque gli slot prompt personalizzati per questo prodotto: i relativi stati di attivazione, nomi, descrizioni e testi completi dei prompt. Anche gli slot prompt attualmente disattivati sono inclusi nel set.

Non è prevista alcuna funzione di archiviazione locale per i set di prompt. Il salvataggio e il caricamento avvengono sempre tramite il server Bucher. Per questo è necessaria una connessione Internet attiva.

Chiarimento: i prompt personalizzati attualmente configurati vengono memorizzati localmente nel database BCS. Non è disponibile alcuna funzione di esportazione o importazione locale di file per i set di prompt riutilizzabili. Ulteriori operazioni di backup e scambio di set di prompt denominati vengono eseguite esclusivamente tramite il server Bucher.

Questa funzione è particolarmente utile se hai sviluppato dei prompt personalizzati per aree di lavoro specifiche, ad esempio:

- valutazioni speciali di coaching,
- gruppi target specifici,
- i propri stili di reporting,
- Consigli sui prodotti,
- Documentazione interna,
- procedure di pratica ricorrente.

Importante: non memorizzare informazioni personali identificabili dei clienti nei prompt, nei nomi dei prompt o nelle descrizioni. Un set di prompt deve contenere solo istruzioni generali per il lavoro, ma non nomi, diagnosi, informazioni riservate sul caso o altri dati sensibili.

4.1.16 Salvare un set di prompt sul server Bucher

La funzione "Salva set di prompt" consente di salvare i prompt personalizzati come set di prompt sul server Bucher.

Requisiti

- BCS è installato almeno nella versione 6.24.1.
- I prompt personalizzati sono impostati.
- È disponibile una connessione a Internet.
- Attualmente ti trovi nelle impostazioni relative alla "Valutazione IA".

Istruzioni passo passo

In BCS, apri "Impostazioni".

Risultato: si apre la finestra delle impostazioni.


Passa alla sezione "Valutazione dell'IA".

Risultato: vengono visualizzate le impostazioni per la valutazione dell'IA.

Controlla i tuoi prompt personalizzati.


Risultato: puoi vedere quali prompt devono essere salvati come set di prompt.

Fare clic su "Salva set di prompt".

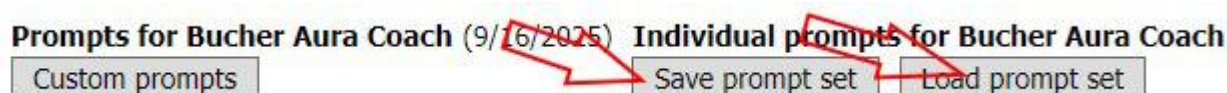

Risultato: si apre una piccola finestra che descrive il set di prompt.

Nota: prima di salvare, verificare che nelle impostazioni dell'IA sia selezionato il prodotto BCS corretto. In questo set di prompt verranno salvati solo i suoi cinque slot di prompt personalizzati.

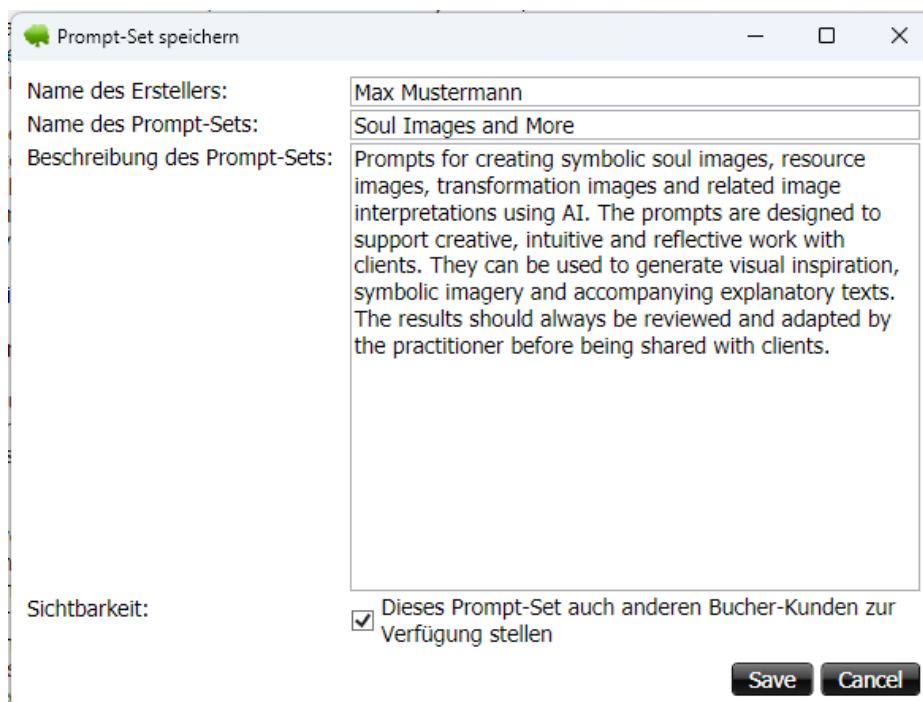

Informazioni sul set di prompt personalizzati corrente (tutti e cinque gli slot di prompt personalizzati)

Inserisci il nome dell'autore nel campo "Nome dell'autore".

Il nome del creatore è un campo obbligatorio e può contenere un massimo di 30 caratteri. Anche il nome del set di prompt è obbligatorio e limitato a 30 caratteri. La descrizione del set di prompt è facoltativa.

Risultato: il set di prompt può essere successivamente assegnato al creatore.

Inserisci un nome univoco nel campo "Nome del set di prompt".

Esempio: «Report autoregolazione» oppure «Prompt studio francese».

Risultato: il set di prompt sarà più facile da riconoscere in seguito.

Inserisci una breve descrizione nel campo "Descrizione del set di prompt".

Risultato: Tu o altri utenti capirete in seguito a cosa serve questo set di prompt.

Nella sezione "Visibilità", decidi se il set di prompt deve essere visibile solo a te o anche agli altri clienti di Bucher.

Risultato: la visibilità del set di prompt è stata impostata.

Salvare il set di prompt.

Risultato: il set di prompt è memorizzato sul server di Bucher GmbH.

Nota: se non si concede la visibilità ad altri utenti, il set di prompt sarà visibile solo a te. Verrà comunque memorizzato sul server Bucher, ma non sarà visibile agli altri utenti BCS.

4.1.17 Rendere disponibile il set di prompt ad altri utenti

Quando si salva un set di prompt, è possibile attivare l'opzione "Visibilità: rendi questo set di prompt disponibile anche agli altri clienti Bucher".

Quando questa opzione è abilitata, gli altri utenti BCS possono visualizzare questo set di prompt quando fanno clic su "Carica set di prompt" e integrarlo nel proprio BCS.

Lo scopo di questa funzionalità è facilitare lo scambio di prompt collaudati tra gli utenti. Ciò consente agli utenti di imparare gli uni dagli altri e di adottare strutture di prompt già testate. Importante: prima di rilasciare un set di prompt, verificare attentamente che non contenga informazioni riservate, personali o interne. I set di prompt rilasciati devono essere formulati in termini generali e funzionare senza fare riferimento a clienti specifici.

Suggerimento pratico: utilizzate nomi chiari e descrizioni comprensibili per i set di prompt condivisi. Gli altri utenti dovrebbero essere in grado di capire a cosa serve il set di prompt basandosi solo sul nome e sulla descrizione.

4.1.18 Caricare un set di prompt

La funzione "Carica set di prompt" consente di trasferire i set di prompt salvati dal server Bucher a BCS.

A seconda della visibilità, potrebbero essere visualizzate le seguenti informazioni:

- set di prompt salvati personali,
- Set di prompt che altri clienti di Bucher hanno rilasciato per uso generale.

Requisiti

- BCS è installato almeno nella versione 6.24.1.
- È disponibile una connessione a Internet.
- Attualmente ti trovi nelle impostazioni relative alla "Valutazione IA".

Istruzioni passo passo


In BCS, apri "Impostazioni".

Risultato: si apre la finestra delle impostazioni.

Passa alla sezione "Valutazione dell'IA".

Risultato: vengono visualizzate le impostazioni dell'IA.

Fare clic su "Carica set di prompt".

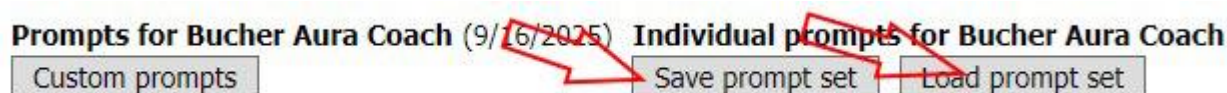

Risultato: viene visualizzato un elenco di set di prompt disponibili.

Selezionare il set di prompt desiderato.

Risultato: vengono mostrati nome, autore e descrizione del set di prompt.

Per farlo, clicca sull'icona di importazione accanto alla voce desiderata nell'elenco. Il set verrà importato immediatamente; non è necessario alcun ulteriore pulsante di caricamento generale.

Risultato: i prompt vengono trasferiti in BCS e possono essere utilizzati o personalizzati.

Durante l'importazione, tutti e cinque gli slot di prompt personalizzati del prodotto BCS selezionato vengono sostituiti. Vengono trasferiti gli stati di attivazione, i nomi, le descrizioni e i testi dei prompt. La configurazione importata viene salvata immediatamente nel database BCS locale. Importante: quando si carica un set di prompt personalizzati (propri o di altri), i prompt personalizzati attualmente in uso nel sistema BCS verranno sovrascritti. Se si desidera utilizzare questi prompt in seguito, è necessario salvarli prima di caricarne altri. Dopo il caricamento, verifica quali prompt personalizzati sono stati applicati. Se desideri salvare i tuoi prompt prima del caricamento, salvali preventivamente utilizzando la funzione "Salva set di prompt" sul server Bucher.

4.1.19 Visibilità dei set di prompt

La visibilità determina chi può visualizzare e caricare un set di prompt salvato.

Impostazione	Significato
Non pubblicato	Il set di prompt è visibile solo a te.
Disponibile per altri clienti Bucher	Il set di prompt appare anche agli altri utenti BCS sotto la voce "Carica set di prompt".

Raccomandazione: inizialmente, conservate i set di prompt personali o non testati esclusivamente per il vostro utilizzo. Pubblicate un set di prompt solo quando è generalmente comprensibile, testato e privo di informazioni riservate.

Nella finestra di caricamento puoi condividere successivamente i tuoi set di prompt oppure limitarne nuovamente la visibilità al solo uso personale. Usa l'interruttore «Condividi» accanto al set desiderato; non occorre salvarlo di nuovo.

Nella finestra di caricamento, i set creati dagli utenti e quelli condivisi da altri clienti vengono visualizzati separatamente. L'elenco può essere ordinato per nome del set di prompt, autore o data di modifica.

4.1.20 Informazioni sulla protezione dei dati per i set di prompt

I set di prompt vengono utilizzati per memorizzare e scambiare istruzioni di lavoro per l'IA. Non sono destinati a memorizzare casi specifici dei clienti.

Pertanto, nei set di prompt è necessario evitare quanto segue:

- Nomi dei clienti,
- Numeri dei clienti,
- Indirizzi,
- Indirizzi e-mail,
- Numeri di telefono,
- diagnosi mediche di singoli individui,
- Descrizioni dei casi con valore di riconoscimento,
- note interne sui singoli clienti,
- Dati riservati relativi alla pratica professionale o all'attività aziendale.

Importante: se un set di prompt viene condiviso con altri clienti Bucher, i prompt, il nome del set di prompt e la descrizione devono essere formulati in modo tale da non rivelare informazioni riservate. Suggerimento pratico: nei set di prompt, utilizzate solo segnaposto e frasi generiche. I dati specifici del cliente verranno inseriti solo in seguito, durante la creazione di un prompt IA a partire dalla scansione effettuata.

4.1.21 Errori comuni e soluzioni per i set di prompt

Problema: il pulsante «Salva set di prompt» non è presente.

Possibile causa: stai utilizzando una versione precedente di BCS.

Soluzione: Verificare che sia installata almeno la versione 6.24.1.

Problema: Impossibile salvare il set di prompt.

Possibile causa: Non è presente alcuna connessione a Internet oppure la connessione al server Bucher è temporaneamente non disponibile.

Soluzione: Verifica la tua connessione internet e riprova.

Problema: un set di prompt salvato non viene visualizzato durante il caricamento.

Possibile causa: il set di prompt non è stato salvato correttamente oppure non è presente una connessione a Internet.

Soluzione: Verifica la tua connessione a Internet. Se necessario, salva nuovamente le impostazioni.

Problema: gli altri utenti non riescono a visualizzare il mio set di prompt.

Possibile causa: l'opzione "Visibilità: rendi questo set di prompt disponibile agli altri clienti Bucher" non è stata attivata.

Soluzione: Apri "Carica set di prompt" e attiva l'interruttore "Condividi" per il tuo set di prompt.

Operazione corrente: Aprire "Carica set di prompt" e attivare l'interruttore "Condividi" per il proprio set di prompt. Questo modifica la visibilità direttamente sul server Bucher.

Problema: un set di prompt esterno non si adatta al proprio flusso di lavoro.

Possibile causa: i set di prompt riflettono sempre la logica di lavoro del rispettivo creatore.

Soluzione: Adatta i prompt caricati al tuo flusso di lavoro. Se necessario, salva la versione modificata con un nome personalizzato per il set di prompt.

Problema: una serie di prompt contiene informazioni inappropriate o riservate.

Possibile causa: durante la creazione è stato inserito un contenuto specifico per il caso, anziché un contenuto generico.

Soluzione: rimuovere tali contenuti dai prompt, dal nome e dalla descrizione. Quindi salvare nuovamente il set di prompt. Condividere con altri utenti solo i set di prompt ripuliti.

4.1.22 Domande frequenti sui set di prompt

Domanda: I set di prompt vengono memorizzati localmente sul mio computer?

Risposta: No. Non esiste una funzione di archiviazione locale per i set di prompt. I set di prompt vengono memorizzati sul server di Bucher GmbH e caricati da lì.

Domanda: Ho bisogno di una connessione internet?

Risposta: Sì. È necessaria una connessione Internet attiva per le funzioni "Salva set di prompt" e "Carica set di prompt".

Domanda: Gli altri utenti possono visualizzare automaticamente i miei set di prompt?

Risposta: no. Gli altri utenti vedono i tuoi set di prompt solo se li rendi visibili durante il salvataggio oppure tramite l'interruttore «Condividi» nella finestra di caricamento.

Domanda: Posso salvare un set di prompt solo per me stesso?

Risposta: Sì. Se non abiliti l'opzione di condivisione, il set di prompt sarà visibile solo a te.

Domanda: Posso memorizzare i dati del cliente in un set di prompt?

Risposta: No. I set di prompt non devono contenere dati personali o riservati dei clienti. Utilizzare solo istruzioni di lavoro generali e segnaposto.

Domanda: Qual è lo scopo della descrizione del set di prompt?

Risposta: la descrizione aiuta te e gli altri utenti a comprendere lo scopo del set di prompt.

Domanda: Posso modificare i set di prompt condivisi da altri utenti?

Risposta: È possibile personalizzare un set di prompt caricato per adattarlo al proprio flusso di lavoro. Se necessario, è possibile salvare la versione personalizzata come set di prompt personale. È possibile eliminare i propri set di prompt salvati anche nella finestra di caricamento. L'icona di eliminazione appare solo per i propri set; BCS richiederà conferma prima dell'eliminazione. Non è possibile eliminare i set condivisi dal server Bucher appartenenti ad altri utenti.

4.1.23 Stampa e output PDF


Tutte le risposte dell'IA salvate possono essere visualizzate nell'anteprima di stampa. Lì, appaiono come voci separate e selezionabili.

Se è stata salvata una sola risposta dell'IA, verrà visualizzata solo quella voce.

Se sono state salvate più risposte dell'IA, è possibile selezionarle e visualizzarle singolarmente.

Apri l'anteprima di stampa utilizzando l'icona della lente d'ingrandimento.

Risultato: viene visualizzata la selezione di stampa.

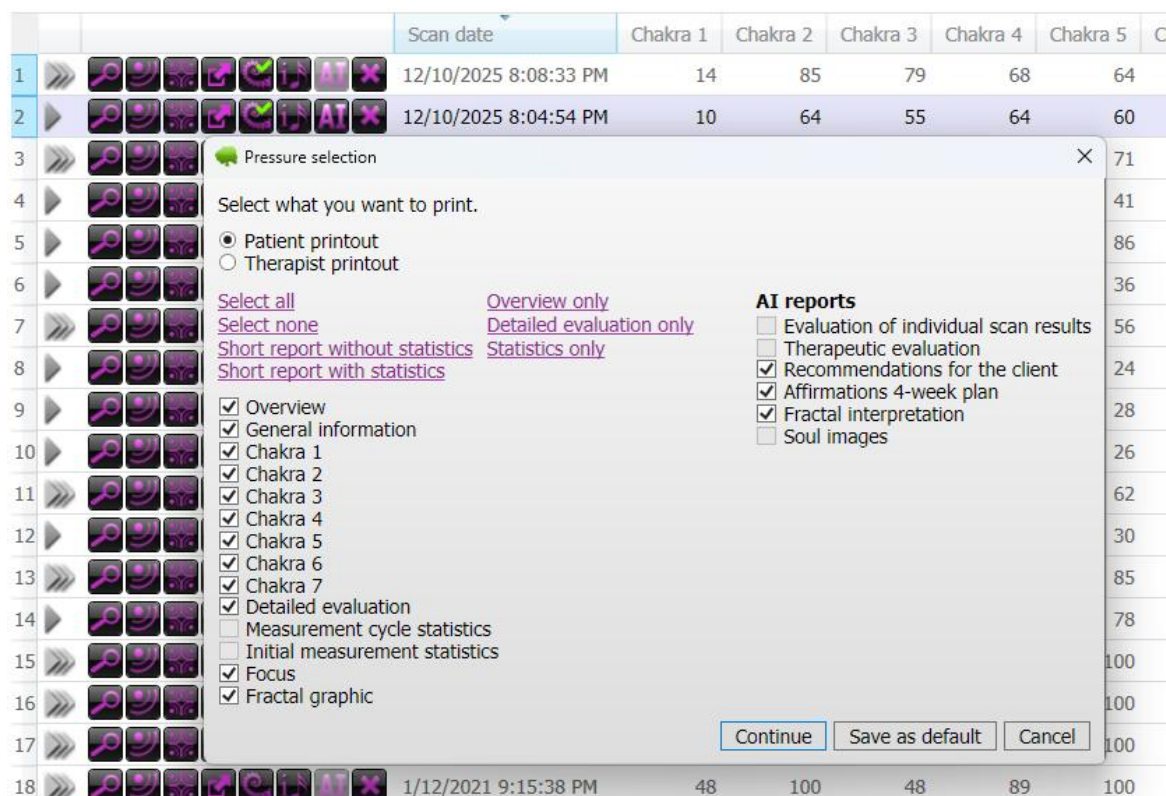

Nella sezione di stampa, scegli innanzitutto "Stampa per il paziente" o "Stampa per il terapeuta". Attiva le sezioni del report desiderate e le valutazioni IA offerte a destra. Fai clic su "Salva come predefinito" per salvare la selezione corrente per questo profilo e riutilizzarla al prossimo accesso alla pagina. Quindi fai clic su "Avanti".

Risultato: Il report corrispondente viene visualizzato sullo schermo.

Stampa il report o salvalo come PDF. Utilizza le icone nell'angolo in alto a sinistra del report per farlo.



Risultato: Il rapporto è disponibile per la documentazione o la distribuzione.

Importante: prima di stampare o salvare il testo in formato PDF, controllate attentamente il documento. Dopo averlo inoltrato al cliente, il report deve essere accurato sia nel contenuto che nella lingua.

Selezionare le sezioni del report appropriate

Nelle opzioni di stampa, è possibile mostrare o nascondere singole sezioni del report. Ad esempio, in Bucher Aura Coach, deselezionare la casella accanto a "Analisi dettagliata" se questa sezione non deve essere inclusa nel report finale.

4.1.24 Linee guida per un utilizzo responsabile

La valutazione basata sull'intelligenza artificiale è uno strumento. Può semplificare il lavoro, strutturare i testi e rendere più chiari i collegamenti. Tuttavia, non sostituisce la responsabilità professionale dell'utente.

Pertanto, si prega di notare:

- Leggete sempre attentamente le risposte fornite dall'IA.
- Non inoltrare messaggi di testo non verificati.
- Non si possono fare promesse di guarigione.
- Non ricavare diagnosi mediche dalle risposte dell'intelligenza artificiale.
- Non turbare i clienti.
- Se necessario, abbreviare, attenuare o eliminare le affermazioni.
- Inoltra il rapporto solo in un formato che tu possa giustificare professionalmente.

Attenzione: questo manuale non sostituisce la consulenza legale o medica. In caso di dubbi, verificare quali requisiti professionali, legali e di protezione dei dati si applicano al proprio lavoro.

4.1.25 Errori comuni e soluzioni

Problema: la risposta dell'IA non è adatta al cliente.

Possibile causa: i campi "Diagnosi" e "Sintomi" contengono troppo poco contesto.

Soluzione: aggiungere gli argomenti cliente pertinenti e ricreare il prompt.

Problema: la risposta dell'IA è formulata in termini troppo medici.

Possibile causa: è stato utilizzato un prompt professionale, ad esempio "Valutazione terapeutica".

Soluzione: Per i clienti, utilizzare il prompt "Raccomandazione per il cliente" oppure modificare la risposta di conseguenza.

Problema: la risposta dell'IA contiene troppi suggerimenti.

Possibile causa: la richiesta è troppo generica oppure l'IA ha risposto in modo troppo esaustivo.

Soluzione: Accorciare il testo nell'area di modifica BCS. Rimuovere tutto ciò che non è necessario.

Problema: il prompt personalizzato non viene visualizzato.

Possibile causa: il prompt non è stato attivato.

Soluzione: Aprire "Impostazioni" > "Valutazione IA" > "Prompt personalizzati" e verificare se la casella di controllo è selezionata.

Problema: mancano dei dati nel prompt.

Possibile causa: i segnaposto sono stati rimossi o sono stati scritti in modo errato.

Soluzione: Controlla il prompt e confronta i segnaposto utilizzati con l'elenco nella finestra delle impostazioni dell'IA.

Problema: l'IA risponde nella lingua sbagliata.

Possibile causa: la lingua di output non è stata selezionata correttamente nel prompt oppure il sistema di intelligenza artificiale non ha recepito l'istruzione sulla lingua. Un'altra causa comune è un'impostazione errata della lingua nella scheda del cliente. Per verificarlo, accedi ai dati del cliente e controlla il campo "Lingua" nella scheda "Dati personali". La lingua impostata in questo campo ha

la precedenza su tutte le altre impostazioni. Se viene selezionata una lingua errata o inadatta, l'output verrà sempre generato in quella lingua.

Soluzione: Aprire i dati del cliente in questione. Passare alla scheda "Dati personali" e controllare il campo "Lingua". Impostare la lingua desiderata e salvare la modifica facendo clic su "Salva". Quindi ricreare il prompt IA.

Se l'IA continua a rispondere nella lingua sbagliata, aggiungi al prompt un'istruzione esplicita sulla lingua, per esempio: «Rispondi interamente in italiano». Quindi ripeti la richiesta.

4.1.26 FAQ

Domanda: L'IA ha accesso diretto ai miei dati BCS?

Risposta: No. L'IA non è integrata direttamente in BCS. I dati vengono trasferiti tramite gli appunti. Questo permette di determinare quali informazioni vengono passate all'IA.

Domanda: devo utilizzare tutti i prompt?

Risposta: no. Utilizza solo i prompt adatti alla situazione.

Domanda: Posso inoltrare una risposta dell'IA direttamente al cliente?

Risposta: Questa procedura non è consigliata. Leggere e verificare attentamente ogni risposta prima di inoltrarla. Modificare il testo prima di inviarlo.

Domanda: quali prompt sono adatti ai clienti?

Risposta: Particolarmente adatti sono “Raccomandazione per il cliente”, “Affermazioni e piano di 4 settimane” e, se si dispone di una licenza, “Interpretazione Frattale”.

Domanda: Posso creare i miei prompt personalizzati?

Risposta: Sì. Nelle impostazioni "Valutazione IA", è possibile attivare, denominare e modificare i prompt personalizzati.

Domanda: Cosa succede alla risposta dell'IA in BCS?

Risposta: La risposta può essere inserita in BCS, modificata, salvata e successivamente visualizzata in anteprima di stampa o esportata come PDF.

Domanda: L'intelligenza artificiale sostituisce la valutazione terapeutica o di coaching?

Risposta: No. L'IA supporta la valutazione, ma non sostituisce la responsabilità professionale dell'utente.

4.2 Funzione frattale di Bucher

4.2.1 Panoramica

La funzione frattale di Bucher è un modulo aggiuntivo comune a più prodotti di Bucher Coaching Systems. Consente di creare un'immagine o un video frattale personalizzato da una scansione o da un pacchetto esistente.

Un frattale è un'immagine astratta di colore e forma. Non contiene messaggi direttamente leggibili, ma agisce attraverso simboli, colori, forme, movimento e percezione interiore. Il cliente può osservare il frattale e lasciarsi influenzare da esso. Questo può facilitare la percezione delle proprie associazioni, immagini interiori o temi inconsci.

Le immagini e i video frattali non costituiscono una diagnosi medica. Non devono essere utilizzati come prova di malattie, disturbi o processi di guarigione. Servono esclusivamente come stimolo simbolico e di supporto nel contesto del rispettivo lavoro professionale.

4.2.2 Scopo della funzione frattale

La funzione frattale può essere utilizzata per accompagnare i risultati della scansione a livello visivo.

Può aiutare a:

- rendere percepibili i risultati della scansione anche visivamente,
- offrire un accesso aggiuntivo a temi inconsci o difficili da esprimere,
- ottenere spunti di conversazione per il lavoro con il cliente,
- favorire la percezione interiore del cliente,
- fornire uno stimolo visivo per il periodo successivo alla sessione,
- sostenere simbolicamente processi energetici o emotivi.

La funzione frattale è particolarmente utile quando i clienti rispondono bene a colori, immagini, simboli o percezione intuitiva.

4.2.3 Differenza tra immagine frattale e video frattale

La funzione frattale fornisce due diversi formati di output:

funzione	Descrizione	Uso tipico
Immagine frattale	Un'immagine statica, con colori e forme calcolati individualmente.	Stampa, PDF, immagine di sfondo, visualizzazione durante o dopo la sessione.
Video frattale	Un video dinamico e armonioso basato su forme e colori frattali.	Osservazione a domicilio, rilassamento, concentrazione, applicazione regolare.

L'immagine frattale è particolarmente adatta a un'osservazione chiara e serena. Può essere stampata, salvata o consegnata al cliente in formato digitale.

I video frattali sono particolarmente adatti quando si desidera movimento, ritmo o una durata di visione prolungata. Possono anche essere combinati con la musica, se questa funzione è disponibile.

4.2.4 Prerequisiti

Per utilizzare la funzione frattale avrai bisogno di:


- una licenza valida per la funzione frattale di Bucher,
- un cliente creato,
- una scansione o un pacchetto esistente,

- Informazioni di scansione o di pacchetto sufficientemente memorizzate,
- Quando si creano video frattali, è necessario prevedere tempi sufficienti.
- una posizione di archiviazione adeguata se si desidera esportare un'immagine o un video.

Nota: la funzionalità frattale non è disponibile in tutte le varianti del prodotto. Se il pulsante frattale non viene visualizzato, la funzionalità potrebbe non essere concessa in licenza o non essere disponibile nel prodotto selezionato.

4.2.5 Creazione di un'immagine frattale

Un'immagine frattale viene calcolata a partire dalle informazioni disponibili di una scansione o di un pacchetto. È unica per ogni cliente e per il pacchetto selezionato. Se l'opzione "Crea frattale" è abilitata durante la scansione del pacchetto, l'immagine frattale viene creata automaticamente durante il processo di scansione.

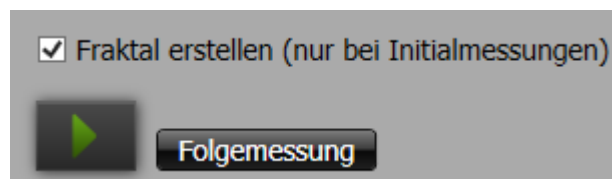

Suggerimento pratico: fornite al cliente brevi istruzioni su come interpretare l'immagine frattale. L'immagine non deve essere "analizzata" come una diagnosi. Un approccio più utile è osservarla con calma e porsi la domanda: "Cosa evoca in me questa immagine?".

4.2.6 Utilizzo dell'immagine frattale con il cliente

L'immagine frattale può essere utilizzata durante o dopo la sessione.

Possibili applicazioni:

- visione congiunta durante la conversazione,
- Raccogli le associazioni spontanee del cliente,
- Utilizza colori e forme come spunti di conversazione,
- Stampa l'immagine del frattale e consegnala al cliente.
- Utilizza un'immagine frattale come immagine di sfondo sul tuo computer o smartphone,
- Includi l'immagine frattale nella documentazione.

Non interpretate l'immagine frattale in modo troppo definitivo. L'effetto deriva principalmente dalla percezione del cliente. Spesso le domande sono più utili delle affermazioni categoriche.

Esempi di domande per il colloquio:

- Quale colore attira per primo la tua attenzione?
- Quale parte dell'immagine attira la tua attenzione?
- L'immagine appare calma, dinamica, nitida, densa o aperta?
- Esiste una forma che associ spontaneamente a una determinata emozione?
- Cosa cambia se si guarda l'immagine per qualche minuto?

Nota: le immagini frattali possono attivare temi interiori. Se un cliente reagisce emotivamente, è necessario gestire la situazione con sensibilità.

4.2.7 Creazione di un video frattale

Un video frattale è una rappresentazione in movimento di forme e colori frattali. Può essere utilizzato come stimolo visivo di accompagnamento. A seconda del metodo, può anche essere combinato con la musica. Il video frattale utilizza come base il frattale memorizzato nel pacchetto.

Istruzioni passo passo

1. Apri il cliente desiderato.

Risultato: Il cliente è stato selezionato come cliente attuale.

2. Apri la sezione "Invia/Reportzioni".

Risultato: vengono visualizzati i pacchetti esistenti del cliente.

3. Seleziona il pacchetto per il quale desideri creare un video frattale.

Risultato: il pacchetto corretto è stato contrassegnato.


4. Apri la funzione Frattale.

		Scan date	Package name
1		6/24/2026 4:52:11 PM	Coaching perfekte Arbeit
2		6/24/2026 4:51:28 PM	Immunsystem ist Stark
3		6/24/2026 4:20:29 PM	CD Ich lasse los
4		6/3/2026 2:34:48 PM	Check Up
5		6/3/2026 2:33:37 PM	Check Up

Utilizza il pulsante con il simbolo frattale (chiocciola). I pacchetti con il pulsante contenente un segno di spunta verde presentano un'immagine frattale. Gli altri pacchetti non presentano ancora un'immagine frattale.

Risultato: vengono visualizzate le opzioni frattali disponibili.

5. Fai clic sulla scheda per visualizzare il video frattale.

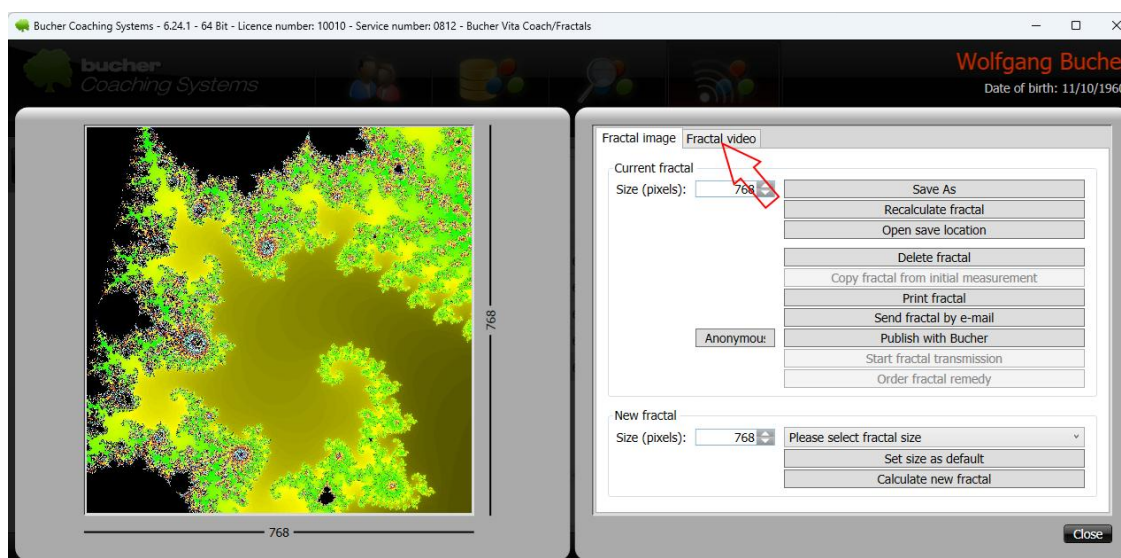

Risultato: BCS si sta preparando a realizzare il video.

6. Imposta le opzioni desiderate per il video frattale.

Risultato: l'output video è pronto e può quindi essere creato.

Nella scheda "Video frattale" è possibile configurare le seguenti impostazioni:

Area	Impostazione	Significato
Dimensioni del video	"Dimensioni (pixel)"	Imposta la risoluzione del video, ad esempio "Video molto grande (1080 pixel)". Una risoluzione più elevata generalmente produce una migliore qualità dell'immagine, ma richiede più tempo di elaborazione e spazio di archiviazione.
caleidoscopio	"Impostazioni del caleidoscopio"	Specifica quanti assi di riflessione o raggi vengono utilizzati per calcolare l'effetto caleidoscopio, ad esempio "12 raggi".
caleidoscopio	"Velocità del caleidoscopio"	Imposta la velocità del movimento del caleidoscopio. Un valore inferiore crea un effetto più calmo, un valore superiore uno più dinamico.
sfondo	"Video di sfondo"	Utilizza un video di sfondo. Puoi selezionare un video dall'elenco disponibile. Viene visualizzata la durata di ciascun video. Puoi scaricare altri video di sfondo tramite "Download".
sfondo	"Indietro"	Determina se il video di sfondo selezionato viene riprodotto al contrario.
sfondo	"Altri video"	Apri o carica ulteriori video di sfondo disponibili.
sfondo	"Immagine di sfondo"	Utilizza un'immagine di sfondo anziché un video di sfondo.
sfondo	«No background» (nessuno sfondo)	Crea il video frattale senza video di sfondo e senza immagine di sfondo.
Introduzione	"Introduzione"	Consente o disabilita l'anteprima all'inizio del video.
Introduzione	"Logo"	Aggiunge un logo all'introduzione. Il file immagine può essere selezionato utilizzando il pulsante "...".
Introduzione	"Titolo" / "Modifica titolo"	Aggiungi un titolo all'introduzione. Il testo può essere modificato tramite "Modifica titolo".
Introduzione	"Descrizione" / "Modifica descrizione"	Aggiungi una descrizione all'introduzione. Il testo può essere modificato tramite "Modifica descrizione".
Introduzione	Grafico frattale	Aggiunge il grafico frattale all'area introduttiva se questa opzione è abilitata.
Durata del film	"Durata del film" / "Durata desiderata"	Imposta la durata desiderata del video frattale.
Durata del film	"Durata totale calcolata"	Visualizza la durata totale calcolata del video. Questa potrebbe differire dalla durata desiderata se sono inclusi introduzione, conclusione, musica o elementi di sfondo.
Durata del film	"Utilizzare la durata totale"	Utilizza la durata totale calcolata come durata del film.
Musica	"Senza musica"	Crea un video frattale senza musica.
Musica	"MP3/Interblend"	Utilizza come musica un file MP3 selezionato o un file Interblend. Il file può essere selezionato tramite il pulsante "...".

Area	Impostazione	Significato
Musica	“Ripeti la musica se il video è più lungo”	Ripete la musica se il video è più lungo del file audio selezionato.
Musica	«Singing bowls» (campane tibetane)	Se disponibile, utilizzare le campane tibetane come accompagnamento sonoro.
Outro	"Outro"	Consente di abilitare o disabilitare i titoli di coda al termine del video.
Outro	"Logo"	Aggiunge un logo alla sigla finale. Il file immagine può essere selezionato tramite il pulsante "...".
Outro	“Titolo” / “Modifica titolo”	Aggiungi un titolo alla conclusione. Il testo può essere modificato tramite "Modifica titolo".
Outro	“Descrizione” / “Modifica descrizione”	Aggiungi una descrizione alla conclusione. Il testo può essere modificato tramite "Modifica descrizione".
Qualità video	"Bit rate MB/s (qualità cinematografica)"	Imposta la velocità di trasmissione dei dati e quindi la qualità video. Un bitrate più elevato di solito migliora la qualità, ma si traduce in file video di dimensioni maggiori.
Dati temporanei	"Elimina i dati temporanei dell'immagine"	Determina se i dati temporanei delle immagini vengono eliminati dopo la creazione del video. In genere, si consiglia di selezionare "Sì" per evitare di utilizzare inutilmente spazio di archiviazione.
Modello	“Modello” / “Salva”	Salva le impostazioni video correnti come modello.
Modello	“Modello” / “Carica”	Carica un modello salvato in precedenza.

Consiglio pratico: salva come modelli le combinazioni di risoluzione, impostazioni del caleidoscopio, intro, outro e musica che usi più frequentemente. Questo ti permetterà di creare video frattali più velocemente e in modo più coerente in futuro.

The screenshot shows the 'Fractal video' window with the following settings:

- Fractal video** (selected tab)
- Size (pixels):** Very large video (1080 pixels)
- Kaleidoscope settings:** 12 Beams
- Kaleidoscope speed:** 1,0
- Background video:**
 - ☒ Background video
 - Video list:
 - Violetter Tunnel (00:00:10) [Back] [Download]
 - Weiβes Doppelherz Linie (00:00:15) [Back] [Download]
 - Wellen HD (00:00:06) [Back] [Download] (highlighted)
 - Weltall Erde (00:00:40) [Back] [Download]
 - [More videos]
- ☐ Background image
- ☐ No background
- ☒ Intro
 - ☒ Logo
 - ☒ Title [Titel bearbeiten]
 - ☒ Description [Beschreibung bearbeiten]
 - ☒ Fractal graphic
- Film duration:**
 - 205 s [Desired duration]
 - 205 s [Calculated total duration]
 - [Use total duration]
- Music:**
 - ☐ Without music
 - ☒ MP3/Interblend
 - C:\Bucher GmbH\BCS-OnlineSeminare\Interblend\Relax.mp3 [184s]
 - ☐ Repeat music if video is longer
 - ☐ Singing bowls
- ☒ Outro
 - ☒ Logo
 - ☒ Title [Titel bearbeiten]
 - ☒ Description [Beschreibung bearbeiten]
- Video settings**
 - Bit rate MB/s (film quality): 10.0
 - Delete temporary image data: Yes
 - Template: [Save] [Load]
- Produce fractal film** (button)
- Close** (button)

Risultato: l'output video è pronto.

7. Inizia a creare il video frattale utilizzando il pulsante in basso: "Crea video frattale".

Risultato: BCS crea un video frattale in movimento e, se lo si desidera, visualizza al termine la posizione di archiviazione del video.

8. Controlla il video prima di condividerlo.

Risultato: hai verificato che il video sia stato creato correttamente e sia adatto allo scopo.

Nota: la creazione di un video può richiedere più tempo a seconda delle prestazioni del computer e delle dimensioni del video (indicativamente, si possono prevedere dai 15 minuti per un video di piccole dimensioni alle 4 ore per un video molto grande).

4.2.8 Utilizzo del video frattale con il cliente

Il video sui frattali può essere proposto al cliente come esercizio supplementare. È particolarmente indicato per sessioni di visione tranquille, ad esempio la sera o durante una breve fase di rilassamento.

Poiché i video frattali possono generare file di grandi dimensioni a seconda della risoluzione, della durata, della musica e della qualità video, la condivisione diretta tramite e-mail è spesso impraticabile. Molti provider di posta elettronica limitano le dimensioni degli allegati. Inoltre, il download di file video di grandi dimensioni può risultare scomodo per il cliente.

Una soluzione semplice è caricare il video su YouTube con l'impostazione di visibilità "Non in elenco". In questo caso, il video non apparirà pubblicamente nei risultati di ricerca di YouTube né su un canale pubblico. Tuttavia, il cliente potrà comunque visualizzarlo tramite il link fornito.

Importante: "Non in elenco" non significa "privato". Chiunque conosca il link può aprire il video.

Pertanto, non utilizzare dati sensibili dei clienti nel titolo del video, nella descrizione, nel nome del file o in qualsiasi testo visibile all'interno del video.

Procedura consigliata

1. Crea il video frattale in BCS.

Risultato: Il video è ora disponibile come file video sul tuo computer.

2. Controlla il video prima di caricarlo.

Risultato: In questo modo si garantisce che il video appartenga al cliente corretto e al pacchetto corretto.

3. Accedi a YouTube con un account Google.

Risultato: puoi caricare il video su YouTube.

4. Carica il video del frattale su YouTube.

Risultato: Il video verrà salvato sul tuo account YouTube.

5. Imposta la visibilità su "Non in elenco".

Risultato: il video non compare nelle ricerche pubbliche, ma è accessibile tramite il link diretto.

6. Utilizza un titolo neutro per il video.

Esempio: "Video frattale 2026-07-01" o "Video frattale personale".

Risultato: Il titolo non contiene informazioni riservate o di carattere medico.

7. Copia il link del video.

Risultato: Il link può essere condiviso con il cliente.

8. Invia il link al cliente tramite e-mail.

Risultato: il cliente può guardare il video ovunque ci sia una connessione internet.

Nota: per caricare video su YouTube è necessario un account Google. In genere, il cliente non ha bisogno di un proprio account Google per guardare un video "non in elenco" tramite un link. I fattori cruciali sono che il cliente abbia accesso al link e una connessione a Internet.

Un video frattale è particolarmente adatto a momenti di visione tranquilla, ad esempio la sera o durante una breve fase di relax.

Possibili applicazioni:

- Visualizzazione sul computer,
- Visualizzazione su smartphone o tablet,
- accompagnamento esercizio di rilassamento,
- supporto visivo per un obiettivo concordato,

- revisione periodica in un periodo di tempo specifico.

Suggerimento pratico: concordate con il cliente un'applicazione semplice, ad esempio: "Guarda il video una volta al giorno per qualche minuto in un ambiente tranquillo. Presta attenzione ai pensieri, alle sensazioni o alle immagini interiori che emergono."

Importante: i video frattali non devono essere utilizzati se il cliente è sensibile alle immagini in movimento, ne trae disagio o tollera male gli stimoli visivi. In questo caso, un'immagine frattale statica è più appropriata.

4.2.9 Interpretazione tramite IA di un'immagine frattale

Quando la funzione IA viene utilizzata in BCS, un'immagine frattale può essere interpretata anche simbolicamente. L'IA può descrivere colori, forme, motivi e l'effetto complessivo dell'immagine.

L'interpretazione tramite IA può essere d'aiuto,

- per ottenere un quadro interpretativo iniziale,
- Per formulare spunti di conversazione,
- per evidenziare le risorse positive nell'immagine,
- per creare una descrizione di accompagnamento comprensibile per il cliente.

4.2.10 FAQ

Domanda: Cos'è un'immagine frattale?

Risposta: Un'immagine frattale è un'immagine astratta di colore e forma calcolata a partire da una scansione o da un pacchetto di dati. Funge da impulso simbolico per il lavoro successivo.

Domanda: Qual è la differenza tra un'immagine frattale e un video frattale?

Risposta: L'immagine frattale è statica. Il video frattale è in movimento e può essere utilizzato come accompagnamento visivo più lungo.

Domanda: Un'immagine frattale può fornire una diagnosi?

Risposta: No. Un'immagine frattale non è un riscontro medico né una diagnosi. Serve per la contemplazione simbolica e la percezione interiore.

Domanda: Il cliente può portare via con sé l'immagine frattale?

Risposta: Sì. L'immagine frattale può essere stampata o fornita in formato digitale, a condizione che ciò sia coerente con il concetto di lavoro.

Domanda: Per cosa è adatto un video frattale?

Risposta: Un video frattale è adatto come rilassante accompagnamento visivo, ad esempio da guardare a casa o per supportare un obiettivo prefissato.

Domanda: Ogni pacchetto deve contenere un'immagine frattale o un video frattale?

Risposta: No. La funzione frattale è una funzionalità aggiuntiva. Utilizzatela solo se risulta utile per il cliente e per lo specifico processo.

4.3 Bucher Interblend

4.3.1 Panoramica

Bucher Interblend è un modulo aggiuntivo inter-prodotto all'interno di Bucher Coaching Systems. Interblend consente di incorporare le informazioni di regolazione di un pacchetto selezionato nella musica.

Il risultato è un nuovo file musicale. Questo file contiene la musica selezionata e, in aggiunta, la vibrazione regolatrice del pacchetto. Il cliente può quindi ascoltare questo file musicale. Il file può, ad esempio, essere riprodotto direttamente, fornito al cliente su una chiavetta USB o utilizzato per un video frattale.

Interblend è particolarmente utile quando l'applicazione non deve essere eseguita tramite un supporto di dati classico, bensì tramite un file musicale.

Importante: Interblend non è una procedura medica e non sostituisce la diagnosi o il trattamento medico. Il file musicale generato funge da accompagnamento complementare, energetico o di coaching.

4.3.2 Scopo di Interblend

Interblend viene utilizzato per rendere un pacchetto esistente compatibile con la musica.

La funzione può essere utilizzata per:

- Incorporare le informazioni di regolazione di un pacchetto nella musica,
- fornire al cliente un file audio di accompagnamento,
- Utilizzare la musica come stimolo regolare per l'uso domestico,
- rendere disponibili i pacchetti BCS anche attraverso l'ascolto,
- utilizzare successivamente un file musicale Interblend in un video frattale.

La selezione musicale inclusa comprende circa cinque ore di musica. È possibile ascoltare dei brani di anteprima prima di effettuare una selezione.

4.3.3 Punto di ingresso

Interblend si avvia nella sezione "Invia/Report" del pacchetto desiderato.

Nell'elenco dei pacchetti, ogni pacchetto ha un pulsante con il simbolo di una nota musicale. È il sesto pulsante nella barra degli strumenti della riga del pacchetto.

Se per un pacchetto è già stata creata una traccia Interblend, l'icona mostra un segno di spunta verde. Questo permette di individuare immediatamente nell'elenco dei pacchetti che esiste già un file musicale Interblend per quel pacchetto.

[Screenshot: Elenco dei pacchetti nella sezione "Invia/Report" con il simbolo di una nota musicale per Interblend. Scopo: Mostrare il punto di ingresso per Interblend e spiegare il segno di spunta verde come indicazione di un file musicale già creato.]

4.3.4 Prerequisiti

Per utilizzare Interblend avrai bisogno di:

- una licenza valida per Bucher Interblend,
- un cliente creato,
- un pacchetto esistente nella sezione "Invia/Reportzioni",
- almeno un brano musicale selezionabile,
- spazio di archiviazione sufficiente per i file musicali appena creati,
- Se necessario, una chiavetta USB o altro mezzo di distribuzione idoneo al cliente.

Nota: se il pulsante Interblend non è visibile o utilizzabile, la funzione potrebbe non essere concessa in licenza o non essere disponibile nel prodotto corrente.

4.3.5 Aprire la finestra di Interblend

Istruzioni passo passo

1. Apri il cliente desiderato.

Risultato: Il cliente è stato selezionato come cliente attuale.

2. Apri la sezione "Invia/Reportzioni".

Risultato: vengono visualizzati i pacchetti esistenti del cliente.

3. Seleziona il pacchetto le cui informazioni di regolazione devono essere incorporate nella musica.

Risultato: il pacchetto corretto è stato contrassegnato.

4. Nella riga del pacchetto, fai clic sul sesto pulsante con il simbolo della nota musicale.



		Scan date	Package name
1	» VS [Icons]	2/1/2026 10:51:07 PM	Check Up (1)
2	» VS [Icons]	2/1/2026 10:20:16 PM	Check Up
3	» [Icons]	12/10/2025 8:36:55 PM	Scan vom 10.12.2025 20:36:55

Risultato: si apre la finestra "Interblend".

5. Verifica che venga visualizzata la selezione musicale desiderata.

Risultato: i brani musicali disponibili sono pronti per la selezione.

4.3.6 Struttura della finestra Interblend


La finestra "Interblend" visualizza un elenco dei brani musicali disponibili. È possibile ascoltare un'anteprima di ciascun brano prima di selezionarlo.

L'elenco contiene, tra le altre cose, le seguenti informazioni:

Area	Significato
"Titolo del brano musicale"	Titolo e, se applicabile, descrizione del brano musicale.
"Lunghezza"	Durata del brano musicale.
"Stile musicale"	Stile o categoria musicale, ad esempio pop, country, classica, paesaggi sonori o affermazioni vocali.
"Anteprima"	Fai clic sul pulsante Play per ascoltare un'anteprima del brano musicale.
"Selezione"	Casella di selezione. Questa casella determina quali brani musicali vengono utilizzati per creare l'Interblend.

Nella finestra sono disponibili funzioni aggiuntive:

funzione	Significato
"Intensità"	Intensità con cui la vibrazione regolatrice è incorporata nella musica. Il valore ideale è 1000.
"Estrazione di CD"	Funzione per la lettura di musica da CD, qualora si renda necessario utilizzarla.
"Scarica i brani musicali mancanti"	Scarica i brani musicali mancanti se non sono già disponibili localmente.
"Visualizza la musica creata in precedenza"	Visualizza i file musicali Interblend creati in precedenza.
"Crea file interblend"	Crea nuovi file musicali Interblend a partire dai brani musicali selezionati.
«Annulla»	Chiude la finestra senza creare nuovi file Interblend.

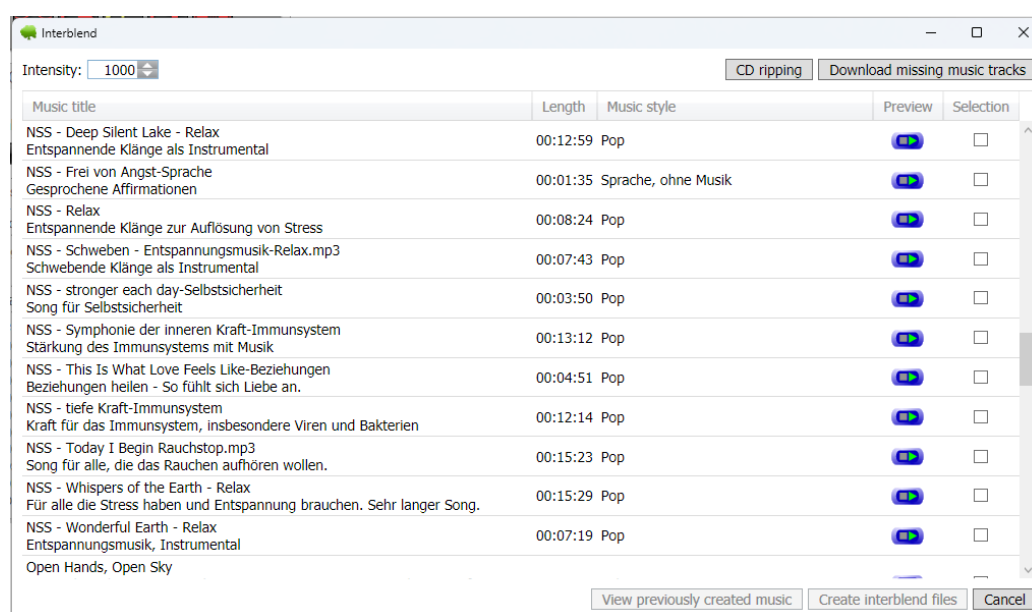

4.3.7 Ascolto e selezione di brani musicali

Nella finestra Interblend è possibile selezionare uno o più brani musicali.

Istruzioni passo passo

1. Apri la finestra "Interblend".

Risultato: viene visualizzato l'elenco dei brani musicali disponibili.

2. Scegli un brano musicale adatto dalla lista.

Risultato: il brano musicale desiderato è visibile.

3. Nella colonna "Anteprima", fai clic sul pulsante blu di riproduzione.

Risultato: Il brano musicale viene riprodotto a scopo di prova.

4. Verifica se il brano musicale è adatto al cliente e al pacchetto scelto.

Risultato: Decidi tu se il brano musicale debba essere utilizzato.

5. Nella colonna "Selezione", spunta la casella accanto al brano musicale desiderato.

Risultato: la traccia musicale è stata selezionata per la creazione di un file Interblend.

6. Ripeti questo procedimento per altri brani musicali, se necessario.

Risultato: uno o più brani musicali sono stati selezionati.

Nota: è possibile selezionare più tracce musicali. In tal caso, verrà creato un file audio separato per ogni traccia selezionata.

Consiglio pratico: non scegliete la musica basandovi esclusivamente sul gusto personale. Valutate se lo stile musicale, il tempo e l'atmosfera siano appropriati per il cliente e per l'obiettivo della seduta.

4.3.8 Creazione di file Interblend

Dopo aver selezionato le tracce musicali, è possibile creare i file di Interblend.

Istruzioni passo passo

1. Verifica la selezione nella colonna "Selezione".

Risultato: vengono selezionati solo i brani musicali desiderati.

2. Fai clic su "Crea file interblend".

Risultato: BCS crea un nuovo file musicale Interblend per ogni brano musicale selezionato.

3. Si prega di attendere il completamento della procedura.

Risultato: i file musicali appena creati vengono salvati in una directory separata.

4. Se necessario, apri "Visualizza la musica creata in precedenza".

Risultato: puoi visualizzare e riaprire i file musicali Interblend già creati.

Importante: i file musicali originali non verranno sovrascritti. Interblend crea nuovi file musicali nei quali è incorporata l'oscillazione regolatrice del pacchetto selezionato.

4.3.9 Utilizzo della musica Interblend creata

La musica Interblend creata può essere utilizzata in vari modi.

Possibili applicazioni:

- Riproduzione diretta sul computer,
- Distribuzione al cliente su una chiavetta USB,
- Archiviazione della documentazione del cliente,
- Da utilizzare come musica per un video frattale,
- Applicazione a domicilio a cura del cliente.

Quando il file viene consegnato al cliente, è opportuno fornire una breve spiegazione su come utilizzare la musica.

Esempio:

"Ascolta questa musica in un ambiente tranquillo. Non devi fare nulla di particolare. Semplicemente, osserva quali pensieri, sentimenti o immagini interiori emergono."

Nota: non fornire al cliente istruzioni eccessivamente rigide, a meno che non siano professionalmente necessarie. L'applicazione deve rimanere semplice e pratica per l'uso quotidiano.

4.3.10 Utilizzo della musica Interblend per un video frattale

È possibile utilizzare un file audio Interblend anche nella creazione di un video frattale.

Per fare ciò, seleziona l'opzione "MP3/Interblend" nella sezione "Musica" della scheda "Video frattale". Quindi, seleziona il file musicale Interblend appropriato.

Risultato: il video frattale viene creato utilizzando un file musicale che contiene già l'oscillazione regolatrice del pacchetto.

Suggerimento pratico: questa combinazione può essere utile se il cliente deve ricevere un accompagnamento sia visivo che uditivo. Il video frattale fornisce il livello di immagini e movimento, mentre Interblend completa il livello musicale.

4.3.11 Istruzioni da trasmettere ai clienti

I file Interblend possono essere condivisi in diversi modi a seconda delle loro dimensioni.

Tra i metodi idonei si possono citare, ad esempio:

- chiavetta USB,
- link di download protetto,
- trasferimento personale al dispositivo del cliente,
- Da utilizzare in un video frattale, che verrà fornito separatamente.

L'invio tramite e-mail è utile solo se il file è sufficientemente piccolo e non vi sono restrizioni imposte dal provider di posta elettronica.

Attenzione: non utilizzare dati sensibili dei clienti nel nome del file. In particolare, evitare diagnosi, nomi completi o informazioni riservate sul caso.

Tra i nomi di file neutri adatti si possono citare, ad esempio:

Interblend_2026-07-01.mp3

Musica_Interblend_01.mp3

Musica di sottofondo_01.mp3

4.3.12 Linee guida per un utilizzo responsabile

Interblend è uno strumento complementare. Può accompagnare una sessione o fornire al cliente un ulteriore stimolo per il periodo successivo.

Pertanto, si prega di notare:

- Non descrivere la musica Interblend come una cura.
- Non promettete alcuna guarigione.
- Non è possibile garantire alcun effetto medico.
- Non fare pressione sui clienti affinché lo usino troppo frequentemente.
- In caso di malessere, interrompere l'uso.
- Spiega l'applicazione in modo semplice e comprensibile.

Importante: prima di distribuire il file, verificare sempre che sia stato effettivamente creato utilizzando il pacchetto desiderato.

4.3.13 Errori comuni e soluzioni

Problema: il pulsante Interblend non viene visualizzato.

Possibile causa: Interblend non è concesso in licenza o non è disponibile nel prodotto corrente.

Soluzione: Verifica la tua licenza e il prodotto attualmente selezionato. Se necessario, contatta il tuo partner di assistenza BCS.

Problema: il simbolo della nota musicale non mostra un segno di spunta verde.

Possibile causa: per questo pacchetto non è ancora stato creato alcun file musicale Interblend.

Soluzione: Apri Interblend, seleziona una traccia musicale e fai clic su "Crea file Interblend".

Problema: il pulsante "Crea file interblend" non è attivo.

Possibile causa: non è stata ancora selezionata alcuna traccia musicale.

Soluzione: Nella colonna "Selezione", selezionare almeno un brano musicale.

Problema: non è possibile ascoltare un brano musicale.

Possibile causa: il file musicale è mancante o non è stato ancora scaricato.

Soluzione: fai clic su "Scarica i brani musicali mancanti" e riprova.

Problema: Impossibile trovare il file musicale creato.

Possibile causa: il file è stato salvato in una directory Interblend separata.

Soluzione: Aprire "Visualizza la musica creata in precedenza" per visualizzare i file musicali creati in precedenza.

Problema: il file musicale è troppo grande per essere inviato via email.

Possibile causa: il brano musicale è troppo lungo oppure il provider di posta elettronica impone dei limiti alle dimensioni degli allegati.

Soluzione: utilizzare una chiavetta USB o un link di download appropriato.

Problema: nel file musicale è stato incorporato il pacchetto sbagliato.

Possibile causa: prima di aprire Interblend è stato selezionato il pacchetto sbagliato.

Soluzione: Verificare sempre il cliente corrente e il pacchetto selezionato prima di iniziare.

4.3.14 FAQ

Domanda: Cosa fa Interblend?

Risposta: Interblend incorpora l'oscillazione regolatrice di un pacchetto BCS nella musica selezionata. Questo crea un nuovo file musicale che il cliente può ascoltare.

Domanda: La musica originale verrà modificata?

Risposta: No. Interblend crea nuovi file musicali. Le tracce musicali originali rimangono invariate.

Domanda: Posso selezionare più brani musicali?

Risposta: Sì. È possibile selezionare più opzioni. Per ogni brano musicale selezionato verrà creato un file di Interblend separato.

Domanda: Come posso capire se un pacchetto contiene già un file musicale Interblend?

Risposta: Nell'elenco dei pacchetti, sotto "Invia/Report", l'icona di Interblend con la nota mostra un segno di spunta verde.

Domanda: Posso consegnare la musica di Interblend al cliente?

Risposta: Sì. Il file può essere fornito, ad esempio, su una chiavetta USB o tramite un apposito link per il download.

Domanda: Posso utilizzare la musica Interblend per i video frattali?

Risposta: Sì. La musica Interblend generata può essere selezionata come musica nel video frattale nella sezione "MP3/Interblend".

Domanda: Interblend è una procedura medica?

Risposta: No. Interblend è un modulo aggiuntivo complementare e funge da supporto energetico o di coaching. Non sostituisce la diagnosi o il trattamento medico.

4.4 Scansione di selezione del colore online

4.4.1 Panoramica

4.4.1.1 Scopo e ambito di applicazione

La scansione online per la selezione del colore consente la partecipazione attiva del cliente che non può essere presente di persona per la scansione vera e propria, ad esempio a causa della distanza, di problemi di mobilità o di un appuntamento esclusivamente online. Il cliente effettua la selezione da casa tramite un link personale. BCS utilizza quindi questa selezione come base aggiuntiva per la scansione del prodotto desiderato.

Cliente e utente non devono essere online contemporaneamente. L'utente crea prima la richiesta, il cliente effettua la selezione in un momento adatto e l'utente recupera poi i dati completati in BCS.

4.4.1.2 Utilizzo tra prodotti diversi

La funzione viene avviata dalla gestione generale dei clienti. Nella riga del cliente compaiono piccole icone dei prodotti BCS per i quali è disponibile la relativa attivazione. Creare sempre la richiesta per il prodotto in cui si intende eseguire la successiva scansione. Le icone visibili e la posizione dell'opzione nella finestra di scansione dipendono dalla licenza, dal prodotto e dalla versione del programma.

4.4.1.3 Delimitazione

La scansione online per la selezione dei colori non costituisce un esame medico o psicologico. Colori, forme, sfumature di grigio e tempi di selezione vengono utilizzati da BCS come parametri interni del suo modello di lavoro energetico. Essi, di per sé, non consentono una diagnosi, una valutazione della personalità o alcuna affermazione attendibile sul cliente.

4.4.2 Prerequisiti

- BCS viene installato e attivato con il prodotto desiderato.
- La postazione di lavoro BCS dispone di una connessione internet.
- Il cliente è registrato nel sistema di gestione clienti e selezionato in modo univoco.
- Un indirizzo email valido è memorizzato nella scheda del cliente.
- L'invio di email in BCS è completamente configurato.
- Il cliente possiede uno smartphone, tablet, notebook o computer con connessione a Internet e un browser aggiornato.

Prima dell'invio, verificare con particolare attenzione nome, indirizzo e-mail, lingua e prodotto desiderato. La richiesta viene associata alla scheda del cliente e al prodotto selezionati.

Un'associazione errata non può essere corretta selezionando nuovamente il cliente. In questo caso, eliminare la richiesta e crearne una nuova per il cliente corretto.

4.4.3 Panoramica del processo

- Utente: Selezionare il cliente corretto e l'icona del prodotto desiderato nella gestione clienti.
- Utente: richiedere una nuova scansione online di selezione dei colori. BCS invia al cliente un'e-mail con un link personale.
- Cliente: Apri il link nel tuo browser e seleziona i colori, le forme e le sfumature di grigio che ti vengono proposti.

- BCS: Recupera la selezione completata dal server Bucher e assegna al cliente e al prodotto.
- Utente: Nella finestra di scansione, attivare l'opzione "Utilizza la scansione di selezione colore online esistente" e avviare la scansione.
- BCS: utilizzare per la scansione i dati delle selezioni e dei tempi, quindi rimuovere la richiesta acquisita dopo l'elaborazione riuscita.

4.4.4 Creare una richiesta nella gestione clienti

4.4.4.1 Selezionare l'icona del cliente e del prodotto

- Apri la gestione clienti.
- Individua e seleziona il cliente desiderato.
- Verifica l'indirizzo email e la lingua registrati dal cliente.
- Nella colonna di scansione per la selezione del colore online, individua la piccola icona del prodotto desiderato. Passando il mouse sopra l'icona (senza cliccare o spostare il mouse) verrà visualizzato il nome del prodotto.
- Fai clic sull'icona del prodotto e seleziona la voce di menu per creare una nuova scansione per la selezione del colore online.

BCS verifica le impostazioni e l'indirizzo e-mail. Conferma quindi l'invio. Se la richiesta viene creata correttamente, il cliente riceve un'e-mail con il link personale e BCS aggiorna lo stato del prodotto.

4.4.4.2 Comprensione dei simboli di stato

- Icona grigia piena: per questo prodotto non sono presenti richieste aperte o completate.
- Icona chiara con contorno scuro: la richiesta è stata inviata, ma non è ancora stata completata.
- Icona del prodotto colorata: la selezione è stata completata ed è pronta per il prodotto corrispondente.

Posiziona il puntatore del mouse su un'icona per visualizzare il testo informativo associato. L'aspetto può variare leggermente a seconda della versione del programma; l'assegnazione al prodotto e lo stato visualizzato sono determinanti.

4.4.4.3 Reinviare il link o eliminare la richiesta

Finché una richiesta è stata inviata ma non ancora completata, è possibile reinviare il link tramite l'icona del prodotto. Utilizzare questa funzione, ad esempio, se la prima e-mail non è arrivata o è stata eliminata per errore. Verificare prima l'indirizzo e-mail e, se necessario, chiedere al cliente di controllare anche la cartella spam.

Puoi eliminare una richiesta aperta o completata dallo stesso menu, per esempio se è assegnata al cliente o al prodotto sbagliato, non serve più o deve essere sostituita. Dopo l'eliminazione, i dati della selezione non saranno più disponibili per la scansione.

4.4.5 Implementazione da parte del cliente

4.4.5.1 Aprire il collegamento e avviare la selezione


Il cliente apre l'email inviata da BCS su un dispositivo connesso a Internet e clicca sul link nel browser. La selezione può essere effettuata utilizzando il mouse, il touchpad o il touchscreen. Una volta avviato, il sito web guida il cliente passo dopo passo attraverso l'intero processo.

Il cliente dovrebbe scegliere spontaneamente in base alle proprie sensazioni del momento e non coordinare le proprie decisioni con quelle di altri. Non esistono risposte giuste o sbagliate. Il browser non deve essere chiuso durante il processo e la pagina non deve essere ricaricata intenzionalmente.

4.4.5.2 Quali dettagli sono selezionati

- due colori attualmente preferiti
- due colori che al momento non sono preferiti
- due forme preferite
- due forme non preferite
- una tonalità di grigio preferita e una non preferita

Per ogni seconda selezione di colore, l'applicazione nasconde il primo colore selezionato e le tonalità adiacenti. Questo crea una selezione aggiuntiva più indipendente dalla prima scelta. Viene inoltre registrato il tempo impiegato per ciascuna selezione.

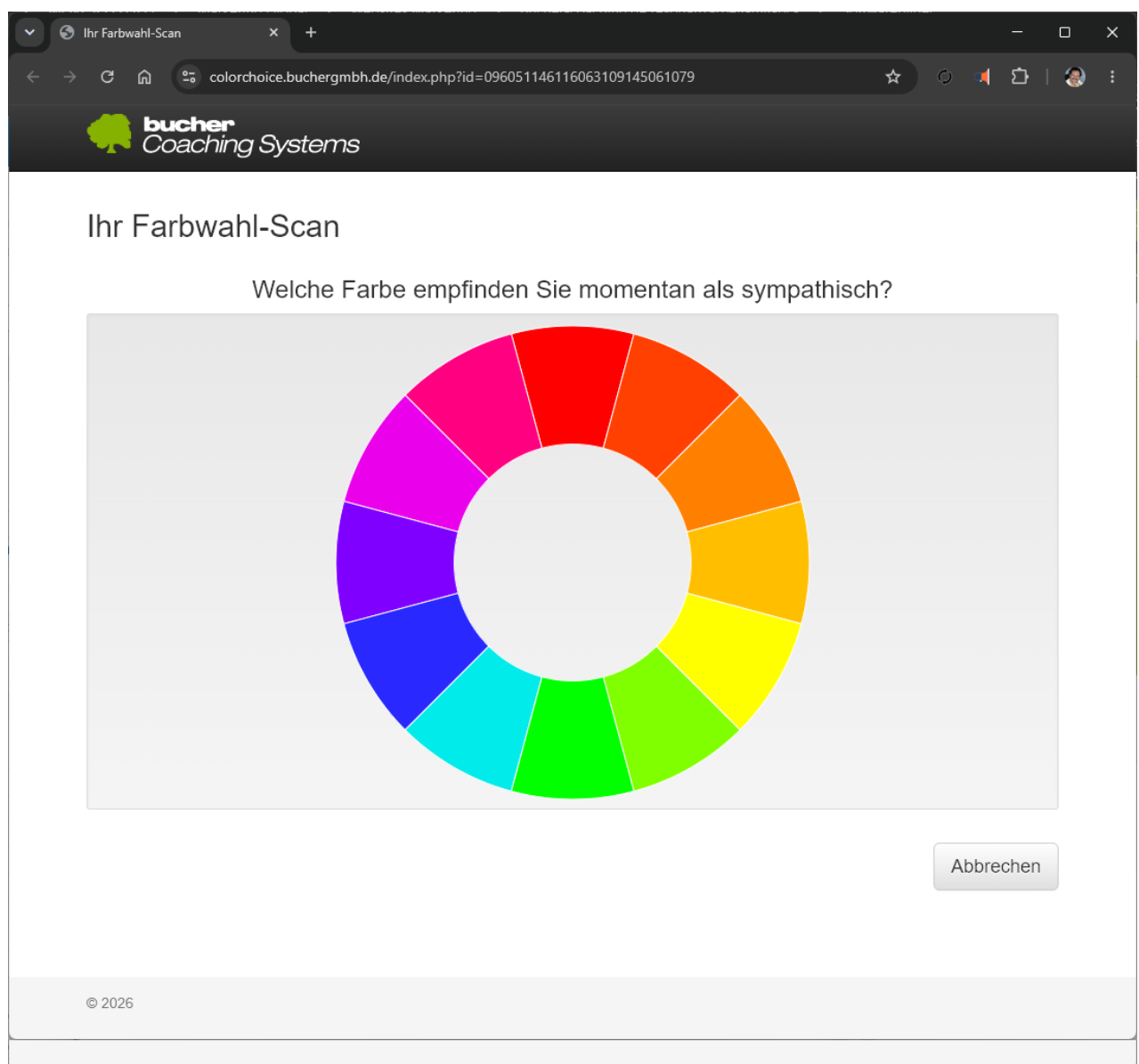

Il cliente esegue la scansione per la selezione del colore

4.4.5.3 Selezione completa

Dopo l'ultima selezione, il sito trasmette i dati. Il cliente deve attendere il messaggio di conferma. La richiesta personale è valida per una sola esecuzione; per coinvolgere nuovamente il cliente, l'utente deve crearne una nuova in BCS.

4.4.6 Recupero delle selezioni completate in BCS

4.4.6.1 Aggiornamento dello stato

BCS interroga le scansioni di selezione colore online disponibili all'apertura del sistema di gestione clienti. Per verificare immediatamente lo stato, fare clic su "Aggiorna scansione selezione colore online" nel sistema di gestione clienti. Dopo il recupero corretto, l'icona del prodotto corrispondente verrà colorata.

La conferma del cliente via e-mail è un'indicazione aggiuntiva. Per utilizzare la selezione, i dati devono risultare completamente recuperati in BCS. Se l'icona non cambia, verifica internet, l'assegnazione al cliente e il prodotto selezionato per la richiesta.

4.4.7 Utilizzo della selezione del colore online per la scansione di un prodotto

4.4.7.1 Verificare prima di iniziare

- In BCS, seleziona il cliente esatto per il quale viene visualizzata l'icona del prodotto colorata.
- Apri lo stesso prodotto per cui è stata creata la richiesta.
- Apri l'area di scansione ed effettua la selezione del database, della categoria o del programma specifici del prodotto.
- Verifica il focus, il tipo di scansione e tutte le altre impostazioni specifiche del prodotto.

4.4.7.2 Attivare la scansione di selezione del colore online esistente

Se esiste un set di dati completo per il cliente e il prodotto correnti, la finestra di scansione visualizzerà l'opzione "Usa la scansione di selezione colore online esistente". Abilita questa opzione. Quindi avvia la scansione come descritto per il prodotto.

BCS ora utilizza la selezione di colori, forme e sfumature di grigio, insieme ai relativi tempi di decisione, come base per il processo di scansione. A seconda del prodotto, quando la selezione del colore online è abilitata, altre opzioni di scansione potrebbero essere nascoste, disabilitate o impostate automaticamente.

4.4.7.3 Dopo un utilizzo riuscito

Dopo l'elaborazione riuscita, i dati della selezione dei colori online vengono rimossi dalla richiesta aperta. Per questa richiesta non saranno più disponibili l'opzione nella finestra di scansione e l'icona di stato colorata. Per coinvolgere di nuovo il cliente, richiedi una nuova scansione online di selezione dei colori.

Se la scansione del prodotto viene interrotta prima del completamento dell'elaborazione, verificare lo stato nella gestione clienti prima di riprovare. Non creare una seconda richiesta prematuramente finché il record di dati esistente è ancora disponibile.

4.4.8 Classificazione responsabile delle informazioni di selezione

BCS integra i colori, le forme, le sfumature di grigio e i tempi di risposta selezionati nel suo algoritmo di risonanza. Questi valori sono input tecnici per il modello di funzionamento interno del programma.

Una selezione rapida o lenta non deve essere interpretata isolatamente come una misura di certezza, incertezza o caratteristica. Allo stesso modo, i singoli colori o le singole forme non hanno un significato univoco senza il contesto più ampio.

Utilizzate i risultati della scansione come potenziali spunti di conversazione e valutatene la plausibilità insieme al cliente. Evitate di fare affermazioni definitive, diagnosi o promesse.

4.4.9 Protezione dei dati e assegnazione accurata

Per gestire la richiesta, inviare l'e-mail, recuperare lo stato e assegnare i dati, il servizio Bucher elabora le informazioni necessarie su licenza, prodotto, cliente e selezioni. Invia quindi la richiesta solo a un indirizzo e-mail corretto, nel rispetto delle procedure applicabili in materia di protezione dei dati e consenso.

Prima di ogni invio e di ogni scansione del prodotto, verificare il cliente attualmente selezionato. Non inoltrare il link personale ad altre persone. Non divulgare informazioni sensibili non necessarie in note visibili pubblicamente, nell'oggetto delle e-mail o nelle schermate. Le richieste aperte o completate non più necessarie possono essere eliminate nella gestione dei clienti.

4.4.10 Errori comuni e soluzioni

Nessuna icona del prodotto viene visualizzata per il cliente.

Verifica che il prodotto desiderato sia attivato. La gestione clienti visualizza solo le icone dei prodotti destinate alla licenza esistente.

Non è possibile inviare la richiesta.

Verificare la connessione a Internet, le impostazioni e-mail e l'indirizzo e-mail memorizzato nella scheda del cliente. Correggere e salvare i dati prima di creare nuovamente la richiesta.

Il cliente non ha ricevuto l'e-mail.

Verificare l'indirizzo e chiedere al cliente di controllare la cartella spam o posta indesiderata. Finché la richiesta è ancora aperta, è possibile reinviare il link tramite l'icona del prodotto.

Il cliente segnala il completamento dell'operazione, ma il simbolo non è ancora colorato.

Fai clic su "Aggiorna scansione selezione colore online". Quindi verifica la connessione a Internet, il cliente corretto e il prodotto corretto. Se necessario, riapri la gestione cliente.

L'opzione "Usa la scansione di selezione colore online esistente" non è presente nella finestra di scansione.

Questa opzione viene visualizzata solo se è stato recuperato un set completo di dati per il cliente e il prodotto correnti. Seleziona l'icona colorata del prodotto e poi riapri l'area di scansione.

La richiesta è stata creata per il cliente o il prodotto sbagliato.

Non utilizzare la richiesta. Eliminarla tramite l'icona del prodotto corrispondente e creare quindi una nuova richiesta con l'associazione corretta.

Il link non può essere riutilizzato dopo aver completato una selezione.

Ogni richiesta è valida per **una sola esecuzione**. Per coinvolgere nuovamente lo stesso cliente, crea una nuova scansione online di selezione dei colori.

4.4.11 FAQ

L'utente e il cliente devono essere online contemporaneamente?

No. La creazione della richiesta, la selezione del cliente, il recupero dei dati e la scansione del prodotto possono avvenire in momenti diversi.

Il cliente può effettuare la selezione tramite smartphone?

Sì. Di solito bastano un browser moderno e una connessione internet. La selezione può essere effettuata anche tramite touchscreen.

È possibile utilizzare una scansione effettuata online per la selezione del colore per un prodotto diverso?

No. La richiesta è associata al prodotto selezionato al momento dell'invio. Deve essere utilizzata in quel prodotto e per il cliente corrispondente.

È possibile utilizzare la stessa richiesta per più scansioni?

No. Dopo l'utilizzo corretto, il record di dati importato viene eliminato. Per una successiva scansione è necessario avviare una nuova procedura.

La selezione del colore online sostituisce le altre fasi preparatorie per la scansione del prodotto?

No. Continua a verificare il cliente, il focus, i database, le categorie, il tipo di scansione e tutte le impostazioni specifiche del prodotto. La selezione del colore online completa il flusso di lavoro di scansione previsto.

5 Glossario dei termini importanti

5.1 Panoramica

Questo glossario spiega i termini e le funzioni più importanti che ricorrono nel manuale. È concepito come sezione di riferimento. È possibile aggiungere termini man mano che vengono pubblicati nuovi capitoli.

5.1.1 Termini dalla A alla Z

Termine	Significato / Uso
IA / pulsante «AI»	Un pulsante nella sezione "Invia/Report" consente di creare un prompt per l'IA o di modificare una valutazione IA salvata. I dati vengono trasferiti a un sistema di IA esterno tramite gli appunti.
analisi	Fase di valutazione in cui i risultati vengono determinati e classificati in ordine di priorità (ad esempio, scansione).
Allegato	Sezione del capitolo per informazioni aggiuntive, glossario, domande frequenti e cronologia delle versioni.
Scansione dell'aura	La scansione Bucher Aura Coach fornisce una panoramica strutturata delle problematiche relative ad aura, corpo e chakra. I risultati fungono da guida energetica e di coaching e non costituiscono una diagnosi medica.
Lingua di output (IA)	Lingua in cui deve essere generata la risposta dell'IA. La lingua impostata nel campo "Lingua" della scheda "Dati personali" del cliente ha la precedenza. Dopo una modifica, è necessario rigenerare il prompt.
Modalità automatica / Modalità automatica Aura	Questa funzione di Bucher Aura Coach esegue una scansione, un'armonizzazione e, facoltativamente, un report via email per i clienti precedentemente selezionati. La partecipazione è configurata individualmente per ciascun cliente nelle sue impostazioni.
registro in modalità automatica	Riepilogo dopo un'esecuzione in modalità automatica. Mostra i clienti elaborati ed eventuali errori, come ad esempio le email non inviate. Il registro deve essere controllato dopo ogni esecuzione.
BCS (Bucher Coaching Systems)	Una piattaforma software condivisa di Bucher GmbH. Integra funzioni centrali come la gestione dei clienti, il backup dei dati e la reportistica con diversi prodotti e funzionalità aggiuntive.
BCS Core	Pacchetto iniziale professionale che include la versione completa di Bucher Vita Coach, Bucher Fractal, Bucher Interblend, analisi IA e sensore CA. È progettato come una base ampia ed espandibile.
BCS Focus Edition	Un pacchetto specializzato e preassemblato per un'area di applicazione ben definita. Esistono, ad esempio, le Focus Edition per Bucher Aura Coach, Bucher TAO Medical, Bucher Bioresonanz Triselect e Corpus Analyser.
BCS Premium	Pacchetto BCS completo che combina i sistemi più importanti, le principali funzioni aggiuntive, la valutazione IA, il sensore CA e la manutenzione del software menzionati nell'offerta.

Termine	Significato / Uso
Partner di servizi BCS	Il tuo referente commerciale dedicato e la persona di contatto per l'applicazione, le istruzioni e la formazione. Le problematiche tecniche, l'installazione e l'attivazione sono generalmente gestite da Bucher GmbH.
Broadcast	Area Impostazioni che definisce i valori predefiniti per la durata della trasmissione, l'intensità e altri parametri di trasmissione. Questi valori standardizzano la procedura operativa.
Famiglia Bucher	Funzione per trasferire pacchetti ad altri utenti (o a se stessi in caso di licenze multiple). È disabilitata per impostazione predefinita e viene abilitata su richiesta.
Server Bucher	I server di Bucher GmbH vengono utilizzati per funzioni online specificamente designate, come il recupero di database o il salvataggio e il caricamento di set di prompt. Per questo è necessaria una connessione a Internet.
Sensore CA	L'hardware BCS con connessione USB viene utilizzato per la scansione o l'invio, a seconda del prodotto e del flusso di lavoro. Per campioni e supporti informativi, il sensore viene allineato nell'apposito vassoio.
Andamento dei chakra	Visualizzazione dei progressi nel Bucher Aura Coach, che consente di visualizzare le variazioni dei risultati dei chakra nel corso di diverse scansioni.
Esportazione in formato CSV (Excel)	Funzione di esportazione per generare un file CSV contenente i dati del pacchetto, compatibile con Excel.
Database	Database di radionica gestiti, importati e selezionati per le scansioni in Vita Coach.
Finestra dei dettagli	Finestre di dialogo/impostazioni in cui i pulsanti principali potrebbero non essere visibili. In genere, per tornare indietro si utilizza il pulsante Indietro.
Diagnosi/Sintomi	Schede della gestione clienti in cui registrare informazioni utilizzabili successivamente, per esempio nelle valutazioni tramite IA.
Documenti (Modulo)	Scheda cliente disponibile in base alla licenza, per archiviare file come referti di laboratorio, foto o documenti Office.
Invia il report via email (modalità automatica)	Un report che può essere inviato automaticamente al cliente al termine di un'esecuzione in modalità automatica. Affinché ciò funzioni, l'account e-mail, l'indirizzo del cliente e il consenso all'invio devono essere configurati correttamente.
Testo introduttivo	Testo libero per documentare la destinazione, il contesto o lo stato di avanzamento di un pacchetto, spesso in relazione a invii/rapporti.
Voce	Un singolo risultato/elemento all'interno di un pacchetto (ad esempio, da una scansione o aggiunto manualmente).
Data di fine	Data fino alla quale deve continuare una trasmissione o la partecipazione di un cliente alla Modalità Automatica Aura. Dopo tale data, il processo non verrà più eseguito.
Pulsante Esporta	Pulsante nell'elenco dei pacchetti (Invia/Report) che apre un menu contestuale con le funzioni di esportazione/trasferimento.

Termine	Significato / Uso
Lavoro a distanza (telesomatica)	Un metodo di lavoro che prevede la collaborazione a distanza con il cliente. Richiede una chiara definizione del consenso, della protezione dei dati e delle procedure.
Manutenzione a distanza	Funzione di supporto per avviare la manutenzione remota sicura, se necessario (capitolo nella sezione nozioni di base).
Filtro (cliente)	Una funzione nella gestione dei clienti che limita i clienti visibili. Quando è attiva, sembra che i clienti siano "scomparsi".
scansione di controllo	Una scansione successiva effettuata durante il processo. Integra/aggiorna i risultati rispetto alla scansione iniziale.
Andamento / documentazione del percorso	Documentazione relativa a più pacchetti (scansione iniziale più scansioni di controllo), inclusi pianificazione, modifiche e risultati.
Frattale / Funzione frattale	Una funzione aggiuntiva trasversale per la creazione di rappresentazioni astratte individuali di colori e forme a partire da una scansione o da un pacchetto. I frattali fungono da accompagnamento simbolico e non da diagnosi medica.
Immagine frattale	Una rappresentazione statica, calcolata individualmente, di colore e forma basata su una scansione o un pacchetto. Può essere visualizzata, stampata, salvata o condivisa digitalmente.
Video frattale	Rappresentazione animata di forme e colori frattali. A seconda delle impostazioni, può includere elementi di sfondo, introduzione, conclusione e musica.
Punto di credito	Credito nel sistema collettivo: per ogni 50 pacchetti di altri utenti che trasmetti, ricevi un punto di credito per caricare i tuoi pacchetti.
Armonizzazione / trasmissione	Fase di implementazione o trasmissione in cui le informazioni di regolazione selezionate vengono trasmesse secondo il flusso di lavoro previsto nel BCS.
Pulsanti principali	Barra superiore con pulsanti per le aree più importanti (ad esempio, clienti, scansione, invio/report, database, se applicabile). Per una navigazione rapida.
Importazione	Importazione di database o pacchetti importati/file di esportazione (ad esempio, ZIP) in un'installazione.
Prompt personalizzato	Un'attività attivata e modificata dall'utente per una specifica analisi di intelligenza artificiale. I prompt personalizzati possono contenere segnaposto ed essere salvati come set di prompt sul server Bucher.
Cancellazione dei supporti informativi	Quando questa opzione è attiva, i supporti informativi utilizzati vengono cancellati prima di essere elaborati. Qualsiasi informazione incorporata accidentalmente viene così eliminata. Il supporto informativo viene quindi ripristinato alle sue proprietà originali. Un cristallo di rocca, ad esempio, torna ad essere un cristallo di rocca con tutte le sue proprietà e funzioni, ma senza vibrazioni aggiuntive indesiderate. Le proprietà "pure" originali del supporto informativo vengono così preservate.
Modulazione dei supporti informativi	Trasferimento/"impronta" delle informazioni di regolazione sui supporti (ad esempio, globuli, carte magnetiche), a seconda del metodo operativo.

Termine	Significato / Uso
Scansione iniziale	Analisi iniziale su un argomento/punto di partenza. Spesso costituisce la base per successive analisi di approfondimento e per il monitoraggio dei progressi.
Forza la scansione iniziale	Impostazione del cliente in modalità automatica Aura. Ciò garantisce che venga eseguita una scansione iniziale per questo cliente la prossima volta che viene avviata la modalità automatica.
Interblend / Musica subliminale	Una funzione aggiuntiva che incorpora le informazioni di regolazione di un pacchetto selezionato in uno o più brani musicali. Per ogni brano selezionato viene creato un nuovo file di Interblend; la musica originale rimane invariata.
File Interblend / Musica Interblend	Un file musicale appena generato in cui Interblend incorpora le informazioni di regolazione del pacchetto selezionato. Può essere riprodotto, condiviso o utilizzato come musica per un video frattale.
Intensità Interblend	L'impostazione "Intensità" nella finestra Interblend determina l'intensità con cui le informazioni di regolazione vengono incorporate nella musica selezionata.
Introduzione / Conclusione (video frattale)	Introduzione o conclusione opzionali per un video frattale. A seconda delle impostazioni, è possibile includere un logo, un titolo, una descrizione e una grafica frattale.
Effetto caleidoscopio	Opzione di visualizzazione per i video frattali. Il numero di raggi o assi di simmetria e la velocità di movimento determinano l'aspetto.
Risposta dell'IA	Testo generato da un sistema di intelligenza artificiale esterno. Deve essere sottoposto a un'accurata revisione linguistica e di precisione prima di essere memorizzato in BCS o trasmesso a un cliente.
Valutazione dell'IA / Analisi dell'IA	Un sistema di IA esterno aiuta a valutare i dati della scansione o del pacchetto. I dati passano tramite gli appunti; l'IA non accede direttamente a BCS. La responsabilità resta dell'utente.
cliente	Persona, animale, pianta o oggetto su cui vengono raccolti dati e con cui viene svolto un lavoro.
Immagine del cliente	Foto/immagini nella gestione clienti per una migliore assegnazione. Possono essere aggiunte tramite fotocamera, importazione o appunti.
Impostazioni cliente	Opzioni specifiche per il cliente, a seconda del prodotto e della licenza.
Gestione clienti	Area centrale per la creazione, la gestione e la selezione dei clienti. Base per il lavoro interfunzionale all'interno di BCS.
Trasmissione collettiva	Una funzione che rende disponibili pacchetti di contenuti in modo che possano essere inviati da più utenti. Il contenuto viene fornito collettivamente come un file MP3 illeggibile (rumore bianco); sono visibili una breve descrizione e, se applicabile, il nome del terapeuta/coach.
Menu contestuale	Un menu che offre funzioni aggiuntive in una riga/all'interno di un elemento (ad esempio, opzioni di esportazione per il pacchetto).
Breve descrizione	Breve testo nel sistema collettivo di classificazione di un pacchetto. Non deve contenere dati identificativi del cliente.

Termine	Significato / Uso
Conservato localmente	Nota: i dati dei clienti e le attività quotidiane del BCS vengono generalmente memorizzati localmente sul PC. Le funzioni online esplicitamente designate, come il recupero dal database o i set di prompt, utilizzano il server Bucher.
Non in elenco (YouTube)	La visibilità su YouTube si riferisce a un video che non è pubblicamente ricercabile o visualizzato sul canale, ma a cui chiunque può accedere tramite il link. Non è la stessa cosa di "privato".
pacchetto	Una raccolta di voci relative a un argomento, una sessione o una fase del trattamento. Supporta la definizione delle priorità, la pianificazione e la documentazione.
Copia pacchetto	Funzione per duplicare e sviluppare ulteriormente o modificare un pacchetto iniziale.
Trasferire pacchetti e ricalcolare l'intensità	Trasferisce i pacchetti a un cliente diverso ed esegue una nuova scansione dei parametri per adattarli al nuovo cliente.
Unisci i pacchetti	Una funzione per copiare più pacchetti iniziali in un unico pacchetto se riguardano lo stesso argomento. Migliora la chiarezza.
Intensità del pacchetto	Intensità della trasmissione nella pianificazione del pacchetto, spesso determinata dalle impostazioni predefinite di Broadcast.
Nome del pacchetto	Nome liberamente selezionabile per il riconoscimento e il monitoraggio dei progressi (ad esempio, Sessione 1, Sonno).
Tipo di pacchetto	Indica se il pacchetto deriva da una scansione iniziale o di follow-up.
Segnaposto (IA)	Etichette in un prompt personalizzato che vengono automaticamente sostituite con i dati provenienti da BCS quando il prompt viene generato, ad esempio età, focus, sintomi, lingua di output o risultati della scansione.
Prompt	Definizione del compito predisposta per un sistema di intelligenza artificiale. BCS offre prompt standard e prompt personalizzati; i segnaposto vengono riempiti con i dati del cliente designato e i dati di scansione durante la generazione.
Set di prompt	Raccolta di prompt personalizzati configurati. Dalla versione 6.24.1 di BCS in poi, un set di prompt può essere salvato e caricato solo dal server Bucher; non è possibile memorizzare i set di prompt localmente.
Visibilità del set di prompt	Determinare se un set di prompt memorizzato sul server Bucher è visibile solo all'utente o viene offerto anche ad altri clienti Bucher tramite la funzione "Carica set di prompt".
Rapid Transfer	Trasmissione rapida, utilizzata soprattutto per la preparazione di supporti informativi. Per la trasmissione diretta a un cliente presente, nella procedura descritta si utilizza una trasmissione più lenta.
oscillazione regolatoria	Termine interno del BCS per le informazioni di regolazione di un pacchetto che può essere inviato, trasferito a un supporto informativo o incorporato nella musica tramite Interblend. Il termine non si riferisce a un valore di laboratorio medico.
Remedy Pyramid	Scheda o funzione della gestione clienti, necessaria solo quando si utilizzano le Remedy Pyramids.

Termine	Significato / Uso
risonanza	Termine che indica l'"adeguatezza" di un approccio al cliente in un contesto energetico.
Analisi/scansione di risonanza	Un processo di analisi che individua le risonanze più forti per il cliente selezionato all'interno di specifici database. I risultati sono indicazioni/temi, non una diagnosi medica.
fattore di risonanza	Un valore guida per l'atmosfera generale di un pacchetto. Descritto nel manuale come la media dei valori di intensità.
Igiene del sonno	Organizzare la vita quotidiana e l'ambiente del sonno in modo da favorire un sonno sano e riposante. Ciò include, ad esempio, orari di sonno regolari, una stanza silenziosa e buia, una temperatura confortevole, esercizio fisico durante il giorno, una routine serale rilassante e un consumo moderato di caffeina, alcol, pasti abbondanti e utilizzo di dispositivi elettronici stimolanti la sera.
Invia/Report	Area in cui i pacchetti vengono archiviati, valutati, documentati e, a seconda della procedura, trasferiti/inviati o esportati. L'analisi (scansione) è volutamente separata dall'implementazione.
Fase di trasmissione	Intervallo di tempo durante il quale avviene la trasmissione (ad esempio, tutto il giorno, di giorno, di notte).
Programmazione delle trasmissioni	L'insieme dei parametri che definiscono l'inizio, la durata, il ritmo e l'intensità della trasmissione.
Trasmissione	Ora/stato che indica che un pacchetto è stato trasmesso (parte della visualizzazione della cronologia dei pacchetti).
Set di scansione	Combinazione memorizzata di database per scansioni ricorrenti. Un set di scansioni non deve essere confuso con un set di prompt per prompt personalizzati di IA.
Manutenzione del software	Il contratto prevede la fornitura di aggiornamenti periodici, nuove versioni del programma e modifiche tecniche al software Bucher. La formazione, la consulenza metodologica e la risoluzione dei problemi relativi a software di terze parti o hardware in generale non sono incluse automaticamente.
specie	Tipo di cliente (ad esempio, umano, cane, pianta, oggetto). Questo viene assegnato al cliente e, tra le altre cose, controlla la classificazione.
Prompt standard	Istruzioni fornite da BCS per valutazioni ricorrenti tramite IA, per esempio l'analisi dei singoli risultati della scansione, una raccomandazione per il cliente o affermazioni.
Categoria di partenza (Aura Coach)	Categoria scelta inizialmente in Aura Coach Focus Edition, per esempio Human, Fauna, Horse, Business o Place. Altre categorie possono essere aggiunte in base alla licenza e all'offerta.
Ora di inizio	Orario a partire dal quale la trasmissione dovrebbe avere inizio (parte della pianificazione delle trasmissioni).
Tweak	Salvataggio di una trasmissione come Tweak, disponibile solo per le scansioni iniziali e utile con TweakLite.
TweakLite	Hardware per luce colorata che utilizza le funzioni Tweak.
trasmissione	Fase di implementazione/trasmissione (ad esempio, invio/rapporti, supporti informativi).

Termine	Significato / Uso
Promemoria di rinnovo	Funzione di marcatura/pianificazione per estendere o ricontrollare un pacchetto in un secondo momento.
Finestra di benvenuto	Finestra di avvio/panoramica, tramite la quale è possibile accedere, tra le altre cose, a clienti, database o modifiche ai prodotti.
Indietro	Pulsante di navigazione per tornare alla finestra principale dalle finestre di dettaglio.
Appunti (IA)	Percorso di trasferimento tra BCS e un sistema di intelligenza artificiale esterno. BCS copia il prompt preparato negli appunti; la risposta dell'IA convalidata viene quindi ritrasferita a BCS tramite lo stesso percorso.
Ciclo / Ciclo di scansione	Una serie coerente composta da una scansione iniziale e da tutte le scansioni di controllo o di follow-up associate. Una nuova scansione iniziale dà inizio a un nuovo ciclo.

6 Contatti e supporto

panoramica

Questo capitolo spiega a chi rivolgersi in caso di domande. Per domande relative ai contenuti dell'applicazione, è generalmente necessario contattare il proprio referente Bucher (partner di assistenza BCS). Per domande di natura tecnica e per segnalare malfunzionamenti, si prega di contattare Bucher GmbH.

Domande relative ai contenuti dell'applicazione

Per domande relative a procedure, contenuti formativi, esempi pratici e flussi di lavoro relativi ai prodotti, si prega di contattare il proprio rappresentante Bucher (partner di assistenza BCS). Quest'ultimo conosce il vostro sistema, la vostra situazione di licenza e la vostra applicazione tipica.

Domande tecniche e malfunzionamenti

Per problemi di installazione, attivazione, messaggi di errore, problemi relativi al database e problemi di aggiornamento, si prega di contattare Bucher GmbH.

Contatto (Bucher GmbH)

Telefono: +49 7174 7400 (lun-ven 11:00-16:00)

E-mail: support@buchergmbh.de

Suggerimento pratico

Quando si inviano richieste di assistenza tecnica, si prega di indicare la versione del software, l'architettura (32/64 bit) e una breve descrizione dell'errore. Questo velocizzerà la risoluzione del problema.

FAQ

Che cos'è un partner di servizi BCS?

È il tuo referente commerciale e il punto di contatto per domande sull'utilizzo, istruzioni e formazione.

Di cosa si occupa Bucher GmbH?

Per domande tecniche, malfunzionamenti, installazione, attivazione e aggiornamenti.